



DENT.

歯科医院様向資料

LION

歯科用

DENT. EX

強すぎる力で歯や歯ぐきを傷めないために

オーバースラッシングケア

“カチッ!”と音でお知らせ。
オーバースラッシングの
改善をサポート。



患者様の磨き方が
改善されない。
癖が抜けない。
教えてもその場限り。

TBIの時間が
足りない。

磨き方を
上手く説明
できない。

オーバースラッシングの改善指導、悩んでいませんか？

オーバースラッシングの 患者様に対する TBI方法

(上位5項目)

患者様の口腔内を
術者磨きで実感して
もらい指導する **87.2%**

患者様に
歯ブラシを持たせて
指導する **77.5%**

口頭で
アドバイスする **53.1%**

顎模型などを使って
ブラッシングの
仕方を見せる **35.0%**

その他 **2.3%**

オーバースラッシングの 患者様に対する TBI時の注意点

(上位5項目)

歯ブラシへの
ちから加減 **96.5%**

歯ブラシの
動かし方 **88.9%**


歯ブラシの
持ち方 **83.2%**

歯ブラシの
当て方 **82.3%**

歯ブラシの
選び方 **58.9%**

自分のオーバースラッシング改善指導内容に 対する満足度

約**68%**の方が
満足されていない

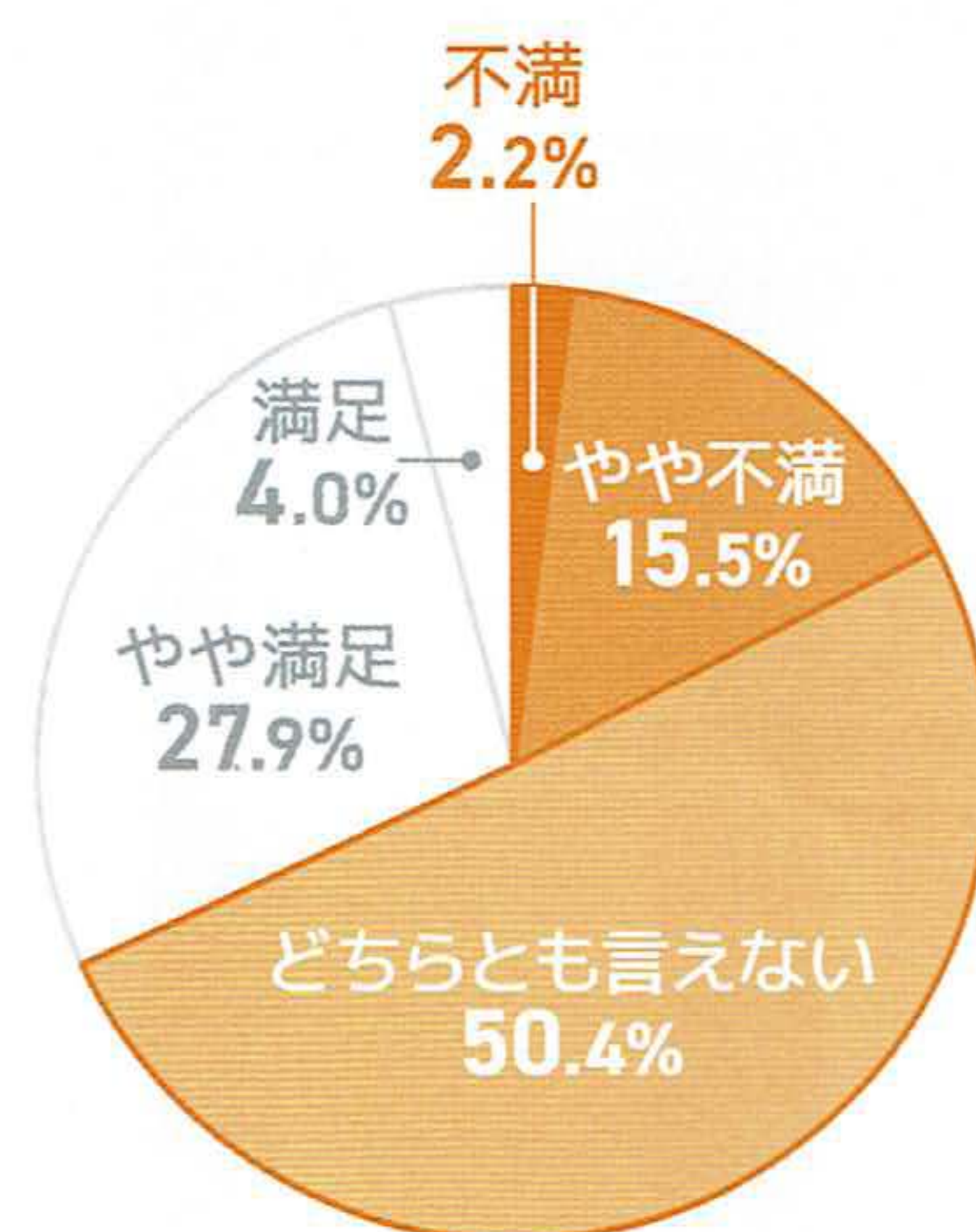

力の入れすぎを、音でお知らせする歯ブラシです。


歯みがき時の力の入れすぎを、しなるハンドルと“音”で適切なブラッシング圧へ導きます。先端厚2.6mmの超薄型ヘッドで、最後臼歯部まで無理なく楽に毛先が届き、歯垢を落とします。オーバーブラッシングの改善におすすめです。



しなるハンドルが力を調整

磨く力が強すぎる人も、力の入れすぎが音で分かり、適切なブラッシング圧に導きます。

●使用テストによるブラッシング圧測定結果(N=7 平均)

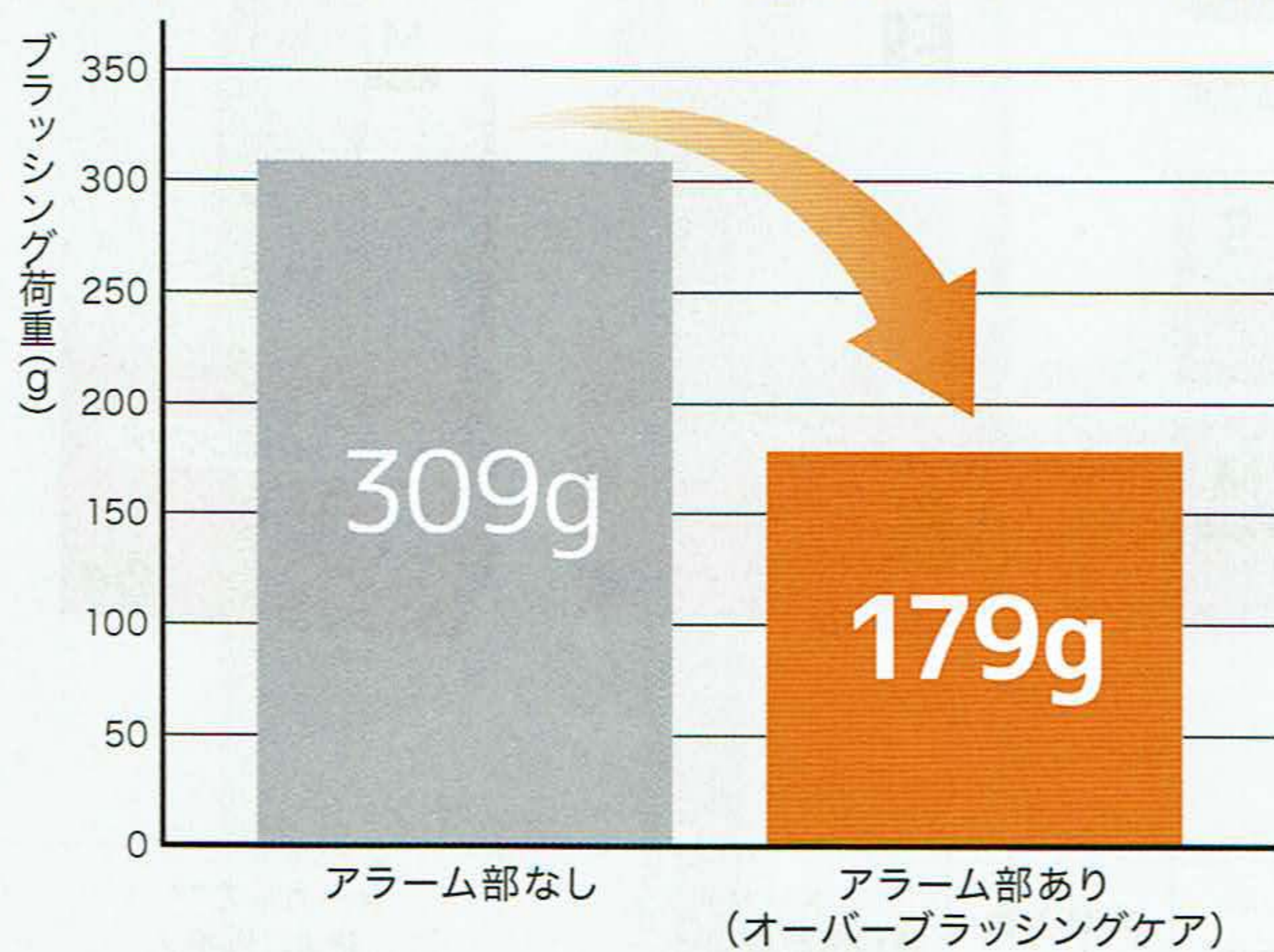

ヘッド部: オーバーブラッシングケアと同一 ※ライオン調べ

超薄型ヘッドが奥まで届く

先端厚2.6mmの超薄型ヘッドで、最後臼歯部まで無理なく楽に毛先が届きます。

2.6mm



ラウンド毛でプラークもしっかりケア


●歯垢除去力の比較



※Slimhead II 33Mを100とした場合の指数 モデル歯垢(プラーク)除去力評価(上顎第一大臼歯の全体) 荷重:200g ※ライオン調べ


ライオン歯科材 歯科衛生士からのワンポイントアドバイス

オーバーブラッシングになってしまう患者様の中には、力を入れれば早くプラークが落とせると思いこんでいる方も多くいます。そのような患者様には、①「歯ブラシで一番汚れが落とせる部分は毛先であること」②「毛先を上手く使うためには適切な力でブラッシングすることが重要であること」を伝え、ブラッシング圧を改善するようにお話しください。

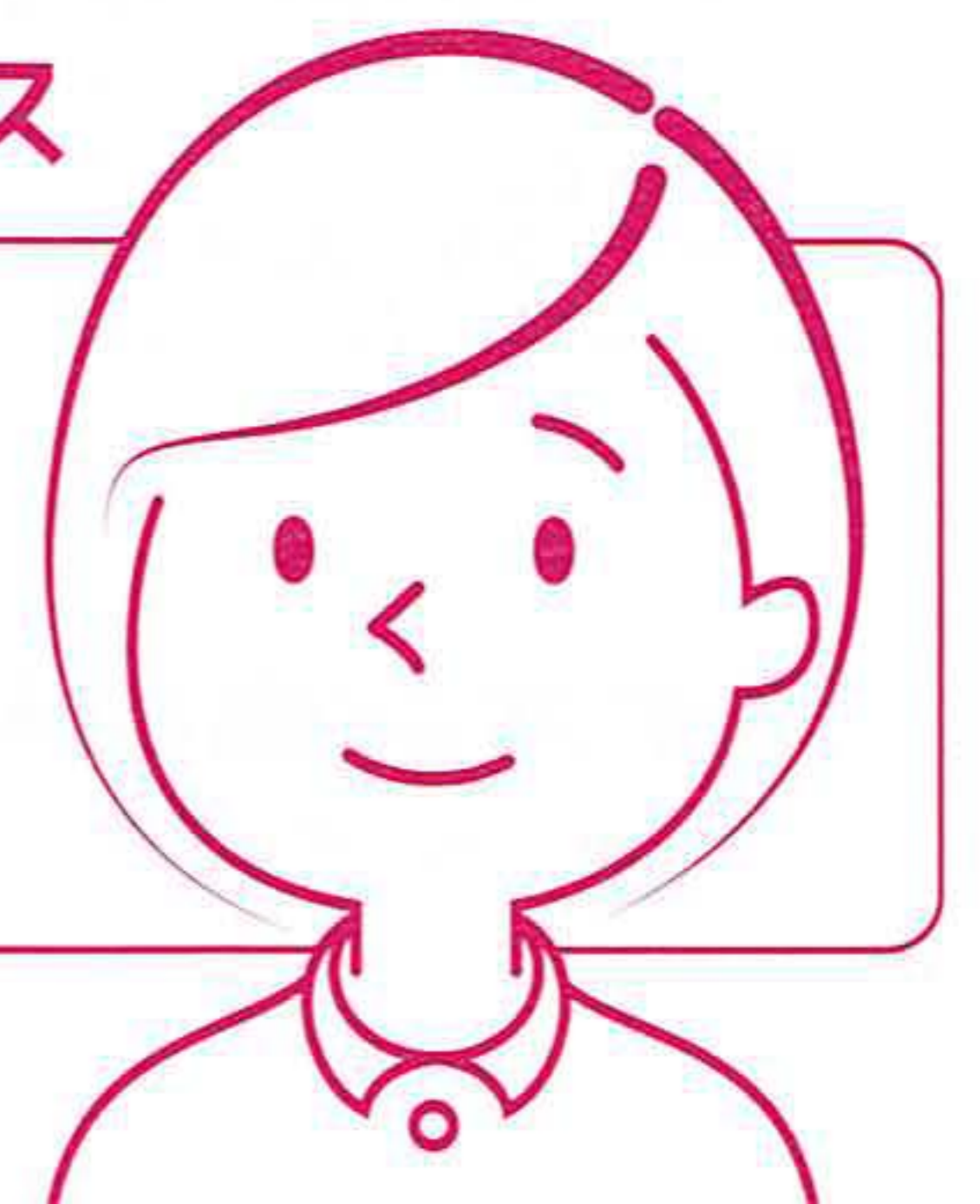

こんな患者様におすすめです

磨くときに力を入れがちな方

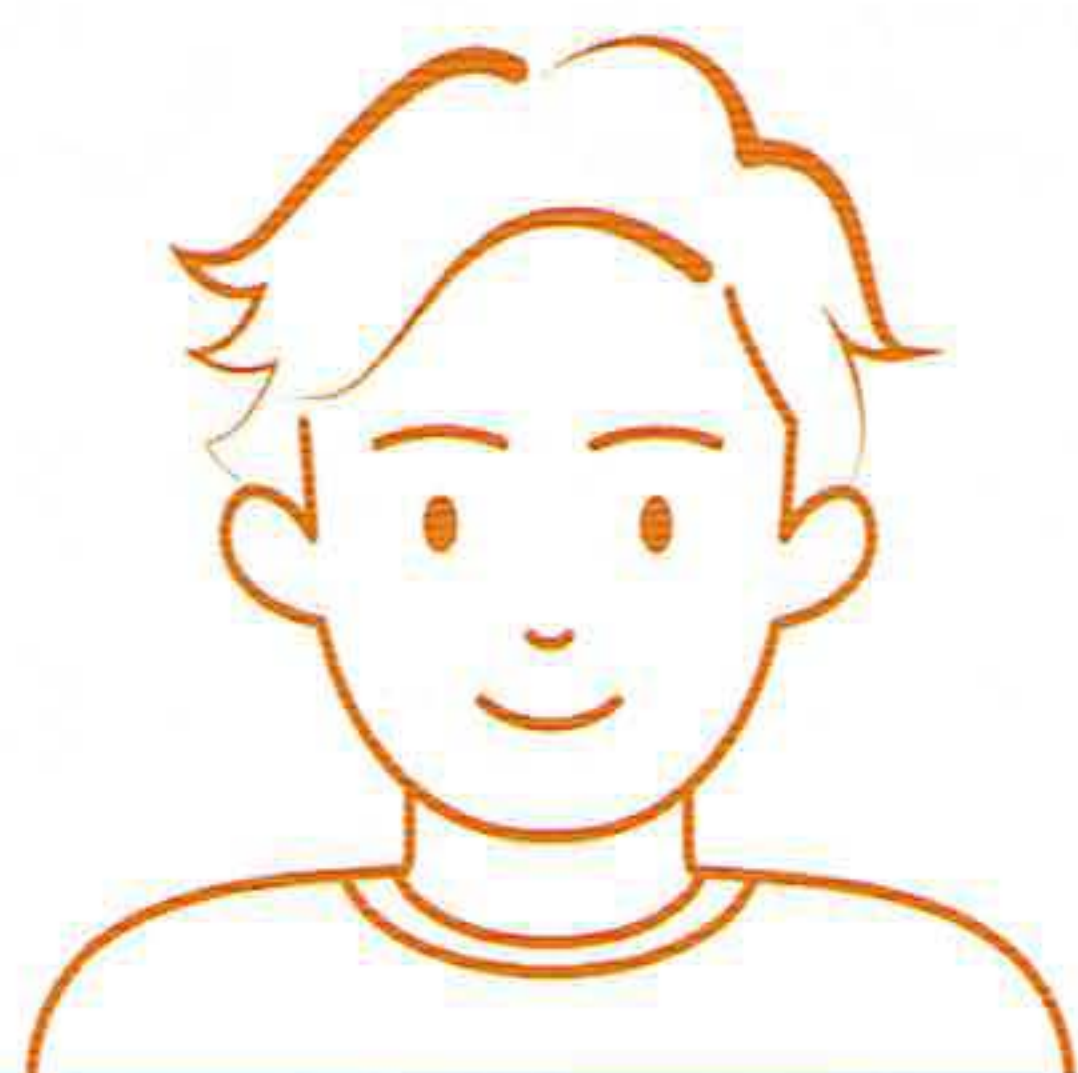

歯肉退縮が気になる方



知覚過敏が気になる方



使い方

ハンドルアラーム部より下を持って、音が鳴らないよう力を抜いて磨いてください。




- ペングリップがおすすめです。
- 歯ブラシの毛先が開かない程度の軽い力で、小刻みに動かしましょう。
- 商品の使い方動画は ▶▶▶




注意点

アラーム部やアラーム部より先を持たない。

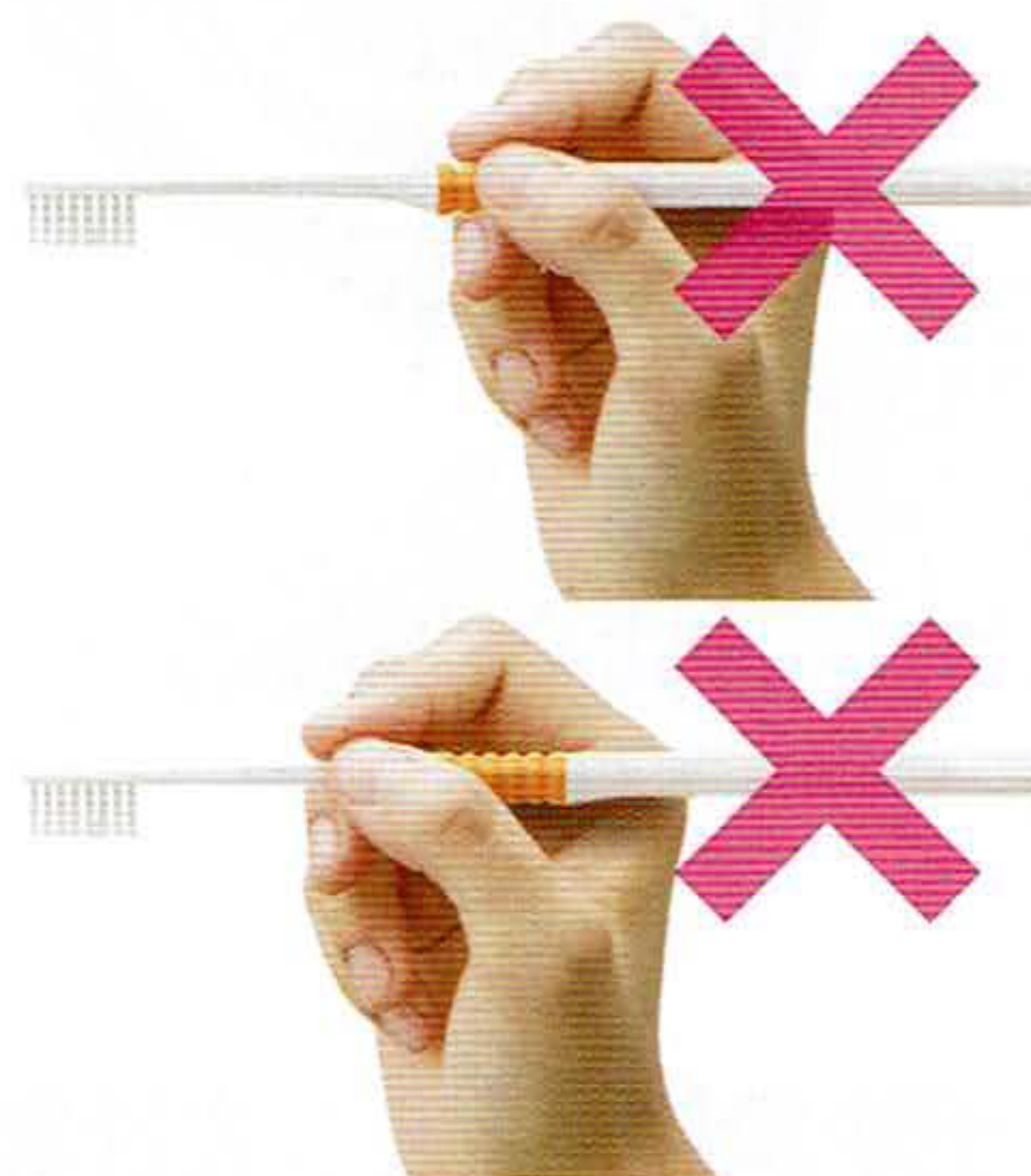


音が鳴りません。

カチッと音が鳴った、歯ブラシがしなった状態のままで磨かない。

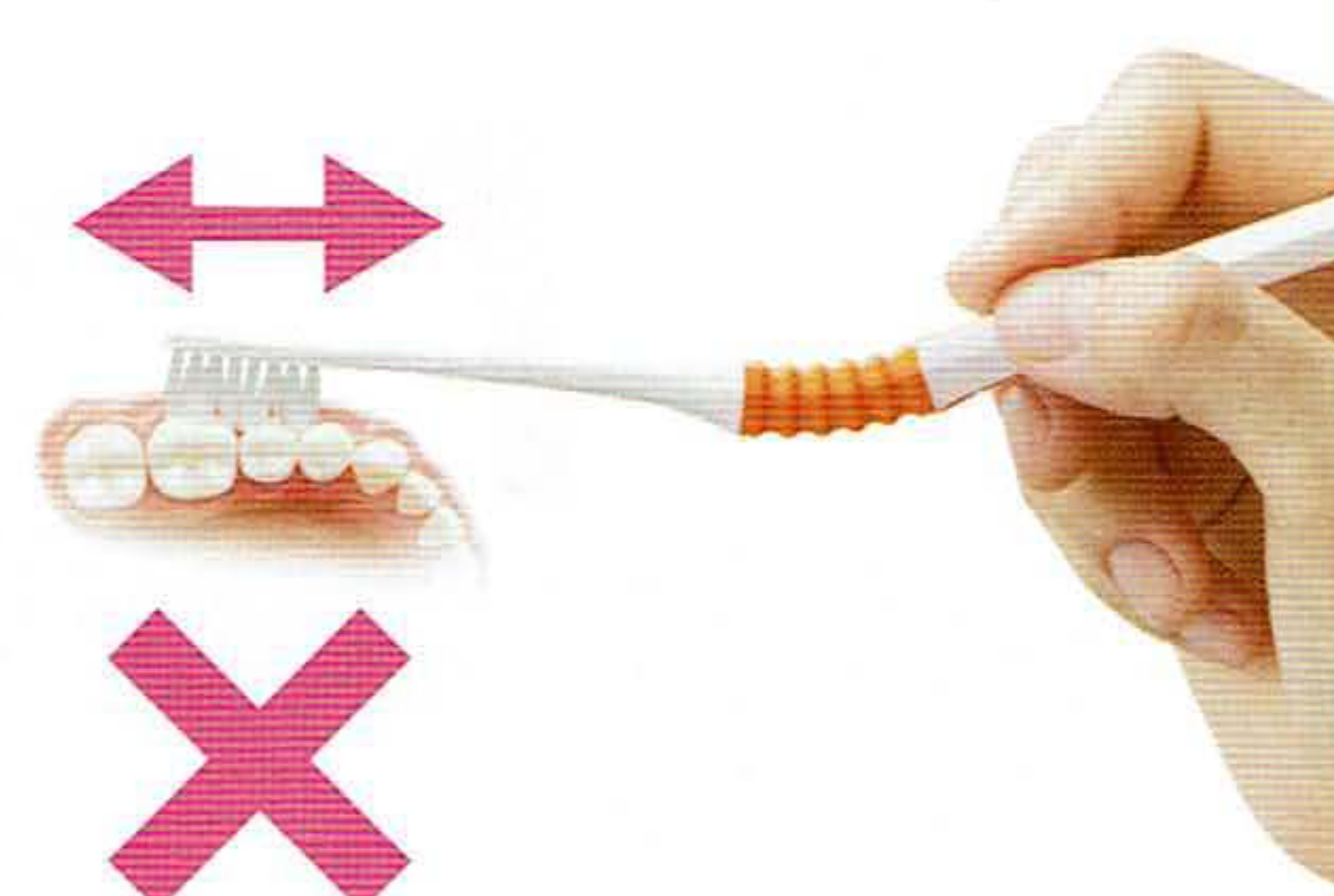

音がなったら力を抜いて、しなりを戻して磨いてください。

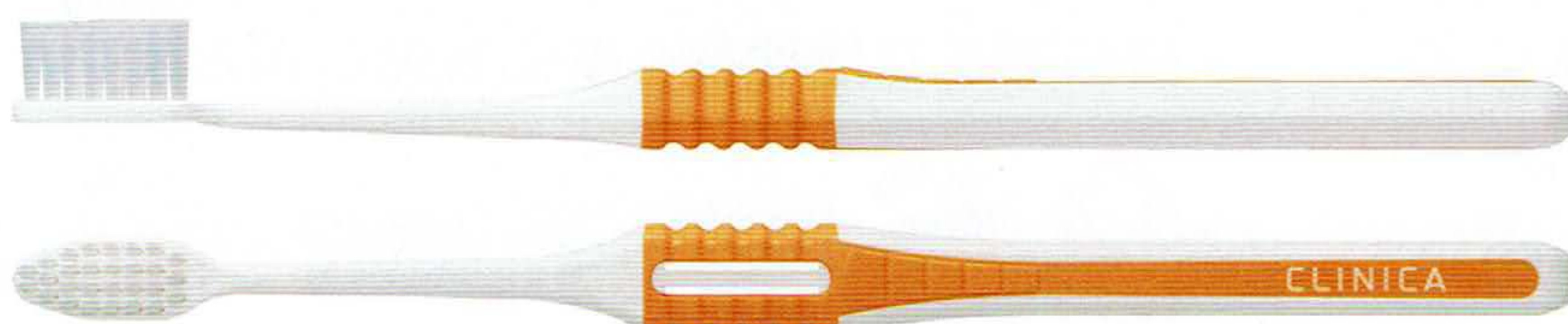

本商品はクリニカとの共同開発品です



DENT.EX オーバーブラッシングケア

商品名	歯ブラシ全長 (mm)	ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大)	用毛		内装入数	メーカー希望 歯科医院様向け価格/個	メーカー希望 患者様向け価格/個
			長さ(mm)	太さ(mm)			
DENT.EX オーバーブラッシングケア S	185		9.3	0.14	12個 (1色×12個)	250円	300円
DENT.EX オーバーブラッシングケア M			9.3	0.19			

※色はオレンジのみ ※価格には、消費税は含まれておりません。

ライオン歯科材株式会社

〒130-8644 東京都墨田区本所 1-3-7 TEL.03(3621)6183

ライオン歯科材

<https://www.lion-dent.com/>

株式会社モリタ

