

JMS

人と医療のあいだに…

舌圧トレーニング機器

ペコピーな



Orarize
オーラライズ


舌圧トレーニングゲーム対応



ペコジーなは、舌のチカラを鍛え続けたいくなる！

■ ノーマルモード

表示画面を見ながら、舌のトレーニングを行います。

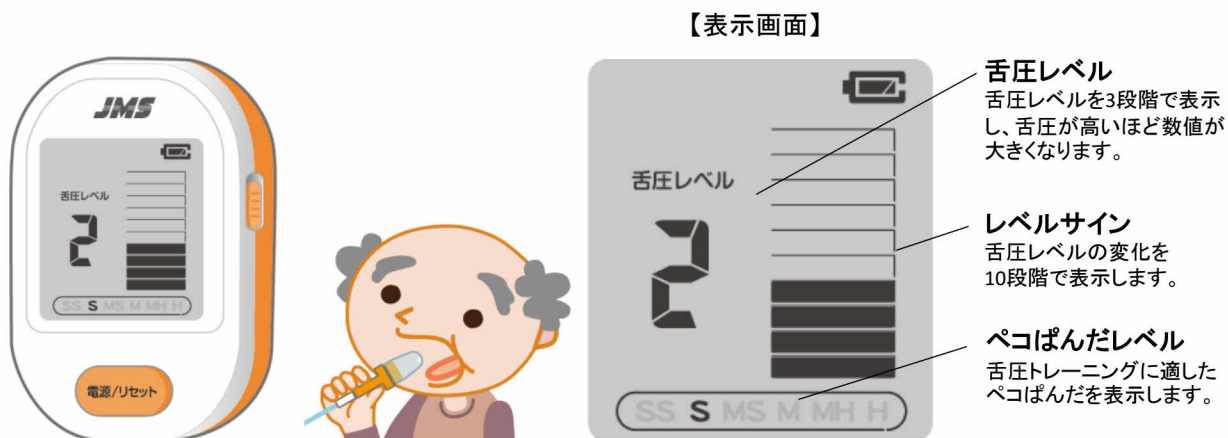

トレーニングメニュー①舌の筋力アップ

目標レベル*1

- ・舌圧レベル=3
- ・ペコぱんだレベル=H



しっかり 舌圧プローブを押し潰す！

7 秒間 × 3 セット

*1) 目標レベルは個人によって異なります。最大のチカラで潰せるところで7秒間押し潰し続けて下さい。

トレーニングメニュー②舌の筋持久力アップ

目標レベル*2

- ・舌圧レベル=2
- ・ペコぱんだレベル=S




ゆっくり 舌圧プローブを押し潰す！

10 回 × 3 セット

*2) 目標レベルは個人によって異なります。無理のないチカラで潰せるレベルで押し潰して下さい。

口腔機能向上をサポートするデバイスです。

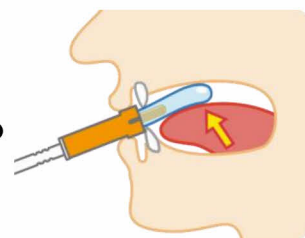

■ ゲームモード

専用アプリで遊びながら、舌のトレーニングを行います。



App Store
からダウンロード


Google Play
で手に入れよう

*Appleロゴ、App Storeは、米国その他の国や地域で登録されたApple Inc.の商標です。
*Android、Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。



- ・ペコジーな舌圧プローブを押し潰すと 下駄が飛んでいきます。
- ・成績順のランキングを表示します。

筋力
アップ

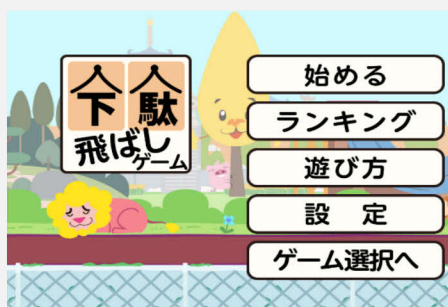

- ・ペコジーな舌圧プローブを押し潰すと、「アジ」、「カツオ」、「タイ」の3種類の釣りが楽しめます。
- ・制限時間を設定してトレーニングすることができます。
- ・成績順のランキングを表示します。

筋持久力
アップ






基本操作方法

各部位を接続して電源を入れる

バルーンを口に入れる

バルーンを押し潰す

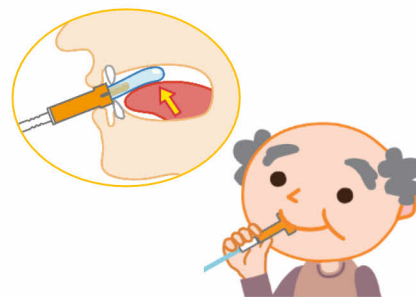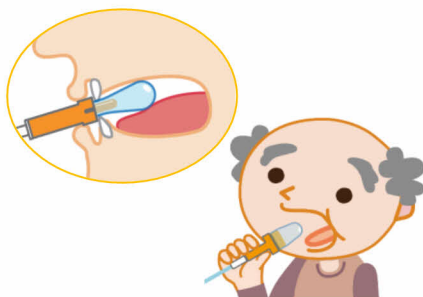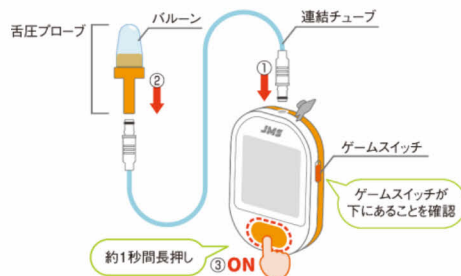

規格一覧



ペコジーな スターターキット

- 入数 1セット/箱
- 定価 31,500円/箱(税抜)
- 内容 ペコジーな 本体
1台、舌圧プローブ 3本、
連結チューブ1本、単四形
アルカリ乾電池 2本、巾着
袋 1袋、取扱説明書 1部、
クイックマニュアル 1部



ペコジーな 舌圧プローブ

- 入数 10本/箱
- 定価 3,150円/箱(税抜)



ペコジーな 連結チューブ

- 入数 5本/箱
- 定価 6,300円/箱(税抜)

注) 本品は、医療機器ではありません

仕様一覧

型式	PCG-02	
使用電源	単四形アルカリ乾電池 × 2	
連続使用時間	約16時間（新品の乾電池を使用した場合）	
寸法	74(W) × 118(L) × 28(H)mm	
表示機能	舌圧レベル	1、2、3
	ペコぱんだレベル	SS、S、MS、M、MH、H
	レベルサイン	バーグラフ
通信	Bluetooth® Ver.4.1 (Bluetooth Low Energy) WSP	
付属品	舌圧プローブ 3本 連結チューブ 1本 乾電池(単四形アルカリ乾電池 × 2) 1セット 収納ケース(巾着袋) 1袋 取扱説明書 品質保証書付 1部 クイックマニュアル 1部	
オプション	舌トレアプリ	

* 仕様及び外観は改良の為、予告なく変更することがあります。* 掲載情報と価格は、2024年7月現在のものです。

専用アプリ(無料)

アプリ名	舌トレアプリ
対応OS	iOS(11,12,13,14,15,16,17) / Android(8,9,10,11,12,13,14)
言語	日本語
容量	90.7MB(iOS) / 70MB(Android)

* OS対応状況の最新情報は、<https://pecogina.jms.cc> をご覧ください。



ペコジーな特設サイトはこちら
<https://pecogina.jms.cc>

お問合せ先

販売業者
株式会社ジェイ・エム・エス
広島市中区加古町12番17号

カスタマーサポートセンター

 0120-923-107