



歯科医院様向資料

LION

歯科用

どの部位にも当てやすく、優れたプラーク除去効果を発揮

Check-Up 歯ブラシ

磨きにくい所にしっかり届く

STANDARD タイプ

幅広ヘッドで効率よく磨ける

WIDE タイプ



2025年
5月21日
WIDEタイプ
新登場

W フラット
ダブル植毛TM

- ← フラット
- ラウンド毛
- スーパーテーパー毛

3分でわかる製品紹介動画




Wフラット ダブル植毛™

ラウンド毛とスーパーテーパード毛のダブル植毛が
歯面・咬合面、歯間部・歯頸部、さらに臼歯部まで届き、
優れたプラーク除去効果を発揮します。

ラウンド毛

毛先を丸めたラウンド加工毛は、しっかりした
ブラッシングが可能です。歯面や咬合面のプラーク
除去に効果的です。

歯面・咬合面 ○ 歯間部 △

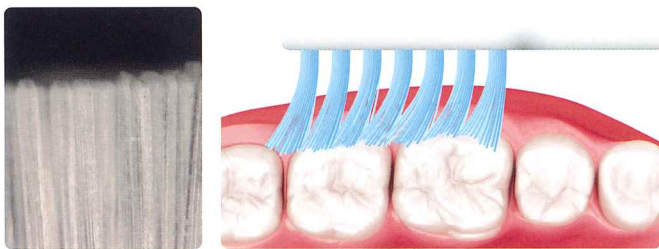


イメージイラスト

スーパーテーパード毛

先端部0.01mmの先端極細毛は、歯肉へのストレスが
少なく、やさしい磨き心地です。狭い歯間部や歯頸部
にも毛先が到達します。

歯面・咬合面 △ 歯間部 ○

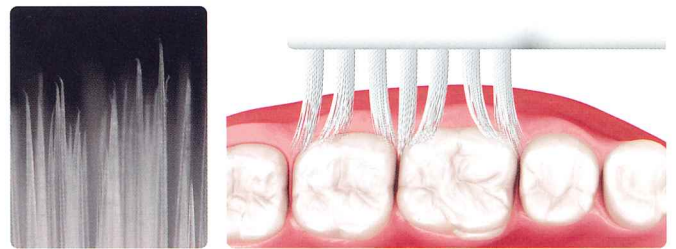


イメージイラスト


フラット ダブル植毛

あらゆる部位に毛先が届き、優れたプラーク除去効果

毛束の間隔を少し空け、毛先面を揃え「フラット」に植毛することで、それぞれの
毛束が動きやすく、歯間部や歯頸部に入り込みやすくなります。

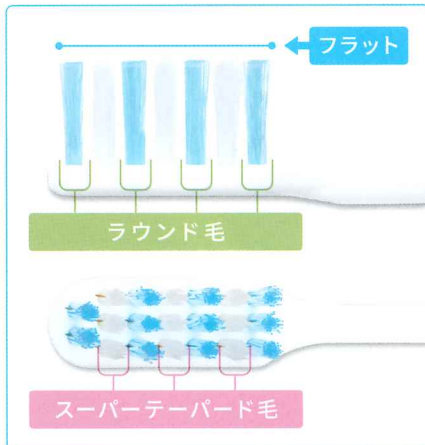


少し空けた毛束の間隔

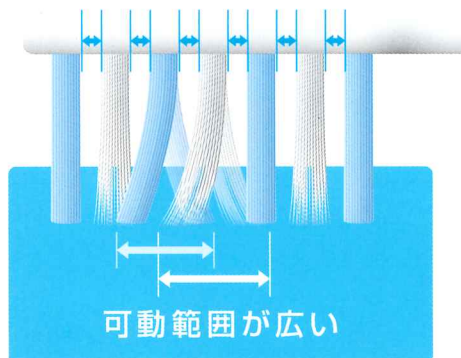

イメージイラスト



歯面・咬合面 ○ 歯間部 ○

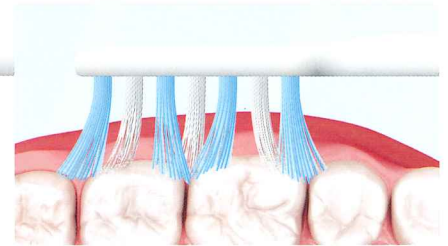

イメージイラスト

スーパーテーパード毛、
ラウンド毛共に効果を発揮

モデルプラーク除去試験の結果

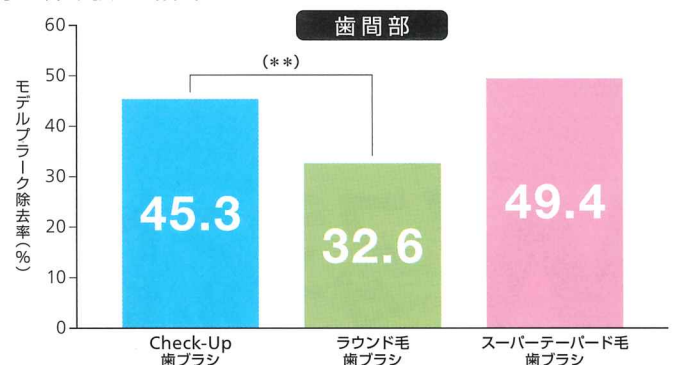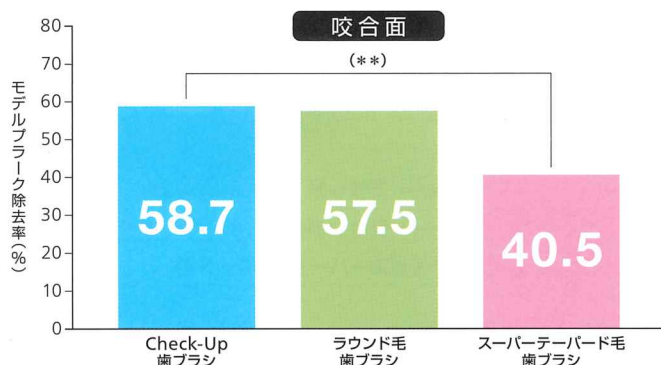

Tukey-Kramer 検定: (**) $p < 0.01$, $n = 5$ ラウンド毛歯ブラシ・スーパーテーパード毛歯ブラシ: Check-Up歯ブラシハンドルにそれぞれの毛のみを植えた歯ブラシ

優れた操作性

薄型ヘッド+スリムネックで臼歯部まで届きやすく、滑りにくいラバーハンドルで使いやすい。



薄型ヘッド+スリムネックの高い到達性

ヘッド部3mm・ネック部4mmの厚さ、ヘッド部+ネック部を75mmの長さにする事で、臼歯部にも届きやすい高い操作性を実現しました。



臼歯部(7・8番)にアクセスしやすい



スリムロングネック

植毛長=約2cmの理由



フッ化物配合歯磨剤の15歳以上の使用量の目安(=2cm)を簡単に測ることができます。

選べる2つの毛の硬さ

お口の状況や、お好みの使用感に合わせて2つのタイプをお選びいただけます。



やわらかめで優しい磨き心地



しっかりプラークをかきとる。磨き残しが多い方に。




両面についた「滑り止め」

持ちやすく滑りにくいラバーハンドル


ペングリップでもパームグリップでも持ちやすく、高い操作性を発揮します。

STANDARDタイプ S・M

スリムな薄型ヘッドが歯面・咬合面、
歯間部・歯頸部、さらに臼歯部まで届き、
優れたプラーク除去効果を発揮します。

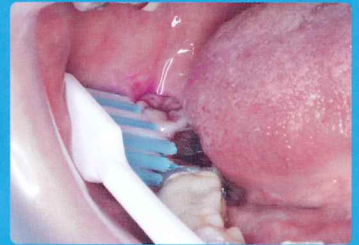

資料提供 静岡県沼津市 塚本歯科クリニック 鈴木亜紀 歯科衛生士

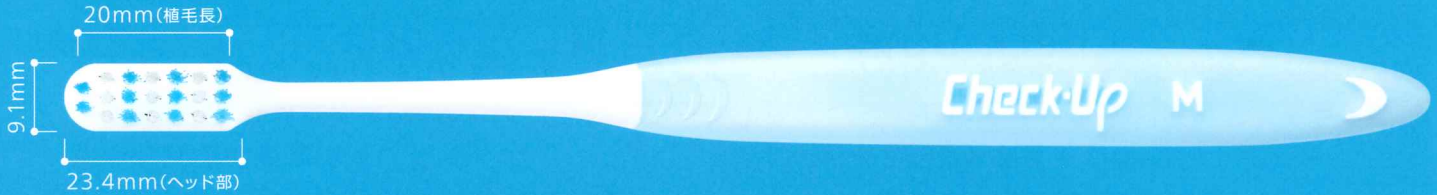

清掃力比較	歯間部のモデル清掃力 n=5	咬合面のモデル清掃力 n=3	ヘッド+ネック樹脂部分の体積比較
Check-Up歯ブラシ STANDARDタイプ M	129% 歯間部の清掃力に優れる	103% 同等の清掃力	70.1% コンパクト
SlimheadⅡ33M (ラウンド毛歯ブラシ)	100% 1%有意差	100% 1%有意差	100%

顎模型下顎左第一大臼歯にモデル歯垢を塗布し、刷掃後の歯垢が除去された比率を画像解析で算出。荷重:200g 刷掃回数:10回 ※SlimheadⅡ33Mを100とした場合の指数

WIDEタイプ S・M

幅広ヘッドで、歯面から歯頸部・歯肉まで、
効率よくブラッシングが可能です。



STANDARDタイプ

WIDEタイプ

資料提供 北海道札幌市 北24条かやの歯科クリニック 萱野美帆 歯科衛生士



清掃力比較	歯間部のモデル清掃力 n=5	咬合面のモデル清掃力 n=3	ヘッド+ネック樹脂部分の体積比較
Check-Up歯ブラシ WIDEタイプ S	204% 歯間部の清掃力に優れる	215% 咬合面の清掃力に優れる	59.5% コンパクト
DENT.EX systema genki f (スーパーテーパード毛歯ブラシ)	100% 1%有意差	100% 1%有意差	100%

顎模型下顎左第一大臼歯にモデル歯垢を塗布し、刷掃後の歯垢が除去された比率を画像解析で算出。荷重:300g 刷掃回数:20回 ※DENT.EX systema genki fを100とした場合の指数



Check-Up 歯ブラシ

Check-Up歯ブラシが目指したものは

う蝕リスク部位の
高い清掃力と磨きやすさ

ブラッシングテクニックに頼らずに
誰でも簡単に使いこなせること

今までは歯間部・咬合面など部位ごとに分けて、
各々に特化した用毛を選択、植毛した歯ブラシをご用意してまいりました。

Check-Up歯ブラシは発想を変え、
歯間部と咬合面の清掃に適した2種類の用毛を、フラットにダブルで植毛。
薄型ヘッドとゆるやかなカーブのスリムネックでどの部位にも当てやすく、
これ1本でリスク部位にしっかりとアプローチでき、優れたプラーク除去効果を発揮します。

こんな患者様におすすめです

歯間部の
磨き残しが多い方

歯間清掃用具との
併用が難しい方

子供用歯ブラシから
卒業するお子さまに

初めて歯科医院でTBIを受ける方に、
歯科医院で薦める「最初の1本」としてご活用下さい。



歯ブラシ select MAP

歯肉のケア重視

Systema SP-T
歯周病安定期のセルフケアに

歯周ケア

systema genki
コンパクトヘッド歯ブラシでは
上手く磨けない方の幅広ヘッド

Systema
歯肉にやさしく
歯周ケア

Systema AX
超薄型ヘッドで口腔内
すみすみまで毛先が届く

スーパー
テーパード毛

歯垢除去力重視

Check-Up歯ブラシ
WIDEタイプ
幅広ヘッドで効率よく磨ける

Check-Up歯ブラシ
STANDARDタイプ
磨きにくい所にしっかり届く

DENT.MAXIMA
超薄型ヘッドで
最後臼歯部まで
しっかりケア

ラウンド毛

幅広ヘッド

う蝕ケア

超薄型ヘッド・
コンパクトヘッド

低 ブラッシングスキル 高

Check-Upの使い方 ⑤ Step

1 歯磨剤を適量のせる (2cm程度)*1

2 軽い力で 小刻みな往復運動でみがく

3 ブラッシング後、吐き出す

4 すすぎの水約15ml(大さじ1)を入れる

5 約5秒間、1回口をすすぐ

*1 Check-Up歯ブラシは植毛部長さ約2cm

■仕様・入数・価格

品 名		Check-Up歯ブラシ STANDARDタイプ				Check-Up歯ブラシ WIDEタイプ			
種 類		S		M		S		M	
ヘッド部	大きさ・植毛配列(実物大)								
用 毛	毛先	スーパー テーパーボード	ラウンド	スーパー テーパーボード	ラウンド	スーパー テーパーボード	ラウンド	スーパー テーパーボード	ラウンド
	長さ(mm)	10.5*2	10.0	10.5*2	10.0	10.5*2	10.0	10.5*2	10.0
	太さ(mm)	0.17(根元)*3	0.18	0.18(根元)*3	0.20	0.17(根元)*3	0.18	0.18(根元)*3	0.20
歯ブラシ全長(mm)		180				180			
カラー									
内装入数		12個(3色×4個)				12個(3色×4個)			
メーカー希望歯科医院様向け価格/個		265円				300円			
メーカー希望患者様向け価格/個		320円				360円			
商品写真									
									

*2 実測平均値 *3 スーパーテープード毛のため ※価格には、消費税は含まれておりません。