

歯科専売品

Philips Sonicare 6100 Professional

フィリップス ソニックアー 6100 プロフェッショナル

使用例集

セルフケア指導で
困った時
頼れるアイテムの一つ!



繰り返し指導してもプラークコントロールが上がらない患者さん
どのように指導されますか?



Case1



ワイヤー矯正中

ブラケットやパワーチェーン周囲の
ブラシが届きにくい部位

Case2



アライナー矯正中

歯間部やアタッチメント周囲の
落ちにくいプラーク

Case3



高いカリエスリスク

肥厚なプラークが
全顎に付着

Case4



歯列不正

予防意識が高く
磨き過ぎのためクレフト発症



兵庫県神戸市
THINK DENT 代表
歯科衛生士 萬田 久美子さん

私のお気に入り
ポイント!

患者さんへの
メリット!

これまで重さがネックで電動歯ブラシの使用を中断する患者さんが
いらっしゃいました。

「ソニックアー 6100プロフェッショナル」はパワーや性能は維持・向上
させながら、従来より軽くコンパクトに進化しています。

MERIT
01

軽量・コンパクト

MERIT
02

狭い頬粘膜部や矯正治療中など、圧がかかる状況でもパワーが安定

MERIT
03

1回の充電で約3週間使用可能

Interview

音波式電動歯ブラシをお使いいただき、良好なブラークコントロールを維持できていたにもかかわらず、「重くて耐えられない」と、途中で
断念してしまう患者さんは、お年寄りに限らず、矯正治療を開始した学生さんなどにも意外にいらっしゃいます。

「ソニックアー 6100プロフェッショナル」は、とにかく軽くコンパクトなので、そうした心配もおそらく軽減されるでしょう。

カバンの中にしのばせて持ち歩くこともできそうですし、1回の充電でより長く使用できるようになったことも嬉しい改良点です。

さらに、矯正治療中に頬粘膜と矯正装置で狭くなった臼歯部頬側部分にアプローチする際にも、これまで以上に安定したパワーで
刷掃力を維持してくれます。

使用例

Case1: ワイヤー矯正中の患者さん

01

使用前



22歳女性。ラウンド毛の手用ブラシを使用。
ブラケット周囲は「歯間ブラシ」を縦に挿入して
ブラークコントロールを行っているが、隣接面に
ブラークが付着している。特にパワーチェーンが装
着されている部位はブラシの毛が到達しにくく、
ブラークが肥厚している。

02

使用中



同梱されている3本の替ブラシのうち、「ジェントル
プラスブラシ」を選択。毛先が軟らかいためパワー
チェーンやブラケットに負担をかけることなく
ブラークコントロールが行える。本体が軽いため、
ブラシの持ち手を不用意に強く持つことがなく、
歯面に対して軽い力で当てることができる。

03

使用后



隣接面やブラケット周囲の細部までブラークが
除去できていることが確認できる。

Case2: アライナー矯正中の患者さん

01

使用前



31歳女性。アタッチメント周囲や隣接面にブラーク
が付着していることが確認できる。レジン製のア
タッチメントはブラークが付着しやすく、除去しにく
い傾向がある。

02

使用中



替ブラシには、「プレミアムオールインワンブラシ」
を選択。矯正中に生じるコンタクトのわずかなス
ペースにも毛足の長い部分が入り込み、効率的に
ブラークを除去できている。

03

使用后



歯間部やアタッチメントの周囲のわずかな段差に
付着したブラークもキレイに除去できていること
が確認できる。

除去の様子を動画でご覧
いただけます。





北海道札幌市
医療法人社団 成瀬会 北24条かやの歯科クリニック
歯科衛生士 荻野 美帆 さん

私のお気に入り
ポイント！

患者さんへの
メリット！

高性能+コンパクトになって、さらに3種類の替ブラシが付いてくるというコストパフォーマンスの高さに何より驚きました。また、過圧防止のお知らせ機能がよりわかりやすく改良され、オーバーブラッシング傾向の患者さんに好評です。

MERIT
01

コストパフォーマンスが高く、3種類の替ブラシが付属

MERIT
02

過圧防止センサーのライトリングがよりわかりやすく改良された

MERIT
03

替ブラシに合わせたモード選択を自動で行ってくれる

Interview

「ソニックアー」はブラシヘッドのネック部分が細くて長いので、特に臼歯部への到達性が高いうえ、替ブラシの選択肢が多彩で患者さんの口腔内に合わせた指導ができることから、セルフケアグッズとして高く評価していました。

新発売となった「ソニックアー 6100プロフェッショナル」は、従来のメリットはそのままに、軽量化やパワーの安定化が図られ、さらに使い勝手が良くなりました。

当院の場合、Case2に見られるような、予防意識が高いがゆえに磨き過ぎてしまう患者さんも多くいらっしゃるのので、オーバーブラッシングを知らせてくれるライトがより目立つようにリニューアルされたことは、大きな朗報です。

使用例

Case1：カリエスリスクが高い患者さん

01

使用前



39歳男性。カリエスリスクが高く実質欠損が多数あり、上下顎前歯部に歯列不正が認められる。普段仕事が忙しく、ブラッシングになかなか時間を割けないとのこと。染色してみると、肥厚なプラークが全顎的に確認できる。

02

使用中



同梱されている3本の替ブラシのうち、「プレミアムオールインワンブラシ」を選択。

03

使用后



「ソニックアー 6100」使用から1か月後。手用歯ブラシでは磨けなかった歯間部、Ce、CR辺縁などプラークの残量が減少したのが確認できる。

Case2：歯列の狭窄など歯列不正が認められる患者さん

01

使用前



45歳女性。OHは良好。歯列が狭窄しており歯列不正が認められる。強すぎる歯磨圧が原因で歯肉退縮と「ア」にクレフトが認められる。予防意識が強く、ブラッシングのモチベーションが高いがゆえに歯磨圧のコントロールの指導が必要と感じた。

02

使用中①



替ブラシには「プレミアムオールインワンブラシ」を選択。歯列不正部位やクレフトが認められた「ア」にも毛束がしっかり届いているのが確認できる。

03

使用中②



オーバーブラッシングが気になる「ア」も、過圧防止センサーのライトリングが鮮やかな光で点滅するので、患者さんからも「磨き過ぎが目で見え気付きやすい」と好評。

9/22
新発売

歯科専売品

フィリップス ソニッケアー 6100 プロフェッショナル

型番：HX7408/07

付属品


- プレミアムオールインワン 1本
- プレミアムガムケア 1本
- ジェントルプラス 1本
- USB充電 ※ACアダプター別

充電方式

- 充電式
- 24時間充電
- 約3週間使用可能
(1日2回、1回2分間使用の場合)

Check Point

- ✓ 2モード(クリーン、センシティブ)
- ✓ 3段階の強さ設定
- ✓ 過圧防止センサー搭載 ※ライトリング
- ✓ ブラシヘッド交換お知らせ機能搭載
- ✓ ブラシヘッド3本付属

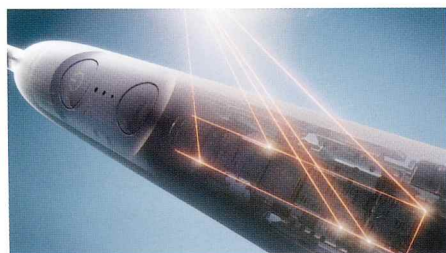

強度と耐久性が向上
高度なレーザー溶接技術により、
丈夫で軽量、長持ちする設定を実現



長持ちする充電式バッテリーを搭載
1回の充電で最大3週間の
ブラッシングが可能



過圧防止センサー
目で見て分かりやすいように
ライトリング機能を改良



輸入元

株式会社フィリップス・ジャパン

発売

株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161

お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)
<医療従事者様専用>

Morita Global Site: www.morita.com

More Infos about Products: www.dental-plaza.com

ご使用に際しましては、製品の取扱説明書を必ずお読みください。
仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
製品の色は印刷のため、実際とは異なる場合がございます。

<2025年9月22日発行>

PUB.NO.M8360.1.2508.72.000K.KY/KY 208530656