

YOSHIDA

むし歯や歯周病のリスク部位のケアに、
今からはじめたい理想の歯みがき

Plus
One!



いつもの歯ブラシにプラスワン! シングル歯ブラシの効果とは!?

歯みがきで大切なのは、歯と歯の間や歯と歯ぐきの間、奥歯の隙間といったむし歯や歯周病のリスク部位をしっかりケアすること。しかし、こういったリスク部位は、いつもの歯ブラシだけではみがききれない部位でもあるのです。

そこでオススメなのがいつもの歯ブラシ+シングル歯ブラシの併用。シングル歯ブラシの小さいヘッドは、歯の1本1本を丁寧にみがくことや、歯ブラシでは届かない気になる部位を細かくみがくことができます。ぜひシングル歯ブラシのオーラルケアをお試しください!

CURAPROX

 SWISS PREMIUM ORAL CARE

クラブボックス 歯ブラシ
CS5460

クラブボックス シングル歯ブラシ
CS1006

いつもの歯ブラシ+シングル歯ブラシで理想の歯みがきを！

STEP 1

基本の歯ブラシ CS5460 で歯みがきをしよう！

柔らかくてコシがある5460本のブラシ毛！使いやすい大人サイズの歯ブラシで世界中の人々に定番歯ブラシとしてご愛用いただいています

CS5460

毛の植立本数
5,460本

毛先の直径
0.1mm

柄の長さ
180mm

ヘッドのサイズ
25×12mm



商品ページは
こちら



一般的な歯ブラシ



クラブロックス

クラブロックスの基準

歯ブラシの理想を追求し開発した
ブラシ毛「クーレン®繊維」を
全ての歯ブラシに採用

- ✓ 歯・歯ぐきにやさしく
- ✓ 歯と歯ぐきの境目まで
みがける
- ✓ やさしい力でOK



全て毛先がラウンド加工

電子顕微鏡写真
CS 5460



STEP 2

CS1006シングル歯ブラシで仕上げみがき！

歯みがき粉なしでOK

持ち方



口の内側



歯と歯ぐきの間



歯と歯の間



歯ブラシ後にシングル歯ブラシでみがくメリット

1 みがき残しを減らす

先端が小さいので
狭い場所に！

2 部分的に丁寧にみがける

歯並びが悪い場所や矯正装置の
周りもピンポイントでみがける！

3 使い方が簡単で誰でもできる

やさしくクルクルと
動かすだけ！

4 むし歯・歯周病のリスク部位をケア

歯周病が始まりやすい
歯と歯ぐきの境目に！

CS1006

毛の植立本数
810本

毛先の直径
0.1mm

柄の長さ
180mm


毛の長さ
6mm

みがき方動画はこちら



一本のブラシで2通りの効用

ブラケット周辺のデリケートな箇所には特別なクリーニングが必要です。また、インプラント周囲の歯肉は特に注意が必要です。CS1009シングルは辺縁の輪郭に適合するためにひと房の丸い毛束になっています。これはクーレン®繊維が歯頸部の解剖学的構造に適合することを意味します。

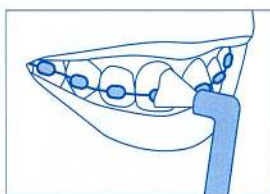

ブラケット周辺の清掃に適しています。



歯頸部の解剖学的構造に適合するので、歯肉を傷つけることなくきれいな歯肉形態を得ることができます。

CS1009

毛の植立本数
620本

毛先の直径
0.12mm

柄の長さ
180mm

毛の長さ
9mm



CURAPROX

SWISS PREMIUM ORAL CARE

CURAPROX(クラブロックス)は1972年、口腔ケアの意識が高いスイスにおいて、人々が生涯を通じて、健康的な歯を保てることを目的とした予防歯科の考えのもと、大学教授、歯科医師、歯科衛生士、そして世界中の口腔ケアのスペシャリストの協力により、口腔ケアにおける確かな効果と喜びを受けられる製品として開発されました。今では世界90カ国で販売されています。

※ 商品写真の色彩は印刷のため実際とは多少異なる場合がございます。 ※ 商品の仕様(デザイン・カラー・価格等)は変更になる場合がございます。

curaden
better health for you

輸入元：株式会社クラデンジャパン
(スイス クラデン社 日本法人)

発売元：株式会社 ヨシタ 東京都台東区上野7-6-9
ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせ：0800-170-5541



(01) 02747937022634
C02693/2025年3月/1/新