



premiumTM
plus JAPAN

Sumi

BLACK
DENTAL FLOSS

スミ フロス (ミントフレーバー)

歯ぐきにやさしく効率的にプラークを除去し、汚れを確認しやすいブラックフロスは。矯正治療中でブラケットを装着されている方、ブリッジのポンティック部の狭い隙間、インプラント周り等に挿入し易く、痛みなく汚れをしっかりと除去することができます。ポータブルタイプで外出先でも使用でき、スッキリさわやかなミントのフレーバー付きです。

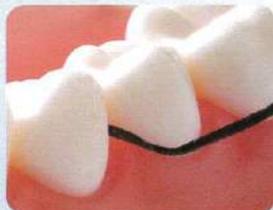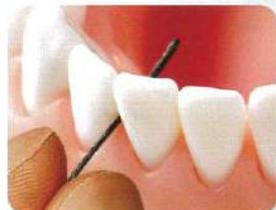

スレッダー部分がつかみやすく、指先でつまんで挿し込んでください。フロスにはマイクロクリスタリンワックスを塗布し、滑りやすいので歯間部や狭い隙間にもスムーズにアプローチいただけます。ふわっとした384本の繊維を束ねたフロスがプラークをしっかりと絡め取り、ブラックフロスで汚れをチェックできます。

ブラックフロスで汚れをスミまでチェック
口腔内環境を整え、毎日を笑顔に



384本の繊維のフロスは
爽快なミントのフレーバー付き



Made in Italy

歯ブラシでは届かない狭い隙間にも 384本の繊維でつくられたブラックフロスが優しくアプローチ

● SUMIフロスの使い方

How to Use 1 スレッダー部分で切り取る



スレッダーから次のスレッダー部分までが1回分のフロスの長さになります。カッター部分で切り取りご使用ください。

How to Use 2 スレッダーを使い挿し込む



スレッダー部分がつかみやすく、指先でつまんで挿し込んでください。狭い隙間にも挿し込みやすい細さです。

How to Use 3 歯間部や狭い隙間にもアプローチ



フロスにはマイクロクリスタリンワックスを塗布し、滑りやすいので歯間部や狭い隙間にもスムーズにアプローチいただけます。

How to Use 4 汚れをスミまで絡めとる



ふわっとした384本の繊維を束ねたフロスがプラークをしっかり絡め取り、ブラックフロスで汚れをチェックできます。

スレッダー付きのSUMIフロスは ブリッジ・インプラント・歯列矯正にもお使いいただけます

● ブリッジへの使用方法



- 1 スレッダー部分で、ダミーの歯(ポンティック)下の隙間にフロスを通します。
- 2 スポンジ部分を左右にゆっくりと動かして、歯ぐきとの接触部を清掃します。
※強く動かすと歯ぐきから出血する場合がありますので気をつけてください。
- 3 細菌がたまりやすい部分なので、毎日丁寧に清掃してください。

● インプラントへの使用方法



- 1 インプラントと隣在歯・または他のインプラントとの間にスレッダーで通します。
- 2 スポンジ部分で周囲をやさしくこすります。
- 3 インプラントの根本はデリケートなので、優しく動かしてください。

● 歯列矯正への使用方法



- 1 スレッダー部分を使って、ワイヤーとブラケットの間にフロスを通します。
- 2 スポンジ部分でブラケット周り、歯の側面の汚れを取り除きます。
- 3 フロスをゆっくりと引き抜き、次の歯も同様に使用してください。



患者参考価格(1個) 1,100円(税別)

スミ フロス【ミントフレーバー】

SUMI Floss【Mint Flavor】

商品コード	サイズ	入数	価格
PJ2010	15m(50回分) スポンジ部分: 190mm	1個	800円

●歯科医師、歯科衛生士の指導のもと、正しくご使用ください。 ●スレッダー部で清掃しないでください。無理に歯間部に入ると、フロスが抜けなくなる場合があります。 ●フロスに白い粉が付着している場合がありますが、香りの成分で品質には影響はありません。

Premium Plus Japan Co., Ltd.(プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒560-0005 大阪府豊中市西緑丘1-1-31 5F

お問合せ窓口: 06-6845-0050 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター: 〒561-0805 大阪府豊中市原田南一丁目13番5号
(製造販売業)

プレミアムプラスジャパン SNS

当社の最新情報をFacebook、Instagramで発信しています。

右記QRコードからご覧ください。



商品のクオリティー維持・進歩の為、スペック・カラー・価格等を予告なく変更する場合がございます。掲載商品の写真は、印刷により実際のカラーと異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※商品は税別価格です。

担当販売店