

CR 充填を成功に導くポイント



当カタログをご活用いただくにあたって



近年、様々なメーカーによる歯科材料の開発が進み、
日々の臨床の助けとなる材料が誕生しています。
当カタログでは、「できる限り歯質を削らないCR充填」を
成功に導くための器材選択をご紹介します。

カタログ内アイコン紹介



接着阻害のリスクを抑えることに
役立つ



スピーディーな診療を行う際に
役立つ



審美性が高い診療を行う際に
役立つ

01 ▶ う蝕検知



接着強さを高めるためには？

健全歯質、感染歯質への引張接着強度の比較

	Caries-infected dentin		Normal dentin
メガボンド	19.5 ± 12.0 (7)	⇔	40.9 ± 13.1 (8)

単位:MPa±SD.(n)

吉山昌宏先生、松尾敬志先生、浦山明久先生、木持健先生 「う蝕象牙質へのレジン接着性:セルフエッチングボンディングシステムの効果」より抜粋

健全及びう蝕感染象牙質へのレジン接着性を、マイクロテンザイル法、および走査型電子顕微鏡を用いて試験した



う蝕感染象牙質はレジンの浸透性を著しく阻害し
健全象牙質に比べて接着強さが低下していることがわかる


エナメルデンチン
ジャンクションを
追求することが
重要じゃ!



カリエスディテクター

ここが
point!

- 再石灰化しないう蝕感染象牙質を赤く染めだす。
- 赤く染まった層のみ除去することを推奨。

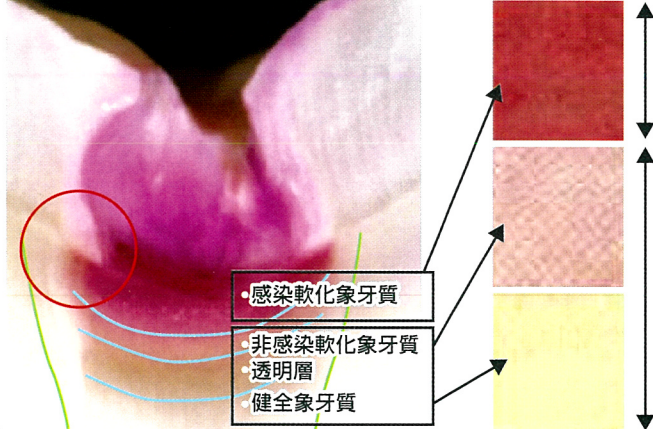

感染軟化象牙質

非感染軟化象牙質

透明層

健全象牙質

除去する

除去しない

イノコン歯科医院 猪越重久先生
デンタルマガジン124号
【テクニカルレポート・MI/ステンレスバーを用いた硬質レジンジャケット症】より抜粋

「う蝕ガイドライン第2版」より改変転載

02 ▶ う蝕除去



エナメルデンチンジャンクションを追求するためには？

#3



エキスカベーター ラウンド タイプ2

#4



#3 曲



240°
直径1.1mm

#4 曲



240°
直径0.7mm

先端径が小さいため、
マイクロスコープにも有効で、
さらに精密なう蝕除去が
できるんじゃ!



ここが
point!

- 先端の円に沿って、240°に刃がついているため、窩洞形成・軟化象牙質の除去を効率よく行える。
- アンダーカット部 / 狭い切削開口部付近 / 隅角部作業時に最適。

02 ▶ う蝕 除 去



露髄・う蝕取り残しリスクを低減するバーの選択とは？

EDJを確実に除去するためには？




M カーバイトバー M330

直径：0.9mm 作業長：2.0mm

ここが
point!

- 2.0mmの刃部を、メジャーとすれば、エナメルデンチンジャンクションの除去と共に、健全歯質を保持できる。
- ダイヤモンドに比べ、先端も切れるため、垂直方向への切削がしやすい。

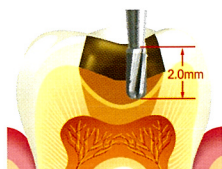

バーの切れ味によって除去を選択的に行うためには？



MI ステンレスバー 22mm #6

直径：1.8mm 作業長：1.6mm

ここが
point!

- ステンレスバーは、軟化象牙質のみの切削に有効。
- オートクレープを使用しても錆びにくい。

より低侵襲を目指すためには？




MI ダイヤバー MI-61F


直径：0.9mm 作業長：2.0mm

ここが
point!

- 作業長がM330より長く、隣接面のカリエスを除去しやすい。
- 感染象牙質の除去後は仕上げとして、窩縁エナメル質をエクストラファインのバー（粒子が細かいもの）を用い、整えることでエナメル質への微小クラックを抑える事ができる。

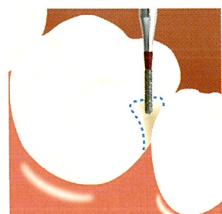

切削深さの比較

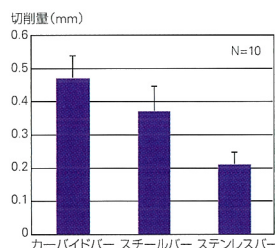

ステンレスバーの
切削能力が、
過剰切削を防ぐことに
つながるんじゃ。



イノコシ歯科医院 猪基重久先生
デンタルマガジン124号
【テクニカルレポート:MIステンレスバーを用いた硬質レジンジャケット冠】より抜粋


測定条件:マイクロモーターのコントラクトにそれぞれのバー(球形バーφ6、φ=1.8mm)を装着し、回転数約1,000r.p.m.、荷重約50gで、45°の角度でバーをあてがい、5秒間切削して生じた凹みの深さを計測した。

カーバイトバーが最も深く削れ、ステンレスバーが最も削れなかった。

03 ▶ 防 湿



唾液・呼気の対策とは？

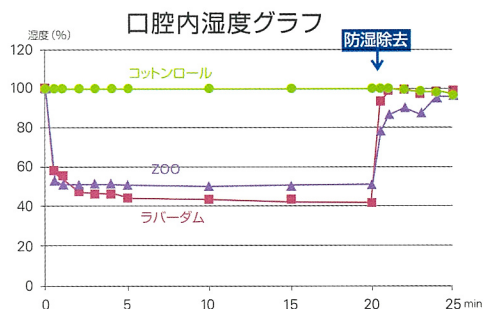

松本歯科大学 歯科保存学講座 嶋山敦史先生
【コンポジットレジン修復に防湿は必要か?】より抜粋

防湿装置装着前の口腔内の相対湿度は100%を示した。コントロール群では25分間の計測時間中、この状態を維持し続けた。一方、ラバーダム防湿では装着直後から40~50%程度にまで、ZOOでは50~55%程度にまで低下した。防湿装置を撤去すると、直後から急激に湿度は上昇した。



ラバーダムシート (アイボリー)

一般的に

シン(0.15mm)
装着しやすい

ミディアム(0.20mm)
破れにくく、密着しやすい

ヘビー(0.25mm)
圧着しやすい

より簡単に

簡単に使える
ZOOも
有効じゃのう!



ZOO

乾燥防湿状態の維持と同時に開口状態の維持、舌と頬の排除を行えるため、視野を確保してくれる。



ここが
point!


- 唾液 / 血液 / 呼気の接着阻害因子からの防護。
- クリーンでドライな作業視野の確保。

04▶ 歯面清掃



接着を左右するクリーニングとは？

口腔内における窩洞の接着阻害の清掃


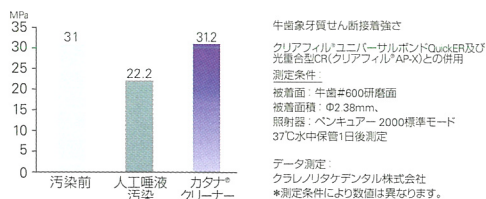


カタナ®クリーナー

汚染された窩洞内を
洗浄することが
大切なんじやよ!



セメント接着時、仮着材の除去にも使用可能

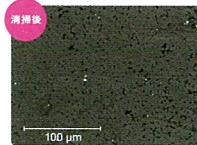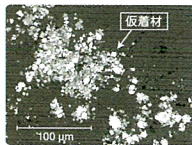

仮着材の残留物による汚染への洗浄効果(被着面観察)
による測定条件(被着面: 牛歯#1000研磨面)に、仮着U
材(ポリカルボキシレート系)を用いTEK(即時重合レジン)を仮着。
37℃、湿度95%で1週間保管後、TEKを取り外し、超音波スケーラーで
仮着材除去、清掃前後をSEMで観察した。
データ測定: クラレニリタケデンタル株式会社

ここが
point!

- 唾液や血液等のタンパク汚れ、及び仮着材や仮封材の残留物による汚染の清掃。
- 水洗性が良好で、被着面に液材が残存しにくいため、接着阻害を起こさない。


05▶ 歯冠離開/隔壁の設置



理想的なコンタクトを回復するためには？



コンタクト圧の回復には
天然歯に近似した形と圧の回復が
重要なんじやな!

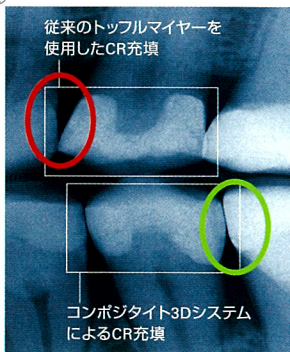

スタンダード

エキスパート向きの選択



コンポジット3D システム




ストラタG システム

「ストラタG システム」の設置手順を動画でご覧いただけます。
東京科学大学 歯学部歯学分野 畑山真志先生



形

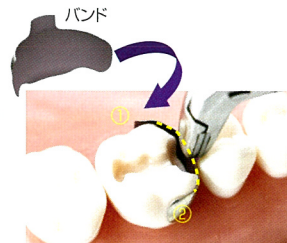

ここが
point!

- ①強い湾曲を有し、天然歯に近い豊隆を再現しやすい。
- ②歯冠上部のフィット性を向上するために、歯冠側左右端が若干丸まった設計になっている。


前歯症例には…



患部の歯冠長と豊隆に
合わせて使用可。
自然なカーブを再現可能。

ヴァリストリップ

圧

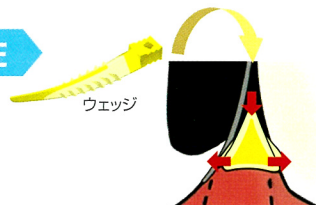

ここが
point!

ウェッジを使用した場合、
フィンによって、マトリックスバンドと
歯肉側マージンとの適合性が向上する。

徳島大学 再生歯科治療分野 保坂隆一先生
デンタルマガジン163号
【2級ダイレクトボンディングが上手くなりた〜マトリックスシステムの応用】より抜粋

ここが
point!

- しっかりとした歯間離開力がある。
- シリコンの脚部による適合性が良い。

06▶ ボンディング



1液性ボンドと2液性ボンドの使い分けとは？

接着操作を簡便にしたい！

Speed

全ての症例に
「待ち時間なし」

1液でありながら
「メガボンド」に近似した
象牙質接着力を実現

クリアファイル®
ユニバーサルボンド Quick 2



セレクトィブエッチングを行うことでエナメル質への接着力が強固になるんじやよ！

※セレクトィブエッチングはエナメル質を選択的にエッチングすること



Kエッチャント シロジ



接着操作を確実にしたい！

Power

接着の
ゴールド
スタンダード

2液で象牙質に対する
接着力を強固に

クリアファイル® メガボンド® 2



プライマー



ボンド

ここが
point!

この1本で、多用途に使える

簡便な操作性でテクニカルエラーを低減
1液性ボンドを支台築造時にも使用可!



使いやすい液性状の
動画はここでチェック!

動画ご提供: 東京科学大学 歯学部学分野
畑山真志先生





ボンディング操作動画は
ここでチェック!

動画ご提供: 富地歯科医院 富地秀彦先生



浸透性の高さでエアブローで、
溶媒・水を除去し、接着不良を回避!
被膜厚さも約半分以下に!

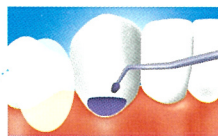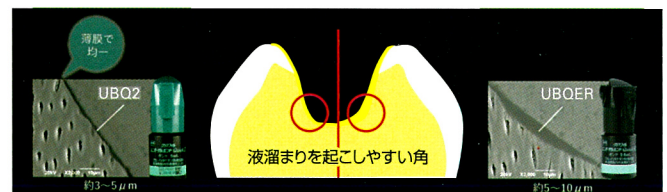

待ち時間
なし



マイルドな
エアブロー

①水分や溶媒をしっかりと飛ばす
②ボンド層を均一にする

①水分や溶媒をしっかりと飛ばす



マイルドな
エアブロー

②ボンド層を均一にする



マイルドな
エアブロー

②ボンド層を均一にする

1液性ボンドは、2つの役割を
一度に行うため、注意深く
エアブローをする必要が
あるんじゃないよ!



光照射
5~10秒

接着ステップ 比較

20秒
処理



5秒



5秒



マイルドな
エアブロー



マイルドな
エアブロー

②ボンド層を均一にする




光照射
5~10秒



光照射
5~10秒

ここが
point!

象牙質の接着力

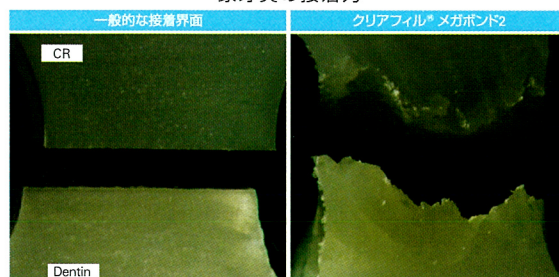

保坂啓一先生ほか: 手に取るようにわかるコンポジットレジン修復のメソッド. 医歯薬出版, 2022より許諾を得て転載


クリアフィル® メガボンド® 2で接着させた象牙質・コンポジットレジン試料の引用試験
一般的な接着ではレジンと象牙質の界面で破壊されるに対し、クリアフィル® メガボンド® 2ではその破壊様相から
“象牙質がもげるほど”よく接着しているのがわかる。

多数の臨床評価報告あり

国内外の大学・評価機関から多数評価報告されており、10年以上の長期臨床評価報告、
8年の臨床評価報告において保持率は、97%である。

高活性光重合触媒を採用することで「クリアフィル® メガボンド®」を
上回る象牙質接着力を発揮できる!

牛歯象牙質に対するせん断接着強さ

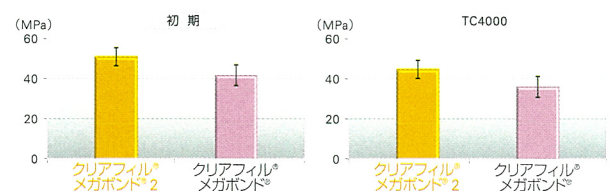

測定条件: 被着面: 牛歯#600研磨面、被着面積: φ2.38 mm

照射器: パンキエア2000標準モード、プライマー: 20秒処理、ボンド: 光照射10秒

37℃水中24時間浸漬(初期), または37℃水中24時間浸漬してサーマルサイクル(4-60℃, 4000回: TC4000)


測定装置: オートグラフ AG-100kN (島津製作所), クロスヘッドスピード: 1 mm/min

クラレノリタケデンタル(株)測定: 条件により数値は異なります。

07 ▶ CR充填


☑️ 用途に合わせたコンポジットレジンを選択とは？

充填操作を
ユニバーサルシェードで
簡便にしたい！

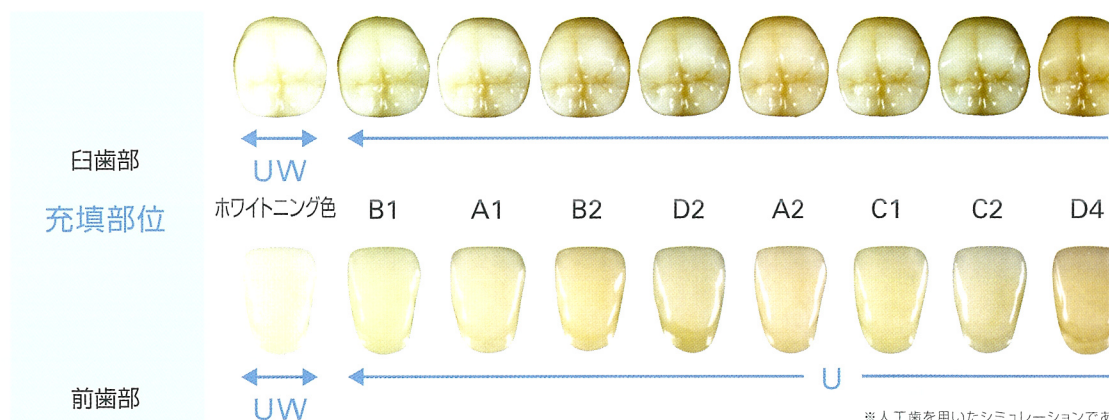

B3以上はUD、変色部分を遮蔽したい際にはUOP
UD・UOP・UWの補填シェードを使用することで

流動性を活用して、
より天然歯に近く！

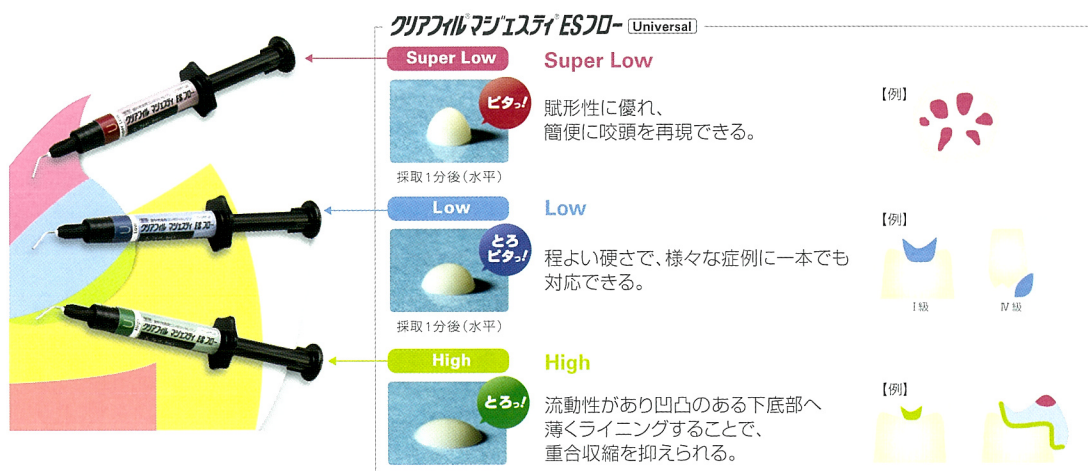


🦷 さらに審美的にCR充填を行うためには？

より高い賦形性を求めるために！

保険適用
CR 単層
充填

クリアフィルマジスティ ES-2



シェードテイキングにより、
選択したシェードのペーストを積層充填する。

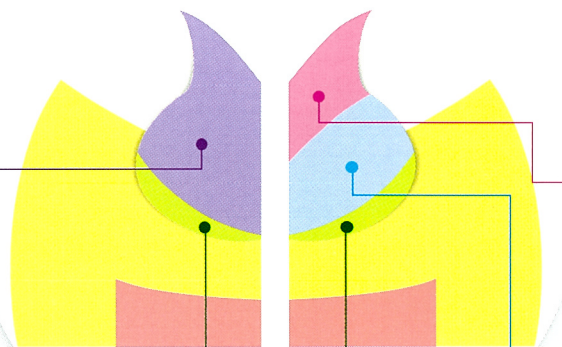

クリアフィルマジスティ ESフロー Universal High

流動性があり凹凸のある下底部へ薄くライニングすることで、
重合収縮を抑えられる。



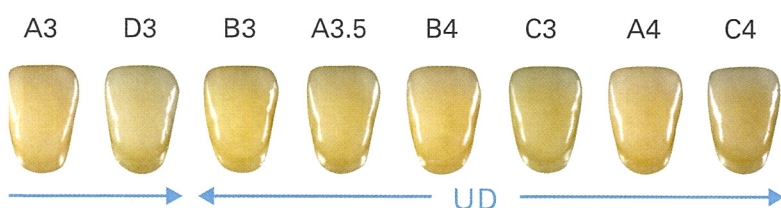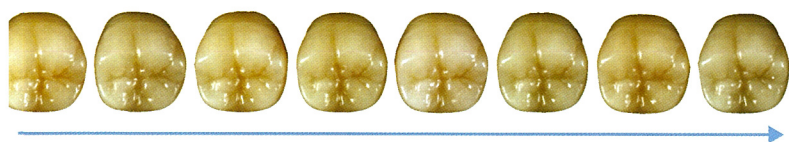

然歯の色調とは異なります

※UOPは1本で充填することも可能ですが、UやUDで積層する方がより審美的です。

ホワイトニング・乳歯症例の際にはUW、より幅広い患者さんのニーズに対応できる！

○シェードラインナップ

		Super Low	Low	High
U		●	●	●
UD		●	●	●
UOP		●	●	●
UW ^{※2}		●	●	●


※1「VITA」はVITA Zahnfabrik, Bad Sackingen, Germanyの商標です。

※2 本製品の中で最も明度が高い色調です。

短時間の研磨で光沢が得られ、
歯ブラシ摩耗後も高い光沢性が続く。



クリアフィル® マジェスティ®
ES フロー [Low]

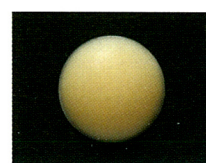

クリアフィル®
マジェスティ® LV

ESフローユニバーサルは、
この光拡散性効果によって、
前歯にも1本で
充填できるんじゃない。

クラレノリタケデンタルのCR って…

■高い色調適合性の実現



光透過性
光を透過する性質、
周囲の歯質の色調を拾う。



光拡散性
CR内部で光を拡散し、
修復部の明度低下を防ぐ。

■高い物性の実現

フィラー含有量

多いほど、機械的強度の向上、重合収縮率が低減する。

曲げ強さ

強いほど、薄く充填した部位も割れにくい。

圧縮強さ

強いほど、応力による割れが生じにくい。

保険適用外
CR
積層
充填

より深みのある色調を表現可能！

クリアフィル® マジェスティ® ES-2 Premium

エナメルシェードで
天然歯らしさを再現できる。

クリアフィル® マジェスティ® ES-2 Premium

デンチンシェードで
象牙質を再現できる。

	フィラー含有量	曲げ強さ	圧縮強さ
クリアフィル® マジェスティ® ESフロー Universal Super Low	78wt%	152Mpa	374Mpa
クリアフィル® マジェスティ® ESフロー Universal Super Low	75wt%	151Mpa	373Mpa
クリアフィル® マジェスティ® ESフロー Universal Super Low	71wt%	145Mpa	358Mpa
クリアフィル® マジェスティ® ES-2	78wt%	90Mpa	347Mpa
クリアフィル® マジェスティ® ES-2 Premium	80wt%	118Mpa	356Mpa

07▶CR充填



☺☺☺ コンタクト・小窩裂溝等、部位に応じて使い分けられる充填器とは？

ペースト填入・充填

Step1 ペースト填入・充填



Step2 咬合面充填

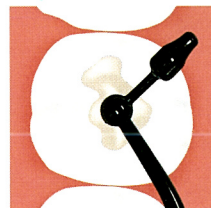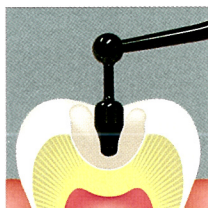

Step3 隣接面充填



Step4 形態付与



様々な症例に対応できる
3本の充填器を
紹介しよう！




形態付与


Step1 小窩を記録



Step2 ならす

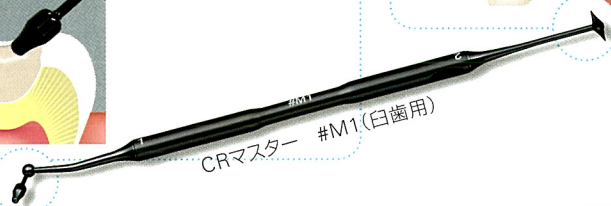

前歯充填・形態付与

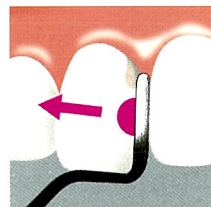


*レストを変えずに両隣在歯にアプローチできる。

CRマスター #M2 (前歯用)




厚さ0.2mm

前歯充填・形態付与

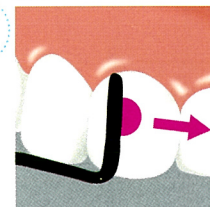

余剰レジンの除去

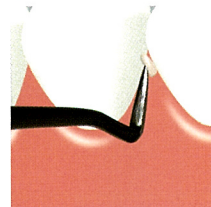

CRマスター #M3 (フロアブルレジン用)


窩底部ライニング・形態付与・ 気泡の除去




ここが
point!

- 柄が短いからマイクロスコープの対物レンズに当たらない。
- 柄の中央についたくぼみを利用することで、視線を外すことなく、ピックアップをスムーズに行える。

くぼみがpoint!

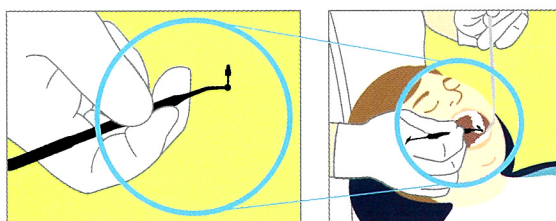


くぼみが入差し指に当たれば上顎

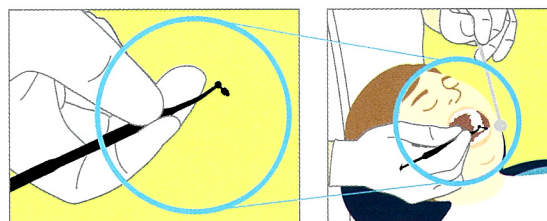

くぼみが親指に当たれば下顎
*術者は、12時ポジション

08▶ 光照射

☑️ 接着力を向上させる効果的な光照射器の選択とは？

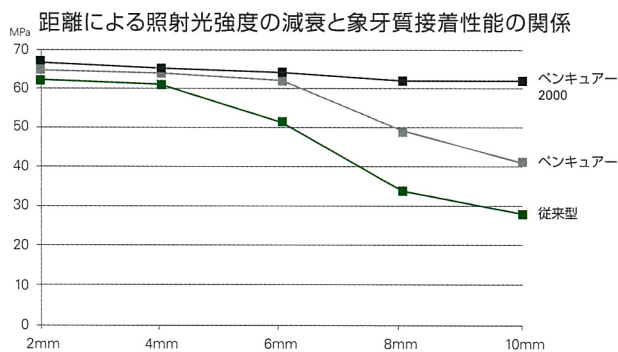


田代歯科医院 田代浩史先生
デンタルマガジン179号
【2級コンポジットレジン修復の成功につながる6つの心掛け(後編)】より抜粋

データから分かるように、照射距離が離れても、硬化に影響を与えずらい光照射器を選ぶと効果的じゃな。
※光量が落ちていないかも注意が必要じゃ!


ここが point! ペンキュアー 2000の特徴



臼歯遠心部に届きやすくコンパクト

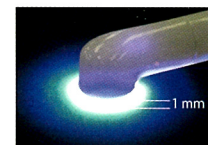

通常1mm照射が好ましい

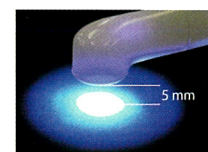


5mm離れても約88%のパワーを維持できる


照射モード
H(高出力モード) 光量2000mW/cm² ※3秒照射が可能
N(標準モード) 光量1000mW/cm²
P(パルスモード) 照射中に感じる熱さを軽減するモード
St(ステップモード) 重合収縮を抑えるモード

09▶ 咬合調整 / 形態修整

☑️ 部位や形態に合わせた咬合紙・バーの選択とは？

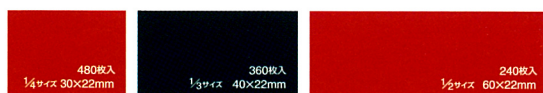

プリカット咬合紙

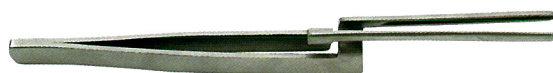


咬合紙ホルダー スタンダード

ここが point!

- 豊富なサイズバリエーション
1/2、1/3、1/4サイズのプリカット咬合紙で、用途に合わせて選択できる。
- 薄さ、強さを追求した紙質
紙質は薄く(紙厚0.025mm)強靱で、印記が正確に行える。

軽く噛むだけで、色が付きやすいんじゃよ!

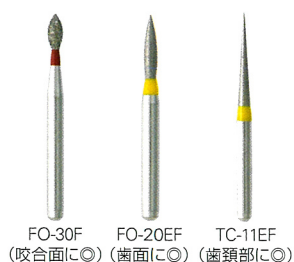


FO-30F (咬合面に◎) FO-20EF (歯面に◎) TC-11EF (歯頸部に◎)



FO-30F

Step1
小窩の記録

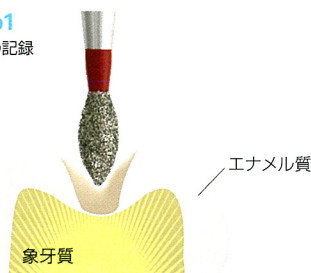


ここが point!

作業部にカーブが付与されているため、自然な豊隆を残して小窩の切削ができる。

Step2

- ①正しい咬合関係の確立
- ②理想的な形態の付与

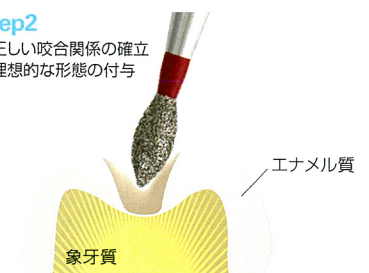


ここが point!

咬合面形態、切縁部、隅角形態の補正に使用しやすい。

10▶ 研磨

☺☺ 効率的に研磨を行うためには？

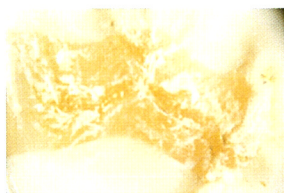


形態修正のみ



トップグロス(ホイール)で咬合面を大まかに研磨していく



トップブラシで追加研磨

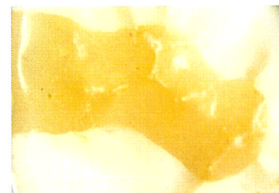


艶出し後






クリアフィル® マジェスティ® ESフロー(クラレノリタケデンタル)、トップグロス、トップブラシを使用。

富地歯科医院 富地秀彦先生
デンタルマガジン178号
「コンボジットレジン併磨の臨床的意義と新しい器材を用いた効率的な研磨方法」より抜粋

フロアブルレジン 充填後の研磨による表面性状の変化

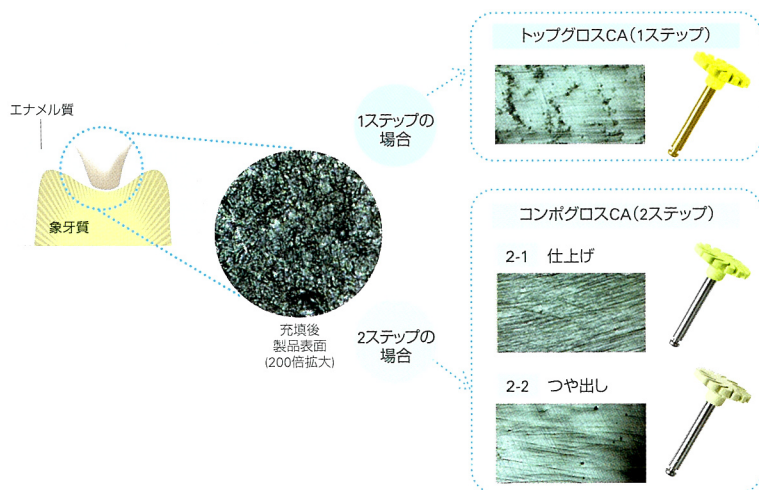

隣接面研磨を選択的に行うためには？

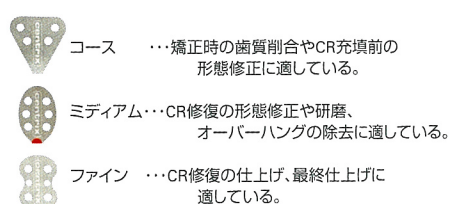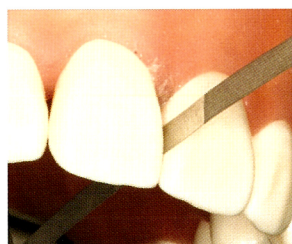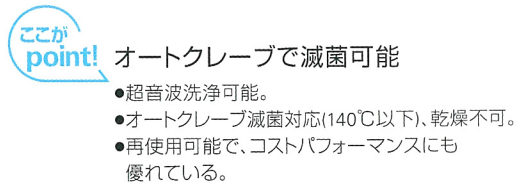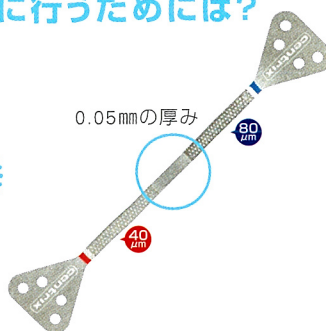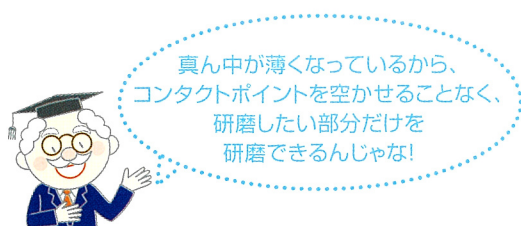

要約

カリエス除去



接着強さを高めるためには？

カリエスディテクター



エナメルデンチンジャンクションを追求するためには？

エキスカベーター ラウンド タイプ 2



露髄、う蝕の取り残しのリスクを低減するバーの選択とは？

M カーバイトバー M330
MI ステンレスバー 22 mm #6
MI ダイアバー MI-61F



接着操作



唾液・呼気の対策とは？

ラバーダムシート
ZOO



接着を左右するクリーニングとは？

カタナ® クリーナー



理想的なコンタクトを回復するためには？

コンポジット3D システム
ストラタG システム
ヴァリストリップ



1液性ボンドと2液性ボンドの使い分けとは？

クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2
クリアフィル® メガボンド® 2
K エッチャントシリンジ



CR 充填



用途に合わせたコンポジットレジンを選択とは？

クリアフィル® マジェスティ® ES フロー ユニバーサル
クリアフィル® マジェスティ® ES-2
クリアフィル® マジェスティ® ES-2 Premium



コンタクト・小窩裂溝等、部位に応じたインスツルメントの決定とは？

CR マスター



接着力を向上させる効果的な光照射器の選択とは？

ペンキュアー 2000




形態修正・研磨



部位や形態に合わせた咬合紙・バーの選択とは？

プリカット咬合紙
咬合紙ホルダー スタンダード
ダイヤバー FO-30F
ダイヤバー FO-20EF
ダイヤバー TC-11EF

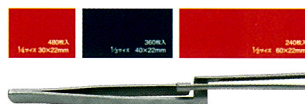

効率的に研磨を行うためには？

トップグロス CA
コンボグロス CA
トップブラシ CA
グリップストリップ



Specifications

製造：株式会社YDM

所在地：〒114-0014 東京都北区田端6丁目5番20号

販売名：エキスカベーター ラウンド タイプ2 一般的名称：エキスカベーター 医療機器届出番号：11B1X1000662D301 医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）

販売名：咬合紙ホルダー スタンダード 一般的名称：歯科咬合紙用ピンセット 医療機器届出番号：11B1X1000636D301 医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）

製造：マニー株式会社

所在地：〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8番3

販売名：M1スデンレスバー 一般的名称：歯科用スチールバー 医療機器届出番号：09B1X00006001010 医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）

販売名：M1ダイヤモンドバー 一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー 医療機器届出番号：09B1X00006002010 医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）

販売名：マニーダイヤバー 一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー 医療機器届出番号：09B1X0000602010 医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）

販売名：Mカーバイトバー 一般的名称：歯科用カーバイトバー 医療機器届出番号：09B1X00006003010 医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）

製造：ギャリソン・デンタル・ソリューションズ

販売名：ヴァリストリップ 一般的名称：歯科用マトリックスバンド 医療機器届出番号：27B1X00109000282 医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）

販売名：コンボジタイト 3D システム 一般的名称：歯科用充填・修復材補助器具 医療機器届出番号：27B1X00109000236 医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）

販売名：コンボジタイト 3D リテーナー 一般的名称：歯科用マトリックスリテーナー 医療機器届出番号：27B1X00109000233 医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）

販売名：コンボジタイト 3D マトリックスバンド 一般的名称：歯科用マトリックスバンド 医療機器届出番号：27B1X00109000232 医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）

販売名：フュージョンバンド 一般的名称：歯科用マトリックスバンド 医療機器届出番号：27B1X00109000330 医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）

販売名：フュージョンウェッジ 一般的名称：歯科用マトリックスウェッジ 医療機器届出番号：27B1X00109000323 医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）

販売名：ストラタG システム 一般的名称：歯科用充填・修復材補助器具 医療機器届出番号：27B1X00109000355 医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）

販売名：ストラタG リテーナー 一般的名称：歯科用マトリックスリテーナー 医療機器届出番号：27B1X00109000352 医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）

販売名：ストラタG バンド 一般的名称：歯科用マトリックスバンド 医療機器届出番号：27B1X00109000353 医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）

販売名：ストラタG ウェッジ 一般的名称：歯科用マトリックスウェッジ 医療機器届出番号：27B1X00109000354 医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）

製造：クラレノリタケデンタル株式会社

所在地：〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

販売名：クリアフィル® カタナクリーナー® クリーナー 一般的名称：歯科セラミック用接着材料（歯科金属用接着材料・歯面処理材）医療機器認証番号：301ABBZX00015000

医療機器の分類：管理医療機器（クラスⅡ）

販売名：クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2 一般的名称：歯科用象牙質接着材（歯科セラミック用接着材料）（歯科金属用接着材料）（歯科知覚過敏抑制材料）（歯科用シーリング・コーティング材） 医療機器認証番号：305ABBZX00012000 医療機器の分類：管理医療機器（クラスⅡ）

販売名：クリアフィル® メガボンド® 2 一般的名称：歯科用象牙質接着材（歯科セラミック用接着材料）（歯科金属用接着材料）（歯科用知覚過敏抑制材料）

医療機器認証番号：227ABBZX00114000 医療機器の分類：管理医療機器（クラスⅡ）

販売名：クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE 一般的名称：歯科用支台築造材料 医療機器認証番号：223ABBZX00086000 医療機器の分類：管理医療機器（クラスⅡ）

販売名：SAJルーティング® Multi 一般的名称：歯科接着用レジンセメント 医療機器認証番号：230ABBZX00096000 医療機器の分類：管理医療機器（クラスⅡ）

販売名：クリアフィル® マジェスティ® ES フロー 一般的名称：歯科充填用コンボジットレジン 医療機器認証番号：224ABBZX00170000 医療機器の分類：管理医療機器（クラスⅡ）

販売名：クリアフィル® マジェスティ® ES - 2 一般的名称：歯科充填用コンボジットレジン 医療機器認証番号：224ABBZX00119000 医療機器の分類：管理医療機器（クラスⅡ）

販売名：クリアフィル® マジェスティ® ES - 2 Premium 一般的名称：歯科充填用コンボジットレジン 医療機器認証番号：224ABBZX00120000

医療機器の分類：管理医療機器（クラスⅡ）

販売名：K エッチャントシリンジ 一般的名称：歯科用セメントキット 医療機器認証番号：226ABBZX00089000 医療機器の分類：管理医療機器（クラスⅡ）

製造：有限会社APT

所在地：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-3-45 マルイト西梅田ビル205-1

販売名：ZOO 一般的名称：歯科治療防湿器具 医療機器認証番号：21100BZZ00012000 医療機器の分類：管理医療機器（クラスⅡ）

製造：オゾン

販売名：CRマスター 一般的名称：歯科用充填器 医療機器届出番号：27B1X00109000324 医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）

製造：エデンタ

販売名：コンボグロス CA 一般的名称：歯科用ゴム製研磨材 医療機器届出番号：27B1X00109000342 医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）

販売名：トップグロス CA 一般的名称：歯科用ゴム製研磨材 医療機器届出番号：27B1X00109000343 医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）

販売名：トップブラシ CA 一般的名称：歯科用研磨器材・歯科予防治療用ブラシ 医療機器届出番号：27B1X00109000344 医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）

製造：セントリックス

販売名：グリップストリップ 一般的名称：歯科研削用ストリップ 医療機器届出番号：27B1X00109000290 医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）

製造：株式会社モリタ製作所

所在地：〒613-0022 京都府久世郡久御山町市田新珠城190番地

販売名：ペンキュアー2000 一般的名称：歯科重合用光照射器 医療機器届出番号：26B1X00001000513 医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）

販売名：ラバーダムシート（アイボリー） 一般的名称：歯科用ラバーダム 医療機器届出番号：27B1X00109000198 医療機器の分類：一般医療機器（クラスⅠ）

Diagnostic and Imaging Equipment

Treatment Units

Handpieces and Instruments

Endodontic System

Laser Equipment

Laboratory Devices

Educational and Training Systems

Auxiliaries



発売

株式会社 **モリタ**

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525

東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161

お問合せ お客様相談センター < 歯科医療従事者様専用 > T 0800.222 8020 (フリーコール)

Morita Global Site: www.morita.com

More Infos about Products: www.dental-plaza.com

ご使用に際しましては、製品の添付文書及び取扱説明書を必ずお読みください。
仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
製品の色は印刷のため、実物とは異なる場合がございます。
商品の取り扱い状況に関してはお問い合わせください。