

PRODUCTS CATALOGUE Vol.10

クラレノリタケデンタル
製品カタログ



ADHESIVES P.6～



CEMENTS P.10～



COMPOSITES P.16～



CORE BUILD-UP P.19～



Contents

■ボンドニング材 P.6

クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2	6-7
クリアフィル® メガボンド® 2	8
クリアフィル® メガボンド® FA	8
クリアフィル® トライエスボンド ND クイック	9
クリアフィル® フォトボンド ボンドニングエイジェント	9
クリアフィル® ニューボンド	9

■セメント P.10

SA ルーティング® Multi	10-11
パナビア® V5	12
パナビア® ベニア LC	13
パナビア® F 2.0	13

■接着関連材料 P.14

カタナ® クリーナー	14
カリエステクチャー	14
K エッチャント シリンジ	14
K エッチャント GEL	14
クリアフィル® エッチング エイジェント	14
クリアフィル® DCアクティペーター	15
クリアフィル® セラミック プライマープラス	15

クリアフィル® ポーセレンボンド アクティペーター	15
ADゲル	15
アロイ プライマー	15
サーフィスコート®	15

■充填用コンポジットレジン P.16

クリアフィル® マジェスティ® ES フロー	16-17
クリアフィル® マジェスティ® ES-2	17
クリアフィル® マジェスティ® ES-2 Premium	17
クリアフィル® マジェスティ® LV	18
クリアフィル® AP-X	18
クリアフィル® ST オペーカー	18
クリアフィル® FII	18
クリアフィル® SC-II	18

■支台築造材料 P.19

クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE	19
クリアフィル® ディスパンサー	19
クリアフィル® ADファイバーポスト II	20
クリアフィル® フォトコア®	21
クリアフィル® DCコア ペースト	21
クリアフィル® コア	21

■その他の診療材料 P.22

ティースメイト® APペースト	22
ティースメイト® ディセンシタイザー	22
SA アタッチメント for アライナー	23
クラリベーズ® キット	23
ティースメイト® F-1 2.0キット	23
クリアフィル® CRインレー	23

■CAD/CAM材料 P.24

ノリタケ カタナ® ジルコニア	24-25
ノリタケ カタナ® ワックス	25
ノリタケ カタナ® レジン	25
エステディック カララント®	26
カタナ® アベンシア® ブロック 2	27
カタナ® アベンシア® P ブロック	27
カタナ® アベンシア® N	27
セレック用 カタナ® アベンシア® ブロック 2	34
セレック用 カタナ® アベンシア® P ブロック	34
セレック用 カタナ® アベンシア® N	34
カタナ® ジルコニア ONE	35
カタナ® ジルコニア ブロック	35

kuraray History

1973年
無痛虫歯治療システム
技術導入歯科材料事業
への進出可能性の調査
スタート

1975年
研究開発着手(東京医科
歯科大学医用器材研究
所・増原教授指導)

1976年
リン酸モノマー
(歯質モノマー)の発見

1976年
三元系触媒の発見
臨床評価研究スタート

1976年
第一次試作品完成

1978年



「クリアフィルボンドシステムF」
発売
「ソフトクリアー GK-101」、
「カリエステクター」発売

1979年



「クリアフィルティントベース」
発売
「クリアフィルSC(乳歯色)」発売

1980年
欧州、アジア販売開始

1982年
臨床研究会スタート

1985年
米国販売開始

1981年



「クリアフィルFII」発売
「クリアフィルSC(永久歯色)」発売

1982年

「クリアフィルポストリア」発売
「プロテクトバニッシュ」発売

1983年



「ハナビアEX」発売
「ティースメイトS」発売

1984年

「クラエース」発売
※製造元 日本アピオニクス(株)
「クリアフィルFIIニューボンド」、
「クリアフィルニューボンド」発売
「クリアフィルコニューボンド」発売
「クリアフィルSCニューボンド」発売
「クリアフィルポストリアニューボンド」
発売

1985年

「クイックライト」発売



「フォトクリアフィルA」発売
「クリアフィルSC-II」発売

1986年

「フォトクリアフィルオーバー」発売
「クリアフィルF3」発売
「クリアフィル硬化促進材」発売
「フォトクリアフィルブライト」発売
「クリアフィルフォトコア」発売
「ライトル」発売

1987年

「ADポスト」発売
「クリアフィルボーセレンリ
ペアーシステム」発売
「クリアフィルボーセレンボンド」発売
「クリアフィルボステリア3」発売
「クリアフィルフォトボンド」発売
「クリアフィルフォトボステリア」発売
「ティースメイトA」発売
「クリアフィルBFRシステム」発売

1988年

「クリアフィルCRインレー」発売

1989年

「セシード」発売

1990年

「クラブール」発売
「ティースメイトF」発売

1991年



「クリアフィルライナーボンドシステム」、
「クリアフィルフォトアンテリア」
同時発売

1992年

「ADポストII」発売
「クリアフィルフォトSC」発売
「K-マトリックスシステム」発売

1993年

「クラスパーF」発売
「ハナビア21」発売
「クリアフィルライナーボンドII」発売
「クリアライト」発売

1994年



「クリアフィルAP-X」発売
「ADゲル」発売
「クリアフィルDCコア」発売

1995年

「セシードII」発売
「クロマゾーンカーステン」発売
「ティースメイトF-1」発売

1997年



「エステニア」発売

1998年

「クリアフィルライナーボンドII」
発売
「アロイプライマー」発売
「フォトCMO21」発売
「ダイナシール」発売
「ハナビアフルオロセメント」発売

1999年



「クリアフィルメガボンド」発売
「クリアフィルメガボンド
ボーセレンボンディングキット」
発売

2001年 東京有楽町ホールにて
「国際シンポジウム」開催

2001年 中国販売開始

2001年 メディカル部門が(株)クラレより分社し、
クラレメディカル(株)となる

2000年

「クリアシールF TC」
「クリアシールF RED」発売



「クリアフィルST」発売
「クリアフィルSTオーバーカー」発売

2001年

「エブリコード」発売

2002年

「ハイパーライト」発売

2003年

「ハナビアF2.0」発売
「マックスフィット」発売

2004年

「エステニアC&B」発売
「クリアフィルフロー-FX」発売
「クリアフィルDCコアオートミックス」
発売
「ホワイトコート」発売

2005年

「クリアフィルライエスボンド」発売
「ティースメイトF-1 2.0」発売

2006年

「クリアフィルマジスティ」発売



「クリアフィルメガボンドFA」発売
「クリアフィルDCボンド」発売
「クリアフィルセラミックプライマー」
発売
「サーフィスコート」発売

2007年

「クリアフィルエスティックセメント」
発売
「クリアフィルマジスティLV」発売

2008年



「クリアフィルSAルーティング」
発売

2009年

「クラリベスキット」発売
「クリアフィルティスベンサー」発売

Noritake History

1919年
焼石こう製造開始(旧 日東
石膏(株)、現 株式会社ノリ
タケカンパニーリミテド)

1939年
α石こうの工業化に成功
(日本で最初)(旧 日東石膏
(株)、現 株式会社ノリタケ
カンパニーリミテド)

1958年
歯科用石こうのJIS表示工場
と認定される(第31号)(旧
日東石膏(株)、現 株式会社
ノリタケカンパニーリミテド)

1978年



「スノーストン(硬石こ
う)」発売

1980年 金属焼付ボーセレン研究着手
1982年 新陶材完成、色調に研究着手
1987年 アジア販売開始
1988年 欧州販売開始
1990年 中国販売開始
1991年 米国販売開始
1998年 (株)ノリタケデンタルサプライ設立

1983年

「ハーバーベスト(埋没材)」発売

1986年



「スーパーボーセレンNT-1」発売

1987年



「ノリタケスーパーボーセレンAAA」
発売

1989年



「ノリタケストーン(硬石こ
う)」発売



「ノリタケデンタルプラスター」
発売

1990年



「インターナルライブSTEIN」
発売

1991年



「クリストバライトF.F.」発売

1992年



「ラスターボーセレン」発売

1993年



「アドメイト」発売

「パールサーフェス」発売

1994年



「ソルダリングスタンドセット」
発売

1995年



「アイレックスC」発売
「オページャスボディ」発売
「ペーストオペーク(スーパー
ボーセレンAAA)」発売

1997年



「スーパーメタルS-54」発売
「クリストバライトF.F.20」発売
「石こう関連材料」発売

1999年

「ボーセレン筆 達人」発売
「ハイテックフィニッシュ」発売

2000年



「セラビアン」発売
「スクリーニングボーセレン」発売
「ノリベスト」発売

2001年



「シェードガイド」発売
「マイスターポイント」発売

2002年

「アルミナベスト」発売

2003年



「クリストバライトフォルテ」発売
「ディテールチェッカー」発売
「nカラー」発売

2004年

「ノリベストアルミナ」発売

2005年



「セラビアンZR」発売
「ノリベストジルコニア」発売

2006年

「ノリタケG-96h」発売

2007年



「ノリタケカタナジルコニア
フレーム」事業開始

2008年

「セラビアンZRプレス」発売

2009年

「ハイブリッドロック
(レジン配合超硬石こう)」発売



「ノリタケカタナシステム」発売

クラレノリタケデンタル株式会社 History

2012年 クラレノリタケデンタル(株)設立

2010年



「クリアフィルファイバーポスト」発売



「クリアフィルトライエスボンドND」発売

2011年



「クリアフィルSAセメントオートミックス」発売



「クリアフィルDCコアオートミックスONE」発売



「クリアフィルボンド SE ONE」発売

2010

2010年



「ノリタケデンタルスキャナー SC-3」発売

2011年



「ノリタケカタナDWX-50N」発売



「ノリタケ カタナ ジルコニア (ディスク)」

「ノリタケ カタナ ワックス」発売

2012年～



「ティースメイト ディセンタイザー」発売

「ノリタケ スーパーアロイC60」、
「ノリタケ プレソルターC60」発売

「クリストバライト フォルテ-Ex」発売


「クリストバライト FF-Ex」発売

「クリストバライト FF20-Ex」発売



「クリアフィル マジェスティ ES-2」発売

「クリアフィル マジェスティ ES-2 Premium」発売

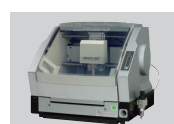

「歯科用CAD/CAMマシン DWX-50」発売

「アドシールドGI」発売



「クリアフィル マジェスティ ESフロー」(Low)発売

「パールサーフェス」発売

「ノリタケ デンタルスキャナー SC-4」発売



「クリストバライトベストフィッター」発売

「クリアフィル マジェスティ ESフロー」(SuperLow) 発売

「クリアフィル マジェスティ ESフロー」(High) 発売



「ノリタケ カタナ ジルコニア (ML)」発売

「クリアフィル トライエスボンド NDクイック」発売

2014年～

「ノリタケ カタナ ジルコニア (HT)」発売

「SA セメント プラス オートミックス」発売

「セシードN」発売



「SA ルーティング プラス」発売



「ノリタケ デンタルスキャナー SC-5」発売



「パナビア V5」発売

「アドシールド RM」発売

「ティースメイト APペースト」発売

「クリアフィル セラミック プライマー プラス」発売

「IK エッチャント シリンジ」発売



「歯科用CAD/CAMマシン DWX-51D」発売

「ノリタケ カタナ F-2」発売



「カタナ アベンシア ブロック」発売



「ノリタケ カタナ ジルコニア (UTML/STML)」発売

2016年～

「クリアフィル AD ファイバーポスト」発売



「クリアフィル ユニバーサルボンド Quick」発売

「クリアフィル DCアクティベーター」発売



「歯科用CAD/CAMマシン DWX-4」発売



「ノリタケ カタナ F-1N」発売

「カタナ デンタルスキャナー D2000」発売

「カタナ デンタルスキャナー D850」
「カタナ デンタルスキャナー D750」発売



「クリアフィル メガボンド2」発売

「ノリタケ スーパーボーセレンAAA」
(ペーストオバーク NP Bonder) 発売



「カタナデンタルスキャナー E1」発売

「カタナデンタルスキャナー E2」発売

「カタナデンタルスキャナー E3」発売



「歯科用CAD/CAMマシン DWX-52DC」発売

2018年～



「クリアフィル ユニバーサルボンド Quick ER」発売



「カタナ アベンシア P ブロック」発売


「カタナ ジルコニア ブロック」発売



「歯科用CAD/CAMマシン DWX-52D」発売



「歯科用CAD/CAMマシン DWX-52DCi」発売

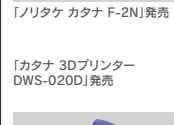

「ノリタケ カタナ F-2N」発売




「カタナ クリーナー」発売



「クリアフィル ADファイバーポスト II」発売



「クリアフィル マジェスティ IC」発売

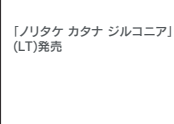

「SA ルーティング Multi」発売



「カタナ デンタルスキャナー E4」発売



「ノリタケ カタナ ジルコニア (LT)」発売

2020～2023年



「カタナ アベンシア N」発売



「ノリタケ カタナ ジルコニア (HTML)」発売



「歯科用ミリングマシン MD-500」
「歯科用ミリングマシン MD-500S」発売



「カタナ アベンシア ブロック 2」
「カタナ アベンシア ブロック 2(OE)」発売



「クリアフィル マジェスティ ESフロー」
(Low Universal) 発売



「ノリタケ カタナ ジルコニア (HTML PLUS)」発売



「ノリタケ カタナ ジルコニア (YML)」発売



「歯科用CAD/CAMマシン DWX-53DC」発売



「カタナ ジルコニア ONE」発売



「スキャナーF8」発売



「クリアフィル ユニバーサルボンド Quick 2」発売

2024年～



「歯科用CAD/CAMマシン DWX-53D」発売



「エステティック カラーント」発売



「SA アタッチメント for アライナー」発売

日頃よりご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
 クラレノリタケデンタル株式会社では、定期的にお役立ち情報をお届けする
 メールマガジンを配信しています。ぜひご登録ください。

メールマガジン会員募集中!

配信例

製品に関する
お役立ち情報

クラレノリタケ
デンタル
最新製品情報

各種イベント
展示会
出展情報

登録方法

1



右記QRコード
またはURLから
登録画面にアクセス

2



必要事項を
入力し登録

3



指定のメールアドレスに
確認メールが
届いたら完了

ご登録はこちらから



<https://go.kuraray.com/L/448142/2025-02-05/pprthd>

お問い合わせ

クラレノリタケデンタル株式会社 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-4 常盤橋タワー TEL: 0120-330-922 (平日10:00-17:00)

[製造販売元] クラレノリタケデンタル株式会社 〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-2

[販売元] 株式会社モリタ 〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 お客様相談センター: 0800-222-8020 (医療従事者様向窓口)

クラレノリタケデンタル



LINE
公式アカウント

はじめました!

LINE限定
の情報
もお届け

友だち募集中!

新製品の情報 や 各製品の使い方を解説した動画

セミナー情報 などをお届けします。



友だち追加は簡単!

下記、いずれかの方法で友だち追加いただけます。

追加方法

1

右記のコードを読み込み
友だちに追加をする



追加方法

2

ID検索から友だちに追加をする

@kuraraynoritake



お問い合わせ

クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

☎ 0120-330-922 平日 10:00~17:00

ホームページ

www.kuraraynoritake.jp

製造販売元 クラレノリタケデンタル株式会社 〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

パナビア® V5 ペースト 管理医療機器 歯科用コンポジットレジンセメント 医療機器認証番号: 226ABBZX00102000 カタナ®アベンシア®N 管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料 医療機器認証番号: 301AFBZX00015000
クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2 管理医療機器 歯科用象牙質接着材(歯科セラミックス用接着材料、歯科金属用接着材料、歯科用知覚過敏抑制材料、歯科用シーリング・コーティング材) 医療機器認証番号: 305ABBZX00012000

ADHESIVES

ボンディング材



クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2

管理医療機器 歯科用象牙質接着材（歯科セラミックス用接着材料、歯科金属用接着材料、歯科用知覚過敏抑制材料、歯科用シーリングコーティング材）
医療機器認証番号 305ABBZX00012000

1ステップ型ボンディング材の一步先へ

多用途・高接着・塗布後の待ち時間なし
つかいやすい液性状と室温保管を実現
さらに、ボンディング層の『質』向上を追求



1液で9つの用途に対応

- CR充填、レジンコア（直接法/間接法）
- レジンセメントによる接着
- 象牙質レジンコーティング
など、様々な用途に対応します。



接着阻害因子との接触によるリスクを低減

歯質への浸透性に優れる技術の採用により、塗布後の待ち時間なしを実現。唾液の多い下顎部や長時間開口が困難な小児・高齢者症例などでもスムーズな治療が行えます。



いろいろ使えるから、いつも近くに

組成の最適化により、室温保管が可能になりました。効率的に治療の準備・治療後の片付けができます。

※従来と同様に冷蔵庫保管も可能です。



小窩洞、広い面積 どちらにも塗布しやすい

ボンディング層の強化を目的としたフィラーを含有しながらも塗布しやすい液性状を実現しました。前歯部の小窩洞や臼歯部の広い窩洞のどちらにもスムーズな塗布が可能で、塗布後のエアブローによる薄膜化もスムーズに行えるようになりました。



●粘度の比較




クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2



ADVANCED RAPID BOND TECHNOLOGY

「塗布後の待ち時間なし」と「高接着」「強固なボンディング層」を両立する独自技術を採用。


1ステップ型ボンディング材では、1液で歯質の脱灰、歯質への浸透・拡散、硬化を行ないます。そのため、強固なボンディング層を獲得することが技術的な課題でした。本製品では独自技術により、高い親水性と重合性を兼備することで、ボンディング層の『質』向上を実現しました。

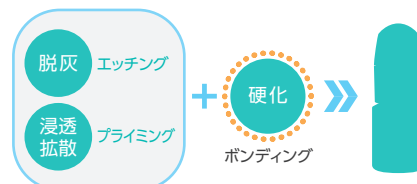

フリップトップ
キャップ※1



塗布後の
待ち時間なし

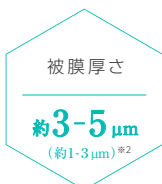

被膜厚さ
約3-5μm
(約1-3μm)※2



フッ化ナトリウム
配合



採取後
7分間
使用可能※3

※1 ワンタッチ開閉できる容器 ※2 象牙質レジンコーティングなどボンド硬化後にアルコール綿球で未重合層を除去した場合
※3 遮光下(25℃)、容器内/採取後の相分離なし

■単品

注文番号	容量
202440042	5 mL

■Wパック

注文番号	容量
202440043	5 mL×2個

ボンディング材（セルフエッチングタイプ）比較表

		光重合型			
		1ボトル1ステップ		2ボトル2ステップ	
		クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2	クリアフィル® トライエスボンド ND クイック	クリアフィル® メガボンド® 2	クリアフィル® メガボンド® FA
プライマー処理		 待ち時間 なしで エアブロー		 ⓧ 水洗不可 20秒間処理 ↓ 弱～中庄のマイルドな エアブロー乾燥	 抗菌性モノマー-MDP配合® ⓧ 水洗不可 20秒間処理 ↓ 弱～中庄のマイルドな エアブロー乾燥 ※抗菌性モノマー-MDPの二次う蝕抑制 効果は臨床的に実証されていません。
ボンド塗布					 表面処理 フッ化ナトリウム 配合
(照射時間)	ハロゲン照射器	10秒	10秒	10秒	10秒
	LED照射器	10秒	10秒	10秒	10秒
	高出力ハロゲン照射器	—	—	—	10秒
	高出力LED照射器	5秒 (ペンキュアー2000高出力モードの場合は3秒)	3秒	5秒 (ペンキュアー2000高出力モードの場合は3秒)	—
	プラズママーク照射器	—	—	—	10秒

歯科重合用光照射器の分類と光量については使用する製品の電子添文等をご確認ください。

各使用ステップの概要（ご使用に際しましては、必ず電子添文等をご確認ください。）

CR充填

▶ 光重合CR充填修復※1



詳細はP.16へ

管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン

クリアフィル®マジエスティ ESフロー

医療機器認証番号：224ABBZX00170000

【単品】

Super Low [U,UD]：202440620-202440621
Low [U,UD,UOP,UW]：202440600-202440603
High [U,UD,UOP]：202440610-202440612


Universal



【3本パック】 LOW (U)
202440605

歯面処理時間別牛歯せん断接着強度

(光重合型CRとの併用)

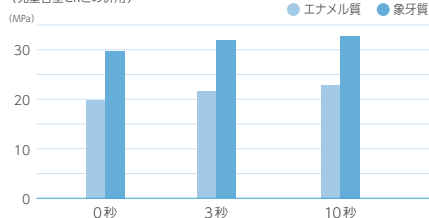

試験条件：
被着面：牛歯#600研磨面
被着面積：φ2.38 mm
照射器：ペンキュアー 2000標準モード
37℃水中24時間保管
データ測定：クラレノリタケデンタル株式会社

CR充填
ステップの
動画は
こちらから



支台築造

▶ ポスト植立※2,3
支台築造※2,3



詳細はP.19へ

管理医療機器 歯科用支台築造材料

クリアフィル®DCコア オートミックス ONE

医療機器認証番号：223ABBZX00086000

【単品】 デンチン/ホワイト

202420942, 202420943



【3本パック】 デンチン
202420947

牛歯象牙質せん断接着強度

(「クリアフィル® DCコア オートミックス ONE」との併用)



試験条件：
被着面：牛歯#600研磨面、
被着面積：φ2.38 mm
照射器：ペンキュアー 2000標準モード
37℃水中24時間保管
データ測定：クラレノリタケデンタル株式会社

ポストの植立・
支台築造ステップ
の動画は
こちらから



セメント接着

▶ CAD/CAM冠の
セメント接着※4



詳細はP.10へ

管理医療機器 歯科接着用レジンセメント

SA ルーティング® Multi

医療機器認証番号：230ABBZX00096000

オートミックス

【セット品】 ユニバーサル バリュースキット

202440210

【単品】 ユニバーサル/ホワイト/トランスルーセント

202440212-214

ハンドミックス

【セット品】 ユニバーサル バリュースキット

202440200


【単品】 ユニバーサル/ホワイト/トランスルーセント

202440202-204



歯面処理時間別牛歯せん断接着強度

(「SA ルーティング® Multi」との併用)

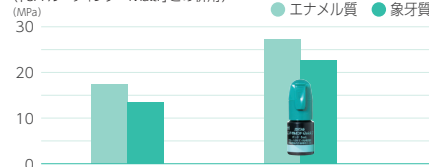

試験条件：
被着面：牛歯#600研磨面、
被着面積：φ2.38 mm
照射器：ペンキュアー 2000標準モード
37℃水中24時間保管
データ測定：クラレノリタケデンタル株式会社

CAD/CAM冠の
セメント接着
ステップの
動画は
こちらから



象牙質レジンコーティング

▶ 保険適用の象牙質レジンコーティング※5
に対応（クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2のみ対応）

※1 電子添文等の使用用途[光重合型の歯科充填用コンポジットレジンによる充填修復] ※2 電子添文等の使用用途[デュアルキュア型又はセルフキュア型の歯科用支台築造材料、歯科用セメントによるポストの植立及び/又は支台築造]
※3「クリアフィル® DCコア オートミックス ONE」と併用時の歯面処理のみ ※4 電子添文等の使用用途[セメント接着における窩洞、及び支台歯の処理] ※5 電子添文等の使用用途[間接修復法の前処理としての窩洞又は支台歯のシーリング・コーティング]

◇注文番号は株式会社モリタの商品コードです。ご注文の際は注文番号と商品名を歯科材料店へご連絡ください。 ◇価格はメーカー希望小売価格です。

管理医療機器 歯科用象牙質接着材(歯科セラミックス用接着材料)(歯科金属用接着材料)(歯科用知覚過敏抑制材料) 医療機器認証番号:227ABBZX00114000

セット



■キット

注文番号		
202430270		

- 内容:プライマー(6mL)×1本、ボンド(5mL)×1本
- 付属品:遮光板(C)×1個、混和皿(C)×1個、アプリーケーターブラシ(ファイン<シルバー>)×50本

单品



■ 单品

注文番号	品名	容量
202430282	① プライマー	6 mL
202430281	② ボンド	5 mL

高度管理医療機器 医薬品含有歯科用象牙質接着材 医療機器承認番号:21700BZZ00442000

- プライマーに抗菌性モノマーMDPB^{*}を配合
- ボンドに表面処理フッ化ナトリウムを配合



モノマー(HEMA、[MDP®])、
抗菌性モノマーMDPB※、
精製水、光重合触媒、
着色剤、その他

※ 本品は抗菌性モノマーMDPBが含まれますが、2次う蝕抑制効果は臨床的に実証されていません。



■ セット

注文番号		
202410910		

- 内容:プライマー(6 mL)×1本、ボンド(5 mL)×1本
- 付属品:アウターケース×1個、遮光板(B)×1個、混和皿(B)×1個、スポンジ小片(NL)×1箱


フィラー(シリカ系マイクロフィラー、
表面処理フッ化ナトリウム)、
モノマー(Bis-GMA、「MDP®」、HEMA、
その他)、光重合触媒、その他

抗菌性モノマーMDPB[※]を配合


MDPBは代表的な抗菌剤である塩化セチルピリジニウムに類似した**抗菌部位と重合部位を併せ持ったモノマー**です。
重合前に抗菌性を発現し、重合硬化後は抗菌性を発現しません。

幅広い菌に抗菌性があるといわれる塩化セチルピリジニウム (CPC) ではマイナスに帯電しているバクテリアの細胞膜に抗菌剤のプラス電荷が接触することにより、バクテリアの電荷バランスが崩れ、細胞膜が破壊されると考えられています。

抗菌性モノマーMDPB*の分子構造


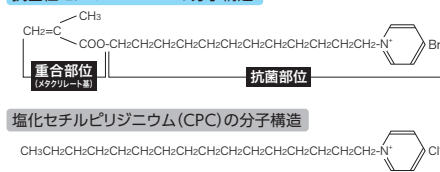


塩化セチルピリジニウムの抗菌性発現機構 (イメージ図)

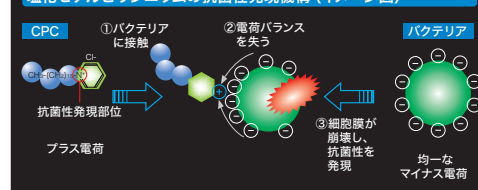

表面処理フッ化ナトリウムを配合

配合された表面処理フッ化ナトリウムからフッ素が徐放されます。更にフッ素イオンを放出した後も、安定した構造が維持されます。

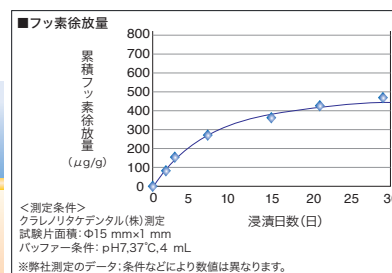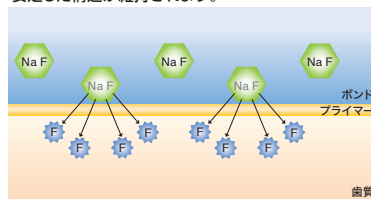

■ 单品

注文番号	品名	容量
202410914	① プライマー	6 mL
202410913	② ボンド	5 mL

クリアフィル® トライエスボンド ND クイック

管理医療機器 歯科用象牙質接着材(歯科セラミックス用接着材料)(歯科金属用接着材料) 医療機器認証番号:224ABBZX00106000

ワンボトルタイプの光重合型
ボンディング材です。
塗布後、待たずにエアブロー。
優れた接着力を発揮します。

- 「クリアフィル® トライエスボンド ND クイック」は、ボンド塗布後、待たずにエアブローに移ることができ、スピーディーなボンディング処理が可能です。そのため、ボンド塗布後の待ち時間に由来する接着阻害リスクが低減します。
- 「ボトルを振る操作」や「こすり塗り」も不要で操作が簡便です。

■単品

注文番号	容量	
202420752	5.6 mL	



クリアフィル® フोटボンド ボンディングエイジェント

管理医療機器 歯科用象牙質接着材 医療機器承認番号:21200BZZ00360000

デュアルキュア型ボンディング材です。

- リン酸エッチング併用型。

■単品

注文番号	品名	容量
202120074	① ユニバーサル液	各 6 mL
202120073	② キャタリスト液	



クリアフィル® ニューボンド

管理医療機器 歯科用象牙質接着材 医療機器承認番号:15800BZZ01534000

化学重合型ボンディング材です。

- リン酸エッチング併用型。

■単品

注文番号	品名	容量
202120054	① ユニバーサル液	各 6 mL
202120053	② キャタリスト液	




ボンディング材	セメント	接着関連材料	コンボジット 充填用 レジン	支台築造材料	その他の 診療材料	CAD/CAM 材料	CAD/CAM 機械	硬質レジン 歯冠用	歯科用陶材	研削・研磨材	埋没材/石膏	付属品
---------	------	--------	----------------------	--------	--------------	---------------	---------------	--------------	-------	--------	--------	-----

管理医療機器 歯科接着用レジンセメント 医療機器認証番号:230ABBZX00096000
VI046歯科用合着・接着材料 (1)レジン系①標準型 ②自動練和型

また、術者のニーズにより選択できるオートミックスとハンドミックスをラインナップ。

ペースト中に配合した「MDP®」と長鎖シランカップリング剤「LCSi」により、様々な種類の補綴装置に高い接着力を有します。

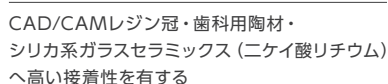

- 疎水性の長いスペーサー部により、**接着耐久性に寄与**
- **被着体への良好な反応性**

セメントの塗布

A diagram illustrating the application of cement. A dental preparation is shown with a cross-shaped opening. A small amount of yellow cement is being applied to the bottom of this opening using a dental instrument with a wooden handle and a metal tip.

PRODUCTS CATALOGUE Vol.10

セメント比較表

	パナビア® V5	パナビア® ベニア LC	SA ルーティング® Multi (オートミックス)	SA ルーティング® Multi (ハンドミックス)
セメント				
色 調	5色 (ユニバーサル、クリア、ブラウン、ブリーチ、オベーク)	4色 (ユニバーサル、クリア、ブラウン、ブリーチ)	3色 (ユニバーサル、ホワイト、トランスルーセント)	3色 (ユニバーサル、ホワイト、トランスルーセント)
練和方法	オートミックス (ミキシングチップ使用)	練和不要	オートミックス (ミキシングチップ使用)	手練和 (10秒間)
重合様式	光・化学重合 ※オベークのみ化学重合	光重合	光・化学重合	光・化学重合
被膜厚さ (μm)	12	8	16	16
X線造影性	○	○	○	○
使用回数 (1回をクラウン1歯分と計算)	15回	20~30回	15回	60回

ボンディング材

セメント

接着関連材料

コンボシット
充填用
レジン

支台築造材料

その他の
診療材料CAD/CAM
材料CAD/CAM
機械硬質レジン
歯冠用

歯科用陶材

研削・研磨材

埋没材／石膏

付属品

● 選べる2つのシリンジタイプ

オートミックス

「選べる2種類のチップ」と
「スムーズな押し出し」により、
症例に適したスピーディーな
操作が行えます。



選べる2種類のチップ

クラウンなどの装着 / 根管内へ
の注入に対応した2種類のチップ



スムーズな押し出し

自動練和によるスピーディーな
操作性



従来品 (SA セメント® プラス オートミックス®)
と比べ、ペーストの押し出しがスムーズです。

■ ユニバーサル バリユーキット

注文番号	
202440210	

- 内容: A ペースト / B ペースト 8.2 g (4.6 mL) … 3本
- 付属品: ミキシングチップ (装着用) × 40個、ミキシングチップ (エンド用) × 10個
ガイドチップ (エンド用極細) × 10個

■ ユニバーサル / ホワイト / トランスルーセント

注文番号	品名
202440212	ユニバーサル
202440213	ホワイト
202440214	トランスルーセント

- 内容: A ペースト / B ペースト 8.2 g (4.6 mL) … 1本
- 付属品: ミキシングチップ (装着用) × 20個

■ 付属品

注文番号	品名	入数
202440218	① ミキシングチップ (装着用)	20個
202440219	② ミキシングチップ (エンド用)	20個
202440220	③ ガイドチップ (エンド用極細)	20個


ハンドミックス

「クリーミーなペースト性状」により、
練和がスムーズに行えます。
必要なペースト量が
コントロールでき経済的です。



クリーミーなペースト

練和時間 **10 秒間**

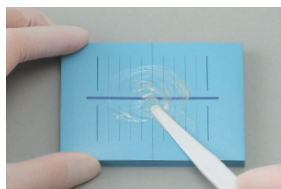


従来品 (SA ルーティング® プラス) と比べ、
より練和しやすいペースト性状です。

高いコストパフォーマンス

[使用回数]

インレー
約 120 回

クラウン
約 60 回

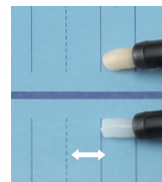

練和紙 **1 目盛り** が
クラウン **1 歯分** 相当

■ ユニバーサル バリユーキット

注文番号	
202440200	

- 内容: A ペースト / B ペースト 9.2 g (5 mL) … 3本
- 付属品: 練和棒 (PN) × 1、練和紙 (目盛り) × 1

■ ユニバーサル / ホワイト / トランスルーセント

注文番号	品名
202440202	ユニバーサル
202440203	ホワイト
202440204	トランスルーセント

- 内容: A ペースト / B ペースト 9.2 g (5 mL) … 1本



接着性、色調安定性に優れたレジンセメント。

高接着

高い象牙質接着力※1

高活性な化学重合触媒※2の採用により、優れた歯質接着性を実現しました。特に象牙質接着性は、当社従来品と比べて大幅に向上しています。※1

シンプルな構成

1本で支台歯処理が可能に

歯質 レジンコア メタルコア(非貴金属)

■「パナビア® V5 トゥース プライマー」
1本で支台歯処理が可能です。



操作性向上

余剰セメント除去のタイミングが選択できる

- 光照射による方法
- 小筆、ガーゼ等で拭き取る方法

高審美

色調安定性に優れた5色のセメントペースト

“アミンフリー”の新規化学重合触媒※2を導入。BPO-アミン系触媒を採用した当社従来製品と比較して優れた色調安定性を発現します。

※1 牛歯象牙質に対する引張接着強さ

※2 電子添文等に記載の化学重合開始剤・重合促進剤を指す

コンプリートキット



■コンプリートキット

注文番号		
202430600		

【内容】

- パナビア® V5 ペースト 半量タイプ(4.2 g / 2.4 mL)
ユニバーサル×1本
クリア×1本
ブラウン×1本
ブリーチ×1本
オペーク×1本
- パナビア® V5 トライインペースト(2.4 g / 1.8 mL)
ユニバーサル×1本
クリア×1本
ブラウン×1本
ブリーチ×1本
オペーク×1本
- パナビア® V5 トゥース プライマー(2 mL)×1本
- クリアフィル® セラミック プライマー プラス(2 mL)×1本
- K エッチャント シリンジ(3 mL)×1本
- 付属品: ミキシングチップ(合着用)×30個、ミキシングチップ(エンド用)×10個、ガイドチップ(エンド用細)×10個、ニードルチップ(E)×20個、アプリーケーターブラシ(ファインベシルバー)×50本、ディスボ小筆ブラシ(黒)×50個、小筆ホルダー(黒)×1本、混和血(FPN)×1個

スターターキット



■スターターキット(ユニバーサル)

注文番号		
202430601		

【内容】

- パナビア® V5 ペースト
ユニバーサル(8.1 g / 4.6 mL)×1本
- パナビア® V5 トライインペースト
ユニバーサル(2.4 g / 1.8 mL)×1本
- パナビア® V5 トゥース プライマー(2 mL)×1本
- クリアフィル® セラミック プライマー プラス(2 mL)×1本
- K エッチャント シリンジ(3 mL)×1本
- 付属品: ミキシングチップ(合着用)×15個、ミキシングチップ(エンド用)×5個、ガイドチップ(エンド用細)×5個、ニードルチップ(E)×20個、アプリーケーターブラシ(ファインベシルバー)×50本、ディスボ小筆ブラシ(黒)×50個、小筆ホルダー(黒)×1本、混和血(FPN)×1個

■パナビア® V5 ペースト

管理医療機器 歯科用コンポジットレジンセメント 医療機器認証番号:226ABBZX00102000

注文番号	品名	容量	
202430611	ユニバーサル		
202430612	クリア		
202430613	ブラウン	各8.1 g / 4.6 mL	
202430614	ブリーチ		
202430615	オペーク		

【付属品】

- ミキシングチップ(合着用)×20個

■パナビア® V5 トライインペースト

管理医療機器 歯科用色調適合確認材料 医療機器認証番号:226ABBZX00103000

注文番号	品名	容量	
202430621	ユニバーサル		
202430622	クリア		
202430623	ブラウン	各2.4 g / 1.8 mL	
202430624	ブリーチ		
202430625	オペーク		

■付属品 単品

注文番号	品名	入数	
202430626	ミキシングチップ(合着用)	20個	
202430627	ミキシングチップ(エンド用)	20個	
202430628	ガイドチップ(エンド用細)	20個	

■K エッチャント シリンジ

管理医療機器 歯科用エッチング材 医療機器認証番号:226ABBZX00089000

注文番号	容量	
202430252	3 mL	

■パナビア® V5 トゥース プライマー

管理医療機器 歯面処理材(歯科セラミックス用接着材料)(歯科金属用接着材料)
医療機器認証番号:226ABBZX00104000

注文番号	容量	
202430635	4 mL	

■クリアフィル® セラミック プライマー プラス

管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料(歯科金属用接着材料) 医療機器認証番号:226ABBZX00105000

注文番号	容量	
202430637	4 mL	

パナビア® ベニア LC

管理医療機器 歯科用セメントキット 医療機器認証番号:303ABBZX0006000 VI046歯科用合着・接着材料I(1)レジン系①標準型

操作性に優れた 光重合型のレジンセメントです。

- 接着システムは「パナビア® V5」と共通で、ペーストを「パナビア® ベニア LC ペースト」に置き換えるだけで、ラミネートベニアなどに適した接着操作を行うことができます。
- 各シェードの色調についても同様で、試適用のトライインペーストは共通です。



■パナビア® ベニア LC ペースト

管理医療機器 歯科用コンボジットレジンセメント 医療機器認証番号:303ABBZX0003500

注文番号	品名	容量
202440505	ユニバーサル	
202440506	クリア	各2.6 g / 1.5 mL
202440507	ブラウン	
202440508	ブリーチ	

●付属品: アプリケーターチップ(16G) × 5個

パナビア® F 2.0

管理医療機器 歯科接着用レジンセメント(歯面処理材)(歯科金属用接着材料)(歯科接着・充填材料用表面硬化保護材) 医療機器認証番号:224ABBZX00029000 VI046歯科用合着・接着材料I(1)レジン系①標準型

デュアルキュア型のレジンセメントです。

- 各種前処理材を使用することで様々な材料の接着に使用可能です。
- Aペーストは全色共通です。

キット



専用ケース付

■パナビア® F 2.0 ペースト

管理医療機器 歯科接着用レジンセメント 医療機器認証番号:224ABBZX00030000

注文番号	品名	容量
202120493	Aペースト	5.0 g / 2.3 mL
202120494	Bペースト(ブラウン)	各4.6 g / 2.3 mL
202120495	Bペースト(ホワイト)	
202120497	Bペースト(ライト)	
202120496	Bペースト(オペーク)	1.9 g / 1.0 mL

(EDプライマーII) 管理医療機器 歯面処理材 医療機器認証番号:21200BZZ00355000

(オキシガードII) 管理医療機器 歯科接着・充填材料用表面硬化保護材 医療機器認証番号:224ABBZX00015000

注文番号	品名	容量
202120383	EDプライマーII A液	各4 mL
202120384	EDプライマーII B液	
202120382	オキシガードII	6 mL

■キット

注文番号	品名
202120485	ブラウン
202120486	ホワイト

[内容]

- パナビア® F 2.0 ペースト Aペースト(5.0 g / 2.3 mL) × 1本
- パナビア® F 2.0 ペースト Bペースト(ブラウンまたはホワイト)(4.6 g / 2.3 mL) × 1本
- EDプライマーII A液(4.0 mL) × 1本
- EDプライマーII B液(4.0 mL) × 1本
- アロイプライマー(1.0 mL) × 1本
- オキシガードII(6.0 mL) × 1本
- 付属品: 小筆ホルダー(白) × 1本、ディスポ小筆ブラシ(黒) × 50個、ノズル(キャップ付き) × 5個、練和棒(PN) × 1、練和紙(P2) × 1冊、遮光板(FPN) × 1個、混和皿(FPN) × 1個

PRE-TREATMENTS

接着関連材料



カタナ® クリーナー

管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料(歯科金属用接着材料)(歯面処理材) 医療機器認証番号:301ABBZX00015000

支台歯・補綴装置への汚染をシンプルなステップで清掃。

- MDP塩の界面活性作用^{*1}による高い洗浄効果
- 弱酸性^{*2}、口腔内外で使用可能
- ワンタッチ開閉できる容器を採用

※1 試験時などに生じる唾液や血液などの汚染をリン酸エステル系モノマー「MDP[®]」と塩基性成分から形成される塩(MDP塩)の界面活性作用により清掃。汚染面に対する接着材料の接着性を高めます。
※2 約pH4.5 測定方法:JIS Z 8802:2011

■単品

注文番号	容量
202430970	4 mL



カリエスディテクター

- う蝕部分を赤とピンクに染め分ける、う蝕検知液です。



■単品

注文番号	容量
202120220	4 mL

※本品は医療機器ではありません。

K エッチャント シリンジ

管理医療機器 歯科用エッチング材 医療機器認証番号:226ABBZX00089000

- リン酸濃度35%のエッチング材です。
- 適度な賦形性があり、シリンジ先端にニードルチップをつけることでエナメル質を選択的にエッチングするのに適した製品です。



■単品

注文番号	容量
202430252	3 mL

●付属品:ニードルチップ(E)×20個

K エッチャント GEL

管理医療機器 歯科用エッチング材 医療機器認証番号:16100BZZ01130000

- リン酸濃度40%のゲルタイプエッチング材です。
- ゲルタイプのため静置しておきますと固化しますが振動を加えると液化します。



■単品

注文番号	容量
202120013	6 mL

クリアフィル® エッチング エージェント

管理医療機器 歯科用エッチング材 医療機器承認番号:21800BZZ10031000

- リン酸濃度40%のゲルタイプエッチング材です。
- ゲルタイプのため静置しておきますと固化しますが振動を加えると液化します。



■単品

注文番号	容量
202120018	6 mL

クリアフィル® DC アクティベーター

管理医療機器 歯科用象牙質接着材
医療機器認証番号:228ABBZX00066000

デュアル・セルフキュア型レジンコアの接着に。
「クリアフィル® メガボンド® 2」のボンドまたは
「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2」と
混和して使用します。

■単品

注文番号	容量
202430250	4 mL



「クリアフィル®
DCコア オートミックス® ONE」



その他のレジンコア材料
(デュアルキュア・セルフキュア)

クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2	ボンドのみ	ボンド+本品(混和) 塗布後の待ち時間なしで 次の乾燥操作が可能 ※光照射しない場合、操作時間が短くなります。
クリアフィル® メガボンド® 2	プライマー	ボンド+本品 (混和)

クリアフィル® セラミック プライマー プラス

管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料(歯科金属用接着材料)
医療機器認証番号:226ABBZX00105000

1本で様々な補綴装置に適用可能。

- 「クリアフィル® セラミック プライマー プラス」は、シランカップリング剤に加え、リン酸エステル系モノマー「MDP®」も含有することから、陶材、シリカ系ガラスセラミックス、CAD/CAMレジン、ジルコニア、金属®の前処理材として有効です。

※粗造化が困難な貴金属面には使用しないでください。

■単品

注文番号	容量
202430637	4 mL



クリアフィル® ポーセレンボンド アクティベーター

管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料(歯科金属用接着材料)(歯科用象牙質接着材)(歯面処理材)
医療機器認証番号:16300BZZ00085000

- シランカップリング剤です。
- 必ず電子添文等に記載している当社のボンディング材やプライマー材と混和してご使用ください。

■単品

注文番号	容量
202120061	4 mL



ADゲル

高度管理医療機器 医薬品含有歯面処理剤
医療機器認証番号:20500BZZ01050000

- 次亜塩素酸ナトリウムが主成分のゲル状歯面処理材です。
- 次亜塩素酸ナトリウム濃度は約10~15%です。

■単品

注文番号	容量
202120008	10 mL

- 付属品:アブリケーター×5個



アロイ プライマー

管理医療機器 歯科金属用接着材料
医療機器認証番号:20900BZZ00723000

- トリアジン系ビニルモノマー(VBATDT)とリン酸エステル系モノマー「MDP®」を配合した金属接着性プライマーです。
- これら2つの作用により貴金属合金のみならず、非貴金属合金に対しても高い接着性を発揮します。

■単品

注文番号	容量
202120064	5 mL



サーフィスコート®

管理医療機器 歯科表面滑沢硬化材
医療機器認証番号:218ABBZX00090000

- 口腔内で用いる歯科修復物(歯科充填用コンポジットレジン、歯冠用硬質レジン、テンポラリークラウン、ガラスイオノマーセメント)の形態修正後の表面滑沢材料です。

■単品

注文番号	容量
202120263	5 mL



ボンディング材

セメント

接着関連材料

コンポジットレジン

充填用
支台築造材料

その他の
診療材料

CAD/CAM
材料

CAD/CAM
機械

歯冠用
硬質レジン

歯科用陶材

研削・研磨材

埋没材/石膏

付属品

COMPOSITES

充填用


コンポジットレジン



クリアフィル® マジェスティ® ES フロー

管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン 医療機器認証番号:224ABBZX00170000
V1049 歯科充填用材料 I (1) 複合レジン系

Universal UまたはUDのみで、臼歯・前歯の幅広い天然歯色に親和。シェード選択・在庫管理をシンプルに。

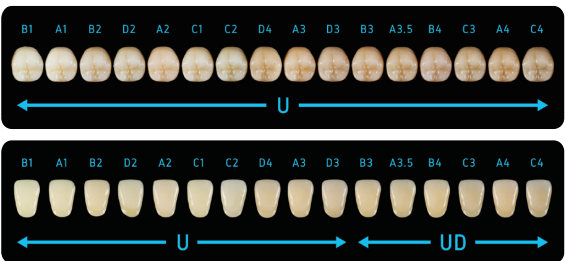

※人工歯を用いたシミュレーションであり、天然歯の色調とは異なります。

シェード 対照表	〈Low〉 Universal	U					U／UD		UW		UOP	
	〈Low〉 現行シェード	A1	A2	A3	B1	B2	A3.5	A4	XW	W (乳歯色)	A2D (OP)	A3D (OP)

- 色調親和性の高いUniversal (U、UD、UOP、UW) が追加されました。
- 流動性の異なる3タイプ (Low、Super Low、High) をラインナップしています。
- 臼歯部咬合面に使用できる機械的強度がありながら、短時間の研磨で光沢が得られます。



※本品は袋包装です。

Low

「適度な流動性」と「賦形性」を兼ね備えたタイプ。

とろピタッ!

5mm

採取1分後(垂直)

採取1分後(水平)

■ レジン充填材 単品 Universal

注文番号	容量
202440600~ 202440603	各2.7 g/1.5 mL

色調: U、UD、UOP、UW

● 付属品: ニードルチップ(N) x5個、ニードルチップキャップ x5個

Super Low

「流動性を抑えた」タイプ。

ピタッ!

5mm

採取1分後(垂直)

採取1分後(水平)

■ レジン充填材 単品 Universal

注文番号	容量
202440620~ 202440621	各2.7 g/1.5 mL

色調: U、UD

● 付属品: ニードルチップ(N) x5個、ニードルチップキャップ x5個

High

「高い流動性を有する」タイプ。

とろっ!

5mm

採取1分後(垂直)

採取1分後(水平)

■ レジン充填材 単品 Universal

注文番号	容量
202440610~ 202440612	各2.7 g/1.5 mL

色調: U、UD、UOP

● 付属品: ニードルチップ(N) x5個、ニードルチップキャップ x5個

■ レジン充填材 3本パック

注文番号	容量
202440605	

[内容] ● LOW ● 色調: U x3本

● 付属品: ニードルチップ(N) x15個、ニードルチップキャップ x15個



■ 付属品 ニードルチップ(N) 単品		■ 付属品 ニードルチップキャップ 単品	
注文番号	容量	注文番号	容量
202430331	20個	202430332	20個

クリアフィル® マジェスティ® ES-2

管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン 医療機器認証番号:224ABBZX00119000
V1049 歯科充填用材料 I (1) 複合レジン系

- 「[クリアフィル® マジェスティ® ES-2]」をコンセプトに色調表現と使いやすさを追求したコンポジットレジンです。
- [VITA Classical Shade guide®]の明るさを基準に再配列したシェードガイドで、的確かつ簡単にシェードを選択することができます。
- 窩洞との色調適合性に必要な「光透過性」と背景の影響を受けにくい「光拡散性」の両立により、単層でもⅢ級窩洞やⅣ級窩洞のような色調表現が難しい症例にも使用可能です。

※[VITA Classical Shade guide]はVita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KGの商標です。



■単品包装

注文番号	品名	容量
202430020~202430039	レジン充填材	各3.6g/2.0mL
色調: A1、A2、A3、A3.5、A4、KA6、B1、B2、B3、B4、C1、C2、C3、C4、D2、D3、XW、W(乳歯色)、OA2 [*] 、OA3 [*]		

※オパールで遮光性の高い色調です。

クリアフィル® マジェスティ® ES-2 Premium

保険適用外

管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン 医療機器認証番号:224ABBZX00120000

- 「[クリアフィル® マジェスティ® ES-2]」と同様に、色調表現と使いやすさを追求したコンポジットレジンです。
- [VITA Classical Shade guide®]の明るさを基準に再配列したシェードガイドで、的確かつ簡単にシェードを選択することができます。
- Dentin、Enamelの組み合わせで1色~3色に対応可能となっています。(例えば、A3D、A3Eの組み合わせで、C2、A3、D3を幅広くカバーします。)そのため積層充填でも多くの色調を用意する必要はありません。

※[VITA Classical Shade guide]はVita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KGの商標です。



■単品包装

注文番号	品名	容量
202430050~202430063	レジン充填材	各3.6g/2.0mL
色調: (Enamel: A1E、A2E、A3E、A3.5E、A4E、XWE、WE) (Dentin: A1D、A2D、A3D、A3.5D、A4D、XWD、WD)		



シェードガイド

■単品包装

注文番号	品名
202430001	シェードガイド

色合わせのポイントは「明度」

- この配列は[VITA Classical Shade guide®]の明るさを基準に再配列しました。これにより的確かつ簡単にシェードを選択することができます。(「クリアフィル® ES-2」、[クリアフィル® ES-2 Premium]共通)

Low



■レジン充填材 単品

注文番号	容量
202430301~202430312	各2.7g/1.5mL
色調: A1、A2、A3、A3.5、A4、KA6、B1、B2、XW、W(乳歯色)、A2D(OP) [*] 、A3D(OP) [*]	

- 付属品: ニードルチップ(N) x 5個、ニードルチップキャップ x 5個

※遮光性の高い色調です。

Super Low



■レジン充填材 単品

注文番号	容量
202430341~202430344	各2.7g/1.5mL
色調: A1、A2、A3、A3.5	

- 付属品: ニードルチップ(N) x 5個、ニードルチップキャップ x 5個

High



■レジン充填材 単品

注文番号	容量
202430321~202430325	各2.7g/1.5mL
色調: A1、A2、A3、A2D(OP) [*] 、A3D(OP) [*]	

- 付属品: ニードルチップ(N) x 5個、ニードルチップキャップ x 5個

※遮光性の高い色調です。



■付属品 ニードルチップ(N) 単品

注文番号	容量
202430331	20個

■付属品 ニードルチップキャップ 単品

注文番号	容量
202430332	20個

クリアフィル® マジェスティ® LV

管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン 医療機器承認番号:218ABBZX00162000
VI049歯科充填用材料 I (1) 複合レジン系

独自の表面処理技術により81wt%もの無機フィラーが配合されているため
臼歯部咬合面の充填にも使用可能なフロアブルレジンです。

- 賦形性と流動性を兼ね備えたフロアブルレジンです。



■レジン充填材 単品

注文番号	色調	容量
202420610~202420614	A1、A2、A3、A3.5、A4	
202420620~202420623	XL、サービカル、乳歯色	
202420625	E	各3.2 g
202420629	OC	
202420631~202420633	OA2*、OA3*、OA4*	

● 付属品: ニードルチップ×5個、ニードルチップキャップ×5個

※ オペークで遮蔽性の高い色調です。

クリアフィル® AP-X

管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン
医療機器承認番号:20500BZZ00858000
VI049歯科充填用材料 I (1) 複合レジン系

- 前臼歯共用の光重合型コンポジットレジンです。
- 85.5wt%もの無機フィラーが高密度に充填されているので破折、磨耗が少なく耐久性に優れています。



■レジン充填材 単品

注文番号	色調
202410721~202410731	A2、A3、A3.5、A4、B2、B3、B4、C2、C3、C4、XL
202410742	OA3*

● 容量: 各4.6 g / 2.0 mL×1本 ※ オペークで遮蔽性の高い色調です。

クリアフィル® ST オペーカ

管理医療機器 歯科用色調遮蔽材料
医療機器承認番号:16200BZZ00980000
VI049歯科充填用材料 I (1) 複合レジン系

- 変着色歯や金属などに使用する色調遮蔽用のコンポジットレジンです。
- 糸引きも少なくインスツルメントなどでの塗布、充填が容易です。



■単品

注文番号	色調	容量
202120637	US	各4 g
202120636	L	

クリアフィル® FII

管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン 医療機器承認番号:21800BZZ10037000
VI050歯科充填用材料 II (1) 複合レジン系

- 前歯部修復用化学重合型コンポジットレジンです。



■単品

注文番号	品名	容量
202120123	① キャタリストペースト	各15.0 g
202120124	② ユニバーサルペースト	

■レジン1-1

注文番号
202120125

● 内容: キャタリストペースト(15.0 g)×1個、ユニバーサルペースト(15.0 g)×1個

■セット

(クリアフィル® FIIニューボンド)管理医療機器 歯科用充填材料キット 医療機器承認番号:15800BZZ01539000

注文番号
202120120

- 内容: クリアフィル® FII / キャタリストペースト(15.0 g)×1個
ユニバーサルペースト(15.0 g)×1個
クリアフィル® ニューボンド / ユニバーサル液(6 mL)×1本
キャタリスト液(6 mL)×1本
クリアフィル® エッチング エージェント / エッチング材(6 mL)×1本
- 付属品: 練和紙(F)×2個、練和棒(K)×100本、スポンジ小片(F)×1箱、混和皿(B)×1個、小筆(S)×1本

クリアフィル® SC-II

管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン 医療機器承認番号:16100BZZ01308000
VI050歯科充填用材料 II (1) 複合レジン系

- 化学重合型低粘度コンポジットレジンです。



■単品

注文番号	品名	容量
202120183	① キャタリストペースト	
202120184	② ユニバーサルペースト / 乳歯色	各7.5 g
202120194	③ ユニバーサルペースト / 永久歯色	

CORE BUILD-UP 支台築造材料

クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE

管理医療機器 歯科用支台築造材料 医療機器認証番号:223ABBZX00086000
V1052複合レジン 築造用(硬化後フィラー60%以上)

オートミックスタイプのデュアルキュア型 支台築造用コンポジットレジンです。

- 根管内へ填入しやすく、また、築盛時は垂れにくいペースト性状を有しています。
- 専用のミキシングチップとガイドチップで直接口腔内へ充填可能です。
- 「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2」と組み合わせると接着ステップもよりスピーディーに行えます。

LOOK P.6 「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2」を紹介しております。

■単品

注文番号	品名
202420942	デンチン
202420943	ホワイト

- 内容:Aペースト(8.9g/4.5mL)+Bペースト(9.0g/4.5mL)…1本
- 付属品:ミキシングチップ×20個、ガイドチップ(太)×10個、ガイドチップ(細)×10個

■3本パック

注文番号	品名
202420947	デンチン

- 内容:Aペースト(8.9g/4.5mL)+Bペースト(9.0g/4.5mL)…3本
- 付属品:ミキシングチップ×20個、ガイドチップ(太)×10個、ガイドチップ(細)×10個

■単品



■3本パック




■付属品(単品包装)

注文番号	品名	入数
202410031	① ミキシングチップ	20個
202410029	② ガイドチップ(太)	20個
202410030	③ ガイドチップ(細)	20個

良好な賦形性

「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」は当社独自のフィラー表面処理技術を採用することで、ペーストが注ぎやすく垂れにくくなりました。

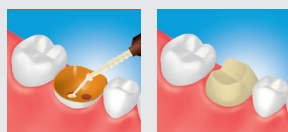

●ペーストの賦形性




組み合わせ自由

「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」は歯質との識別に優れた「ホワイト」、審美修復に適した「デンチン」の2種類の色調から選択できます。ガイドチップは症例に応じて「太」と「細」から選択できます。さらに、押し出しには手押しとディスペンサー(別売)から選択できます。



根管内も良好な重合

「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2」は「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」と接触すると硬化しますので根管内にも使用することが可能です。
※「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2」には、必ず光照射をしてください。

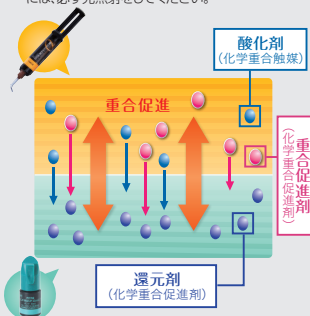

クリアフィル® ディスペンサー

一般医療機器 歯科用練成器具
製造販売届出番号:15B1X10001990001

- 当社のオートミックスタイプのシリンジを取り付けて使うディスペンサーです。




■単品

注文番号
202420832

グラスファイバー+無機フィラー配合による高耐久性。
レジンコアとの機械的嵌合を考慮した独自形状を実現しました。


〔形状〕

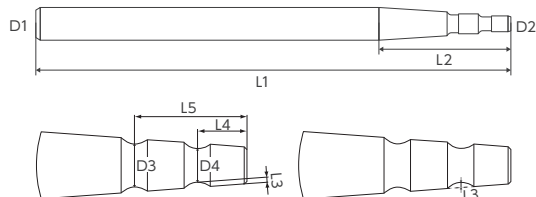

単位:mm

品名	L1	L2	L3	L4	L5
No.2	22	5	0.07	0.95	2.15
No.3			0.1		
No.4					
No.5					
No.6		6			

品名	D1 (φ)	D2 (φ)	D3 (φ)	D4 (φ)
No.2	0.84	0.6	0.56	0.5
No.3	1.04		0.65	0.54
No.4	1.24		0.67	0.52
No.5	1.44	0.7	0.82	0.64
No.6	1.64	0.8	0.9	0.73

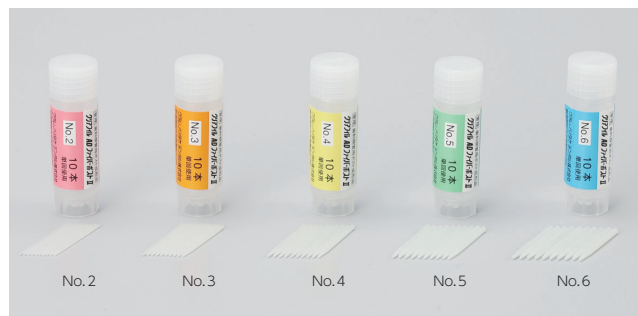

■単品(10本入)

注文番号	品名
202440240~202440244	No.2、No.3、No.4、No.5、No.6

●各10本/1袋


■単品(30本入)

注文番号	品名
202440250~202440254	No.2、No.3、No.4、No.5、No.6

●各30本/1袋

高耐久性

無機フィラー配合によるマトリックス部の強化によって、
耐久性向上が期待されます。

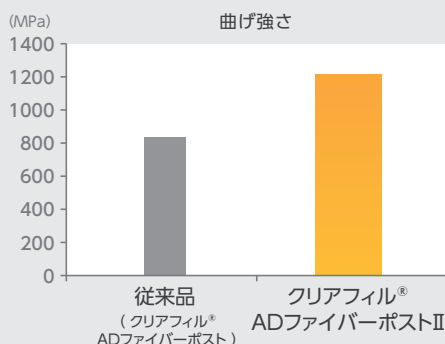

ポストの長さ22 mm

試適時などにピンセットで
把持しやすい長さです。
(※従来品18 mm → 22 mmへ延長)



独自形状

根尖側に溝を付与することにより、**レジンコアとの
機械的維持力が向上**しました。

幅広いサイズ

下顎前歯に対応する**No.2(直径0.84 mm)**から**No.6(1.64 mm)**を
ラインナップ。症例に応じた選択可能です。

※形成用ドリルは、ピーソリーマーをご使用ください。

X線造影性

アルミニウム2 mm相当以上のX線造影性を有し、
試適時の確認や予後の診断に有効

光透過性

光透過性を有し、
歯質に近似した色調で築造可能

曲げ弾性率

金属製ポスト*と比較し、
象牙質に近似した曲げ弾性率

※「ADポストII」 管理医療機器 歯科根管用ポスト成形品
医療機器承認番号:20600BZZ01004000

「クリアフィル® ADファイバーポストII」の
表面処理方法

根管などへの試適を行った場合、「カタナ®クリーナー」(10秒以上こすり塗り、水洗、乾燥)、あるいはエタノールを染み込ませたガーゼやワッテ等での清掃を行います。



① ポストの接着前処理

リン酸エッチング

リン酸エッチング材(例えば「K エッチャント GEL」)塗布・5秒後、水洗・乾燥



② セラミックス処理材の塗布

「クリアフィル®セラミックプライマー
プラス」塗布・乾燥



クリアフィル® フォトコア®

管理医療機器 歯科用支台築造材料キット 医療機器承認番号:16100BZZ01450000
V1052複合レジン 築造用（硬化後フィラー60%以上）

光重合型支台築造用のコンポジットレジンです。

- 硬化後は象牙質と同様の切削感で支台歯形成が行えます。

■レジン充填材3本組

注文番号		
202120355		

- レジン充填材（4.4 g）×3本



クリアフィル® DCコア ペースト

管理医療機器 歯科用支台築造材料 医療機器承認番号:21200BZZ00359000
V1052複合レジン 築造用（硬化後フィラー60%以上）

デュアルキュア型支台築造用のコンポジットレジンです。

- 練和後はCRシリンジなどで充填ください。

■ペースト1-1

注文番号		
202120375		

- 内容:キャタリスト（13.3 g／6.5 mL）×1本
-
- ユニバーサル（14.6 g／6.5 mL）×1本

■単品

注文番号	品名	容量
202120373	① キャタリスト	13.3 g／6.5 mL
202120374	② ユニバーサル	14.6 g／6.5 mL



ペースト1-1

クリアフィル® コア

管理医療機器 歯科用支台築造材料 医療機器承認番号:21800BZZ10036000
V1052複合レジン 築造用（硬化後フィラー60%以上）化学重合型の支台築造用
コンポジットレジンです。

■レジン1-1

注文番号		
202120315		

- 内容:キャタリストペースト（23 g）×1個
-
- ユニバーサルペースト（21 g）×1個

■単品

注文番号	品名	容量
202120313	① キャタリストペースト	23 g
202120314	② ユニバーサルペースト	21 g



レジン1-1

OTHER CHAIRSIDE MATERIALS

その他の診療材料

ティースメイト® APペースト

管理医療機器 歯科用知覚過敏抑制材料 医療機器認証番号:226ABBZX00010000

リン酸四カルシウム(TTCP)と無水リン酸水素カルシウム(DCPA)を主成分とする知覚過敏抑制材です。
硬化後はハイドロキシアパタイトとなり、知覚過敏抑制効果に優れています。

使いやすさを追求したペーストタイプの
知覚過敏抑制材です。
治療処置後の「シミ止め」に!



飛び散りにくい
ペースト性状

良好な
生体親和性と
知覚過敏抑制
効果

フッ化ナトリウム
配合 (950ppm)

■単品

注文番号	容量
202410300	30 g

ティースメイト® ディセンシタイザー

管理医療機器 歯科用知覚過敏抑制材料 医療機器認証番号:224ABBZX00014000

国内外で臨床評価報告されています。
少数歯の知覚過敏を主訴とする患者さんに!

1-1セット



■1-1セット

注文番号	
202410211	

- 内容:粉材 (4 g)×1本、液材 (3.2 mL)×1本
- 付属品:混和皿 (B)×1個、計量スプーン (TD)×1本、
アプリケーターブラシ (ファイン<シルバー>)×50本

■単品

注文番号	品名	容量
202410218	粉材	4 g
202410219	液材	3.2 mL
202410220	計量スプーン (TD)	1本入
202410024	アプリケーターブラシ (ファイン<シルバー>)	50本

ケース別材料選択ガイド (◎:おすすめ ○:使用可能です ー:使用できません)

	少数歯	多数歯	機械的歯面清掃 (PMTC) 後	スケーリング / ルートプレーニング後	漂白後	形成象牙質
「ティースメイト® APペースト」	○	◎	◎	◎	◎	ー
「ティースメイト® ディセンシタイザー」	◎	○	○	○	○	◎
塗布器具 (例)	平滑面	歯周ポケット・ 歯頸部・窩洞※	歯間	歯間	歯間	歯間

※「ティースメイト® APペースト」は非該当

SA アタッチメント for アライナー

管理医療機器 歯科矯正用レジン材料(高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材) 医療機器認証番号:304ABBZX00022000

ボンディング材不要のアライナー矯正アタッチメント作製用材料です。

- 自己接着型のアタッチメント作製用材料のため、ボンディング材を使用せずステップが簡単に。
- 流し込みやすく、その場にとどまるペースト性状です。
- 適度な蛍光性を有しているため、アタッチメント除去時の高い識別性を確保できます。

本品の使用用途は「カスタムメイドアライナー型矯正装置用アタッチメントの作製及び接着」です。
 本品の使用用途以外の使用用途、例えば「歯質への充填修復」や「歯冠修復物及びコンポジットレジン破折の補修」等には、決して使用しないでください。

注文番号	容量
202430933	2.5 g/1.3 mL

- 色調:U
- 付属品:ニードルチップ(N)×5個、
ニードルチップキャップ×5個



クラリベース® キット

管理医療機器 義歯床用硬質裏装材(義歯床用接着材料) 医療機器認証番号:220ABBZX00334000

硬質の義歯床用裏装材です。

- フッ素系メタクリル酸系モノマーが含まれており汚れを寄せ付けにくいのが特長です。
- 混和後のペーストは重合前後で透明感が変わり硬化終了を視覚的に確認することができます。
- 各種義歯床*にお使いいただけます。

*アクリルレジン床、スルホン義歯床(ポリカーボネート樹脂製に限る)及び、金属床
 ※金属に接する面がある場合には金属接着性プライマーを塗布してください。

■セット

注文番号	品名
202120780	ノーマル(ライブピンク)
202120781	ノーマル(ピンク)
202120782	ファースト(ライブピンク)

- 内容:クラリベース® 粉剤(80 g)×1本
液剤(38 mL)×1本
クラリベース® 接着材(20 mL)×1本
- 付属品:粉剤用計量カップ(ノーマルまたはファースト)×1個、粉剤用付属キャップ×1個、スポイト×1個、
小筆(CMO)×1本、小分け用カップ×1個、ラバーカップ×1個、スパチュラ×1個

■クラリベース® 接着材

管理医療機器 義歯床用接着材料 医療機器認証番号:220ABBZX00375000

注文番号	容量
202120789	20 mL



■クラリベース®

管理医療機器 義歯床用硬質裏装材 医療機器認証番号:220ABBZX00374000

注文番号	品名/色調	容量
202120786	粉剤/ピンク	80 g
202120785	粉剤/ライブピンク	80 g
202120787	液剤/ノーマル	38 mL
202120788	液剤/ファースト	38 mL

- 付属品(粉剤のみ):粉剤用付属キャップ×1個

ティースメイト® F-1 2.0 キット

管理医療機器 高分子系歯科小窩裂溝封鎖材 医療機器承認番号:21600BZZ00636000
V1049歯科充填用材料 I (1) 複合レジン系

光重合型シーラント材です。

- 適度な流動性で小窩裂溝深くまで届きます。

■セット

注文番号	品名
202420790	レジン充填材/白色(不透明)(2.5 mL)×2本 Kエッチャント GEL(6.0 mL)×1本

- 付属品:アプリークーター 25個×2袋、小筆ホルダー(白)×1本、ディスポ小筆ブラシ(白)×50個、
混和皿(TM)×10枚

■ティースメイト® F-1 2.0

管理医療機器 高分子系歯科小窩裂溝封鎖材 医療機器承認番号:21600BZZ00635000

注文番号	色調	容量
202420765	無色	各2.5 mL
202420775	赤色	
202420795	白色(不透明)	

- 付属品:アプリークーター×5個

■セット



クリアフィル® CRインレー

管理医療機器 歯科間接修復用コンポジットレジンキット 医療機器承認番号:16300BZZ00604000
V1049歯科充填用材料 I (1) 複合レジン系

歯科間接修復用コンポジットレジンです。

- 「クリアフィル® CRインレー」で製作したレジンインレーは保険請求が可能です。

■単品

注文番号	品名	色調	容量
202120721~ 202120726	レジン充填材	US、UY、UL、G、 B、XL	各4.5 g/ 2.0 mL
202120260	CRセップ		4 mL



CAD/CAM MATERIALS

CAD/CAM材料

ノリタケ カタナ® ジルコニア

管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス 医療機器認証番号:223AFBZX00185000

保険適用外

「ノリタケ カタナ® ジルコニア」は90分焼成※が可能です。 ※800℃で取り出した場合・3本ブリッジまで

「ノリタケ カタナ® ジルコニア」(UTML/STML/YML/HTML PLUS/HT)は約90分で焼成することが可能です。必ず電子添文等をご確認の上でご利用ください。

工程	昇降温速度	焼成温度(℃)	保持時間
1	50℃/分	室温→1400	—
2	4℃/分	1400→1500	—
3	10℃/分	1500→1560	—
4	—	1560	16分
5	-50℃/分	1560→室温	—

工程	昇降温速度	焼成温度(℃)	保持時間
1	35℃/分	室温→1515	—
2	—	1515	30分
3	-45℃/分	1515→室温	—

短時間焼成

通常焼成

工程	昇降温速度	焼成温度(℃)	保持時間
1	10℃/分	室温→1550	—
2	—	1550	2時間
3	-10℃/分	1550→室温	—

工程	昇降温速度	焼成温度(℃)	保持時間
1	10℃/分	室温→1500	—
2	—	1500	2時間
3	-10℃/分	1500→室温	—

LOOK


P.33「ノリタケ カタナ F-2N」を紹介しております。



ノリタケ カタナ® F-2 N
一般医療機器
歯科技工用ポーセレン焼却炉
医療機器届出番号:
25B2X10003000014
製造販売元:
SKメディカル電子株式会社
滋賀県長浜市七条町305-1

※HT, LTは陶材焼付用の単色ジルコニアシリーズです。

ディスク YML

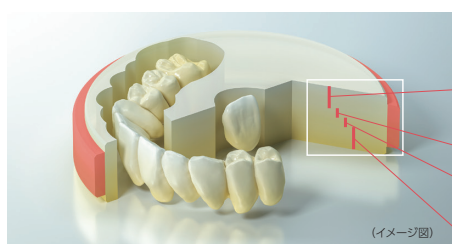


測定条件:無着色ジルコニア(原材料)を使用
※1 ISO6872:2015準拠(3点曲げ試験)、試験片サイズ:3×4×40mm
※2 全光線透過率、光源:D65、試験片厚み:1.0mm
クラレノリタケデンタル(株)測定:条件により数値は異なります。

レイヤー層	曲げ強さ※1	透光性※2
エナメル層 (35%)	750 MPa	49%
ボディ層1 (15%)	1000 MPa	47%
ボディ層2 (15%)	1100 MPa	45%
ボディ層3 (35%)		

(%)内はディスクの占める各レイヤー層の厚み割合

ディスク UTML・STML・HTML PLUS

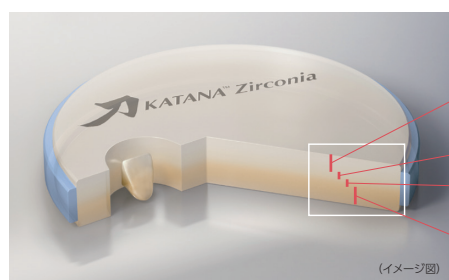

レイヤー層	透光性
エナメル層 (35%)	49%
グラデーション層1 (15%)	47%
グラデーション層2 (15%)	45%
ボディ層 (35%)	

(%)内はディスクの占める各レイヤー層の厚み割合

※UTML,STML,HTML PLUSは、各層の透光性・機械的特性(曲げ強さ)は同じです。透光性・機械的特性(曲げ強さ)の値はP25の表をご確認ください。

UTML Ultra Translucent Multi Layered

ディスクの厚み	14 mm	18 mm
---------	-------	-------

●UTMLは、シリーズの中で最も高い透光性を持ち、前歯クラウンやラミネートベニア等の審美修復に適しています。「スタンダードシェード」、「エナメルシェード」の2種類のタイプに、ステインを併用することで、さらに透明感を際立たせた修復物が製作できます。

注文番号	色調	厚み
202270646	スタンダードシェード A1, A2, A3, A3.5, A4	t14 mm
	エナメルシェード EA1, ENW	
202270647	スタンダードシェード A1, A2, A3, A3.5, A4	t18 mm
	エナメルシェード EA1, ENW	

●直径:98.5 mm

STML Super Translucent Multi Layered

ディスクの厚み	14 mm	18 mm	22 mm
---------	-------	-------	-------

●STMLは、透光性と機械的特性のバランスのとれたシリーズです。色調のみならず透光性のグラデーションを持ち、支台歯色調による修復物の色調変化を抑えたい症例や、機械的特性を生かした白歯単冠クラウンの製作に適しています。

注文番号	色調	厚み
202270636	スタンダードシェード NW, A1, A2, A3, A3.5, A4	t14 mm
202270637	スタンダードシェード NW, A1, A2, A3, A3.5, A4	t18 mm
202270638	スタンダードシェード NW, A1, A2, A3, A3.5, A4	t22 mm

●直径:98.5 mm

YML Yttria Multi Layered

ディスクの厚み	14 mm	18 mm	22 mm
---------	-------	-------	-------

●YMLは、異なる色調、透光性、機械的強度を有する原料を積層したジルコニアです。独自に開発したジルコニア原料と製造方法に改良を加え、自然なグラデーションと共に、優れた機械的特性と透光性を融合させました。これにより、インレーからロングスパンブリッジまで、幅広い修復物が製作できます。

注文番号	色調	厚み
202270653	スタンダードシェード NW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3	t14 mm
202270654	スタンダードシェード NW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3	t18 mm
202270655	スタンダードシェード NW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3	t22 mm

●直径:98.5 mm



推奨用途




UTML ▶

STML ▶

YML ▶

HTML PLUS ▶

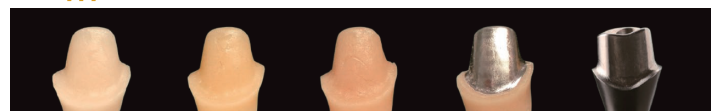単色の **HT** は、陶材を築盛するフレーム用途に適しています。

HT ▶

目標とする色調に応じシェードベース及びオページャスボディを用い下地色の調整を行う。

「セラビアン®ZR」とのマッチング

LOOK


P.38「セラビアン®ZR」を紹介しております。

●「ノリタケ カタナ® ジルコニア」は、「セラビアン® ZR」と合わせてお使いいただくことで、より審美性の高い修復物を製作できます。また、繰り返し焼成による熱膨張の変動が少なく、ジルコニアフレームとの接着力が優れています。




透光性

(無着色ジルコニア原材料)

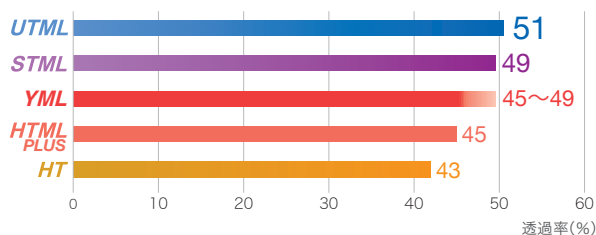測定条件：全光線透過率、光源：D65、試験片厚み：1.0 mm
クラレノリタケデンタル測定：条件により数値は異なります。

曲げ強さ

(無着色ジルコニア原材料)

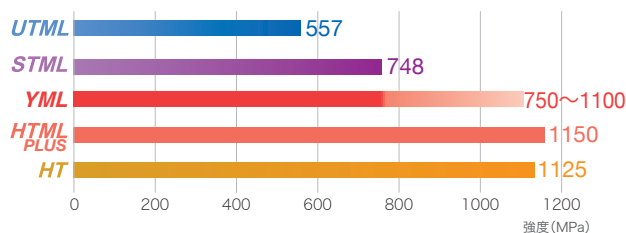測定条件：ISO6872：2015準拠(3点曲げ試験)、試験片サイズ：3×4×40 mm
クラレノリタケデンタル測定：条件により数値は異なります。

HTML PLUS High Translucent Multi Layered PLUS

ディスクの厚み 14 mm 18 mm 22 mm

●優れた機械的特性を有し、ロングスパンブリッジなど強度を必要とする症例にも対応可能です。

注文番号	色調	厚み
202270649	スタンダードシェード NW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3	t14 mm
202270650	スタンダードシェード NW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3	t18 mm
202270651	スタンダードシェード NW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3	t22 mm

●直径:98.5 mm

HT High Translucent


ディスクの厚み 14 mm 18 mm 22 mm 26 mm

●フレーム用にカラーリングされたモノカラータイプ。

注文番号	色調	厚み
202270623~202270625	HT10, HT12, HT13	t14 mm
202270626~202270628		t18 mm
202270629~202270631		t22 mm
202270632~202270634		t26 mm

●直径:98.5 mm

ノリタケ カタナ® ワックス

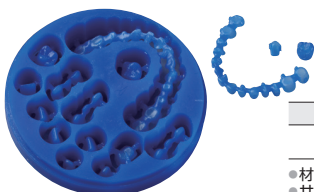一般医療機器 歯科用キャスティングワックス
医療機器届出番号:23B1X10001C7015[製造販売元] 山八歯材工業株式会社
愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1

注文番号	入数
202270518	1 個

●材質:ポリエチレン、その他 ●色調:ブルー
●サイズ:φ98.5×t20 mm

ノリタケ カタナ® レジン

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料
医療機器認証番号:225AFBZX00031000[製造販売元] 山八歯材工業株式会社
愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1

●プロビジョナルレストレーションの製作が行えるディスクです。

注文番号	入数
202270450~202270452	各1 個

●材質:PMMA (アクリル樹脂)、その他
●色調:A1, A2, A3 ●サイズ:φ98.5×t20 mm

ボンディング材

セメント

接着関連材料

コンボジット
充填用
レジン

支台築造材料

診療材料
その他のCAD/CAM
材料CAD/CAM
機械硬質レジン
歯冠用

歯科用陶材

研削・研磨材

埋没材/石膏

付属品

多彩な色調表現が可能なカラーリングリキッド
「ノリタケ カタナ® ジルコニア」マルチレイヤーシリーズに
適した色調設計



■単品

注文番号	色調	容量	入数
202270691	A plus, B plus, C plus, D plus, BLUE, GRAY, VIOLET, BROWN, ORANGE, PINK, WHITE, OPAQUE	12 mL	各1本

■ベーシックキット

注文番号	色調	容量	入数
202270690	A plus, B plus, C plus, D plus, BLUE, GRAY, VIOLET, BROWN, ORANGE, PINK, WHITE, OPAQUE	12 mL x12本	各1本

■リキッド用筆ペン

注文番号
202270692



シンプルな色調ラインナップ

「エスティック カララント®」は用途と目的に応じて使い分け可能な全12色を備えており、色調選択や在庫管理の負担を軽減します。

また、全色、筆による1～3回の重ね塗りにより、色調の濃淡の調整が可能ですので、色調表現の幅が広がります。

A plus	BLUE	BROWN	PINK	WHITE
B plus	GRAY	ORANGE		OPAQUE
C plus	VIOLET			
D plus				



WHITE と OPAQUE


WHITE またはOPAQUEをクラウン内面に塗布・焼成することにより、ジルコニア補綴装置に遮蔽性を付与できます。インプラントやメタルコア、変色した支台歯のマスキングに対応可能です。OPAQUE は遮蔽性を付与したい症例に対応し、WHITE は遮蔽性に加えてクラウンの明度を向上させることが可能です。また、「エスティック カララント®」のWHITE、OPAQUEは、組成の最適化により、適合への影響が少なく、十分な遮蔽性を付与することができます。

	WHITE	OPAQUE
塗布領域	内側 / 外側※1	内側
焼成後色調	白色	淡い黄色
遮蔽能力	✓	✓
明度	上がる	変わらない
塗布回数目安	1～3回	

※1 色が濃いため、ジルコニア仮体の外側に塗布する場合は、注意してください。



OPAQUEを内面全体に塗布、焼結後の良好な適合性

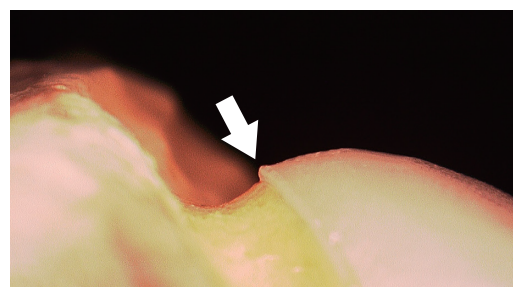

WHITEを内面全体に塗布、焼結後の良好な適合性

カタナ® アベンシア® ブロック 2

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料 医療機器認証番号:302AFBZX00019000
V1058CAD/CAM冠用材料(II)

ユニバーサル用

CAD/CAM冠用材料(II)

※保険適用には条件があります。

OEは、従来の単層シェードと比較し、透明性が向上しました。
インレーの装着時に、窩洞マージンの移行部が目立ちにくいシェードです。
また、従来比で彩度も高く、口腔内での白浮きを抑制しています。

小白歯対応
CAD/CAM冠用材料(II)
ユニバーサル用

■切削加工用レジン 単品

	注文番号	種別	色調	入数
	202270722	12	A2 LT、A3 LT、A3.5 LT	各5個
	202270723	12	A3 OP	
単層	202270728	12	OE	各5個
	202270724	14L	A2 LT、A3 LT、A3.5 LT	
	202270725	14L	A3 OP	各5個
ML	202270726	12	A2 ML、A3 ML、A3.5 ML	各5個
	202270727	14L	A2 ML、A3 ML、A3.5 ML	各5個

※金属製台座の切欠き側がボディ層、反対側がエナメル層です。CAD/CAM 装置の設定により、エナメル層とボディ層が逆方向に加工される可能性があります。設計・加工前に、加工の可否をCAD/CAM装置の購入先にご確認ください。

	OE	A3 LT	A3 ML
硬化板			
透明度	26%	16%	15%~18% (デンチン〜エナメル)
彩度	33	27	38~29 (デンチン〜エナメル)

測定条件:
測定装置:分光測色計
試験片厚み(彩度) 1.20 ± 0.01mm (C*)
(透明度) 1.20 ± 0.01mm
※白および黒背景のL*値の差(ΔL*(W/B))<データ測定>
クラレノリタケデンタル株式会社
測定条件などにより数値は異なります。

カタナ® アベンシア® P ブロック

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料 医療機器認証番号:229AFBZX00091200
V1058CAD/CAM冠用材料(III)

ユニバーサル用

CAD/CAM冠用材料(III)

※保険適用には条件があります。

CAD/CAM 冠 大白歯修復に
対応した高強度ブロックです。

■切削加工用レジン 単品

注文番号	種別	色調	入数
202270720	12	A2 LT, A3 LT, A3.5 LT	各5個
202270721	14	A2 LT, A3 LT, A3.5 LT	

大白歯対応
CAD/CAM冠用材料(III)

大白歯咬合に耐えうる強度

当社独自の製造法により、特性の異なる数種類のフィラーを高密度に配合。優れた曲げ強度に加えて、高い曲げ弾性率を有することで、大白歯における咬合圧に対してもたわみにくい特性が期待されます。

37℃、水中浸漬7日後
曲げ強度:265 MPa測定条件:JDMAS 245:2020
(データ測定:クラレノリタケデンタル株式会社)37℃、水中浸漬7日後
曲げ弾性率:18 GPa測定条件:試験片サイズ14.0×4.0×1.2mm、37℃、1週間水中保管
オートグラフAG-I 100kN
(C39島津製作所 ロードセル10kN使用)
スパン12mm、3点曲げ、クロスヘッドスピード1.0mm/min
<データ測定>
クラレノリタケデンタル株式会社
測定条件などにより数値は異なります。

カタナ® アベンシア® N

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料 医療機器認証番号:301AFBZX00015000
V1058CAD/CAM冠用材料(IV)

ユニバーサル用

CAD/CAM冠用材料(IV)

※保険適用には条件があります。

独自の製造技術による
シームレスな
グラデーションが特長の
マルチレイヤーブロックです。

■切削加工用レジン 単品

注文番号	種別	色調	入数
202270729	14L	ML(A1, A2, A3, A3.5, B1, B2)	各5個

前歯対応
CAD/CAM冠用材料(IV)
ユニバーサル用

シームレスなマルチレイヤー

エナメル色、ボディ色を有し、間に中間色を含む積層構造のブロックです。
独自の製造法で、エナメル色からボディ色にかけて、彩度と透明度が目目なく移行的に変化するマルチレイヤーを実現しました。


【色見本】※「ユニバーサル用」のみ




「カタナ® アベンシア®」シリーズは、用途に合わせた3タイプをラインナップしています。

機能区分名 (2024年6月1日現在)	保険適応範囲	製品名	種別	サイズ	色調							
					A1	A2	A3	A3 OP	A3.5	B1	B2	OE
II	小白歯	カタナ® アベンシア® ブロック 2	単層	12								
				14L								
			ML	12								
				14L								
III	大白歯	カタナ® アベンシア® P ブロック	—	12								
				14								
IV	前歯	カタナ® アベンシア® N	ML	14L								

製品規格

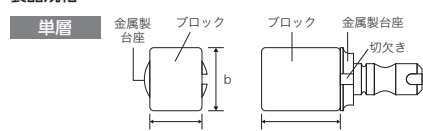

※使用に際しては金属製台座形状をご確認ください。

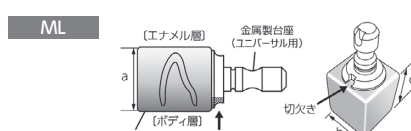使用に際しては、金属製台座形状をご確認ください。また、ML(マルチレイヤー)は金属製台座の切欠き側がボディ層、反対側がエナメル層です。
CAMソフトの仕様により、エナメル層とボディ層が逆方向に加工される可能性があります。加工前にCAMソフト取り扱いメーカーにご確認ください。

【形状】

(単位:mm)

種別	a軸	b軸	c軸
12	10	12	15
14	12	14	18
14L	14.5	14.5	18

各種製品によってサイズが異なります。

CAD/CAM MACHINES

CAD/CAM機械



スキャナー

カタナ® デンタルスキャナー F8

一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 医療機器届出番号:15B1X10001290016

使いやすさと性能を
追求したデザイン




カメラ解像度
500万画素
4台

精度
(ISO12836)
4 μm

スキャン時間
(フルアーチ)
9秒

スキャン工程の効率化 【デュアルスキャン】

2つの台座を活用し、最小限の操作で上下顎の模型をスキャンできます。より少ない時間、より少ない操作で多くの作業を効率的に実行できます。

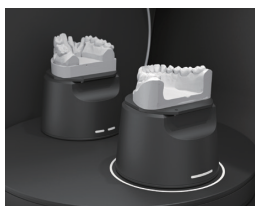

デュアルスキャン



カメラアームが可動

術者目線のデザイン

【カメラアームが可動／咬合器の平面設置が可能】

可動するカメラアームと、水平移動する台座により、スキャン時における模型の落下リスクを低減します。開放的な間口を確保することにより、模型や咬合器の設置が容易になりました。

注文番号	
202270310	
寸法(mm)	450(幅)×400(高さ)×450(奥行)
重量(kg)	17
カメラ解像度/台数	500万画素/4台
スキャン時間(全歯列弓)	9秒
精度(ISO12836)	4 μm
光源	青色LEDマルチライン
対応デザインソフト	Dental System Premium Dental System Complete Restorative
その他特長	Articulator plate 付属 マルチダイスキャン テクスチャースキャン(カラー) 支台歯を着脱せずにスキャン可能 デュアルスキャン PCとEthernet接続

※1 本体価格の他、ライセンス費用が必要です。詳しくは営業担当者に
お問い合わせください。


※2 Dental System Premiumを搭載した価格となります。

咬合用オプションを追加

F8 E4 E3 E2



Articulator plate(F8)

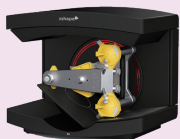

Articulator Holder
(E4, E3, E2)

咬合器にセットした状態でバイト情報の
スキャンが可能です。

※Dental System ver.2018以上(F8のみ
Ver.2.22.2以上)で使用可能

マルチダイスキャン

F8 E4 E3

オプション: E2

マルチダイフィクスチャーを使用すること
で多数歯症例のような場合に支台歯
の情報を1歯ずつではなく、最大7歯分ま
とめてスキャンできる機能です。

最大 7 歯分
まとめてスキャン

マルチダイフィクスチャー

注文番号	
202270435	




テクスチャースキャン


カラー: F8 E4 E3

モノクロ: E2

模型に描記した設計線のスキャンが
できる機能です。

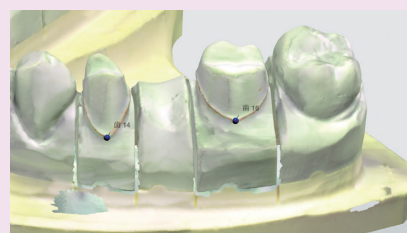

テクスチャースキャン(カラー)

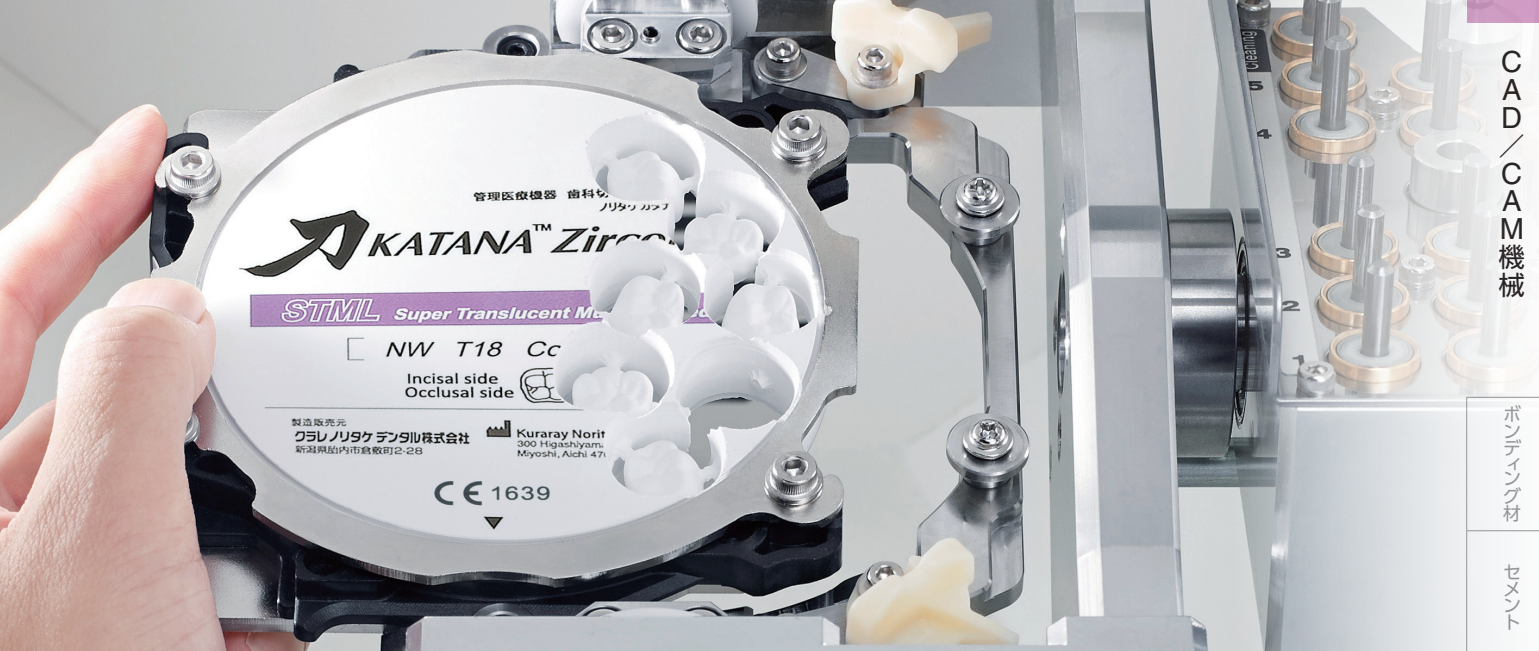

カタナ® デンタルスキャナー E4

一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器届出番号:15B1X10001290013



注文番号	202270455
寸法(mm)	366(幅)×312(高さ)×296(奥行)
重量(kg)	12.9
カメラ解像度/台数	500万画素/4台
スキャン時間(全歯列弓)	9秒
精度(ISO12856)	4 μm
光源	青色LEDマルチライン
対応デザインソフト	Dental System Premium Dental System Complete Restorative
その他特長	Articulator Holder 付属 マルチダイスキャン テクスチャースキャニング(カラー) 支台歯を着脱せずにスキャン可能

※1 本体価格の他、ライセンス費用が必要です。詳しくは営業担当者にお問い合わせください。
※2 Dental System Premiumを搭載したメーカー希望小売価格となります。
※3 Dental System Crown and Bridgeを搭載したメーカー希望小売価格となります。

カタナ® デンタルスキャナー E3

一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器届出番号:15B1X10001290012



注文番号	202270459
寸法(mm)	366(幅)×312(高さ)×296(奥行)
重量(kg)	12.9
カメラ解像度/台数	500万画素/2台
スキャン時間(全歯列弓)	18秒
精度(ISO12836)	7 μm
光源	青色LEDマルチライン
対応デザインソフト	Dental System Premium Dental System Complete Restorative
その他特長	Articulator Holder 付属 マルチダイスキャン テクスチャースキャニング(カラー)

カタナ® デンタルスキャナー E2

一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器届出番号:15B1X10001290011



注文番号	202270328
寸法(mm)	366(幅)×312(高さ)×296(奥行)
重量(kg)	12.9
カメラ解像度/台数	500万画素/2台
スキャン時間(全歯列弓)	24秒
精度(ISO12836)	10 μm
光源	青色LEDマルチライン
対応デザインソフト	Dental system Premium Dental System Crown and Bridge
その他特長	Articulator Holder 付属 マルチダイスキャン(オプション) テクスチャースキャニング(モノクロ)

デザインソフト機能比較

対応機種	F8 E4 E3	F8 E4 E3 E2	E2
パッケージ	Dental System Complete Restorative	Dental System Premium	Dental System Crown and Bridge
コーピング	○	○	○
ブリッジ/クラウン	○	○	○
インレー / アンレー / ラミネートベニア	○	○	○
ダブルスキャン	○	○	○
テンポラリークラウン	○	○	—
テーブルトップ & オーバーレイ ^{※4}	○	○	—
テレスコプ ^{※4}	○	○	—
診断用ワックスアップ	○	○	—
歯肉 ^{※4}	○	○	—
カスタムアパットメント ^{※4}	○	要アドオンソフト ^{※5}	要アドオンソフト ^{※5}
フルデンチャー ^{※4}	○	要アドオンソフト ^{※5}	要アドオンソフト ^{※5}
パーシャルデンチャー ^{※4}	○	要アドオンソフト ^{※5}	要アドオンソフト ^{※5}
模型 ^{※4}	○	要アドオンソフト ^{※5}	要アドオンソフト ^{※5}
サージカルガイド ^{※4}	要アドオンソフト ^{※5}	要アドオンソフト ^{※5}	要アドオンソフト ^{※5}

※4 当社で提供する材料が無い機能となります。 ※5 機能の詳細は販売店にご確認ください。

ボンディング材

セメント

接着関連材料

コンボジット
充填用
レジン

支台築造材料

診療材料
その他のCAD/CAM
材料CAD/CAM
機械硬質レジン
歯冠用

歯科用陶材

研削/研磨材

埋没材/石膏

付属品

歯科用ミリングマシン MD-500

一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 医療機器届出番号:13B2X10330000003

歯科用ミリングマシン MD-500S

一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 医療機器届出番号:13B2X10330000004

[製造販売元]キャノン電子株式会社 東京都港区芝公園3-5-10

工業用加工機で培ったテクノロジーを応用 高い技術力に裏打ちされた高速・高精度5軸ミリングマシン

歯科用ミリングマシン MD-500、歯科用ミリングマシン MD-500Sはキャノン電子株式会社が工業用加工機で培った経験を活かして開発された歯科用ミリングマシンです。キャノン電子株式会社の高剛性思想を受け継ぎながら、より高速・高精度な加工、及び小型化と使いやすさを両立させ、デジタル歯科医療の向上を目指して製品化されました。



■ 歯科用ミリングマシン MD-500

注文番号
202270350



■ 歯科用ミリングマシン MD-500S

注文番号
202270352

■ 歯科用ミリングマシン MD-500、歯科用ミリングマシン MD-500S

外形寸法 (mm)	500(幅)×740(奥行)×680(高さ)
質量 (kg)	約110
電気規格	AC100V (50/60Hz)
設置環境	温度:0~40℃ 湿度:20~75%RH以下(結露のないこと)

※本装置を動作させるには集塵装置(別売)が必要です。
※別途、保守契約が必要です。詳しくは営業担当者にご確認ください。
※本体の使用にはエア圧0.6 MPa以上のコンプレッサーが必要となります。

上記脚注(*)は、歯科用ミリングマシン MD-500と歯科用ミリングマシン MD-500Sにて共通です。

主な付属品

ブロック固定プレート ディスク固定プレート



別売品

■ 増圧ユニット

注文番号
202270351



※エア圧0.6 MPa未満のコンプレッサーを使用の場合、増圧ユニットが必要です。増圧ユニット使用時はエア圧0.35 MPa以上のコンプレッサーで動作可能です。

高速切削加工


CAD/CAM冠 切削時間

最短 **9分**

※「カタナ® アベンシア® ブロック 2」
12サイズで小臼歯を1本切削した場合
※最短時間を表示
※「カタナ® ミリングバー」使用時

高剛性


X, Y, Z 軸を1フレームベースに集中配置することで高い剛性を実現。高速駆動してもドリルや加工物のたわみ・ブレを抑え、高精度な加工を行うことが可能です。

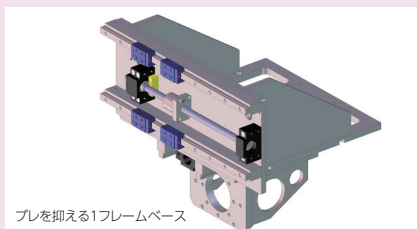

ブレを抑える1フレームベース

CAD/CAMレジンブロック最大12個装着可能


「カタナ® アベンシア® N」
「カタナ® アベンシア® ブロック 2」
「カタナ® アベンシア® P ブロック」
を最大12 個装着できる専用ジグにより、加工効率を最大化します。

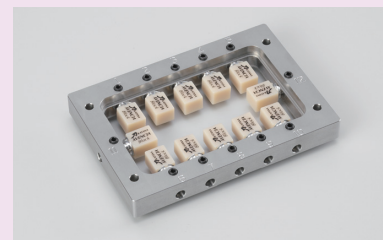

MD-500Sのみ C型ディスク固定プレートによる側方切削が可能

ディスクをO型ディスク固定プレート同等の強度で固定し、アンダーカット部分をディスクの側方からアプローチすることで、精密に加工することが可能です。

※C型ディスク固定プレートは、歯科用ミリングマシン MD-500Sのみ使用できます。また、歯科用ミリングマシン MD-500Sでは、O型ディスク固定プレートは使用できません。
※歯科用ミリングマシン MD-500Sには、別途、側方切削テンプレートが必要です。

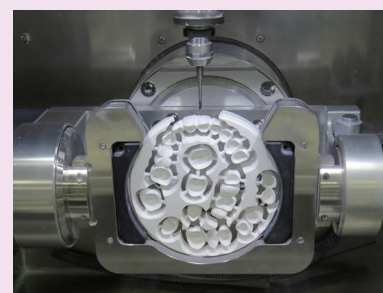

歯科用 CAD/CAMマシン DWX-53DC

一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 医療機器届出番号:22B3X10020000107

[製造販売元]DGSHAPE株式会社 静岡県浜松市浜名区新都田1-1-2




スタイリッシュ＆コンパクト

機体構造の設計を練り直し、ディスクチェンジャーを搭載しながらも従来品と比較してコンパクトなサイズを維持しています。
機体フロントに設置できるタブレットPCから本体の制御が可能です。

注文番号	202270330
外形寸法 (mm)	650(幅)×763(奥行) ×831(高さ) ※レギュレータ取付時の幅
質量 (kg)	約120
電気規格	AC100V 50/60Hz
消費電力 (W)	約250
設置環境	温度:5~40℃ 湿度:35~80% (結露のないこと)

※本装置を動作させるには集塵装置(別売)が必要です。
※別途、保守契約が必要です。詳しくは営業担当者にご確認ください。
※本装置では、圧縮空気が必要です。別途、コンプレッサーをご用意いただく必要があります。
※本装置のサポート期間は生産終了から6年となります。

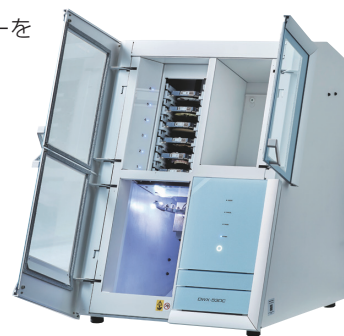

主な付属品



ピン付材料用アダプター



アダプター×6



オープンエッジアダプター

高速ディスクチェンジャー搭載

ディスクチェンジ時間を従来機種の半分以下に短縮しました。
最大100種類までのアダプターIDを管理できます。



パフォーマンス向上

フレーム剛性を強化、仕上がり面の品質や表面性状の再現性が向上しました。新設計のスピンドルは把持力を大幅に向上させ高負荷切削でも安定した加工を実現、またユーザーによる交換(目安2,000時間)が可能となりました。機体補正プログラムを強化。自動補正に加え手動補正を行うことで、加工精度がより向上します。オープンエッジアダプターと±35°まで拡張されたB軸を駆使することで、フルアーチ前歯部の仕上がりりが向上します。

歯科用 CAD/CAMマシン DWX-53D

一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 医療機器届出番号:22B3X10020000109

[製造販売元]DGSHAPE株式会社 静岡県浜松市浜名区新都田1-1-2

剛性の強化、ミリングバー把持力の向上、基本構成部品の精密化により、表面性状の再現性や加工面の品位、さらにはマージンライン、ボトムライン、厚み、フィッティングにいたるまで、加工物の仕上がりに高い安定性と信頼性を提供します。



注文番号	202270279
外形寸法 (mm)	555(幅)×725(奥行) ×705(高さ)
質量 (kg)	約105
電気規格	AC100V 50/60Hz
消費電力 (W)	約170
設置環境	屋内使用、 温度:5~40℃ 湿度:35~80% (結露のないこと)

※本機では、圧縮空気が必要です。
コンプレッサーは別途、ご用意いただく必要があります。
※本機のサポート期間は生産終了から7年となります。
※動作には集塵装置(別売)が必要です。
※導入に際しては保守契約が必要です。

新設計高剛性フレーム

機械剛性を高めるため、フレーム構造の設計を根本的に見直しました。その堅牢なフレームは切削加工の信頼性を高め、ジルコニアの加工や、ハイブリッドレジン、PMMAなどのレジ系材料の効率的な生産を実現します。



新設計クランプ着脱機構

アダプターの着脱、ロック部分の設計を前モデル「歯科用CAD/CAMマシンDWX-52D DGSHAPE」から変更し、片手着脱、片手ロックが可能となりました。また、アダプター取り付け時のクランプ角度は「Vpanel」から3段階に設定可能です。



オープンエッジアダプター

B軸の回転角度が±35度という広い範囲で動作します。オープンエッジアダプターと組み合わせることで、フルアーチ前歯部など細部にわたる精密な製作が可能です。

稼働マネジメントクラウドサービス「DGSHAPE Insights」

「DGSHAPE Insights」と内蔵カメラの連動により、スマートフォンやタブレット、またはPCから加工状況をリアルタイムモニタリングしたり、録画データを確認することができます。また、不具合の発生時にはDGSHAPE Insightsで得られた情報により、迅速なメンテナンスとサービスの提供が可能となります。さらにラボにあるDWXシリーズ*の稼働状況を把握し、加工計画やメンテナンス計画の策定など、生産マネジメントをサポートします。

「カタナ®」ブランド材料を高精度に加工

「hyperDENT®」には、「カタナ®」ブランド 材料用の切削モジュールが搭載されています。歯科用CAD/CAMマシンDWXシリーズと組み合わせることでより高精度な加工が可能です。審美的にも強度的にも優れた、「カタナ®」ブランド材料の特長を最大限に発揮できるCAMソフトです。

※対応モデル:DWX-53DC/53D

ボンディング材

セメント

接着関連材料

コンボジット
充填用
レジン

支台築造材料

その他の
診療材料CAD/CAM
材料CAD/CAM
機械硬質レジン
歯冠用


歯科用陶材

研削・研磨材

埋没材/石膏

付属品

ダイヤモンドコートにより、長寿命化を実現

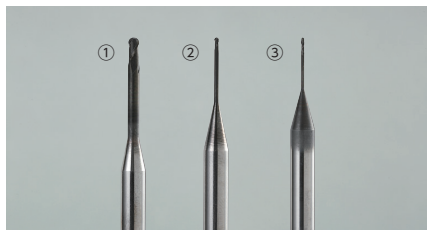

■カタナ® ドリル

一般医療機器 歯科用研削器材 医療機器届出番号:15B1X10001330001

注文番号	種類
① 202270549	2.0MM (ダイヤモンドコート)
② 202270550	0.8MM (ダイヤモンドコート)
③ 202270551	0.6MM (ダイヤモンドコート)


●ダイヤモンドコート ●各1本

「ノリタケ カタナ® ジルコニア」「ノリタケ カタナ® ワックス」「ノリタケ カタナ® レジン」の切削にお使いください。



注文番号	種類
④ 202270515	2.0MM
⑤ 202270516	0.8MM
⑥ 202270517	0.8MM LN

●各5本

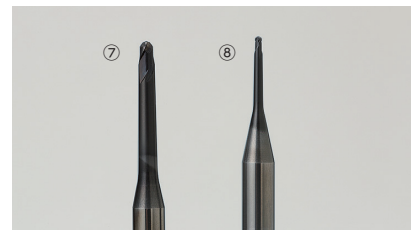

■カタナ® ミリングバー

一般医療機器 歯科用研削器材 医療機器届出番号:15B1X10001330011

注文番号	種類
⑦ 202270700	Φ2.0 mm (ダイヤモンドコート)
⑧ 202270701	Φ1.0 mm (ダイヤモンドコート)

●ダイヤモンドコート ●各1本

「カタナ® アベンシア® ブロック 2」等の切削にお使いください。

■材料別 工具対応表

パッケージ	① 2.0 MM (ダイヤモンドコート)	② 0.8 MM (ダイヤモンドコート)	③ 0.6 MM (ダイヤモンドコート)	④ 2.0 MM	⑤ 0.8 MM	⑥ 0.8 MM LN	⑦ Φ2.0 mm (ダイヤモンドコート)	⑧ Φ1.0 mm (ダイヤモンドコート)
ノリタケ カタナ® ジルコニア	○	○	○*	○	○	○		
ノリタケ カタナ® レジン				○	○	○		
ノリタケ カタナ® ワックス				○	○	○		
カタナ® アベンシア® N カタナ® アベンシア® ブロック 2 カタナ® アベンシア® P ブロック			○*				○	○


※「hyperDENT®」のバージョン9以降が必要です。DWX-4には使用できません。

hyperDENT®

【製造元】株式会社フォローミーテクノロジージャパン 東京都港区海岸3-24-18 ラシクラス EX 東京ベイ 601号室

「カタナ®」ブランド材料を 高精度に加工

「hyperDENT®」には、「カタナ®」ブランド材料用の切削モジュールが搭載されています。歯科用ミリングマシンMD-500やMD-500S、歯科用CAD/CAMマシンDWXシリーズと組み合わせることでより高精度な加工が可能です。審美的にも強度的にも優れた、「カタナ®」ブランド材料の特長を最大限に発揮できるCAMソフトです。

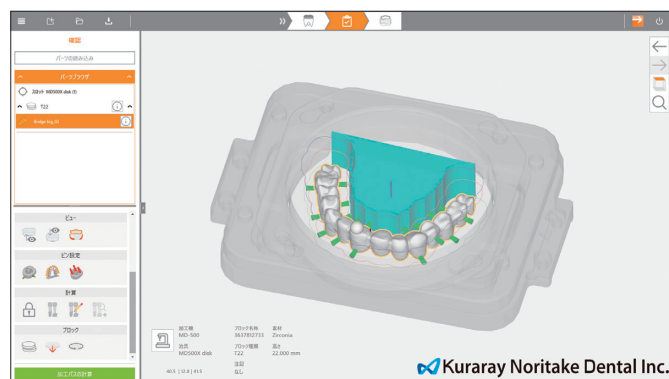

hyperDENT® COMPACT



DWX-53D



DWX-53DC



MD-500/MD-500S

hyperDENT® Advance 注文番号 202270340	○*	○*	○*
hyperDENT® for MD 注文番号 202270341			○*
hyperDENT® Compact element 注文番号 202270378	○*	○*	

●使用に際してはPC (別売) が必要です。2年目よりライセンス料が必要です。

※1 DWX-53DC及びDWX-53Dには、専用ソフトに加え、別途、hyperDENT® 53テンプレートが必要です。

※2 MD-500Sには、別途、側方切削テンプレートが必要です。


「hyperDENT」は株式会社フォローミーテクノロジージャパンの登録商標です。

ノリタケ カタナ® F-2N 一般医療機器 歯科技工用ポーセレン焼成炉 医療機器届出番号:25B2X10003000014

[製造販売元] SKメディカル電子株式会社 滋賀県長浜市七条町305-1

「ノリタケ カタナ® ジルコニア」との組み合わせで単冠約90分※焼成を実現しました。

※800℃で取り出した場合

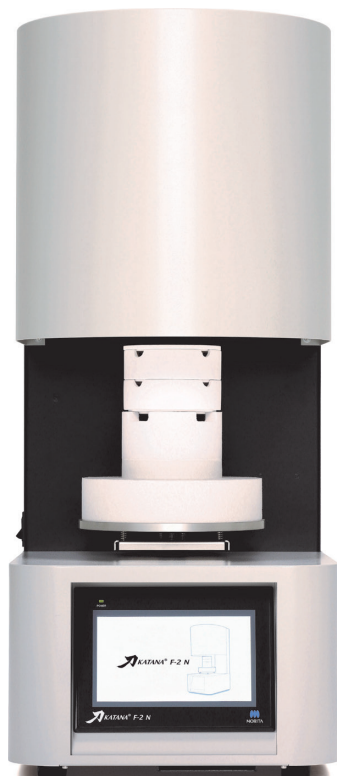

注文番号	
202270444	
寸法(mm)	340(幅)×390(奥行)×780(高さ)
炉内寸法(mm)	φ110×85(高さ)
重量(kg)	約62
電気規格	AC200V±10% 50/60Hz±1Hz 単相
消費電力(VA)	2300
最高使用温度(℃)	1600
ヒーター	MoSi2ヒーター 4本
プログラム数	200
ステップ数	量大20
付属品	上部ケーキ×1、下部ケーキ×1、セラミック製サヤ×2、セラミック製サヤフタ×1、ファイバー製サヤ×1、ファイバー製サヤフタ×1
使用環境条件	温度: 5~40℃ 湿度: 30~80%RH(結露のないこと)

ステージ昇降タイプ

コンパクト設計可能なステージ昇降タイプを採用。焼成サヤ2段収納が可能です。



ロングスパンブリッジの焼成が可能

ロングスパンブリッジの収納が可能な内径φ96 mmの焼成サヤを採用しています。


ノリタケ カタナ® F-1N 一般医療機器 歯科技工用ポーセレン焼成炉 医療機器届出番号:25B2X10003000012

[製造販売元] SKメディカル電子株式会社 滋賀県長浜市七条町305-1

大容量の大型タイプ



注文番号	
202270446	
寸法(mm)	500(幅)×460(奥行)×770(高さ)
炉内寸法(mm)	150(幅)×150(奥行)×150(高さ)
重量(kg)	100
電気規格	AC200V±10%、50/60Hz±1Hz、単層25A以上
消費電力(VA)	4500
最高使用温度(℃)	1600
ヒーター	MoSi2ヒーター 6本
プログラム数	200
ステップ数	量大20
使用環境条件	温度: 5~40℃ 湿度: 30~80%RH(結露のないこと)

正方形の大型焼成サヤによる大量焼成が可能

F-1N用焼成サヤと組み合わせることでフルマウスはもちろんのことジルコニアクラウンやブリッジを大量に焼成することが可能です。



扉開閉タイプのワイドな炉内

焼成サヤが3段積み可能なワイドな炉内となっています。



セレック用「カタナ® アベンシア®」シリーズ

本品は、デンツプライシロナ株式会社のセレック専用ブロックです。セレックを使用し、スキャンから設計・加工することで、即日での歯冠修復が選択可能です。



カタナ® アベンシア® ブロック 2

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料 医療機器認証番号:302AFBZX00019000
V1058CAD/CAM冠用材料(II)

セレック用 CAD/CAM 冠用材料(II)
※保険適用には条件があります。

小白歯クラウン・インレーの製作に

単層に加えてML(マルチレイヤー)をラインナップし、シンプルな作業でグラデーションを有する小白歯クラウンを製作できます。透明性が高く、インレーの装着時に、窩洞マージンの移行部が目立ちにくい「OE」が追加になりました。

小白歯対応	CAD/CAM 冠用材料(II)	セレック用	単層	ML
注文番号	種別	色調	入数	
206440057A2	12	A2 LT	各5個	
206440057A3	12	A3 LT		
206440057A3.5	12	A3.5 LT		
206440059	12	OE	各5個	
206440058A2	14L	A2 LT		
206440058A3	14L	A3 LT		
206440058A3.5	14L	A3.5 LT	各5個	
206440064A2	12	A2 ML		
206440064A3	12	A3 ML		
206440064A3.5	12	A3.5 ML	各5個	
206440065A2	14L	A2 ML		
206440065A3	14L	A3 ML		
206440065A3.5	14L	A3.5 ML		

※金属製台座の切欠き側がボディ層、反対側がエナメル層です。CAD/CAM 装置の設定により、エナメル層とボディ層が逆方向に加工される可能性があります。設計・加工前に、加工の可否をCAD/CAM装置の購入先にご確認ください。



CAD/CAMインレーに適した色調「OE」

OEは、従来の単層シェードと比較し、透明性が向上しました。インレーの装着時に、窩洞マージンの移行部が目立ちにくいシェードです。また、従来比で彩度も高く、口腔内での白浮きを抑制しています。

	OE	A3 LT	A3 ML
硬化板			
透明度	26%	16%	15%~18% (デンチン〜エナメル)
彩度	33	27	38~29 (デンチン〜エナメル)

測定条件:
測定装置:分光測色計
試験片厚み(彩度) 1.20 ± 0.01mm (C*)
(透明度) 1.20 ± 0.01mm
※白および黒背景のL*値の差(ΔL*(W/B))

<データ測定>
クラレ/リタケデンタル株式会社
測定条件などにより数値は異なります。

カタナ® アベンシア® P ブロック

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料 医療機器認証番号:229AFBZX00091200
V1058CAD/CAM冠用材料(III)

セレック用 CAD/CAM 冠用材料(III)
※保険適用には条件があります。

優れた曲げ強度に加えて、たわみにくい材料特性

当社独自の製造法により、特性の異なる数種類のフィラーを高密度に配合。優れた曲げ強度に加えて、高い曲げ弾性率を有することで、大臼歯における咬合圧に対してもたわみにくい特性が期待されます。

大臼歯対応	CAD/CAM 冠用材料(Ⅲ)			セレック用
注文番号	種別	色調	入数	
206440066A2	12	A2 LT	各5個	
206440066A3	12	A3 LT		
206440066A3.5	12	A3.5 LT		
206440067A2	14	A2 LT	各5個	
206440067A3	14	A3 LT		
206440067A3.5	14	A3.5 LT		

※金属製台座の切欠き側がボディ層、反対側がエナメル層です。CAD/CAM 装置の設定により、エナメル層とボディ層が逆方向に加工される可能性があります。設計・加工前に、加工の可否をCAD/CAM装置の購入先にご確認ください。



37℃、水中浸漬7日後
曲げ強度:265 MPa

測定条件:JDMAS 245:2020

37℃、水中浸漬7日後
曲げ弾性率:18 GPa

測定条件:試験片サイズ14.0×4.0×1.2 mm、37℃、1週間水中保管 オートグラフAG-I 100kN (C39島津製作所 ロードセル10kN使用) スパン12 mm、3点曲げ、クロスヘッドスピード1.0 mm/min
<データ測定>
クラレ/リタケデンタル株式会社
測定条件などにより数値は異なります。

カタナ® アベンシア® N

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料 医療機器認証番号:301AFBZX00015000
V1058CAD/CAM冠用材料(IV)

セレック用 CAD/CAM 冠用材料(IV)
※保険適用には条件があります。

口腔内での調和を考慮した色調設計

シームレスなグラデーションが特長のマルチレイヤーブロックです。彩度を高めることで、口腔内での白浮きを防ぐ色調設計を採用しました。

前歯対応	CAD/CAM 冠用材料(IV)	セレック用	ML
注文番号	種別	色調	入数
206440056A1	14L	A1	各5個
206440056A2	14L	A2	
206440056A3	14L	A3	
206440056A3.5	14L	A3.5	


※金属製台座の切欠き側がボディ層、反対側がエナメル層です。CAD/CAM 装置の設定により、エナメル層とボディ層が逆方向に加工される可能性があります。設計・加工前に、加工の可否をCAD/CAM装置の購入先にご確認ください。



カタナ® アベンシア® N (ML:A2)

カタナ® アベンシア® ブロック2 (単層:A2 LT)

製品規格

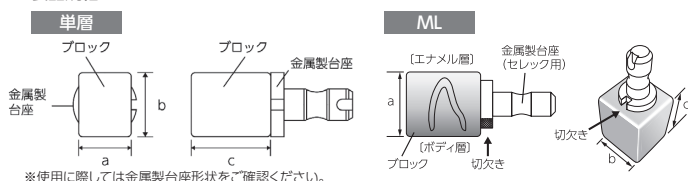

※使用に際しては金属製台座形状をご確認ください。

【形状】

種別	a軸	b軸	c軸
12	10	12	15
14	12	14	18
14L	14.5	14.5	18

(単位:mm)



12サイズ

14サイズ

各種製品によってサイズが異なります。

カタナ® ジルコニア ONE

管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス 医療機器認証番号:304AFBZX00106000

セレック用 保険適用外

前歯部にも適応する審美性と
臼歯部ブリッジにも対応する強度に加え、
効率化されたワークフローを兼ね備えた
All in ONE ブロック

■ 歯科切削加工用セラミックス 単品

注文番号	サイズ	色調	入数
206440516	CROWN	A1、A2、A3、A3.5、A4、 B1、B2、B3、C1、C2、C3、 D2、D3、NW	各4個
206440517	BRIDGE	A1、A2、A3、A3.5、A4、 B1、B2、B3、C1、C2、C3、 D2、D3、NW	各2個

【形状】

(単位:mm)

サイズ		a軸	b軸	c軸
CROWN	焼成前	16.5	19.2	20.2
BRIDGE	焼成前	17.8	19.2	40.2



※サイズCROWNでは歯冠長13 mm以下、サイズBRIDGEでは歯冠長14 mm以下までの補綴装置に対応します。

※実際のサイズには若干の個体差があります。

※加工可能な領域は、セレック ソフトウェアでコントロールされ、バージョンにより異なります。



【色見本】

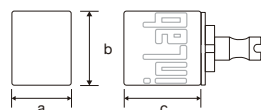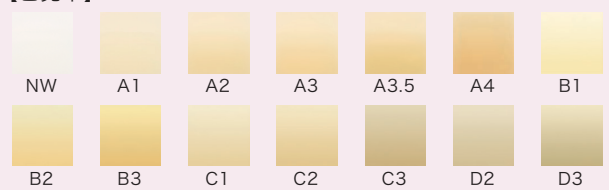

マルチレイヤード構造は、「inLab」の刻印側がボディ層、反対側がエナメル層です。

クイックワークフロー

独自のジルコニア技術により、デンツプライシロナ社のセレック スピードファイアと組み合わせることで※1、フルジルコニア補綴装置での短時間焼成(18分)が可能です。さらに最短5分でクラウンの切削加工が可能です。

セレック プライムスキャン



口腔内スキャン
補綴装置の設計

セレック プライムミル



切削加工: 5分※2

カタナ® ジルコニア ONE



セレック スピードファイア



焼成: 18分※3


※1 本品はセレック専用品です。補綴装置デザイン、切削加工、焼成にはセレックソフトウェア5.2.7/inLab 22.2/inLab CAM22.3以降が必要です。

※2 スーパーファストモードを使用する場合となります。また、乾式での加工を推奨します。湿式で加工する場合は、シリカ系ガラスセラミックス(リチウムシリケート系ガラス等)の加工に用いた冷却水を使用すると焼成後に本品の透光性が低下する可能性があります。加工前に加工チャンパー、冷却水タンク、タンク内フィルターの清掃および冷却水の入れ替えを必ず行ってください。

※3 補綴装置の厚みが6 mm以下、乾式での加工の場合。焼成後は高温になるため取り出し時はご注意ください。

マルチレイヤード構造によるグラデーション

異なる色調のジルコニアを積層したマルチレイヤード構造により、グラデーションを有するフルジルコニア補綴装置をシンプルな作業で製作できます。

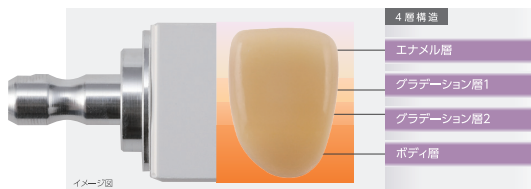

強度と効率化を兼ね備えたAll in ONEブロック

短時間焼成にもかかわらず、臼歯部ブリッジにも対応できる物性を有しています。(セレック スピードファイアの場合)

焼成時間: 18分

曲げ強度: 933 MPa

測定条件: シェードNW、ISO 6872:2015 (3点曲げ試験、試験片サイズ1.2×4×14 mm、支点間距離12 mm) クラレノリタケデンタル(株)測定: 条件により数値は異なります。

加工パーによる
クラウン加工本数(従来比): 約200%

当社従来製品「カタナ® ジルコニア ブロック」との比較

カタナ® ジルコニア ブロック

管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス 医療機器認証番号:229AFBZX00049000

セレック用 保険適用外

新たなジルコニアソリューションの提案

■ 歯科切削加工用セラミックス 単品

注文番号	サイズ	色調	入数
206440150	12Z	A1、A2、A3、A3.5、A4、NW	各5個
206440151	14Z	A1、A2、A3、A3.5、A4、 B1、B2、NW	
206440155	14Z	B3、C1、C2、C3、D2、D3	各2個
206440154	14ZL	A1、A2、A3、A3.5、B1	各3個
206440153		A4、B2、B3、C1、C2、C3、 D2、D3、NW	各2個

【形状】

(単位:mm)

サイズ		a軸	b軸	c軸
12Z	焼成前	15.3	19.2	20.2
14Z	焼成前	17.8	19.2	20.2
14ZL	焼成前	17.8	19.2	40.0

※サイズ12Zでは歯冠長12 mm以下、サイズ14Zでは歯冠長14 mm以下までの補綴装置に対応できます。


※ブロックサイズは若干の個体差があります。

※加工可能な領域は、セレック ソフトウェアでコントロールされます。


※ 本品はセレック用です。



STML Super Translucent Multi Layered

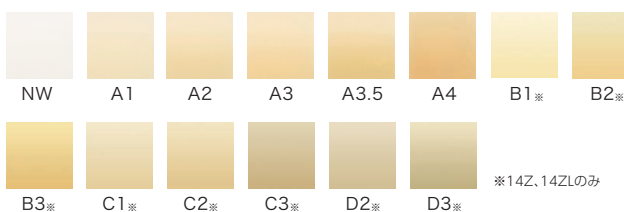

※14Z、14ZLのみ

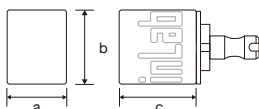

マルチレイヤード構造は、「inLab」の刻印側がボディ層、反対側がエナメル層です。

ボンディング材

セメント

接着関連材料

コンボジット
充填用
レジン

支台築造材料

診療材料
その他のCAD/CAM
材料CAD/CAM
機械硬質レジン
歯冠用

歯科用陶材

研削・研磨材

埋没材/石膏

付属品

INDIRECT COMPOSITES 歯冠用硬質レジン

エステニア® C&B

管理医療機器 歯冠用硬質レジン 医療機器承認番号:21500BZZ00534000

高い強度と審美性を有するハイブリッドセラミックスです。

- 無機フィラー含有量は92wt%と高く、臼歯部咬合面にも使用可能な強度です。
- 専用のガラスファイバーフレーム「EGファイバー」を用いることで金属を使わずにブリッジ*を製作可能です。

*ただし2歯欠損以上の症例や欠損部のスパンが15mmを超える症例には使用しないこと



■単品(ボディ)

注文番号	品名	色調	容量
202420270~202420273	トランスベアレント	T0、T1、T2、TLV	各6.4 g / 2.6 mL
202420281~202420283	エナメル	E1、E2、E3	各6.4 g / 2.6 mL
202420302~202420306 202420309、202420313	デンチン	DA1、DA2、DA3、DA3.5、DA4、 DB2、DC2	各6.4 g / 2.6 mL
202420361~202420362	サービカル	CE1、CE2	各6.4 g / 2.6 mL
202420371~202420374	サービカルトランスベアレント	CT1、CT2、CT3、CT4、	各6.4 g / 2.6 mL
202420261~202420263	ジンジバル	P1、P2、P3	各6.4 g / 2.6 mL

■単品(オペーク)

注文番号	品名	色調	容量
202420222~202420226 202420229、202420233	ボディオペーク	OA1、OA2、OA3、OA3.5、OA4、 OB2、OC2	各2.0 mL
202420241	サービカルオペーク	CO1	各2.0 mL

■研磨セット

注文番号	
202420209	

- 研磨剤(10g)×1個
- 研磨ブラシ×12本
- フェルトホイール×12個

■単品(EGファイバー)

注文番号	品名	容量
202420401	前歯用(12 cm)	2本
202420402	臼歯用(12 cm)	2本
202420403	EG フロー	1.0 mL
202420404	EG コア(13 cm)	6本

■単品(付属品)

注文番号	品名	容量
202420250	オペークプライマー	9 mL
202420201	モデリングリキッド	6 mL
202420202	アドオンプライマー	6 mL
202120274	ジャケットスベーター	5 mL
202120273	マージンセップ	5 mL
202420204	CRセップⅢ	20 mL
202420203	エアバリアーペースト	10 mL
202420205	研磨剤	10 g
202420206	研磨剤	30 g
202420207	研磨ブラシ	12本
202420208	フェルトホイール	12個
202420213	築盛用インスツルメント セット(No1、No2、No3)	3本
202420210~ 202420212	築盛用インスツルメント (No1、No2、No3)	各1本

ダイナシール®

管理医療機器 歯科レジン系補綴物表面滑沢硬化材
医療機器承認番号:20900BZZ00992000

レジン材料表面にお使いいただける
光重合型の表面滑沢材です。

- 硬化後の研磨は
不要です。



■単品

注文番号	品名
202120262	表面滑沢材リキッド

●容量:6 mL

加熱重合器 KL-400

一般医療機器 歯科技工用重合装置 医療機器届出番号:25B2X10003000006
製造販売 SKメディカル電子株式会社 滋賀県長浜市七条町305-1

「エステニア® C&B」を加熱重合するために設計された加熱重合器です。



- 「エステニア® C&B」に適した110℃で15分間
係留するように設定されているため、煩わしい操
作が不要な加熱重合器です。
- 小型・軽量コンパクト設計でありながら炉内は
フルブリッジにも充分対応できる容量を確保して
います。炉内の温度分布が良好で、均一な加熱重
合が可能です。

外形寸法(mm)	160(幅)×215(高さ)×167(奥行)
装置重量(kg)	4
炉内寸法(mm)	120(幅)×77(高さ)×101(奥行)
電気規格	AC100V 50/60Hz
消費電力	300VA
加熱方式	熱風循環型
保留温度	90~110℃(電源OFF後も設定値を記憶)
保留時間	5~99分(電源OFF後も設定値を記憶)
付属品	受け棚、トレー

注文番号	品名
202120978	KL-400

ワンボディシステム

修復物を単層により製作し、色調(A、B、Cシェード対応)と、表面滑沢処理をカラーコートで仕上げるシステムです。

- オペークレジン、ボディレジンと、3色のカラーコートの組み合わせで、13シェードの幅広い色調に対応できます。

スターターセット



■ワンボディシステムスターターセット(PO:プレオペーク入り)

注文番号	
202430499	


- 内容:プレオペーク(PO)、オペークレジン(UO)、ボディレジン(UB)、カラーコート(A+、クリアー1)、オペークプライマー、カラーコートプライマー×各1本
- 付属品:小筆(S)×2本、小筆(SO)×1本、混和血(TM)×8枚

ワンボディシステムの色調表現方法

プレオペーク+オペーク

ボディレジン

カラーコート

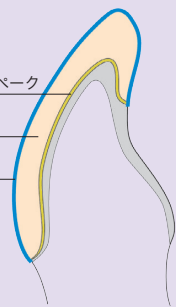

1 オペークレジン

POとUOまたはWOを塗布し、前装部の金属色を遮蔽します。

2 ボディレジン

UBまたはWBのみで最終的な歯冠形態を回復します。

3 カラーコート

(A+、B+、C+) 指定のシェードに従い歯頸部寄り2/3に塗布します。

(クリアー1) 切端から歯頸部にかけて薄く塗布します。



■単品

注文番号	品名	色調	容量
202430410、202430521、202430522	① プレオペーク、オペーク	PO、UO、WO	各3.3 g / 2.0 mL
202430523、202430524	② ボディレジン	UB、WB	各4.6 g / 2.6 mL
202430504~202430506、202430508~202430513	③ カラーコート	A+、B+、C+、クリアー1、クリアー2、ホワイト、サービカル1、サービカル2、インサイザルブルー2	各5.5 mL
202430520	④ カラーコートプライマー		4 mL

マルチカラーシステム

積層法により、高審美な修復物の製作に対応するシステムです。

- ボディレジンに光拡散性を付与したことで、築盛の厚みによる色調への影響を受けにくく、より質の高い色調表現が可能です。

スターターセット



■マルチカラーシステムスターターセット

注文番号	
202430401	

- 内容:プレオペーク(PO)、オペーク(A2O、A3O、A3.5O)、サービカル(CV1、CV2)、ボディ(A2B、A3B、A3.5B)、エナメル(E2、E3)、トランスルーセント(To)、オペークプライマー、リペアーリキッド×各1本
- 付属品:小筆(S)×4本、小筆(SO)×2本、混和血(EPR)×8枚

■ボディレジン3本パック

注文番号	色調	容量	入数
202430403~202430407、202430409	A2B、A3B、A3.5B、E2、E3、CV1	4.6 g / 2.6 mL	各3本
202430408	To	4.7 g / 2.6 mL	3本

■マルチカラーシステムA3セット

注文番号	
202430402	

- 内容:プレオペーク(PO)、オペーク(A3O)、サービカル(CV1)、ボディ(A3B)、エナメル(E3)、トランスルーセント(To)、オペークプライマー、リペアーリキッド×各1本
- 付属品:小筆(S)×2本、小筆(SO)×1本、混和血(EPR)×1枚

■単品(オペークレジン)

注文番号	品名	色調	容量
202430410	プレオペーク	PO	3.3 g / 2.0 mL
202430411~202430415、202430417、202430418、202430422	オペーク	A1O、A2O、A3O、A3.5O、A4O、B2O、B3O、C3O	各3.3 g / 2.0 mL
202430416、202430419~202430421、202430423~202430426	オペーク・半量シリンジ	B1O、B4O、C1O、C2O、C4O、D2O、D3O、D4O	各1.6 g / 1.0 mL
202430428~202430430	オペークモディファイヤー・半量シリンジ	IO、P、W	各1.6 g / 1.0 mL

■単品(ボディレジン)

注文番号	品名	色調	容量
202430431~202430435	サービカル	CV1、CV2、CV3、CV4、CV5	各4.6 g / 2.6 mL
202430436~202430438	サービカル・半量シェード	CV6、CV7、CV8	各2.3 g / 1.3 mL
202430439~202430443	オペーシャスボディ	OBA1、OBA2、OBA3、OBA3.5、OBA4	各4.6 g / 2.6 mL
202430444~202430448、202430450、202430451、202430455	ボディ	A1B、A2B、A3B、A3.5B、A4B、B2B、B3B、C3B	各4.6 g / 2.6 mL
202430449、202430452~202430454、202430456~202430459	ボディ・半量シェード	B1B、B4B、C1B、C2B、C4B、D2B、D3B、D4B	各2.3 g / 1.3 mL
202430461~202430463	エナメル	E2、E3、E4	各4.6 g / 2.6 mL
202430460	エナメル・半量シェード	E1	2.3 g / 1.3 mL
202430464~202430467	トランスルーセント	To、TN、TE1、TE2	各4.7 g / 2.6 mL
202430470~202430474	エフェクト	TB、CW、CCV、CE、SB	各4.7 g / 2.6 mL
202430477、202430478	歯肉色	Tissue1、Tissue2	各4.6 g / 2.6 mL
202430485	ベースマテリアル	BASE	4.7 g / 2.6 mL

■単品(オペークプライマー)

注文番号	
202430486	

- 容量:9 mL

■単品(リペアーリキッド)

注文番号	
202430487	

- 容量:6 mL

DENTAL PORCELAIN

歯科用陶材



歯科用陶材 比較表

	セラビアン®ZR	ノリタケ スーパーポーセレンAAA	EX-3プレス LF	セラビアン®ZRプレス LF
歯科用陶材				
フレーム	ジルコニア	金属	金属	ジルコニア
焼成温度 (ボディで比較)	930℃	930℃	760℃	840℃
熱膨張係数 50-500℃ (エナメル)	$9.1 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$	$12.3 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$	$12.3 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$	$9.2 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$
掲載ページ	P.38・39	P.40	P.41	P.41

セラビアン®ZR

ジルコニア製フレームや、フルジルコニアクラウンに使用するポーセレンです。

**自然な色調表現力、耐チッピング性、
耐クラック性に優れています。**

- 優れた破壊靱性を持ち、口腔内装着後チッピングしにくい補綴装置となります。
- 耐クラック性に優れ、豊富な色調で自然感にあふれた表現が可能です。
- 「ノリタケ カタナ® ジルコニア」との併用が色調の面から最適です。

セラビアン®ZR FCペーストステイン

フルジルコニア修復物のキャラクタライズに適したペーストタイプの表面ステインです。
全27色を取り揃え、多彩な表現が可能です。
フルジルコニア修復物では、従来のエクスターナルステインよりも低温の750℃で焼成できます。





① ラスターコンプリートキット

■ ラスターコンプリートキット (計19色)

注文番号	
202280657	LTx, LT0, LT1, LT Super Luster, ELT1, ELT2, ELT3, LT Natural, LT Super Gray, T Blue, LT Royal Blue, Aqua Blue 1, Aqua Blue 2, LT Yellow, Incisal Aureola, Sun Bright, LT Coral, Creamy Enamel, Creamy White (各10 g)



② エナメル/トランスルーセントキット

■ エナメル/トランスルーセントキット (計10色)

注文番号	
202280656	E1, E2, E3, Silky E1, Silky E2, T Clear, Tx, To, T1, T2 (各10 g)



③ FCペーストステインキット

■ FCペーストステインキット (全27色)

注文番号	
202280645	White, Value, Light Gray, Dark Gray, Black, Grayish Blue, Blue, Green 1, Green 2, Yellow, Mamelon Orange 1, Mamelon Orange 2, Cervical 1, Cervical 2, Cervical 3, Earth Brown, Reddish Brown, Salmon Pink, Pink, Red, A*, B*, C*, D*, Fluoro (各3 g), Glaze, Clear Glaze (各5 g)

●ESリキッド(10 mL)、FCペーストステインカラーガイド



④ FCペーストステインベースキット

■ FCペーストステインベースキット (計8色)

注文番号	
202280651	White, Dark Gray, Grayish Blue, Cervical 2, Earth Brown, Salmon Pink, A* (各3 g), Clear Glaze (5 g)

●ESリキッド(10 mL)、FCペーストステインカラーガイド



⑤ アソートメントキット

■ アソートメントキット (計18色)

注文番号	
202280633	
シェードベース	SBA1, SBA2, SBA3 (各10 g)
オペーシャスボディ	OBA1, OBA2, OBA3 (各10 g)
ボディ	A1B, A2B, A3B (各10 g)
エナメル	E2, E3 (各10 g)
トランスルーセント	Tx, T1 (各10 g)
ラスター	LT1, Creamy Enamel (各10 g)
サービカル	CV-1 (10 g)
アドオン	AD-T, AD-B (各10 g)

■ インターナルステイン コンプリートキット (全19色)

注文番号	
202280655	White, Gray, Incisal Blue 1, Incisal Blue 2, Mamelon Orange 1, Mamelon Orange 2, Cervical 1, Cervical 2, Cervical 3, Earth Brown, Reddish Brown, Salmon Pink, Red, A*, B*, C*, D*, Bright, Fluoro (各3 g)

●ISリキッド(10 mL)、ISカラーガイド

■ エクスターナルステインキット (全23色)

注文番号	
202280628	Pure White, Gray, Black, Blue, Green 1, Green 2, Yellow, Orange 1, Orange 2, Cervical 1, Cervical 2, Cervical 3, Earth Brown, Reddish Brown, Salmon Pink, Pink, Red, A*, B*, C*, D* (各3 g), Glaze (10 g)

●ESリキッド(10 mL)、ESカラーガイド

■ セラビアン®ZR 単品製品構成

注文番号	種別	色調	容量
202280646	FCペーストステイン (27色)	White, Value, Light Gray, Dark Gray, Black, Grayish Blue, Blue, Green 1, Green 2, Yellow, Mamelon Orange 1, Mamelon Orange 2, Cervical 1, Cervical 2, Cervical 3, Earth Brown, Reddish Brown, Salmon Pink, Pink, Red, A*, B*, C*, D*, Fluoro	各3 g
202280647		Glaze, Clear Glaze	各5 g
202280607	シェードベース (26色)	SBA1, SBA2, SBA3, SBA3.5, SBA4, SBB1, SBB2, SBB3, SBB4, SBC1, SBC2, SBC3, SBC4, SBD2, SBD3, SBD4, SBNW0, SBNW0.5, SBNP1.5, SBNP2.5, SB White, Opaque White, Opaque Light, Opaque Dark, Opaque Light Tissue, Opaque Dark Tissue	各10 g
202280623	マージン (21色)	MA1, MA2, MA3, MA3.5, MA4, MB2, MB3, MB4, MC2, MC4, MD3, MD4, MNW0, MNW0.5, MNP1.5, MNP2.5, M Clear, M Orange, M Peach, MDL, MRP	各10 g
202280624	オペーシャスボディ (22色)	OBA1, OBA2, OBA3, OBA3.5, OBA4, OBB1, OBB2, OBB3, OBB4, OBC1, OBC2, OBC3, OBC4, OBD2, OBD3, OBD4, OBNP1.5, OBNP2.5, OB White, OB Orange, OB Pale Pink, OBE	各10 g
202280625		OBA1, OBA2, OBA3, OBA3.5, OBA4, OB White	各50 g
202280611	サービカル (4色)	CV-1, CV-2, CV-3, CV-4	各10 g
202280612		CV-1	50 g
202280609	ボディ (24色)	A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, B1B, B2B, B3B, B4B, C1B, C2B, C3B, C4B, D2B, D3B, D4B, NW0B, NW0.5B, NP1.5B, NP2.5B, EW00B, EW0B, EWB, EWYB	各10 g
202280610		A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, B1B, B2B, B3B, B4B, NW0B, NW0.5B, NP1.5B, NP2.5B, EW00B, EW0B, EWB, EWYB	各50 g
202280613	エナメル (5色)	E1, E2, E3, Silky E1, Silky E2	各10 g
202280614			各50 g
202280615	トランスルーセント (5色)	T Clear, Tx, To, T1, T2	各10 g
202280616			各50 g
202280617	ラスター (19色)	LTx, LT0, LT1, LT Super Luster, ELT1, ELT2, ELT3, LT Natural, LT Super Gray, T Blue, LT Royal Blue, Aqua Blue 1, Aqua Blue 2, LT Yellow, Incisal Aureola, Sun Bright, LT Coral, Creamy Enamel, Creamy White	各10 g
202280618			各50 g
202280611	クリアサービカル (4色)	CCV-1, CCV-2, CCV-3, CCV-4	各10 g
202280619	モティファイヤー/マメロン (13色)	White, Gray, Blue, Green, Yellow, Light Orange, Orange, Brown, Pink, Dark Pink, Coral Pink, Mamelon 1, Mamelon 2	各10 g
202280644	ティッシュ (7色)	Tissue 1, Tissue 2, Tissue 3, Tissue 4, Tissue 5, Tissue 6, Tissue 7	各10 g
202280621	アドオン (2色)	AD-T, AD-B	各10 g
202280622			各50 g
202280627	インターナルステイン (19色)	White, Gray, Incisal Blue 1, Incisal Blue 2, Mamelon Orange 1, Mamelon Orange 2, Cervical 1, Cervical 2, Cervical 3, Earth Brown, Reddish Brown, Salmon Pink, Red, A*, B*, C*, D*, Bright, Fluoro	各3 g
202280629	エクスターナルステイン (23色)	Pure White, Gray, Black, Blue, Green 1, Green 2, Yellow, Orange 1, Orange 2, Cervical 1, Cervical 2, Cervical 3, Earth Brown, Reddish Brown, Salmon Pink, Pink, Red, A*, B*, C*, D*	各3 g
202280630		Glaze, E Glaze	各10 g

■ カラーガイド



■ セット

注文番号	品名
202280853	コンプリート 4003
内容: 431/422/423/424/425/426/427	

■ 単品

注文番号	品名	種別
202280872	シェードベース 431	26色
202280873	マージン 422	21色
202280874	オペーシャスボディ 423	22色
202280875	ボディ 424	25色: AD-B 含む
202280876	エナメル&トランスルーセント 425	19色: AD-T, CCV 含む
202280877	ラスター 426 (クリアサービカルを含む)	19色
202280878	モティファイヤー/マメロン 427 (サービカル、ティッシュを含む)	24色: CV, Mamelon, Tissue 含む
202280648	FCペーストステイン カラーガイド	27色

※インターナルステイン、エクスターナルステインのカラーガイドはP.40に掲載しています。

ノリタケスーパーポーセレンAAA

管理医療機器 歯科メタルセラミック修復用陶材 医療機器認証番号:223AFBZX00166000



① ラスターコンプリートキット

■ ラスターコンプリート
キット (計19色)

注文番号	
------	--

① 202280549

LTx, LT0, LT1, LT Super Luster,
ELT1, ELT2, ELT3, LT Natural,
LT Super Gray, T Blue,
LT Royal Blue, Aqua Blue1,
Aqua Blue 2, LT Yellow,
Incisal Aureola, Sun Bright,
LT Coral, Creamy Enamel,
Creamy White
(各10 g)



② エナメル/トランスルーセントキット

■ エナメル/トランス
ルーセントキット (計10色)

注文番号	
------	--

② 202280548

E1, E2, E3, Silky E1, Silky E2,
T Clear, Tx, T0, T1, T2 (各10 g)



③ インターナルステインコンプリートキット


■ インターナル
ステインコンプリートキット
(全19色)

注文番号	
------	--

202280534

White, Gray, Incisal Blue 1,
Incisal Blue 2, Mamelon Orange 1,
Mamelon Orange 2, Cervical 1,
Cervical 2, Cervical 3,
Earth Brown, Reddish Brown,
Salmon Pink, Red, A*, B*, C*, D*,
Bright, Fluoro (各3 g)

●ISリキッド (10 mL)、ISカラーガイド

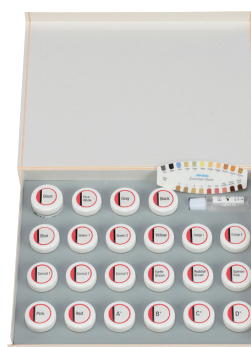

④ エクスターナルステインキット

■ エクスターナル
ステインキット (全22色)

注文番号	
------	--

202280540

Pure White, Gray, Black, Blue,
Green 1, Green 2, Yellow,
Orange 1, Orange 2, Cervical 1,
Cervical 2, Cervical 3,
Earth Brown, Reddish Brown,
Salmon Pink, Pink, Red,
A*, B*, C*, D* (各3 g), Glaze (10 g)

●ESリキッド (10 mL)、ESカラーガイド

■ ノリタケスーパーポーセレンAAA 単品製品構成

注文番号	種別	色調	容量
202280093	ペーストオパーク (27色)	POA1, POA2, POA3, POA3.5, POA4, POB1, POB2, POB3, POB4, POC1, POC2, POC3, POC4, POD2, POD3, POD4, PONA1, PONA2, PONA3, PONA3.5, PONA4, PONW0, PONW0.5, PONP1.5, PONP2.5, POEW0, POEW	各6 g/ 2.4 mL
202280096	ペーストオパーク モディファイヤー (8色)	NP Bonder	6 g / 2.4 mL
202280095	ペーストオパーク モディファイヤー (8色)	PO White, PO Gray, PO Blue, PO Yellow, PO Orange, PO Earth Brown, PO Reddish Brown, PO Pink,	各3 g/ 1.2 mL
202280210	パウダーオパーク (17色)	A1O, A2O, A3O, A3.5O, A4O, B1O, B2O, B3O, B4O, C1O, C2O, C3O, C4O, D2O, D3O, D4O	各10 g
202280280		OS	10 g
202280300	マージン (22色)	MA1, MA2, MA3, MA3.5, MA4, MB1, MB2, MB3, MB4, MC2, MC4, MD3, MD4, MNW0, MNW0.5, MNP1.5, MNP2.5, M Clear, M Orange, M Peach, MDL, MRP	各10 g
202280451	オペーシヤス ボディ (21色)	OBA1, OBA2, OBA3, OBA3.5, OBA4, OBB1, OBB2, OBB3, OBB4, OBC1, OBC2, OBC3, OBC4, OBD2, OBD3, OBD4, OBNP1.5, OBNP2.5, OB White, OB Orange, OB Pale Pink	各10 g
202280452		OBA1, OBA2, OBA3, OBA3.5, OBA4	各50 g
202280270	サービカル (4色)	CV-1, CV-2, CV-3, CV-4	各10 g
202280271			各50 g
202280220		A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, B1B, B2B, B3B, B4B, C1B, C2B, C3B, C4B, D2B, D3B, D4B, nA1B, nA2B, nA3B, nA3.5B, nA4B, NW0B, NW0.5B, NP1.5B, NP2.5B, EW0B, EW0.5B, EWB, EWYB	各10 g
202280221	ボディ (29色)	A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, B1B, B2B, B3B, B4B, C1B, C2B, C3B, C4B, D2B, D3B, D4B, nA1B, nA2B, nA3B, nA3.5B, nA4B, NW0B, NW0.5B, NP1.5B, NP2.5B	各50 g
202280222		A2B, A3B, A3.5B	各200 g
202280230		E1, E2, E3, Silky E1, Silky E2	各10 g
202280231	エナメル (5色)	E1, E2, E3	各50 g
202280232		E2, E3	各200 g
202280240	トランス ルーセント (5色)	T Clear, Tx, T0, T1, T2	各10 g
202280241			各50 g
202280242			各200 g
202280551	ラスター (19色)	LTx, LT0, LT1, LT Super Luster, ELT1, ELT2, ELT3, LT Natural, LT Super Gray, T Blue, LT Royal Blue, Aqua Blue 1, Aqua Blue 2, LT Yellow, Incisal Aureola, Sun Bright, LT Coral, Creamy Enamel, Creamy White	各10 g
202280552		Incisal Aureola, LT0, LT1, LT Coral, LT Royal Blue, LT Super Luster, LTx, T Blue	各50 g
202280270	クリアサービカル (4色)	CCV-1, CCV-2, CCV-3, CCV-4	各10 g
202280320	ティッシュ (7色)	Tissue 1, Tissue 2, Tissue 3, Tissue 4, Tissue 5, Tissue 6, Tissue 7	各10 g
202280250	モディファイヤー (11色)	White, Gray, Blue, Green, Yellow, Light Orange, Orange, Brown, Pink, Dark Pink, EF-1	各10 g
202280310	マメロン(2色)	Mamelon 1, Mamelon 2	各10 g
202280290	アドオン(2色)	AD-T, AD-B	各10 g
202280531	インターナル ステイン (19色)	White, Gray, Incisal Blue 1, Incisal Blue 2, Mamelon Orange 1, Mamelon Orange 2, Cervical 1, Cervical 2, Cervical 3, Earth Brown, Reddish Brown, Salmon Pink, Red, A*, B*, C*, D*, Bright, Fluoro	各3 g
202280541	エクスターナル ステイン (22色)	Pure White, Gray, Black, Blue, Green 1, Green 2, Yellow, Orange 1, Orange 2, Cervical 1, Cervical 2, Cervical 3, Earth Brown, Reddish Brown, Salmon Pink, Pink, Red, A*, B*, C*, D*	各3 g
202280542		Glaze	10 g
202280523	アドメイト (7色)	Light Opaque, Dark Opaque, Light Body, Dark Body, Enamel, Translucent, Luster Translucent	各10 g

カラーガイド



■ セット

注文番号	品名
202280851	コンプリート 2002
内容: 222/223/224/225/226/227/228/229	

■ 単品

注文番号	品名	内容
202280856	パウダーオパーク 221	17色
202280857	ペーストオパーク 222	23色: PONA1 ~ PONA4 除く
202280858	ペーストオパークモディファイヤー 223	8色
202280859	マージン 224	22色
202280860	オペーシヤスボディ 225	21色
202280861	ボディ 226	25色: AD-B含む, nA1B ~ nA4B除く
202280862	エナメル&トランスルーセント 227	15色: AD-T, CCV含む
202280863	ラスター 228	19色
202280864	モディファイヤー 229	24色: CV, Mamelon, Tissue含む

※インターナルステイン、エクスターナルステインのカラーガイドはP.40に掲載しています。

※アドメイト(7色)のカラーガイドはございません。

EX-3プレス LF

●推奨合金の規格は
右記です。

熱膨張係数 13.7-14.1×10⁻⁶K⁻¹(50-500℃)JIS規格
銀含有量10%以下、銅を含まない

EX-3プレス LF

管理医療機器 歯科メタルセラミック修復用陶材 医療機器認証番号:223AFBZX00167000

EX-3プレス LF 単品製品構成

注文番号	種別	色調	容量
202280003	ペーストオペーク (7色)	PPnA ₁ , PPnA ₂ , PPnA ₃ , PPnA _{3.5} , PPnA ₄ , PPNP _{1.5} , PPNP _{2.5}	各6 g/2.4 mL
202280010	LFボディ (4色)	nA ₁ B, nA ₂ B, nA ₃ B, nA _{3.5} B	各10 g
202280012	LFエナメル (3色)	E ₁ , E ₂ , E ₃	各10 g
202280014	LFトランスルーセント (3色)	T ₀ , T ₁ , T ₂	各10 g
202280023	LFラスター (2色)	LT ₀ , LT ₁	各10 g
202280027	LFエクスターナルステイン	Glaze	10 g

セラビアン®ZRプレス LF

セラビアン®ZRプレス LF

管理医療機器 歯科用陶材 医療機器認証番号:223AFBZX00164000

セラビアン®ZRプレス LF 単品製品構成

注文番号	種別	色調	容量
202280701	シェードベースステイン(5色)	SSA ₁ , SSA ₂ , SSA ₃ , SSA _{3.5} , SSA ₄	各3 g
202280703	シェードベースステイン モディファイヤー	SS Fluoro	3 g
202280715	LFボディ(3色)	HA ₁ B, HA ₂ B, HA ₃ B	各10 g
202280706	LFエナメル(3色)	E ₁ , E ₂ , E ₃	各10 g
202280708	LFトランスルーセント(4色)	Tx, T ₀ , T ₁ , T ₂	各10 g
202280712	LFラスター (12色)	LT ₀ , LT ₁ , LT Natural, LT Super Gray, T Blue, Aqua Blue 1, Aqua Blue 2, LT Yellow, Incisal Aureola, Sun Bright, Creamy Enamel, Creamy White	各10 g
202280720	LFティッシュ (7色)	Tissue 1, Tissue 2, Tissue 3, Tissue 4, Tissue 5, Tissue 6, Tissue 7	各10 g
202280710	LFアドオン(2色)	AD-T, AD-B	各10 g
202280721	LFマージン	MRP	10 g
202280731	LFインターナルステイン (19色)	White, Gray, Incisal Blue 1, Incisal Blue 2, Mamelon Orange 1, Mamelon Orange 2, Cervical 1, Cervical 2, Cervical 3, Earth Brown, Reddish Brown, Salmon Pink, Red, A ⁺ , B ⁺ , C ⁺ , D ⁺ , Bright, Fluoro	各3 g
202280733	LFエクスターナルステイン (23色)	Pure White, Gray, Black, Blue, Green 1, Green 2, Yellow, Orange 1, Orange 2, Cervical 1, Cervical 2, Cervical 3, Earth Brown, Reddish Brown, Salmon Pink, Pink, Red, A ⁺ , B ⁺ , C ⁺ , D ⁺	各3 g
202280734		Glaze	10 g

陶材関連商品

ポーセレン練和液

マジックフォーマー／マジックセパレーター

- マージンポーセレン用の練和液です。
- コンデンス終了後、直ちに硬化しますので簡単・確実に歯型から分離できます。
- ロングスパンブリッジの築盛作業が容易になります。
- 歯列模型材とポーセレンの分離に使用する分離材です。
- ペンタイプなので操作性がよく、築盛量が少ないときでも確実な分離効果を得られます。
- 低溶陶材(焼成温度660℃以上)にも使用可能です。



■ 単品

注文番号	品名	容量
202280433	マジックフォーマー	20 mL
202280434	マジックセパレーター	3.5 mL

ノリタケスーパーポーセレンAAA フォーミングリキッド

注文番号	容量
202280420	100 mL

- 「ノリタケ スーパーポーセレン AAA」
歯冠色用の練和液です。

IS リキッド(共用)

注文番号	容量
202280532	10 mL

- インターナルステイン(内部ステイン)用の
リキッドです。

ノリタケスーパーポーセレンAAA オペークリキッド

注文番号	容量
202280209	100 mL

- 「ノリタケ スーパーポーセレン AAA」
パウダーオペーク用の練和液です。

セラビアン®ZR フォーミングリキッド

注文番号	容量
202280649	100 mL

- 「セラビアン® ZR」用の練和液です。

ES リキッド(共用)

注文番号	容量
202280543	10 mL

- エクスターナルステイン(表面ステイン)
用のリキッドです。

マイスターリキッド

注文番号	容量
202280650	100 mL

- ウエット感が持続する練和液です。

LF リキッド

注文番号	容量
202280714	100 mL

- 「EX-3プレスLF」、「セラビアン® ZRプレスLF」
陶材用のリキッドです。

EX-3プレス LF ペーストオペークリキッド

注文番号	容量
202280005	10 mL

ノリタケスーパーポーセレンAAA アドメイト フォーミングリキッド

注文番号	容量
202280522	10 mL

共通カラーガイド

ISカラーガイド/ESカラーガイド



注文番号	内容	
202280533	① ISカラーガイド	
202280544	② ESカラーガイド	

シェードガイド

ノリタケ シェードガイド/ノリタケ シェードガイド EWシェード

●A・B・C・Dのベーシックシェード16色とノリタケオリジナルシェード4色の計20色で構成されています。

●従来のホワイトニングシェード(NWシリーズ)よりさらに白を強調したシェードです。



注文番号	品名	
202280976	① シェードガイド	
202280636	② シェードガイド EWシェード	



関連品

ノリタケ ポーセレンマット



■セット

注文番号	種別	サイズ	
202280970	① ラウンド	Φ70 mm × 3	
202280971	② スクエア	(60 × 60 mm) × 3	

●付属品:クッションマット・ピン5本

クラックファインダー

- ジルコニア及びアルミナなどセラミックフレームのクラックを検出する液です。
- フレームに多少液が残留しても、ポーセレン焼成で完全焼却し、色調や物性などには悪影響を与えません。



注文番号	容量	
202280640	40 mL (20 mL × 2)	

インターナルライブステインパレット



注文番号		
202280377		

●付属品:ガラス棒付

研削・研磨材

パールサーフェス®

一般医療機器 歯科用研磨磨材 医療機器届出番号:15B1X10001090009

パールサーフェス® Z

ジルコニア用研磨材です。

- フルジルコニアクラウンの研磨や、フレームのサポート形状部分の研磨に使用します。
- サイズの異なるダイヤモンド粒子を組み合わせ、高い研磨性を実現しました。
- ポーセレンなどガラス系マテリアルやハイブリッドセラミックスの研磨にも最適です。



■単品

注文番号	品名	容量	
202280514	① パールサーフェス® Z	20 g	

■単品

注文番号	品名	容量	
202280513	② パールサーフェス® フェルトホイール	6枚	

ノリタケ ハイテック フィニッシュ

一般医療機器 歯科技工用アプレシブ研削器具 医療機器届出番号:15B1X10001190001

- アルミナ繊維を用いた、研磨傷の少ない研磨ポイントです。
- 「組みひも」構造で強度があり、密度が高く研磨効率に優れています。また、目詰まりも少なく、発熱しにくくなっています。
- 気泡除去(メタルクラウン、ポーセレン、クラスプなど)、インプラント上部構造のアクセスホールの拡大、形態修正などにご使用いただけます。



■セット

注文番号	品名	入数	
	アソートセット	各色1本	
	ブラウンセット(粗目)		
202280975	ブルーセット(中目)	各3本入	
	レッドセット(細目)		

DENTAL PLASTERS & INVESTMENTS

埋没材／石膏



クラレノリタケデンタルのクリストバライト系埋没材の特長

- 金合金、パラジウム合金などの鑄造に使用するクリストバライト系埋没材です。
- 急速加熱による短時間鑄造法に使用可能。リングファーンスを700℃に設定しておけるので、昇温、降温のタイムロスがなく、作業時間を短縮できます。

- 急速加熱によって埋没材がヒビ割れしたり、吹き飛ばすことが少ないです。
- 埋没60分後の一般的加熱法にも使用可能です。
- ファインなクリストバライトを使用しているので、鑄造体の表面性状が滑沢です。

※ 練和に用いる水によっては、水質の硬度が影響し本来の物性が得られない恐れがあります。その場合は精製水をご使用ください。

クリストバライト ベストフィッター®

埋没材

一般医療機器 歯科鑄造用石膏系埋没材 医療機器届出番号:15B1X10001302107

タイトな適合性を追求した急速加熱低膨張タイプ埋没材。

- 総膨張率(線硬化膨張率^{*1}+線熱膨張率^{*2}) 1.57(%)を実現。タイトな適合精度を追求することで、特に内側性を重要視した症例には効果を発揮します。
- 「クリストバライトExシリーズ」^{*3}と同等の鑄造面を兼ね備え、滑沢性のある鑄造体を得ることができるので、後工程としての研磨に時間をかける必要もなく、作業時間の短縮につながります。
- 水とのなじみがよく、鑄造リングへの流し込みを容易に行うことができ、気泡の混入を少なく抑えることができます。
- 適度な圧縮強さを維持することで、優れた細部再現性を保持。また、鑄型へのクラックを抑制し、鑄造体へのバリ発生も最小限に抑えます。

※1 JIS T 6601:2005 ※2 JIS T 6601:2013

※3 「クリストバライト フォルテ-Ex」、「クリストバライト FF-Ex」、「クリストバライト FF20-Ex」を指します。

30分
タイプ

■ 単品

注文番号	容量
202050795	3 kg (1.5 kg × 2袋)
202050796	15 kg 袋入

クリストバライト フォルテ-Ex

埋没材

一般医療機器 歯科鑄造用石膏系埋没材
医療機器届出番号:15B1X10001302106

30分
タイプ

- 耐クラック性、鑄造面の滑沢性をさらに向上。線硬化膨張と線熱膨張の絶妙なバランスと安定性により、メタルコアから、ロングスパンブリッジまでバリのない、シャープなマージンの鑄造体を得ることができます。

■ 単品

注文番号	容量
202050790	3 kg (1.5 kg × 2袋)
202050791	15 kg 袋入

クリストバライト FF-Ex

埋没材

一般医療機器 歯科鑄造用石膏系埋没材
医療機器届出番号:15B1X10001302104

30分
タイプ

- 高い精度、より安定性の高い品質、掘り出しやすさといったFFの特長を継承、さらに表面性状の滑沢性を向上させることに成功しました。ツヤのある鑄造体を得ることができ、後工程としての研磨に時間をかける必要もなく、作業空間の快適化につながります。

■ 単品

注文番号	容量
202050770	3 kg (1.5 kg × 2袋)
202050771	15 kg 袋入

クリストバライト FF20-Ex

埋没材

一般医療機器 歯科鑄造用石膏系埋没材
医療機器届出番号:15B1X10001302105

20分
タイプ

- 技工作業の時間短縮を目指し開発をしました。適度な流動性を兼ね備え、鑄造リングへ流し込みやすく、気泡の混入を抑えることができます。また、「バリ」「崩れ」の発生を抑制、鑄造体の製作が可能です。

■ 単品

注文番号	容量
202050780	3 kg (1.5 kg × 2袋)
202050781	15 kg 袋入

クリーミーな練和感を実現し、
気泡の混入を抑制しました。

- 操作性に優れた流動性で、印象材の複雑な形成面へ素早く流し込むことが可能です。
- 硬化時膨張が低いので、高精度の模型を製作できます。
- 硬化後は高い強度と滑沢な表面性状を持ちます。



■単品		
注文番号	容量	
202050050	3 kg (シンプルバック)	
202050051	18 kg	

白さを追求した矯正用の
硬石膏です。

- 硬化時膨張が低いので、高精度の模型を製作できます。
- 硬化後は高い強度と滑沢な表面性状を持ちます。
- 良好な流動性を有しています。



■単品		
注文番号	容量	
202050060	3 kg (シンプルバック)	
202050061	18 kg	

スーパーロック Ex 一般医療機器 歯科用硬質石こう 医療機器届出番号:15B1X10001301105

超硬石こう

- 硬化膨張率を0.08%に抑え、インプラントやCAD/CAMのロングスパンブリッジ症例など精度を要求される症例に適します。
- 盛り上げやすい一方で、また適度なキントロピー性により振動を加えれば印象のすみずみまで行きわたります。
- 硬化後は滑沢な表面性状と高い強度を有します。



■単品		
注文番号	容量	
202050070	3 kg (シンプルバック)	
202050071	18 kg	

ハイブリッドロック 一般医療機器 歯科用硬質石こう 医療機器届出番号:15B1X10001301104

超硬石こう

- 樹脂成分配合により耐チップング性を向上させました。
- 色調は審美性の追求に応えるナチュラルデンチンを採用しています。



■単品		
注文番号	容量	
202050640ND	3 kg (1.5 kg × 2)	

ノリタケ デンタル プラスター2

普通石こう

一般医療機器 歯科用焼石こう 医療機器届出番号:15B1X10001300103

天然石こうを粉砕、焼成技術によって
製造した歯科用普通石こうです。

■単品		
注文番号	容量	
202050030	1 kg 袋	
202050031	10 kg 袋	
202050032	18 kg 袋	
202050033	18 kg ダンボール	

ノリタケ デンタル プラスター2 ラボ用

普通石こう

一般医療機器 歯科用焼石こう 医療機器届出番号:15B1X10001300104

■単品		
注文番号	容量	
202050036	18 kg ダンボール	
202050035	18 kg 袋	

ノリベスト 一般医療機器 歯科用高温模型材 医療機器届出番号:15B1X10001304101

「ノリタケスーパーポーセレンAAA」の熱膨張に合わせた
高温用模型材(耐火模型材)です。

- ポーセレンラミネートベニア、インレー、ジャケツクラウンなどの製作に使用できます。
- 繰り返し焼成においても高い強度を維持します。
- 流動性に優れ、印象の細部まで容易に注入できます。
- 寸法安定性に優れていますので、適合性に優れています。

■セット		
注文番号	内容	
202050603	内容:粉末(30g×33個)、液(200 mL)、シリンジ×1本	

■単品			
注文番号	品名	容量	
202050604	粉末	30 g × 33 個	
202050605	液	200 mL	

セット



セラミックリボン

当社製の埋没材と組み合わせることで適合性に優れた鑄造体を作製することができます。

- ロックウール製のリボンです。リフラクトリーセラミックファイバーは含有していません。
- はさみで簡単に切れ、リングに巻きつけられます。
- 適切な吸水力を持ちます。

注文番号	容量
202050940	長さ10 m
202050941	幅30 mm 長さ30 m
202050942	長さ10 m
202050943	幅40 mm 長さ30 m
202050944	長さ10 m
202050945	幅50 mm 長さ30 m

●厚み／0.7 mm



ノリタケ ソルダリング インベストメントSQ

一般医療機器 歯科ろう付用埋没材 医療機器届出番号:15B1X10001305101

セット



ソルダリングセット

- ろう付け作業を簡単に、高い精度で行うためのシステムです。
- 金属焼き付け用ポーセレンの後ろう付け、前ろう付け、フルキャストクラウンの後ろう付けなど幅広く対応できます。

■セット

注文番号	容量
202280800	

●内容:ノリタケソルダリングスタンド一式、ノリタケソルダリングインベストメントSQ×1箱、ノリタケフラックスP、使用説明書

ノリタケ ソルダリング インベストメント SQ

- ろう付け用の埋没材です。
- 硬化時膨張が小さく、加熱時膨張は合金に近似しています。
- 耐ヒートショック性が高いため、急速加熱、局所加熱によるクラックの心配がなく、寸法精度の高いろう付けが可能です。

■単品

注文番号	容量
202280805	30 g × 30

●付属品/シリジ×1個、使用説明書

ノリタケ ソルダリングスタンド

- 金属焼き付け用合金と近似した熱膨張を持ちます。
- 後ろう付け、前ろう付け双方に使用可能です。
- 埋没材はクラウン内面とポストの固定に少量使用するのみなので、埋没材ブロックの加熱時に起こりがちな不均一な熱膨張の発生を防止できます。
- 熱伝導が良いため、加熱時間も短く、ろう材の流れがスムーズになります。

■セット

注文番号	容量
202280801	

●内容:金属製スタンド×1個、前歯用ポスト×3本、臼歯用ポスト×3本、クランク用ポスト×2本、使用説明書

■単品

注文番号	品名	入数
202280802	前歯用ポスト	5本
202280803	臼歯用ポスト	5本
202280804	クランク用ポスト	5本

ノリタケ フラックス P

- 母合金の酸化を防止し、ろうの流れをスムーズにします。
- プレシャス系及びセミプレシャス系の前ろう付けから後ろう付けまで幅広く使用できます。
- ポーセレンに対してクラックなどの悪影響を与えません。

■単品

注文番号	容量
202280806	25 g

ノリタケ ストンハードナー

石こう模型の表面硬化材です。

- 被膜を作らずに模型表面を強化させ、歯型を保護します。
- 石こう面を滑沢にするので、陶材用分離材の下地として分離効果を向上させます。

■単品

注文番号	容量
202280925	100 mL



ノリタケ ストンセップ

石こう・埋没材の分離材です。

- アルコール系なので速乾性に優れており、被膜厚さも薄く、しかも優れた分離効果を発揮します。
- 低温下においても再結晶せず、冬季の保存安定性に優れています。

■単品

注文番号	容量
202280922	100 mL



ノリタケ ワックスセップ

ワックスと歯型との分離材です。

- 保湿性に優れており、安定した粘性・適度な被膜厚さを保持します。
- 石こう・金属・プラスチック等の歯型材に使用可能です。

■セット

注文番号	容量
202280920	120 mL、20 mL (筆付き)

■単品 (補充用)

注文番号	容量
202280921	300 mL



ノリタケ ワックスクリーナー

歯科用ワックス及びゴム製印象材の表面処理材です。

- 霧の細かいミストタイプでフレキシビリティが大変優れており、均一に塗布することができます。
- 埋没材・石こうとのなじみも良いので、滑沢な鑄造体及び模型を作製することができます。

■単品

注文番号	品名	容量
202280923	① ボンブ式スプレータイプ (ボトル)	120 mL
202280924	② 補充用	300 mL



ボンディング材

セメント

接着関連材料

コンボジット
レジン 充填用

支台築造材料

その他の
診療材料CAD/CAM
材料CAD/CAM
機械硬質レジン
歯冠用


歯科用陶材

研削・研磨材

埋没材／石膏

付属品

付属品

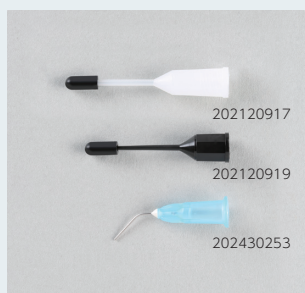

202120917


先端ノズル(「オキシガードII」用、5個入)

202120919

アプリケーター
(「ディースメイト® F-1 2.0」ADゲル用ノズル25個入)

202430253

ニードルチップ(E)
(Kエッチャントシリンジ用・20個入)

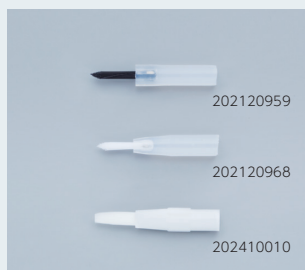

202120959


デイスボ小筆ブラシ黒(50個入) 毛先かため

202120968

デイスボ小筆ブラシ白(50個入)

202410010

デイスボ平筆ブラシ(20個入)

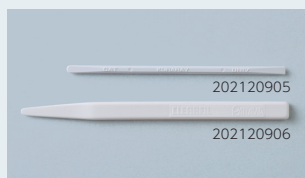

202120905

練和棒(100本入)(K)

202120906

練和棒(PN)



202410012 「クラリベース®」
粉剤用計量カップ
(ファースト)

202410011 「クラリベース®」
粉剤用計量カップ
(ノーマル)

202410005 ラバーカップ

202410006 スパチュラ

202410008 スポイト



202120941

スポンジ小片(NL)
※3.0mm×3.0mmサイズ。



202410024

アプリケーターブラシ
(ファイン(シルバー)) (50本入)

202410025

アプリケーターブラシ
(根管用(黒)) (50本入)



202410029 「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」
ガイドチップ太(20個入)

202410030 「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」
ガイドチップ細(20個入)

202410031 「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」
ミキシングチップ(20個入)



202440220 「SA ルーティング® Multi」(オートミックス)
ガイドチップ エンド用極細(20個入)

202440219 「SA ルーティング® Multi」(オートミックス)
ミキシングチップ エンド用(20個入)

202440218 「SA ルーティング® Multi」(オートミックス)
ミキシングチップ 合着用(20個入)




202430628 「パナビア® V5」
ガイドチップ エンド用細(20個入)

202430627 「パナビア® V5」
ミキシングチップ エンド用(20個入)

202430626 「パナビア® V5」
ミキシングチップ 合着用(20個入)



202440513 「パナビア® ヘニア LC」
アプリケーターチップ(16G)(20個入)

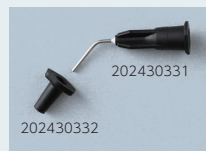


202430331 「クリアフィル® マジェスティ® ESフロー」
ニードルチップ(N)(20個入)

202430332 「クリアフィル® マジェスティ® ESフロー」
ニードルチップキャップ(20個入)



202430935 「SA アタッチメント for アライナー」
ニードルチップ(N)(20個入)

202430936 「SA アタッチメント for アライナー」
ニードルチップキャップ(20個入)

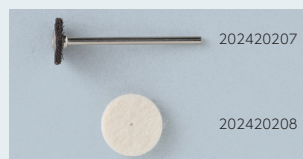


202420207

「エステニア® C&B」研磨ブラシ(12本入)

202420208

「エステニア® C&B」フェルトホイール(12個入)

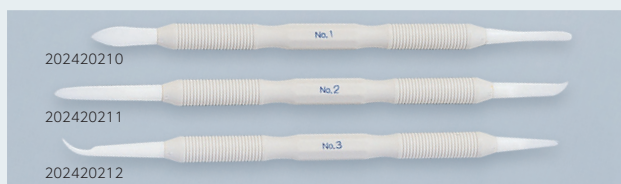

202420210
「エステニア® C&B」インストルメントNo.1

202420212
「エステニア® C&B」インストルメントNo.3


202420211
「エステニア® C&B」インストルメントNo.2

202420213
「エステニア® C&B」インストルメントセット
(No.1、No.2、No.3)

小 筆




- 202120901 筆先(丸・細)、柄(直・透明) (S)
202120908 筆先(丸・細)、柄(曲・透明) (B)
202120921 筆先(平)、柄(直・透明) (SO)
202120922 筆先(丸・太)、柄(曲・透明) (BO)
202120952 筆先(平・大型)、柄(木製) (CMO)

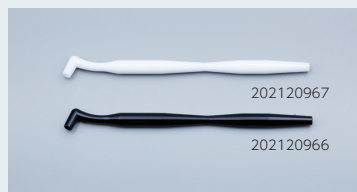


- 202120967 小筆ホルダー白
202120966 小筆ホルダー黒

練和紙

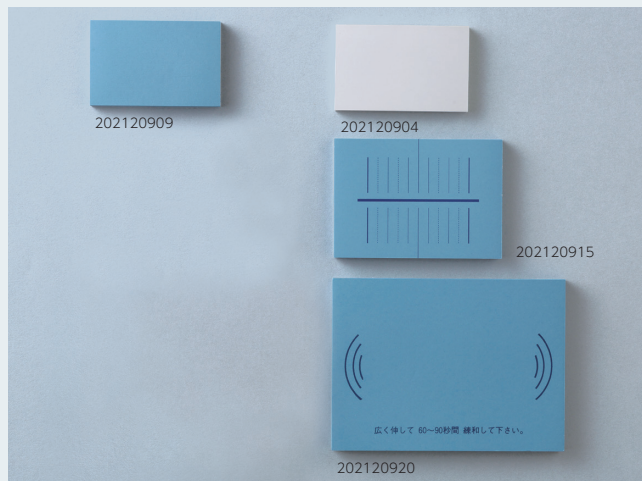

- 202120909 ブルー(小型)・50枚綴(CR)
202120904 白・50枚綴(F)
202120915 目盛りつきブルー・50枚綴(P2)
202120920 ブルー60枚綴(I)

計量スプーン

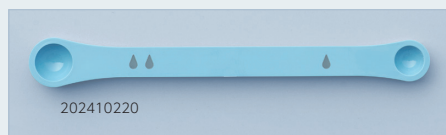

- 202410220 計量スプーン(TD)

ポーセレン築盛筆



- 202280447 ペーストオペークブラシ(2本入)



- 202280448 ペーストオペークモディファイヤーブラシ(1本入)

混和皿




- 202410022 混和皿(C)
202120902 混和皿(B)
202120953 混和皿(FPN)
202120912 混和皿(TM) (25枚)
202120954 混和皿(EPR) (8枚)

遮光板



- 202120900 遮光板(B)
202410023 遮光板(C)

「エステティック カララント®」用筆ペン

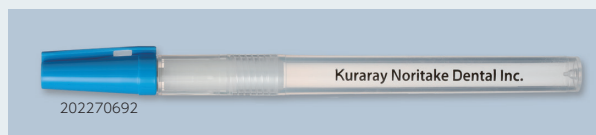

- 202270692 リキッド用筆ペン

診療材料 付属品一覧

	注文番号	製品名	小筆／小筆ホルダー／ ディスク小筆ブラシ	アプリケーター ブラシ	遮光板／混和皿	練和棒／紙	ミキシングチップ／ キャップ／ノズル	計量スプーン／ カップ	その他
ボンディング	202430270	クリアフィル® メガボンド® 2 (セット)		202410024 	202410023 / 202410022 				
	202410910	クリアフィル® メガボンド® FA (セット)			202120900 / 202120902 				202120941 スポンジ 
セメント	202430600~ 202430601	パナビア® V5 (コンプリートキット) (スターターキット)	202120966 / 202120959 	202410024 	202120953 		202430626 / 202430627 / 202430628 / 202430253 		
	202430611~ 202430615	パナビア® V5 ペースト (単品)					202430626 		
	202440505~ 202440508	パナビア® LC ペースト					202440513 		
	202440200	SAルーティング® Multi ハンドミックス (ユニバーサルバリューキット)				202120906 / 202120915 			
	202440212~ 202440214	SAルーティング® Multi オートミックス (単品)					202440218 (含兼用40個) 		
	202120485~ 202120486	パナビア® F2.0 (ブラウン) (ホワイト)	202120967 / 202120959 		202120953 	202120906 / 202120945 	202120917 		
支台築造	202420942~ 202420943	クリアフィル® DC コア オートミックス® ONE (デンチン単品・ホワイト単品)					202410031 / 202410029 (10個) / 202410030 (10個) 		
パナビア® マジスティ®	202430341~ 202430344	クリアフィル® マジスティ® ES フロー (Super Low 単品)					202430331 / 202430332 		
	202430301~ 202430312	クリアフィル® マジスティ® ES フロー (Low 単品)							
	202430321~ 202430325	クリアフィル® マジスティ® ES フロー (High 単品)							
その他	202410211	ティースメイト® ディセンシタイザー (1-1 セット)		202410024 	202120902 			202410220 	
	202420790	ティースメイト® F-1 2.0キット	202120967 / 202120968 		202120912 		202120919 		
	202120008	ADゲル					202120919 		
	202430252	K エッチャント シリンジ					202430253 		
	202120780~ 202120782	クラリベース® キット (セット)	202120952 					202410011 / 202410012 	202410008 スポイト 202410005 ラバーカップ 202410006 スパチュラ 
	202430933	SA アタッチメント for アライナー					202430935 / 202430936 		

Information

クラレノリタケデンタル拠点一覧



東京事業所

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-4 常盤橋タワー
所在地(株式会社クラレ東京本社内)

大阪事業所

〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-1
大阪梅田ツインタワーズ・ノース
所在地(株式会社クラレ大阪事業所内)

新潟工場

〒959-2691 新潟県胎内市倉敷町2-28

三好工場

〒470-0293 愛知県みよし市三好町東山300

ご注意

- ◆ 注文番号は株式会社モリタの商品コードです。ご注文の際は注文番号と商品名を歯科材料店へご連絡ください。
- ◆ 価格は全てメーカー希望小売価格です。
- ◆ 掲載商品の価格は2025年6月現在のものです。価格には消費税等は含まれておりません。
- ◆ 印刷のため実際の色調と異なる場合があります。
- ◆ 仕様及び外観は、製品改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。
- ◆ ご使用に際しましては製品の電子添文等を必ずお読みください。

- 「アベンシア」、「SA ルーティング」、「エスニシア」、「エステティック カララント」、「MDP」、「オキシガード」、「オートミックス」、「クラリベース」、「クリアフィル」、「クリアフィル トライエスボンド」、「サーフィスコート」、「セシード」、「ダイナシール」、「ティースメイト」、「パナビア」、「パールサーフェス」、「マジェスティ」、「メガボンド」、「フォトコア」、「ベストフィッター」は株式会社クラレの登録商標です。
- 「セラビアン」、「カタナ」はノリタケ株式会社の登録商標です。

WEBカタログと製品サポートページのご案内

- ◆ クラレノリタケデンタルWEBサイトには製品詳細情報を掲載した個別パンフレットをご用意しております。

<https://www.kuraraynoritake.jp/>



-
- メーカー希望小売価格の後の9ケタの英数字は株式会社モリタの商品コードです。
 - 価格はメーカー希望小売価格です。掲載商品のメーカー希望小売価格は2025年6月現在のものです。メーカー希望小売価格には消費税等は含まれておりません。
 - 印刷のため実際の色調と異なる場合があります。●ご使用に際しましては、製品の電子添文等を必ずお読みください。●仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

クラレノリタケ デンタル株式会社

お問い合わせ

 **0120-330-922** 平日 10:00～17:00

〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4 常盤橋タワー

【製造販売元】クラレノリタケデンタル株式会社 【販売元】株式会社モリタ
〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28 〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18
お客様相談センター：0800-222-8020
(医療従事者様向窓口)

クラレノリタケデンタル
LINE公式アカウント

友だち追加はこちらから



最新情報
配信中!