

かんたんクリームタイプ 最終艶だし!!

熱が出ない

5秒で光る

10秒
フレキシブル
デンチャーも

美しい艶がすばやく出せる!

15秒
研磨



奥野 幾久 Dr.

アクリルレジン

10秒
研磨



スルホン床も15秒

六甲歯研

フレキシブルデンチャー



スピーディー デンチャーシャイン
DVA社 80g ¥7,000

〈推奨器材〉



DVA社
AM専用バフ1
¥1,100




ポリラビット社
綿糸ポイント103
¥2,800

一般的名称	販売名	クラス分類	番号
歯科用研磨材	アクリル系ペースト	一般研磨機	届出 2881XXXX05000300
歯科用研磨材	ポリラビット研磨用器材	一般研磨機	届出 2881XXXX05000294
歯科用研磨材	DVA研磨ペースト	一般研磨機	届出 2881XXXX05000334

MOKUDA

研磨・技工 カタログ

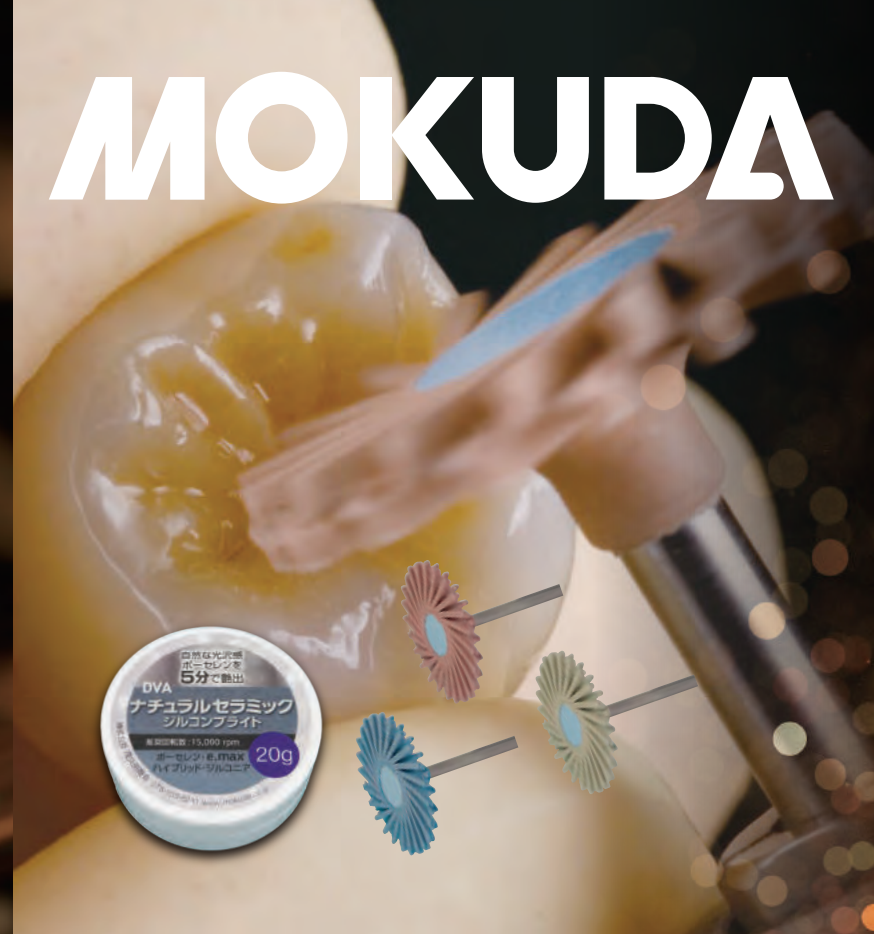

新商品

- 細かいところにも はいりこみ 輝く!
「セラ ハリケーン」「コンポ ハリケーン」
- ポーセレン築盛が乾かず かんたん
「ふわっとステイ リキッド」

CAD/CAM

- なんでもスキャン、ムラなく塗れる
「CAD スキャン スペーサー」

研磨・調整

- ジルコニアをササッと傷消し・調整
「スーパーファースト」
- ジルコニア～ハイブリッドを 艶出し
「ショウ・セレクション・キット」

切削・分割

- セラミック・メタルをズバズバカット
「ホリコ・ブラックカーバートバー」

ミリング

- コンパクトでスイスイと整える
「マリオッティ ミリングマシン」

石膏・模型・ワックス

- 万能パテ
「スーパーハード ラボパテ」
精度をあげる 天然歯肉感
「エステティック マスク」

- 用途で選べるワックス
「アルデンテワックス 各種」

デンチャー

- サッと艶出し、発熱をふせぐ
「スピーディー デンチャーシャイン」

『売るためだけでなく、つくりだすため』

MOKUDA

〒650-0047
神戸市中央区港島南町4丁目7番5号
TEL (078) 303-8241

www.mokuda.co.jp



総合 Dr.用イチョン ペリオ エンド メンテナンス

お取扱店

細かいところには はいりこむ はやピカ!



上林 健DT

過剰圧を分散! やさしく・欠けにくく長持ち!

ジルコニア全面
荒~最終研磨
5分



傷消し / 荒研磨: ブルー 上林 健DT



中研磨: ピンク 山崎 竜DT



最終研磨: ホワイト 戸田 勝則DT

ハイブリッド・ジルコニア
ポーセレン・e.max®用 セラハリケーン ホリコ社

	Φ26mm HP用 1入	Φ14mm HP用 1入 / RA用 1入・5入	実寸
傷消し 荒研磨 ブルー			セラハリケーン 荒研磨 ブルー 大 HP セラハリケーン 荒研磨 ブルー 小 HP
中研磨 ピンク			セラハリケーン 中研磨 ピンク 大 HP セラハリケーン 中研磨 ピンク 小 HP
最終研磨 ホワイト			セラハリケーン 最終研磨 ホワイト 大 HP セラハリケーン 最終研磨 ホワイト 小 HP

使用回転数:セラハリケーン HP 7,000~12,000 rpm
RA 10,000~12,000 "
コンポハリケーン 3,000~ 8,000 "

コンポジット用 コンポハリケーン	Φ14mm RA用 1入 5入	実寸
	コンポハリケーン 中研磨 ピンク RA コンポハリケーン 最終研磨 ホワイト RA	各1本入...小 ¥ 2,200 大 ¥ 7,900 小5本入... ¥ 10,000



艶出し研磨 上林 健DT
●最終艶出: ジルコンプライトで!
特にポーセレンには、ナチュラルセラミック
ジルコンプライトがおすすめです。



ジルコンプライト 40G/20G DVA社
ナチュラルセラミック ジルコンプライト 20G DVA社
ホリラビッド社
ロビソンプラシ 113 17-19-21-23mm
ロビソンプラシ 112 17-19-21-23mm
ロビソンプラシ 113ST 23mm
ロビソンプラシ 112ST 23mm

かわかす、ふんわり かんたん築盛

色まざりなし! その場にとどまる

かわいた陶材も ふわっともとどおり!

はかどる築盛! かわきにくい



鍛冶田 忠彦DT

NEW
アルデンテ社
多色盛用 250, 1000ml
ふわっとステイリキッド

250ml... ¥ 7,500
1000ml... ¥ 28,000

練和直後

多色盛用ふわっとステイリキッド

他社純正リキッドA

4分後

液を足さなくても
乾燥しにくく、
ムダがない!

築盛できないほど乾燥

一般社名	販売名	クラス分類	番号
歯科用ゴム製研磨剤	ホリコ	ホリチャー	一般医療機器 届出 28B1X00005000291
歯科用研磨器材	DVA研磨ペースト	一般医療機器 届出	28B1X00005000334
歯科用研磨器材	ホリラビッド研磨用器材	一般医療機器 届出	28B1X00005000294

すばやい仕上がり、 天然歯 ライクの **自然な輝き**

ポーセレン・e.max®・ハイブリッド・ジルコニア・コンポジット



e.max 都築 優治 DT ジルコニア 遠藤 淳吾 DT PFM 池村 仁克 Dr.

ベタつかない 油成分カット
かんたん除去 研磨粉も残らない
ワンステップ ブラシだけ




ナチュラルセラミック
ジルコンブライツ 20G DVA社
¥11,000

PEKK系・ジルコニア・e.max®・ポーセレン

**とにかく早く
ピカピカに!**

対合歯を傷つけない、
天然歯以上に
やさしい咬合を
研磨により実現。

完全に研磨されたジルコニアは、
対合歯を守ります。
(チューリッヒ大学他での研究結果より)

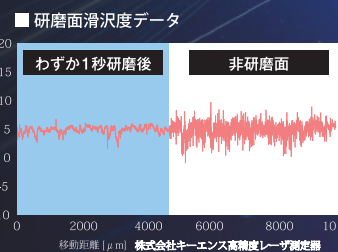

3分
研磨



ジルコニア



両製品対応HP用ブラシ ホリラビッド社

※口腔内でも使用できます

**接着
強化**

ハイブリッド冠 TEK・プロビ

**内面切削で
接着性向上**


**サンドブラストの
必要なし**

**長く使えて
経済的**




佐々木 英隆 Dr.

ハイブリット冠

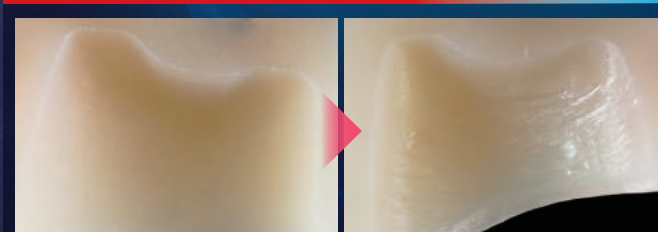

山本 尚吾 DT

TEK・プロビ・硬質レジン

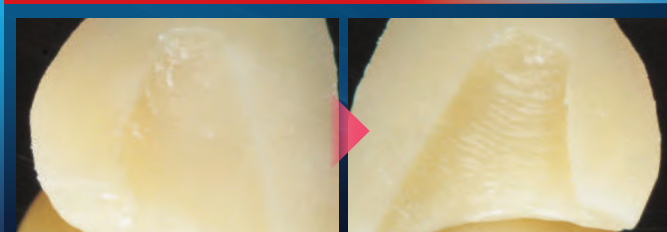

佐々木 英隆 Dr.

※ポーセレンの切削は保証できません。



接着強化バー/ホリコ社
実寸 C162 104 016 ¥5,400

一般名	販売名	クラス分類	番号
歯科用カーバイドバー	ホリコカーバイドバー	一般医療機器	2881X00005000190

天然歯をセラミック CEREC® e.max® すばやく、かんたん再現


Diamond キット 荒調整: 大まかな形態修正, コンタクト調整



Black キット 微調整: 表面形状付与, マージン調整



Silver キット 審美調整: 周波線, 細微な表面性状付与

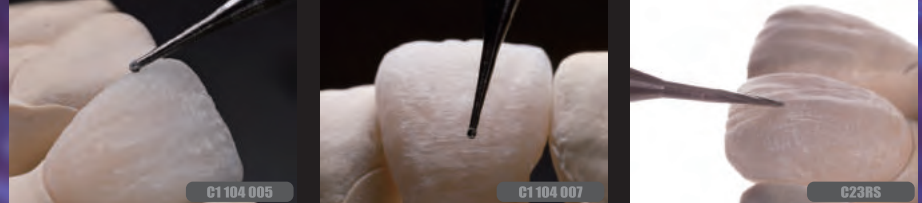

接着強化



ハイブリッド冠
硬質レジン歯
TEK, プロビを強着
※ポーセレンの切削は保証できません

フィニッシュ



ショウ・セレクション・キット セラミック フィニッシュ



実寸

フルキット 10本構成 ¥29,800

これですばやく艶出し!
ショウ・セレクション・キット 掲載 P11

黒くならず早い!!
シンターダイヤモンド

※初回使用前と目詰まり時には別売ダイヤモンドクリーンで黒ずみを防いでください。

強靱なコシと保水性

al dente
スピーディー シンセティックブラシ / アルデンテ社

新素材

長持ち
毛先の広がり
摩耗なく

スムーズ
な
陶材ばなれ

早くてラク
ビルドアップ



都築 優治DT

水切りボール入り(6,8のみ)
●丸ハンドル

- 平1 ¥4,500
 - 平2 ¥4,500
 - 0 ¥4,500
 - 4 ¥6,900
 - 6 ¥9,500
- 実寸 [17.5cm]

転がらず、指になじむ
▲三角ハンドル

- 2/0 ¥2,000
- 0 ¥2,000
- 1 ¥2,000
- 4 ¥2,500
- 6 ¥3,000
- 8



¥13,000 ¥5,000

なんでも
スキャン

かんたん・はやい 最終補綴

はじめず、うすくムラなく 塗りやすい!



データ修正不要! 石膏マージンがヌケない!!



流水で元通り

塗る・スキャン・洗う!!



メタル・レジン・石膏を 正確にスキャン・復元

セメントスペースも考慮し、滑らかで美しくフィットするCAD設計


チタンアバットメントのスキャンに



志田 和浩 DT

サブストラクチャー・メタルバーや
プロビジョナルも塗って読みこんで、
洗って元通り!

模型の保護・コーティング

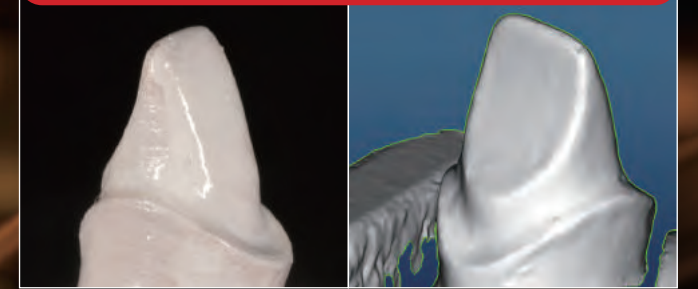

CAD/CAM 用スペーサーとして


- 実際にスキャンするため再現性が高く
完成品のフィットを高めます

スキャン用コーティング材・マーカーとして

- 薄い石膏マージンもキレイに再現
- 美しいスキャン面が得られます

従来のスペーサーと同じように使えます

- 水で簡単に洗い流せます
- プレス用のスペーサーとして

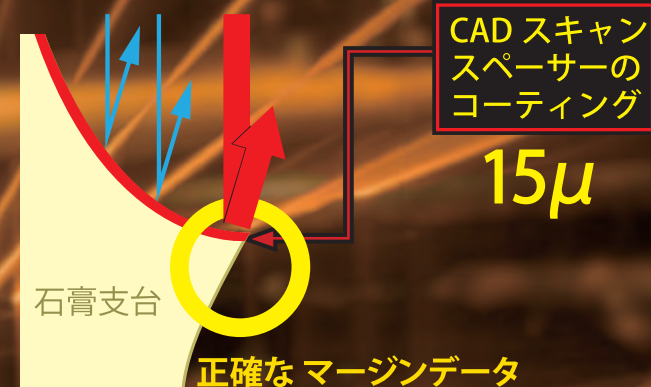

- 石膏作業手順 石膏以外は「塗る・スキャン・洗う」だけでOK!



CADスキャン スペーサー セット アルデンテ社

al dente


専用	CADスキャン スペーサー	¥14,000 各 20ml
専用	CADスキャン スペーサー 硬化材	¥6,700 20ml
専用	CADスキャン スペーサー 分離材	¥3,400 20ml

*硬化材単体では スキャン不可
*分離材単体では スキャン不可


ネバラず, よくのびて, まわしやすい!



斉藤 勇 DT

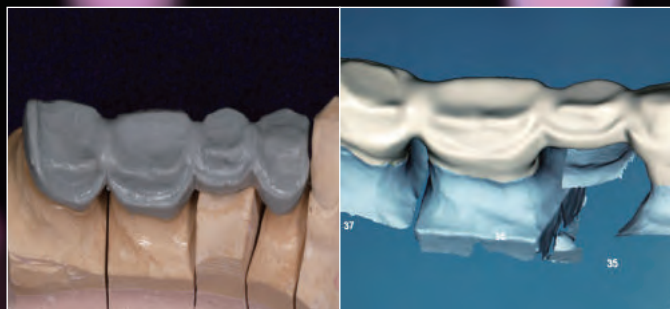

加藤 竜太 DT

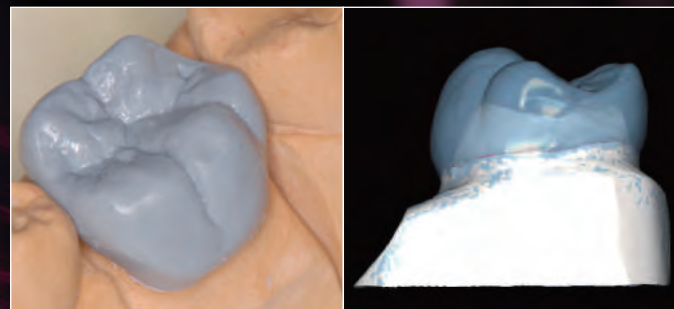

安江 透 DT

CADスキャン ワックス

 スプレー不要
 60g グレー ¥4,800
 110g グレー ¥7,000
 手軽なお試し 9g あります
 56°C

パウダーなしで ガム設計&スキャン




志田 和浩 DT

キレイに読み取り



パウダー不要


トリミングしやすい

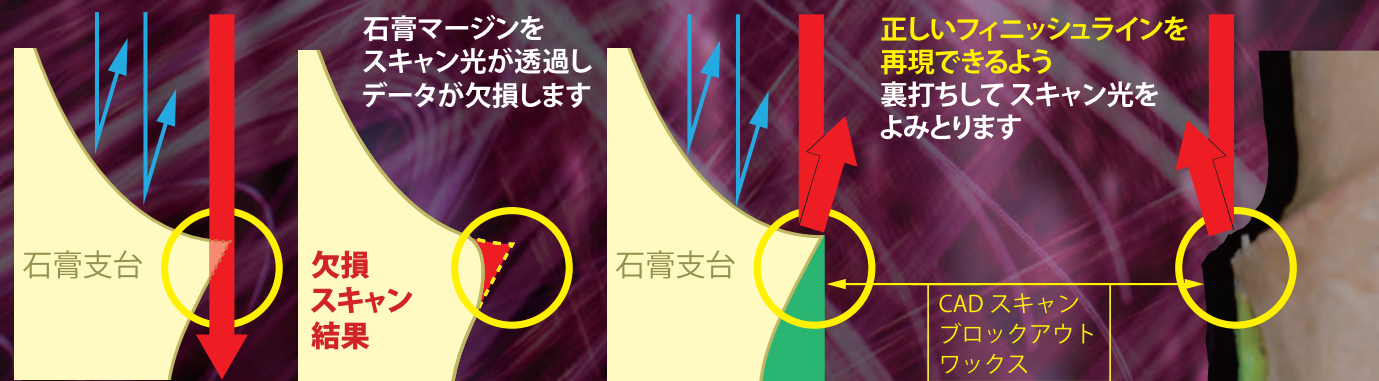『石膏マージン データ』の 『ヌケ・もれ・ガタつき』を防ぐ



CADスキャン ブロックアウト ワックス

 スプレー不要
 60g グリーン ¥4,800
 手軽なお試し 9g あります
 57°C

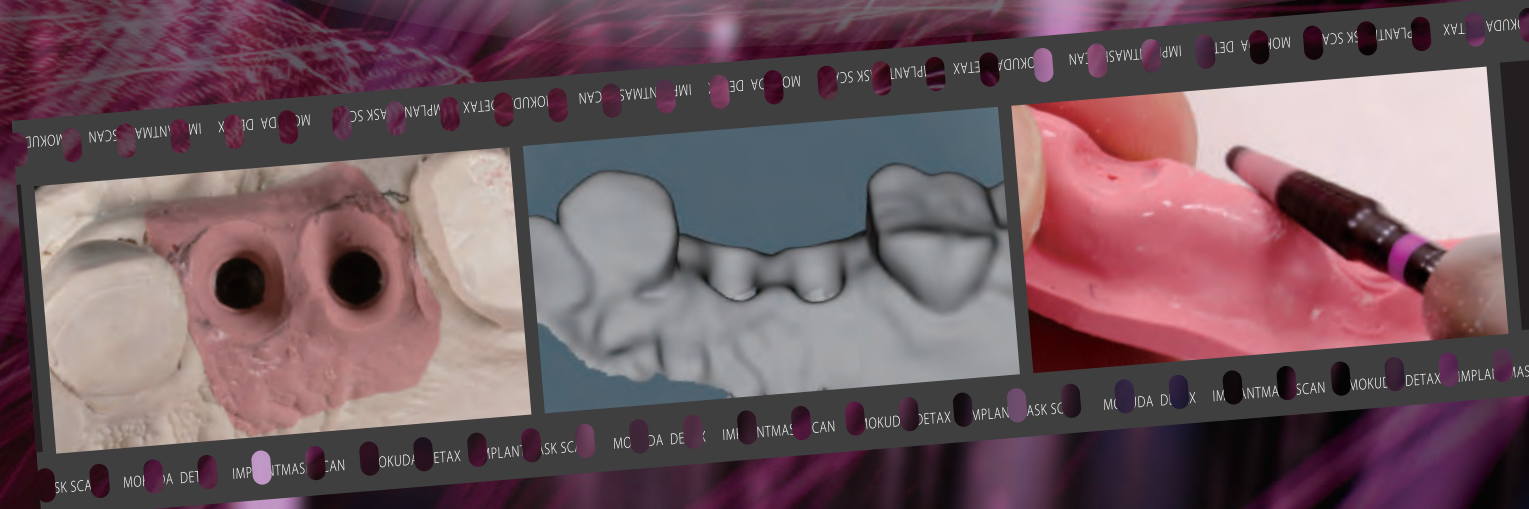

CADスキャン インプラント マスク ¥12,000

 スプレー不要
 50ml x2
 分離材 (15ml) ミキシングチップ x12

お徳用 エコパック ¥15,000

 スプレー不要
 50ml x4
 カートリッジのみ

DETAX

操作時間 2分 硬化時間 5~6分

光る半焼結ジルコニア!

ジルコニアがザクザク削れる

はやい・キレイ

シター後の 研磨時間を短縮



やわらかい

クラック, チッピング減

低コスト

高価なダイヤモンド入りのポイントの 摩耗・使用を減らす!

プレシッター・ジルコンポリッシャー / 茂久田商会

艶出し <白>

面修正 スプルー 除去 <灰>

ZW1 1本 ¥2,980	Z1 1本 ¥1,980	Z2 1本 ¥2,450	Z3 1本 ¥2,450	Z4 10本 ¥2,660
ZF1 1本 ¥1,980	ZF2 1本 ¥2,450	ZF3 1本 ¥2,450	ZF4 10本 ¥2,660	


※マンドレルは別売：ホリコピンボル用 326H030 (太)

すり減らずに長寿命

発熱が少ない

面をキレイにする 微細粒子入

●ジルコンブライト・セラダイヤでの艶出し・研磨前に、組み合わせてご活用ください。

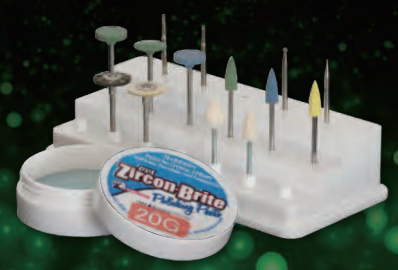

セラダイヤ スーパーファースト / デデコ社

実寸

4241 1本 ¥6,900	4242 ¥6,900	4243 ¥6,900	4244 ¥6,900	4245 ¥6,900	4246 ¥6,900	4247 ¥7,900	4248 ¥7,900	4249 ¥7,900	4250 ¥7,900
-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



吉澤 和之 DT



檜田 健幸 DT



山崎 竜 DT

調整 ▶▶▶ 研磨

e.max® や セラミックが
かんたんに・すばやく輝く
チェアサイドすっきり

ショウ セレクション キット



e.max®



HP用
¥24,000



スプレーカット



傷消し
コンタクト研磨

中研磨 / 微調整




艶出し

最終艶出し


すべて完了

ハイブリッドブロックが
かんたんに・すばやく輝く
チェアサイドで魂をこめる


ショウ セレクション キット for

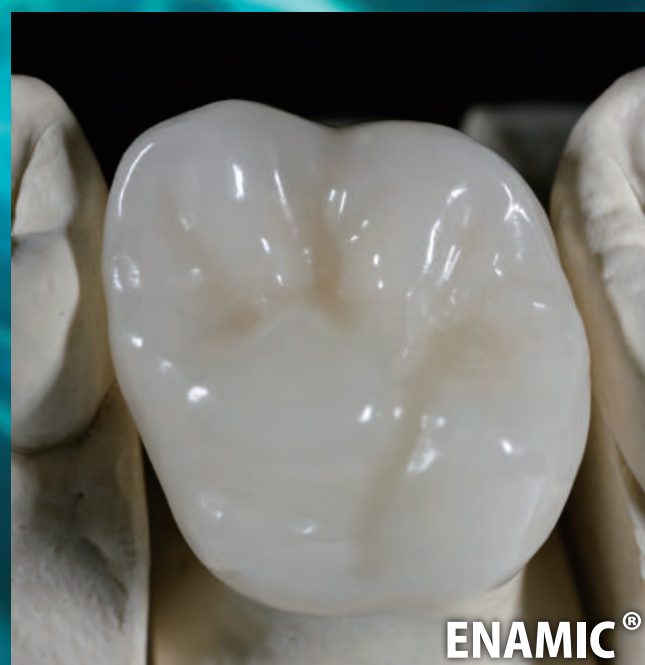

ENAMIC®

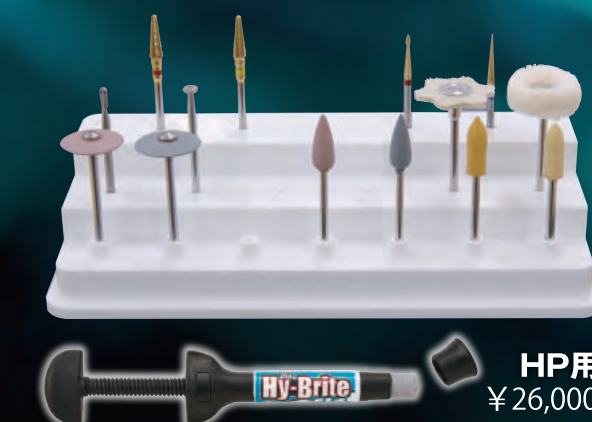

HP用
¥26,000

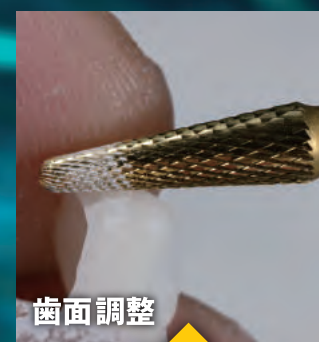

歯面調整



裂溝 / 荒研磨

マージン / 中研磨



仕上げ

艶出し

一般名	販売名	クラス	品番
歯科用研磨材料	ショウ・セレクション・キット	ハイブリッド	2881X0005000333
歯科用研磨材料	ショウ・セレクション・キット	一般研磨機	2881X0005000306

e.max® ジルコニア ポーセレンがすばやく光る!



ジルコンブライト

e.max® ジルコニア PEKK系ポーセレンに 輝きをあたえる

口腔内でも使用できる 速さと輝き



長寿命 形態修正から艶出しまで セレック・プロセラにも有効 HP用1本入


Dedeco セラダイヤモンドポリッシャー / デデコ社

傷 消し 形態修正				
微 調整 艶 出し				
仕上研磨				
価 格	各 ¥3,000	各 ¥5,500	各 ¥2,500	各 ¥2,500

絵の具を塗るように すばやく艶出し
ワンステップ! ブラシだけ!!
飛び散らずにしっかりと 快適操作



対合歯を傷つけない。
天然歯以上にやさしい咬合を
研磨により実現。

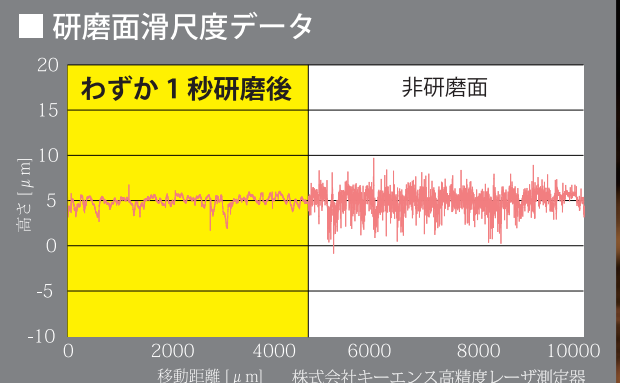

完全に研磨されたジルコニアは、対合歯を守ります。
(チューリッヒ大学他での研究結果より)

- ジルコンブライト 40G ¥15,000 DVA社
- ジルコンブライト 20G ¥11,000 DVA社
- ロビンソンブラシ 113 ¥2,800 / 12入 ポリラピッド社
- ロビンソンブラシ星 113ST ¥4,000 / 12入 ポリラピッド社

一般的名称 販売名 クラス分類 番号
 歯科技工用ダイヤモンド研削材 デデコダイヤモンド研削器具 一般医療機器 2881X00005000285

実寸

15秒でチタン・コバルトのスクラッチ除去 ~中研磨まで!




わずか
15秒

2分で仕上がる!

シリコン 15秒 + アクリルマーベル 100秒

硬くて、長持ち!

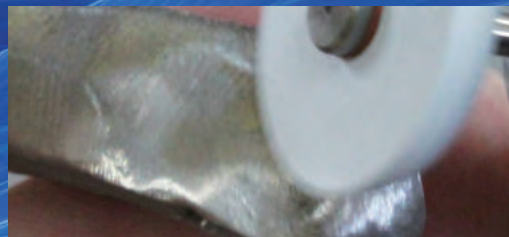


シリコンラバーポリッシャー / デデコ社
7114(100入) ¥5,500
7104(100入) ¥6,500

奥森 健史 DT

ドレッシング不要ですばやく研磨 裂溝 隣接 咬合面に

太 φ2.8mm	コース (茶)	ミディアム (赤)	ファイン (緑)	スーパーファイン (ダイヤモンド入り)
細 φ1.9mm	9634	9635	9636	9548
	9646	9648	9649	9549

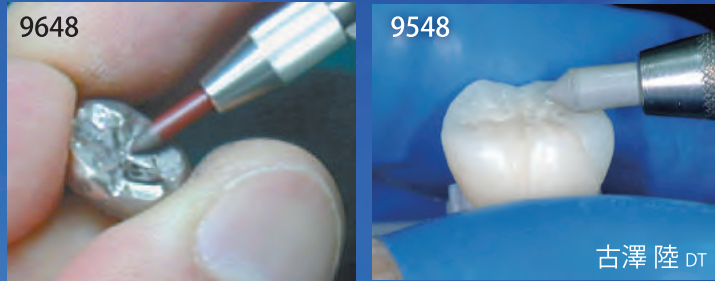

古澤 陸 DT



太 326H030 実寸 細 326H020

セラミック ハイブリッド コンポジット チタン コバルトクロム

- アソートキット:ピンボル各10本, マンドレル各1本セット ¥9,800 (9548, 9549は含まれません)
- 10本入り ¥1,650、マンドレル付100本入 ¥12,000 *9548, 9549のみ5本入 ¥8,200
- 最高使用回転数: 15,000rpm



歯科技工用ブラシ研削材	デデコアブラシ研削器具	1	輸出	28B1X000050000284
歯科用ゴム製研削材	ホリコ ポリッシャー	1	輸出	28B1X000050000291
歯科用マンドレル	ホリコ マンドレル	1	輸出	28B1X000050000292

レーズのまま 研磨が完了


ミニチュアブラシアダプター

カンタンに取り付け、すぐ光る
大ブラシ~小ブラシまで
両手で こまかく磨ける!



六甲歯研

実寸

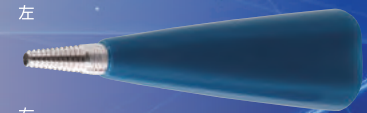

左




右

¥9,800 / 1個入

専用ブラシ

e.max® ジルコニア ポーセレン

ハイブリッドブロック ポーセレン

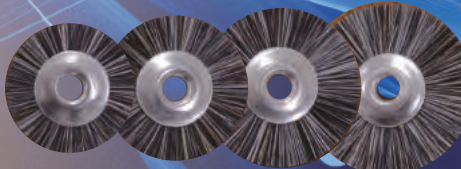

レーズミニ ロビンソンブラシ
平 グレー軟毛
品番:123
材質:山羊毛
サイズ:17・19・21・23mm



レーズミニ ロビンソンブラシ
平 白軟毛
品番:122
材質:山羊毛
サイズ:17・19・21・23mm



綿糸ポイント
レーズ
品番:125
材質:綿糸

床用レジン メタル



フランネルポイント
レーズ
品番:129
材質:綿



コットンポイント
レーズ
品番:129N
材質:綿(更紗)

実寸

一般的名称	販売名	クラス分類	番号
歯科用研削器材	ポリラビッド 研削用器材	一般医療機器	輸出 28B1X000050000294
歯科用マンドレル	ミニチュアブラシ アダプター	〃	〃 28B1X000050000318

ハイブリッドブロックをすばやく仕上げる

概形・寸法を保って、なめらかに調整



ハイブリッドフレックス / デデコ社

コース HP7581 ¥4,800 / 12入	ミディアム HP7917 ¥5,400 / 12入	ファイン HP7631 ¥4,800 / 12入	X-ファイン HP6569 ¥5,400 / 12入	コース HP7557 ¥1,800 / 12入	ファイン HP7607 ¥1,800 / 12入

実寸

ジルコンブライトのスピードをハイブリッドブロックでも!!



ハイブリッドブロックをすばやく艶出し

口腔内でも使用できる!

最後までブラシにつけやすい新パッケージ

CERASMART®



熱を放散して焼きつかない! 裂溝・歯間に入り込んで磨く!

ENAMIC®



ロビンソンブラシ星112ST / ポリラビッド社 ¥4,000 / 12入

ロビンソンブラシ112 / ポリラビッド社 ¥2,800 / 12入

山本 尚吾 DT

熱くなりにくい 新・星形形状

ロビンソンブラシ 星 グレー軟毛



北海道医療大学 歯科クリニック

星 グレー軟毛

品番：113ST
材質：山羊毛(やや柔らかめ)
種類：HP用のみ
サイズ：23mm



ロビンソンブラシ 星 白軟毛



山本 尚吾 DT

星 白軟毛

品番：112ST
材質：山羊毛(やわらかめ)
種類：HP用のみ
サイズ：23mm



スムーズな仕上げ

鹿皮の研磨圧で すばやく傷とり

フランネルで優しく 包みこむ艶だし

綿糸ポイント



株式会社カロス

- ペースト状の研磨材粒子をしっかりキャッチ
- 柔らかい綿糸で優しく艶だし研磨
- レジン床から金属までチェアサイドで細かく艶だし

品番：103
材質：綿糸
種類：HP用のみ
サイズ：φ21mm

シャモア・コットンポイント



株式会社ゴウ

- コシの鹿皮で歯間部もしっかり研磨
- 床用レジンの表面研磨に
- チェアサイドで使いやすいあらゆる補綴物に

品番：102NL
材質：鹿皮・綿(更紗)
種類：HP用のみ
サイズ：φ21mm

フランネルポイント



- 歯間などの細かい部位をしっかり研磨
- ハイブリッド・ポーセレンの研磨に
- 毛羽立ちを抑え 長期に使用可能

品番：102
材質：綿(フランネル)
種類：HP用のみ
サイズ：φ23mm

112・113が ジルコンブライトと好相性

ロビンソンブラシ 平 グレー軟毛/白軟毛



玉置 博規 DT

平 グレー軟毛

品番：113
材質：山羊毛(やや柔らかめ)
種類：HP用のみ
サイズ：φ15mm/φ17mm/φ19mm
φ21mm/φ23mm



平 白軟毛

品番：112
材質：山羊毛(やわらかめ)
種類：HP用のみ
サイズ：φ17mm/φ19mm/φ21mm/φ23mm



ロビンソンブラシ 盃 白毛/黒毛



西岡 健一 DT

盃 白毛

品番：105
材質：豚毛(やや硬め)
種類：HP用/RA用
サイズ：φ12±1mm(ブラシ部最大径)



盃 黒毛

品番：106
材質：豚毛(硬め)
種類：HP用/RA用
サイズ：φ10±1mm(ブラシ部最大径)



研磨圧が強く伝わる 凝縮コットン 型崩れのないフェルト

コットンポイント/ステッチコットンポイント



西岡 健一 DT



コットンポイント

品番：102N 材質：綿(更紗)
種類：HP用のみ サイズ：φ19mm


ステッチコットンポイント

品番：102NS
材質：綿(更紗)・ステッチ入
種類：HP用のみ
サイズ：φ21mm

フェルトポイント



株式会社カロス

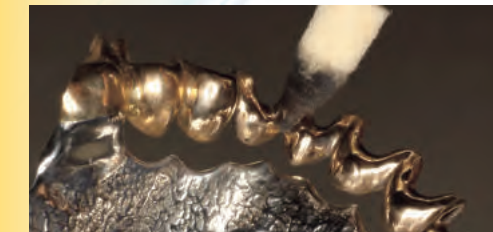

山口 耕 DT



株式会社ゴウ



- クラスプ内面など 湾曲面にフィット
- 研磨材を保留して 最終研磨に 効果的
- ウールフェルトで 表面に傷をつけない

品番：#55	φ9mm	13mm長
#56	φ9mm	13mm
#57	φ7mm	15mm
#58	φ6mm	15mm
#59	φ21mm	3.5mm
#60	φ21mm	5mm
#61	φ21mm	6mm

材質：ウールフェルト
種類：HP用のみ

コシのある豚毛で、小傷除去から中研磨まで

金属床の荒研磨

2列ブラシ



西岡 健一 DT



2列ブラシ

品 番：2/25/50
材 質：豚毛
サイズ：φ50mm

2列短毛ブラシ




株式会社カロス



2列短毛ブラシ


品 番：2/40/60
材 質：豚毛
サイズ：φ60mm

真鍮ブラシ / スチールワイヤーブラシ

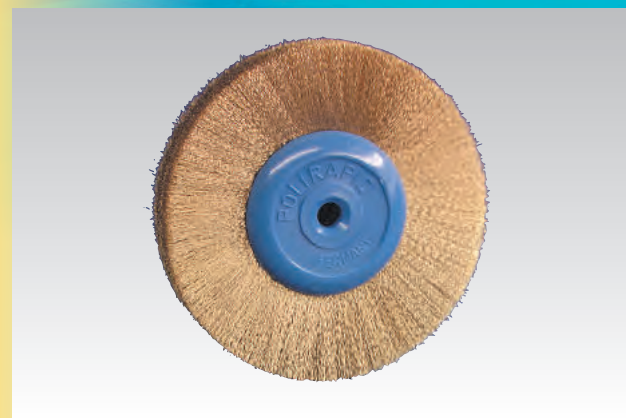

- 高い耐久性でランニングコストをカット
- 2種類の柔らかさであらゆる部位に対応
- 細かい毛で無駄な傷をつけません

品 番：22
材 質：真鍮
サイズ：φ80mm

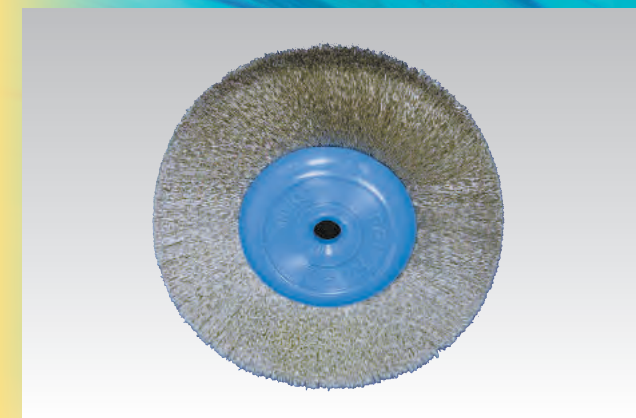

品 番：25
材 質：スチール
サイズ：φ80mm

1列ブラシ



西岡 健一 DT



1列ブラシ

品 番：1/25/50
材 質：豚毛
サイズ：φ50mm

3列ブラシ



西岡 健一 DT



3列ブラシ

品 番：3/40/80
材 質：豚毛
サイズ：φ80mm

山羊毛の柔らかさで、やさしく研磨

軟毛ブラシ



- 幅広いマテリアルに対応
 - ノンクラスデンチャーなどにも使用できます
 - 細かい部位にも難なく到達
- 金属床からレジン、フレキシブルデンチャーまで幅広く使用できます。
※毛がからんで抜けることを防ぐためリンガルバーへの使用や強く押し当てての研磨は避けて下さい。

品 番：32
材 質：山羊毛
サイズ：φ90mm

細かい毛先で、細部まで簡単研磨

メタルセンターブラシ (ブラック, ホワイト)



株式会社カロス

- 小窩列溝や歯間乳頭にも対応
- メタルに強いコシで研磨

品 番：150(ブラック)
151(ホワイト)
材 質：豚毛 ブラックが硬め、ホワイトがやわらかめ
サイズ：φ48mm

金属床の荒研磨

フェルトコーン / フェルトホイール



西岡 健一DT

- フェルトの繊細な面で やさしく研磨
- 折れにくく 耐久性に優れます
- 砲弾と円盤をくみあわせ 効率の良い研磨

品 番：51(角型) (φ50mm・厚さ10mm)
52(ソロバン型) (φ50厚10mm)
材 質：ウールフェルト




フェルトコーン

金属床やレジン床の内面にフィットし、面に沿って研磨ができます。



角型

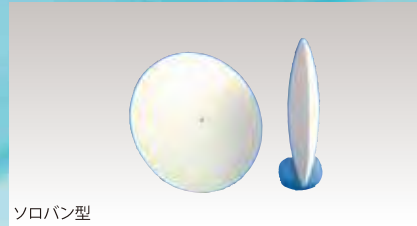

ソロバン型

フェルトホイール

角型は広い面を、ソロバン型で細かい歯間乳頭部を研磨します。

トルクで幅広く仕上げ研磨, レーズ用ホイール


シャモア・綿バフホイール



鹿皮で綿を挟み、面の研磨から歯間部の研磨まで一つで行えます。

品 番：29NL
材 質：鹿皮・綿(更紗)
サイズ：φ90mm

シャモアホイール

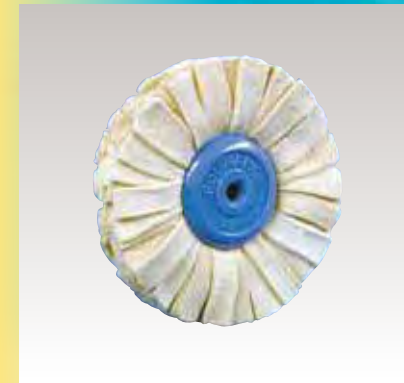

コシのある鹿皮を切り分け、研磨圧を伝わりやすく、面も滑らかにします。

品 番：21
材 質：鹿皮
サイズ：φ90mm

フランネルホイール



西岡 健一DT



金属床、レジン床、スルフォン床、多種多様な艶出し研磨用です。

品 番：30
材 質：綿(フランネル)
サイズ：φ100mm

トルクで幅広く仕上げ研磨, レーズ用ホイール

綿糸バフホイール



西岡 健一DT

非常に柔らかい素材のため湾曲した面にも難なくフィットし研磨できます。

- ジルコニア・ポーセレンから、硬質レジン・金属にまで幅広く対応
- 長く使えてランニングコストを削減

品 番：2
材 質：綿糸
サイズ：φ70mm

ステッチ入綿バフ



西岡 健一DT

ステッチを入れることにより研磨圧を効率よく伝えます。

品 番：29C
材 質：綿(更紗)・ステッチ入
サイズ：φ100mm


■ ポリラピッド 研磨用器材 単位:mm

		規 格	価 格	内 容
ロビンソンブラシ	星 グレー軟毛	φ23mm	¥4,000	12個
	星 白軟毛			
	平 グレー軟毛	φ15・17・19・21・23	¥2,800	
	平 白軟毛			
	盃 白毛(HP用)	φ12±1(ブラシ部最大径)	¥2,950	
	盃 白毛(RA用)			
	盃 黒毛(HP用)			
綿糸ポイント	φ21	¥2,800	12個	
シャモア・コットンポイント	φ21	¥3,800		
フランネルポイント	φ23	¥2,800		
コットンポイント	φ19	¥2,800		
ステッチコットンポイント	φ21	¥3,800		
フェルトポイント	#55~#59	¥2,950		
	#60~#61	¥3,350		
ミニチュアブラシアダプター	左/右	¥9,800		1個
レーズミニ ロビンソンブラシ 平 グレー軟毛	17・19・21・23	¥3,500		12個
レーズミニ ロビンソンブラシ 平 白軟毛				
レーズ綿糸ポイントレーズ			12個	
フランネルポイントレーズ		¥3,800		
コットンポイントレーズ				
砂研磨用	1列ブラシ	φ50mm	¥ 440	1個
			¥4,400	12個
	2列ブラシ	"	¥ 520	1個
			¥5,200	12個
	2列短毛ブラシ	φ60	¥ 740	1個
			¥7,400	12個
	3列ブラシ	φ80	¥ 740	1個
			¥7,400	12個
	4列ブラシ	"	¥ 740	1個
			¥7,400	12個
真鍮ブラシ		"		1個
スチールワイヤーブラシ		"	¥3,150	1個
軟毛ブラシ		φ90	¥1,750	1個
メタルセンターブラシ ブラック /ホホワイト		φ48	¥ 710	1個
			¥7,100	12個
フェルトコーン		φ25・長さ50	¥ 700	1個
フェルトホイール	角型	φ50・厚さ10	¥ 600	1個
	ソロバン型	"	¥ 850	
綿バフホイール		φ70	¥1,500	1個
ステッチ入綿バフ		φ100		1個
シャモア・綿バフホイール		φ90	¥2,650	1個
シャモアホイール		"	¥3,550	1個
フランネルホイール		φ100	¥1,340	1個

ジルコニアも、コバルト・チタンも しなって使いやすく、 力が入れやすい

サクッと切断

しなる！長寿命ファイバー入

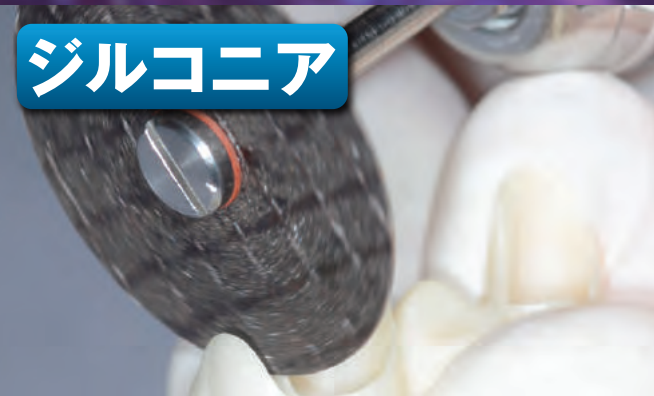

ジルコニア




コバルト

株式会社デンテックインターナショナル

ファイバーイン・ジルコンセパレーター デデコ社

ジルコニア・ポーセレン用


実寸

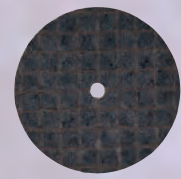

5581
φ22・厚さ0.2mm
12枚入…¥4,000



5583
φ22・厚さ0.3mm

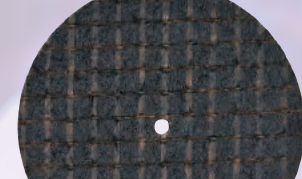

5585
φ38・厚さ0.5mm
12枚入…¥7,500



チタン

株式会社ミハラ歯研

**早い！大型
スピードレーズにも**

コバルト・チタン用


実寸



5571
φ24・厚さ0.2mm
12枚入…¥4,000



5573
φ24・厚さ0.3mm

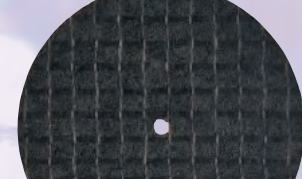

5575
φ38・厚さ0.5mm
12枚入…¥7,500

最後まで切れ味を楽しめるダイヤモンド焼結ポイント 5本で 前歯・臼歯の ポーセレン形態修正完結

前歯



外形

SHM251 050


バイトの調整やクラウンの大まかな外形修整を行います。



形態・隆線

SHM250 037


サイズを下げて形態を追求し、隆線を付与します。使いやすい砲弾型の形状です。

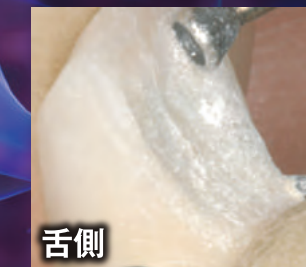

舌側

SHM030 025

角を用いて舌側の調整を行います。カップ型のため、角が尖りつづけます。

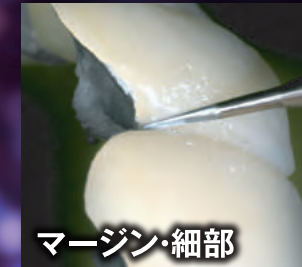

マージン・細部

HP C23RS

エマーゼンスプロファイルを調整し、細部を整え、表面性状を形成します。




歯間・マージン

SHM273 016

歯間やエマーゼンスプロファイルの形態修整、マージンの厚み調整など多目的に使えます。


臼歯

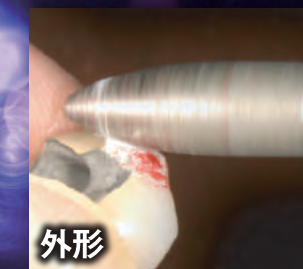

外形

SHM251 050

おおまかな外形を修整します。直径が大きく、スピーディにすすみます。

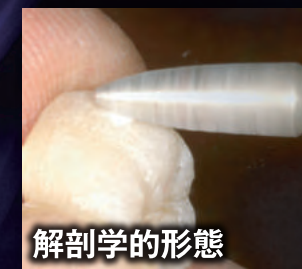

解剖学的形態

SHM250 037


さらに解剖学的な形態へ整えます。大きさと形態から非常に扱いやすいのが特徴です。



隆線・唇側

SHM030 025


尖り続ける角を使用して主溝や副溝を形成し、隆線をつくります。唇側面溝などを付与することも可能です。

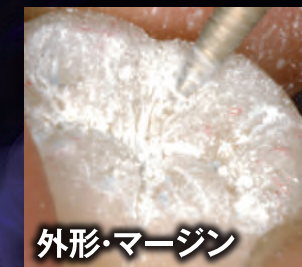

外形・マージン


SHM273 016

外形の最終微調整や、マージンの厚み調整、横走隆線の付与や咬合面の形態修整など、使用範囲は多岐にわたります。

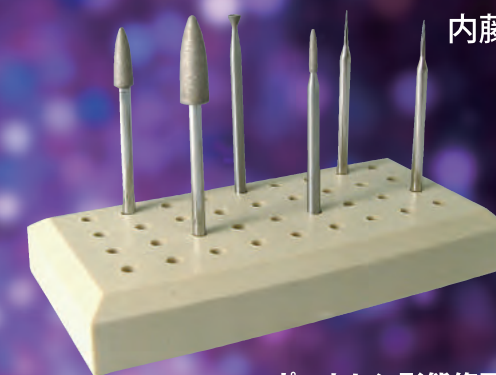

内藤 孝雄 DT

ポーセレン形態修正キット
ホリコ社 セット¥29,800

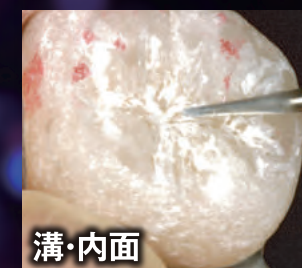

溝・内面

HP C23RS

溝をよりシャープに仕上げます。周波線の付与やクラウン内面の適合調整にも使用できます。

※初回使用前と目詰まり時には別売りダイヤモンドクリーンで黒ずみを防いでください。



実寸



SHM030 025



SHM251 050



SHM250 037



SHM273 016



HP C23RS
(カーバイドバー2本入)

セラミック 切削

シンターダイヤモンド

ダイヤモンド粒子を押し固めて焼結させてあり、新生面が次々と均等に現れるので常に新品の切れ味を楽しめます。

▽…尖り続けるカップ型
G…荒目選択可能(下段)
実寸

- 高切削力と強耐久性を両立
- チップングしない高い回転精度
- 均等に磨耗するので、最後まで使用感が変わりません
- 長寿命で経済的
- 豊富な形態をご用意、使用していくうちにさらにお好みの形状へと進化していきます

ISO表示 = 形態番号/ 頭部最大径	SHM001 018	SHM001 021	SHM001 025	SHM001 033	SHM014 018	SHM014 021	SHM014 025	SHM014 060	SHM030 018	SHM030 023	SHM030 025	SHM030L018	SHM030 040	SHM030 060
ISO表示	07503	07504	07505	07506	07508	07509	07510	07511	07588	07514	07515	07639	07516	07517
SHM (1本)	07503	07504	07505	07506	07508	07509	07510	07511	07588	07514	07515	07639	07516	07517
ISO表示	—	—	—	—	—	SHM014G021	SHM014G025	—	—	—	SHM030G025	—	—	SHM030G060
SHM (1本)	—	—	—	—	—	07512	07513	—	—	—	07573	—	—	07575

ISO表示	SHM304 025	SHM304 050	SHM304 060	SHM041 080	SHM026 080	SHM068 060	SHM273 016	SHM273 018	SHM273 025	SHM249 023	SHM274 025	SHM250 037	SHM274 040	SHM251 050	SHM274 060
SHM (1本)	07567	07568	07569	07518	07581	07519	07559	07560	07561	07642	07564	07640	07641	07641	07578
ISO表示	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SHM274G025	—	SHM274G040	—	SHM274G060
SHM (1本)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	07565	—	07631	—	07579

ISO表示	SHM165 021	SHM165 023	SHM167 035	SHM167 050	SHM198 025	SHM198 037	—	SHM199 025	SHM199 031	SHM199 040	SHM199 050	SHM263 040	SHM263 050	—
SHM (1本)	07533	07534	07536	07537	07545	07546	—	07548	07549	07550	07551	07554	07555	—
ISO表示	—	SHM165G023	—	SHM167G050	—	SHM198G037	SHM198G050	—	SHM199G031	SHM199G040	SHM199G050	SHM263G040	SHM263G050	SHM263G060
SHM (1本)	—	07535	—	07538	—	07547	07577	—	07552	07553	07613	07556	07557	07621

ISO表示	SHM172 018	SHM172 025	SHM172 031	SHM173 031	SHM173 040	SHM173 050	SHM141 025	SHM141 031	SHM143 050	SHM111 018	SHM111 021	SHM111 025	SHM111 031	SHM113 050
SHM (1本)	07539	07540	07570	07541	07542	07543	07527	07528	07529	07521	07522	07523	07524	07525
ISO表示	—	—	—	—	—	—	—	—	SHM143G050	—	—	SHM111G025	SHM111G031	SHM113G050
SHM (1本)	—	—	—	—	—	—	—	—	07531	—	—	07595	07596	07526

レギュラー	100μ	グリーン
(G) コース	135μ	グリーン

- Iクラス: 1本... ¥6,200
- IIクラス: 1本... ¥7,900
- IIIクラス: 1本... ¥9,600

※黒ずみを防ぐため、初回使用前と目詰まり時は下の『ダイヤモンド清掃材ダイヤクリーン』で清掃してください。
※①～④はポーセレン形態修正キット(P26)の構成品です。

黒ずみをふせぐ、砥石!!

ダイヤモンドディスク・ポイント清掃材
ダイヤモンド清掃材ダイヤクリーン

ダイヤモンドディスク・ポイントに付着した切削塵をダイヤモンドの粒子を損なうことなく2~3秒で除去・清掃します。切れ味が復活し、寿命を延ばします。水に浸してからご使用下さい。

シンターダイヤモンドポイントには、初回使用前と目詰まり時に、乾燥した本品へ5000rpmで接触させこまめに清掃を行って黒ずみを防いで下さい。

00000...モクダコード



● ¥2,000 09018

一般的名称	販売名	クラス分類	番号
歯科技工用ダイヤモンド研削材	ホリコシンターダイヤモンドポイント	一般医療機器	届出 2881X00005000232

●ディスクの奥が透けて見える, 穴&スリット

●発熱をおさえ, 切粉が詰まらない

(全てmm表示)

ジュニアフレックス	φ8 10 13	φ8 10 13
両面	H361F080 100 130	H362F080 100 130
0.18厚		

オールダイヤモンド	φ19 19 19
両面	SH396C190 SH394C190 SH393 190
0.16厚 0.19 0.3	



井上 陽介 DT

穴あき	φ16 19 22	φ19 22	φ19 22	φ19 22	φ19 22
両面	H805C160 H805F190 220	H806F190 220	H807F190 220	H353F190 220	220
0.15厚					

盃状	φ19 22
両面	93NV 94NV

溝切り	φ10 13 16 19 22	φ19 22
両面	H365F100 H365C130 160 190 220	800F190 220
0.15厚		

超薄型	φ19 22
両面	86xxSI 87xxSI
0.1厚	
両面	H355XF190 86xxD H355XF220 87xxD
0.12厚 0.15 0.12 0.15	

薄型	φ19 22
両面	86xFSI 86xSI 87xFSI 87xSI
0.13厚 0.2 0.13 0.2	
両面	86xFD 86xD 87xFD 87xD
0.18厚 0.3 0.18 0.3	

スケルトンタイプ	φ30 45
両面	H333C300 H333C450
0.3厚 0.35	

高い冷却効率	φ30 45
両面	H365C300 H365C450
0.3厚 0.35	

丈夫なロングライフ	φ30 45
両面	H340F300 H340F450
0.3厚 0.35	

- コース 135μ ○ レギュラー 100μ ● ファイン 45μ ● エキストラファイン 35μ


ジュニアフレックス ¥3,150
 シンターダイヤフレックス ¥7,800
 盃状: ¥3,300
 片面: ¥2,880
 両面: ¥5,400
 ソーカットディスク (φ30) ¥5,500
 ソーカットディスク (φ45) ¥9,000

高切削力 × 繊細な しあがり

e.max®・セラミックの微調整も きれいに仕上げる新形態2本



山本 尚吾 DT

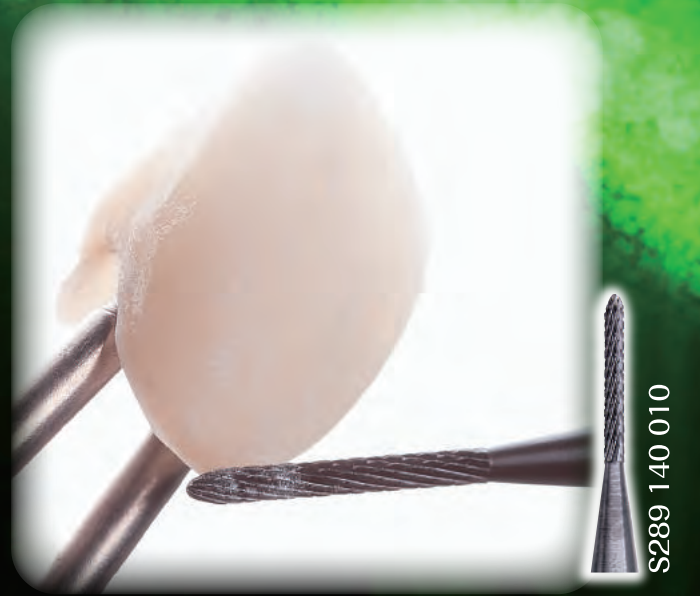

S289 140 010

角度自在にミリング 場所を取らない A4サイズ



山本 尚吾 DT



ブラックカーバイトバー コバルト・チタンをバリバリ切削 発熱やブレを抑える

ミリング ブラック 精密な調整も すばやくバリバリ

90°可変雲台, 明るいライトを装備 スペースをとらないコンパクト 軽いアームでらくにハンドリング



e.max・ポーセレン
フィニッシング・レッド
S289 140 010
S289 140 012
S237 140 023
S198 140 023
S194 140 040
S194 140 045
S274 140 060



遠藤 淳吾 DT

ミリング ブラック
カットイング・ピンク
0° S137 137 023
1° S200 137 020
2° S200 137 023/2
4° S200 137 031
6° S200 137 040



カットイング・ピンク
S237 134 023
S198 134 023
S200 134 023
S194 134 040
S274 134 060



フィニッシング・レッド
0° S137 140 023
1° S200 140 020
2° S200 140 023/2
4° S200 140 031
6° S200 140 040




MARIOTTI
ミリングマシン
ブラボ
クッチオーロ

一般的名称	販売名	クラス分類	番号
歯科用カーバイトバー	ホリコ カーバイトバー	一般医療機器	28B1X00005000290

一般的名称	販売名	クラス分類	番号
歯科技工用電気エンジン	マリオッティミリングマシン	一般医療機器	28B1X00005000300

全角度可変 電磁ロック雲台付き

あらゆる角度に動く雲台 (MCEF) を標準装備。
側方ドリリングを簡単実現。0~90°まで自在に角度設定が可能です。
底面に電磁ロック機能を備え、ワンタッチ操作で固定と移動が楽々。
模型固定用ピンは石膏模型・固定皿の大小に合わせ、2ヶ所で設定が可能です。

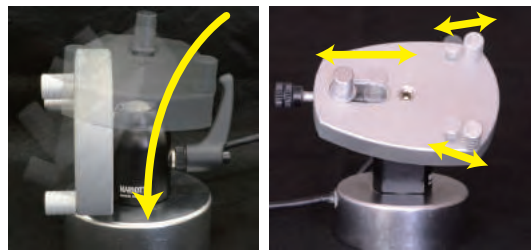


すっきりコンパクト

A4用紙と同等サイズのスペースに設置可能なコンパクトボディ。
(コントロールボックス除く)
コンパクトながら強固な軸で、限られたスペースでの精密ミリングを実現。



影なく明るい LEDライト

ハンドピース先端にLEDライトが標準装備。
先端埋め込み型で作業部をくっきり照らし、削った面がはっきり見えます。
LEDライトは発熱を抑え、ワックスミリングでも変形の心配なく作業が可能です。

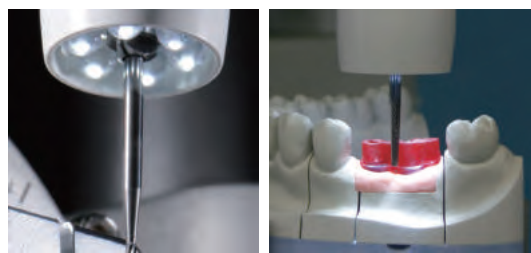


マリオッティ ミリングマシン本体セット内容

インプラント技工に機能充実 雲台付き

Bravo

マリオッティ ミリングマシン ブラボ

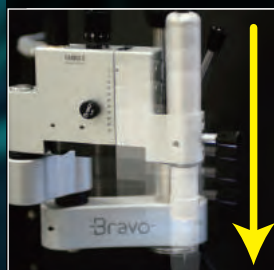

繊細な感覚を逃がさないアーム

0.01mm単位で調節可能な深度メーター付き。
抵抗を感じし、トルク自動制御でバーへの過度の負担を軽減するマイクロモーター内蔵。
スプリングにより上下動調節が可能です。
雲台がセットになり、即日ミリング可能です。

¥849,800

- ・ブラボ本体 (モーター含)
- ・コントロールボックス
- ・90°可変雲台 MCEF
- ・フットスイッチ

サイズ : W25×D25×H37cm
重さ : 14kg
回転数 : 2,000~30,000rpm
チャック : φ2.35mm



リーズブルになめらかミリング 雲台付き

Cucciola

マリオッティ ミリングマシン クッチオーロ



かるやかさを実現するアーム

スプリングによるストレスフリーな上下動。
上下の可動範囲を設定することができ、作業効率向上をサポート。
HPは過度の負担を軽減するマイクロモーター内蔵。
雲台がセットになり、即日ミリング可能です。


¥499,800

- ・クッチオーロ本体 (モーター含)
- ・コントロールボックス
- ・90°可変雲台 MCEF
- ・フットスイッチ

サイズ : W25×D25×H37cm
重さ : 13kg
回転数 : 2,000~30,000rpm
チャック : φ2.35mm



オプションパーツラインナップ

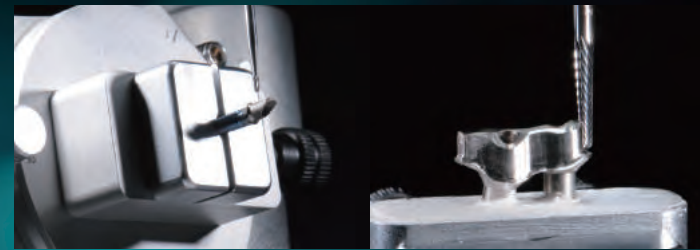

固定用クランプ MRS (石膏用皿小1入) 1個... ¥56,000
雲台上に固定し、ご使用いただけます。
他社雲台での固定も可能です。
単冠を石膏なしで固定でき、ブリッジも少量の石膏で固定。
経済的かつ操作がしやすい設計となっております。

石膏なしでがっちり固定 ブリッジも少ない石膏で スマートに固定

石膏固定用皿小VG3 3個入... ¥15,000
ブリッジの固定が少ない石膏で可能です。
固定用クランプ MRS に固定して使用ください。
裏面に穴が空いており、石膏を取り出しやすい設計です。
ステンレス製



ネジみぞ切りを的確に

タップドリル固定用チャック MT 1個... ¥20,000
バーをチャックに固定し、HPに挿すだけの簡単操作。
思いの角度でタッピングができ、フリーハンドによるズレを防止します。
ドリルは別売



よみがえる0~6°傾斜雲台 他社マシン用も

6°可変雲台 CN 1個... ¥134,000
台座が回転するため、あらゆる向きに角度をつけることができます。
可変角度は0~6°。内冠、アバットメントの角度付与に。
CNをご使用いただくには電磁ロックアタッチメントELBが必要となります。

石膏固定用皿大SCG 1個... ¥5,000
裏面に穴が空いており、石膏を取り出しやすい設計です。
プラスチック製

電磁ロックアタッチメントELB 1個... ¥36,000
6°可変雲台CNを固定するための電磁ロックアタッチメント。
CNをご使用いただくためにはELBが必要となります。
マリオッティマシン専用です。他社マシンで6°可変雲台をご使用の場合はCNSをお求め下さい。

他社マシン用

6°可変雲台CNS (他社マシン用) 1個... ¥170,000
6°可変雲台CNの他社マシン対応品目。
底面を金属で加工しているため、他社マシンの電磁ロックシステムにしっかり反応、固定することができます。

全角度可変雲台

90°可変雲台MCEF (電磁ロック付) 1個... ¥105,000
側方ドリリングに対応した90°可変雲台。本体付属品です。
マリオッティマシン専用。
あらゆる方向からのドリリングに対応。可変角度は0~90°。
底面に電磁ロック機能を備え、ワンタッチ操作で固定と移動が楽々。

90°可変雲台MC (電磁ロック無) 1個... ¥105,000
90°可変雲台MCEFの他社マシン対応品目。
底面を金属で加工しているため、他社マシン電磁ロックにしっかり反応、固定することができます。
マリオッティマシンではネジ固定で使用できません。

リーズナブルな水平固定雲台

0°固定雲台MC0E (電磁ロック付) 1個... ¥85,000
水平で固定できる0°固定雲台。マリオッティマシン専用です。
底面に電磁ロック機能を備え、ワンタッチ操作で固定と移動が楽々。

0°固定雲台MC0 (電磁ロック無) 1個... ¥85,000
0°固定雲台MC0Eの他社マシン対応品目。
底面を金属で加工しているため、他社マシン電磁ロックにしっかり反応、固定することができます。
マリオッティマシンではネジ固定で使用できません。

チタン・コバルトを削り飛ばす! 実感できる一味違う切れ味



ホリコ カーバイドバー ブラックミリング
ダイヤモンドと同等硬度カーボンコーティングを施し
発熱・目詰まり・摩耗を防ぎます。
切れ味はもちろん、優れた耐久性を実感できる
次世代ミリングカーバイド。

角度 φ(mm) 品番	のこぎり状刃で ざくざくカット カッティング・ピンク					なめらかに切れ 仕上がリスムーズ フィニッシング・レッド				
	0°	1°	2°	4°	6°	0°	1°	2°	4°	6°
φ(mm)	2.3	2.0	2.3	3.1	4.0	2.3	2.0	2.3	3.1	4.0
品番	S137 137 023	S200 137 020	S200 137 023/2	S200 137 031	S200 137 040	S137 140 023	S200 140 020	S200 140 023/2	S200 140 031	S200 140 040

ジルコニア アバットメント のミリングに

ホリコ ジルコニア・セラミック系・CEREC・e.max の調整(ファイン)・仕上げ(ウルトラファイン)

ダイヤモンドポイント
ミリング用
高品質ダイヤモンド
仕上がりなめらか。
三層ボンディング
張付けダイヤモンド
実感できる持ちの良さ。

角度 φ(mm)	0°			2°			4°			6°		
	1.0	1.5	2.3	1.0	1.5	2.3	2.3	3.1	3.1	4.0	4.0	
ファイン(赤・45μ)品番	HS116C010	HS116C015	HS116C023	HS137C010	HS137C015	HS137C023	HS186C023	HS200C023	HS186C031	HS200C031	HS186C040	HS200C040
ウルトラファイン(白・15μ)品番	HS116U010	HS116U015	HS116U023	HS137U010	HS137U015	HS137U023	HS186U023	HS200U023	HS186U031	HS200U031	HS186U040	HS200U040

※ファイン(赤)、ウルトラファイン(白)は同形状。掲載写真はファインです。 実寸 ¥3,600

早くイメージ通りに 模型を復元

5秒で硬化
噴霧後5秒で硬化!
作業スピードUP!

ほどよいフロー
スツと流れる
使いやすい粘稠度

固定・修正 使い方がいろいろ
気泡充填, アンダーカットのブロックアウト
面荒れ, ろう着前の仮着など用途多数!

アンダーカットのブロックアウト




気泡充填
気泡
充填完了

ワックス連結
铸造前連結
铸造後, 形態修正

ピンの固定
イエロー
ピンク

瓜坂 達也 DT
チップが詰まったら!
別売クリーナーで洗浄・再生

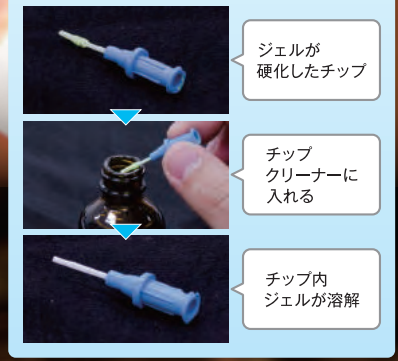

ザピット販売内容

セット	価格	
セット(イエロー)	各¥3,300	
セット(ピンク)		
セット内容: ベースジェル/1, チップ/2, 硬化促進スプレー/1		
別売	容量	価格
チップクリーナー	70g	¥1,600
単品	容量	価格
ベースジェル(イエロー)	9.4g	各¥2,460
ベースジェル(ピンク)	チップ/2	
チップ	10本	¥2,200
硬化促進スプレー	56g	¥1,600

15秒でチタン・コバルトを滑らかに



一般的名称	販売名	クラス分類	品番	一般的名称	販売名	クラス分類	品番
歯科用エアーエンジン	マリオッティミリングマシン	一般医療機器	2881X00005000309	歯科用エアーエンジン	マリオッティミリングマシン	一般医療機器	2881X00005000284
歯科用カーバイドバー	ホリコカーバイドバー		2881X00005000290	歯科用研磨器具	アクリルマーベル		2881X00005000300
歯科用ダイヤモンドバー	ホリコダイヤモンドポイント		2881X00005000094				



石膏模型の『適合精度』と、『ルックス』をアップ！！

輝く模型！！

咬合紙の着色や パウダーをきれいに落とせる 滑沢面！




ショウ・セレクション キット スーパーモデル

キット価格… ¥26,000



ホリコ カーバイドバー

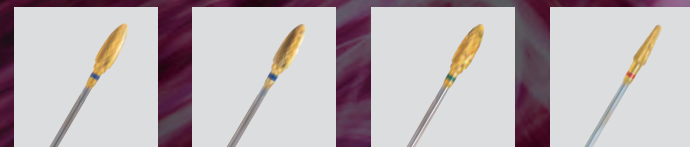

HP 1906 HP 1907 HP 2202 HP 1402

ホリコ ダイヤモンドディスク



HP H365C100 HP H333C300
ソーカットディスク ソーカットディスク



デデコ アブレイブ研削器具



シリコンラバーポリッシャー HP 7131
ハイブリッドフレックス HP 7609
シリコンラバーポリッシャー HP 7104
シリコンラバーポリッシャー HP 7109



ポリラピッド 研磨用器材



ロビンソンブラシ 星 白軟毛 HP 112ST 23mm


一般名 販売名 クラス分類 番号
歯科用研削器具 ショウ・セレクション・キット スーパーモデル 一般医療機器 届出 2881X00005000335

前準備

口蓋部などをすばやくトリミング



セパレーション時にしっかり見える穴空きディスク
クール効果によるカット面の美しさ

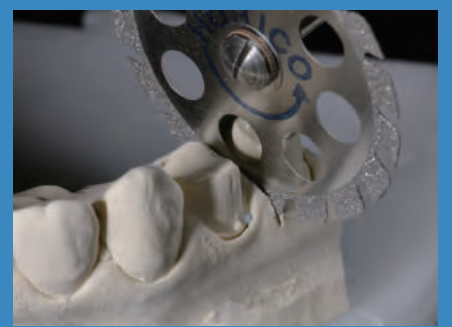

STEP 1

マージン部は ポリッシュタッチで



STEP 2

マージン仕上げをファインポリッシュ



エッジが気になったら



STEP 3

正確に戻る着脱溝の付与



最終仕上げ



完成

山本 尚吾 DT

高精度・手軽・低価格


- 型をキレイにコピー
- ねりやすい
- 油でべとべとしない
- お得な特大メガパック

スーパーハード ラボ パテ ショア A86 10kg
 メガパック ¥36,000

スーパーハード ラボ パテ ショア A86 1600g
 ¥7,200



山口 耕 DT

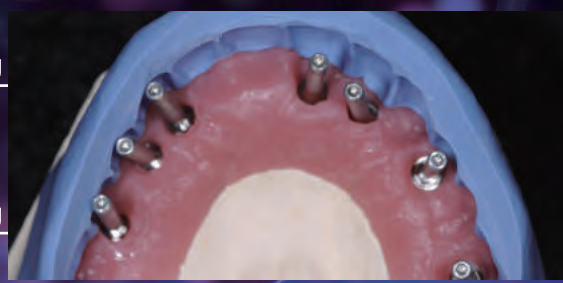


辻 貴裕 DT

正確! 石のような堅さ

- ガチッと堅く, たわまない
- 多数歯の位置関係を正しく再現
- すばやい硬化

ストーン ラボ パテ ショア A96 2800g
 堅い! ¥11,000

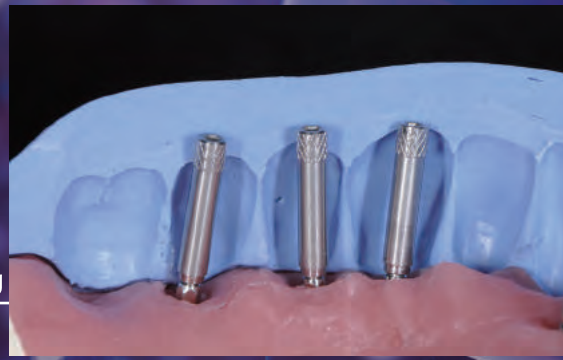

長持ちガム模型材

- まるで歯肉! リアルな質感・色調
- ちぎれにくく適度な弾性

オートミキシング エステティックマスク スタンダードパック ¥9,900
 50ml x2 分離材 15ml ミキシングチップ x12

お徳用 エコパック ¥10,000
 50ml x4 カートリッジのみ

エステティックマスク ¥9,200
 50ml x2 分離材 15ml スパチュラ 注入用シリンジ大, 小 練板紙



ガムシリコーンの切削・調整に
 軟性シリコーン, マウスガード, Co-Cr, チタン, ハイブリッドカット用
 ホリコカーバイドパー ブラック HP ダイヤモンド LC コーティング

HORICO

S237 134 023 S198 134 023 S200 134 023 S194 134 040 S274 134 060

DETAX デタックス社


一般的名称	販売名	クラス分類	番号
歯科用カーバイドパー	ホリコ カーバイドパー	一般医療機器	品出 2881X00005000290
歯科用超弾性ゴム質弾性印象材	スーパーハード ラボ パテ	一般医療機器	品出 2881X00005000005
歯科用樹脂系模型材	エステティック マスク	一般医療機器	品出 2881X00005000091
歯科用樹脂系模型材	オートミキシング エステティックマスク	一般医療機器	品出 2881X00005000020

判断かんたん! リアルに再現!!

蛍光色ワックス



志田 和浩 DT

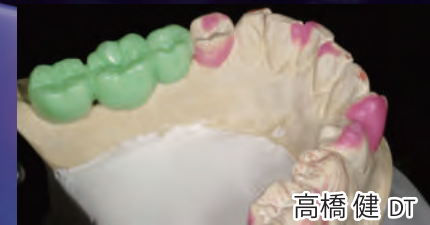

高橋 健 DT


- 歯肉色を再現
- 薄い・こまかい Wax Up も見逃さない
- インパクトのあるプレゼンテーション

60g ¥3,700 9g ¥600

プレス対応 55°C
 燃え残りなし

吸い付くような適合のインレー

エステティックインレーワックス

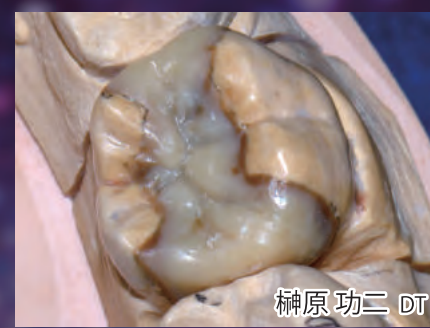

榎原 功三 DT

- インレー専用設計・低収縮, 高い安定性
- 高フローで窩底部にしっかりフィット
- 歯冠の再現性が高いベージュ色 石膏境界がよく見える茶色

60g ¥3,700 9g ¥600

プレス対応 53°C
 燃え残りなし

患者さんの高級補綴意欲を高める

歯冠色ワックス



志田 和浩 DT

- ホワイト
- レギュラー

■ 歯牙色のイメージを高める
 ■ VITA A系・ブリーチシェードの2色

60g ¥4,500 9g ¥720

プレス対応 57°C
 燃え残りなし

マージンフィットをピタッと極める

サービカルワックス



- 黄
- 青
- 赤
- 黒

■ マージン部の巻き直し, 窩底部に
 ■ 低収縮, 高精度で壊れにくい高粘土
 ■ 厚さを見分けやすい半透明色

60g ¥3,700 9g ¥600

プレス対応 59°C
 燃え残りなし

機能が見えるプレス用カービングワックス

プレスセラミックワックス



榎原 功三 DT

- ベージュ
- グレー
- 緑
- 青緑
- 青
- 赤

■ カービングしやすい固さ, 低収縮
 ■ 豊富な色分け, ポイントカラーに

60g ¥3,700 9g ¥600

プレス対応 57°C
 燃え残りなし

収縮の少ないハードワックス

ホワイトキャストワックスNo.6



- 赤

■ ソフトワックスの軟化収縮を抑える
 ■ 低い溶解温度
 ■ 高い内面適合性


45g ¥1,100

メタル用 50°C

al dente アルデンテ社

一般的名称	販売名	クラス分類	番号
歯科用キャストワックス	アルデンテ ワックス	一般医療機器	品出 2881X00005000313
歯科用キャストワックス	ホワイト キャスティングワックス No. 6	一般医療機器	品出 2881X00005000148


たれずに盛り上げ！ 操作性バツグンの パターンレジジン

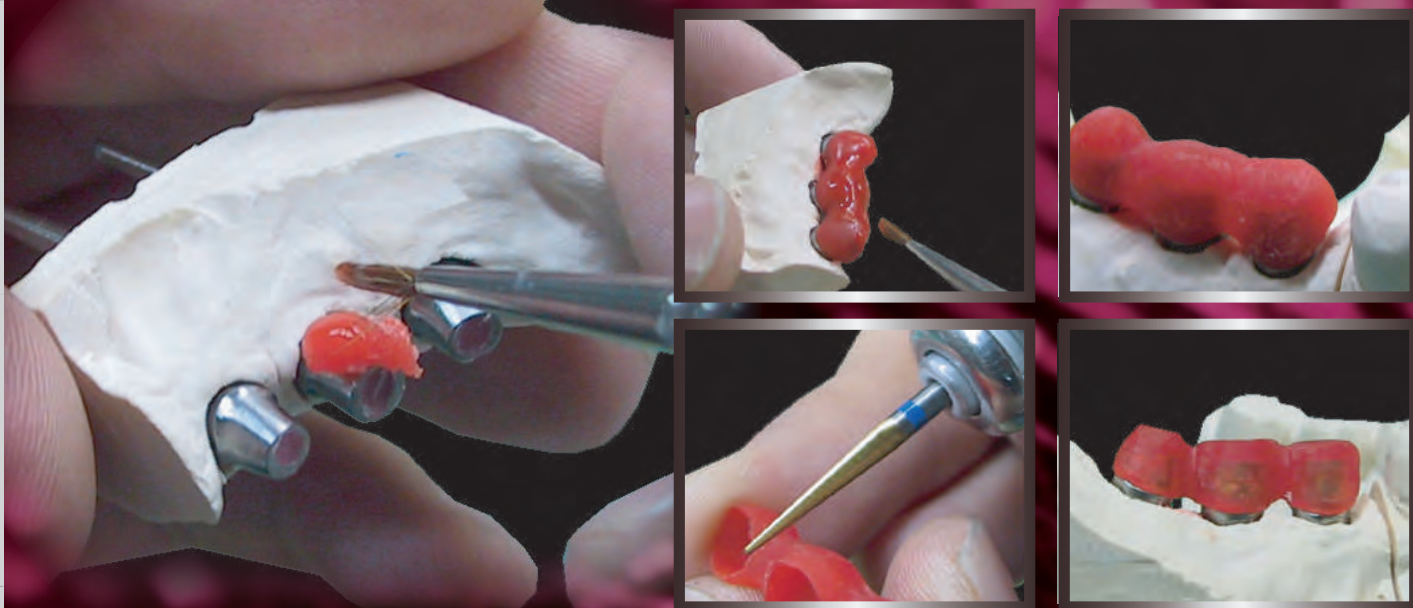

収縮率も**0.28%**以下で安心！

インプラント上部構造の
フレーム作製などに！

膨張せず、なめらかな焼却面！

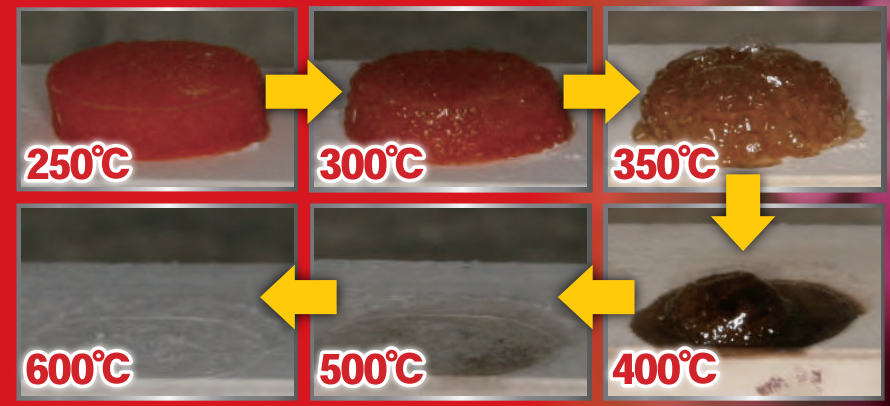

野平 勇人 DT

パターンレジジン Reliance
デュラレーII

標準・4オンス入り

キット
 粉剤・4オンス…1本
 液剤・4オンス…1本
 分離剤…1ケ
 スポイト…1本
 粉剤用キャップ…1ケ

単品
 粉剤・4オンス…1本
 液剤・4オンス…1本

精密な 咬合調整で 長期補綴



土屋 賢司Dr.



都築 優治DT



色抜けて、当たりをWチェック！

ピンポイント調整

薄さ**12μ**

手・グローブには

色がつかない

濡れていても

くっきりマーク



●ハネル社 ハネル咬合フォイル各ボックスとディスペンサー4個との組合せ写真です。

片面 (25m 長)

黒	赤	青	緑
幅 22mm			
幅 80mm			

両面 (25m 長)


黒	赤	青	緑	赤	黒
幅 22mm					
幅 80mm					

長期に 柔らかのまま



プラークのつきにくい表面性状
高い接着力で使用中義歯にも
最初の柔らかなあたりを長く保つ

ラボサイド用シリコン長期弾性裏装材。重合直後の硬度を長期間保つことができます。1パテタイプの加熱重合シリコンで、電子レンジでの重合も可能。プリモの使用により、新旧義歯のアクリル床としっかり接着します。耐プラーク付着性能が高く、口腔内環境からの影響を受けにくい表面性状です。

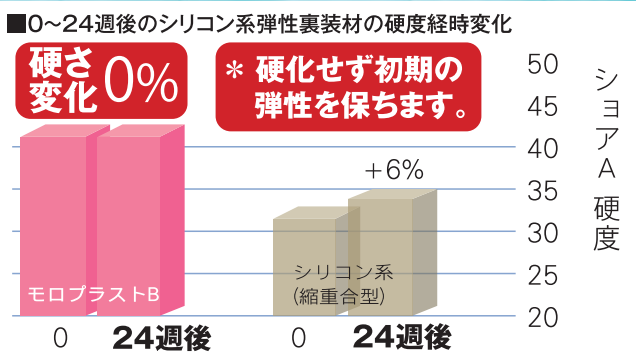

モロプラストB

スタンダードパック

■ジャー(45g)..... 1個 ¥16,500

■ラージパック ジャー(170g)..... 1個 ¥50,000

■コンビパック ジャー(45g)..... 1個 ¥19,800

プリモ(15ml)..... 1本

デタックス社

プリモ



モロプラストBとアクリル義歯床の専用アドヒーズです。付属のブラシにて塗布していただきます。特に修理やアクリルレジンのリライニングを繰り返したケースに有効です。

■15ml...¥4,000
 ■ブラシ付

リムーバー



弾性裏装材とアクリル床間のボンディングを溶解します。繰り返し使用してもアクリル床が変性することはありません。

■10ml...¥5,000

【新義歯製作時の同時リライニング】

- 作業模型上1で熱可塑性製品や即時重合レジン等を用いてリライニング厚さ分の厚さ1~3mmのスペーサー2を製作します
- スペーサー上にワックス義歯を製作し人工歯を配列します 3. 完成したスペーサー一体型のワックス義歯を口腔内で試適します。
- スペーサー一体型ワックス義歯を歯科用蓋付きフラスコにセットし 4. 沸騰した水の中で4分程かけて流蟻します。その際は人工歯と石膏の接着を防ぐために人工歯に分離剤を塗布して下さい。
- フラスコを開け一度スペーサーを取り出します。残留ワックスを完全に除去して下さい。
- 石膏面にアルジネート系分離剤を塗布後、スペーサーを戻します。
- スペーサーと床用レジンとの接触面にポリエチレンフィルムを被せ、メーカーからの指示通りに床用レジンと練和しぬるま湯の温度にしたフラスコに注ぎます。
- 15分程100kPa(1kg/平方センチ)にて圧力をかけた後、フラスコを開けてフィルムと余分な床用レジンを除去します。スペーサー上に再度フィルムをセットした後、フラスコをクランプにセットします。
- フラスコを冷水に入れ、沸点まで加熱した後30分程沸騰させます。床用レジンを仮重合させることによって、モロプラストBと床用レジンの互いの重合への影響と圧力下での変形が防止されます。
- フラスコを取り出し、スペーサーとフィルムを除去します。
- 清潔なスパチュラにてモロプラストBを仮重合した義歯粘膜面に均一に塗布し、モロプラストBと石膏の接触面にフィルムをセットします 5.
- フラスコを閉じて15分程100kPa(1kg/平方センチ)にて圧力をかけた後、フラスコを開けてフィルムと余分なモロプラストBを除去します。必要であればモロプラストBを追加して下さい。
- 再度フラスコを閉じて15分程100kPa(1kg/平方センチ)にて圧力をかけ、クランプにセットして下さい。
- フラスコを冷水に入れ、ゆっくりと100℃まで加熱します。その後100℃にて約2時間放置してモロプラストBを重合させます。
- フラスコをゆっくりと冷まします。決して冷水等による急速冷却を行わないで下さい。
- フラスコより義歯を取り出し、室温にて冷却します。
- 市販製品を用いて床用レジンとトリミングし、モロプラストBは研削材を用いて15,000~20,000rpmにてトリミングを行います。



一般的名称	販売名	クラス分類	番号
義歯床用長期弾性裏装材	モロプラストB	管理医療機器	認定 221AIBZX00057000


砂研磨不要 ピカピカに粒子変化



当てるだけで 小傷消し~最終艶出しまで完了

人口歯の豊隆 繊細な歯肉形状を保ちます

コバルトクロムやBisアクリルも すばやく光らせる

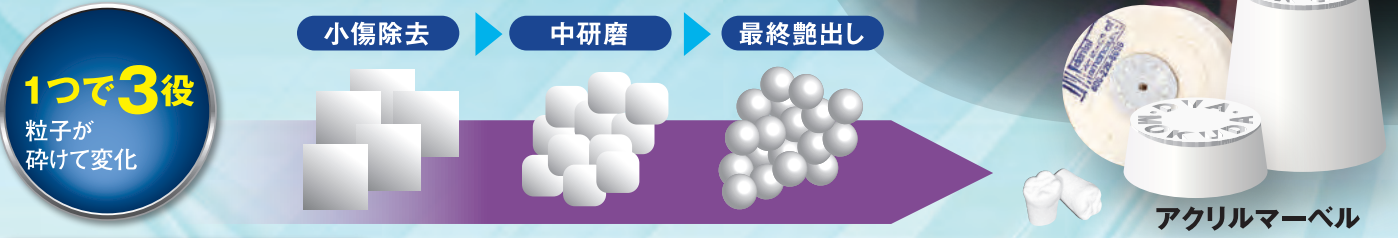

金属もアツという間にピカピカに光ります。

チタン コバルトクロム ゴールド パラジウム



研磨前

2分
2分
研磨後



レジン アクリルデンチャー フレキシブルデンチャー TEK



前処理後

5分
5分
研磨後



キット構成

- ・A M500 gキット 専用バフx1,綿糸ポイント2本 ¥12,000
- ・A M200 gキット 専用バフx1,綿糸ポイント2本 ¥8,000
- ・A Mリベアビット100P 1.5gx100ヶ,綿糸ポイント24本 ¥13,000
- ・A M専用バフx5 ¥5,000
- ・A M専用バフx1 ¥1,000

※他社バフではツヤが得られませんので、専用バフとご併用ください。



榊原 功二 DT

DVA社

一般的名称	販売名	クラス分類	番号
歯科用研磨器材	アクリルマーベル	一般医療機器	届出 2881X00005000300
ワ	綿糸ポイント	ワ	ワ 2881X00005000353