


おすすめ

2019.11

MOKUDA チェアサイド カタログ

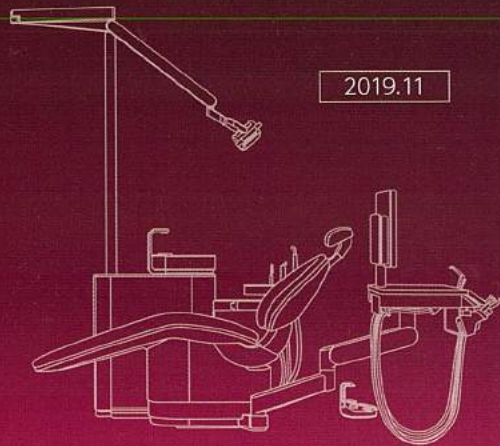

01

根管内の
破折ファイルを
すばやく除去

フラグリムーバー



裏面



圧排しながら
両面ともに
よくみえる!

超明 両面ミラー

03



折れにくく、
サビにくい
よく切れて、
目詰まり
しにくい

オロチ

07



カンタン!
おれにくい

ソフト
レシプロック

33



よごれと
出血が見える
2色のブラシ

インターブロックス

10

チェアに
さすだけ!
スピード
アップ!

コントラ



16

よく
見える
ルーペ

ハイネ



MOKUDA

Chair Side

新商品

根管内の 破折ファイルを すばやく 除去



引上げ やすい
ガン型

片手で
らくらく 操作

輪形ワイヤーを
簡単に 交換



破折ファイル
除去前



ファイルを見ながら
除去中



しっかり つかんで
根管内から 除去



除去 完了

坂上 斉 Dr.

ワイヤーの選択

まずは
スタンダード用

Φ 0.10 mm

ワイヤーが 太くて 入らない

- 25%

細い根管用
Φ 0.075 mm


ワイヤーの 強度を あげたい

+ 50%


手強い・太いファイル用
Φ 0.15 mm

規格	価格	内容
ワイヤーアソート付き スターターキット	¥99,800	破折ファイル除去ガン/ケース/マニュアル ワイヤー 8本 (Φ0.10 mm × 4、Φ0.075 mm × 2、Φ0.15 mm × 2)
破折ファイル除去ガン本体	¥89,800	ケース/マニュアル
スタンダード用 ワイヤー Φ 0.10 mm		ニードル 0.4 mm
細い根管用 ワイヤー Φ 0.075 mm	¥19,800	8本 " 0.3 mm
手強い・太いファイル用 ワイヤー Φ 0.15 mm		" 0.6 mm

ワイヤーの 設定方法

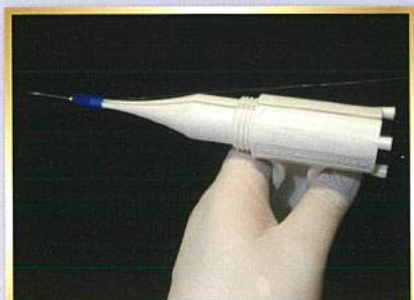


① 白い突起の先端にニードルを装着 溝にワイヤーを配置

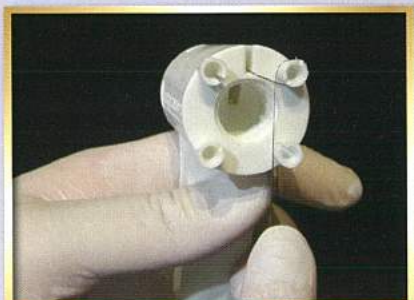


② 溝に通したワイヤーをひっかけ 青色の付属品で固定




③ 青色の 調整リングを 取りつける

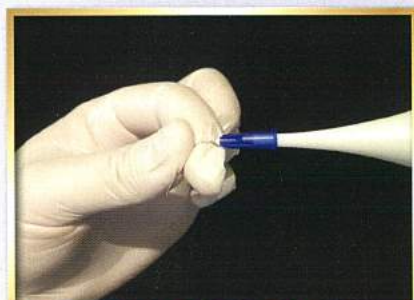

④ ニードルに 角度をつける

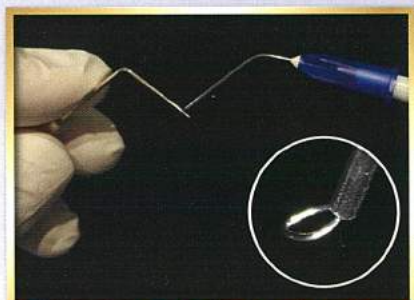

⑤ スプレッダー等で 輪に 45°の 角度をつける

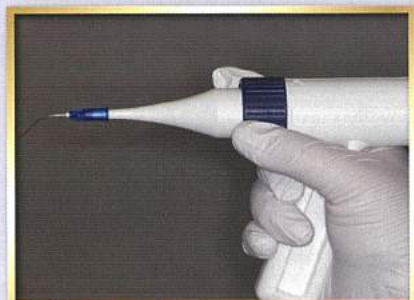

⑥ セット完了

CPR 破折ファイル・ポストの除去

(チタン合金) 各¥16,000

- 柔軟性があり、湾曲根管に対応
- 深い根管の拡大にも使用できる 20、24、27mm の 3 種類
- チタン合金で、手ごたえと触感性に優れます

破折ファイル 救出法



第29回 日本歯内療法学会 寺内 吉継Dr.



チタン合金

CPRセット 6 - 8 (Sタイプ) 3本 ¥44,600
6E - 8E (Eタイプ) 3本 ¥44,600

CPR 再治療・充填物除去用

(ステンレス) 各¥16,000

- 冷却洗浄用の 給水ポート付
- エンド再治療用 チップ
- ドライ (視界確保) ウェット (洗浄冷却) の 選択ができます



ステンレス

CPRセット 1 - 5D (Sタイプ) 5本 ¥74,400
1E - 5E (Eタイプ) 5本 ¥74,400

●セラミッククラウンやブリッジには、直接接触させないでください

※Sタイプ…SATELEC用 Eタイプ…EMS用

※最弱 (ベリオ) モードに固定して 使用し、最弱パワーから 開始してください。エンドモードでは すぐに破折します。

一般名	販売名	クラス分類	番号
歯科用スケーラ	オプチュラ超音波チップ	一般	届出 2681700002000293

タービンで歯肉を形成

セラミック ティッシュ トリマー


FGタービンで 簡単操作

電気メスいらずの 歯肉形成

パンチングや ポンティング形成に

FGタービンに接続し、術部の血液、唾液等を洗い流した後、綿球やエアーで完全に乾燥させ、先端が30°～45°の角度になるように保持し、フェザータッチで使用します。往復運動させ少量ずつ削除し、歯肉形成、歯肉切除、不良肉芽の除去等を行います。

注意：麻酔下で使用してください。歯牙や骨などの硬組織に触れることは極力避けてください。過度の圧での押し付けや、一度で深く切ることを避け、血液凝固を妨げないようタービンの注水を止めて使用してください。清掃・滅菌：水および中性洗剤を使用してください。ベンジンなどの溶剤の使用は避けてください。オートクレーブ滅菌：135℃、乾燥滅菌180℃以下、ケミクレーブ・超音波洗浄も可。推奨回転数：300,000～500,000rpm

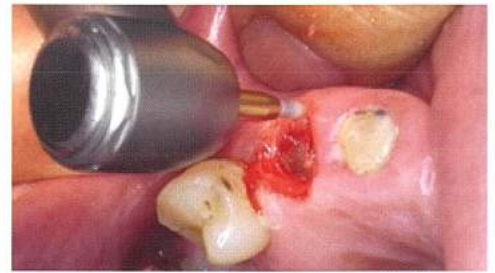

宅重 豊彦 Dr.



ロンヴィッヒ社

セラミック ティッシュ トリマー ●1個・・・¥15,000

骨・CR形態修正 ～ 研磨用（金色ブレード）

滅菌は
蒸留水で

ISO	010	012	014	018	023
USA/12枚刃	7002	7003	7004	7006	7008
FG(5本入)	73116	73117	73118	73119	73120
USA/30枚刃			9004	9006	9008
FG(5本入)	—	—	73141	73142	73143

009	010	012
7801	7802	7803
73135	73136	73137
		9803
—	—	73149

ISO	014	018	023
USA/12枚刃	7404	7406	7408
FG(5本入)	73128	73129	73130
USA/30枚刃		9406	
FG(5本入)	—	73144	—

013	016	019
7204	7205	7206
73124	73125	73126

012
7303
73127

ISO	010	014
USA/12枚刃	7642	7664
FG(5本入)	73131	73132
USA/30枚刃	9642	
FG(5本入)	73147	—

008	010
—	7572
—	—
9561	9572
73145	73146

ISO	010	013
USA/12枚刃	7702	7713
FG(5本入)	73133	73134
USA/30枚刃		9713
FG(5本入)	—	73148
FGSL(5本入)	—	—

014	018	028
7104	7106	7108
73121	73122	73123
—	—	—
—	—	—
73169	—	73170

009	010	012	014
7901	7902	7903	—
73138	73139	73140	—
—	—	9903	9904
—	—	73150	73151
—	73171	—	—

※フィニッシングはすべて合着型です。

一般的名称	販売名	クラス	番号
手術用ドリル	セラミック ティッシュ トリマー	一般 (1)	2881X00005000274
手術用カーバイドバー	オロチ カーバイドバー	u	2881X00005000343

耐折れ

低熱

耐サビ

オロチ カーバイドバー

金属・ポーセレン除去用 GMシリーズ (赤ライン)

滅菌は蒸留水で

①P ゴールド = 丈夫な 1Piece 1体型
シルバー = 丈夫な超強力合着型
(大型・特殊形状・コントラ・ハンドピース用)

USA	GM2R	GM4R	GM6R	GM8R
ISO	010	014	018	023
GM(10本入)	73074	73075	73076	73077
GM(100本入)	—	—	—	—
GMSL(5本入)	73110	73111	73108	—

金属ポスト除去 (GMSL)

GM2P	GM330	GM1	
ISO	010	008	010
GM(10本入)	73078	73079	73072
GM(100本入)	—	—	73087
GMSL(5本入)	—	—	—

GM701	GM702	
ISO	012	016
GM(10本入)	73084	73085
GM(100本入)	—	—
GMSL(5本入)	—	—

USA	GM35
ISO	010
GM(10本入)	73080
GM(100本入)	—
GMSL(5本入)	—

GM556	GM557	GM558	
ISO	008	010	012
GM(10本入)	—	73081	73083
GM(100本入)	—	—	—
GMSL(5本入)	—	73109	—

金属ポスト除去 (GMSL)

GM1557	GM2	
ISO	010	012
GM(10本入)	73082	73073
GM(100本入)	—	73088
GMSL(5本入)	73112	—

金属ポスト除去 (GMSL)

10本入



金属 ポーセレン 除去用 GMシリーズ

100本入 個別包装 25本 × 4箱



GM ゴールドバー

- FG-GM全長 19mm (10本) ￥ 5,800
- // (100本) ￥43,000
- FG-GMSLサージカル 25mm (5本) ￥ 4,100



骨・CR 仕上げ用 ロング



CR 仕上げ用

オロチ フィニッシングバー

- FG 全長 19mm (5本)¥6,480
- FG //¥5,400
- FGSL 25mm (//)¥8,500

※フィニッシングはすべて合着型です。

歯質専用
FG・RA・HP
豊富なバリエーション

(金属・ポーセレン非対応)

滅菌は
蒸留水で

10本入

100本入 個別包装25本×4箱



歯質専用 (除去には非対応)

USA	1/4	1/2	1	2	3	4	5	6	7	8	10
ISO	005	006	008	010	012	014	016	018	021	023	027
FG(10本入)	73001 ^{IP}	73002 ^{IP}	73003 ^{IP}	73004 ^{IP}	73005 ^{IP}	73006 ^{IP}	73007 ^{IP}	73008	73009	73010	73011
FGS (10本入)	—	—	—	73091	73092	73093	—	73094	—	—	—
FGSL(5本入)	—	—	73162 ^{IP}	73154 ^{IP}	—	73155 ^{IP}	—	73156	—	73157	—
HP(5本入)	73172	73173	73174	73175	73176	73177	73178	73179	73180	73181	73182
RA(10本入)	—	73206	73207	73208	73209	73210	73211	73212	73213	73214	—
RASL(5本入)	—	—	—	73101	—	73102	—	73103	—	73104	—

USA	33 1/2	34	35	36	37	38	39
ISO	006	008	010	012	014	016	018
FG(10本入)	73022 ^{IP}	73023 ^{IP}	73024 ^{IP}	73025 ^{IP}	73026 ^{IP}	73027	73028
FGS (10本入)	73096	73097	73098	—	—	—	—
FGSL(5本入)	—	—	—	—	—	—	—
HP(5本入)	—	73183	73184	73185	73186	73187	73188
RA(10本入)	—	73215	73216	73217	73218	73219	—

IP ゴールド = 丈夫な 1Piece 1体型

シルバー = 丈夫な超強力合層型

(大型・特殊形状・コントラ・ハンドピース用)

USA	1/2P	4P	329	330	331	332	330L	331L	332L	14
ISO	006	014	006	008	010	012	008	010	012	012
FG(10本入)	73012 ^{IP}	73013 ^{IP}	73014 ^{IP}	73015 ^{IP}	73016 ^{IP}	73017 ^{IP}	73018 ^{IP}	73019 ^{IP}	73020 ^{IP}	73021 ^{IP}
FG(100本入)	—	—	—	73069 ^{IP}	—	—	—	—	—	—
FGS (10本入)	—	—	—	73095	—	—	—	—	—	—

エンドカッティングバー

USA	244	245	246	256	957
ISO	007	009	011	008	010
FG(10本入)	73065 ^{IP}	73066 ^{IP}	73067 ^{IP}	73068 ^{IP}	73047 ^{IP}

オロチ
カーバイド
バー

- FG全長 19mm (10本)..... ¥ 3,400
- FG // (100本)..... ¥25,500
- FGS ショートシャンク
17mm (10本)..... ¥ 3,400
- HP 44.5mm (5本)..... ¥ 2,000
- RA 22.5mm (10本)..... ¥ 4,000

オロチ
サージカル
バー

- FGSLサージカル 全長25mm (5本)
¥ 2,800
- RASLサージカル 26mm (//)
¥ 2,800

エンド

拡大・マイクロ

外科

衛生

印象

補綴

研磨・調整

USA	56	57	58	57L
ISO	008	010	012	010
FG(10本入)	73029	73030	73032	73031
FGSL(5本入)	—	—	—	—

1156	1157	1158	
008	010	012	
73041	73042	73043	
—	—	—	

USA	556	557	558	559	560	556L	557L	558L
ISO	008	010	012	014	016	008	010	012
FG(10本入)	73033	73034	73035	73036	73037	73038	73039	73040
FG(100本入)	—	—	—	—	—	—	—	—
FGS(10本入)	—	—	—	—	—	—	—	—
FGSL(5本入)	—	73158	73159	—	—	—	—	—
HP(5本入)	—	73189	73190	73191	73192	—	—	—
RA(10本入)	—	73220	73221	—	—	—	—	—
RASL(5本入)	—	73105	73106	—	—	—	—	—

1556	1557	1558	
008	010	012	
73044	73045	73046	
—	73070	73071	
—	73099	73100	
—	73160	73163	
73202	73203	73204	
—	—	—	
—	73107	—	

USA	169	170	171	169L	170L	171L
ISO	008	010	012	008	010	012
FG(10本入)	73048	73049	73050	73051	73052	73053

1170	1171	1170L	
010	012	010	
73062	73063	73064	

USA	699	700	701	702	703	699L	700L	701L	702L	703L
ISO	008	010	012	016	021	008	010	012	016	021
FG(10本入)	73054	73055	73056	73057	73058	73059	73060	73061	—	—
FGSL(5本入)	—	73164	73165	73161	73166	—	—	—	—	—
HP(5本入)	73193	73195	73196	73198	73200	73194	—	73197	73199	73201

1702	1703	
016	021	
—	—	
73167	73168	
73205	—	

⑩ ゴールド = 丈夫な 1Piece 1体型

シルバー = 丈夫な超強力合着型
(大型・特殊形状・コントラ・ハンドピース用)

オロチ
カーバイド
バー

- FG全長 19mm (10本)..... ¥ 3,400
- FG // (100本)..... ¥25,500
- FGS ショートシャンク
17mm (10本)..... ¥ 3,400
- HP 44.5mm (5本)..... ¥ 2,000
- RA 22.5mm (10本)..... ¥ 4,000

オロチ
サージカル
バー

- FGSLサージカル 全長25mm (5本)
¥ 2,800
- RASLサージカル 26mm (//)
¥ 2,800



五味 博之 Dr.


おれにくさ 2.3倍 さらに やわらか 早ワザ エンド

※自社比

はやい、カンタン

カーブ根管も

1本で形成

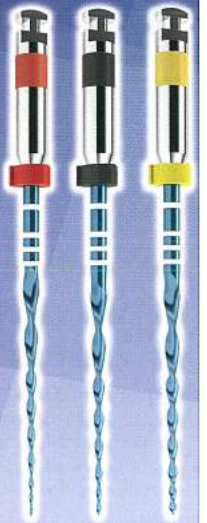


充填後




五味博之 Dr.

みやすい 根管長目視マーク

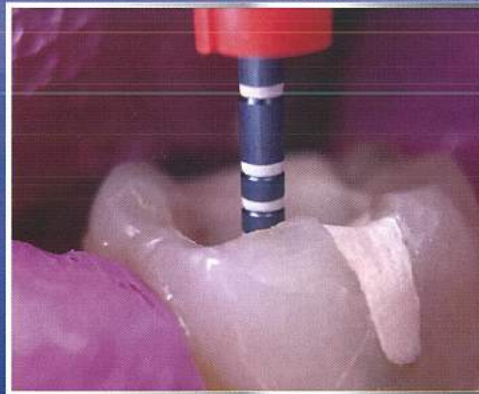

外賀 泰 Dr.

おれにくさ 2.3倍

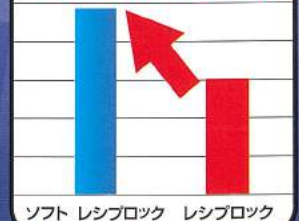

※使用法・PP・GPP は従来のレスプロックと同じです。

ジッペラー レシプロック 滅菌済 ソフト

R25・40・50 (各21・25・31mm) 各4本入り…¥11,200

往復回転コントラ・モーターとご併用ください

一般的名称	販売名	クラス分類	番号
電動式歯科用ファイル	ジッペラー レシプロック 滅菌済	管理	225AIBZX00034000


その ファイルを つかう まえに

最初の ルートを
根尖まで 切り開く！

#08 で 穿通 したら
いざ 登場！

※レシプロックコントラ・モーターで
そのまま使用できます。

#12相当の強いコン
Cバレットファイル
(ジッパー)

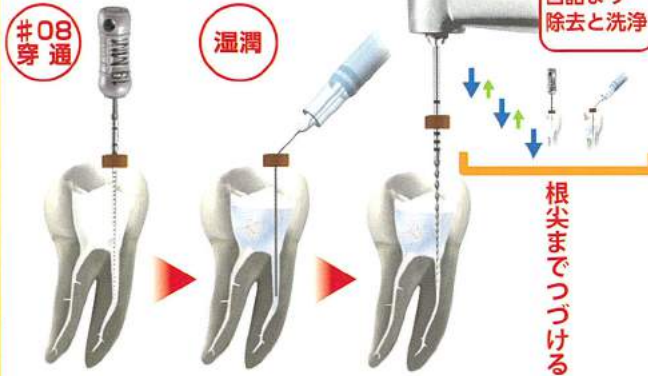

〈使用方法〉

はじめに、#08以上で穿通を行い、湿潤状態でご使用ください。
従来のレシプロック同様、3往復の上下運動でファイルを進め、
洗浄と切削を繰り返してください。

■ ジッパー レシプロック 滅菌済

規格		内容		価格
R12.5	極細アクセス	21mm	R12.5	6本入
		25		
		31		
				¥16,800



中川寛一 Dr.



五味博之 Dr.



レシプロック 極細アクセス / ジッパー社

一般名	販売名	クラス分類	番号
電動式歯科用ファイル	ジッパー レシプロック 滅菌済	管理 (リ)	225A182X00034000

大量・高速バブルで パワフルな 根管洗浄!!



電子顕微鏡

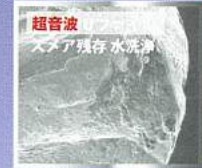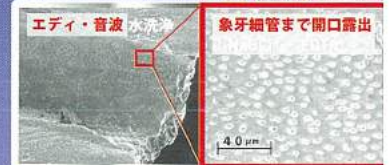

中川寛一Dr.

すばやく 強かに デブリ除去




歯を 削らない、やわらかポリマー!

10秒で
側枝も 洗う!

数秒
洗浄後


動画サイトで検索

eddy canal

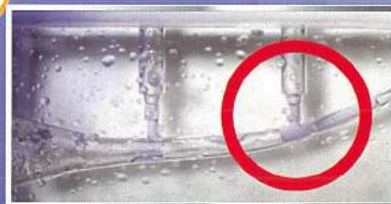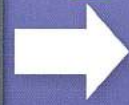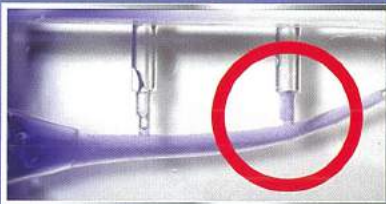

Jörg Tchorz Dr.

【洗浄効率比較】 ※自社比

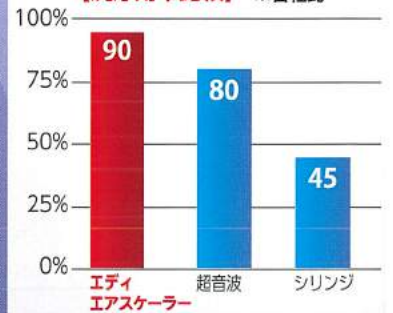

Dr. Winfried Zeppenfeld
DENTAL MAGAZIN (Ausgabe 15. Oktober 2011)



五味博之Dr.



中川寛一Dr.



① 準備

ラバーダムと術者の目の保護カバーを装着してください。
#25/.06 テーパー 以上の拡大後を推奨します。

② あらう

根管内を洗浄液で満たしエディを根管下部まで浸してから ON にする。
根管に圧を加えず、ゆっくりと上下させ洗浄してください。
連続使用は 最長 30 秒までです。

■ モリタ・ヨシダ・カボ・ナカニシ・デンツプライシロナ社製 対応エアスケラー

- ・エアソルフィー
- ・ルーティー
- ・SONICflex 2000,2003 シリーズ
- ・Ti-Max S970 シリーズ
- ・シロエアール

チェア直結!

(2008 シリーズは非適合)
(VA970 シリーズは非適合)

使用周波数: 5000~6000Hz

深度目線リング

28 mm
26 mm
24 mm
22 mm
20 mm
18 mm

エア・ソニック
根管洗浄チップ 滅菌済
非切削性 強カスケラー エディ
28 mm/10 個入 ¥15,000
ジッペラー社

長さ 28 mm

先端径 0.2 mm

※約 1.5 倍拡大図

チェアにさすだけ! スピード アップ!



①150°
すすむ

②ファイルの
食い込み とねじれ を
-30° もどしてリリース

コードなしで
すっきり
モーターが
いらぬい

さらに
はやい

16.4 秒

往復回転コントラ
-150°/30°


38.9 秒

現行同社
モーター

中川 寛一 Dr. ※透明根管模型の拡大完了

使用回転数 15,000 ~ 20,000 rpm

チェア付属の マイクロモーターに 直結!!!

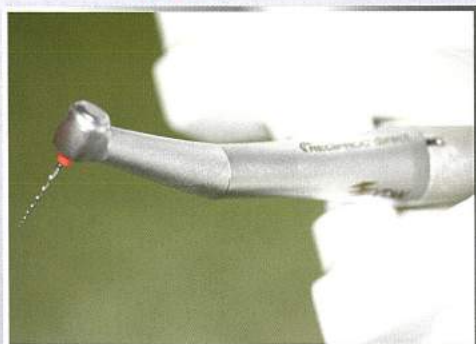

五味博之 Dr.

コントラ単品 ジッペラー社
販売名 エンド用往復回転コントラ -150°/30°
¥99,800

レシプロック・ソフト
ファイルつきセット
25 / 21 mm
¥144,600

■ 構成本数

ソフト	R25 (先端#15)	40 (#20)	50 (#30)
25 mm	各4本		
21 mm	2本	各1本	

レシプロック専用

■ ジッパー レシプロック 滅菌済 (ソフト レシプロック)

	規格	内容	価格
● ファイル単品			
	ソフト 21mm R25 25 〃 31 〃	4本入	11,200円
	ソフト 21mm R40 25 〃 31 〃		
	ソフト 21mm R50 25 〃 31 〃		
● ファイルアソート			
	ソフト 21mm R25 - 50 25 〃	R25 / 2本 R40・R50/各1本	〃

■ ペーパーポイント 滅菌済 (レシプロック・ソフト共用)

	29mm R25	144本入	3,750円
	R40		
	R50		
アソート	R25 - 50	R25 / 96本 R40・R50/各24本	

■ レシプロック ガッターチャポイント (レシプロック・ソフト共用)

	28mm R25	60本入	4,800円
	R40		
	R50		
アソート	R25 - 50	R25 / 40本 R40・R50/各10本	


■ ジッパー レシプロック 滅菌済

● ファイル単品			
	25mm R25	4本入	9,800円
	25mm R40		
	25mm R50		
● ファイルアソート			
	25mm R25 - 50	4本入 R25 / 2本 R40・R50/各1本	9,800円


■ エンド用 往復回転コントラ -150° / 30°

	レシプロック・ソフト ファイルつき セット 25 / 21mm	25mm R25・R40・R50 / 各4本 21mm R25 / 2本 R40・R50/各1本 コントラ 1本	144,600円
● コントラ単品			
	コントラ単品	コントラ 1本	99,800円


おれにくく
はやい切削
先端を折れ
にくくする
強テーパー

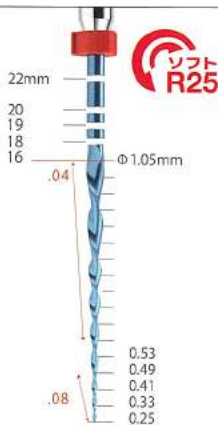

穿通#15以下

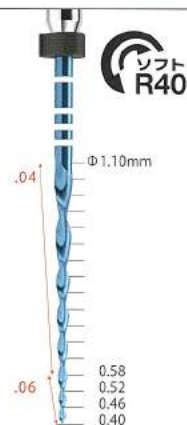

穿通#20以上

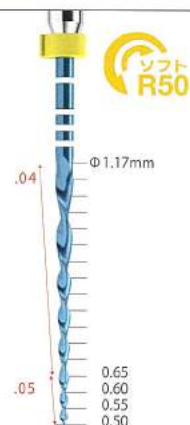

穿通#30以上

よく見える 明るい 根管拡大

04テーパーで
強いコシ

届かず見えにくい
根管口の
探索に

再治療時の
古い充填物を
すばやく除去



五味 博之 Dr.

なが〜い11.5cm



(実寸)

各
¥8,300

- Kファイル 008 (6本入) ■ Kファイル 010 (6本入)
- Hファイル 008 (6本入) ■ Hファイル 010 (6本入)
- Kファイル 015 (6本入) ■ Kファイル アソート (6本入)
- Hファイル 015 (6本入) ■ Hファイル アソート (6本入)

MC ファイル 04 テーパー / ジッペラー社

一般的名称	販売名	クラス分類	番号
歯科用ファイル	ジッペラー 手用ファイル	一般 (I)	2881X0000509079C

パサつかず、ねりやすい MTA ジェルタイプ



Top Endodontic
Reparative Cemen

エ
ン
ド

拡
大
・
マ
イ
ク
ロ

外
科

歯
生

印
象

捕
撮

研
磨
・
調
整

まぜやすい

スパチュラ練和 でき らくに 充填

フロー状

粉 : ジェル
1 : 1



パテ状

粉 : ジェル
1 : 1/3



※ 貼付後にペーパー
ポイントや滅菌綿球
で余剰な水分を吸収
してください



高田光彦 Dr.

しなる幅広面! 手早い練和!



アバロン社 MTA用スパチュラ ¥3,200

流れずとどまる

浸出液にも 押し流されない



パテ状練和し3分後
水をかける



流れずに留まり
ウォッシュアウトしない

ウォッシュアウトしにくい

※3:1練和

	MTAプラス スーパージェル ホワイト	MTAプラス スーパージェル グレー
造影性	あり	あり
ゆとりの 操作時間	20分 (3:1)	12分 (3:1) 20分 (1:1)
硬化時間	55分 (3:1) 5時間 (1:1)	75分 (3:1) 10時間 (1:1)
膨張度	-0.01%	-0.04~-0.07%
強度 (7日後)	57MPa (3:1)	80MPa (3:1) 42MPa (2:1)
流水に対し	流されにくい	流されにくい
粒子のサイズ	ファイン	ファイン

歯を黒くしない

審美的に 再生 ホワイトタイプ




スーパージェル ホワイト

販売名	規格	付属品	価格
MTA プラス	スーパージェル グレー 1g	ジェル容量 2mL スプーン容量0.1g	¥13,400
	スーパージェル グレー 2.5g	ジェル容量 4mL スプーン容量0.1g	¥16,500
	スーパージェル ホワイト 1g	ジェル容量 2mL スプーン容量0.1g	¥21,200
	スーパージェル ホワイト 2.5g	ジェル容量 4mL スプーン容量0.1g	¥28,000

ホワイトも グレーも
造影性 くっきり!!



岡口守雄 Dr.

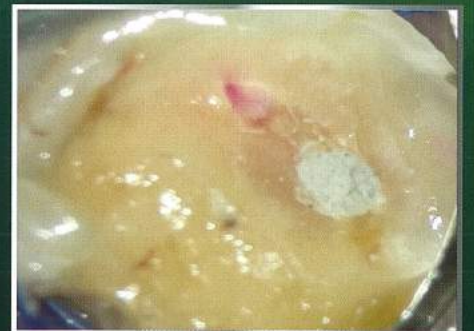

吉岡隆知 Dr.


伸びる！ 裂けない！ かけやすい！

アレルギーフリー

**白歯にも
すぐかかる！**
小さい穴でよく伸びる

**ラテックス
アレルギー
なし！**

**やぶれずに
のび～る！**
装着しやすい！

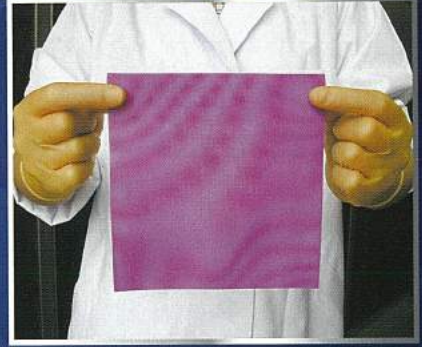

宮崎 真至 Prof.

阿部 修 Dr.

サイズ：150×150mm
30枚入
パープル(非透明)
／ブルー(透明)

各 ¥5,900



プラスチックフレーム / ハガー社

¥8,000

- 開閉式・そのまま デンタル撮影
- そのまま バキューム吸引
- オートクレープ 可
- X線に 写らない

フレキシダム / ロエコ社

エンドカタログも
ご覧ください！



一般的名称	販売名	クラス分類	番号
歯科用ラバーダム	フレキシダム	一般 (1)	届出 28B1X00005000116
歯科用ラバーダムフレーム	プラスチックフレーム	一般 (1)	届出 28B1X00005000352

角度自在にサイナス 根管内 バキューム




▶ 根尖そばまで キュツと吸引 (ファイル #60 相当)

▶ 見やすい! 曲げ & 固定

▶ すぐ使える! 滅菌済み個装!

- ▶ 4パーツを自由に、曲げ & 固定
- ▶ 先端が 湾曲に沿う!

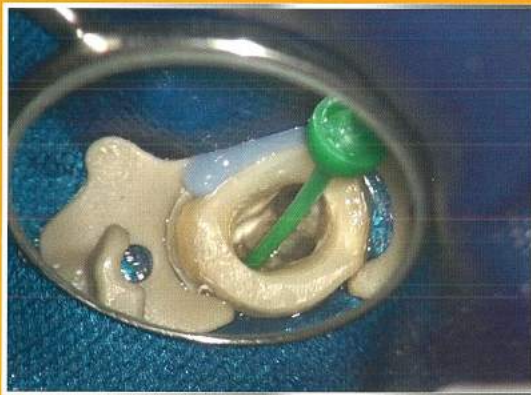




池村 仁克 Dr.

〈実寸〉

目詰まりには、
先端をカット
してそのまま
使用できます



サイナス・外科治療にも使える

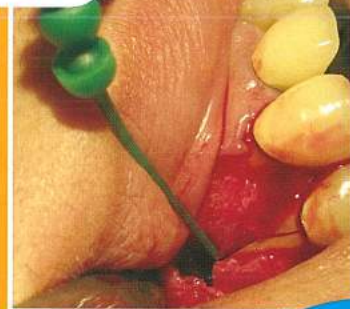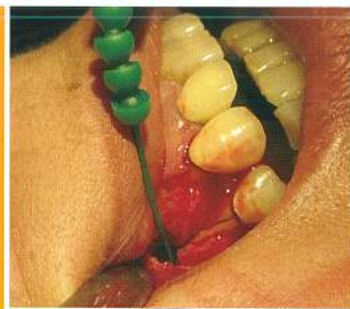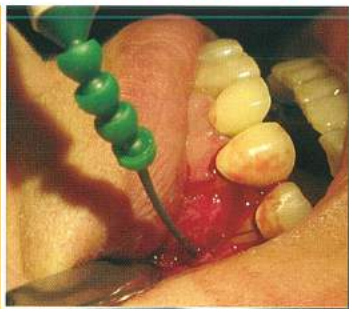

古澤 成博 Dr.

バキューム直結アダプター付属

内容
チップ20本
+
Wアダプター

※モリタのみ別売アダプター要



国産用の11mm
アダプター付属



海外用の16mm
アダプター付属



モリタ
アダプター (別売)
¥1,600

サージチップエンド/ロエコ社
¥9,000/20本
左記アダプターつき



roeko


ヘッドバンド タイプ



コードレスで軽い
後方バッテリー

ライト径を調整

クリアなピントの
ガラスレンズ

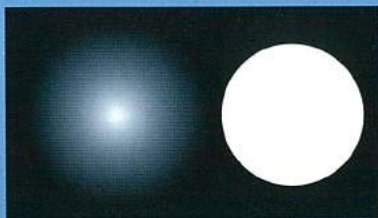

従来

新ライト

白すぎない自然色！ 辺縁まで明るい！

ゴーグル タイプ



約70%
カット

より軽く
さらにスリムに

キレイで酔わない
ガラスレンズ




オールインワン！ ライト & バッテリー！

ヘッドバンド タイプ

1 クリアなピントの
ガラスレンズ

従来品

ブレた輪郭と
色目のちがいを

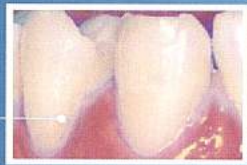

すっきり
天然色



くっきり うきあがる

レンズ倍率
(作業距離)

2.5x 3.5x

420mm 420mm

4x 6x

340mm 340mm

2 コードレスで軽い
後方バッテリー

前後・左右とも
均等な バランス

(レンズ除き460g)

かぶるとさらに軽いです!



幅調節

バッテリー

高さ調節



3 明るいエリアを
広くせまく

メガネと 併用でき、
ゴーグルタイプより
快適、疲れません



ライト OFF 明るく

拡大 ⇄ 直視を切替
オペ中も清潔に操作



レバーは滅菌可能

ライト範囲

最大5時間
連続照射

充電
2時間

50,000
ルクス

スタイル・ご予算に合わせて組み合わせ

ライトなしで...



ヘッドバンド単品
+
ゴーグル用レンズ

やっぱりあとから
ライトも欲しい!!




ミニバッテリー

超スリム
ヘッドバンドセット完成!!

ゴーグル タイプ

1 より軽く
スリムに

約70%カット

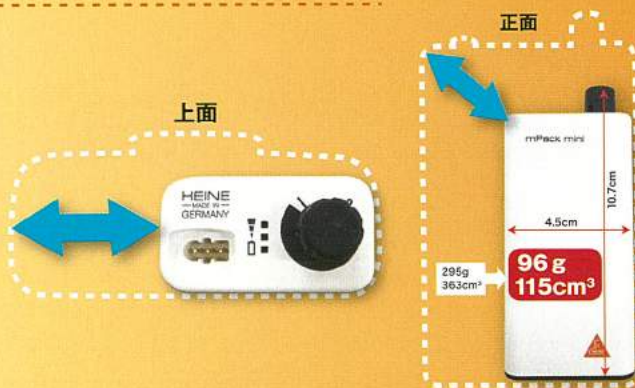

最大9時間
連続照射*

充電
4時間

55,000
ルクス

※最大光量4時間

2 裸眼切替も清潔に
酔わない ガラスレンズ

滅菌つまみ

レンズをはねあげ

滅菌つまみ で
拡大⇔直視の切替を
カンタン 清潔に!



3 ズレずに
ぴったりフィット

- 快適フィットの
鼻パットと 耳フック
- わずか 26g の軽量 フレーム!
(レンズ、LEDライト除く)



ライト 特徴

ヘッドバンドにも 装着可能! (バッテリーは有線タイプとなります)

ミラー像・根管も明るい 一直線ライト



くっきり均一照射



白すぎず 見やすい
4500ケルビン



周囲がぼやけて
色白すぎる 従来品

※ヘッドバンド用、ゴーグル用どちらにも対応

エンド

拡大・マイクロ

外科

衛生

印象

補綴

研磨・調整

ヘッドバンド セット内容

ハイネ双眼ルーペ ヘッドバンド型 コードレスバッテリー



LEDライト付ヘッドバンド



コードレスバッテリー



かけられる 壁固定型 充電器

レンズ



作業距離と倍率を姿勢と体格に合わせて
お選びいただけます

倍率	作業距離	視野径	ピント合致幅 (※焦点深度)	規格	モクダ コード	
2.5倍	340 mm	90 mm	110 mm	2.5倍 340mm コードレスバッテリー+ライトセット	¥ 579,000	67904
	420	130	180	2.5倍 420mm コードレスバッテリー+ライトセット		67905
3.5	420	65	60	3.5倍 420mm コードレスバッテリー+ライトセット	¥ 632,000	67906
4	340	50	40	4倍 340mm コードレスバッテリー+ライトセット		67907
6	340	40	30	6倍 340mm コードレスバッテリー+ライトセット	¥ 648,000	67908



※焦点深度…ピントが同時に合う1番手前から1番奥までの長さです。

アップグレード用 レンズのみ <ヘッドバンド専用>

ヘッドバンド・ライトを生かして レンズだけ 交換できます

ヘッドバンド専用レンズです
ゴーグルレンズとはパーツが異なり、互換性がありません。
視野径や焦点深度など、レンズの性能は同一です。

ヘッドバンド専用 レンズ単品						
倍率	作業距離	視野径	ピント合致幅 (※焦点深度)	規格	モクダ コード	
2.5倍	340 mm	90 mm	110 mm	ヘッドバンド用 2.5倍 340mm	¥ 246,000	67321
	420	130	180	ヘッドバンド用 2.5倍 420mm		67322
3.5	420	65	60	ヘッドバンド用 3.5倍 420mm	¥ 300,000	67323
4	340	50	40	ヘッドバンド用 4倍 340mm		67324
6	340	40	30	ヘッドバンド用 6倍 340mm	¥ 316,200	67325

※ライトなしヘッドバンドをご購入の方はゴーグル用レンズをご購入ください。

ヘッドバンド専用 オプション

充電、保管 が同時にできる スタンド

壁固定式のAC充電器を、壁に穴を空けずに、お好みの場所へ設置できます。

- かけられる 壁固定型充電器用ヘッドバンド・スタンド
<幅170×奥行200×高さ340mm>

¥ 30,000 67691



視力矯正レンズ対応、飛沫感染を防ぐ

明るく見やすい、ルーペと同じコーティングつき、ヘッドバンド専用。

- 感染防止シールド ヘッドバンド用
- 視力矯正レンズ取付フレーム (ゴーグルにも装着可能)

¥ 40,000 67555
¥ 19,500 67457



CR誤重合防止フィルター

CR整形準備中の、早すぎる重合を防ぎ、ライトも保護します。ワンタッチ開閉。

- レジン誤重合防止フィルター ヘッドバンド用

¥ 16,000 67556



ゴーグル セット内容

ハイネ双眼ルーペ ゴーグル型



レンズ



作業距離と倍率を姿勢と体格に合わせて
お選びいただけます

倍率	作業距離	視野径	ピント合致幅 (※焦点深度)	規格	モクダ コード
2.5倍	340 mm	90 mm	110 mm	2.5倍 340mm ミニバッテリー +タフコネクターライトセット	¥ 579,000 67929
	420	130	180	2.5倍 420mm ミニバッテリー +タフコネクターライトセット	67930
3.5	420	65	60	3.5倍 340mm ミニバッテリー +タフコネクターライトセット	¥ 632,000 67931
4	340	50	40	4倍 340mm ミニバッテリー +タフコネクターライトセット	67932
6	340	40	30	6倍 340mm ミニバッテリー +タフコネクターライトセット	¥ 648,000 67933



※焦点深度・・・ピントが同時に合う1番手前から1番奥までの長さです。

アップグレード用 レンズのみ <ゴーグル専用>

フレーム・ライトを生かして レンズだけ 交換できます

ゴーグル専用レンズです
ヘッドバンドレンズとはパーツが異なり、互換性がありません。
 視野径や焦点深度など、レンズの性能は同一です。

ゴーグル専用 レンズ単品						
倍率	作業距離	視野径	ピント合致幅 (※焦点深度)	規格	モクダ コード	
2.5倍	340 mm	90 mm	110 mm	ゴーグル用 2.5倍 340mm	¥ 205,000 67211 67212 67213	
	420	130	180	ゴーグル用 2.5倍 420mm		
	520	180	260	ゴーグル用 2.5倍 520mm		
3.5	420	65	60	ゴーグル用 3.5倍 420mm	¥ 257,500 67311 67312	
4	340	50	40	ゴーグル用 4倍 340mm		
6	340	40	30	ゴーグル用 6倍 340mm	¥ 275,000 67313	

ゴーグル専用 オプション

▶無影灯より 照らしやすい! ライト = 目線◀

LEDライトゴーグル用

ストレス 70%軽減! (自社比)

9時間 タフに明るい! (通常光量) ※最大光量で4時間
フル充電要4時間

- タフコネクターライト + ミニバッテリー接続コード ¥ 250,000 68927
- ミニバッテリー単品 ¥ 78,000 68931
- 充電ACアダプター ¥ 12,000 68933



スイッチON/OFF,
光量調節つまみ

CR誤重合 防止フィルター

CR整形準備中の、
早すぎる重合を防ぎ、
ライトも保護します。
ワンタッチ開閉。



- レジン誤重合防止フィルター ゴーグル用 ¥17,000 67813

視力矯正レンズ取付フレーム


- 視力矯正レンズ取付フレーム

¥19,500 67457





高橋 慶壮 Prof.

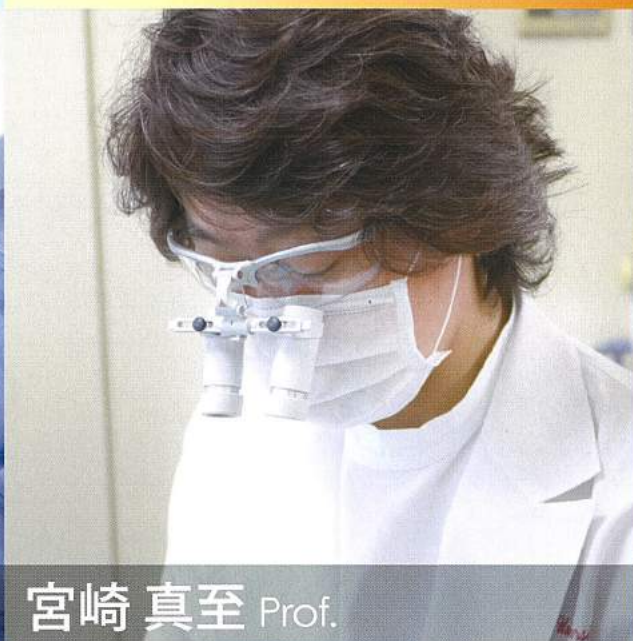


宮崎 真至 Prof.




茂野 啓示 Dr.



大河 雅之 Dr.

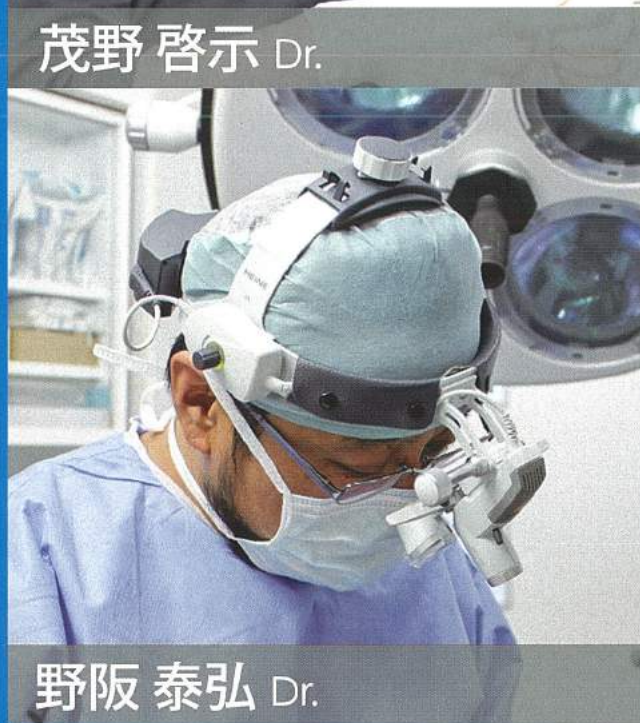


野阪 泰弘 Dr.

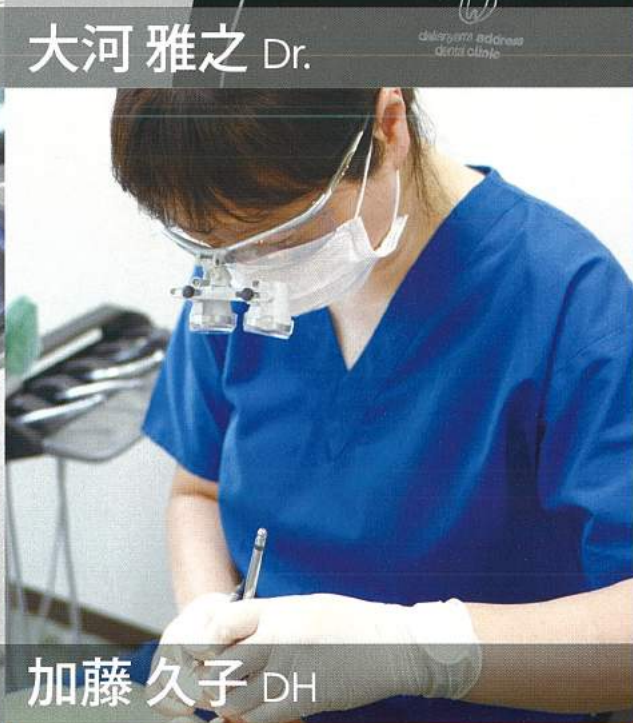

加藤 久子 DH

反射なし! 色・形・素材 まるみえ!

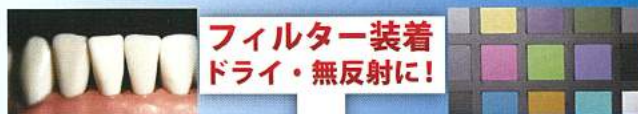

フィルター装着
ドライ・無反射に!

シェード見本との色比較,
表面性状,をひとめで把握

白とびしない実物色



反射光カット フィルター

鏡レンズとライトへの同時装着で機能します

- ・ヘッドバンドライト+2.5倍レンズ 用キット
- ・ " +3.5倍以上レンズ "
- ・ゴーグルライト+2.5倍レンズ "
- ・ " +3.5倍以上レンズ "

キット内容: ライト用 フィルター 1枚
レンズ用 フィルター 2枚



2.5倍レンズ用

3.5倍以上レンズ用

LED ライト用
(ヘッドバンド用
or ゴーグル用)

¥47,000

ストレス ハイネ 双眼ルーペ 70% 軽減!!



上面

超軽量 小型バッテリー 9時間連続使用!

※最大光量4時間・フル充電要4時間

長耐久 LEDライト・耐久コード



正面

ミラー像・根管 も明るい 一直線ライト

▼角度がズレて 暗い



▼ハイネLEDライト



ライトとルーペの
角度がちがうと...

すっきり
天然色



ブレた輪郭と色目のちが
従来品



くっきりうきあがる天然色
ハイネ

— レンズ倍率 —
(作業距離)

2.5x	3.5x
420=	420=
340=	340=
4x	6x
340=	340=

くっきり
均一照射



周囲が
ぼやけて
白すぎる
従来品



白すぎず
目を守る
4500ケルビン



約70%減
小さく軽くなりました!

295g
363cm³

96g
115cm³

実寸

ハイネ LEDライト ゴーグル用 超軽量ミニバッテリー

※現行LEDルーペライト・バッテリーとの互換性はございません。

見やすい! 細長シャング 歯質を残す MI バー

ピンポイント
除去

軸ブレしにくい
的確操作

高耐久の
ホリコ ダイヤ



松本 和久 Dr.



秋本 尚武 Dr.



天川 由美子 Dr.

※実寸



FG MI-Aキット ¥6,000



FG MI-AL ロングキット ¥6,000



FG MI-BIIキット ¥6,700



中田 光太郎 Dr. 歯周形成外科 キット

まずはここから！ はやい & MI 治療



中田 光太郎 Dr.



滅菌保管ケースつき
セット購入時のみお付けします。
ケース単品は非売品です。

**短い治療時間で
成功率を高める
精密キット**

**針・糸・歯肉を
ガッチリつかめて
糸がからまない！**

**リーズナブルな価格で
ルーペ・マイクロと
ベストマッチング！**

NAKATA 持針器 直セット / 曲セット 各 ¥162,000



(先端直) 20-010-18-07 又は (先端曲) 20-011-18-07

ダイヤモンド

持針器 (縫合糸7-0~12-0用) (先端直 or 先端曲からご選択下さい) からまない

糸のからまない、針もすべらない
ダイヤモンドつき 持針器



12-566-18-07

ダイヤモンド

マイクロ用 ピンセット

歯肉・糸を しっかりキャッチ, ダイヤコーティング



12-172-15-07

ピンセット (セムケン)

歯肉用 先端極細ピンセット



23-402-18-07

剥離子 (イグルハルト)

歯間乳頭や 歯肉辺縁部の 剥離に最適
中空ハンドルで かるがる操作



38-050-01-07

剥離子 (アレン)

中空ハンドルで かるがる操作



11-593-11-07

歯肉切開・形成用ハサミ

すべらない ギザつき, 届いて見やすい S型カーブ



10-160-01-07

マイクロブレード 用ホルダー

糸絡みなく、ストレス軽減 はやい治癒をサポート

5-0キット
ステンレス
¥ 288,000

エンド

拡大・マイクロ

外科

衛生

印象

補綴

研磨・調整



ダイヤモンド
(リングのみ)

ピンセット
(歯肉・糸5~7-0)

無鉤なのに有鉤の把持力

12-589-18-07

ダイヤモンド 軽い力ですべらず、
しっかりと 縫合糸や組織を
把持できます。

ピンセット(糸)

12-566-18-07

ダイヤモンド 糸が
からまない

持針器

ロックあり
20-605-18-07

ロックなし
20-607-18-07

ダイヤモンド
(チタンのみ)


マイクロハサミ

11-711-18-07

眼科ブレードブレイカー

眼科用メスをはさみ割って 切開

10-094-13-07

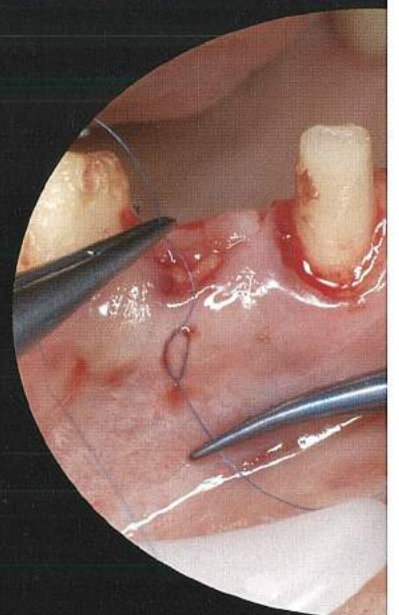



7-0キット
ステンレス
¥ 288,000

9-0キット
ステンレス
¥ 294,000

9-0キット
軽量非磁 チタン
¥ 488,000

無鉤なのに有鉤の把持力

ダイヤ付リング 

ダイヤ付リング 

12-589-18-07

12-574-18-07

12-586-18-09



12-566-18-07

12-564-18-07

12-578-18-09



ロックあり
20-011-18-07

ロックなし

ロックなし

ロックなし
20-013-18-07

20-005-18-07

20-019-18-09



11-711-18-07

11-711-18-07

11-717-18-09



10-094-13-07

10-094-13-07

10-094-13-07



Micro perio Surgery kits
マイクロペリオサージェリーキット

KLS martin

キットデザイン **鈴木 真名 Dr.**



製品名	製品名	クラス分類	品番
マイクロペリオサージェリーキット	5.0	22 (E)	288100000500228
マイクロペリオサージェリーキット	7.0	22 (E)	288100000500229
マイクロペリオサージェリーキット	9.0	22 (E)	288100000500230
マイクロペリオサージェリーキット	9.0チタン	22 (E)	288100000500231

ペリオ・外科
特集カタログも
ご覧ください!

脱離・接着不良 2次カリエスを防ぐ

岡口 守雄 Dr.
デザイン

長持ち
すりへりにくい
GOLD コーティング

とどきやすい 30°
かきだしやすい 80°

繊細 & 早く精密に
φ0.6 / 1.0 mm



側壁の 感染歯質を除去 4

極細 かきだす 0.6mm 80°



エナメル下の 隣接面カリエスを除去 1

極細 とどく 0.6mm 30°



のこさず
すみまで
キャッチ



よく見えて
とどく!
かきだしやすい
細シャベル型

一般的な形状

実寸



すべりにくく
ぴったりフィットの
シリコングリップ

全長:16.2cm
...4本セット ¥19,600 72550
...1本 ¥ 4,900

■極細 とどく
0.6mm 30°
72551

■極細 かきだす
0.6mm 80°
72552

■細 とどく
1.0mm 30°
72553

■細 かきだす
1.0mm 80°
72554

長く冴える, 鋭い切れ味

よく見える
ロングネック

摩耗や
欠けに強い
硬質鋼材

届きやすい
豊富な角度

43-487-44
φ2mm




軟化象牙質除去 (43-487-14) 不良肉芽除去 (43-487-44)
木ノ本 喜史 Dr. 石井 宏 Dr.

43-487-40
φ1.2mm

中空で軽い

〈実寸〉

上質ステンレス鋼材を用い, 1本1本を熟練した
ドイツ職人の手で造りました
中空ハンドルで軽快な操作, 腐食に強い特殊
コーティングで先生方の手技をサポートします

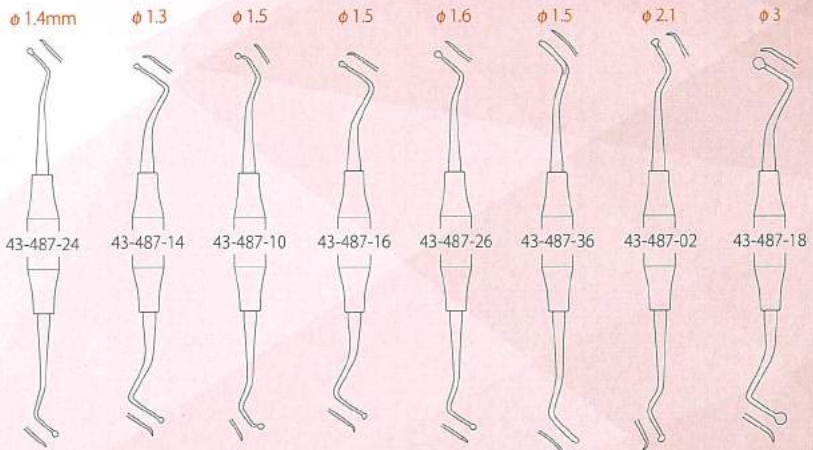

各
¥6,800

マーチン プロープ / マーチン社

ものさし! 0.5ミリの数字つき! 秋山Dr. 考案マイクロプローブ

ズバリ!
数字つき

目盛り幅
0.5mm

〈実寸〉

プローブに数字が入って
0.5mm幅の正確な計測を一目で!

0.5mmまで正確記録

43-301-01-07

全長: 16cm
目盛り: 0.5 ~ 22mm

¥13,000

一般的名称	販売名	クラス分類	番号
歯科用エキスカベーター	マーチンエキスカベーター	一般 (1)	抽出 2881X00005000204
歯周ポケットプローブ	マーチンプローブ	一般 (1)	抽出 2881X00005000188

エンド

拡大マイクロ

外科

衛生

印象

補綴

研磨・調整

セメント除去を低侵襲に ルーペ・マイクロ下で

歯肉にも
やさしい
0.5mm以下の薄さ

秋山 勝彦 Dr.
デザイン

AKIYAMA
マイクロキュレットI
近心用 11/12
43-340-01-07
¥11,500

AKIYAMA
マイクロキュレットII
遠心用 13/14
43-340-02-07
¥11,500



秋山 勝彦 Dr.



はやい, やさしい, 的確 圧排に!

南 昌宏 Dr.
デザイン

余分な歯肉に
当たらない!!

うすい!
わずか0.4mm

スツと 入る
歯肉も 守る

V型先端

5-DJAPAN
南 昌宏Dr.
コードパッカー
46-185-04-07
¥11,500

南 昌弘 Dr.

糸をキャッチ
先端ギザ

ワイドタイプ
46-185-03-07

スピーディーに
一括圧排

一般的名称	販売名	クラス分類	番号
歯科用キュレット	マーチン歯肉用キュレット	一般 (I)	2881X00005000199
歯科用生入添換機	マーチンコードパッカー	"	2881X00005000225

すべらず 逃さない ダイヤコートで 抜歯は **ラクに, 一気に**


軽くつかめる
ダイヤつき

破折をふせぐ
ツメなし デザイン

抜歯窩・歯根膜
にやさしく
歯牙移植 にも



40-467-01-07

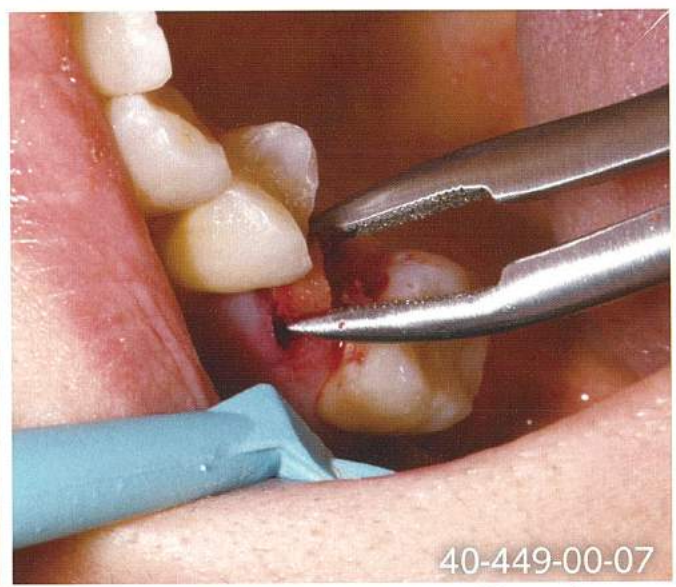

40-449-00-07

茂野 啓示 Dr.


5本で 全歯に対応



……〈各〉¥39,000


上顎前歯

40-401-00-07

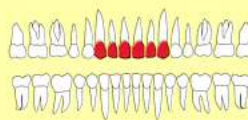


上顎臼歯

40-407-00-07

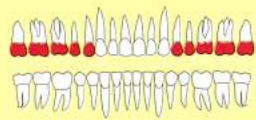


臼歯

40-467-01-07

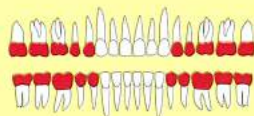


下顎

40-413-00-07

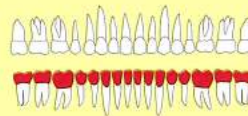

残根

40-449-00-07

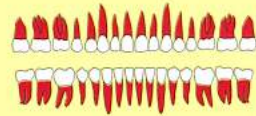

ペリオ・外科
特集カタログも
ご覧ください!




目詰まり対策済みの あのチップ

**3段階 調整可能な
先端径 (1.2→2.5→4.8)**
(1.2マイクロタイプ)

**金属を 傷つけない
プラスチック製**

**先端が 長く、
より 届きやすい**
(4.8タイプ)

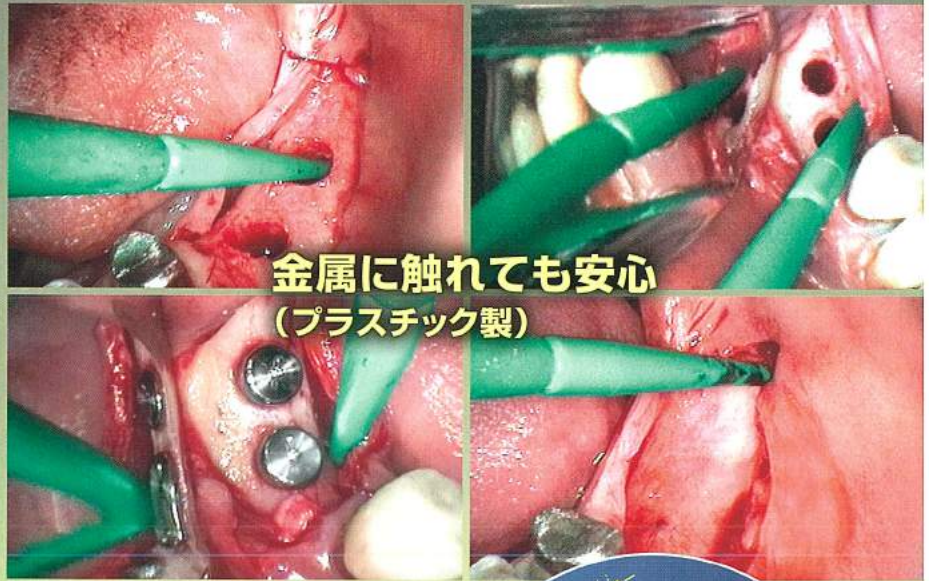

**金属に触れても安心
(プラスチック製)**


林 成謙 Dr.

φ1.2mm (サージチップマイクロ 1.2)
REF 462 012

¥8,550 (20本入/箱)
※ダブルアダプター1組付
※モリタアダプター別売



個別・ガンマ滅菌包装

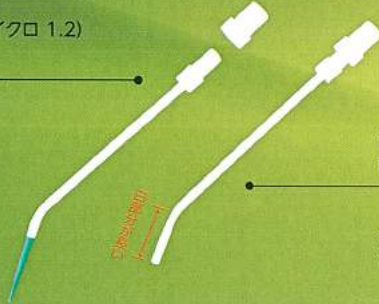

φ4.8mm (サージチップ 4.8)
REF 462 048

¥8,200 (20本入/箱)
※ダブルアダプター1組付
※モリタアダプター別売



1本で
3通りの威力
(サージチップ・マイクロ1.2)

**詰まっても
外して 続行!**

外科用 カーバイドバー / ホリコ社

インプラント 埋入方向の修正, 歯根分割に

サイドカッティング バー 深さもみながら!
(セット価格) ¥15,000 / 3本入
(各単品) ¥5,400 / 1本入

カーバイドバー
¥4,500 / 1本入



藤田 憲一 Dr.

インプラント用 サイドカッティングバー φ2.0	インプラント用 サイドカッティングバー φ2.5	インプラント用 サイドカッティングバー φ3.0	規格名	C162 204 016	C162A 204 016	C267 314 016
2.0	2.5	3.0	刃部長 (mm)	10	9.5	9
			頭部最大径 (mm)		1.6	

一般名称	販売名	クラス分類	番号
歯科用吸引管	サージチップ	管理 (社)	認証 218X08ZY10083000
歯科用カーバイドバー	ホリコ カーバイドバー	一般 (1)	届出 2881X00035000290

ペリオ・外科
特集カタログも
ご覧ください!



ワンタッチで 口腔内 カゲなし

カゲなし!ピンポイントで明るい

松川敏久 Dr.

滅菌できて 衛生的

約12,500ルクスの明るさ!
細部まで明るく
訪問・治療


訪問診療に、電源いらず

ロエコ・サージチップ はめ込みタイプ
6.5mm 外径の排唾管



林揚春 Dr.

6mm 外径の排唾管 はめ込みタイプ

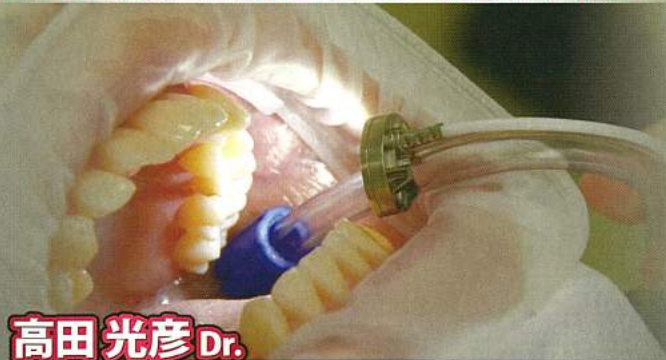

高田光彦 Dr.

ライトの
ON・OFF



ポータブル・オルボ

- ロエコ・サージチップ はめ込みタイプ
6.5mm 外径の排唾管
- 6mm 外径の排唾管 はめ込みタイプ

(セット)
LEDライト 2ヶ
携帯バッテリー
充電器・ストラップ



DENT Touch



口腔内を直接照射!見たいところをピンポイントで明るく照らします。
約12,500ルクスで驚きの明るさ。訪問先でも電源いらずで診療をサポート。
※ロエコ社サージチップ専用。
※LEDライト・コードは132℃までオートクレーブ滅菌可。

すみずみまで とどく 使いやすい 角度つき

角度つきで 奥までとどく

丈夫でしなやか おれにくい

奥歯

通しやすく
おれにくい!

歯の裏側

しなやか!

実寸

よごれ発見 ← 黒毛

出血発見 ← 白毛

やさしく
キズつけにくい
ワイヤー

インターブックス プラス

豊富な
9サイズ!

■6本入
4本入(3L・4Lのみ)
■¥600



大きな
すきまも
スッキリ!

奥の歯間でも 通しやすい! 2点曲がる 歯間ブラシ

インプラント・かぶせもの・矯正を
傷つけないワイヤー!

2点曲がって 歯の内側 からも 入る!

歯の裏側から

2回曲げ

奥歯

1回曲げ

前歯

まっすぐ

実寸

インターブックス プロ

豊富な
8サイズ!

■6本入
■¥600



衛生的な
キャップ
つき



するふわ フロス / デントエイド社

ふわっ と ふくらみ 歯のすきまに フィット 切れずに 長もち!

糸がふくらみよごれに 密着
きれいにつつまこんで 除去!

ふくらんで
スポンジ状に
よごれをとる!

よごれをしっかりとらめとります
ワックスつき・フッ素配合で つかいやすい
丈夫で長持ち 切れにくい

佐野 明美 DH

唾液(水分)を
ふくむと...

大容量
50m!

するふわフロス

■¥550



エンド

拡大・マイク

外科

衛生

印象

補綴

研磨・調整

長持ち, 最薄が 0.05mm

研磨調整ストリップス

ブレードカット

0.05^{最薄}mm

巾4 × 150mm

CRのバリ・歯間
余剰セメントもカット!

西川 義昌 Dr.



凸凹ホールノンカット

0.05^{最薄}mm

巾4 × 120mm

歯質を守り, 歯石や
余剰セメントを除去

丸橋 理沙 DH



ダイヤ穴あき

巾3 × 150mm

目詰まりせず
すばやく仕上げる

CR調整研磨
デイスキング

天川 由美子 Dr.



規格	枚数	価格										
アソート	8	3,500	ブレードカット・凸凹ホール ノンカット ダイヤ穴あき中研磨・最終研磨/各2									
CRバリ・歯間カット用 ブレードカット 50μ	12	2,100	巾4 × 長さ150mm 粒子なし・ノコギリ刃	荒研削用 ダイヤ穴あき 140μ								
歯石・余剰セメント除去用 凸凹ホール ノンカット 50μ	10		巾4 × 長さ120mm ・ホール周囲に片面凸凹型	中研削用 // 100μ	10	6,200	巾3 × 長さ150mm・片面	粗調整用 カーボラダム 100μ				
				最終研削用 // 70μ			中研削用 // 90μ	12	2,100	巾3 × 長さ150mm・片面		
							最終研削用 // 70μ					

硬いバイト, 精密な補綴

硬い! 咬合調整の短縮につながる!

りんごの香りでリラックス

トリミング かんたん

暑い時期は、冷やしておくことで硬化時間を長く延ばせます




本多 正明 Dr.



本体 50ml×2
ミキシングチップ×12
コントロールチップ
フラット型×12
各 ¥8,500

〈レギュラー〉

- 硬化時間: 90 秒
- 硬 度: ショアA95

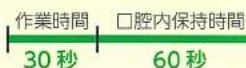

〈スロータイプ〉

- 硬化時間: 120 秒
- 硬 度: ショアA95



グラスバイト / デタックス社

重合光が通る 透明バイト

咬合接触を見ながら採得


プロビ かんたん 作成

咬合面 再現コア として



本体 50ml
ミキシングチップ×4
コントロールチップ×4
¥5,300

- 硬化時間: 90 秒
- 硬 度: ショアA80

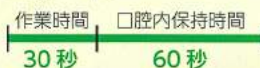


不安定な顎位の誘導・接触を目視

水町 裕義 Dr.



テック 作製
咬合面再現を
すばやく!

島田 卓也 Dr.

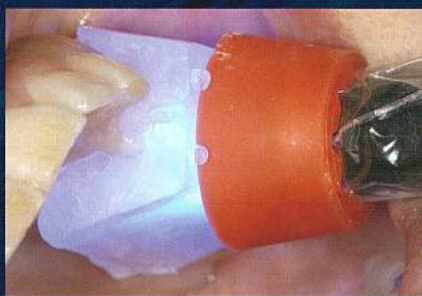

貞光 謙一郎 Dr.

一般的名称	販売名	クラス分類	番号
歯科咬合採得用材料	グリーンバイト アップル	一般 (I)	届出 28B1X00005000003
歯科印費採得用材料	グラスバイト	"	" 28B1X00005000219

筋形成 や 辺縁採得 粘膜 機能印象の 再現性を高める！

操作性・辺縁封鎖性

コンパウンド・WAX
よりも 再現性を高く

余裕ある硬化 6分

たれにくい！流れにくい！
セミパテタイプの
シリコーン印象材



※オレンジのシリコンのMOKUDA取り扱いです

吉松 繁人 Dr.

機能印象を カンタンに



内容量 ベース・キャタリスト 各 80ml
モールドイングシリンジ × 1
¥9,400



1 接着材(トレーロックA)の塗布



2 1:1で練和



3 トレー辺縁に盛り付け



4 筋形成



5 不要部位をトリミング



6 辺縁印象の完了

松本 勝利 Dr.

支台歯 形成用の オールマイティ厳選バーキット

CAD / CAM,
オールセラミックス
メタルクラウン
インレー・オンレーの形成に対応

西川義昌
Dr. デザイン

10本で 形成が完結

**なめらかな 仕上がり
高品質ダイヤ**



■10本入/1セット ¥14,900



西川義昌 Dr.

■ 単品販売 / 構成品

用途	ガイドング グループ軸面形成	軸面形成	軸面形成	隣接面 軸面形成	臼歯部遠心面 軸面形成	フィニッシュ ライン形成	咬合面形成	咬合面形成	前歯部 舌面形成	隣接面 グループ形成
ISO表示	298/018	298C018	298/014	298C012	297/016	199C014	238/018	239/021	277/023	172C012
ホリコNo.	—	—	—	—	—	—	—	8Mr	—	—
刃部長(mm)	8.0		6.0		8.0	6.0	4.0	5.0	4.5	8.0
FG(1本)	¥1,700						¥650		¥2,300	¥1,700
FG (7本入:スペシャルパック)	¥9,900						¥3,900		¥13,700	¥9,900

6本で CR 最終形成キット


あとを残さず 素早く カット

コンポジット 簡単 形成

宮崎 真至教授 セレクション



ファイラーをカット!
ピカツときれい

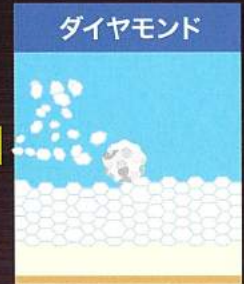

ファイラーを残し表面が
ザラザラ



SE9
歯間



SE6
隣接



7404
咬合



7406
舌側



CFT1
裂溝




7205
平滑面

宮崎 真至 Prof.



滅菌対応スタンド付

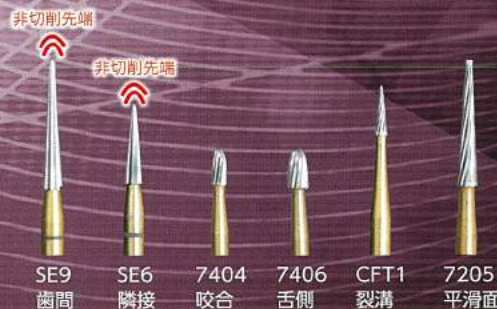

SE9
歯間

SE6
隣接

7404
咬合

7406
舌側

CFT1
裂溝

7205
平滑面

MM COMPOSITE FINISH

■6本入/滅菌対応スタンド付

..... ¥11,000

仕上げが早い つや出しキット



コンポ ハリケーン 2種セット
RA用 Φ14mm ¥4,400

〈実寸〉



コンポ ハリケーン
中研磨
ピンク RA



コンポ ハリケーン
最終研磨
ホワイト RA



中研磨 高田真代 Dr.



つや研磨

一割の名義	販売名	クラス分類	番付
歯科用カーバイドバー	ホワイト カーバイドバー	一般 (I)	2883X00003000133
歯科用工用ダイヤモンド研削材	デデコ ダイヤモンド研削器具	〃	3881X000035000285

TEK・プロビ ハイブリッド冠

接着強化

内面切削で
接着性 向上

サンドブラスト
必要 なし

長く 使えて
経済的

佐々木 英隆 Dr.

■ハイブリッド冠



山本 尚吾 DT

■TEK・プロビ・硬質レジン




佐々木 英隆 Dr.



C162 104 016 ¥5,400

〈実寸〉

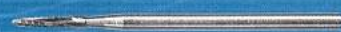

一般の名称	販売名	クラス分類	番号
歯科用カーバイドバー	ホリコカーバイドバー	一般(1)	編出 2881X00005000290

1本でプロビ・TEK 調整がすばやくキレイ

土屋 賢司 Dr.
セレクト

1本で
形態修正～面出し
KTバー

発熱を抑え
切れ味 鋭い
チタンコーティング

鼓形空隙～概形まで



1701

マージンも 繊細に



1702

1本で 内面調整



C23R104 016

すけて 奥まで 見えやすい!



H805F190

ドイツ ホリコ社製の KTバーは、プロビショナルの咬合面、歯間部、鼓形空隙など、すべての部位の調整を一本で仕上げる土屋賢司先生デザインのオリジナルバーです。

優れた切削性と耐久性の「ホリコ#1756」に、更に鋭利な先端を付与したデザインです。



技工用
カーバイドバー
1701
¥4,200



技工用
カーバイドバー
1702
¥4,200



技工用
カーバイドバー
1756
¥4,200



技工用
カーバイドバー
C23R104 016
5本入
¥5,000



ダイヤモンドディスク
H805F190
両面ダイヤ
0.15mm薄
¥5,400

※セット販売はしておりません。

一般的名称	販売名	クラス分類	番号
歯科用カーバイドバー	ホリコ カーバイドバー	一般 (1)	288HXXXX05000200
歯科技工用ダイヤモンド研磨材	ホリコ ダイヤモンドディスク	〃	288HXXXX0500093


精密な咬合調整で 長期補綴




ピンポイント調整
薄さ 12 μ

手・グローブに
色がつきにくい

濡れていても
くっきりマーク

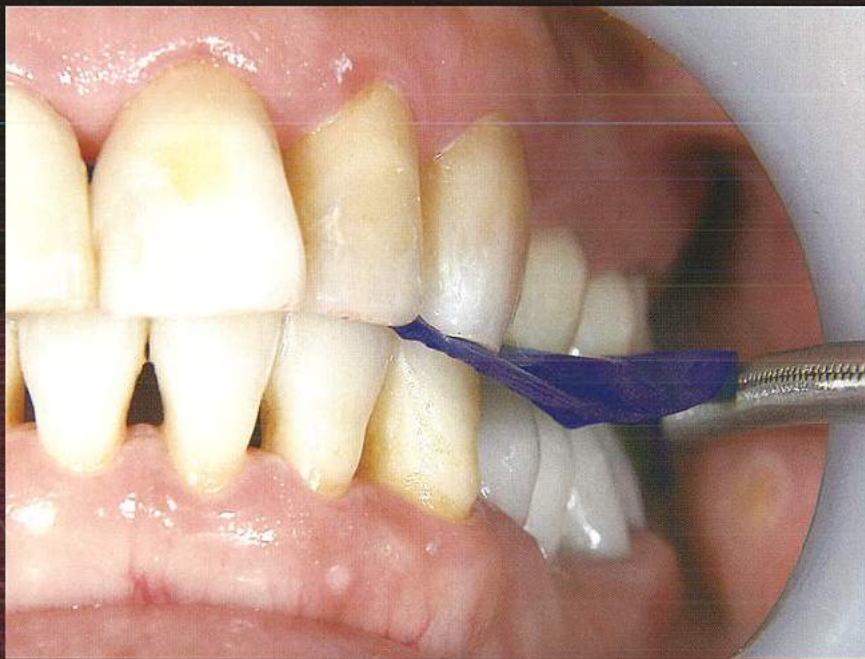

2つ折り 24 μ の引き抜き
接触点を見きわめる

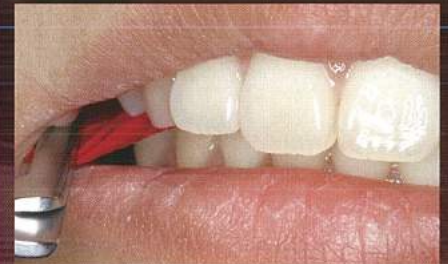

色ヌケで Wチェック!



茂野 啓示 Dr.

筒井 照子 Dr.

(25m長)

片面	黒	赤	青	緑		
幅 22mm	¥2,450					
幅 80mm	¥5,950					
両面	黒	赤	青	緑	赤	黒
幅 22mm	¥3,150					
幅 80mm	¥8,400					

22mm フォイル用ディスペンサー

¥1,200



ディスペンサー
ボックス 4ヶ月 ¥12,000

全顎用移動ツイーザー

¥19,800



口腔内挿入
が容易

局部用曲型ツイーザー

¥6,500



局部用直型ツイーザー

¥5,500

●ディスペンサー 4個とボックスとの
組合せ写真です。

調整・研磨
カタログも
ご覧ください!



はやくてかんたんデンチャー 最終艶出し!!

クリームタイプ

**5秒で
光る!**

※自社調べ

10秒
フレキシブル
デンチャーも

※自社調べ

**熱が
出にくい**

10秒研磨 フレキシブルデンチャー



六甲歯研

15秒研磨 アクリルレジン



奥野 幾久 Dr.

80g

¥7,000



推奨器材
DVA社
AM専用バフ1
¥1,100



推奨器材
ポリラビット社
綿糸ポイント103
¥2,800/12本入

一般的名称	取柄名	クラス分類	器具
歯科用研磨器材	アクリルマーベル	一般 (1)	届出 28B1X00005000300
"	ポリラビット研磨用器材	"	" 28B1X00005000294
"	DVA 研磨ペースト	"	" 28B1X00005000334

見分けのつかない 天然歯の輝き

自然なツヤ ポーセレンを5分で

20g
¥11,000

e.max®・ポーセレン・ジルコニア・ハイブリッド・コンポジット

ギラベタなし 油成分カット

粉が残りにくい さらに、はやく!

ワンステップ ブラシだけ



池村 仁克 Dr.
メタルボンド

ジルコンブライト / DVA社

とにかく早く、ピカピカに!!

40G ¥15,000
20G ¥11,000

ジルコニア・e.max®・ポーセレンに




遠藤 淳吾 DT

協和デンタルラボトリー

対合歯を傷つけない。天然歯並みにやさしい咬合を研磨により再現。

■ 研磨面滑尺度データ

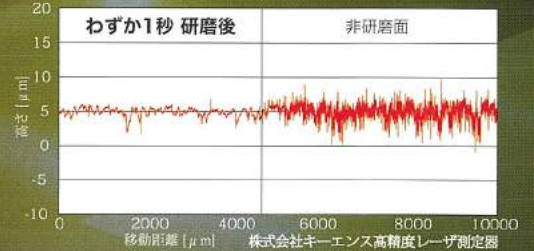

完全に研磨されたジルコニアは、対合歯を守ります。(チューリッヒ大学他での研究結果より)

ハイブライト / DVA社

ジルコンブライトのスピードでハイブリッドブロックも

¥7,250 / 16g



ハイブリッドブロックをすばやく艶出し

口腔内での最終研磨に!

ブラシに最後までつけやすい新パッケージ

関連製品

ナチュラルセラミック ジルコンブライト・ジルコンブライト 対応HPブラシ/ポリラピッド社



ロビンソンブラシ 113
¥2,800 / 12入

ロビンソンブラシ星 113ST
¥4,000 / 12入



ロビンソンブラシ 112
¥2,800 / 12入

ロビンソンブラシ星 112ST
¥4,000 / 12入

熱を放散して
焼きつきにくい!
裂溝・歯間に入り込んで磨く!

調整・研磨
カタログも
ご覧ください!




一般的名称	販売名	クラス分類	単位
歯科用研磨剤	DVA 研磨ペースト	一般 (1)	届出 2881X00005000334
〃	ポリラピッド 研磨用剤材	〃	〃 2881X00005000294

e.max®・ポーセレン・ジルコニアの 調整～研磨完結

チェアサイドでも
素早くピカピカ

あらゆる
セラミック系材料に

天然歯になじむ
自然な仕上がり

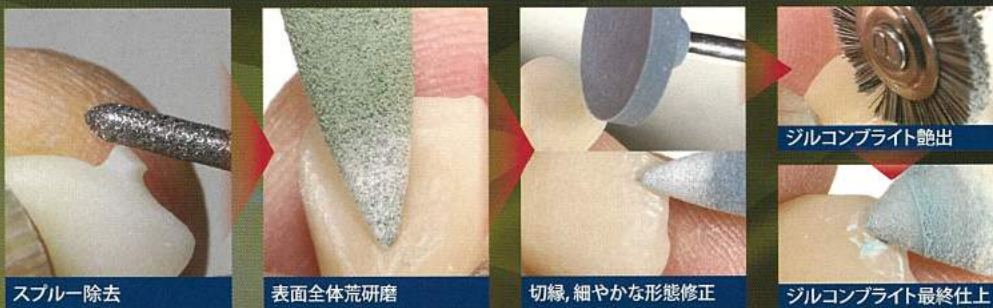

山本 尚吾 DT

〈キット内容〉 ■キット価格…¥24,000

スプルー除去 / 隆線付与

■ホリコ ダイヤモンド ポイントHP



荒研磨 / コンタクト・マージン・形態調整 / 仕上研磨

■デデコ セラダイヤ ポリッシャーHP



艶出し / 最終仕上げ

■ポリラピッド ロビンソンブラシ、フェルトポイントHP




ジルコニア・ポーセレンが ザクザク 削れる

すり減らずに 超長寿命

※当社実験結果による

発熱が 少ない


面を キレイに 微細粒子入

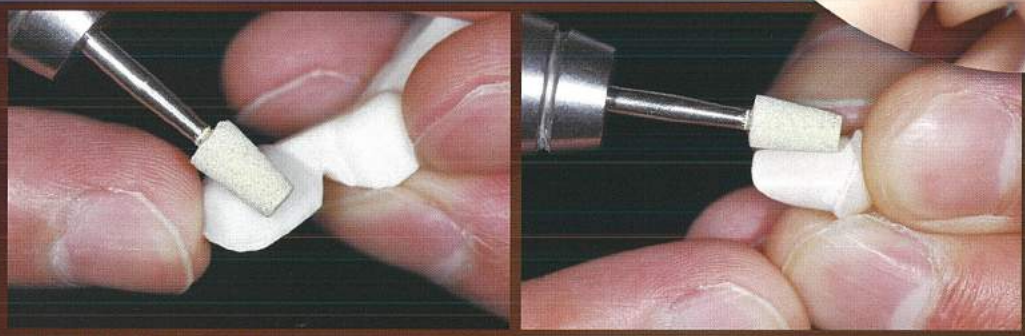

草間 幸夫 Dr.

吉澤 和之 DT

- ジルコンブライト・セラダイヤのご使用前に、組み合わせて ご活用ください。

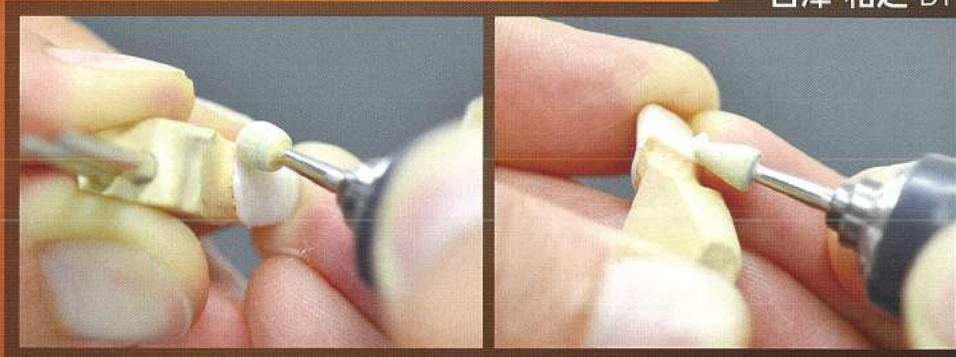

〈実寸〉

4245	4246	4241	4242	4244	4243	4249	4250	4247	4248
¥6,900	¥6,900	¥6,900	¥6,900	¥6,900	¥6,900	¥7,900	¥7,900	¥7,900	¥7,900

各1本

調整・研磨
カタログも
ご覧ください!



一般的名称: 販売名: クラス分類: 番号:
 歯科技工用ダイヤモンド研削材: デデコ ダイヤモンド研削器具: 一般(1): 届出: 2881X00005000285

ジルコニア・e.max®・セラミックを すばやく 研磨～仕上げ



玉置 博規 DT

〈実寸〉

形態修正



1105 ¥3,000 1102 ¥5,500 1104 ¥2,500 1103 ¥2,500

微調整/艶出し



1125 ¥3,000 1122 ¥5,500 1124 ¥2,500 1123 ¥2,500

仕上げ研磨



1145 ¥3,000 1142 ¥5,500 1144 ¥2,500 1143 ¥2,500



スターターキット ¥14,000

口腔内での調整も!

素早く荒研磨～仕上げまで **ダイヤ入りの超寿命**※



Dedeco e.max®・ジルコニア セラミックス・ハイブリッド用
 コントラ用 セラダイヤポリッシャー スターターキット 1182 ¥11,500
 各種1本入り

コンボジットもダイヤ粒子で **なめらかに仕上げる**



Dedeco コンボジット用
 コントラ用 コンボジットダイヤ スターターキット 1183 ¥6,400
 各種1本入り

※当社実験結果による

単品
各種3本入り
ラインナップ

	荒研磨				中研磨				仕上げ研磨				
	コントラ用		FG用		コントラ用		FG用		コントラ用		FG用		
セラミックス ジルコニア ハイブリッド													
品番	1107	1108	1109	1110	1127	1128	1129	1130	1147	1148	1149	1150	
3本入価格	¥4,500				¥7,000				¥4,500				¥7,000
コンボジット	微調整 艶出し				仕上げ研磨								
	コントラ用		FG用		コントラ用		FG用						
品番	1162	1163	1164	1165	1172	1173	1174	1175					
3本入価格	¥2,500				¥2,500								

使用部位に
合わせた4形態

[推奨回転数] 15,000rpm

エンド

拡大マイク

外科

衛生

印象

補綴

研磨・調整

ペーストなしで

大白歯ブロック
咬合調整後

2分

※自社調べ

大白歯ブロックも ジルコニアもピカピカに!

細かいところにも とどきみがき 長持ち!

咬合溝

傷消し・荒研磨



関千俊 Dr.

ENAMIC®

連結部

中研磨



崎田 竜仁 Dr.

KATANA AVEZIA P Block

つや研磨も!



ペーストなし!

西川 義昌 Dr.

ジルコニア

NEW

すべて入った
スターターキット



セラハリケーン3種セット
RA用 or HP用小 Φ14mm



コンボハリケーン2種セット
RA用 Φ14mm



ジルコニア・e.max® ポーセレン・ハイブリッド・C R

セラハリケーン

コンボハリケーン

Φ14mm RA用 1入・5入
HP用 1入

ジルコニア
セラミック 専用
傷消し・荒研磨



セラハリケーン
荒研磨 プレー RA
小 HP



中研磨

高田 真代 Dr.

つや研磨

ハイブリッド には
桃と白の2本 だけ
中研磨



セラハリケーン
中研磨 ピンク RA
小 HP

ペーストなしで!
つや研磨



セラハリケーン
最終研磨 ホワイト RA
小 HP

Φ14mm RA用 1入・5入 実寸

CRに



コンボハリケーン
中研磨 ピンク RA



コンボハリケーン
最終研磨 ホワイト RA

各1本入り... 小 ¥ 2,200 許容回転数: RA 10,000 ~ 12,000rpm
大 ¥ 7,900 HP 7,000 ~ //
小5本入り... ¥ 10,000

3,000 ~ 8,000 rpm

一般的名称 販売名 クラス分類 番号
歯科用ゴム製研磨体 ホリコ ポリッシャー 一般医療機器 品出 28B1X00005000291

ハイトランスZR を チップさせない 傷とり・研磨

スーパー ハイトランスや
マルチレイヤーの
ジルコニアに!

30秒で傷取り～中研磨




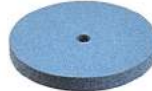

薄さ継続ドレッシング不要!



マージンを守る やわらかさ ドレッシングのムダを節約 傷とり～中研磨 まで 1本



マージン・チップレス ハイトランス ジルシャイン / 茂久田商会

ホイール型 薄	ホイール型 厚	砲弾型
 <p>実寸 許容回転数：6,000～12,000rpm</p>	 <p>実寸 許容回転数：6,000～12,000rpm</p>	 <p>実寸 許容回転数：6,000～12,000rpm</p>
<p>Ø20mm</p> <p>1.1mm 厚</p> <p>8枚 / ¥9,800</p>	<p>Ø20mm</p> <p>2.6mm 厚</p> <p>4枚 / ¥9,800</p>	<p>6枚 / ¥9,800</p>



※ホイール型にはジッペラー社「タイトグリップマンドレル」が別途必要となりますので、あわせて求めください。

超 明るい 逆根治!




木ノ本 喜史 Dr.

根管の奥まで明るい
新・タンタルコート

ぼやけず ダブらない
表面反射

◆ 暗く、色変わりするメタルミラー ◆


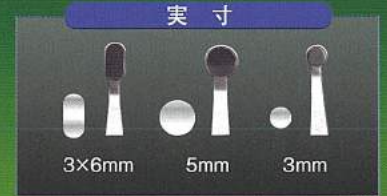


超明度タンタルマイクロミラー	円 3mm	円形 Φ3mm	¥18,800
//	円 5mm	円形 Φ5mm	¥18,800
//	長円 3×6mm	長円形 3×6mm	¥21,000
//	2本セット	ハンドル2本、円3mm、長円3×6mm	¥39,800
//	3本セット	ハンドル3本、円3mm、円5mm、長円3×6mm	¥58,500

関連製品

エルゴフォーム ハンドル
ハーネンクラット社

PEEK製 軽くて 丈夫, 持ちやすい!!

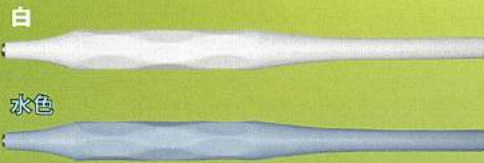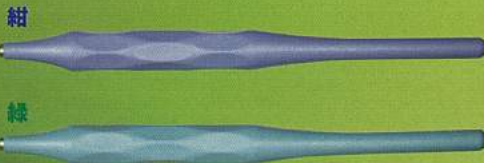

ウルトラビジョンFS,
マイクロミラーと併せて
ご使用ください。
1本 ¥1,000

ミラー 保護カバー
ミラーギア社

傷から ミラーを守る

MIRROR
G E A R

(カバーあり)
傷の少ない
表面

機械洗浄, オートクレーブOK!

丈夫で 裂けにくい シリコン製

カバーをつけて
傷よけに!!



※サイズ #4・#5
※同色6個入り・
30個入りの2包装
6個入 ¥3,000
30個入 ¥12,000

ご使用上の注意

1. 薬液滅菌禁止
2. オートクレーブには蒸留水を使用する
3. 乾燥した状態でオートクレーブし、乾燥工程は省く

基本セットから マイクロ下での使用 まで!

明るい タンタルコーティング ミラー 大特集!

輪郭 くっきり
シャープに

明るく クリア
表面反射で 2重像なし

リアル色
直視と 同等

超明度 かるくつきり ミラー

明るく, かるい, 疲れないミラー



圧排しても
いたくなりにくい!

冷たくない
カチカチ いわない



青島 徹児 Dr.

サイズ: #4・#5
各色/1本
.....¥1,200
5本アソート
.....¥5,500



イエロー ピンク ミント ラベンダー ブラック

継ぎ目なしで 衛生的

ウルトラビジョン FS

ぼやけず, くっきり見える

ウルトラビジョンFS



天川 由美子 Dr.

ロディウムコーティング



※本品のみロディウムコーティングです。

平行線入りの 大型ミラー

坪田 有史 Dr.



〈実寸〉

メガパレロメーター

3mm

■1ヶ入 ¥3,200

5
やや大

■12ヶ入 ¥6,800

4
標準

■12ヶ入 ¥6,800

0
ミニ

最後臼歯 遠心
幼児に最適

■3ヶ入 ¥3,000

高橋 登 Dr.

ギラつき防止 目にやさしい

新発売


黒フレーム / ハンドル

もちかえずに圧排して
見やすい
両面ミラー



ハンドルが
視界操作を
じゃましない

まがる
超明るい
マイクロミラー

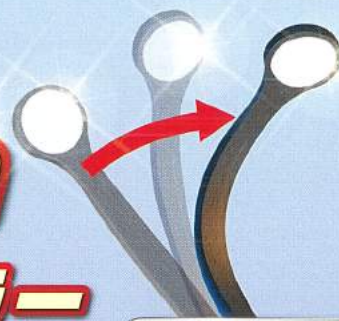

分岐底部に
はいりやすい！
みやすい！



すきな角度に
まげられる

ぼやけずブレない
表面反射

根管奥まであかるい
新・タンタルコート

キズつきにくい
特殊コーティングガラス

もちやすい NEW!
丈夫な ステンレス製



ハーネクラット 歯鏡

専用メタルハンドルとともにご活用ください。
従来型 エルゴフォームハンドルとも連結可能です。

超明 曲がる マイクロミラー	三角 根分岐用	ブラック	¥23,500	1本
〃	長円 3×6mm	〃		
〃	円 3mm	〃	¥22,000	
〃	円 5mm	〃		
超明 両面ミラー	# 4	〃	¥13,500	φ22mm 3本
メタルハンドル		〃	¥4,500	22g

一般的名称	販売名	クラス分類	番号
歯鏡	ハーネクラット 歯鏡	一般 (I)	届出 28B1X00005000310

『売るためだけでなく、つくりだすため』

MOKUDA

〒650-0047 神戸市中央区港島南町4丁目7番5号
TEL (078) 303-8241

www.mokuda.co.jp

バラエティ豊かなMOKUDAのカタログ
ディーラーにお申しつけください

総合 調整・研磨 ペリオ・外科 エンド メンテナンス

お取扱店