



小白歯CAD/CAM冠対応 レジンブロック 健保適用

松風ブロック HC ハード II



100年先にも輝く笑顔を
Bright smiles for another 100 years

保険適用
CAD/CAM冠用材料(II)



すぐれた曲げ強さを実現

強度を発現する Duo-Tech テクノロジー

● 物性

ビッカース硬さ(※) 37°C水中浸漬1日後	曲げ強さ(※) 37°C水中浸漬7日後	圧縮強さ 37°C水中浸漬1日後
111HV0.2	228MPa	465MPa

(※)JDMAS 245:2019

モノマーテクノロジー

PUDA

PUDA*モノマーは、『剛性』×『靱性』の両立をコンセプトに開発されたモノマーです。これにより高強度・高靱性を付与することに成功しました。

※(Phenylene-included Urethan Di-Acrylate : フェニル基含有型ウレタンアクリレート)

フィラーテクノロジー

i-PFS

i-PFS*フィラーは、従来のPFSフィラーの特殊構造に改良を加え、2種類の細孔を付与することで『機械的結合』と、『化学的結合』を付与した『Duo-Tech』コンセプトフィラーです。

※i-PFS (improved-Progressive Fine-Structured)


DMA

DMA*は『硬さ』×『タフさ』の両立をコンセプトに開発されたモノマーです。これにより、高硬度・耐摩耗性を付与することに成功しました。

※(Dendritic Multifunctional-Acrylate : 樹状多官能アクリレート)




物理的結合

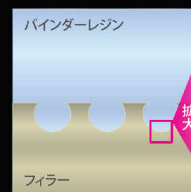


マクロ細孔

化学的結合

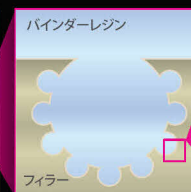

メソ細孔

表面活性化

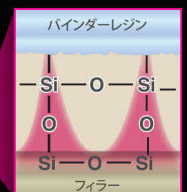

表面活性化

松風ブロック HC スーパーハードと同じ色調設計

松風ブロックHCハードIIと松風ブロックHCスーパーハード(大白歯部用)は同じ色調設計です。これにより色調が調和し、2製品を併用する場合も変わらない感覚でお使いいただけます。




小白歯 (HCハードII) 大白歯 (HCスーパーハード)



支台歯形成

小白歯の場合、咬合面部は1.2mm以上、マージン部は0.8mm以上の厚みを確保し、咬頭頂の厚みは1mm以上で丸みを帯びた形状で仕上げます。

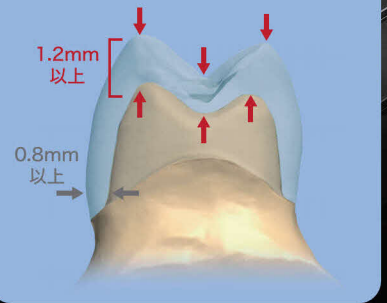

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風ブロック HC ハード II	歯科切削加工用レジン材料	管理医療機器 医療機器認証番号 302AKBZX00035000

CAD/CAM冠用材料(II) 健保適用

松風ブロック HC ハード II


〈色調〉4色 A2-LT、A3-LT、A3.5-LT、A4-LT



Sサイズ(5個入)・・・¥11,600
Mサイズ(5個入)・・・¥12,800



Lサイズ(1個入)・・・¥3,500

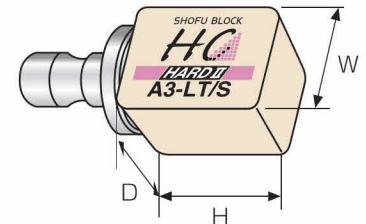

サイズ	寸法(mm)		
	D	W	H
S	10.0	12.0	16.0
M	12.0	14.0	18.0
L	14.5	14.5	18.0

関連製品



CAD/CAM冠用材料(III) 健保適用

松風ブロック HC スーパーハード

〈サイズ〉1種類 Mサイズ
〈色調〉
4色 A2-LT、A3-LT、A3.5-LT、A4-LT
5個入・・・¥20,100



CAD/CAM冠用材料(I) 健保適用

松風ブロック HC (5個入)

2レイヤー(2層)

Sサイズ・・・¥11,600 Mサイズ・・・¥12,800

〈色調〉4色：A1-2L、A2-2L、A3-2L、A3.5-2L

※2Lは2Layer(2層)を表しています。

単層

Sサイズ・・・¥10,400 Mサイズ・・・¥11,500

〈色調〉

LT 6色：W2-LT、A1-LT、A2-LT、A3-LT、A3.5-LT、B3-LT

HT 3色：A1-HT、A2-HT、A3-HT

エナメル 2色：59、0C

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

カタログに記載の価格は2020年9月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

www.shofu.co.jp