

# インプラントやペリオ治療をしっかりとサポート! フラップホールディングプライヤー

歯肉を安定的に保持して作業性をアップ!




原寸大サイズ

## インプラント手術のために専用開発



インプラントのための骨増生手術の際に、フラップ(切開された歯肉)を掴むために専用設計された、特別仕様のインスツルメントです。  
ブロック骨の保持にも便利で、テンション状態で安定して保持できるため、穴を開ける作業が容易になります。

## 切開した歯肉を戻す際にも大活躍!

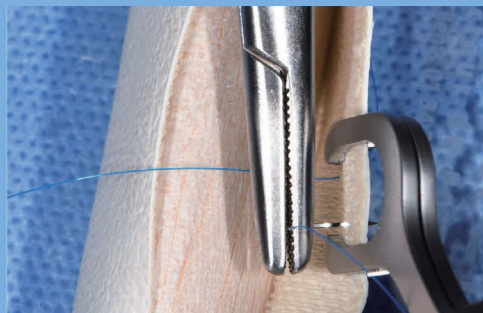

フラップ(切開された歯肉)の保持と移植骨ブロック設置後に、フラップを戻す縫合作業も、この1本だけで連続して行うことが可能になります。




一般的なピンセットによる保持状態



1点による保持は、支点が少なく歯肉が不安定になるため、作業性が著しく低下してしまいます。

フラップホールディングプライヤーでの保持状態

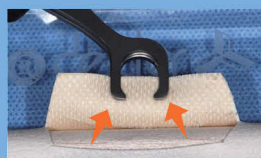

2点の場合は支点が増えるため歯肉が安定して保持できるようになり、作業性が格段上がります。

ありそうで無かったプライヤー。  
2つの支点で治療の煩わしさを解消します!

### 仕様及び滅菌情報

材質	ステンレス 1.4021 (SUS420J1)
重量	15 g
サイズ	145mm (± 4)
先端サイズ	外寸14.5mm、内寸9.5mm
保管	滅菌後は化学薬品を避け、清潔で乾燥した場所で保管して下さい。
保管温度	5℃~40℃の間で、直射日光を避けて保管して下さい。
滅菌圧	最低60ミリバール
滅菌温度	134℃~137℃
滅菌保持	4分
滅菌乾燥	最低10分

商品コード: 015024

商品名:

コーラー フラップホールディングプライヤー

販売価格

9,800 円 (税別)

一般医療機器医療機器届出番号: 23B2X10023000390

[www.meinandental.com](http://www.meinandental.com)

※製品の外観は現物と多少異なる場合があります。価格・製品仕様は予告無く変更することがあります。

製造販売元

2020.08.27.1000

名南歯科貿易株式会社  
www.meinandental.com

●名古屋本社

〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2番26号

TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610

●東京オフィス・ショールーム

〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2理工図書ビル2F

TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524



YouTube

取扱店