


# DENTAL PRODUCTS CATALOGUE

## KAMEMIZU CHEM.IND.CO.,LTD.

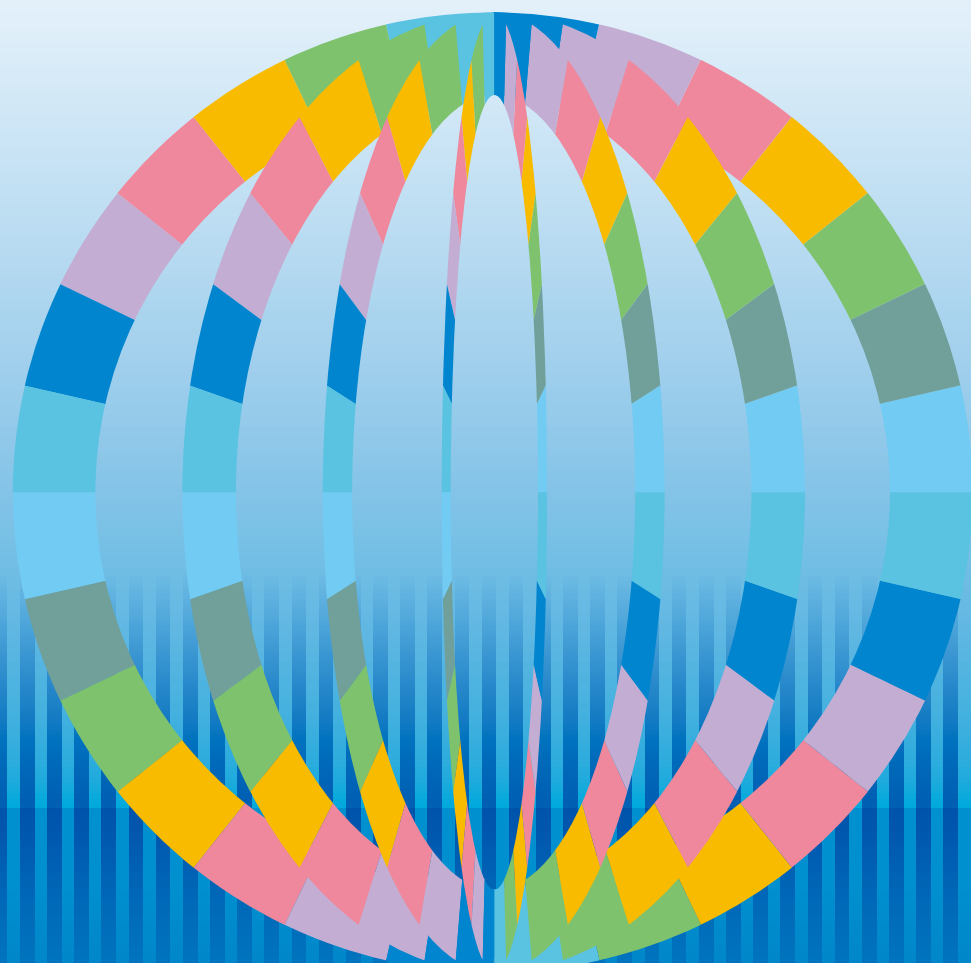

亀水化学工業(株)総合カタログ

# DENTAL PRODUCTS CATALOGUE

## KAMEMIZU CHEM.IND.CO.,LTD.

### 亀水化学工業の製品

本カタログの前半はレジン製品を中心とした歯科医院向けの製品が掲載されております。

特に弊社が得意とする義歯床リライン材、なかでも高齢化社会に好適なアクリル系の軟質タイプを中心とする、各種のリライン材が特長となっております。

## KAMEMIZU CHEM

### リライン

#### 軟質⇒硬質

ペリフィット	2
DIL	2
Fdrペリ	3
FDr	3
ダイナミックライナー	3

#### ティッシュコンディショナー

デンチャーソフトⅡ	4
-----------	---

#### 硬質

デンチャーライナー	4
マイルド	4

#### 軟質

FDソフト	5
ティッシュテンダー	5
ソフテン	5
コンフォートナー	6

### 表面滑沢材 兼 接着材

コートライナー	6
ニュートップコート	6

### その他 義歯関連

#### 咬合面再構築用レジン

バイトアップ	7
--------	---

#### 治療用義歯

レブリカ	7
------	---

#### 仮床トレー用レジン

フィットベース	7
---------	---

### 咬合採得

バイトレジン	8
--------	---

### 各種即重レジン

#### 汎用レジン

テックレジン	8
スナップ	8
スキップ	8

#### 仮封用レジン

ポリシール	9
-------	---

#### 鑄造可能即重レジン

レジナップ	9
-------	---

#### バイトプレート用レジン

マルチガード	9
--------	---

#### 簡易集塵BOX

ダストシューター	9
----------	---

### デントケアの製品

本カタログの後半は主として口腔ケア製品が掲載されております。特に、日本で最初に舌ブラシを開発した弊社は、障害者や、急速な高齢化社会を迎え、大幅な増加が予想される要介護者の口腔ケアに関する製品開発を社会的使命としてとらえ、今後も継続して取り組んでまいります。

## DENT-CARE®

### 感染対策

インスツルメント フォルテ	10
サーフェイス クイック	10
サーフェイス クイックゼロ	10

### 口臭対策

オーラルメイト	11
タングメイト	11
フレッシュメイト ソフト	11
E-プレススプレー	12
E-プレスジェル	12

### カンジダ培地

カンジダディテクター	12
------------	----

### 義歯の洗浄

デントクリーン	13
ストーンメルト	13
ストーンメルトジェル	13
クリーンソフト	14
デンチャーブラックチェッカー	14
入れ歯ケース	14

### ドライマウス(口腔保湿剤)

ウエットエイド	15
デンチャージェル(オーラルメイトD)	15

### 開口保持具

リップワイダー	15
バイトロックⅡ	16

### 口腔内清掃用具

介護粘膜ブラシプロ	16
介護ケアセット	16
口腔ケアスポンジブラシ	17
アイシング綿棒	17
吸引歯ブラシ	17

### 歯間用清掃用具

パーシャルメイト	18
----------	----

### デンタルフロス

フロスエイドプロ	18
デントフロスプロ	18

リライン材

表面滑沢材 兼 接着材

その他 義歯関連

咬合採得

各種即重レジン

感染対策

口腔衛生・ 介護関連商品

軟質→硬質

## ペリフィット (動的機能リライン材) PAT.

管理医療機器  
義歯床補修用レジン

床の延長・封鎖ができる動的リライン材



“ペリフィット”は、粉液比を変えることで床の辺縁延長・封鎖のできる動的リライン材です。従来品“DIL”同様に、はじめはティッシュコンディショナーのように柔らかく、機能印象を採りながら硬化します。硬化開始が翌日からと早く、軟質期間が短いので耐久性が向上しています。

セット内容	・粉 70g ・液 50mL ・ニュートップコート 30mL
色 調	・ピンク・ライブピンク
セット価格	19,800 円(税別)
単 品	・粉 70g 8,300 円(税別) ・液 50mL 5,500 円(税別)
認 証 番 号	223AFBZX00107000

リライン材

軟質→硬質

## DIL (動的機能リライン材) PAT.

管理医療機器  
義歯床補修用レジン

世界で初めて開発に成功



初めはティッシュコンディショナーとしての機能があり、装着後約 1 週間経過すると自発的に硬化が始まります。そして機能時の印象のままリライン材になるので、痛みも少なく義歯に慣れやすくなります。

ダイナミックライナーの後継品で、操作時間の短縮化と操作性が改善され、1 週間後からは市販の「酵素入りポリドント」(アース製薬)が使用できます。

セット内容	・粉 50g ・液 45mL ・ニュートップコート 30mL
色 調	ピンク・ライブピンク
セット価格	16,800 円(税別)
単 品	・粉 50g 7,000 円(税別) ・液 45mL 5,200 円(税別)
認 証 番 号	219AFBZX00118000

軟質→硬質

## Fdrペリ 光重合型（動的機能リライン材） PAT.

管理医療機器  
義歯床補修用レジン

### ティッシュコンが光重合で硬質のリライン材に変化



初めはティッシュコンディショナーとしての機能があり、動的印象の採得後、光重合することによって硬質のリライン材に変化します。

なお、光重合しない場合は体温で徐々に硬化いたします。

また、粉液比を変えると、付属のシリンジで床の辺縁に盛り上げることができるようになり、筋圧形成をして、床の形が直せます。

セット内容	・粉 80g ・液 60mL ・ニュートップコート 30mL
色 調	ピンク ・ ライブピンク
セット価格	23,000 円 (税別)
単 品	・粉 80g 10,000 円 (税別)
	・液 60mL 7,000 円 (税別)
承認番号	20900BZZ00135000

軟質→硬質

## FDr 光重合型（動的機能リライン材） PAT.

管理医療機器  
義歯床補修用レジン

### ティッシュコンが光重合で硬質のリライン材に変化



初めはティッシュコンディショナーとしての機能があり、動的印象の採得後、光重合することによって硬質のリライン材に変化します。

なお、光重合しない場合は体温で徐々に硬化いたします。“Fdrペリ”よりもゲル化までの時間が長くなっており、辺縁延長機能はありません。

セット内容	・粉80g ・液60mL ・ニュートップコート30mL
色 調	ピンク ・ ライブピンク
セット価格	19,600円 (税別)
単 品	・粉80g 9,000円 (税別)
	・液60mL 6,000円 (税別)
承認番号	20500BZZ00791000

軟質→硬質

## ダイナミックライナー（動的機能リライン材） PAT.

管理医療機器  
義歯床補修用レジン

### 一定期間が経過すると自発的に硬化を開始するインテリジェントリライン材



初めはティッシュコンディショナーとしての機能があり、装着後一定期間（1～2週間）が経過すると自発的に硬化が始まります。

硬化完了までは専用義歯洗浄剤を使用し、硬化後の2週間目以降からは市販の“酵素入りポリドント”が使用できるようになります。

セット内容	・粉60g ・液45mL ・ニュートップコート30mL
色 調	ピンク
セット価格	17,800円 (税別)
単 品	・粉60g 7,700円 (税別)
	・液45mL 5,500円 (税別)
承認番号	20600BZZ00788000

ティッシュ  
コンディショナー

## デンチャーソフトⅡ (ティッシュコンディショナー)

管理医療機器  
義歯床用短期弾性裏装材

耐久性を誇る、定番の商品



特殊配合による優れた耐久性に加え、付属の表面滑沢材でさらに耐久性がアップいたします。

セット内容	・粉100g ・液80mL ・ニュートップコート6mL
色調	ピンク・ホワイト
セット価格	7,300円 (税別)
単品	・粉100g 4,000円 (税別) ・液80mL 3,500円 (税別)
承認番号	20500BZZ00089000

リライン材

硬質

## デンチャーライナー (硬質リライン材)

管理医療機器  
義歯床補修用レジン

低刺激で、床並みの硬さが得られる経済的なリライン材



低刺激の硬質リライン材で、徐々に硬化するため、パーシャルデンチャーなどアンダーカットの多い症例でも安心して取り外せます。また、付属の硬化促進剤を併用することによって、床と同様の硬さが得られるため、仕上げ研磨時に、床とリライン材との境界に段差が付きにくくなりました。

セット内容	・粉100g ・液100mL ・硬化促進剤36g
色調	ピンク
セット価格	8,800円 (税別)
単品	・粉100g 6,410円 (税別) ・液100mL 3,240円 (税別) ・硬化促進剤36g 1,300円 (税別)
承認番号	15900BZZ01269000

硬質

## マイルド (硬質リライン材)

管理医療機器  
義歯床補修用レジン

低刺激で、且つ、経済的価格を実現



ウォッシュアップ用として開発された、経済的な低刺激のリライン材で、フローが良く、シャープに硬化するため口蓋部が厚くなりません。また、発熱が少なく、適合の良いリライン面が得られます。

セット内容	・粉80g ・液50mL ・ニュートップコート6mL
色調	ピンク
セット価格	7,450円 (税別)
単品	・粉80g 4,860円 (税別) ・液50mL 3,350円 (税別)
承認番号	20100BZZ02060000

軟質

## FDソフト (アクリル系軟質リライン材)

管理医療機器  
義歯床補修用レジン

ティッシュコン並に軟らかいアクリル系の軟質リライン材



専用の義歯洗浄剤との併用で、半年から1年近くの耐久性があります。アクリル系の特長として、①直接口腔内で追加修正ができる、②適合試験材が使用できる、③床からの剥離が少ない、④粘弾性でシリコン系よりも咀嚼効率が良い、など多くの利点があります。面荒れ防止のため、軟質専用の義歯洗浄剤“クリーンソフト”(亀水化学)での洗浄が必要です。

セット内容 ・粉110g・液100mL・ニュートップコート30mL  
色 調 ピンク  
セット価格 23,000円(税別)  
単 品 ・粉110g11,000円(税別)・液100mL 8,000円(税別)  
承認番号 1300BZZ00125000

軟質

## ティッシュテNDER (アクリル系軟質リライン材)

管理医療機器  
義歯床補修用レジン

アクリル系のため、直接口腔内で追加修正ができる



シリコン系にはないアクリル系軟質リライン材の各特長を有し、ソフトンよりも軟質で、経済的価格を実現した軟質リライン材です。面荒れ防止のため、軟質専用の義歯洗浄剤“クリーンソフト”(亀水化学)での洗浄が必要です。

セット内容 ・粉 100g  
・液 100mL  
・ニュートップコート 30mL  
色 調 ピンク  
セット価格 14,800円(税別)  
単 品 ・粉 100g7,900円(税別)・液 100mL6,900円(税別)  
承認番号 20400BZZ00766000

軟質

## ソフトン (アクリル系軟質リライン材)

管理医療機器  
義歯床補修用レジン

アクリル系軟質リライン材の元祖



日本で最初に開発されたアクリル系の軟質リライン材です。面荒れ防止のため、軟質専用の義歯洗浄剤“クリーンソフト”(亀水化学)での洗浄が必要です。

セット内容 ・粉 100g  
・液 100mL  
・ニュートップコート 6mL  
色 調 ピンク  
セット価格 10,500円(税別)  
単 品 ・粉 100g 6,170円(税別)  
・液 100mL 5,400円(税別)  
承認番号 16300BZZ00289000

軟質

## コンフォートナー 光重合型 (アクリル系軟質リライン材) PAT.

管理医療機器  
義歯床補修用レジン

### アクリル系の耐久性を光重合で大幅に向上



アクリル系の各特長の他に、表面滑沢材が光重合で強固な重合膜となるため、アクリル系の欠点であった専用の義歯洗浄剤を必要とせず、市販の“酵素入りポリドント” (アース製薬) が使用できるようになり、耐久性が大幅に向上いたします。

セット内容	・粉60g	・液50mL	・コートライナーキット
色調	ピンク		
セット価格	16,800円 (税別)		
単品	・粉60g	5,500円 (税別)	
	・液50mL	5,500円 (税別)	
承認番号	21600BZZ00150000		

リライン材

表面滑沢材  
接着剤

表面滑沢材

## コートライナー 光重合型 (表面滑沢材 兼 接着材) PAT.

管理医療機器  
歯科レジン系補綴物表面滑沢硬化材

### アクリル系軟質リライン材の耐久性向上に



光重合型の“コンフォートナー”に用いられる軟質リライン材専用の表面滑沢材です。光重合で強固な膜をつくりますので、“酵素入りポリドント” (アース製薬) が使用でき、耐久性が大幅に向上します。

セット内容	・コートライナー 20mL	・筆洗うすめ液 10mL
	・オキシバリアー 25mL	・オキシバリアー用ブラシ 15本
	・小分け用カップ	・オキシバリアー用スポイト(中)
	・筆洗用スポイト(小)	
セット価格	5,300円 (税別)	
単品別売	・オキシバリアー25mL	1,500円 (税別)
	・オキシバリアー用ブラシ	500円 (税別)
承認番号	21600BZZ00149000	

表面滑沢材

## ニュートップコート (表面滑沢材 兼 接着材)

管理医療機器  
歯科レジン系補綴物表面滑沢硬化材

### 軟質リライン材の表面荒れ防止に



アクリル系軟質リライン材専用で、塗るだけで面が滑沢になり、耐久性が大幅に向上します。また、床との接着材としても用いられます。

セット価格	・ニュートップコート 80mL (取替ブラシ 40本、筆洗うすめ液、カップ 40個 他)	11,500円 (税別)
	・ニュートップコート 30mL (取替ブラシ 12本、筆洗うすめ液 他)	4,800円 (税別)
	・ニュートップコート 6mL	1,800円 (税別)
単品別売	・取替用ブラシ 50本入	1,600円
	・筆洗うすめ液 10mL	400円 (税別)
承認番号	21000BZZ00591000 (税別)	



咬合面  
再構築用  
レジン

## バイトアップ 光重合型 (咬合面再構築用レジン) PAT.

管理医療機器  
義歯床補修用レジン

即重レジンが+光重合で、硬さ50%アップ↑



レジン歯(硬質含む)咬合面の再構築や、歯周補綴やインプラントの上部構造など、耐久性が求められるプロビジョナルなレストレーションに好適です。塗るだけでツヤのでる表面滑沢材つき。

セット内容	・粉80g ・液60mL ・表面滑沢材10mL ・シリンジ2本	
色調	アイボリー	
セット価格	11,000円(税別)	
単品	・粉80g	5,000円(税別)
	・液60mL	3,500円(税別)
	・表面滑沢材10mL	1,700円(税別)
	・専用シリンジ2本入	1,000円(税別)
承認番号	21000BZZ00544000	

治療用  
義歯

## レプリカ (複製義歯・義歯トレー用レジン)

管理医療機器  
義歯床補修用レジン

複製義歯がチェアサイドで簡単に製作できる



レジンの収縮を抑えて適合精度を上げ、且つ、滑沢な面が得られる複製義歯専用の特殊レジンです。

専用のフラスコとアルギン酸印象材で簡単に複製義歯が作れます。

セット内容	・歯冠用粉60g ・床用粉200g ・液200mL	
	・表面滑沢材30mL	
セット価格	15,800円(専用フラスコ付セット 24,300円)(税別)	
単品	・歯冠用粉 60g	2,900円(税別)
	・床用粉 200g	7,400円(税別)
	・液 200mL	3,300円(税別)
	・表面滑沢材30mL	2,200円(税別)
	・フラスコ	9,800円(税別)
承認番号	20300BZZ00403000	

仮床・  
トレー用  
レジン

## フィットベース (仮床・トレー用レジン)

一般医療機器  
歯科印象トレー用レジン

精密適合のため、本義歯の吸着性が事前に判定できる



特殊成分配合により、重合収縮が少ない仮床専用の即時重合レジンで、このレジンで製作した仮床は模型への適合が良いため、本義歯の吸着状態の予後判定ができます。

色調	ピンク	
価格	・粉250g	3,900円(税別)
	・液200mL	3,000円(税別)
届出番号	27B2X00004000001	



咬合採得

## バイトレジン (咬合採得用レジン)

管理医療機器  
歯科用レジン系印象材

片側遊離端義歯の咬合採得用の仮床代わりに



低刺激、低発熱で硬化がスピーディな咬合採得専用のレジンです。シリンジで咬合面に簡単に盛り上げられ、アンダーカット部にも使用できます。特に、遊離端義歯の仮床の代用として、レジンの一塊で咬合採得ができます。

セット内容	・粉200g ・液100mL ・シリンジ2本
色調	クリアー
セット価格	7,800円 (税別)
単品	・粉200g 5,500円 (税別) ・液100mL 1,850円 (税別) ・シリンジ2本 1,000円 (税別)
承認番号	20500BZZ00088000

汎用  
レジン

## テックレジン

管理医療機器  
アクリル系歯冠用レジン

熱収縮が少ないので、適合精度が良い



速硬性で、且つ、削りやすい適度な硬さのため、スピーディな診療が行えます。

セット内容	・粉100g ・液100mL
色調	アイボリー
セット価格	6,900円 (税別)
単品	・粉 100g 4,150円 (税別) ・徳用粉250g 8,300円 (税別) ・液 100mL 2,750円 (税別) ・徳用液300mL 6,600円 (税別)
承認番号	20600BZZ01192000

汎用  
レジン

## スナップ

管理医療機器  
アクリル系歯冠用レジン

即重レジンのコストダウンに全面的に協力!



歯冠色、歯齦色の2種類からなる速硬性即時重合レジンで、テンポラリークラウン、義歯の修理などにご使用いただけます。

セット内容	・粉100g ・液80g
色調	ピンク、ライブピンク、アイボリー
セット価格	5,180円 (税別)
単品	・粉100g 3,350円 (税別) ・粉250g 7,100円 (税別) ・液 80g 1,830円 (税別) ・液300g 3,300円 (税別)
承認番号	16200BZZ01505000

汎用  
レジン

## スキップ

管理医療機器  
義歯床補修用レジン

少ない発熱で素早い硬化を実現



素早い硬化が実現されました。環境温度の影響を受けにくく、冬期でも短時間で硬化します。

セット内容	・粉100g・液100mL
色調	ピンク、ライブピンク、アイボリー
セット価格	6,800円 (税別)
単品	・粉100g 4,160円 (税別) ・液100mL 2,640円 (税別)
承認番号	20200BZZ01550000

その他  
義歯関連

咬合採得

各種即重  
レジン

仮封用  
レジン

## ポリシール (仮封用レジン)

管理医療機器  
歯科用高分子系仮封材料

外れやすいインレー窩洞の仮封に好適



特長

- 硬化が速く、操作完了も早い。
- 手指へのべたつきが少ない。
- 歯面封鎖性が良くて、外しやすい。
- マッチしやすい歯冠色。

セット内容	・粉50g ・液50mL
色調	アイボリー
セット価格	3,900円 (税別)
単品	・粉 100g 4,800円(税別) ・液 100mL 3,500円(税別)
承認番号	20400BZZ00024000

鋳造可能  
即重  
レジン

## レジナップ

管理医療機器  
アクリル系歯冠用レジン

テンポラリークラウン用レジンで、且つ、鋳造が可能



鋳造が可能なテック用レジンのため、以下のことが可能となりました。

- メタルボンド冠など、脱落ボストクラウンの歯冠部に適合させたポストの再製。
- 金属床のクラスプに適合させた鉤歯鋳造冠の再製。

セット内容	・粉100g ・液100mL
色調	アイボリー
セット価格	8,290円 (税別)
単品	・粉100g 4,860円 (税別) ・液100mL 4,290円 (税別)
承認番号	16200BZZ01506000

バイト  
プレート用  
レジン

## マルチガード (多目的用即時重合軟性レジン)

管理医療機器  
歯科用長期的使用咬合スプリント向け材料

バイトプレートが直接口腔内で作れる



アンダーカットがあっても適度の軟性があるため、石膏模型がなくても、直接、口腔内でバイトプレートを作製することができます。

セット内容	・粉120g ・液60mL ・ニュートップコート6mL ・シリンジ2本
色調	アイボリー
セット価格	9,800円 (税別)
単品	・粉 120g 4,800円 (税別) ・液 60mL 4,200円 (税別)
承認番号	20600BZZ00530000

簡易集塵  
BOX

## ダストシューター

より安全で衛生的な在宅診療に




粉塵をビニール袋に集めてそのまま廃棄できます。  
切削時の飛散防止。  
粉塵の吸い込みや白衣への付着防止。

- [ 寸法 ]  
折りたたみ時 : W485×D230×H10mm  
組立時 : W230×D205×H140mm
- ダストシューター  
本体、取替用ウレタン板 2枚、  
ビニール袋 (45号) 20枚、専用輪ゴム 1つ  
3,980円 (税別)
  - 取替用ウレタン板 2枚 1,000円 (税別)

感染対策

## インスツルメント フォルテ ドイツ衛生微生物学協会(DGHM)認定品

各種インスツルメントの除菌に

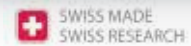

- 細菌芽胞を除く、ほぼすべてのウィルスの除去に使用できます。
- 予備洗浄が必要なく、汚れの除去とウィルスの除去が同時に行えます。
- グルタルアルデヒドと違い、刺激臭がありません。
- 廃棄の際は、そのまま流しに捨てることができます。
- 希釈濃度が低いため、低コスト。⇒希釈濃度 2 ~ 0.5% (50 倍 ~ 200 倍希釈)

[用途]

各種インスツルメント、外科用器具、インプラント用器具、根管治療用器具、印象用トレーなどの洗浄・除菌


希釈濃度	原液+水	浸漬時間
2.0%	20mL+980mL	15分
1.0%	10mL+990mL	30分
0.5%	5mL+995mL	60分

1 L : 4,900円 (税別)  
※一部のシリコンゴム製品は変色する場合があります。

感染対策

## サーフェイス クイック (スプレータイプ) ドイツ衛生微生物学協会(DGHM)認定品

ユニット等、1分間で急速除菌

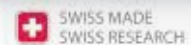

- ユニット、タービン、器具等の表面を急速除菌。
- ※天然木や、アクリル樹脂、アルミニウム塗装面、アルコールに敏感な材料には使用しないでください。
- エンベロープを持たない“ノロウイルス”の除去にも使用できます。→2分で除去
- ※従来、ノロウイルスには次亜塩素酸系の消毒液を使用し、器具の腐食の原因となっておりました。

[用途]

治療用ユニット、チェアー、タービン、コントラ、レントゲン装置、アルコールの影響を受けない医療機器などの表面除菌・清掃。

[主成分]


1-プロパノール、塩化ジデシルジメチルアンモニウム  
1L : 3,900円 (税別)

各種  
即重レジ

感染対策

## サーフェイス クイックゼロ (スプレータイプ) ドイツ衛生微生物学協会(DGHM)認定品

アルコール、エアゾル非含有

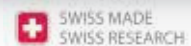

- ユニット、チェアーの除菌に(すべての機器に使用できます。)
- 香りも少なく気になりません。

[用途]

治療用ユニット、チェアー、タービン、コントラ、レントゲン装置、医療機器などの表面除菌・清掃

[主成分]

第4級アンモニウム化合物、ベンジル-C12-C16-アルキルジメチル、塩化ジデシルメチルアンモニウム  
5L : 15,600円 (税別)

感染対策

口臭対策


## オーラルメイト® PAT.

口臭予防には舌清掃が効果的



極細ブラシが効果的に舌ヒダ内を清掃します。

色 調 白のみ  
 医院価格 410円(税別) /1本  
 患者価格 480円(税別) /1本  
 最少発注単位 6本入 /箱

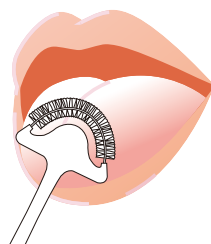

口臭対策

## タングメイト® PAT.

舌ブラシの定番商品



舌乳頭間に入りやすい極細ナイロンフィラメントのため、口臭の原因となっている食物残渣や剥離上皮などを効率よく掻き出します。また、ヘッド部分が小さく薄いために舌の奥まで届きやすく、嘔吐反射を防ぎます。携帯に便利なブラシケース付もあります。

色 調	白、ピンク	ケース付
医院価格	410円(税別) /1本	白のみ 485円(税別) /1本
患者価格	480円(税別) /1本	570円(税別) /1本
最少発注単位	6本入/箱	6本入/箱

口臭対策

## フレッシュメイトソフト® PAT.

要介護者向けに開発された舌ブラシ



日本・米国特許製品で、掻き取った舌苔をカバー内面に蓄えて漏らさず、誤嚥を防ぎます。また、長いネックとワイヤーの弾性、及びフィラメントの3つの弾性で舌を傷めません。ヘッド部分が長いいため、舌苔の溜まりやすい舌の奥まで届きやすくなっています。

医院価格 660円(税別) /1本  
 患者価格 780円(税別) /1本  
 最少発注単位 6本入/箱

口臭対策

## E-ブレス スプレー® (口臭予防洗口剤 医薬部外品)


効果は歯科大学で実証済み



甘味とミント味のする爽やかな口臭予防剤です。歯科大学での試験で高い口臭抑制効果が確認されました。舌ブラシと併用すれば、さらに効果的です。

スプレータイプ 30mL  
 医院価格 935円(税別)/1本  
 患者価格 1,100円(税別)/1本  
 最少発注単位 6本入/箱

E-ブレス スプレーの口臭抑制効果  
 (スプレー使用前の口臭を100%とした場合)

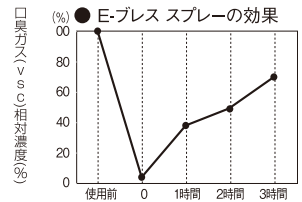

日本歯科大学 生命歯学部 衛生学講座提供

口臭対策


## E-ブレス ジェル® (口臭予防剤 舌ブラシ専用ジェル)

舌ブラシと併用で口臭予防効果アップ



口臭の原因となる揮発性硫黄化合物の発生を抑制する成分を配合しています。

ジェルタイプ 30g  
 医院価格 730円(税別)/1本  
 患者価格 870円(税別)/1本  
 最少発注単位 6本入/箱

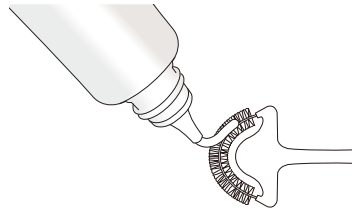

カンジダ  
 培地

## カンジダ ディテクター (カンジダ簡易検出培地)

口腔内の汚れ度や、口腔ケアの改善度の判定が数値化できる




口腔内の汚れ度や、口腔清掃前後の清掃効果の判定にこのカンジダ簡易検出培地を指標として数値化できます。恒温槽での色変化のみによる従来の判定では、決められた時間内に測定しないと経時的に変化するという欠点がありましたが、本品は恒温槽で色変化とコロニー数の両方で判定することができ、患者への視覚的なアピール度と信頼性が増します。なお、コロニー数による判定のみ、常温でも3~5日で判定することができます。

●セット内容

寒天培地 10本、滅菌綿棒 10本、ネームラベル 10枚、カンジダ菌検査結果シート 10枚

●医院価格 4,300円(税別)/1セット

C.albicansの菌数  
 及び色変化と判定

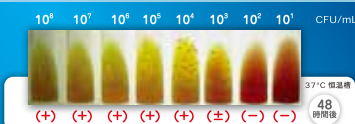

口腔衛生・  
 介護関連  
 商品

義歯の洗浄

## デントクリーン (着色除去用義歯洗浄剤)

タバコのヤニなどの頑固な汚れの漂白と除菌に



超音波洗浄専用で、5～10分程度で頑固な着色が驚くほどよく落ちます。軟質リライン材にも使用でき、義歯臭がとれ除菌もできます。

※有毒ガスが発生して危険ですので、酸性の洗浄剤(ストーンメルト)と混合しないでください。

内 容  
1.2L (2倍に薄めて使用)  
価 格  
4,300円 (税別)



義歯の洗浄

## ストーンメルト (歯石除去用義歯洗浄剤)


頑固な歯石も超音波洗浄で簡単に除去



超音波洗浄専用で、5～10分程度の洗浄で頑固な歯石を除去します。超音波洗浄後は、柔らかくなった歯石を硬めの歯ブラシでこすり落としてください。

※有毒ガスが発生して危険ですので、塩素系の洗浄剤(デントクリーン)とは混合しないでください。

内 容  
1.8L (原液を使用)  
価 格  
3,900円 (税別)

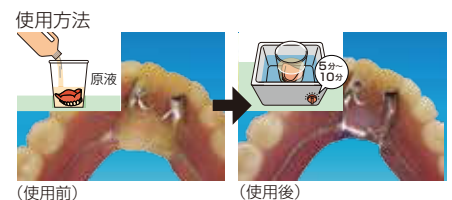

義歯の洗浄  
(ブラシ用)

## ストーンメルト ジェル (歯石除去用義歯洗浄剤)

義歯表面の歯石を取り除きます



義歯や義歯用ブラシに本剤を塗布し、歯石が溶ける1～2分間程度放置したあとブラシで歯石をこすり落とします。本剤はクラスプやレジン義歯床を侵さず、表面のヌメリをとり、除菌にもなります。歯石の多いケースには、何度もこれを繰り返して徐々に歯石を取り除きます。

価 格 2,480円(税別)/200mL



義歯の洗浄

## クリーンソフト

軟質専用の義歯洗浄剤で、軟質リライン材の耐久性が大幅に向上

アクリル系軟質リライン材専用の義歯洗浄剤です。  
義歯洗浄力は他社市販酵素系の数十倍も強力です。  
(広島大学歯学部浜田教室発表)

医院価格 1,150円(税別) / 90g  
患者価格 1,280円(税別) / 90g  
(約3ヶ月分)  
最少発注単位 6個入/箱




義歯の洗浄

## デンチャープラーク チェッカー デンチャープラーク染色剤(泡タイプ) PAT.P

誤嚥性肺炎の予防に!デンチャープラークの取り残しなど、義歯洗浄方法の指導に

- デンチャープラークや破折の発見が容易
- きめの細かい泡で義歯全体に広げやすい
- 泡状で垂れにくいので、周囲を汚しにくい
- 義歯の洗浄効果もあります

医院価格 2,110円(税別) / 300mL  
患者価格 2,480円(税別) / 300mL

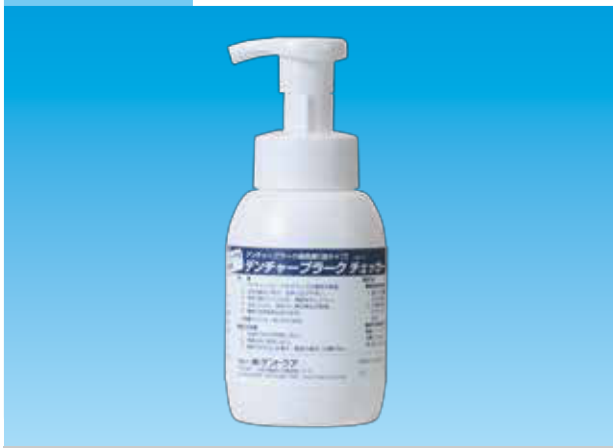

- 1 泡だし口に義歯を近づけ、1～2プッシュして、ゴム手袋をした手指、またはスポンジブラシで義歯全体に塗り広げます。
- 2 10秒ほど経ってから、軽く水で洗い流してください。デンチャープラークの付着箇所や、義歯のクラックが判ります。

義歯の洗浄

## 入れ歯ケース

義歯の洗浄や保管に

水漏れしない密封パックで、義歯の乾燥を予防します。また、容器の底の中央部に義歯洗浄剤を置くと、洗浄効果が得られます。

色 調 白  
医院価格 430円(税別) / 1個  
患者価格 500円(税別) / 1個



口腔衛生  
介護関連商品

## ウエットエイド ヒアルロン酸含有（口腔保湿剤） PAT.P

ドライマウス

### 要介護者向けの口腔保湿剤



ドライマウスや乾燥した唇には湿潤用ジェルとして、要介護者の乾燥痰は、垂れない泡状にして軟化除去できます。デンチャージェルよりも粘性が低くなっています。

無香料、無着色でアルコールフリーです。心地よい甘みが特長です。

- 100mL 医院価格 1,150円（税別）  
患者価格 1,430円（税別）  
最少発注単位 6本入/箱
- 25mL 医院価格 300円（税別）  
患者価格 380円（税別）  
最少発注単位 6本入/箱

## デンチャージェル（オーラルメイトD）（口腔保湿剤）

ドライマウス

### 義歯装着者に適した口腔保湿剤



口腔粘膜の保湿剤ですが、同時に従来品よりも粘性があるため、義歯装着者にも利用できるようになっております。

携帯しやすい小袋タイプもあります。

- チューブタイプ 45g/1本  
医院価格 1,120円（税別）  
患者価格 1,400円（税別）  
最少発注単位 6本入/箱
- 小袋タイプ 2.5g×30袋入/1箱  
医院価格 2,100円（税別）  
患者価格 2,500円（税別）

## リップワイダー<sup>®</sup>（口唇牽引器具） PAT.

開口保持具

### 写真撮影やホワイトニングなどに



舌押さえのついた口唇牽引器具です。

特長

- バイトプレート付きで、開口状態が一定に保持されます。
- 舌押さえ付きで、舌が操作を妨げません。
- 上下どちらでも使えます。
- オートクレーブ滅菌ができます。  
（耐熱温度 134℃程度まで）

医院価格 900円（税別）/2個入



装着例



開口保持具

## バイトロックⅡ (口腔ケア用 開口補助・保持具) PAT.

口腔ケアを行う際に、開口を誘導しながら保持することができます。



- シリコン製で弾力があり歯に優しい
- ネジ山で開口度が調整でき、外れにくい
- 指先やペンライトを入れて操作が可能
- オートクレープや煮沸消毒が可能


サイズ：全長：108mm 突起部：長さ 42mm

穴部：内径 21mm

医院価格：2,300円(税別) 患者価格：2,700円(税別)

色調：オレンジ

ブルー

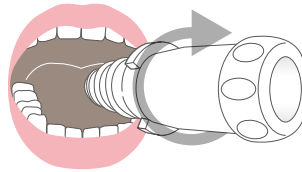

使用例

※弊社の口腔保湿剤“ウエットエイド”を先端部に塗布しますと挿入しやすくなります。

口腔内  
清掃用具

## 介護粘膜ブラシ プロ PAT.

食物残渣を効果的に受け止めるネットブラシ



ブラシ中央部分のフィラメントが絡まってネット状となり(特許)、掻きとった食物残渣などを捕獲するため、誤嚥することなく外に取り出せます。また、吸唾管の取り付けも可能です。

医院価格 560円(税別) /1本

患者価格 660円(税別) /1本

最少発注単位 6本入/箱

口腔内  
清掃用具

## 介護ケアセット

要介護者の口腔ケアは歯ブラシだけでは不十分



セット内容

- お口に溜まった食物残渣の除去用に介護粘膜ブラシプロ1本。
- 口臭除去や誤嚥性肺炎予防のためのフレッシュメイトソフト1本。
- 摂食嚥下リハ用のアイスマッサージ用にアイシング綿棒10本。

医院価格 1,430円(税別)

患者価格 1,680円(税別)

口腔衛生  
介護関連商品

口腔内  
清掃用具

## 口腔ケア スポンジブラシ

口腔保湿剤の塗布や口腔清掃などに



個別包装で衛生的な紙軸の口腔清掃用スポンジブラシで、お口に優しく安心してご使用いただけます。弊社“ウエットエイド”（口腔保湿剤）の塗布用としてお使いください。

サイズ Mサイズ

医院価格 1,700円（税別）/50本入

患者価格 1,900円（税別）/50本入

口腔内  
清掃用具

## アイシング綿棒

摂食・嚥下リハビリのアイスマッサージ用に



個別包装で衛生的な凸凹加工の綿体なので、細かい汚れもしっかりキャッチします。

また、全長が約 15cm と長いので、お口の奥まで届きます。

医院価格 1,020円（税別）/50本入

患者価格 1,200円（税別）/50本入

口腔内  
清掃用具

## 吸引歯ブラシ

片手で吸引と口腔清掃できる歯ブラシ



スイッチで吸引オン・オフ簡単切り替え。

先端部と清掃面の両方に吸引口があるので清掃しながらしっかり吸引できます。

医院価格：220円（税別）/1本

患者価格：250円（税別）/1本

最少発注単位 20本/箱

歯間用  
清掃用具

## パーシャルメイト PAT.

### 遊離端義歯の鉤歯遠心側歯頸部の清掃に



遊離端義歯の鉤歯を、歯頸部う蝕から守るブラシです。部分床義歯を取り外して、鉤歯遠心側歯頸部にブラシをあてがい、水平方向に左右に動かして歯間清掃します。インプラントアバットメントの清掃にも好適です。

医院価格 490円（税別）/1本

患者価格 580円（税別）/1本

最少発注単位 6本入/箱

デンタル  
フロス

## フロスエイド®プロ

### 前歯・臼歯部両用のテフロン系フロス付ホルダー



奥まで届くコンパクトサイズで、フロスの使用量が少なく経済的。テフロン系フロス(材質/PTFE)は、狭い歯間部でも切れずに清掃できます。滑りが良くて、歯肉に優しいフロスです。

テフロン系フロス 25m 付。

医院価格 630円（税別）/1個

患者価格 740円（税別）/1個

最少発注単位 6個入/箱

デンタル  
フロス

## デントフロス プロ

### テフロン系のフロス(25m)で狭い歯間部にも入りやすく、切れにくい



従来品とは材質が異なるテフロン系フロス(材質/PTFE 25m)のため、デンタルフロスの性能が向上しています。ノンワックスですが、滑りが良くて歯肉に優しく、ミントの香りがお口を爽やかにします。

医院価格 320円（税別）/1個

患者価格 380円（税別）/1個

最少発注単位 12個入/箱

口腔衛生  
介護関連商品

(お問合せ) フリーダイヤル**0120-267-720**

**亀水化学工業株式会社**

大阪府寝屋川市豊里町17-16 〒572-0071  
TEL 072-826-7720 FAX 072-826-1299  
<http://kamemizu.co.jp/>  
E-mail:info@kamemizu.co.jp

**株式会社 デントケア**

TEL / 072-828-8590  
<http://dent-care.net/>  
E-mail:info@dent-care.net

※価格は全て税別表示です。価格は予告なく変更することがあります。 2017.07

**KAMEMIZU CHEM.IND.CO.,LTD.**