

Dentistry Products 2018

Giving a hand to oral health.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

歯の健康を支えるパートナー

クルツァー社は三井化学グループの一員であり、ドイツのハーナウに本社を置く、世界有数の歯科企業の1つです。皆さまに信頼していただけるパートナーとして、審美、保存、補綴、デジタル等、歯科医療業界の様々な分野へサービスを提供しています。

その日本法人であるクルツァージャパン株式会社は、第一線で活躍される歯科医師、歯科技工士、歯科衛生士の皆さま方に、さらにご満足いただけるよう、多様なニーズを適切にとらえ、素早く柔軟に、製品やサービスをお届けすることで歯科業界の発展に貢献していきます。

2017年7月、ヘレウスクルツァージャパン株式会社から社名を変更し、クルツァージャパン株式会社になりました。グローバル企業として更なる進化を目指します。

歯科技工用

Laboratory Products

歯科医療技術の高度化にともない、歯科技工士の皆さまは常に高品質な補綴物を提供することが求められています。補綴物の質は「人」「機器」「材料」の3つの要因によって大きく影響されると考え、技工士の皆さまが効果的かつシステムチックに技工作業がおこなえるよう開発努力を重ね、さまざまなサービスの提供を図っております。



CAD/CAMシステム

Digital Dentistry Products

デジタル市場の拡大にあわせ、皆さまのニーズにいち早くお応えすべく2015年に「高品質・コンパクト・低価格」をコンセプトにしたCAD/CAMシステムを開発し、2017年には待望の3Dプリンターを発売。今後も更なるラインナップの充実を予定しております。



歯科医療用

Dentistry Products

歯科医師の皆さまからいただく貴重な臨床でのアイデアやご意見を何よりも大切に、印象材、修復材、X線フィルム、注射器などの高品質な製品を輸入・販売しています。さらに、長年にわたって豊富な販売実績を誇るディスプレイアサルト注射針をはじめ歯間ブラシなど、日本市場向けの製品を開発し、さまざまな歯科医療製品を手がけています。



カーラ I-Bridge (CAD/CAM技工サービス)

CAD/CAM Lab Work Services

模型やデジタルデータをお預かりし、ドイツのミリングセンターで製作する高品質な技工サービスをご提供しています。

詳しくはクルツァージャパン株式会社 **caraセンター** (TEL:03-5803-2153) にお問合せください。



INDEX

1 印象材

アルギン酸塩印象材	3
印象用石膏	3
付加型シリコーン印象材	4.5
咬合採得用付加型シリコーン印象材	6
シリコーン印象材関連製品	5.6

2 知覚過敏抑制材

知覚過敏抑制材	7
---------	---

3 修復材

ボンディング材	8
コンポジットレジン	9
フロアブルコンポジットレジン	10
LED可視光線照射器	11

4 インジェクションシステム

歯科用注射針	12
歯科用注射器	12

5 X線診断関連

歯科用 線フィルム	13
X線フィルム用アクセサリ	13

6 予防関連

歯間ブラシ	14
歯ブラシ	15
歯垢染色剤	15
歯科用歯面研磨材	15
マスク	16
洗浄剤	17
小器具収納・保管ケース	17

※仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

1 印象材

アルギン酸塩印象材

アルギノプラスト® クリーム

- 5μmの高い細線再現性。シリコン印象材と同等の精度を実現しました。
- 短時間で簡単にダマなくクリーミーに練和でき、口腔内での作業時間に余裕がもてます。
- 高い引裂き強さで印象撤去時にマージン部分にダメージがおよぶのを防ぎ、再印象のリスクを低減させます。
- ダストフリータイプで粉の飛び散りが少なく、周囲をきれいに保てます。
- 練和後の印象面が滑らかで、きれいな印象が採得できます。



アルギノプラスト クリーム ファスト/ノーマル

- 内容：5kg (500g×10袋)、計量スプーン×1本、カップ×1個

販売名 アルギノプラスト クリーム ファスト
 一般的名称 歯科用アルギン酸塩印象材
 分類 管理医療機器
 認証番号 229ABBZX00074000
 製品コード：50114

販売名 アルギノプラスト クリーム ノーマル
 一般的名称 歯科用アルギン酸塩印象材
 分類 管理医療機器
 認証番号 229ABBZX00075000
 製品コード：50113

アルギノプラスト® EM

- 水とのなじみが良く軽いタッチで容易に練和ができるイージーミックスな印象材です。
- アンダーカットのある石膏模型でも破折しにくく、また寒天印象材との接着性に優れているため、精密な印象が採得できます。
- さわやかなミントの風味により、患者さんの不快感を軽減します。



アルギノプラスト EM ファスト/ノーマル

- 内容：5kg (500g×10袋)、計量スプーン×1本、カップ×1個

販売名 アルギノプラスト EM ファスト
 一般的名称 歯科用アルギン酸塩印象材
 分類 管理医療機器
 認証番号 221ABBZX00017000
 製品コード：50107

販売名 アルギノプラスト EM ノーマル
 一般的名称 歯科用アルギン酸塩印象材
 分類 管理医療機器
 認証番号 221ABBZX00016000
 製品コード：50103

アルギノプラスト®

- 操作時間に余裕があり、口腔内ではシャープに硬化します
- ミクロファイン粒子とダストフリータイプのため練和が簡単です。
- 印象面肌が滑沢で、模型の面荒れをおこしにくい特性を有しています。



アルギノプラスト ファスト/ノーマル

- 内容：5kg (500g×10袋)、計量スプーン×1本、カップ×1個

販売名 アルギノプラスト ファスト
 一般的名称 歯科用アルギン酸塩印象材
 分類 管理医療機器
 認証番号 221ABBZX00015000
 製品コード：50102

販売名 アルギノプラスト ノーマル
 一般的名称 歯科用アルギン酸塩印象材
 分類 管理医療機器
 認証番号 221ABBZX00014000
 製品コード：50101

商品名		練和時間 分・秒	操作時間* 分・秒	初期硬化時間 分・秒	口腔内保持時間 分・秒(約)	色調	製品コード
アルギノプラスト クリーム	ノーマル	0'30"	2'00"	2'00"~2'30"	1'30"	ピンク	50113
	ファスト	0'20"	1'20"	1'30"~2'10"	1'00"	青	50114
アルギノプラスト EM	ノーマル	0'30"	1'45"	2'00"~2'30"	2'00"	ピンク	50103
	ファスト	0'30"	1'10"	1'15"~1'45"	1'00"	青	50107
アルギノプラスト	ノーマル	0'30"	2'00"	2'30"~2'55"	1'30"	黄	50101
	ファスト	0'30"	1'15"	1'30"~2'00"	1'00"	オレンジ	50102

※操作時間* 23℃の場合。高温時は早く、低温時は遅くなります。

印象用石膏

キサントノ®

無歯顎の無圧印象や、ゴシックアーチトレーサーのコア印象などに適しています。

- 優れた流動性と速硬性をそなえています。
- ココアの芳香により、患者さんの不快感を軽減します。
- 硬化膨張がほとんどなく、また軽圧で抑制できるため、ろう着用コアなど精度が要求される作業に適しています。



- 内容：4kg

販売名 キサントノ
 一般的名称 歯科印象用石膏
 分類 一般医療機器
 届出番号 2781X00060000037
 製品コード：59002

付加型シリコン印象材

- チューブ、ファストセット、レギュラーセットの製品分類ごとに操作時間及び口腔内保持時間が統一されているので、テクニカルエラーを低減します。
- 4タイプの粘稠度の他に練和方法(手練/自動)と硬化時間(ファスト/レギュラー)に分類され、総目品12種より簡単に必要な製品の選択ができます。
- 親水性がありながら、吸水性を排除した"ハイドロアクティブ"により面精度に優れた作業模型の製作が可能です。
- 硬化反応を安定させるため、プラチナ触媒を従来比の4倍配合しています。

販売名 プロビールノボ パテ
 一般的名称 歯科用シリコン印象材
 分類 管理医療機器
 認証番号 222ABBZX00012000

販売名 プロビールノボ パテソフト
 一般的名称 歯科用シリコン印象材
 分類 管理医療機器
 認証番号 222ABBZX00014000

販売名 プロビールノボ チューブ
 一般的名称 歯科用シリコン印象材
 分類 管理医療機器
 認証番号 222ABBZX00013000

販売名 プロビールノボ カートリッジ
 一般的名称 歯科用シリコン印象材(歯科用練成器具)
 分類 管理医療機器
 認証番号 222ABBZX00015000

- プロビール®ノボ パテ/パテソフト**
 パテタイプ(超高粘度)
- プロビールノボ パテ ファストセット**
 ●内容:250ml×2個(ベース・キャタリスト)、計量スプーン×2本
 製品コード:51178
- プロビールノボ パテ レギュラーセット**
 ●内容:250ml×2個(ベース・キャタリスト)、計量スプーン×2本
 製品コード:51179
- プロビールノボ パテソフト ファストセット**
 ●内容:250ml×2個(ベース・キャタリスト)、計量スプーン×2本
 製品コード:51180
- プロビールノボ パテソフト レギュラーセット**
 ●内容:250ml×2個(ベース・キャタリスト)、計量スプーン×2本
 製品コード:51181



プロビール®ノボ ミディアム

- インジェクションタイプ(中粘度)
- プロビールノボ ミディアム チューブ**
 ●内容:140ml×2本(ベース・キャタリスト)、練板紙×1冊
 製品コード:51171
- プロビールノボ ミディアム C.D.2 ファストセット**
 ●内容:50ml×2本(ベース・キャタリスト一体型カートリッジ)
 ミキシングチップイエロー×12本
 製品コード:51242
- プロビールノボ ミディアム C.D.2 レギュラーセット**
 ●内容:50ml×2本(ベース・キャタリスト一体型カートリッジ)
 ミキシングチップイエロー×12本
 製品コード:51243



プロビール®ノボ モノフェーズ

- モノフェーズタイプ(中粘度)
- プロビールノボ モノフェーズ チューブ**
 ●内容:140ml×2本(ベース・キャタリスト)、練板紙×1冊
 製品コード:51172
- プロビールノボ モノフェーズ C.D.2 ファストセット**
 ●内容:50ml×2本(ベース・キャタリスト一体型カートリッジ)
 ミキシングチップグリーン×6本
 製品コード:51244
- プロビールノボ モノフェーズ C.D.2 レギュラーセット**
 ●内容:50ml×2本(ベース・キャタリスト一体型カートリッジ)
 ミキシングチップグリーン×6本
 製品コード:51245



プロビール®ノボ ライト

- ウォッシュタイプ(低粘度)
- プロビールノボ ライト チューブ**
 ●内容:140ml×2本(ベース・キャタリスト)、練板紙×1冊
 製品コード:51170
- プロビールノボ ライト C.D.2 ファストセット**
 ●内容:50ml×2本(ベース・キャタリスト一体型カートリッジ)
 ミキシングチップイエロー×12本
 製品コード:51241



商品名	タイプ	粘稠度	練和時間 分・秒	操作時間* 分・秒	口腔内保持時間 分・秒(約)	対応チップ		製品コード	
						ミキシングチップ	口腔内チップ		
プロビールノボ	パテ	超高粘度	ファスト	0'30"	1'30"	2'30"	—	—	51173
			レギュラー	0'30"	2'00"	3'30"	—	—	51179
		パテソフト	ファスト	0'30"	1'30"	2'30"	—	—	51130
			レギュラー	0'30"	2'00"	3'30"	—	—	51131
	モノフェーズ	中粘度	チューブ	0'30"	2'30"	3'30"	—	—	51172
			C.D.2	ファスト	自動	1'30"	2'30"	グリーン	ホワイト(大)
		レギュラー		自動	2'00"	3'30"	グリーン	ホワイト(大)	51245
		ミディアム	中粘度	チューブ	0'30"	2'30"	3'30"	—	—
	C.D.2			ファスト	自動	1'30"	2'30"	イエロー	イエロー(小)
		レギュラー	自動	2'00"	3'30"	イエロー	イエロー(小)	51243	
	ライト	低粘度	チューブ	0'30"	2'30"	3'30"	—	—	51170
			C.D.2	ファスト	自動	1'30"	2'30"	イエロー	イエロー(小)

操作時間 23℃の場合。高温時は早く、低温時は遅くなります。

1 印象材

付加型シリコーン印象材

- ATSフォーミュラが37℃の口腔内温度に反応し、口腔内で圧接すると急速に硬化を開始します。
- 口腔内保持時間は常に2分30秒と一定で、操作時間は1分から2分30秒まで時間を自由に調整できます。
- 1次印象用としてパテタイプのイージーパテとCDタイプのヘビートレーがあり、2次印象用に粘性の違うモノフェーズとコレクトフローがあります。1次と2次の組み合わせで、各種印象法に使用できます。
- 親水性に優れ、湿潤下においても精密な印象採得が可能です。

フレキシタイム®イージーパテ



- 内容:300ml×2個(ベース・キャタリスト)
計量スプーン×2本
製品コード:51251

フレキシタイム®ヘビートレー



- 内容:50ml×2本(ベース・キャタリスト一体型カートリッジ)
ミキシングチップグリーン×6本
製品コード:51252

フレキシタイム®モノフェーズ



- 内容:50ml×2本(ベース・キャタリスト一体型カートリッジ)
ミキシングチップグリーン×6本
製品コード:51253

フレキシタイム®コレクトフロー



- 内容:50ml×2本(ベース・キャタリスト一体型カートリッジ)
ミキシングチップイエロー×12本
製品コード:51254

販売名 フレキシタイム
 一般的名称 歯科用シリコーン印象材(歯科用練成器具)
 分類 管理医療機器
 認証番号 222AGBZX00040000

商品名	粘度の区分	硬化時間 分・秒	操作時間* 分・秒	口腔内 保持時間 分・秒(約)	対応チップ		製品コード	
					ミキシングチップ	口腔内チップ		
フレキシタイム	イージーパテ	超高粘度	0'30"	2'30"	2'30"	—	—	51251
	ヘビートレー	高粘度	自動			グリーン	—	51252
	モノフェーズ	中粘度	自動			グリーン	ホワイト(大)	51253
	コレクトフロー	低粘度	自動			イエロー	イエロー(小)	51254

※操作時間* 23℃の場合。高温時は早く、低温時は遅くなります。

シリコーン印象材関連製品

ユニバーサルアドヘーシブ

付加型・縮合型シリコーン印象材のいずれにも使用できる接着材です。



- 内容:10ml×1本
製品コード:51131

ディスペンシングガン2



付加型シリコーン印象材カートリッジ用のガンです。(フレキシタイム/プロービルノボ/フレキシタイム/バイト/メモレッジ2/メモジル2)

- 販売名 ディスペンシングガン2
 一般的名称 歯科用練成器具
 分類 一般医療機器
 届出番号 27B1X00060000040
 製品コード:51235

練板紙

目盛りが印刷されていますので、印象材の計量に便利です。



- 内容:1冊
製品コード:51247

咬合採得用付加型シリコーン印象材

フレキシタイム® バイト

- 一般的な咬合採得に加え、パウダーフリーで対合歯のCAD/CAM スキャニングに対応しています。
- 最終硬度：ショアD40、ショアA94以上
- ホイップクリームのような流動性とチキソトロピー性を備えています。
- パーによるトリミング、余剰部のカットが容易です。



- 内容：50ml×2本（ベース・キャタリスト一体型カートリッジ）
ミキシングチップグリーン×12本
製品コード：51275

フレキシタイム バイトエコノパック

- 内容：フレキシタイム バイト（50ml×2本）×3セット
製品コード：51276

販売名 フレキシタイムバイト
 一般的名称 歯科咬合採得用材料
 分類 一般医療機器
 届出番号 2781X00060000051

メモジル®2

- ユニークな透明タイプ。
- 目で対合関係を確認できます。
- 光重合レジンのコアーに応用できます。



- 内容：50ml×2本（ベース・キャタリスト一体型カートリッジ）
ミキシングチップグリーン×12本
製品コード：51233

販売名 メモジル2
 一般的名称 歯科咬合採得用材料
 分類 一般医療機器
 届出番号 2781X00060000041

メモレック®2

- 鮮やかな色調で視認性の高い咬合採得材です。
- 弾性ひずみが少ないので、より正確な咬合器装着、高精度の咬合取得が可能です。
- チキソトロピー性により、口腔内でも垂れません。
- 口腔内保持時間1分のため、患者さんの不快感を軽減します。
- ナイフやパーで簡単にトリミングが可能です。



- 内容：50ml×2本（ベース・キャタリスト一体型カートリッジ）
ミキシングチップグリーン×12本
製品コード：51234

販売名 メモレック2
 一般的名称 歯科咬合採得用材料
 分類 一般医療機器
 届出番号 2781X00060000042

商品名	ショアA 硬度	緩和時間 分・秒	操作時間* 分・秒	口腔内 保持時間 分・秒(約)	対応チップ		製品コード	多包装
					ミキシングチップ	口腔内チップ		
メモジル2	72	自動	0'30"	1'00"	グリーン	バイトチップ	51233	
メモレック2	90	自動	0'30"	3'00"	グリーン	バイトチップ	51234	
フレキシタイムバイト	94以上	自動	0'30"	0'30"	グリーン	バイトチップ	51275	
							51276	エコノパック

操作時間 23℃の場合。高温時は早く、低温時は遅くなります。

ミキシング チップ グリーン

- 内容：48本
製品コード：51236



販売名 ミキシングチップ
 一般的名称 歯科用練成器具
 分類 一般医療機器
 届出番号 2781X00060000009

ミキシング チップ イエロー

- 内容：48本
製品コード：51246



口腔内用チップ ホワイト(大)

- 内容：96本
製品コード：51138



販売名 口腔内用チップ
 一般的名称 歯科用注入器具
 分類 一般医療機器
 届出番号 2781X00060000008

口腔内用チップ イエロー(小)

- 内容：96本
製品コード：51141



口腔内用チップ バイトチップ

- 内容：96本
製品コード：51209



2 知覚過敏抑制材

知覚過敏抑制材

1液性の知覚過敏抑制材です。

- 象牙細管に直接浸透します。
象牙細管を封鎖し、刺激経路を遮断、知覚過敏を抑制します。
- 接着阻害を起こしません。
- 少量塗布で経済的です。
- 光照射は不要です。
- 無着色のため、歯牙を変形させません。
- 保険適用(象牙質知覚過敏の処置)

販売名 グルーマ デイセンシタイザー
一般的名称 医薬品含有歯科用知覚過敏抑制材料
分類 高度管理医療機器
承認番号 22400BZX00133000

グルーマ® デイセンシタイザー



● 内容：5ml×1本
製品コード：45220

グルーマ® デイセンシタイザーキット



● 内容：グルーマデイセンシタイザー
5ml×1本
マイクロブラシ×100本
ペーパーパッド×1冊
製品コード：45224



マイクロブラシ

グルーマ デイセンシタイザー等の塗布用ディスポーザブルマイクロブラシです。

- ブラシが小型のため、塗布する材料のムダが少なく経済的です。
- 毛抜けが少なく、処置部を汚染しにくい構造になっています。

● 内容：100本
製品コード：B4004



ペーパーパッド

グルーマ デイセンシタイザー等の適量取り出しに使用します。



● 内容：2冊
製品コード：45233

3 修復材

ボンディング材

グルーマ® ボンドCA

齧蝕影響象牙質にも高い接着性を実現。

- 低粘度(ウォッシュタイプ)を採用することで非常に薄い被膜(3μm)を実現しました。
- 高い浸透性を持つグルーマボンドCAは健全象牙質のみならず、水分を多く含む齧蝕影響象牙質にもしっかりと浸透・硬化します。
- アクチスポンジ(親水性重合開始剤)の重合促進効果により、光重合を阻害する空気や水分が存在する歯質界面からもしっかりと重合・硬化し、良質な樹脂含浸層を形成します。



グルーマ ボンドCA アソートメント

- 内容:5ml ボトル×1本
アクチスポンジ 160粒
ティッシュ×5枚
製品コード: 45467

販売名 グルーマ ボンドCA
 一般的名称 歯科用象牙質接着材
 分類 管理医療機器
 認証番号 226AFBZX00062000



グルーマ ボンドCA バリューパック

- 内容:5ml ボトル×3本
アクチスポンジ 160粒×3箱
製品コード: 45468




グルーマ ボンドCA リキッド

- 内容:5ml ボトル×1本
製品コード: 45469



グルーマ ボンドCA アクチスポンジ

- 内容:160粒
製品コード: 45470

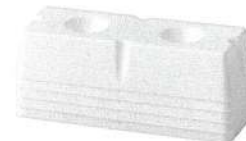

グルーマ ボンドCA ティッシュ

- 内容:30枚
製品コード: 45471

グルーマ® セルフエッチ

光重合型の1液性ボンディング材で、薄膜の接着層と塗布性能で審美修復が可能です。

- 適度な粘調度により、伸びが良く均一な塗布が可能です。
- 臼歯窩底部や起伏部の液だまり発生を防ぎます。
- アセトン配合によりマイルドなアプローチでも溶媒が蒸発し歯質に有効成分が浸透します。
- 薄膜の接着層により濁線が出にくく、特に前歯マージン部に対しても質の高い審美修復が可能です。
- 接着層が非常に薄いため、浅い窩洞であっても十分なコンポジットレジン充填スペースが得られます。
- 室温25℃以下での保管が可能です。
- 使用前にボトルを振る必要はありません。



グルーマ セルフエッチ リフィール

- 内容:4ml ボトル×1本
アプリケーションブラシ 50本
ティッシュ×1個
製品コード: 45437



グルーマ セルフエッチ バリューパック

- 内容:4ml ボトル×3本
製品コード: 45438

販売名 グルーマ セルフエッチ
 一般的名称 歯科用象牙質接着材
 分類 管理医療機器
 認証番号 224ABBZX00153000

3 修復材

コンポジットレジン

カリスマ クラシック

テクニックによらない色合わせを実現。

- 新しいフィラー技術によって、天然歯に良くなじみ、しかも天然歯同様に発色する性質を実現しました。
- 周りの色を反映し天然歯となじむ特性を有しているため、幅広いシェードに対応。日常臨床においてA1、A2、A3、A3.5、A4シェードでほぼ対応可能です。
- 光重合後の色調変化が少ないので、シェードマッチングが大変容易です。
- 滑らかに伸びて、コシがあるためしっかりと充填できます。

販売名 カリスマ クラシック
 一般的名称 歯科充填用コンポジットレジン
 分類 管理医療機器
 認証番号 226A8BZX00066000



カリスマ クラシック

- 内容: シリンジ(4g) × 1本
 シェード: 9色 (A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, OA2, OA3)



カリスマ クラシック シェードガイド

- 内容: 9シェード (A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, OA2, OA3)
 製品コード: 45452

	A1	A2	A3	A3.5	A4	B2	B3	OA2	OA3
カリスマ クラシック / 各4g 製品コード	45439	45440	45441	45442	45443	45445	45446	45448	45449

ビーナス®

審美修復に適したハイブリッドタイプのコンポジットレジンです。


- 2レイヤーを基調とし、積層充填することにより、天然歯のような自然な色調を再現することが可能です。
- 築盛しやすい物性で、前・白歯両方にご使用できます。
- HKA2.5、HKA5などのシェードを追加し、全26色を用意しています。
- 切端色として、T1(ブルー系)、T2(ニュートラル)、T3(イエロー系)で透明色を表現し、ブリーチング対応色としてSB1(暖色系)、SB2(寒色系)、SBO(オパール)を使用します。

販売名 ビーナス
 一般的名称 歯科充填用コンポジットレジン
 分類 管理医療機器
 認証番号 221A8BZX00018000



ビーナス シリンジ

- 内容: ビーナスシリンジ 4g × 1本
 エナメルシェード (A1, A2, HKA2.5, A3, A3.5, A4, HKA5, B1, B2, B3, C2, C3, C4, D2, D3, SB1)
 デンチンシェード (OA2, OA3, OA3.5, OB2, SBO)
 インサイザル (T1, T2)

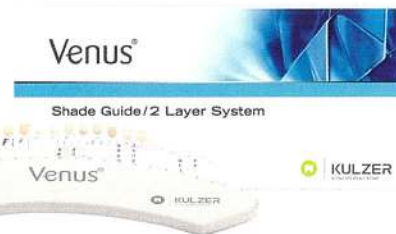

ビーナス シェードガイド

- 内容: 20シェード
 エナメルシェード (A1, A2, HKA2.5, A3, A3.5, A4, HKA5, B1, B2, B3, C2, C3, C4, D2, D3, SB1, SB2)
 インサイザル (T1, T2, T3)
 製品コード: 45369

	A1	A2	HKA2.5	A3	A3.5	A4	HKA5	B1	B2	B3	C2	C3
ビーナス / 各4g 製品コード	45342	45343	45344	45345	45346	45347	45348	45349	45350	45351	45352	45353
	C4	D2	D3	SB1	OA2	OA3	OA3.5	OB2	SBO	T1	T2	
	45354	45355	45356	45363	45357	45358	45359	45360	45365	45366	45367	

フロアブル コンポジットレジン

カリスマ フロー

幅広い症例に対応できる操作性を実現。

- 流動性を高めながらも垂れにくくしたことで、操作性に優れています。2種類のフローにより幅広い臨床に対応できます。
- 余剰レジンが自然と戻る機構(セルフバック機構)によって、漏れを防ぎます。
- 軽度着色窩洞においても適度なマスクングを有するため、そのまま自然な仕上がりになります。
- 専用23Gノズルを用いて、MI治療による極小窩洞にも対応します。

販売名 カリスマ フロー
 一般的名称 歯科充填用コンポジットレジン
 分類 管理医療機器
 承認番号 226AFBZX00058000



カリスマフロー ミディアムフロー

- 内容: シリンジ2.6g (1.5ml) × 1本 (A1, A2, A3, A3.5, A4, OM)
 20Gノズル×3本、23Gノズル×2本
 ノズルキャップ×1個、シールドガイド×1枚



カリスマフロー ローフロー

- 内容: シリンジ2.6g (1.5ml) × 1本 (A1, A2, A3, A3.5, A4, OM)
 20Gノズル×5本、ノズルキャップ×1個、シールドガイド×1枚



カリスマフロー 20Gノズル

低流動性・高流動性タイプのノズルです。

- 内容: 20Gノズル×20本
 ノズルキャップ×1個
 製品コード: 45464

カリスマフロー 23Gノズル

高流動性タイプのノズルです。

- 内容: 23Gノズル×20本
 ノズルキャップ×1個
 製品コード: 45465

	A1	A2	A3	A3.5	A4	OM
カリスマ フロー ミディアム フロー/各2.6g 製品コード	45453	45454	45455	45456	45457	45458
カリスマ フロー ロー フロー/各2.6g 製品コード	45459	45460	45461	45462	45463	—

ビーナス® フロー

ビーナスと併用した審美修復治療。

- 色調は、ビーナスとの差が最小限になるように設計された全14色。
- 成分は62wt%の無機フィラーを含みます。フィラーのサイズは0.005 μm~5 μm。
- X線造影性とフッ素徐放性を備えています。

販売名 ビーナスフロー
 一般的名称 歯科用充填材料キット
 分類 管理医療機器
 承認番号 21800BZY10132000



ビーナスフロー シリンジ

- 内容: ビーナス フロー シリンジ1.8g × 1本
 (A1, A2, HKA2.5, A3, A3.5, A4, B2, B3, OA2, SB1, ベースライナーホワイト, T2)
 専用ノズル×5本



フロー ディスボーザブルノズル

ビーナスフローとフローラインに共通で使用可能な専用ノズルです。

- 内容: 100本
 製品コード: 45317

	A1	A2	HKA2.5	A3	A3.5	A4	B2	B3	OA2	SB1	ベースライナー ホワイト	T2
ビーナスフロー/各1.8g 製品コード	45378	45379	45380	45381	45382	45383	45384	45385	45386	45372	45388	45389

3 修復材

LED可視光線照射器

トランスルックス® 2ウェーブ

軽くて持ちやすい、コードレスタイプのLED可視光線照射器です。

- 4個のLED光源により均一な光重合が可能です。
- 先端角70度、直径8mm、360度回転可能、使い易いファイバースティックです。
- 波長域385~510nmで、幅広い重合開始剤に対応しています。
- 用途に合わせて4種類の照射モードをお選びいただけます。
- 20秒ソフトスタートでは、光出力がゆっくりと増加するため、CRの初期重合収縮を低減します。

販売名 トランスルックス 2ウェーブ
一般的名称 歯科重合用光照射器
分類 一般医療機器・特定保守管理医療機器
届出番号 2781X00060900017



- 内容：充電器本体×1個
ハンドピース×1個
ファイバースティック×1個
ライトガード×1個
充電器ACコード×1本
製品コード：D9015

仮封材

ルミコン® テンポラリーシーラー ホワイト

口腔内の水分で硬化する、パテタイプの仮封材です。

- 加熱や練和の必要がなく、直接窩洞に充填仮封できます。
- 水分により適度に硬化し、撤去も簡単にできます。
- 事後に使用する合着用セメントや、充填材の機能を損ないません。

販売名 ルミコン テンポラリー シーラー ホワイト
一般的名称 歯科用仮封材
分類 管理医療機器
認証番号 221A8BZX00013000



- 内容：30g×1個
製品コード：47001

4 インジェクションシステム

歯科用注射針

カルプーレ®

高品質、豊富な種類、経済性の3拍子揃ったディスプレイザブル注射針です。

- ステンレス素材と優れた加工技術により、剛性が高く、ランセット加工された針管です。
- ガンマー線を照射しているため、有害残留物がなく均等な滅菌が可能です。ガンマー線滅菌の特徴を活かす気密包装により、使用期間の長期化(5年)を可能にしました。
- 太さは27G(0.40mm)から33G(0.26mm)まで、長さは12mmから30mmまで、浸潤麻酔・伝達麻酔のほか歯根膜帯内麻酔など様々な麻酔法に対応します。
- 33Gは歯科用として最も細いサイズながら、30Gよりも低い注入抵抗を実現しました。
- 高品質でありながら合理化により低価格を実現しました。エコノパックなら、さらに経済的に使用できます。
- ほとんどのシリンジに対応します。

販売名 カルプーレ
 一般的名称 歯科用注射針
 分類 管理医療機器
 認証番号 162008Z00199000



サイズ		用途				包装		カラーコード
太さ	長さ	浸潤麻酔	歯根膜帯内麻酔	伝達麻酔	小児対応	100本入・製品コード	エコノパック 300本入・製品コード	
33G (0.26mm)	exs14 (14mm)	●	●		●	● B2156	● B2157	
	exs16 (16mm)	●	●		●	● B2156	● B2249	
31G (0.28mm)	exs12 (12mm)		●		●	● B2152	● B2155	
	short (16mm)	●				● B2151	● B2154	
	short18 (18mm)	●					● B2248	
30G (0.30mm)	exs12 (12mm)		●		●	● B2150		
	exs16 (16mm)		●		●	● B2149		
	short (21mm)	●				● B2145	● B2148	
27G (0.40mm)	long (25mm)			●		● B2146		
	short (21mm)	●				● B2143		
	long (30mm)			●		● B2144		

歯科用注射器

ソピラ® シトジェクト®

歯根膜帯内麻酔用注射器です。

- 重さ68g、全長160mmのペンタイプで手の中に隠せるオリジナルデザインのため、患者さん(特に小児)に対して注射の恐怖感を低減します。
- レバー1回の注入量が約0.06mlと非常に少なく、状況に応じて注入量、圧力、速度のコントロールが容易にできます。
- バレルと本体の接合部には大口径のバヨネットキャッチを採用、より耐久性に優れています。
- テコの原理を応用したレバー操作により、通常の約9分の1の圧力で注入できるため、加圧の必要な歯根膜への注射が容易におこなえます。また、歯肉への浸潤麻酔においても、術者の負担を低減します。
- 万一のカートリッジ破裂に対しても、プロテクトチューブがガラスの飛散を防ぎます。
- 2種類のバレルを選択できるため、状況に応じた使い分けが可能です。特にアングルバレルは、楽な姿勢で無理なく操作でき、レストと針先が近いため、正確に刺入できます。
- 標準1.8ml及び1.0mlの麻酔薬カートリッジにも対応しています。

販売名 シトジェクト
 一般的名称 歯科麻酔用注射筒
 分類 一般医療機器
 届出番号 27B1X00060000067



ソピラ® シトジェクト® バレル



- 内容: 1本
 種類: アングルバレル 製品コード: B2021
 ストレートバレル 製品コード: B2022


ソピラ シトジェクト アングルバレルセット

- 内容: 本体×1台
 アングルバレル×1本
 プロテクトチューブ×1本
 製品コード: B2019

ソピラ シトジェクト ストレートバレルセット

- 内容: 本体×1台
 ストレートバレル×1本
 プロテクトチューブ×1本
 製品コード: B2020

ソピラ® シトジェクト® プロテクトチューブ

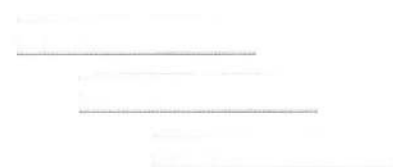

- 内容: 3本 製品コード: B2023

5 X線診断関連


歯科用X線フィルム(パノラマ用)

アグファ デンタス® パノラマフィルム オルソラックス

緑色発光の希土類増感紙に対応した
オルソタイプのパノラマ用フィルムです。

- 希土類増感紙の高感度・高精細の特性を發揮します。
- カプリアが少なくヌケが良いため、相対的なコントラストが優れています。
- ベースフィルムが淡青色に着色されているので、視覚的に透明感が向上し、読影性の良い画像が得られます。

販売名 アグファ デンタス パノラマフィルム
 一般的名称 スクリーン型歯科画像診断用X線フィルム
 分類 一般医療機器
 届出番号 27B1X00060000065

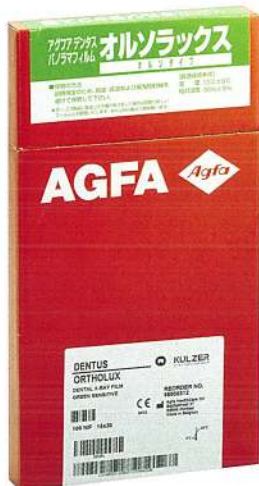

● 内容:100枚(15×30cm)
 製品コード:J1031

歯科用X線フィルム(口内法用)

アグファ デンタス® M2コンフォート アグファ デンタス® M2コンフォート 小児用

高感度のE感度デンタルサイズフィルムです。

- E感度でありながら、優れた操作性により、失敗の少ない撮影・現像ができます。
- 高精細の乳剤と拡散防止鉛オイルによりシャープな画像が得られます。
- しなやかなパッケージと硬めのフォルダーにより、患者さんの口腔内での柔らかい感触と歪みの少ない画像を実現しました。

販売名 アグファ デンタス M2コンフォート
 一般的名称 ノンスクリーン型歯科画像診断用X線フィルム
 分類 一般医療機器
 届出番号 27B1X00060000064



アグファ デンタス M2コンフォート
 ● 内容:150/パッケージ(3×4シングル)
 製品コード:J1036

アグファ デンタス M2コンフォート
 エコノパック
 ● 内容:150/パッケージ×3(3×4シングル)
 製品コード:J1037

アグファ デンタス M2コンフォート
 小児用
 ● 内容:100/パッケージ(2×3シングル)
 製品コード:J1043

X線フィルム用アクセサリ

鉛ナンバーシール

撮影済みフィルムを分類整理するための
ナンバリングシールです。
フィルムパッケージの半球側に貼付して撮影
します。



● 内容:3枚(No.1~150)
 製品コード:J1047

6 予防関連

歯間ブラシ

医療機器と同じガンマー線滅菌を採用、1本ずつの個別包装により開封まで清潔に保ち、小分けにも便利です。キャップはハンドル後端に接続すると延長ハンドルとして活用できます。

CAD/CAM冠用／インプラント用

ルミデント® CAD/CAM

- ウレタンコートされたワイヤーが、補綴物を傷つけにくいため、CAD/CAM冠セット後のメンテナンスに適しています。
- 自由な角度に曲げられるフレキシブルネックは、臼歯部も容易に挿入できます。




ルミデント CAD/CAM US/SS/S/M

- 内容:各5本×10箱
- 製品コード
US : X0341
SS : X0342
S : X0343
M : X0344

ルミデント® iP

- ウレタンコートワイヤーを採用しているため歯と歯ぐきにやさしく、異種金属の擦れによるガルバニック電流の発生を抑え、インプラントをされている患者さん、歯肉が退縮し金属が露出している患者さんに適しています。

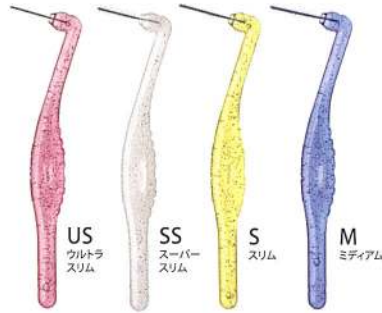


ルミデント iP US/SS/S/M

- 内容:各5本×10箱
- 製品コード
US : X0239
SS : X0240
S : X0241
M : X0242

通常使用

ルミデント®

- 歯間ブラシ専用開発された"超硬ステンレスワイヤー"により優れた操作性と耐久性を実現。
- フレキシブルネックで曲げたい角度に自由に曲げられ、前臼部、臼歯部のどの角度にもジャストフィットで挿入可能です。
- ハードタイプは矯正装置や補綴物の金属面の清掃に最適です。

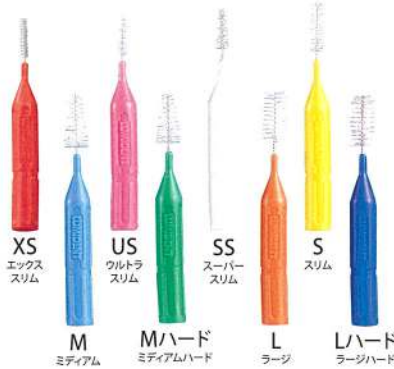

ルミデント XS/US/SS/S/M/L/ Mハード/Lハード

- 内容:各5本×10箱
- 製品コード
XS : X0307
US : X0192
SS : X0193
S : X0194
M : X0195
Mハード : X0197
L : X0196
Lハード : X0198

ルミデント 指専用パック XS/US/SS/S/M

- 内容:各5本×10箱
- 製品コード
XS : X0330
US : X0111
SS : X0112
S : X0113
M : X0114

ルミデント® アングル

- 歯間ブラシ専用開発された"超硬ステンレスワイヤー"により優れた操作性と耐久性を実現。
- 30°アングルヘッドが臼歯部の頬側・舌側にもスムーズに挿入が可能です。
- 持ち易さを考慮した平らなハンドル形状により安定感のあるハンドル保持が可能です。



ルミデント アングル US/SS/S/M

- 内容:各5本×10箱
- 製品コード
US : X0188
SS : X0189
S : X0190
M : X0191

ルミデント アングル 指専用パック US/SS/S/M

- 内容:各5本×10箱
- 製品コード
US : X0134
SS : X0135
S : X0136
M : X0137

用途	商品名	包装	XS	US	SS	S	M	Mハード	L	Lハード	サイズ カラーコード
CAD/CAM冠 インプラント用	ルミデント CAD/CAM	5入×10箱		X0341	X0342	X0343	X0344				製品 コード
	ルミデント iP	5入×10箱		X0239	X0240	X0241	X0242				
通常使用	ルミデント	5入×10箱	X0307	X0192	X0193	X0194	X0195	X0197	X0196	X0198	
		指専用(30本入)	X0330	X0111	X0112	X0113	X0114				
	ルミデント アングル	5入×10箱		X0188	X0189	X0190	X0191				
		指専用(30本入)		X0134	X0135	X0136	X0137				

6 予防関連

歯ブラシ

ルミデント® 歯ブラシ

- 弾力性に優れた手に馴染みやすい形態のハンドル。磨きやすさを追求したコンパクトヘッドです。
- 弾力性・耐久性に優れたフィラメントは、ラウンド加工により歯肉を傷つけません。
- 歯周疾患の治療と予防に最適なローリング法用もあり、幅広い症例に対応しています。



- 内容:各12本
製品コード
ミ ル ク : X0182
チャイルド : X0183
ヤ ン グ : X0184
ローリングM : X0187
ローリングH : X0186

乳歯列用
乳幼児向け

ミルク

混合歯列～永久歯列用
7才位から、口の小さな女性向け

チャイルド

永久歯列用
成人向け

ヤング

ローリング法用
ミディアム

ローリングM

ローリング法用
ハード

ローリングH

歯垢染色剤

ツートーン

- 歯面への広がりの良い歯垢染色剤です。
- 古い歯垢は青色に、比較的新しい歯垢は赤色に染め分けるため、より患者さんの理解が高まります。
- 色素には、赤色104号の1(フロキシシ)、青色1号(フリリアントブルー)を使用しています。
- スピットンに色が残りにくく、スピーディに掃除が可能です。



ツートーン 2oz
●内容:2oz(約60ml)×1本
製品コード: X0101

トレース

- 歯面への広がりの良い歯垢染色剤です。
- 歯垢を鮮明な赤に染めます。
- 比較的口腔内清掃の良い方にもご使用いただけます。
- 集団指導に適した錠剤タイプもあります。
- 色素には、赤色104号の1(フロキシシ)を使用しています。



トレース 錠剤タイプ
●内容:250錠
製品コード: X0106



トレース 2oz
●内容:2oz(約60ml)×1本
製品コード: X0103

歯科用歯面研磨材

コーラル

- 水溶性で、歯面に油性の被膜を作らないため、フッ素塗布前の歯面研磨にも使用できます。
- 適度な粘着性のペーストで、エンジン使用の際でも飛び散りにくくなっています。
- ポリッシング後は簡単に清掃できます。
- トロピカルフルーツの香りです。



●内容: 25g×1個
製品コード: 89101

販売名 コーラル
一般的名称 歯面研磨材
分類 一般医療機器
届出番号 2781X00060000073

マスク

サージカルマスク

歯科用ディスポーザブルマスク

- 4層構造ならではの高性能。
- アーチキーパー採用により、マスクをドーム状に膨らませるので、マスクをしたままで会話ができ、装着時の不快感を解消します。
- ひもタイプなので好みのスタイルで使用でき快適です。



サージカルマスク M(ブルー)

- 内容:50枚
製品コード: X2137

デンタルマスク コットン

歯科用ディスポーザブルマスク

- 4層構造ならではの高性能。
- 肌に接する面にさらっとした肌触りの良いコットン素材を採用。さわやかで快適な装着感です。
- アーチキーパー採用により、マスクをドーム状に膨らませるので、マスクをしたままで会話ができ、装着時の不快感を解消します。
- 高濾過性・撥水性フィルターの採用でBFE値(細菌濾過効率)では99.8%、PFE値(微粒子濾過効率)では99%の除去率を達成。



デンタルマスク S(ホワイト/ピンク)

- 内容:50枚 製品コード
ホワイト: X2131
ピンク: X2132



デンタルマスク M(ホワイト/ブルー/ピンク)

- 内容:50枚 製品コード
ホワイト: X2133
ブルー: X2134
ピンク: X2136

フェイスガード

アイプロテクター付き 歯科用ディスポーザブルマスク

- マスクとプロテクターが一体化しているので、簡単に装着できます。
- 顔全体がカバーされているので安心です。
- 軽量で見た目がすっきりしているので患者さんに違和感を与えません。
- プロテクターは曇り止めを塗布しているので、装着中の呼気による曇りを防ぎます。



フェイスガード S(ピンク)

- 内容:12枚
製品コード: X2127



フェイスガード M(ブルー)

- 内容:12枚
製品コード: X2128

6 予防関連

洗浄剤

バイブラクリーン

超音波洗浄器用洗浄剤

- たん白質分解酵素配合で、血液や組織片などを分解除去し、雑菌の繁殖を防ぎます。
- 自己発泡タイプで簡単に溶液ができます。
- ブルーの溶液が交換時期をお知らせします。
- 爽やかなミントの香り。



● 内容：20錠
製品コード：X2101

バキュークリーン

バキューム・スピットン用洗浄剤

- たん白質分解酵素配合で、血液や組織片などを分解除去し、不快臭の元になる雑菌の繁殖を防ぎます。
- 爽やかなレモンの香り。
- 人・器具・環境に対し優しい中性の洗浄剤です。



● 内容：7g×60
製品コード：X2105

小器具収納・保管ケース

D7-II (ブルー・アイボリー)

根管治療用器具やパー・ポイントの保管に使用します。

- 蓋と連動する器具トレイが、保管中は器具を薬液中に水没させ、使用時には取り出しやすく浮き上がらせます。
- リーマー類は、診療手順にあわせて種類・サイズ毎に分類できます。
- 色調は、診療室にマッチするブルーとアイボリーがあります。



ブルー

D7-II (ブルー・アイボリー)

- 内容：本体×1台
サイズ150W×70H×90D (mm)
(種類：ブルー、アイボリー)
ピンセット×1本
スポンジ×4個
製品コード
ブルー：H9004
アイボリー：H9005



D7ピンセット

- 内容：1本
製品コード：H9010



D7-IIスポンジ

- 内容：2個 (20×35×80mm)
製品コード：H9011

ニューD7スポンジ

- 内容：2個 (25×25×75mm)
製品コード：H9012



アイボリー

索引 (ABC、アイウエオ順)

品名	頁	品名	頁
----	---	----	---

英数

D7	17
M2コンフォート	13

ア

アグファ	13
アルギノブラスト	3
アングルパレル	12
オルソラックス	13

カ

カリスマクラシック	9
カリスマフロー	10
カルプーレ	12
キサントノ	3
グルーマセルフエッチ	8
グルーマディセンシタイザー	7
グルーマボンドCA	8
コウクウナイヨウチップ	6
コーラル	15

サ

サージカルマスク	16
シェードガイド	9
ストレートパレル	12
スポンジ	17
ソピラシトジェクト	12

タ

ツートーン	17
ディスベンシンクガン2	5
ディセンシタイザー	7
デンタス	13
デンタルマスク	17
テンポラリーシーラー	11
トランスルックス	11
トレース	17

ナ

ナマリ ナンバーシール	13
ノズル	10

ハ

バイトチップ	6
バイブラクリーン	17
バキュクリーン	17
ビーナス	9
ビーナスフロー	10
ピンセット	17
フェイスガード	16
フレキシタイム	5
フレキシタイム/バイト	6
プロテクトチューブ	12
プロピール ノボ	4
ペーパーパッド	7

マ

マイクロブラシ	7
マスク	16
ミキシングチップ	6
メモジル2	5
メモレック2	5

ヤ

ユニバーサルアドヘーシブ	5
--------------	---

ラ

ルミコン	11
ルミデント	14
レンパンシ	5

■ お問い合わせとご用命は…

■ 製造販売元

kulzaー ジャパン 株式会社

本 社：〒113-0033 東京都文京区本郷4-8-13 TEL.03-5803-2151
仙台営業所：〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-30-6-102 TEL.022-371-1007
名古屋営業所：〒461-0004 名古屋市東区葵1-13-18 TEL.052-935-5451
大阪営業所：〒590-0982 堺市堺区海山町4-174 TEL.072-242-6410
福岡営業所：〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-6-12 TEL.092-472-0720
フリーダイヤル：0120-230-331 (受付時間10:00~16:00/土・日・祝日を除く)

www.kulzer.co.jp/