

est

Gキュレット / スケーラー



est  
is  
best.

最上級を意味するest


その名にふさわしく

より美しくシャープに

持続する切れ味

## シャンク / ブレード

国内製鉄メーカーと共同開発した「YDMオリジナル刃物用スチール」を採用し、YDM独自の加工技術を用いることで、切れ味、しなやかさ、耐食性のトータルバランスを追求しました。

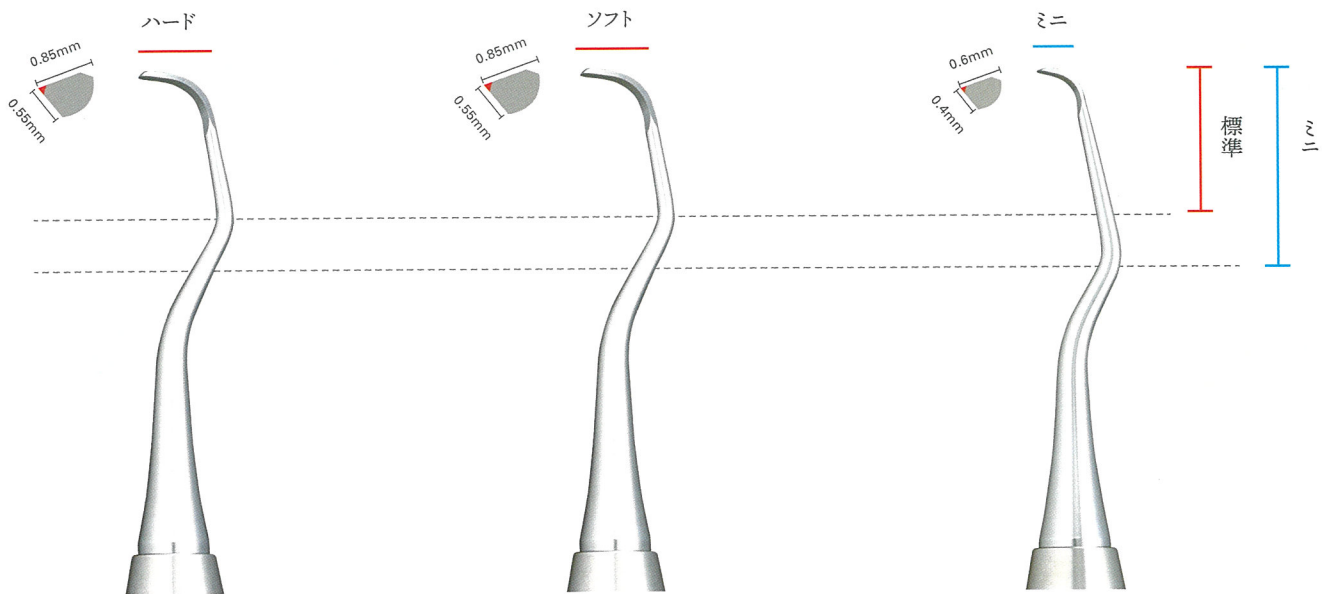


しなりが少なく側方圧を加えやすいため、比較的強固な歯石や多量の歯石除去に適しています。

しなりがあり微細な感覚が手指に伝わりやすいため、超音波スケーラー、エラスケーラー後の仕上げや細やかなSRPに適しています。

ブレード部が小さく、第一シャンクが長くなっているため深いポケット内にも挿入しやすくなっています。またしなりが少ないため、強固な歯石にも対応できます。

## ハード/ソフト

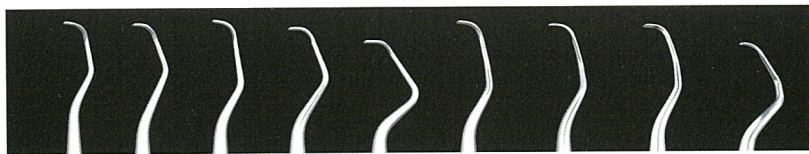


#G1-2 前歯部  
#G3-4 前歯部  
#G5-6 前歯部・小臼歯部  
#G7-8 臼歯部頬舌面  
#G9-10 臼歯部頬舌面  
#G11-12 臼歯部近心面  
#G13-14 臼歯部遠心面  
#G15-16 臼歯部近心面  
#G17-18 臼歯部遠心面

## ミニ



#G1-2 前歯部  
#G3-4 前歯部  
#G5-6 前歯部・小臼歯部  
#G7-8 臼歯部頬舌面  
#G11-12 臼歯部近心面  
#G13-14 臼歯部遠心面  
#G15-16 臼歯部近心面

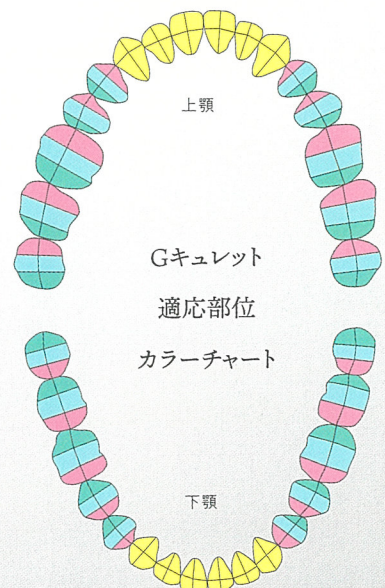

# Colorpic カラーフィー

カラフルな色・見やすい規格表示で目的のインスツルメントを明確に識別できます。  
ハンドル表面はシリコン加工を行うことで手にフィットしやすく滑りにくくなっています。  
また凹凸が少ないので洗浄しやすい形状になっています。





Gキュレット est  
カラフィー  
#G1-2

Gキュレット est  
カラフィー  
#G3-4

Gキュレット est  
カラフィー  
#G5-6

Gキュレット est  
カラフィー  
#G7-8

Gキュレット est  
カラフィー  
#G9-10



Gキュレット est  
カラフィー  
#G11-12

Gキュレット est  
カラフィー  
#G13-14

Gキュレット est  
カラフィー  
#G15-16

Gキュレット est  
カラフィー  
#G17-18


# Sakura サクラ

サクラ模様は見た目だけではなく、滑り止めの効果も考えてデザインしています。

ハンドルは持ちやすく力を加えやすい太さになっており、

中空構造による軽量化で疲労感も少なく感じられます。



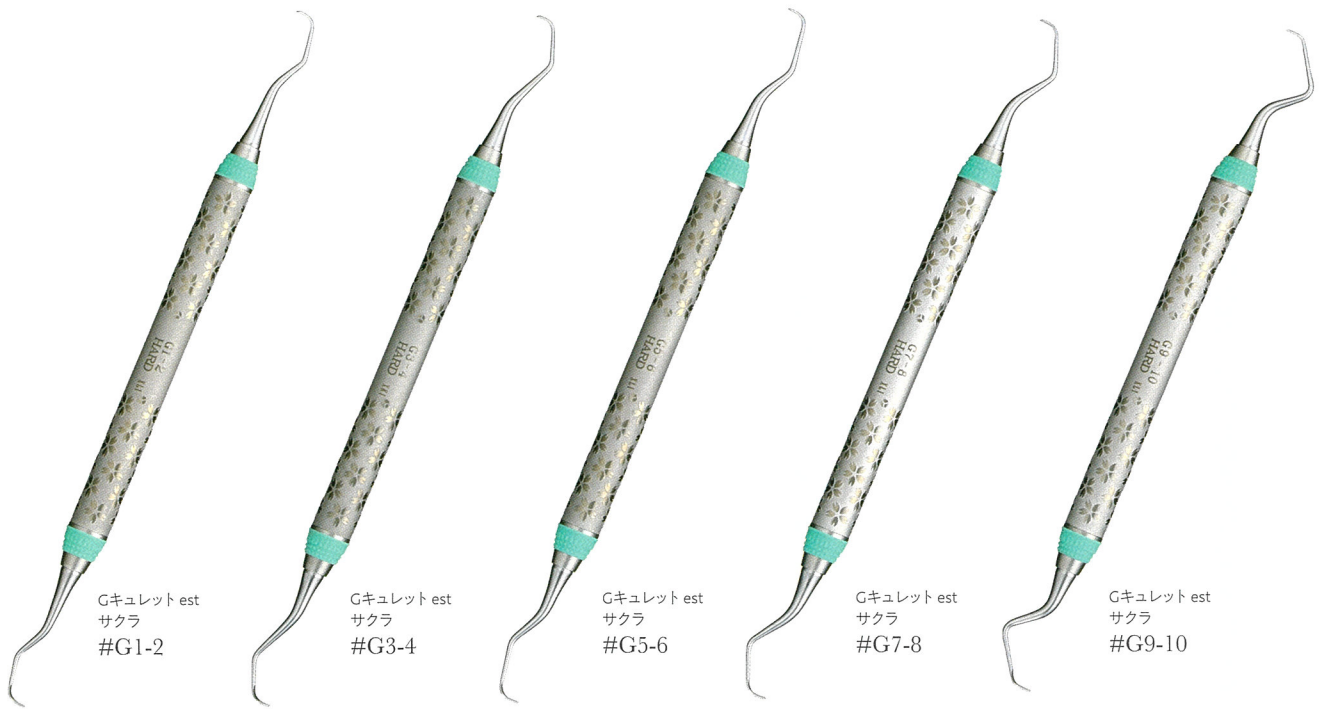


※出荷時のIDリングは、ハード:グリーン、ソフト:ピンク、ミニ:ブルーとなります。

# Taira トイロ

シリコン加工とグリップ部分の凹凸により滑りにくくフィット感に優れた構造になっています。

細めにつくられたハンドルは長時間の使用でも疲れにくく、カラフルな見た目は優しい印象を与えます。

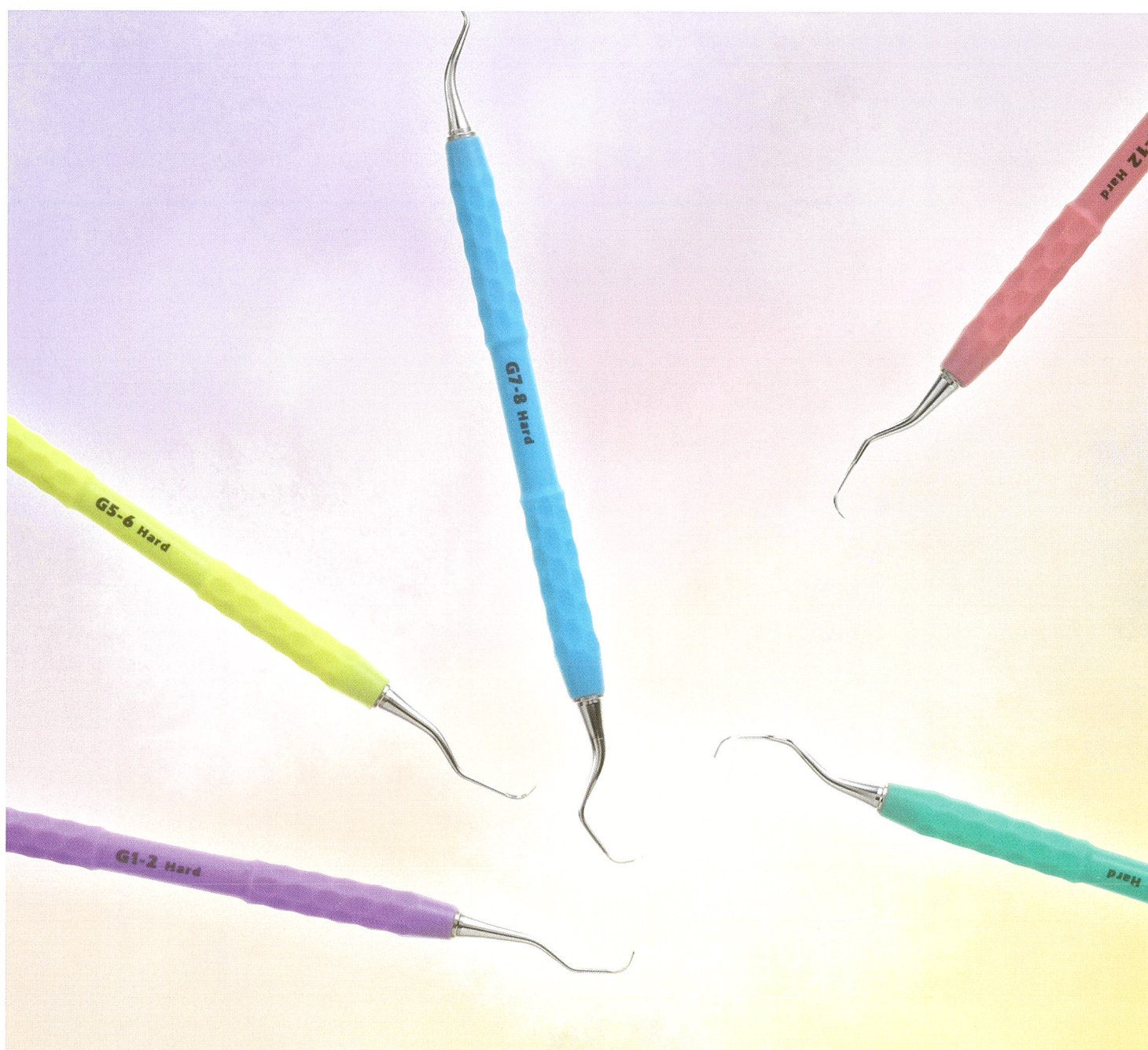





Gキュレット est  
TOIRO  
#G1-2



Gキュレット est  
TOIRO  
#G5-6



Gキュレット est  
TOIRO  
#G7-8



Gキュレット est  
TOIRO  
#G11-12






Gキュレット est  
TOIRO  
#G13-14

# Kakue 角柄

ハンドルが細く、先端部分の感覚が手指に伝わりやすいため、  
細かな縁下歯石の探知に適しています。



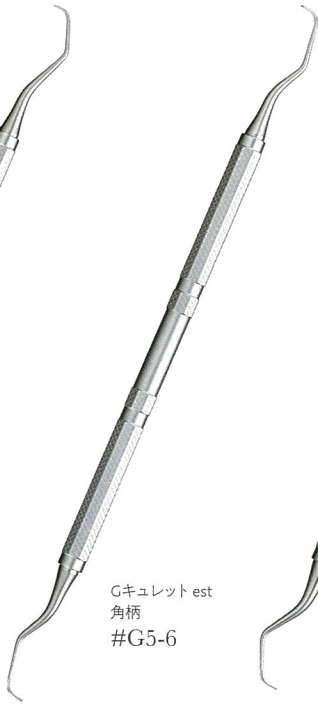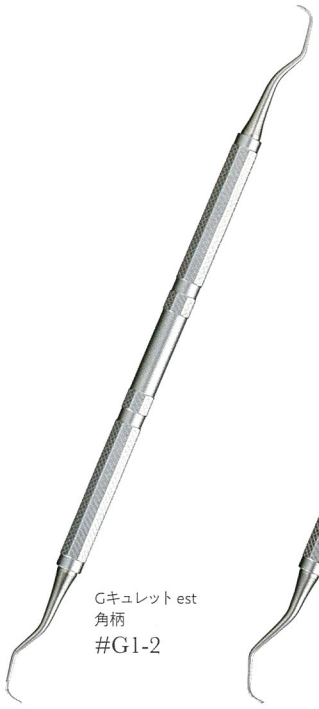

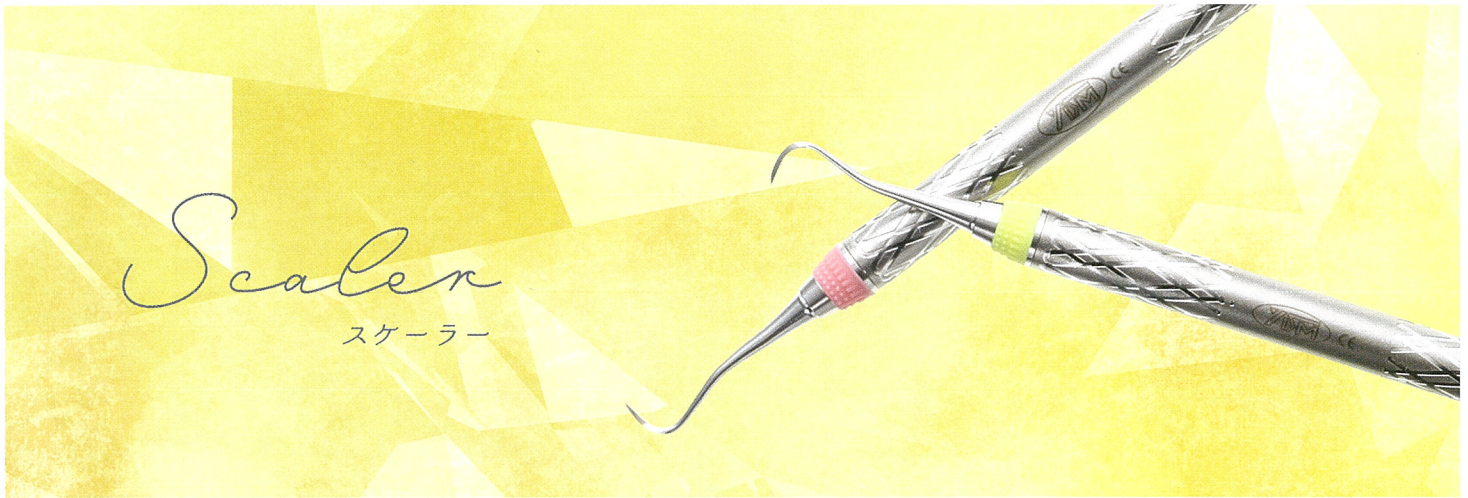

### スケーラー est KIRIKO

#H5/33 直と曲の薄いブレードの組み合わせです。前歯歯頸部や歯間部の歯肉縁上スケーリングに適しています。

#H6/H7 シャンクが左右にわずかに傾いています。前歯部から臼歯部の近遠心隅角部までアプローチできます。



シックルスケーラー est  
KIRIKO  
H5/33

シックルスケーラー est  
KIRIKO  
H6/H7



#### KIRIKOハンドル

日本の伝統品である“江戸切子”をモチーフにし、見た目の美しさだけでなく、“持ちやすく滑りにくい”という特長も兼ね備えています。

### スケーラー est TOIRO




シックルスケーラー est  
TOIRO  
H5/33

シックルスケーラー est  
TOIRO  
H6/H7

## スケーラーest両頭 #204SD


ブレード部が小さく、シャンク部の複屈曲デザインにより、臼歯部隣接面へのアプローチがしやすくなります。  
縁上スケーリングにおける超音波スケーラー、エアースケーラー使用後の仕上げに適しています。


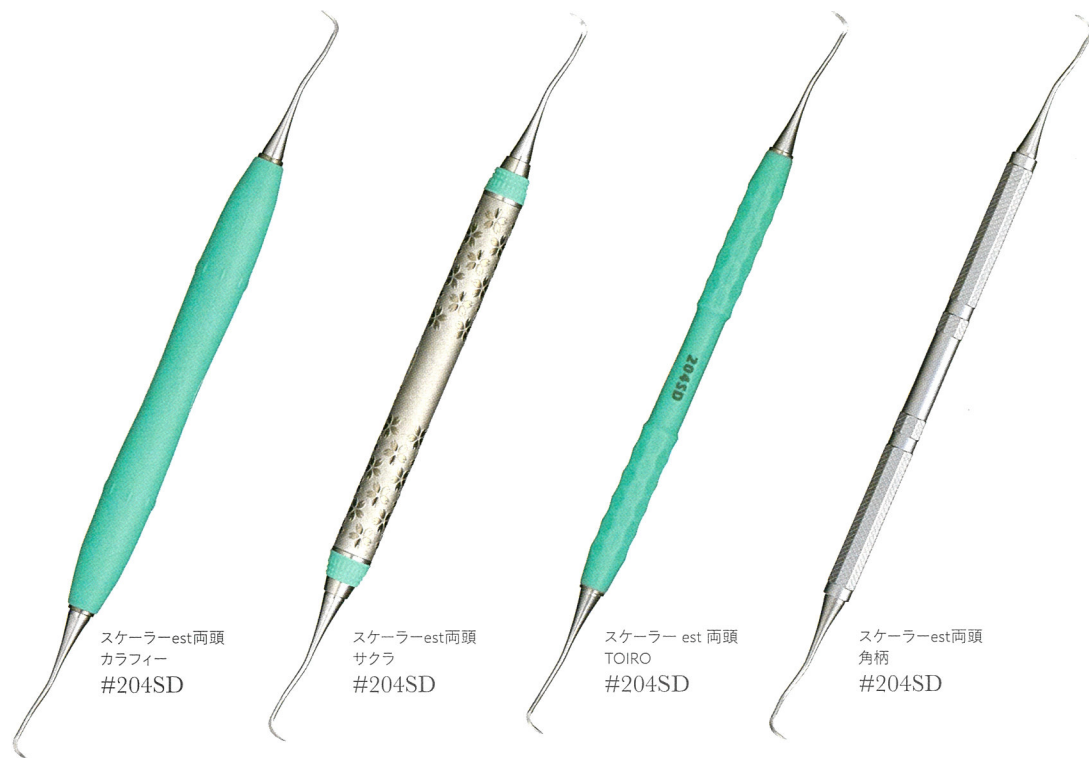


## スケーラーestペア


外刃のふくらみを減らすことで歯間への挿入を容易にしました。

- #1 前歯部の歯頸部や歯間部に適しています。
- #2 シャンク部が傾斜しているデザインのため、臼歯部の歯頸部から隣接面まで使用できます。

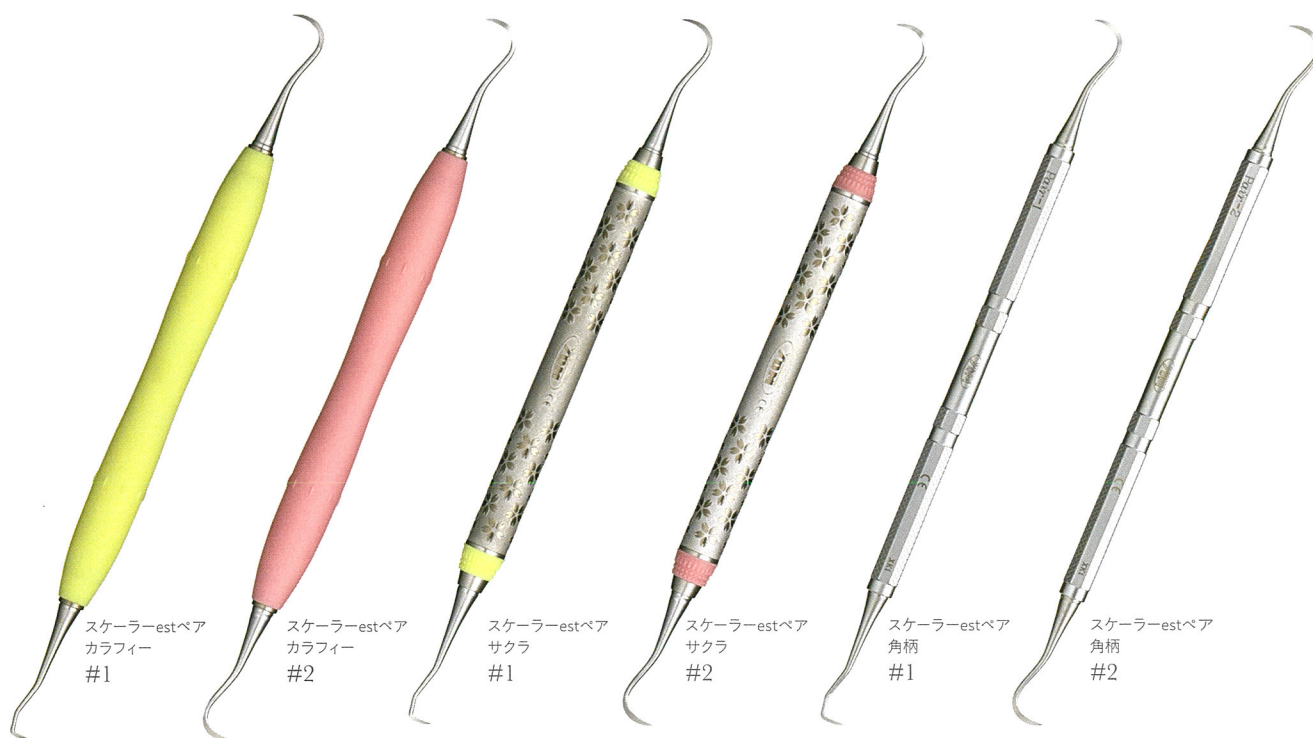

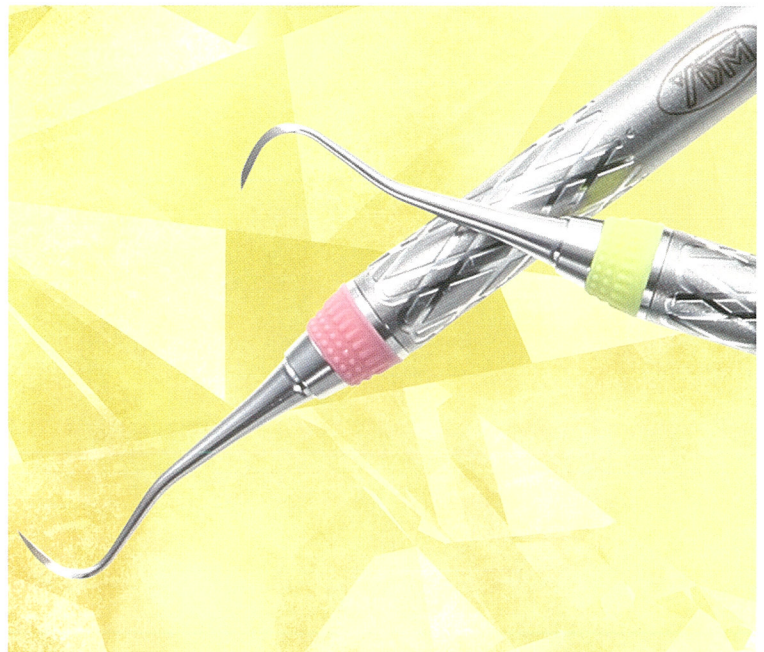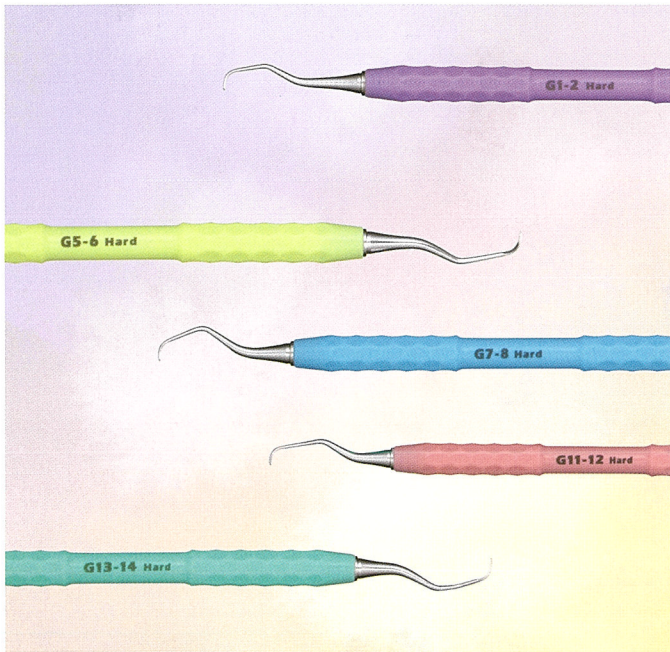

est is best.

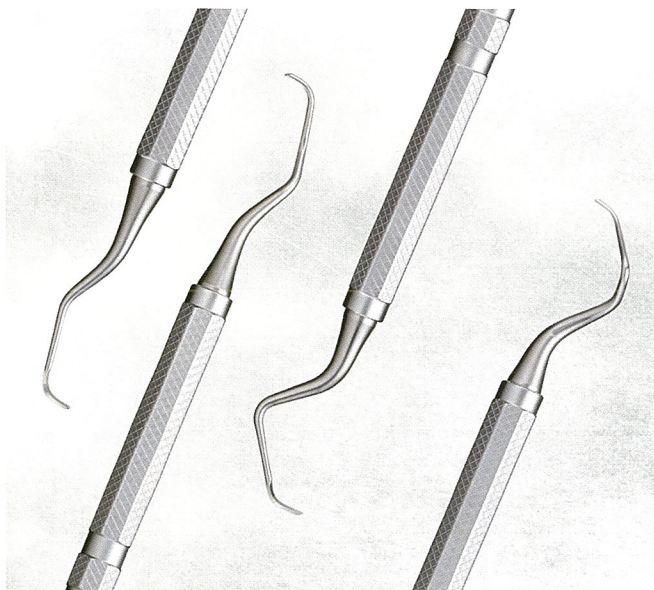

Gキュレット

商品名	規格	品目コード	標準価格	
Gキュレットest カラフィー	ハード	#G1-2	2015107361-2	
		#G3-4	2015107363-4	
		#G5-6	2015107365-6	
		#G7-8	2015107367-8	
		#G9-10	2015107369-10	
		#G11-12	20151073611-12	
		#G13-14	20151073613-14	
		#G15-16	20151073615-16	
	ソフト	#G17-18	20151073617-18	
		#G1-2	2015107371-2	
		#G3-4	2015107373-4	
		#G5-6	2015107375-6	
		#G7-8	2015107377-8	
		#G9-10	2015107379-10	
		#G11-12	20151073711-12	
		#G13-14	20151073713-14	
	ミニ	#G15-16	20151073715-16	
		#G17-18	20151073717-18	
		#G1-2	2015107381-2	
		#G3-4	2015107383-4	
		#G5-6	2015107385-6	
		#G7-8	2015107387-8	
		#G11-12	20151073811-12	
		#G13-14	20151073813-14	
Gキュレットest サクラ	ハード (IDリング: グリーン)	#G15-16	20151073815-16	
		#G1-2	2015107331-2	
		#G3-4	2015107333-4	
		#G5-6	2015107335-6	
		#G7-8	2015107337-8	
		#G9-10	2015107339-10	
		#G11-12	20151073311-12	
		#G13-14	20151073313-14	
	ソフト (IDリング: ピンク)	#G15-16	20151073315-16	
		#G17-18	20151073317-18	
		#G1-2	2015107341-2	
		#G3-4	2015107343-4	
		#G5-6	2015107345-6	
		#G7-8	2015107347-8	
		#G9-10	2015107349-10	
		#G11-12	20151073411-12	
	ミニ (IDリング: ブルー)	#G13-14	20151073413-14	
		#G15-16	20151073415-16	
		#G17-18	20151073417-18	
		#G1-2	2015107351-2	
		#G3-4	2015107353-4	
		#G5-6	2015107355-6	
		#G7-8	2015107357-8	
		#G11-12	20151073511-12	
Gキュレットest TOIRO	ハード	#G13-14	20151073513-14	
		#G15-16	20151073515-16	
		#G1-2	2015107571-2	
		#G5-6	2015107575-6	
		#G7-8	2015107577-8	
		#G11-12	20151075711-12	
		#G13-14	20151075713-14	
		ソフト	#G15-16	20151075715-16
	#G1-2		2015107581-2	
	#G5-6		2015107585-6	
	#G7-8		2015107587-8	
	#G11-12		20151075811-12	
	#G13-14		20151075813-14	
	ミニ		#G15-16	20151075815-16
			#G17-18	20151075817-18
		#G1-2	2015107591-2	
		#G5-6	2015107595-6	
		#G7-8	2015107597-8	
		#G11-12	20151075911-12	
		#G13-14	20151075913-14	
		Gキュレットest 角柄	ハード	#G15-16
	#G17-18			20151075917-18
	#G1-2			2015107421-2
	#G3-4			2015107423-4
#G5-6	2015107425-6			
#G7-8	2015107427-8			
#G9-10	2015107429-10			
#G11-12	20151074211-12			
ソフト	#G13-14		20151074213-14	
	#G15-16		20151074215-16	
	#G17-18		20151074217-18	
	#G1-2		2015107431-2	
	#G3-4		2015107433-4	
	#G5-6		2015107435-6	
	#G7-8		2015107437-8	
	#G9-10		2015107439-10	
ミニ	#G11-12		20151074311-12	
	#G13-14		20151074313-14	
	#G15-16		20151074315-16	
	#G17-18		20151074317-18	
	#G1-2		2015107441-2	
	#G3-4		2015107443-4	
	#G5-6		2015107445-6	
	#G7-8		2015107447-8	
Gキュレットest カラフィー	ハード	#G9-10	2015107449-10	
		#G11-12	20151074411-12	
		#G13-14	20151074413-14	
		#G15-16	20151074415-16	
		#G17-18	20151074417-18	
		#G1-2	2015107451-2	
		#G3-4	2015107453-4	
		#G5-6	2015107455-6	
	ソフト	#G7-8	2015107457-8	
		#G11-12	20151074511-12	
		#G13-14	20151074513-14	
		#G15-16	20151074515-16	
		#G17-18	20151074517-18	
		#G1-2	2015107461-2	
		#G3-4	2015107463-4	
		#G5-6	2015107465-6	
	ミニ	#G7-8	2015107467-8	
		#G11-12	20151074611-12	
		#G13-14	20151074613-14	
		#G15-16	20151074615-16	
		#G17-18	20151074617-18	
		#G1-2	2015107471-2	
		#G3-4	2015107473-4	
		#G5-6	2015107475-6	

商品名	規格	品目コード	標準価格	
Gキュレットest TOIRO	ハード	#G1-2	2015107571-2	
		#G5-6	2015107575-6	
		#G7-8	2015107577-8	
		#G11-12	20151075711-12	
		#G13-14	20151075713-14	
		#G15-16	20151075715-16	
		#G17-18	20151075717-18	
		ソフト	#G1-2	2015107581-2
	#G5-6		2015107585-6	
	#G7-8		2015107587-8	
	#G11-12		20151075811-12	
	#G13-14		20151075813-14	
	ミニ		#G15-16	20151075815-16
			#G17-18	20151075817-18
			#G1-2	2015107591-2
		#G5-6	2015107595-6	
		#G7-8	2015107597-8	
		#G11-12	20151075911-12	
		#G13-14	20151075913-14	
		Gキュレットest 角柄	ハード	#G15-16
	#G17-18			20151075917-18
	#G1-2			2015107421-2
	#G3-4			2015107423-4
	#G5-6			2015107425-6
#G7-8	2015107427-8			
#G9-10	2015107429-10			
#G11-12	20151074211-12			
ソフト	#G13-14		20151074213-14	
	#G15-16		20151074215-16	
	#G17-18		20151074217-18	
	#G1-2		2015107431-2	
	#G3-4		2015107433-4	
	#G5-6		2015107435-6	
	#G7-8		2015107437-8	
	#G9-10		2015107439-10	
ミニ	#G11-12		20151074311-12	
	#G13-14		20151074313-14	
	#G15-16		20151074315-16	
	#G17-18		20151074317-18	
	#G1-2		2015107441-2	
	#G3-4		2015107443-4	
	#G5-6		2015107445-6	
	#G7-8		2015107447-8	
Gキュレットest カラフィー	ハード	#G9-10	2015107449-10	
		#G11-12	20151074411-12	
		#G13-14	20151074413-14	
		#G15-16	20151074415-16	
		#G17-18	20151074417-18	
		#G1-2	2015107451-2	
		#G3-4	2015107453-4	
		#G5-6	2015107455-6	
	ソフト	#G7-8	2015107457-8	
		#G11-12	20151074511-12	
		#G13-14	20151074513-14	
		#G15-16	20151074515-16	
		#G17-18	20151074517-18	
		#G1-2	2015107461-2	
		#G3-4	2015107463-4	
		#G5-6	2015107465-6	
	ミニ	#G7-8	2015107467-8	
		#G11-12	20151074611-12	
		#G13-14	20151074613-14	
		#G15-16	20151074615-16	
		#G17-18	20151074617-18	
		#G1-2	2015107471-2	
		#G3-4	2015107473-4	
		#G5-6	2015107475-6	

スクーラー

商品名	規格	品目コード	標準価格
スクーラーest KIRIKO	#5 / 33	201510755	4,800円
	#H6 / H7	201510756	
スクーラーest TOIRO	#H5 / 33	201510760	4,800円
	#H6 / H7	201510761	
スクーラーest 両頭 カラフィー	#204SD	201510750	4,800円
スクーラーest 両頭 サクラ	#204SD	201510749	4,600円
スクーラーest 両頭 TOIRO	#204SD	201510762	4,200円
スクーラーest 両頭 角柄	#204SD	201510752	3,900円
スクーラーest ペア カラフィー	#1	2015107461	4,800円
	#2	2015107462	
スクーラーest ペア サクラ	#1	2015107451	4,600円
	#2	2015107452	
スクーラーest ペア 角柄	#1	2015107481	3,900円
	#2	2015107482	

IDリング (耐久温度260℃)

商品名	規格	品目コード	標準価格
IDリング サクラ、 KIRIKO ハンドル専用	アソート 18 入	201510753	1,600円
	バイオレット 10 入	201510754-V	
	オレンジ 10 入	201510754-O	
	イエロー 10 入	201510754-Y	
	ブルー 10 入	201510754-BL	
	レッド 10 入	201510754-R	
	ピンク 10 入	201510754-P	
	グリーン 10 入	201510754-G	
	ネイビー 10 入	201510754-NAV	
	ライム 10 入	201510754-LIM	

# YDM

製造販売 株式会社YDM 埼玉県東松山市今泉28 〒355-0042  
発 売 株式会社モリタ 大阪本社: 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06.6380.2525  
東京本社: 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03.3834.6161  
お問合せ お客様相談センター T 0800.222.8020(フリーコール) ※歯科医療従事者様専用



YDM器材のメンテナンス方法

<http://www.ydm.co.jp/maintenance/maintenance.html>



商品に関するお問合せはこちら

●掲載商品の標準価格は、2020年12月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。  
●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。