


ハトー製品カタログ

HATHO BRUSH PRODUCT CATALOG

vol.2.5

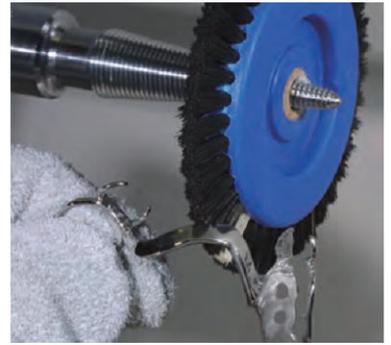

ハトー サーモポリ セット



硬質レジンから軟性レジンまで、3ステップで短時間で簡単にツヤが出ます。

- 軟性レジンに3ステップで短時間で簡単にツヤを出す
 - 本セットであらゆる義歯材料の研磨が可能
 - カーバイトバー等での形態修正後の研磨用キット
 - 泥研磨は使用しないので、作業場を汚さない
- 用途 軟性レジン、硬質レジンなどの義歯用レジンの研磨

価格 : ¥12,800

※ 各製品は単品でも販売しております。
一般医療機器 | 歯科用研磨器材 | 27B2X00041000167

軟性レジン
研磨可能

Step1 中研磨



Step2 光沢研磨



Step3 最終光沢研磨



研削用ハンドピース

ハトブラシ (HP用) 10,000 光沢/最終光沢研磨時に使用するパフ。用途に合わせて使い分けてください。



品番	500-22HP W5	520-22HP W7	870-22HP W8	150-22HP W1	160-22HP W2	161-22HP W3	162-22HP W4	154-22HP W6
研磨用途	貴金属・合金	貴金属・レジ	合金・チタン	貴金属・レジ	貴金属	セラミック・合金	合金	チタン
硬さ	ソフト	ソフト	ソフト	ソフト	ソフト	ソフト	ソフト	ソフト
材質	鹿皮	マイクロファイバー	綿スリ(片面シリコンコート)	綿糸パフ	布	布	フェルト	綿糸パフ
径	22mm	22mm	22mm	22mm	22mm	22mm	22mm	22mm
入数	12本	12本	12本	12本	12本	12本	12本	12本
価格	¥3,800	¥3,500	¥4,500	¥4,000	¥3,500	¥3,500	¥3,800	¥6,500

医療機器届出番号 27B2X00041000039

ハトブラシ (HP用) 10,000
ハプラスブラシ

弾性ポリアミドファイバーに均一に砥粒を混ぜたブラシを使用しているの
で、研磨剤は必要ありません。
高い耐久性を持っています。

届出番号 27B2X00041000039



品番	400-19HP T1	400-22HP T2	410-19HP T3	410-22HP T4	420-19HP T5
研磨粒子	酸化アルミニウム	酸化アルミニウム	炭化ケイ素	炭化ケイ素	炭化ケイ素
荒さ	細目	細目	中目	中目	荒目
径	19mm	22mm	19mm	22mm	19mm
入数	4本	4本	4本	4本	4本
価格	¥6,000	¥6,000	¥6,000	¥6,000	¥6,000

セラミック研削用ハンドピース

ハト ダイヤストーン 10,000

ダイヤモンド粒子をハイブリッド結合させた
ポイント/ディスクです。僅かな圧でジルコ
ニア・歯科用セラミック・チタン・メタル等の
形態修正・調整ができます。また高寿命で幅
広い用途にご使用頂けます。

届出番号 27B2X00041000072



品番	377-4HP	372-6HP	397-4HP	392-6HP	374-15HP	375-22HP	375-22R	367-4HP	362-4HP
硬さ	細目/中目	細目/中目	細目/中目	細目/中目	細目	細目	細目	極細目	極細目
径	4mm	6mm	4mm	6mm	15mm	22mm	22mm	4mm	4mm
研削部厚さ	11mm	12mm	11mm	12mm	3mm	3mm	3mm	11mm	11mm
入数	1本	1本	1本	1本	1本	1本	1個	1本	1本
価格	¥3,100	¥3,400	¥3,100	¥3,400	¥4,200	¥5,600	¥4,900	¥3,800	¥3,800

中目にはマンドレルに緑色のマークがあります。

ポーセレンブラシ

ハト ポーセレンブラシ セーブル

100%セーブル毛を使用したポーセレンブラシ。ポーセレンワークに必要な毛先の動きが可能で、長くお使い頂ける耐久性を兼ね備えています。

ほどよい柔軟性を持った筆は保水性が高いので、量を多く塗布する場合の操作性が良いです。良質なセーブル毛を使用しているため、作業中に筆の先端の形態が崩れにくいです。

販売単位:1本

サイズ	価格
#00	¥1,100
#0	¥1,200
#2	¥1,500
#4	¥2,100
#6	¥3,600
#8	¥5,200

研磨用ハンドピース

ハトブラシ(HP用) 10,000

品番	100-23HP R1	102-16HP R2	102-19HP R3	120-s5HP R5	120-19HP R6	121-23HP R7	122-16HP R8
研磨用途	金属・レジン	貴金属	貴金属	金属・レジン	金属・レジン	合金	貴金属・合金
硬さ	ソフト	ソフト	ソフト	ハード	ハード	ハード	ハード
材質	山羊毛	山羊毛	山羊毛	豚毛	豚毛	豚毛	豚毛
径	23mm	16mm	19mm	8mm	19mm	23mm	16mm
入数	12本						
価格	¥3,500	¥1,850	¥1,850	¥3,500	¥2,000	¥3,000	¥2,000

品番	193-16HP R9	193-19HP R10	122-19HP R12	193-p8HP R13	GEZA100HP R15	GEZA121HP R17	102/520-22HP R21
研磨用途	金合金	金合金	貴金属・合金	金合金	金属・レジン	金属・レジン	チタン
硬さ	ハード	ミディアム	ハード	ミディアム	ソフト	ハード	ソフト
材質	ワイヤー(Ø0.06)	ワイヤー(Ø0.06)	豚毛	ワイヤー	山羊毛	豚毛	山羊毛+マイクロファイバー
径	16mm	19mm	19mm	5mm	22mm	22mm	22mm
入数	12本	12本	12本	12本	12本	12本	12本
価格	¥3,800	¥3,800	¥2,000	¥3,500	¥2,500	¥2,500	¥4,900

医療機器届出番号 27B2X00041000039

ハト アストロブラシ 10,000

星型研磨ブラシ。咬合面・細かい連結部・隣接歯間部などの凹凸部に入り込みやすく、また歯面の研磨も行えるので、オールマイティに使用できます。

用途 #9-100-アクリルレジン・ゴールド・コンポジットレジンの研磨
#9-114-様々な金属の研磨

届出番号 27B2X00041000141



品番	#9-100	#9-114
硬さ	ソフト	ミディアム
材質	山羊毛	馬毛
径	22mm	22mm
入数	12本/144本	12本/144本
価格	¥1,780/¥14,000	¥1,780/¥14,000

ハトブラシ(HP用)トロブラシ 10,000

用途 レジン・ポーセレン・スルホン・貴金属・硬質金属などの最終仕上げ研磨

届出番号 27B2X00041000039



品番	#9 ソフト	#11 ソフト
硬さ	ソフト	ソフト
材質	山羊毛	山羊毛
径	14.5mm	17.5mm
入数	12本/144本	12本/144本
価格	¥1,780/¥14,000	¥1,780/¥14,000

ハトブラシ(HP用) 10,000

コンパウンドの保持力が高いフェルトポリリッシャー。ハトー ポリスター ダイヤモンドペースト(別売)と共に使用し、セラミックの研磨にも最適です。

材質 フェルト

届出番号 27B2X00041000039

品番	173-8HP F1	173-11HP F2	173-6HP F3	172-8HP F4	175-21HP F5
径	8mm	11mm	6mm	8mm	21mm
入数	12本	12本	12本	12本	12本
価格	¥3,200	¥3,700	¥2,800	¥2,800	¥3,200

レーズブラシ

ハトブラシ(レーズ用)

品番	121-42 L1	121-48 L1-1	121-36 L1-2	100-48 L2	682-51 L3	1140 L20	1145 L4	1144 L18	1250 L5	1245 L17	1270 L6	1355 L7	1370 L19	146-4 L15	148 L8
ブラシ形状	ストレート	ストレート	テーパ	ストレート	ストレート	ストレート	ストレート	ストレート	テーパ	テーパ	テーパ	テーパ	テーパ	ストレート	ストレート
列数	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4
硬さ	ミディアム	ソフト	ハード	ソフト	ハード	ハード	ミディアム	ミディアム	ミディアム	ハード	ハード	ミディアム	ミディアム	ミディアム	ミディアム
材質	豚毛	豚毛	豚毛	山羊毛	ステンレス	豚毛									
径・内/外	22mm/42mm	22mm/48mm	22mm/36mm	22mm/48mm	22mm/51mm	25mm/40mm	25mm/45mm	25mm/45mm	25mm/50mm	25mm/45mm	50mm/70mm	28mm/55mm	40mm/70mm	40mm/60mm	40mm/80mm
価格	¥350	¥380	¥500	¥500	¥3,500	¥330	¥320	¥330	¥330	¥350	¥550	¥450	¥680	¥800	¥850

金属床の研磨に効果的

品番	1480 L9	100-80 L10	121-48VL L16VL	5480 L11	6380 L12	6480 L13	7380 L14	UniFix 8277 L29	9280 L21	9255 L21-2	4280 L33	POKAL L30
ブラシ形状	テーパ	ストレート	ストレート	テーパ	テーパ	テーパ	テーパ	テーパ	ストレート	ストレート	ストレート	ストレート
列数	4	4	3	7	5	7	5	5	3	3	4	
硬さ	ミディアム	ソフト	ミディアム	ミディアム	ミディアム	ミディアム	ミディアム	ミディアム	ミディアム	ミディアム	ミディアム	ハード
材質	豚毛	山羊毛	豚毛2列+スコッチ1列	豚毛4列+布3列	豚毛3列+フェルト2列	豚毛4列+フェルト3列	豚毛3列+鹿皮2列	豚毛3列+綿モスリン2列(各2枚)	豚毛2列+スコッチ1列	豚毛2列+スコッチ1列	豚毛2列+スコッチ2列	豚毛
径・内/外	40mm/80mm	40mm/80mm	22mm/48mm	40mm/80mm	40mm/80mm	40mm/80mm	40mm/80mm	35mm/80mm	40mm/80mm	25mm/55mm	40mm/80mm	14mm/35mm
価格	¥800	¥1,200	¥550	¥1,600	¥1,350	¥1,600	¥1,500	¥1,500	¥1,100	¥1,000	¥1,400	¥2,000

- 養歯やマウスピースの泥研磨材を使用した荒研磨に効果的
- シリコンコートした綿モスリンを豚毛にサンドイッチし耐久性をUP
- 養歯の荒研磨用。泥研磨材と使用すると研磨砥粒をスポンジ内に保持し効率良く研磨
- スポンジを豚毛にサンドイッチし水の飛び散りを減少させ、作業場を汚れを防ぐ
- 養歯やマウスピースの荒研磨用
- 砥粒含有のスコッチブライトを挟み込んであるので、より強力な研磨力で作業時間の短縮します
- 口蓋専用ブラシ

品番	UniFix 520-100/7 L23	UniFix 500-80LE L22	UniFix 520-90LE L24	UniFix 870-100/14 L31	UniFix 869-100/14 L32	UniFix 862-100/15 L28	156-80HS L25	156-80H L26	UniFix 152-80BW L27
ブラシ形状	ストレート	ストレート	ストレート	ストレート	ストレート	ストレート	ストレート	ストレート	ストレート
列数/厚さ	7	4	4	14	14	15	37mm	23mm	18mm
硬さ	ソフト	ソフト	ソフト	ミディアム	ソフト	ソフト	ソフト	ソフト	ソフト
材質	マイクロファイバー	鹿皮	マイクロファイバー	綿モスリン(片面シリコンコート)	綿モスリン(片面シリコンコート)	ゼタコットン(化学繊維)	綿糸パフ	綿糸パフ	綿糸パフ
径・内/外	40mm/100mm	40mm/80mm	40mm/90mm	40mm/100mm	40mm/100mm	40mm/100mm	40mm/80mm	33mm/80mm	40mm/80mm
価格	¥2,500	¥2,200	¥2,500	¥2,800	¥2,800	¥1,600	¥1,600	¥1,600	¥1,600

- 養歯やマウスピースなどの光沢研磨用
- 鹿革の代替品「マイクロファイバー(化繊)」製ディスク

- シリコンコートした綿モスリン
- コバルトクロム合金、非貴金属、チタン合金などの光沢研磨用
- 摩擦が少なく、毛羽たちににくい

裂けてもハサミなどで切り取れば、それ以上裂けず、コットンディスクの代わりに使用可能

ハトユニフィックス UniFix
スピンドルに対して垂直にしっかりと、そして簡単に固定させるためにこの形状になりました。

医療機器届出番号 27B2X00041000001

ハトミラバフ

薄手で柔らかく織目が細かで良質な綿モスリンを使用。軸部はレザーで補強しています。
○研磨剤が固着しづらい素材を使用
○ミディアムとソフト、2つの硬さ

品番	867 100x50HG	868 100x50HG	868 100x50H
ブラシ形状	ストレート	ストレート	ストレート
列数/厚さ	50/15mm	50/15mm	50/15mm
硬さ	ハード	ソフト	ソフト
材質	綿モスリン(トウモロコシエキスを浸透)	綿モスリン	綿モスリン
径・内/外	30mm/100mm	30mm/100mm	30mm/100mm
価格	¥550	¥550	¥550

糸織じアリ 糸織じナシ

ハトミラミニ

ミラバフイエローと同材質のハンドピース版

品番	867-25gHP	867-25HP
研磨用途	各種材料の光沢研磨	各種材料の光沢研磨
硬さ	ハード	ハード
材質	綿モスリン	綿モスリン
径	25mm	25mm
入数	12本入	12本入
価格	¥2,600	¥2,600

糸織じアリ 糸織じナシ

ハトブラシ(レーズ用) ハトジャンボホイール/スモールホイール

取り外し可能なリングにより、研磨ディスクを固定します。紐で固定するよりも強固に固定が出来、尚かつ簡単にリングを取り外すことができます。

マイナードライバーを使うと簡単にブラスティックリングが取り外せます。

品番	160-110J J1-1 (160-80J J1-2)	162-110J J2-1 (162-80J J2-2)	500-110J J3-1 (500-80J J3-2)	253-110J J4-1 (253-80J J4-2)	520-110J J5-1 (520-80J J5-2)
ブラシ形状	ストレート	ストレート	ストレート	ストレート	ストレート
列/厚み	30枚/18mm (45枚/20mm)	6枚/18mm (12枚/28mm)	6枚/18mm (12枚/23mm)	2枚/18mm (4枚/26mm)	6枚/16mm (12枚/19mm)
硬さ	ソフト	ソフト	ソフト	ソフト	ソフト
材質	綿モスリン	フェルト	鹿皮	スコッチブライト	マイクロファイバー
径・外	110(80)mm	110(80)mm	110(80)mm	110(80)mm	110(80)mm
径・コア	90(63)mm	90(63)mm	90(63)mm	90(63)mm	90(63)mm
価格	¥2,200(¥2,350)	¥2,200(¥2,350)	¥3,800(¥4,300)	¥2,800(¥3,500)	¥3,200(¥4,200)

()は直径80mmの場合の数値・価格です。直径が110mmの場合は、1,400rpm、80mmの場合は2,800rpmで作業を行ってください。 医療機器届出番号 27B2X00041000001

医療機器届出番号 27B2X00041000070

医療機器届出番号 27B2X00041000170

研磨剤

ハトー ポリスター ポリッシングペースト

研磨を行う際に一番大切な点は、研磨対象物に対して最適なポリッシングコンパウンドを選択し、ステップbyステップで素早く効率的に行う事です。

販売単位:1個

届出番号:27B2X00041000048



レジン



コンポジット



コバルトクローム



貴金属



非貴金属



セラミック



チタン

中研磨



種類:ブラウン
100g:¥1,100
300g:¥2,200



貴金属の中研磨用



種類:リンティグレイ
90g:¥1,100
300g:¥2,200



アクリル義歯とコンポジット、貴金属(18K)の中研磨用



光沢研磨



種類:ホワイト
100g:¥1,100
300g:¥2,200

白銀、非貴金属、コバルトクローム合金、軟性レジンの仕上研磨用



最終光沢研磨



種類:グリーン
100g:¥1,100
300g:¥2,200



貴金属合金、コバルトクローム合金の最終仕上研磨用



種類:ブルー
100g:¥3,300
300g:¥6,600



貴金属(白銀)、非貴金属、コバルトクローム合金、ハイブリッドコンポジットの仕上研磨用



種類:レッド
100g:¥1,700
300g:¥3,300



金・白銀の最終仕上研磨用
チタン合金の仕上研磨用



種類:ベージュ
100g:¥1,100
300g:¥2,200



アクリル義歯とコンポジットの最終仕上研磨用



種類:ローズ
100g:¥3,500
300g:¥7,000

14金、アクリル義歯、ハイブリッドコンポジット、軟性レジン最終仕上研磨用



ハトーポリスター ポリッシング クリーム

アクリル樹脂、軟性レジン、コンポジットレジン、貴金属の光沢研磨用。布バフ、フェルト、マイクロファイバーレーザー製ブラシと併用してください。

販売単位 1個

届出番号 27B2X00041000165

価格 ¥2,100/90g



ハトーポリスタープロ ポリッシング ペースト ピンク

アクリル樹脂、軟性レジン、コンポジットレジン最終光沢研磨用。既存のコンパウンドと比較しても素早く簡単にハイグロスな光沢が得られます。綿糸バフと併用してください。

販売単位 1個

届出番号 27B2X00041000166

価格 ¥3,900/150g



ハトー ポリスター ダイヤモンドペースト

貴金属、非貴金属合金、クロームコバルトフレームワーク、チタン、ナノコンポジット、歯科用セラミックの仕上研磨用。(フェルトポリッシャーと共にご使用ください。)

販売単位 1個

届出番号 27B2X00041000047

価格 ¥5,000/2.5g



ハトー ポリスター エマルジョン

貴金属、非貴金属合金、クロームコバルトフレームワーク、チタン、コンポジット、歯科用セラミックの最終研磨用。研磨対象物に塗布して綿糸バフで磨いてください。

販売単位 1本

届出番号 27B2X00041000046

価格 ¥1,700/50ml
¥2,600/125ml



歯科技工用関連製品

ハトー ペンシルブラシ 692-00

技工物の細かい汚れ、カーバイトバー等の目詰まり除去にご使用ください。ブラシ部が短くなれば、戻軸部を回すとブラシが出ます。(ブラシ部が摩耗し、戻軸部が回らなくなれば使用をお止めください。)

販売単位 1本

価格 ¥1,700



ハトー フィンガーストール

研磨作業時の熱や怪我などから指先を保護するためにご使用ください。

材質 革製

種類 PF1 小/PF2 中/PF3 大

販売単位 アソート 3種×1個/袋

各種 3個/袋

価格 ¥1,000



研磨キット

ハトー ハプラスディスク PRO チェアサイド義歯研磨キット

歯科用義歯のチェアサイド用研磨キット。
研磨剤含有の樹脂製ブラシを使用し3ステップで
中研磨から光沢研磨まで可能
○ブラシヘッド部のドット(●)でステップ順を表記
○チェアサイドで研磨しても術者と周囲を汚さない
○スクリー型で風を巻き込みながら研磨し発熱を防ぐ
○柔軟性のあるブラシで、形態を変形しにくい
○耐熱温度134℃でオートクレーブ滅菌可能

セット内容 905.1-14PP×1個
903.2-14PP×1個
904.3-14PP×1個

販売単位 1セット

届出番号 27B2X00041000164

価格 ¥4,500/セット ¥1,600/単品



	Step 1 中研磨	Step 2 中光沢研磨	Step 3 光沢研磨
品番	905.1-14PP	903.2-14PP	904.3-14PP
荒さ	ミディアム(P120)	ファイン(P220)	スーパーファイン(P400)
径	14mm	14mm	14mm
入数	1本入	1本入	1本入
単品価格	¥1,600	¥1,600	¥1,600

ハトー アクリポル セット

歯科用アクリルの中研磨、仕上研磨、最終仕上研磨
に適した研磨キット。一度、本キットをお買い上げ頂
き、後は単品でご購入頂く事も可能です。

セット内容 9280 L21×2個
520-100 L23×1個
156-80HS L25×1個
ハトーポリスターページ 100g×1個

販売単位 1セット

届出番号 27B2X00041000044

価格 ¥7,400/セット



Step 1 中研磨



9280 L21

ハトー ポリスター
リンティグレイ(別売)

"9280 L21"は、スポンジ素材が研磨剤を効率よく取り込み、何度もコンパウンドをブラシに押し当てる必要がない。空気も取り込むため、研磨対象物の発熱を防ぐ。"ハトー ポリスター リンティグレイ"(別売)又は市販の泥研磨剤と共に使用

Step 2 仕上研磨



520-100 L23

ハトーポリスター
ページ

化学繊維"マイクロファイバー"を使用した"520-100 L23"と"ハトーポリスター ページ"との組み合わせにより効率良い研磨が可能

Step 3 最終仕上研磨



156-80HS L25

ハトーポリスター
エマルジョン(別売)

細かい綿糸を高密度に植毛した"156-80HS L25"を1,400RPMで軽く押し当てるだけで、素早く光沢を得られる。"ハトーポリスター エマルジョン"(別売)を1,2滴研磨対象物に付けて研磨を行う事により、より素早く光沢を得ることが可能

ハトー チタンポル セット

チタンクラウン、ブリッジとインプラント、ジルコニアの
ツヤ出しが素早く行える研磨キット。

セット内容 102/520-22HP R21×2本
162-22HP W4×2本
154-22HP W6×2本
ハトー ダイヤモンドペースト 2.5g×1個

販売単位 1セット

届出番号 27B2X00041000045

価格 ¥8,500/セット

ハトー ポリスター
ダイヤモンドペースト 2.5g



102/520-22HP R21 15,000

162-22HP W4 10,000

154-22HP W6 10,000

Step 1 中研磨



102/520-22HP R21

ハトー ダイヤモンドペースト

咬合面に"ハトー ダイヤモンドペースト"を少量塗布し、マイクロファイバーと山羊毛のサンドイッチブラシで研磨すると素早くツヤが出る

Step 2 仕上研磨



162-22HP W4

ハトー ダイヤモンドペースト

歯面に"ハトー ダイヤモンドペースト"を塗布し、フェルトホイールで研磨することでツヤが出る

Step 3 最終仕上研磨



154-22HP W6

コンパウンドを使用しないで綿糸バフで研磨することにより従来にないツヤが出る

(インプラント用製品を研磨する場合は、ステップ1を省きステップ2から始めてください。)

研磨用ハンドピース

ハター ハブラスディスク PRO 5,000

- 複雑な凹凸部にも良くなじみ、柔軟で快適に使用できます。
- 砥粒入のため、コンパウンドなどを併用する必要がありません。
- 砥粒の作用によりスピーディな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。
- 研磨クズがほとんど出ないので、チェアサイドでも使用できます。

※5,000rpm以下でディスク先端を軽く当てて研磨してください。

用途 コバルトクロム合金の研磨
レジンの研磨
軟性レジン・熱可塑性レジンの研磨
材質 ポリアミド・ポリシロキサン
届出番号 27B2X00041000075

品番	901-25(3)HP	902-25(3)HP	903-25(3)HP
荒さ	コース(P80)	スタンダード(P220)	ファイン(P400)
径	25mm	25mm	25mm
入数	1本	1本	1本
価格	¥1,500	¥1,500	¥1,500



チェアサイドでの義歯の研磨にオススメ

3ステップで調整後の義歯のツヤ出しが行えます。

- コンパウンド不要!チェアサイドを汚さない!!
- 滅菌可能!(耐熱温度134℃)
- 柔軟性のある樹脂製ブラシで、形態が変形しにくい!
- 風を巻き込む形状で、研磨熱の発生を防ぐ!



Step1



義歯の中研磨

Step2



義歯の中光沢研磨

Step3



義歯の光沢研磨

●セットもご用意しております。詳細は中面をご覧ください

8,000

品番	905.1-14PP	903.2-14PP	904.3-14PP
荒さ	ミディアム(P120)	ファイン(P400)	スーパーファイン(P800)
径	14mm	14mm	14mm
入数	1本	1本	1本
単品価格	¥1,600	¥1,600	¥1,600

●本品はマンドレルタイプです。歯科用マイクロモーター等に装着しご使用ください

ハターブラシ(HP用) 10,000 スコッチブライト

- サンドペーパーコーンの代わりとして使用すると:
☆ブラシを擦りつけても熱が発生し難い
☆表面形態を崩さずに研磨が可能
- ブラシに研磨剤が混入されており、コンパウンドを擦りつけるなどの手間が省けます。
- 口蓋部などの面が広く細かい凹凸のある箇所
の研磨に適しています。

材質 スコッチブライト
届出番号 27B2X00041000039




品番	250-25HP D-1	251-25HP D-2	255-25HP D-3	256-25HP D-4
研磨用途	レジン	レジン	レジン	レジン
荒さ	ハード	ミディアム	ソフト	エキストラソフト
径	25mm	25mm	25mm	25mm
入数	12本	12本	12本	12本
価格	¥3,500	¥3,500	¥3,500	¥3,500

ハターフィックス 20,000 #80(荒目) #240(細目)

コバルトクロム、合金、チタンなどの荒研磨・中研磨用ポイント。
高速回転(15,000rpm)で研磨物に軽く押し当てただけで、研磨面を梨地様にし、最終光沢研磨工程をラクにします。

- 高研磨性と高耐久性を両立
- 研磨後のキズが少なく、のちの研磨がラク
- ※#240(細目)はマンドレルに赤リングを装着

材質 コランダム(酸化アルミニウム)
ニトリルゴム
届出番号 27B2X00041000158

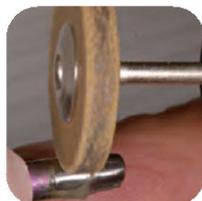

品番	#80 204-20HP	#240 224-20HP	#80 202-8HP	#240 222-8HP	#80 206-8HP	#240 226-8HP
径	20mm	20mm	8mm	8mm	8mm	8mm
入数	4本/1本	4本/1本	4本/1本	4本/1本	4本/1本	4本/1本
価格(#80)	¥2,900/¥900	¥2,900/¥900	¥5,000/¥1,600	¥5,000/¥1,600	¥5,000/¥1,600	¥5,000/¥1,600
価格(#240)	¥3,300/¥1,100	¥3,300/¥1,100	¥6,000/¥1,900	¥6,000/¥1,900	¥6,000/¥1,900	¥6,000/¥1,900

製造販売元:サンデンタル株式会社 製造元:HAHTO GmbH,ドイツ連邦共和国