

# スリムライト

歯科重合用光照射器

G.C.



光源	2波長タイプLEDモジュール (青色LED、紫色LED)
波長域	390~480nm
最大光強度	2,000mW/cm <sup>2</sup>
電源電圧	ハンドピース DC5V (リチウムイオン電池 DC3.6V) ACアダプタ AC100V 50/60Hz
バッテリー	リチウムイオン電池
充電時間	約3時間
光照射時間	30分 (フル充電した新品の場合)
寸法	ハンドピース Φ25mm×高さ 235mm 充電器 Φ93mm×高さ 66mm
質量	ハンドピース 140g 充電器 200g


歯科重合用光照射器

## スリムライト **NEW**

包装・希望医院価格 ●一式:本体、アイガード、充電器、ACアダプタ  
= ¥98,000

歯科重合用光照射器 スリムライト  
一般医療機器 13B1X00155000308

### 別売

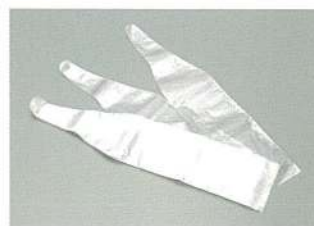

G-ライト プリマ/スリムライト  
衛生カバー(50枚)


包装・希望医院価格 ●1函=¥1,260

# ハイパワーでスピーディーに重合

最大  
2000mW/cm<sup>2</sup>


## ●硬化深度

■ Lモード 700mW/cm<sup>2</sup>  
■ Hモード 2000mW/cm<sup>2</sup>

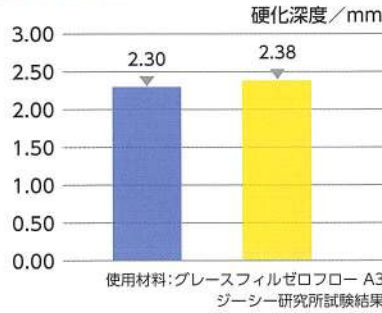

# 青と紫の2波長で、幅広い光重合材料に対応

## ●分光特性

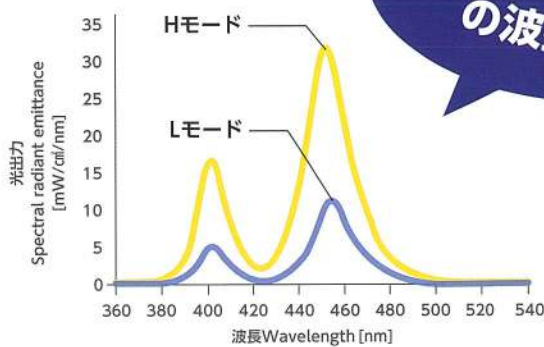

390~480nm  
の波長域

主に紫の波長に対応する材料  
コーティング材など

主に青の波長に対応する材料  
ボンディング材  
コンポジットレジン  
グラスアイオノマーセメント  
レジンセメントなど

# アプローチしやすい スリムヘッド



開口量が少ない  
ケースにも

ほぼ原寸大

300度  
回転



充電コネクタを  
直接接続できる

急な充電切れも安心

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは2021年10月現在のものです。  
※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。  
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー  
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター  
お客様窓口 ☎.0120-416480  
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)  
<http://www.gcdental.co.jp>

支店  
●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333  
営業所  
●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722  
●東北 (022)207-3370 ●九州 (092)441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー  
公式アプリ

どちらもコチラのQRでOK!

推奨OSバージョンはiOS:12.4以上、Android:8.0以上です。

