


CHARISMA®

Product Information

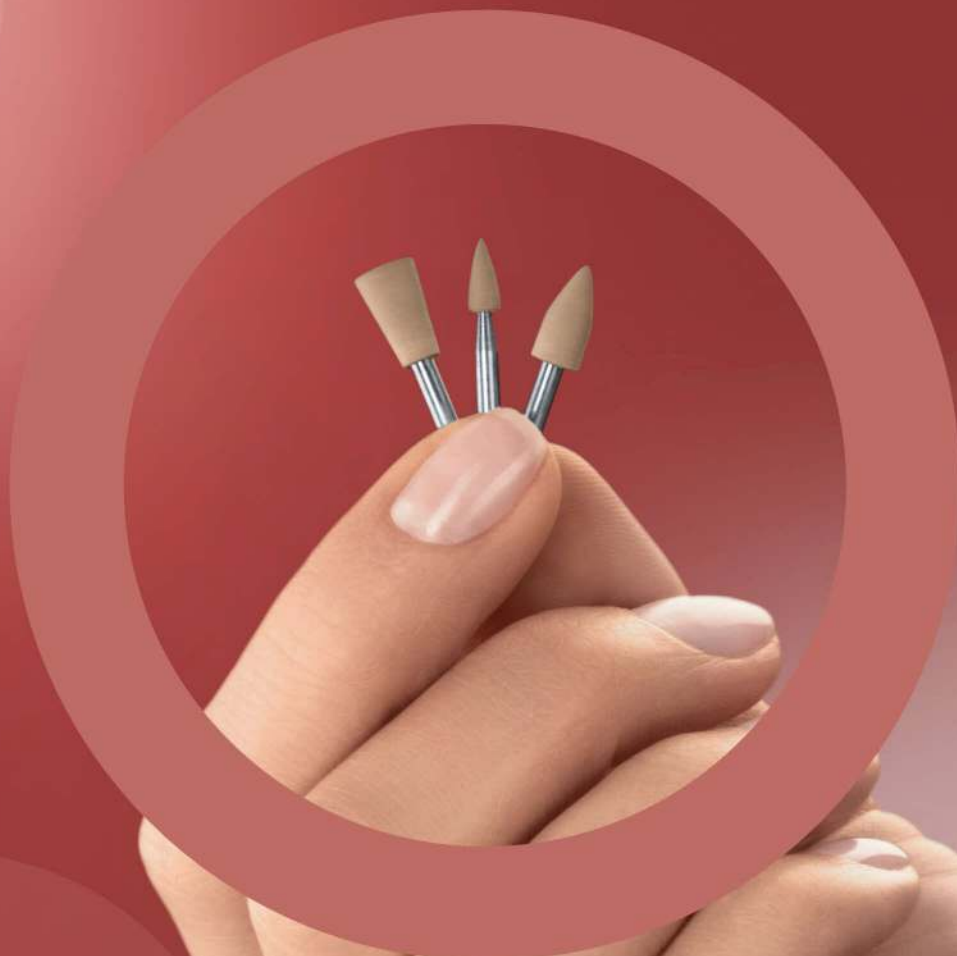

コンポジットレジン用研磨バー

カリスマ イージー シャイン

Giving a hand to oral health.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Charisma Easy Shine

カリスマ イージー シャイン



簡単

マイクロサイズのダイヤモンド粒子が優れた研磨効果を発揮するため、短時間で滑らかな表面性状が得られます。滑らかな表面は歯垢の蓄積を防ぎ、長期にわたり審美性と自浄性が持続します。

ワンステップ

回転数と圧力を調整することで、粗研磨から仕上げ研磨までワンステップで研磨することが可能です。研磨ポイントを交換する必要がないため、作業時間を短縮することができます。

滅菌可能

オートクレーブ滅菌し再利用することが可能です。

※滅菌条件：オートクレーブ 134℃ 5分(プレバキューム)、乾燥10分(150℃を超えないこと)

製品コード	製品名	包装内容
66060002	カリスマ イージー シャイン キット 6本入	ポイント×2本 ラージポイント×2本 カップ×2本
66060003	カリスマ イージー シャイン ポイント 12本入	ポイント×12本
66060004	カリスマ イージー シャイン ラージポイント 12本入	ラージポイント×12本
66060005	カリスマ イージー シャイン カップ 12本入	カップ×12本

推奨回転数：7,500 rpm

最大回転数：10,000 rpm

軸部：φ 2.35mm(ISO 1797-1:2011)

販売名 カリスマ イージー シャイン
 一般的名称 歯科用ゴム製研磨材
 分類 一般医療機器
 届出番号 27B1X00060000097



■ お問い合わせとご用命は…

■ 製造販売元

クルツァー ジャパン 株式会社

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷 4-8-1 3
TEL.03-5803-2151

仙台営業所：〒981-3133 仙台市泉区泉中央 3-3 0-6-1 0 2

大阪営業所：〒590-0982 堺市堺区海山町 4-1 7 4

福岡営業所：〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-6-1 2