


クリアフィル[®]マジエスティ[®] ESフロー Universal

フロー性の異なる
ラインナップを
追加!!

- NEW!** Super Low
- Low
- NEW!** High



クリアフィル[®]マジエスティ[®] ES フロー **Universal** なら! **1本**で様々な窩洞に**色調**も**操作**もラクラク!

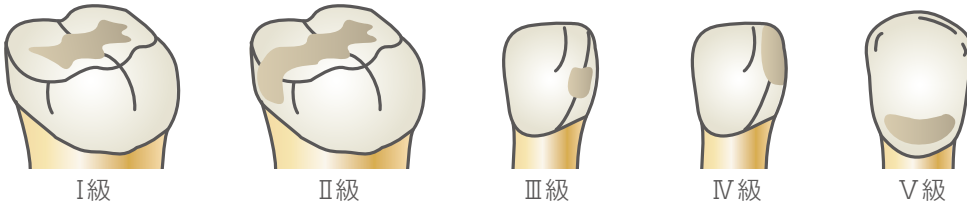


日々のCR充填に
お使いいただけます

クリアフィル[®]マジエスティ[®] ES フロー **Universal** なら! **1本**で色合わせが可能!

1シェードで幅広い色調適合性

前歯部も、主要シェードはUシェードかUDシェードのいずれか1本で修復できます。

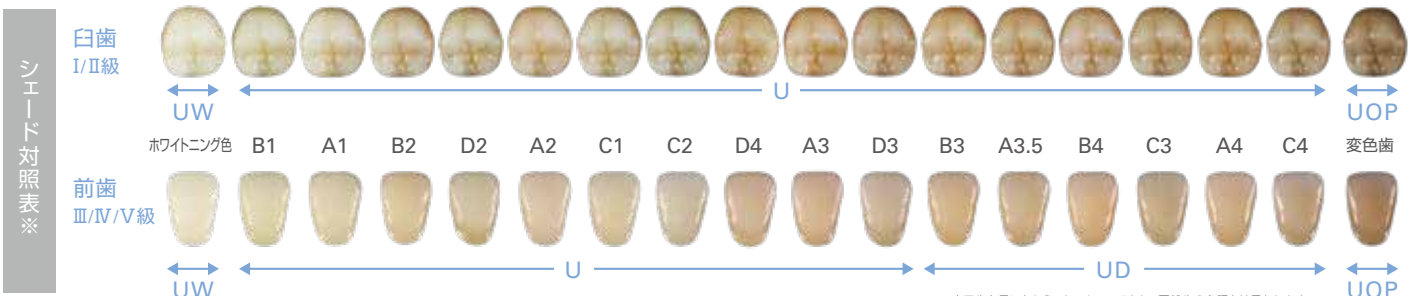

※人工歯を用いたシミュレーションであり、天然歯の色調とは異なります
※UOPは1本で充填することも可能ですが、UやUDで積層する方がより審美的です。

クリアフィル[®]マジエスティ[®] ES フロー **Universal** が! **臨床に役立つ3つのポイント!**

1 良好な色調適合性!

＼自然な仕上が!／



2 どのシェードを使うか迷わず選択!

ESフローユニバーサルなら

＼これ1本!／



3 チェアサイドにこれ1本!
在庫の削減に!

＼これ1本!／



※写真は一例です。

クリアフィル® マジェスティ® ESフロー Universal


選べる3種類のフロー性

NEW!

Super Low U、UD



採取1分後(水平)

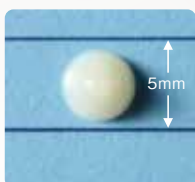

採取1分後(垂直)



U UD

咬合面の形態付与に(咬頭や隆線の形成)

垂れにくいペースト性状で、形を造りたいときに使用できます。周縁の歯質やコンポジットレジンに色調が親和します。


【例】



LOW U、UD、UOP、UW



採取1分後(水平)

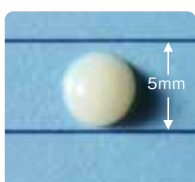

採取1分後(垂直)



U UD UOP UW

様々な症例に

導入をご検討の方まずはこれ1本!

適度な柔らかさと形態保持性を持つ性状で、幅広い症例に使用できます。様々な症例において、周縁の歯質やコンポジットレジンに色調が親和します。

【例】



I級




IV級

NEW!

High U、UD、UOP



採取1分後(水平)

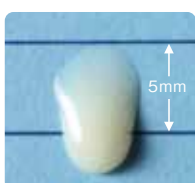

採取1分後(垂直)



U UD UOP


小さな窩洞や、ライニングに

流れのよい性状で、小さな窩洞や窩底部に使用できます。前歯部の小さな窩洞でも充填部の明度低下を防いで色調が親和します。

【例】



I級

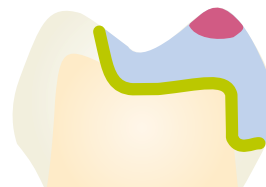

II級

「クリアフィル® マジェスティ® ESフロー Universal」 前歯IV級修復症例 症例提供: 田代 浩史 先生



術前: 前歯部破折症例へのコンポジットレジンIV級修復を計画



3Dタイプのクリアマトリックスを活用して、ESフロー Universal(Low)による充填操作



術後: 適切な色調咬合により、短時間で審美性の回復が可能



クラレノリタケデンタル
特設サイトはこちらこちら!

クリアフィル® マジェスティ® ESフロー Universal

Super Low

Low

High

追加ラインナップキャンペーン

[実施期間] 2021.11.22>>>12.20 **数量限定**

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、『クリアフィル® マジェスティ® ESフロー Universal 追加ラインナップキャンペーン』を企画いたしました。下記対象商品を **特別価格** にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

クリアフィル® マジェスティ® ESフロー Universal 単品

■標準価格 各4,300円 202440600~202440603
202440610~202440612
202440620,202440621

- レジン充填材<Super Low・Low・High> 各2.7g (1.5mL)
- 付属品 ニードルチップ(N) (5個)
ニードルチップキャップ (5個)



※本品は、袋包装です。

販売名 クリアフィル®マジェスティ® ESフロー
一般的名称 歯科充填用コンポジットレジン
医療機器認証番号 224ABZ00170000
医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ)

特別価格にてご提供!

○シェードラインナップ

		Super Low	Low	High
U	VITA※1主要シェードに対応 (A1、A2、A3など)	●	●	●
UD	濃色 (A3.5やA4をカバー)	●	●	●
UOP	オペーク色 (A2D、A3Dに近い)		●	●
UW ^{※2}	ホワイトニングした歯、乳歯色 (W、XWに近い)		●	

※1 [VITA]はVITA Zahnfabrik, Bad Sackingen, Germanyの商標です。

※2 本製品の中で最も明度が高い色調です。

通常色も継続発売中!!

クリアフィル®マジェスティ® ESフロー

内容 レジン充填材(各2.7g/1.5mL)

標準価格 各4,300円

202430321~202430325

202430301~202430312

202430341~202430344



友だち追加は
こちらから

クラレノリタケデンタル LINE公式アカウント

●クラレノリタケデンタル製品の商標、ロゴマークはクラレノリタケデンタル株式会社もしくはその親会社である株式会社クラレに帰属します。●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2021年11月22日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あしからずご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。●価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社
新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T 0800.222 8020(フリーコール)
www.dental-plaza.com

歯科用象牙質接着材(歯科セラミックス用接着材料)(歯科金属用接着材料)(歯科用知覚過敏抑制材料)(歯科用シーリング・コーティング材)

クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick ER

ベストマッチキャンペーン

[実施期間] 2021.11.22>>>12.20 **数量限定**

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、『クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick ER ベストマッチキャンペーン』を企画いたしました。ぜひ、この機会をご利用ください。

クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick ER
単品1箱を ○内容 5.6mL×1本 ■標準価格 13,400円 202430583



特別価格にてご提供!

クリアフィル®
 ユニバーサルボンド
 Quick ER
Wパック1箱と

○内容 5.6mL×2本

■標準価格 24,120円 202430584



クリアフィル®
 マジェスティ®ESフロー
 <Low> Universal [U] イントロ
1本を

■標準価格 2,350円

○内容 レジン充填材<Low>
 0.9g (0.5mL)

○付属品 ニードルチップ(N)5個
 ニードルチップキャップ(5個)



※本品は、袋包装です。

詰め合わせて

特別価格にてご提供!

キャンペーンコード 202430579

販売名 クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick ER 一般的名称 歯科用象牙質接着材(歯科セラミックス用接着材料)(歯科金属用接着材料)(歯科用知覚過敏抑制材料)(歯科用シーリング・コーティング材) 医療機器認証番号 228ABZK00065000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)
 販売名 クリアフィル®マジェスティ®ESフロー 一般的名称 歯科充填用コンポジットレジン 医療機器認証番号 224ABZK00170000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)

クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick ER
 この1本でオールマイティに使える



製品の詳細については
 WEBからご確認ください。



●クラレノリタケデンタル製品の商標、ロゴマークはクラレノリタケデンタル株式会社もしくはその親会社である株式会社クラレに帰属します。●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2021年11月22日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あしからずご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。●価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社
 新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販売 株式会社 モリタ


大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
 東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
 お問い合わせ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T 0800.222 8020(フリーコール)
 www.dental-plaza.com

クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick ER ではじめる 簡単・高接着なシステム提案



強固なボンド層による象牙質の保護

薄膜で強固なボンド層の形成により、印象採得などによる負荷でも剥離が生じにくく、長期的な象牙質のコーティングが期待されます。

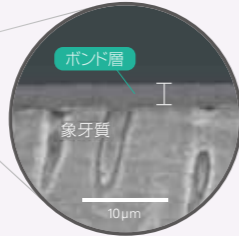

ボンド層
象牙質
10µm

※本品による歯面コーティング後に抜去歯を断面、断面をSEM観察

象牙質レジンコーティング^{※1}

CR充填修復^{※3}

「ボンド塗布後の待ち時間なし」によるスムーズな治療

クリアフィル®マジスティ®ESフロー

Universal

Super Low Low High

色がマッチする3つの要素

白歯にも前歯にも1本で馴染む独自技術
Auto Color Matching System クラレ技術

- 1 光透過性
光がCRを通し、窩洞や周囲の色に反射して、歯質の色が見える
- 2 光拡散性
光がCRの中で反射して、CR自体の色が見える
- 3 ユニバーサルクロマ
歯の色調領域において、歯の黄みや赤みに影響を与えない色調に設定

CR充填

クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick ER

この1本でオールマイティに使える



管理
クリアフィル
ユニバーサルボンド Quick ER
ボンド 5.6mL
クラレリタケデンタル株式会社
新潟県胎内市倉敷町2-28

支台築造

光が届きにくい根管内でも重合^{※4, ※5}

触れると固まる
タッチキュアテクノロジー

クリアフィル®DCコア オートミックス ONE

「クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick ER」は「クリアフィル®DCコア オートミックス ONE」と接触すると、硬化を開始しますので根管内にも使用することが可能です。
※「クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick ER」には、必ず光照射をしてください。

SAルーティング® Multi

面倒な接着前処理はもう不要!

すべての補綴装置にSAルーティング® Multi 1本で!

補綴装置側	メタル
	CAD/CAMレジン冠
	歯科用陶材
	シリカ系ガラスセラミックス (ニケイ酸リチウム)
	ジルコニア

すべての支台歯にSAルーティング® Multi 1本で!

支台歯側	天然歯 (エナメル質・象牙質)
	レジンコア
	メタルコア

業界初 シラン含有

接着性モノマー含有

長鎖シランカップリング剤「LCSi」
CAD/CAMレジン冠・歯科用陶材・シリカ系ガラスセラミックス (ニケイ酸リチウム) へ高い接着性を発揮する

MDP MONOMER
リン酸エステル系モノマー「MDP®」
歯質・金属・ジルコニアなどに高い接着性を発揮する

セメント接着

人歯せん断接着強さ (「SAルーティング® Multi」との併用)

(MPa)

併用すると接着力 1.7倍

● エナメル質 ● 象牙質

SAルーティング® Multi SAルーティング® Multi

クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick ER

測定条件:
#1000研磨、被覆面積:φ3mm
マージン部へベンキュア 2000にて2方向から各10秒光照射
クロスヘッドスピード1mm/min、オートグラフ AG-100KN(島津製作所)を使用
37℃水中保管1日後測定

WEBINAR 1本で色調再現!

新しいコンセプトのフロアブルCRを臨床で使いこなすコツ

コンポジットレジン修復の新しいスタンダードとなりうる「クリアフィルマジスティESフロー-Universal」を臨床で使いこなすコツやポイントと、CR充填に関する3人の講師陣から其々のテーマについてご講演頂きます。既にご導入の先生や、現在ご検討いただいている先生方、是非ともご参加ください。

第1弾 終了

脇 宗弘先生
大阪府大阪市開業

※申込期日 2021年10月22日(金)

第2弾 申し込み受付中!

田代 浩史先生
静岡県浜松市開業

※申込期日 2021年11月26日(金)

第3弾 申し込み受付中!

江川 光治先生
福岡県福岡市開業

※申込期日 2022年1月21日(金)

携帯電話・スマートフォンからも申込みいただけます。