

YOSHIDA

プラーク<sup>や</sup>磨き残しを

# スマホで 簡単チェック



小さいけれど  
大きな驚き!



Bacteria Self-checker  
『mil-kin(見る菌)®』C-Type

“患者様のモチベーションをあげたいが、TBI をしても、なかなか説明だけでは伝わらない...”

“突然のキャンセルや治療途中で患者様がこなくなってしまう...”

# mil-kin は患者様のモチベーションアップツールです。

患者様のモチベーションが変わると患者様の行動が変わります。

その他にも、  
歯科衛生士に自発的に動いてもらいたい...  
物販や自費をUPしたい...等々...

チェアサイドでの実際流れを見てみよう！

使い方を動画で  
チェック！



## その悩み mil-kin が解決します



チェアサイドで  
簡単チェック



口腔内細菌を  
リアルタイムに確認



患者様のモチベーション  
デンタルIQをUP



スマートフォンで  
簡単チェック



コンパクト設計  
訪問診療に対応

### かんたん3ステップ

1 採る




見たい場所から  
サンプリング

2 載せる



サンプルを  
ガラスに載せる

3 見る

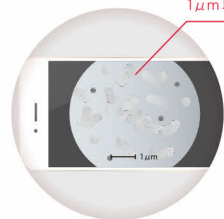

見えるサイズ  
1μm以上  
スマホで見やすい大きさに  
拡大してサンプルを見る

特別なアプリは必要ありません。お持ちのスマートフォンでご使用いただけます。

### ツールとして 利用範囲は無敵大！



患者説明ツールとして

“患者さんにその場で見せる”  
患者さんの口腔内を「見える化」することで、  
患者さんのモチベーションアップへ。



教育ツールとして

“動画や静止画を情報共有”  
動画や静止画でビジュアル化でき患者教育だけ  
でなく、医院スタッフ間の情報共有や教育にも。

### 患者様のモチベーション向上により 歯科衛生士のモチベーション向上にも繋がります。

歯周病やプロケアの必要性に対する関心が高まり、ブラッシングや定期来院の意欲向上に繋がります。  
患者様と歯科衛生士のコミュニケーションが増え、自然と歯科衛生士のモチベーションも上がり、  
目標とやりがいを持って仕事に取り組みます。



Bacteria Self-checker

mil-kin.

## バクテリア・セルフチェッカー 『mil-kin(見る菌)®』C-Type

倍率	1,000倍
被写体サイズ	1μm以上
光源	LED
電源	単三型アルカリ乾電池(2本)
寸法 (W×D×H)	mil-kin本体:55mm×113mm×140mm スマホスタンド含む:175mm×113mm×146mm
重さ	約450g(本体・スマホスタンド・乾電池)
標準付属品	ピペット(2本) / マイクロチューブ(2個) / 歯間ブラシ(2本) カバーガラス15mm丸型100枚入り(1箱) / 単三型アルカリ乾電池(2本)

●本製品の販売は日本国内のみとさせていただきます。

- 備考
- ※1 防水仕様ではありません。
  - ※2 見るサンプルは液体で透明に近く、光が透過できる液体となります。
  - ※3 スマートフォンは、含まれておりません。
  - ※4 本仕様は2021年10月現在の仕様となり、予告なしに変更する場合がございますので、予めご了承ください。
  - ※5 「mil-kin(見る菌)®」および「菌未来」は、株式会社mil-kinの登録商標です。



※画像はイメージです

## mil-kinで見える細菌類

1. 運動性細菌
2. 白血球
3. スピロヘータ
4. 紡錘状菌



発売元

株式会社 **ヨシダ** 東京都台東区上野7-6-9

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問合せ：**0800-170-5541**

対応時間：月～金 9:00-19:00 土 9:00-17:00 (日曜・祝祭日を除く)

歯科医院様専用フリーダイヤルのため、お問合せは固定電話専用となっております。  
携帯電話からは03-6880-2155にお問合せください。

製造元

株式会社 mil-kin

<https://www.mil-kin.com/>



お問い合わせは



(01)02747937019290

C02360/2021年11月/PRI/15/@40/新