

ハンドピース専門メーカーナカニシのハンドピースのための滅菌器

滅菌応援 キャンペーン

2025

1/21火

3/20木



製品の詳しい
情報はこちら



ナカニシ社製滅菌器 iClave mini2 特別価格でご提供致します

※お取引ディーラー様へお問い合わせください



特長

1

ハンドピースにやさしく 内部までしっかり滅菌

高圧蒸気重力置換による高い滅菌力

滅菌前の重力置換工程を従来より増やし、さらにハンドピースの滅菌に適した縦型配置により、蒸気浸透度を高めることで、滅菌力が向上しました。

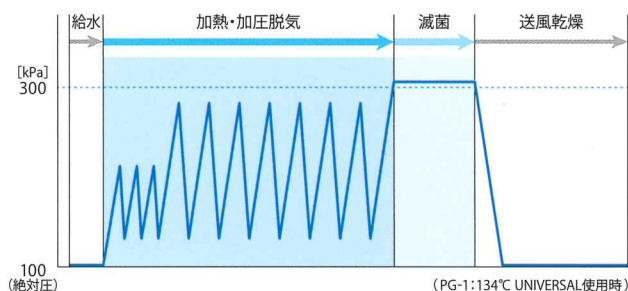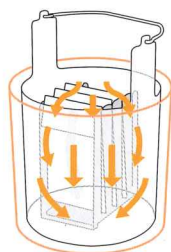

特長

2

優れた操作性で お手入れも簡単

見えやすく、簡単操作のLCDパネル

LCDパネルを採用したことで、視認性が大幅にアップ。用途にあったプログラの中から選択し、ボタンを押すだけの簡単操作。また、プログレスバーにより、現在の進行状況や残り時間が一目で分かります。

使いやすさと清掃性が向上したスマートデザイン

LCDパネル採用したシームレスな外装は、清掃がしやすく、簡単にお手入れが可能です。



ヨーロッパ滅菌基準

EN13060: Class S 準拠



セット
内容

iClave mini2 ユニット / バスケット
仕切りスタンド / 仕切り板(長)×4
仕切り板(短) / 排水タンク
各種基本パーツ

仕様

外形寸法(ドア全開時:H): W210×D370×H360mm(H600mm) / 総重量(ユニット本体): 17.5kg / 電源: AC100V 50/60Hz
消費電力: 750VA(定格消費電力750W) / チャンバー寸法: ø130×L200mm / チャンバー容量: 2.5L
給水タンク容量: 1.5L / 排水タンク外形寸法: W140×D195×H234mm / 排水タンク容量: 5L / 排水ホース: 1.5m
ハンドピース滅菌本数目安: 12本(未包装)、6本(一重包装)

	プログラム	温度	滅菌時間	包装形態
PG-1	134℃ UNIVERSAL	134℃	5.5分	一重包装
PG-2	134℃ FAST	134℃	3.5分	未包装
PG-3	121℃ UNIVERSAL	121℃	35.5分	一重包装
PG-4	121℃ FAST	121℃	30.5分	未包装

- UNIVERSAL: 一重包装 FAST: 未包装(滅菌後即時使用)
- 滅菌(STERILIZING)工程の前に、加熱(HEATING)工程が約8-25分かかります。
- 使用する水は、15μS/cm以下の蒸留水、精製水、純水、または、イオン交換水、RO水のいずれかをご使用ください。
- 送風乾燥時間は(2-90分)の変更が可能です。

製品名	製品番号	標準価格
iClave mini2 標準セット	Y1500013	¥459,000

販売名:アイクレブミニ2 一般的名称:小型包装品用高圧蒸気滅菌器 認証番号:302ABBZX00049000 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■ナカニシ社製品販売代理店



株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町6-35 TEL:06-6773-3333 FAX:06-6773-3361
東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東2-24-2 TEL:03-3835-2653 FAX:03-3835-2596
九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂6-24-21 TEL:092-575-6060 FAX:092-575-5002

<http://www.momose-dm.co.jp>

■製品に関するお問い合わせ・ご注文は下記取扱店まで

仕様および外観は製品改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。