

YOSHIDA がオススメする

歯科用洗浄器を 導入しませんか？

3つのアドバンテージ

First Advantages

手洗いより
効率的

Second Advantages

針刺し
事故防止


Third Advantages

院内感染
対策※

外観スッキリ

Built in type

ビルトインタイプ

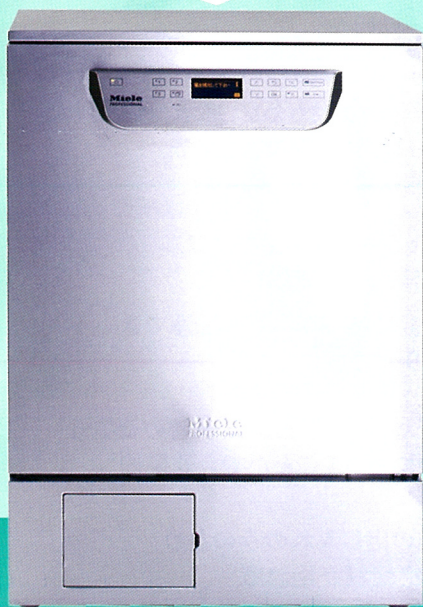

Miele

ジェットウォッシャー PG8591

設置工事不要

Stationary type

据え置きタイプ



Panasonic

自動ジェット式器具洗浄機 NP-TMM7-A

※血液で汚染された手術器具は国際規格(ISO15883)によると、ウォッシャー・ディスインフェクターを使用した際の性能にA₀値3000以上を達成できることを求めています。
また、World Forum for Hospital Sterile Service(WFHSS)では、細菌や熱に弱いウイルスにはA₀値600を、B型肝炎ウイルスなどの耐熱性病原体にはA₀値3000を推奨しています。


製品の詳細は裏面へ

外観スッキリ

Built in type

ビルトインタイプ

をご希望のお客様

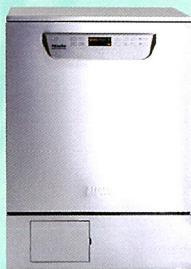


ABOUT SPEC

設置工事不要

Stationary type

据え置きタイプ

をご希望のお客様

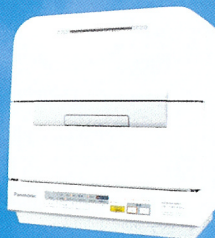

W600 × D600 × H835mm(天板付)

外形寸法

W550 × D344 × H592mm

大容量 約78kg

重量

約21kg コンパクト

基本セット25名分

容量

基本セット10名分

Ao値3000(90° 温水を5分)

洗浄性能

Ao値600(80° 温水を10分)

2,300,000円(税別)

本体定価

580,000円(税別)

ハンドピース洗浄機能付ラック

その他

オプション豊富(内容は上部QRコードから)

ミーレ ジェットウォッシャー PG8591

一般的名称：器具除染用洗浄器
製造販売元：ミーレ・ジャパン(株)
届出番号：13B2X10362000017(一般医療機器)
循環ポンプ能力：500リットル/分
電源電圧：3相200V(20A)50Hzまたは60Hz
給水：3/4inch 1-8bar
排水：2inch SGP
乾燥方法：ドライプラス
(内蔵式ドライヤーによる強制乾燥)

自動ジェット式器具洗浄機 歯科用

一般的名称：器具除染用洗浄器
製造販売元：パナソニック(株)
届出番号：13B1X10381001001(一般医療機器)
電源電圧：交流100V 50Hzまたは60Hz
給水：3/4inch 1-8bar
排水：2inch SGP
乾燥方法：ヒーターとファンによる
強制排気乾燥



▲洗浄試験動画はこちら

歯科用洗浄器を使用すると、どんな違いがでるの？

項目	手洗い	洗浄器
洗浄力	洗い残しの可能性がある	熱水消毒効果もあり、血液や体液中のたんぱくなどの汚れを除去(機器により性能差あり)
コスト	人手を介し時間を要する	・セッティングさえすれば洗浄に加え乾燥まで可 ・一度に多くの器具が洗浄できより労力を軽減
感染対策	機器に触れる時間も長く、十分に汚れを除去できないリスクがある	血液・体液など医療従事者の暴露を大幅に減らすことができ効果的
機器・人体への損傷	洗い方によって機器及び手指への切創リスクあり	機器の出し入れのみのためリスク軽減が図れる

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

価格は2024年5月現在。

禁無断転載

●お問い合わせ先

●取扱店

株式会社 **ヨシダ** 東京都台東区上野7-6-9

フリーダイヤル:0800-170-5541 http://www.yoshida-dental.co.jp



(01)02747937021798

C02610/2024年5月/@1/新