

DENTAL PRODUCTS CATALOG

 佐藤歯材株式会社

〒110-0015 東京都台東区東上野1-15-3
TEL. 03-3833-3986 FAX .03-3833-3989
URL. <http://www.satoushizai.co.jp>
[松戸商品センター]
〒271-0068 千葉県松戸市古ヶ崎207-1



ISO 9001/14001 認証取得

佐藤歯材総合カタログ
Vol.21

2024年11月発行

- 表示価格は2024年11月現在の医院価格、患者価格です。
- 表示価格に消費税は含まれておりません。
- 仕様および価格、包装は予告なく変更する場合があります。

CONTENTS 目次

感染制御

オロリン マルチセプトプラス	4
オロリン パーバス	4
オロクリーン ソーキングトレー	4
イソラビッド	5
デンディロワイプス／デンディロジャンボワイプス	5
デンティロ ゼロ	6
オロクリーン プラス	6
アセプトプリント スプレー	7
アセプトプリント リキッド	7
効果一覧表	8
SUN402 インストルメントエンザイム	9
SUN420J インストルメントDIFパウダー	9
SUN180K ラビッドサーフェスプラス	10
SUN260 ウェットワイプス アルコールベース 容器付／SUN261 詰替用	10
SUN500 サクション クリーナー	11
SUN520 インプレッション DIF	11
SUN920 スプレーボトル	12
効果一覧表	12
デンタルラビッドSDリキッド	13
効果一覧表	13
DIFクロス	14
特大除菌クロス	14

CAE器具用 色が変わればお取り替え	15
こもの錆びてま専科	15
パイプつまりま専科スーパー	15
除菌洗濯しま専科	15

オロキーパー SAタイプ	16
ブチクールジェル80	16
高透明・低反射フェイスシールド	16

衛生・予防・口腔ケア・介護

クローバー 歯垢染め出し液	17
染め出し液落とし隊	17
ナノフロス マイクロライザー	18
医療用長息生活	18
ベビースマイルレインボー S-206	19
ベビースマイルレインボー3+ S-205	19
ベビースマイルレインボー3+ E-101	20
ベビースマイルレインボー 専用替えブラシ2本セット	20
ベビースマイル S-303	20
キュオム ウェットプラス	21
はちみつモイスト	21
デンタルートF	21
スマイルハニー ナチュラルデントクリーナー	22
スマイルハニー オーラルクリーンジェルスプレー	22
クローバー「無痛」バキュームチップ Ver.2	23
万能小筆 混毛	23
SUN438P ベリオタガトース	24
SUN435Q レモン	24
クローバー スパークリングミラー	24
クローバー ポリッシングブラシ(PMTC用)	25
スパークリングスマイル コントラ エクストラソフト 雪色(PMTC用)	25
ジャーマンアブリケーター&ブラシ	25

技工用品

クローバー フィンガー君	25
Luvis E-100	26

白衣

ds+ミラノ メディカル ファッション	27
フライハイトキャップ	28

研削・研磨材

Panther パンサー	29
--------------------	----

会社概要

社名	佐藤歯材 株式会社
代表者	代表取締役 佐藤 文昭
所在地	〒110-0015 東京都台東区東上野 1-15-3
TEL	03-3833-3986
FAX	03-3833-3989
事業内容	歯科器械 材料 薬品 美容製品 卸売・輸出入

会社紹介

佐藤歯材は大正13年（1924年）6月、初代社長佐藤次男が東京都駒込道坂に佐藤歯科商会として開業しました。

その後現在地に移り、昭和43年に佐藤歯材株式会社に社名変更、歯科器械材料薬品一次問屋として、

日本の歯科材料流通に微力ながら邁進してまいりました。

2010年にISO9001を取得
2010年にISO14001を取得



当社の目指すところ

創業1924年より歯科医療器材、薬品、材料専門商社として歩んで参りました。

2024年におかげさまで100周年を迎えることができました。

長い経験と知識をもとに国内外の先進的な企業と協業し患者様のQOLの増進のみならず

人類の健康に寄与していくことを目標としております。

Company Name : Satou Dental Material Co.,Ltd.
Address : 1-15-3 Higashi-Ueno Taito-ku Tokyo 110-0015 Japan
Phone : 81-(0)3-3833-3986 Fax : 81-(0)3-3833-3989
E-mail : info@satoushizai.co.jp Website : http://www.satoushizai.co.jp

We have been in business successfully since 1924 as Dental Whole Saler in Japan that is one of most tough market in the world.

We celebrated our 100th anniversary in 2024.

Now we are expanding our business field not only to European Countries but also to all of the world.

So we always welcome any inquiries from any countries.

表示マークについて

- カタログ カタログのご用意があります
- サンプル サンプルのご用意があります
- 試着 試着のご用意があります
- 貸出 貸出のご用意があります



一般器具、外科用器具



小器具、バー、リーマー、ファイル



超音波洗浄器の併用を推奨します。



シリコンゴム、プラスチック器具




ユニット、設備、合成皮革



アルコールに耐性がない材質はデンティロゼロを推奨します。



バキューム回路、スピットン

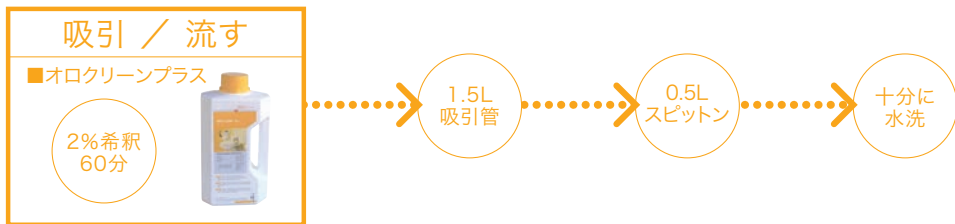

昼休憩中および診療後の1日2回のご使用を推奨します。



印象体、印象トレー



血液が多量に付着している場合はアセプトプリントリキッドを推奨します。



器具用 除菌／洗浄剤

カタログ

オロリン マルチセプトプラス（アルデヒド非含有）

1ステップで除菌と洗浄が可能



Dosing			
	Concentrate	Water	Time
2%	20ml	980ml	15min

用 途

- 一般器具、外科用器具、インプラント器具の洗浄・除菌・防錆

特 長

- 予備洗浄が不要で洗浄と除菌が同時に可能です。
- 最長 7 日間まで連続使用が可能です。

使用方法（希釈使用）

- 汚染物の飛沫を防ぐため器具を水洗いせずに50倍（2%）希釈液に15分間浸漬してください。
浸漬後は薬液が落ちるまで十分に水洗いしてから滅菌処理してください。
超音波洗浄器または蓋付容器をご使用ください。

主成分

- アルキルアミン、塩化ジアルキルジメチルアンモニウム、防錆剤

pH:11.5~13
医薬用外劇物

規 格	医院価格
2L	¥14,800

回転小器具用 防錆／除菌／洗浄剤

サンプル

オロリン バーバス（アルデヒド非含有）

短時間除菌と優れた防錆力



用 途

- バー、リーマー、ファイルなど 回転小器具の洗浄・除菌・防錆。

特 長

- 微細な構造の回転小器具に 1 分間で作用します。
- 防錆成分が多く配合されています。
- 最長 7 日間まで連続使用が可能です。

使用方法（原液使用）

汚染物の飛沫を防ぐために回転小器具を水洗いせずに超音波洗浄器または専用蓋付容器に原液で 1 分間浸漬してください。
防錆効果を持続するために浸漬後は水洗いせずに乾燥させてから滅菌処理してください。

主成分


- イソプロパノール、フェノキシエタノール、第 4 級アンモニウム化合物、腐食防止剤

pH:13~14

規 格	医院価格
1L	¥5,200
5L	¥19,800
専用容器	¥3,400
5L用コック	¥1,800

アクセサリ

オロクリーン ソーキングトレー

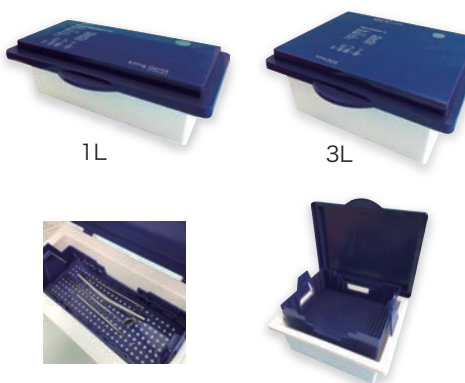

特 長

- 希釈液を簡単に作れるトレーです。
- バスケット付で水切りができます。
- 内側に計量目盛りがついています。
- タイマーの取付ができるメタルプレート付です。

素 材

- ABS 樹脂。

サイズ

- 1L 用 / W310×D185×H100mm(外寸)
- 3L 用 / W315×D285×H130mm(外寸)

内容量	医院価格
1L用容器	¥6,800
3L用容器	¥10,800

表面用 除菌スプレー

イソラピッド

サンプル

幅広い抗菌スペクトル



スプレータイプ 1L

補充用 2L

用 途

- ユニット、医療機器、手用器具、備品、設備など表面の除菌。

特 長

- 幅広い抗菌スペクトルで多くの微生物に 1 分間で作用します。
- 2L 補充用があり経済的です。

使用方法（原液使用）

- 液体を清潔なクロスまたはDIFクロス(P14)に浸み込ませて清拭してください。
- 1 分間放置し、その後自然乾燥させるかデンティロワイプスもしくは清潔なクロスで拭き取ってください。
- アルコールに耐性のないデリケートな素材の表面やPC液晶ディスプレイには使用しないでください。

主成分

- イソプロパノール、エタノール、第 4 級アンモニウム化合物

規 格	医院価格
スプレータイプ 1L	¥6,800
補充用 2L	¥11,800

表面用 除菌クロス

デンティロワイプス／デンティロジャンボワイプス

作業が簡単なクロスタイプ



レギュラーサイズ
14.5×20cm

ジャンボサイズ
14.5×40cm



デンティロワイプス



ジャンボワイプス

用 途

- ユニット、医療機器、手用器具、設備など表面の除菌。

特 長

- 幅広い抗菌スペクトルで多くの微生物に 1 分間で作用します。
- デンティロワイプスは無香料、レモンの香りがあります。
- ジャンボワイプス（無香料のみ）はより広範囲な除菌清拭に使用可能です。
- 往診や介護にも使用できます。

使用方法

- 専用容器（別売）にセットし、1 枚ずつ取り出して対象とする部分、器具表面を十分に清拭して 1 分間放置してください。
- 使用後は容器の蓋を確実に閉めてください。

主成分

- イソプロパノール、エタノール、第 4 級アンモニウム化合物、精製水、香料

規 格	医院価格
デンティロワイプス 120枚入 各種	¥3,400
容器（別売）	¥300
デンティロジャンボワイプス 100枚入	¥5,600
容器（別売）	¥500

表面用 除菌スプレー

デンティロ ゼロ（アルコール非含有）

サンプル

アルコールに敏感な材質に配慮



用 途

- 液晶ディスプレイ、本革、プラスチック、アクリルガラスなどデリケートな素材の表面除菌。

特 長

- アルコールに敏感な材質に適しています。
- 刺激臭を抑えた成分構成です。
- 除菌と同時に汚れも落とします。

使用方法（原液使用）

- 清潔なクロス等に浸み込ませて、対象物の表面を清拭してください。
- 1分間放置し、その後清潔なクロス等で液を拭き取ってください。

主成分

- アミノ-アルキル-グリシン、ベンゼル-アルキルディメチル-アンモニウムクロライド、精製水

規 格	医院価格
1L	¥6,800

バキューム回路・スピットン用 除菌／洗浄剤

オロクリーン プラス（アルデヒド非含有）

サンプル

バキューム回路、スピットンの除菌洗浄



用 途

- 治療ユニットや診療所内の排水設備、バキューム回路の除菌・洗浄。

特 長

- 無発泡性で泡の逆流や不快な臭いを抑制します。
- 吸引システム・スピットンの除菌・洗浄・脱臭メンテナンスが同時に行えます。

使用方法（希釈使用）

- 50倍に希釈して2%溶液を作製します。
- 診療時間終了後や外科処置後など必要に応じて各ユニットごとに溶液1.5Lを吸引管よりバキュームさせます。
- 同様に溶液 500ml をスピットン鉢に流します。
- 60分間放置後にはバキューム回路 とスピットン鉢 を十分に水洗いしてください。

主成分

- ベンゼル-アルキルディメチル-アンモニウムクロライド、発泡防止剤、界面活性剤

pH：10～12

規 格	医院価格
2L	¥11,400

Dosing		
2%	Concentrate + Water 40ml 1960ml	Time 60min

印象用 除菌スプレー

アセプトプリント スプレー（アルデヒド非含有）

カタログ

印象表面を 1 分間で除菌洗浄



用 途

- 印象体、印象トレー、矯正装置、ワックスバイト、シリコンバイトなどの除菌・洗浄。

特 長

- 幅広い抗菌スペクトルで多くの微生物に 1 分間で作用します。
- アルジネート、シリコン、寒天印象材に使用できます。
- 寸法精度や面荒れの影響に配慮した成分です。

使用方法（原液使用）

- 血液・唾液が多量に付着している際は飛散しないよう水洗いしてください。
- 印象表面およびトレー全体にスプレーしてください。
- 1分後、表面を丁寧に水洗いし石膏を注入してください。（印象材によっては石膏の最適時期が異なりますので、印象材メーカーの指示に従ってください。）

主成分

- エタノール、1-プロパノール、第4級アンモニウム化合物

規 格	医院価格
スプレータイプ 1L	¥6,800
詰替用 1L	¥6,600

印象用 除菌／洗浄剤

アセプトプリント リキッド（アルデヒド非含有）

サンプル

カタログ

印象体の除菌と洗浄が同時に完了



用 途

- 印象体、印象トレー、矯正装置、ワックスバイト、シリコンバイトなどの除菌・洗浄。

特 長

- 予備洗浄が不要で洗浄と除菌が同時に可能です。
- 各種印象体に使用できます。
- 希釈使用のため経済的です。

使用方法（希釈使用）


- 水 970ml に対して原液 30ml を希釈させ溶液を作製します。
- 印象を採取後、印象体を水洗いせずに 1 分間浸漬させてください。
- 1 分経過したら表面を丁寧に水洗いし、石膏を流してください。シリコン印象材、アルジネート印象材にも使用できます。

主成分

- ベンゼル - アルキルディメチル - アンモニウムクロライド、界面活性剤、洗浄促進剤

pH：10.5～12.5

規 格	医院価格
1L	¥18,400

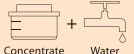Dosing			
		+	
3%	Concentrate 30ml	Water 970ml	Time 1min

効果一覧表

欧州(RKI)基準の院内感染予防製剤はその目的により製品のラベルが色分けされています。

ブルーは器具用、グリーンはユニットやハンドピースなどの表面、イエローは印象表面やバキュームシステムが対象になり誤使用しないように企画デザインされています。

器具

品 名	用 途	使用方法	HBV	HCV	HIV	コロナウイルス	MRSA	結核菌	アデノウイルス	一般細菌	インフルエンザA型ウイルス	ポリオウイルス
オロリンマルチセプトプラス	器具	希釈	5分2%	5分2%	5分2%	5分2%	5分2%	5分2%	5分2%	5分2%	5分2%	15分2%
オロリンバーバス	小器具	原液	30秒	30秒	30秒	1分	30秒	1分	1分	30秒	15秒	1分

表面

品 名	用 途	使用方法	HBV	HCV	HIV	コロナウイルス	MRSA	結核菌	アデノウイルス	一般細菌	インフルエンザA型ウイルス	ポリオウイルス
イソラビッドスプレー	ユニット	原液	30秒	30秒	30秒	30秒	1分	1分	1分	1分	15秒	1分
デンティロワイプス	ユニット	原液	30秒	15秒	30秒	30秒	1分	1分	1分	1分	15秒	1分
デンティロゼロ	ユニット	原液	30秒	30秒	30秒	1分	1分	60分	60分	1分	30秒	60分

バキュームシステム／印象表面

品 名	用 途	使用方法	HBV	HCV	HIV	コロナウイルス	MRSA	結核菌	アデノウイルス	一般細菌	インフルエンザA型ウイルス	ポリオウイルス
オロクリーンプラス	バキューム回路スピットン	希釈	5分2%	5分2%	5分2%	5分2%	5分2%		30分2%	5分2%	5分2%	60分2%
アセプトプリントスプレー	印象体	原液	30秒	30秒	30秒	30秒	1分	1分	1分	1分	15秒	1分
アセプトプリントリキッド	印象体	希釈	1分3%	1分1%	1分3%	1分3%				1分3%	1分3%	

- ・上記データは欧州規格に準じた試験結果です。
- ・製品成分はすべてアルデヒド、フェノール、塩素を含まない人体・環境に配慮した生分解性です。



器具用 除菌／洗浄剤

SUN402 インstrumentエンザイム（アルデヒド非含有）

感染制御



用 途

- 一般器具、インプラント器具、外科用器具、印象用トレー、吸引管などの洗浄・除菌・防錆。

特 長

- 予備洗浄が不要で洗浄と除菌が同時に可能です。

使用方法（希釈使用）

- 汚染物の飛沫を防ぐために器具を水洗いせずに超音波洗浄器または蓋付容器に50倍希釈で30分間浸漬してください。
浸漬後は十分に水洗いしてから滅菌してください。

主成分

- ビス(3- アミノプロピル)- ドデシルアミン 3.3g
ジデシルメチル - ポリオキシエチルプロピオン酸アンモニウム 2.8g
防錆剤 / 精製水 / 香料 / 酵素剤(プロテアーゼ、アミラーゼ、リパーゼ)

pH:10
医薬用外劇物

Dosing			
		+	
2%	20ml	980ml	30min

規 格	医院価格
2.5L	¥23,000

非耐熱器具用 除菌／洗浄剤

SUN420J インstrumentDIFパウダー（過酢酸系製剤）

カタログ

用 途

- シリコンゴム、プラスチック、内視鏡など非耐熱性器具の洗浄・除菌・防錆。

特 長

- 予備洗浄が不要で洗浄と除菌が同時に可能です。
- 耐熱性がない器具の除菌に適しています。
- 芽胞をはじめ広範囲の微生物に作用します。

使用方法

- 50倍希釈は蓋付容器に付属の計量スプーン1杯(粉末20g)と40℃の温水980mlを入れてよくかき混ぜてください。15分間浸漬後に流水下で十分に水洗いしてください。
- 100倍希釈は蓋付容器に付属の計量スプーン0.5杯(10g)と40℃の温水990mlを入れてよくかき混ぜてください。60分間浸漬後に流水下で十分に水洗いしてください。

主成分

- 炭酸ナトリウム過酸化水素化物、テトラアセチルエチレンジアミン、クエン酸、界面活性剤、防錆剤

pH:8

Dosing			
		+	
2%	20g	980ml	15min

規 格	医院価格
1.5kg	¥18,000

表面用 除菌スプレー

SUN180K ラピッドサーフェスプラス（携帯用）



用 途

- ユニット、医療機器、手用器具類、備品、設備など表面の除菌。

特 長

- 往診に便利な携帯用スプレーです。
- 幅広い抗菌スペクトルで多くの微生物に1分間で作用します。

使用方法（原液使用）

- 原液をクロスに噴霧してから対象物の表面を拭いてください。
- 1分間放置後してから自然乾燥または拭き取ってください。

主成分

- 1-プロパノール 37g、エタノール 24g

pH:5~8

規 格	医院価格
200ml	¥1,800

表面用 除菌クロス

SUN260 ウェットワイプス アルコールベース 容器付／SUN261 詰替用



13×20cm

用 途

- ユニット、医療機器、手用器具類、備品、設備など表面の除菌。

特 長

- 厚手のクロスで拭きやすいです。
- 詰替用があり経済的です。
- 幅広い抗菌スペクトルで多くの微生物に1分間で作用します。

使用方法

- 容器から1枚ずつ取り出して対象物の表面を拭いて1分間放置してください。

主成分

- エタノール 35.0g、第4級アンモニウム化合物 0.066g、香料

規 格	医院価格
容器付 100枚入	¥3,400
詰替用 100枚入	¥3,000

感染制御

スπιットン 吸引管 用 除菌／洗浄 剤

SUN500 サクシヨ ン クリーナ ー （アルデヒド非含有）



用 途

- 治療用ユニットや院内の排水設備、バキューム回路の洗浄・除菌。

特 長

- 無発泡性で泡の逆流や不快な臭いを抑制します。
- アルデヒド、フェノール、塩素非含有で使用者や環境にやさしい成分です。
- 吸引システム・スπιットン の除菌・洗浄・脱臭メンテナンスが同時に行えます。

使用方法（希釈使用）

- 希釈した溶液を外科処置後や診療時間後に希釈液1Lをスπιットン鉢に流します。同様に希釈液1Lを吸引管より吸引します。3%（33倍希釈）は2分、2%（50倍希釈）は5分、1%（100倍希釈）は60分で作用します。

主成分

- ジメチル - ジオクチル塩化アンモニウム 7.5g
ベンジル - ジメチルドデシル塩化アンモニウム 0.6g

pH:8～9

規 格	医院価格
2.5L	¥22,000

印象 用 除菌／洗浄 剤

SUN520 インプレッシヨ ン DIF （アルデヒド非含有）



用 途

- 印象表面（アルギン・シリコン・寒天）、印象用トレー、ワックスバイトなどの洗浄・除菌。

特 長

- 幅広い抗菌スペクトルで多くの微生物に2分間で作用します。
- スプレーまたは浸漬と除菌方法を選べます。
- 2分間で作用するため寸法変化や面荒れのリスクを抑えられます。

使用方法（原液使用）

スプレー：①原液を専用スプレー容器に移し替えて印象表面とトレーに噴霧してください。
②2分間放置してから水洗いし石膏を流してください。
浸 漬 法：①印象物を水洗いせずに原液に2分間浸漬してください。
②水洗いして石膏を流してください。 ※液交換目安1日

主成分

- N- アルキル（C12-C18）-N- ベンジル -N、N- ジメチル塩化アンモニウム 0.16g
N、N- ジデシル -N、N- ジメチル塩化アンモニウム - クロリド 0.16g
N- アルキル（C12-C14）-N- エチルベンジル -N、N- ジメチル塩化アンモニウム 0.16g

pH:7

規 格	医院価格
2.5L	¥17,000

アクセサリ ー

SUN920 スプレーボト ル



用 途

- SUN520 用スプレー容器

特 長

- ボトル本体が円錐形になっているため安定性があり握りやすいです。
- ノズル先端に金属が入っており均等にかつ広範囲に噴霧することができます。
- おしゃれなデザインです。

使用方法

- SUN520インプレッションDIF2.5Lを本容器に入れ替えてご使用ください。

材質

- PE

規 格	医院価格
500mL容器	¥1,400

効果一覧表

器具

品 名	HBV	HCV	HIV	コロナ ウイルス	結核菌	アデノ ウイルス	一般細菌	ノロ ウイルス	ポリオ ウイルス	芽胞菌
SUN402 インストゥルメントエンザイム	5分 2%	5分 2%	5分 2%	5分 2%	30分 2%		5分 2%			
SUN420J インストゥルメントDIFパウダー	10分 2%	10分 2%	10分 2%	10分 2%	5分 2%	10分 2%	5分 1%	15分 2%	10分 2%	10分 2%

表面

品 名	HBV	HCV	HIV	コロナ ウイルス	結核菌	アデノ ウイルス	一般細菌	ノロ ウイルス	ポリオ ウイルス	芽胞菌
SUN180K ラピッドサーフェスプラス	30秒	30秒	30秒	30秒	1分	30秒	1分	1分	1分	
SUN261 ウェットワイプス アルコール	30秒	30秒	30秒	30秒	1分	30秒	30秒			
SUN271 ウェットワイプス アルコールフリー	1分	1分	1分	1分			1分	30秒		

バキュームシステム／印象表面

品 名	HBV	HCV	HIV	コロナ ウイルス	結核菌	アデノ ウイルス	一般細菌	ノロ ウイルス	ポリオ ウイルス	芽胞菌
SUN500 サクシヨ ン クリーナ ー	2分 3%	2分 3%	2分 3%	2分 3%			2分 3%			
SUN520 インプレッシヨ ン DIF	2分	2分	2分	2分			2分			

・上記データは欧州規格に準じた試験結果です。
・製品成分はすべてアルデヒド、フェノール、塩素を含まない人体、環境に配慮した生分解性です。



表面用 除菌スプレー

デンタルラピッドSDリキッド

香りが選べる急速表面除菌スプレー



flower

fruit

サンプル

カタログ



スプレータイプ
500ml



詰替用
500ml



補充用
5L



5L用レンチ



5L用コック

用 途

- ユニット、医療機器、手用機器、設備など表面の除菌

特 長

- 無香料、フルーツ、フラワーの爽やかな3種の香りがあります。
- スプレー 500ml、補充用 5L と都合に合わせて容量が選べます。
- アルコール含有量が低いため材質また従事者にやさしいです。

使用方法（原液使用）

- 清潔なクロスまたは DIF クロス [P14] 等に浸み込ませて対象物の表面を清拭してください。
- 1 分間放置後に自然乾燥または拭き取りをしてください。

主成分

- エタノール 43.0g、1- プロパノール 8.0g、ディデシルディメチルアンモニウムクロライド 0.055g(溶液 100g 中)

規 格	医院価格
スプレータイプ 500ml	¥4,400
詰替用 500ml	¥4,200
補充用 5L	¥29,400
5L用レンチ	¥1,600
5L用コック	¥3,600

効果一覧表

表面

品 名	HBV	HCV	HIV	コロナ ウイルス	結核菌	アデノ ウイルス	一般細菌	ロタ ウイルス
デンタルラピッドSDリキッド	1分	1分	1分	1分	1分	1分	1分	1分

・上記データは欧州規格に準じた試験結果です。

・製品成分はすべてアルデヒド、フェノール、塩素を含まない人体、環境に配慮した生分解性です。

表面清拭用 ドライワイプス

DIFクロス（医療機器表面清拭用）

カタログ

イソラピッド(またはデンティロゼロ・デンタルラピッドSDリキッド)と併用推奨



特 長

- さまざまな液体を浸み込ませて使用できます。
- 大判サイズの厚手クロスで隅々まで広範囲に清拭可能です。

使用方法

- ロール状のクロスに液体 1L を入れて浸み込ませます。
- クロスを容器から引き出してご使用下さい。
- クロスには切れ目があるため 1 枚ずつ取り出せます。

寸法／160×300mm
材質／綿、ポリエステル

規 格	医院価格
容器付 250枚入	¥5,200
詰替用 250枚入	¥3,700

除菌クロス

特大除菌クロス

特 長

- チェアユニット、キャビネットから器具まで除菌・清掃
- 160×300mmの特大サイズ
- 1枚でOK！経済的

成分／エタノール47%、精製水52%、食品添加物1%以下

※本製品はエタノールを含有するのでアルコールに耐性がない材質には使用しないでください。



規 格	医院価格
容器付 250枚入	¥5,900
詰替用 250枚入	¥4,200

除菌専科
シリーズ



50倍希釈 30分

除菌専科
シリーズ



2倍希釈 10分

除菌専科
シリーズ



10倍希釈 30分

除菌専科
シリーズ



除菌専科® シリーズ

器具用 除菌／洗浄／防錆剤

CAE器具用 色が変わればお取り替え

青色から黄色に変色します

CAEとはNa-ココイル-L-アルギニンエチルエステル・DLピロリドンカルボン酸、更にアミノ酸系の界面活性剤を配合したことにより蛋白質をほぼ完全に除去でき、優れた洗浄能力を兼ね備えています。このため、イルガサン配合品や塩化ベンゼトニウム配合品と比べて効果が強く、HBs抗原に有効です。薬液をいつ交換したらよいかと、お考えになられるかと思いますが、この製品は液の汚染が進むとPHの変化により青色から薄黄色に変色し取り替え時が、一目でわかりますので液の交換時期を間違えません。

成分／CAE、特殊高級アルコール系非イオン界面活性剤、グリコール系水溶性溶剤、防錆剤、他

規 格	医院価格
2L	¥6,500
4L	¥12,000

小器具用 除菌／洗浄／防錆剤

こもの錆びてま専科

バー、リーマー、ファイル等の除菌・洗浄・防錆

主成分の塩化ベンゼトニウムは、安全性の高い歯科小器具の除菌防錆に最適の成分です。器具に付着した血液、唾液に対し適切な洗浄力を発揮します。さらにジシクロヘキシルアンモニウムナイトライト配合により従来品に比べて大変優れた防錆効果があります。スチール製品は、2倍の希釈液に10分以上浸漬し、あとは清潔なガーゼで水分を拭き取り(乾燥)保管してください。ステンレス製品は浸漬したままでOKです。

成分／塩化ベンゼトニウム、ジシクロヘキシルアンモニウムナイトライト、ポリオキシエチレンオキシステアリン酸トリグセライト、安定剤、他

規 格	医院価格
2L	¥4,000
4L	¥7,500

パイプ用 除菌／洗浄／消臭剤

パイプつまりま専科スーパー

配合除菌パイプクリーナー

管内にこびりついた汚れを活性剤で可溶化し、グリコールエーテルで剥離させるパイプクリーナーです。従来品は表面の汚れをとるだけなので時間がたつと臭いが出ました。この製品は汚れを剥離してから除菌するので、時間がたっても臭いが出ません。また塩素を使用していないので、金属、ゴムを傷めません。通常は10倍希釈してスリットン、バキュームに流してください。バキュームチップの内部の汚れも10倍希釈で30分浸漬してください。

成分／イソプロピルメチルフェノール、水溶性溶剤、キレート剤、他

規 格	医院価格
4L	¥6,800

衣類用 除菌／洗浄剤

除菌洗濯しま専科

洗濯機の槽内・リネン類も同時に除菌・洗浄

白衣・タオル・エプロン等のリネン類の除菌だけでなく、洗濯機槽内で除菌洗浄できる液体洗剤です。一般洗剤は不要です。リネンに染み付いた嫌な臭いもとれます。洗濯槽下部の水垢雑菌を除去し、洗濯機内部のカビの発生を抑えます。最初は2～3回、空回しをしてから洗濯することをお勧めします。洗濯機の汚れがひどいと、これらがリネンに付着してしまうからです。また、数種類の界面活性剤で白く洗い上げる洗浄効果があります。さらに環境に配慮した無リン洗剤です。一回の洗濯に約30mlご使用ください。

成分／イソプロピルメチルフェノール、テゴ51、界面活性剤、水溶性溶剤、キレート剤、他

規 格	医院価格
4L	¥11,400



ラテックスゴム製カバー

オロキーパー SAタイプ

超音波スケーラーは樹脂製であることが一般的で滅菌を避けようとする歯科医院様が多く、清拭だけで対応しているケースもあります。オロキーパーを毎回付け替えれば患者様も安心です。患者間感染予防、頻繁な消毒による故障や劣化、異物混入による故障を防ぎます。また唇・歯への接触時の不快感を無くします。

対象／超音波スケーラー、エアースリンジ、ペン型光重合器、ストレート技工用ハンドピース

規 格	医院価格
6個入	¥600
102個入	¥8,500

手指消毒ジェル

カタログ

プチクールジェル80

用 途

- 手指の消毒

特 長

- 高濃度エタノール配合の速乾性アルコールジェルです。
- ベタつきを抑えサラリとした低粘度ジェルです。
- 保湿剤配合で肌に潤いを与えます。

使用方法

- 適量を手のひらに取り手指全体に伸ばし乾燥するまでよく擦り込んでください。

主成分

- エタノール 76.9～81.4vol%
- ヒアルロン酸 Na、アラントイン、グリセリン、パルミチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン

規 格	医院価格
500ml	¥2,100

フェイスシールド

カタログ

高透明・低反射フェイスシールド

フレーム

- 耐久性に優れたトライタン樹脂で曲げたりひねっても元の形状に戻ります。
- 超軽量で長時間つけても疲れにくいです。
- 柔軟性があるため締め付けがなく顔幅を選ばずに着用可能です。
- ワンタッチで簡単にシールド交換可能です。
- 眼鏡の上からでも装着可能です。

シールド

- 透過率 99.1%の高い透明度でクリアな視界です。
- 反射防止加工により反射や映り込みを 99%カット
- 撥水層により汗、汚れ、油分が付着しにくいです。
- 傷がつきにくい PET 素材です。
- 水、薬品等でお手入れ可能です。
- 繰り返し使用可能です。
- 唾液飛沫から顔全体を保護します。

仕 様

フレーム色：クリア

シールドサイズ：縦 183× 横 249mm

シールド厚み：0.32mm

材質：フレーム / トライタン樹脂、シールド / PET

重量：24g (フレーム 14g、シールド 10g)

規 格	医院価格
フレーム1個	¥1,070
シールド1枚	¥2,330

歯垢染出液

クローバー 歯垢染め出し液

おいしいフルーツミックス風味の2色染め

医院用

特許取得 第4841146号

サンプル

カタログ

2色染め



フルーツミックス風味
(バイカラー)

規 格

医院価格

患者価格

50ml

¥1,450

¥2,320

医院用

ライト

レギュラー

ライト

レギュラー

ライト

レギュラー

ライト

レギュラー

ライト

レギュラー

氷いちご風味

アップル風味

グレープ風味

ピーチ風味

ミント風味

ライト

レギュラー

ライト

レギュラー

ライト

レギュラー

ライトタイプ

● 染色液が除去しやすく、スピットンや器具の掃除が簡単です。
● 口唇や歯肉に付着しにくいので治療後に外出される患者さんも気軽に使用できます。
● 歯周組織検診時やTBI（歯ブラシ指導）に最適です。

レギュラータイプ

● 中度以上の歯周病・歯肉炎の羅患者、カリエス多発患者に最適です。
● 見落としやすいプラークも隅々まで確実に染め出します。
※レギュラータイプのサンプルはありません。

主成分／水、キシリトール、食用赤色 104 号、香料
※グレープ風味のみ食用青色 1 号を含みます

規 格

医院価格

患者価格

50ml

各 ¥1,210

各 ¥1,940

家庭用

2色染め

1色染め

ライトタイプ

● 患者さんが自宅で使用できるライトタイプのミニボトルです。
● 待合室や受付カウンターなどに置いてご利用ください。

規 格

医院価格

患者価格

フルーツミックス風味 5ml×12本入

¥3,850

1本 ¥400

氷いちご、グレープ風味 5ml×12本入

¥3,200

1本 ¥330

指導用

2色染め

1色染め

ライトタイプ

● 学校や医療施設の集団検診などでも使用しやすい使い切りタイプ。

規 格

医院価格

フルーツミックス風味 1ml×20包入

¥1,430

氷いちご、グレープ風味 1ml×20包入

¥1,320

染色液清掃剤

染め出し液落とし隊

付着した歯垢染色液の汚れを簡単に落とします

スピットン用

① 染め出し液で汚れた箇所にスプレーしてください。
② スポンジや布等で擦り洗いしてください。
③ 最後に良く水洗いしてください。
※汚れが落ちにくい場合は原液を染み込ませた布等を汚れた箇所に貼り付けて2～3分間放置してから擦り洗いしてください。

成分／界面活性剤、酵素剤、アルコール類、腐蝕防止剤、特殊アルカリ剤

スプレー

補充用

規 格

医院価格

スプレー 300ml

¥2,500

補充用 500ml

¥3,200



デンタルフロス

ナノフロス マイクロライザー

カタログ

● マイクロファイバー採用
柔らかいマイクロファイバー（極細繊維）を編み込んだ構造が歯間部で広がりプラークを効果的に除去します。
● ハイドロキシアパタイト配合
マイクロファイバーにハイドロキシアパタイト粒子とキシリトールを配合しています。
● 余剰レジンセメント除去にも適しています。

タイプ / アンワックス

規 格

医院価格

患者価格

25m

¥780

¥920

クロスが歯肉満までしっかり入ります。

長息生活

レベル0 3本入

長息生活

レベル1 3本入

長息生活

レベル2 10本入

長息生活

レベル3 10本入

長息生活

レベルMAX 1本入

【呼吸力の目安】※個人差があります
レベル0：ティッシュペーパー 1 枚を吹いて揺らす程度
レベル 1：日常会話をはっきりとした声で話す程度
レベル 2：普通の風船を膨らませる程度
レベル 3：パースデーケーキのろうそくを一気に消せる程度
レベルMAX：金管楽器を自由に吹きこなせる程度

医療機器届出番号
13B1X00209000015

規 格

医院価格

患者価格

トライアルセット レベル0-1-2 各1本入

¥972

¥1,080

レベル0 3本入

¥972

¥1,080

レベル1 3本入

¥972

¥1,080

レベル2 3本入

¥972

¥1,080

レベル3 3本入

¥1,062

¥1,180

レベル0 10本入

¥2,682

¥2,980

レベル1 10本入

¥2,682

¥2,980

レベル2 10本入

¥2,682

¥2,980

レベル3 10本入

¥2,952

¥3,280

レベルMAX 1本入

¥612

¥680

衛生・予防・口腔ケア・介護


17

18



S-206B

S-206P

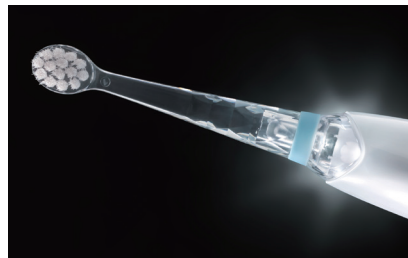

教育用こども歯ブラシ

ベビースマイルレインボー S-206

カタログ

- レインボーライトで歯磨きが楽しくなる 0 カ月から使える電動歯ブラシ。
- 好きな色で歯磨きができる「カラフルストップ」機能
- 白色 LED で仕上げ磨きがしやすいです。
- 傷つきやすい乳歯にも優しい、超柔らか毛。
- 単4アルカリ電池使用（別売）。

規 格	医院価格	患者価格
S-206	¥1,620	¥1,800



S-205B

S-205P



教育用こども歯ブラシ

ベビースマイルレインボー3+ S-205

カタログ

- 自分で磨くやる気を育む、3 才から使える電動歯ブラシ。
- 7 色に光るレインボーライトが歯磨きへの好奇心を刺激。
- 15 秒ごとの応援ボイス&サウンドを搭載。
- お子さまも持ちやすいガイドグリップ。
- USB充電式（U S B 電源アダプターは付属しません）

規 格	医院価格	患者価格
S-205	¥2,250	¥2,500



E-101B

E-101P

教育用こども歯ブラシ

ベビースマイルレインボー3+ E-101

カタログ

- ペングリップ式で持てる手動歯ブラシ。
- 柄の部分には、キラキラ虹色ラメがフローティングします。
- ウサギ型のラメをお子さまと見つけてください。



規 格	医院価格	患者価格
E-101	¥576	¥640



S-204RB

S-204HB

教育用こども歯ブラシ

ベビースマイルレインボー 専用替えブラシ2本セット

カタログ

- S-206、S-205、E-101 と共通です。
- 0 才から使えるソフト、3 才から使えるかための2種から選べます。

規 格	医院価格	患者価格
ソフト S-204RB	¥360	¥400
かため S-204HB		

電動鼻水吸引器

ベビースマイル S-303

- お出かけ先でも使える、電池式の鼻水吸引器。
- -62 kPa の吸引力。
- 単3アルカリ乾電池2本使用（別売）

管理医療機器 電動式可搬型吸引器 医療機器認証番号:230ALBZX00002000



S-303

規 格	医院価格	患者価格
S-303NP	¥3,600	¥4,000



口腔保湿ジェル

キュオム ウェットプラス

[サンプル](#) [カタログ](#)

- 口腔内でダマになりにくく塗り広げやすい。
- ジェルが乾燥せずに固まりにくい。
- スポンジブラシや指から垂れにくく塗布しやすい。
- 薄く伸ばしやすく厚塗りにならないので咽頭に落下しにくい。
- アルコール、パラベン、合成着色剤フリーの低刺激処方。
- ベタつきが少なく使い心地がよい。
- 3種の保湿成分配合で長時間潤う。

風味 / 無香料

成分 / 水、グリセリン、プロパンジオール、(PEG-240/ デシルテトラデセス -20/HDI) コポリマー、オリーブ油、ポリクオタニウム -51、ポリアクリル酸 Na、グリチルリチン酸 2K、クエン酸、セチルピリジニウムクロリド、加水分解ヒアルロン酸

規 格	医院価格	患者価格
80g	¥1,620	¥1,800



口腔うるおいジュレ（食品）

はちみつモイスト

[サンプル](#) [カタログ](#)

- はちみつベースのジェルがお口とのどの渇きを潤します。
- 食品なので吐き出したり拭き取りの必要はありません。
- 甘酸っぱいハニーレモン味が唾液にアプローチします。
- むし歯の原因となる酸をつくらないキシリトールと抗菌作用のあるプロポリス&カテキンを配合しています
- 嚥下・舌などの口腔機能訓練のサポートにもご使用いただけます。

成分 / 精製はちみつ(国産)、レモン果汁、シャンピニオンエキス、プロポリスエキス、緑茶抽出物、甘味料(キシリトール、スクラロース)、増粘剤(キサンタンガム、ペクチン)、酸味料、香料、酸化防止剤(V.C.)、ソルビン酸 K、乳酸 Ca

規 格	医院価格	患者価格
3gパウチ7包入	¥412	¥458
90gチューブ	¥1,350	¥1,500

薬用ハミガキジェル

デンタルートF

[サンプル](#) [カタログ](#)

- ダブルフッ素が露出した根面までコーティングし、歯の防御力を高めます。
- 3つの作用で歯周病予防・歯ぐきケア
- 吸引管での吸引取りやふき取りがしやすいジェルです
- 無研磨・低発泡・低刺激です

成分 / 精製水、濃グリセリン、ソルビット液、加水分解ヒアルロン酸、グルコン酸、水酸化ナトリウム、ヒドロキシエチルセルロース、アルギン酸プロピレングリコール、フッ化第一スズ(フッ素)、フッ化ナトリウム(フッ素)、ピリドキシン塩酸塩、グリチルリチン酸ジカリウム、ベンザルコニウム塩化物、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ハッカ油

◎フッ素濃度は 1450ppm です

規 格	医院価格	患者価格
80g	¥1,170	¥1,300

義歯洗浄液

スマイルハニー ナチュラルデントクリーナー

漂白剤無配合のフルーツ酸で洗浄する入れ歯にやさしい自然派洗浄液です。歯の表面に付着したバイオフィルムの中の菌まで浸透除菌します。入れ歯だけではなく、リテーナーやマウスピースなど様々な素材に使用できます。

成分 / 有機酸（クエン酸、リンゴ酸）、界面活性剤、エタノール、チャ乾留液、香料（レモンライム）、色素

規 格	医院価格	患者価格
50ml	¥855	¥950

口腔湿潤ジェル（化粧品）

スマイルハニー オーラルクリーンジェルスプレー

フルーティーシトラス

乾いたお口を潤すジェルスプレーで外出先や人前でもお口の乾きが気になったら簡単に潤いケアできます。ワンプッシュで細かいミストが広範囲に広がりお口の中でピタッと固まります。塗り広げが不要なので指が汚れず衛生的です。

成分 / 水、グリセリン、プロパンジオール、ヒアルロン酸ナトリウム、キシリトール、他

規 格	医院価格	患者価格
50ml	¥990	¥1,100



シリコン製バキュームチップ

[サンプル](#) [カタログ](#)

クローバー「無痛」バキュームチップ Ver.2

大好評クローバー無痛バキュームチップの柔らかさはそのままにチップの先が折れにくくなってさらに使いやすくなりました

- 歯肉にあてても痛くない柔らかさ 厚さ最大 3.0 mm
- オートクレープ滅菌、薬液滅菌全て OK !滅菌処理しても硬くなりません。
- 汚れが目立たないカラフル 7 色です。
- モリタ製チェア対応サイズ（M 型）もご用意しております。



規 格	医院価格
同色10ヶ入	¥2,600
アソートタイプ10ヶ入(オレンジ、ホワイトを除く5色各2ヶ入)	¥2,600
バリュースタック21ヶ入(全7色各3ヶ入)	¥5,200


レジン用筆

[カタログ](#)

万能小筆 混毛

1716年創業の筆メーカーあかしや製造の歯科用筆です

- 含みの良い馬毛を主原毛に、程よい弾力の人工毛を混ぜて独自の毛組みを施しています
- まとまり・耐久性に優れた穂先です
- 快適な筆積み感・スムーズな操作性です
- 臼歯部の仮封に便利な曲筆タイプと義歯のレジン築盛に適した直筆タイプがございます

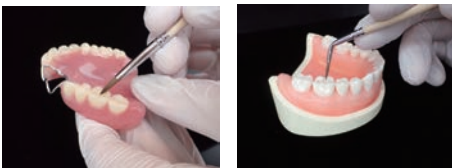

規 格	品 番	サイズ 径(持ち手)×全長	穂首サイズ 穂の太さ×穂の長さ	医院価格
曲(大)No.1 3本入り	DAK-01-3P	Φ5.0×131mm	Φ2.5×10mm	¥1,500
曲(小)No.2 3本入り	DAK-02-3P	Φ5.0×131mm	Φ1.6×9mm	¥1,500
直(大)No.3 3本入り	DAK-03-3P	Φ5.0×137mm	Φ2.5×10mm	¥1,500
アソート3本組 各1本入り	DAK-3VA	上記参照	上記参照	¥1,500



歯面清掃・研磨材 ジェットパウダーポリッシング用

[カタログ](#)

スパークリングスマイルパウダー

縁上・縁下用

SUN438P ペリオタガトース

新成分の天然単糖タガトース

- 球状で平均粒径15 μ mの微細粒子は縁上・縁下のバイオフィルム除去やインプラント周辺の清掃に最適です。
- 主成分のタガトースは非う蝕性があり体内で代謝されにくく血糖値上昇の抑制効果があります。
- 研磨効果が穏やかで歯面をやさしく清掃し滑沢に仕上がります。

内容量：120g
主成分：タガトース
平均粒径：15 μ m
pH：6～8

規 格	医院価格
120g	¥5,800

縁上用

SUN435Q レモン

研磨効果の高い炭酸水素ナトリウムを40 μ mに細粒化

- 歯肉縁上のプラークや強固なステイン除去に最適です。
- 球状で粒子サイズが細かいため歯面をやさしく研磨します。

内容量：300g
主成分：炭酸水素ナトリウム、香料
平均粒径：40 μ m
一般医療機器 歯面研磨剤
医療機器届出番号13B1X10122000016
pH：8.1～8.4

規 格	医院価格
300g	¥5,200



SUN435Q
TOP レモン

ミラーくもり止め

クローバー スパークリングミラー

デンタルミラー、口腔内撮影ミラー等に最適な曇り止め液

スプレータイプ

- ミラーに直接スプレーして自然乾燥させてお使いください。
- お急ぎの場合はエアージンジで乾燥させてください。
- 補充用には、お徳用 500ml 入りをご利用ください。

ワンタッチフタ付タイプ

- ミラーを液に浸して自然乾燥させてお使いください。
または液を清潔なガーゼ等に含ませてミラー表面に塗布してください。
- お急ぎの場合はエアージンジで乾燥させてください。


規 格	医院価格
スプレータイプ 120ml×3本入	¥2,000
フタ付きタイプ 200ml×3本入	¥2,300
お徳用タイプ 500ml×1本入	¥1,900



スプレータイプ

フタ付きタイプ

お徳用タイプ

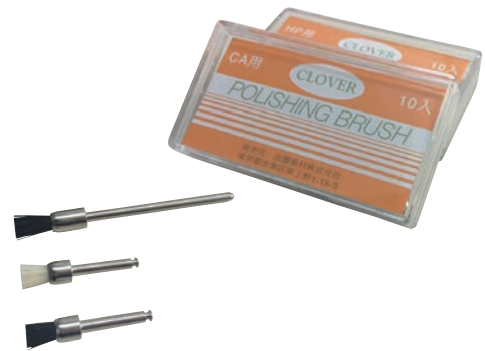

一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ
医療機器届出番号13B3X00108001000



一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ
医療機器届出番号13B3X00108001034



歯面研磨清掃

クローバー ポリッシングブラシ (PMTC用) [カタログ](#)

- 豚毛製なのでナイロン製に比べて歯牙、歯肉を傷つけません。あらゆる歯面研磨剤にご使用できます。
- PMTC に最適です。

材質／豚毛 種類／CA 用（黒毛、白毛）、HP 用（黒毛）
※白毛はやや柔らかくなっています。

規 格	医院価格
CA用 10本入	¥1,700
HP用 10本入	¥1,700

歯面研磨清掃

スパークリングスマイル コントラ エクストラソフト 雪色 (PMTC用) [カタログ](#)

超軟質のナイロン毛先が柔らかい

- 良質で大変柔らかいナイロンを使用している PMTC 用ポリッシングブラシです。
- PMTC の最終仕上げ、歯肉緑下の清掃・研磨、外科手術後の歯面清掃に最適です。
- 接着剤を用いない特殊製法によりオートクレーブ滅菌が可能です。
※121 度乾燥工程不可
- ナイロンの毛先が大変柔らかく、ほど良く広がります。

材質／ナイロン製 種類／CA 用（白毛）

規 格	医院価格
カップタイプ 12本入(前歯部・歯面唇側)	¥1,920
フラットタイプ 12本入(歯面唇頬舌側・咬合面裂溝部)	¥1,080
トライアルセット(カップタイプ、フラットタイプ 各1本入)	¥290

ディスポーザブルブラシ

ジャーマンアプリケーター&ブラシ

- 2 級隣接面、3 級窩洞の側室また口蓋側や舌側の窩洞に便利
- ポスト孔の処理に最適
- 角度付きホルダーで目的部位へ精密に塗布
- 種類豊富なチップとブラシをご用意
- ホルダーはアングルとストレートの両頭
- ファインは直径 1.5mm で小さな窩洞に使用可能

種類／ファイン（紫）×100 本入、レギュラー（黄）×100 本入、レギュラー（緑）×100 本入、ブラシ（赤）×100 本入、ホルダー（緑・白）× 各 1 本
※ホルダーは 121℃滅菌可能（乾燥工程不可）

規 格	医院価格
スターターキット	¥2,400
チップ・ブラシ単品 100本入	¥500
ホルダー単品 2本入	¥600

指サック

クローバー フィンガー君

- ゴムに不可欠の硫黄を除いた指サックです。
- 金・銀・銅をはじめ硫黄をさらう部品の取扱用や精密技工作業用としてお勧めします。
- 汚れは洗剤などで清拭して再使用できます。
- 打粉を少なくしてあります。

材質／合成ゴム

サイズ(mm)	L	M	S
内 径	18.5	15.5	13.0
長 さ	33	33	33
厚 さ	0.18	0.18	0.18

アソートタイプもあります。L7個/M7個/S6個入り


規 格	医院価格
20個入	各¥2,600

LED無影灯

Luvis E-100 [貸 出](#) [カタログ](#)

スタイリッシュなデザインと高演色性を追及した移動式LED无影灯

ライトヘッド裏面にある
操作パネル

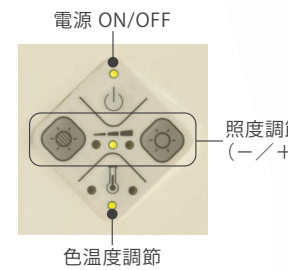


高演色性と色温度・照度調節機能

Luvis-E100は独自開発した高演色LEDを使用し、**広範囲の照度調節と色温度調節により、幅の広い症例に対応が可能です。**

業界屈指の技術により、高演色指数 Ra95 を保ち、太陽光に近い自然な発光色を演出します。

Selectable Color Temperature

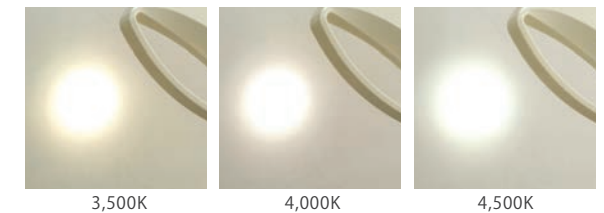

スリムなキャリーベース

コンパクトながら機能性の高いLuvis-E100は、直径幅Φ510mmのキャスター付で、設置の場所も選びません。

軽量化が図られているため、簡単な組み立て式で検診用などにも簡単に持ち運びが可能です。

Easy to Install and Use



各製品スペック	ライト個数	照度範囲	色温度範囲	演色数 CRI	照射範囲	消費電力	ライト寿命	重量
Luvis-E100 M type	8	5,000～60,000Lux	3,500K/4,000K/4,500K	Ra : 95 , R9 : 90	17cm	20W	50,000 時間	10kg

一般医療機器 手術用照明装置
医療機器届出番号13B1X10122000010

規 格	医院価格
モバイルタイプ	¥268,000

日本に新デザインでデビュー ミラノ メディカル ファッション

カタログ 試着

ds+ミラノは医療分野での20年にわたる経験を生かし、世界的なファッションの創生地ミラノの感覚をふんだんに盛り込んだ新しいメディカルウェア コレクションです。天然素材として最も適した高級純綿(100%)をギャバジン織に仕上げ、機能を重視し、イタリアの伝統あるプロのカッティングと縫製技術を融合しました。豊富なカラーとアイテムによる自由なコーディネートをお楽しみください。今までにない新しいファッション性を兼ね備えたds+ミラノ コレクションが、働く皆様に常にフレッシュにさせ、患者さんを和ませ、明るい医療現場を演出いたします。



レディス

アルレー#00	¥18,000
ユミ#01	¥17,100
エンジョイ#02	¥17,400
フライ#05	¥17,100
オキ#04	¥20,900
ファン#06	¥20,900
オールウェイズ#08	¥15,600
アクシル#10	¥14,600
チャーム#12	¥15,600
ファルマ フォー ウーマン#13	¥16,300

メンズ

ダイナミック#15	¥14,600
シナジー#16	¥15,300
エリート#17	¥15,600
パワー#18	¥16,900
エナジー#19	¥16,500
ファルマ フォー メン#20	¥16,300
テクノ#21	¥16,500

ユニ

ネクスト#11	¥13,900
タイム#03	¥14,100
アクション#07	¥16,900
アクション#07デニムジーンズ	¥21,900
リビング#09	¥18,100

パンツ

ナイス#22	¥15,400
ナイス#22デニムジーンズ	¥19,100
シティー#23	¥12,100
トゥエンティ#24	¥11,800
クラス#25	¥14,600
テン#26	¥12,900
テン#26デニムジーンズ	¥19,200

バンダナ

バンダナ3枚入#27	¥10,900
手術用布10枚入#28	¥15,200



アルレー#00
ホワイト



ユミ#01
オレンジ



フライ#05
レッド



ファン#06
ホワイト

バンダナキャップ

カタログ

フライハイトキャップ

- コットン 100%のイージーケアで肌触りの良い生地です。
- 後部の開口部と長いリボンで様々な頭の形やサイズに合わせて個別に調整できます。
- シックなものからビビッドなものまで、幅広く取り揃えております。
- 医療用だけでなく、普段使いやインナーキャップとしても使えるバンダナです。
- ドイツより直輸入



900-100801
デンタルワークス



900-PR0110
フィッシュ&フィッシュ



900-PR1340
バクテリアアタック



900-PR1900
シャーク&フレンズ



900-PR1920
ワーゲンバス



900-PR2720
アニマルフレンズ



900-PR2800
ロンドンタウン



900-PR3360
ジャパニーズスプリング



900-PR3420
アフリカンスタイル



900-PR3590
モダンアート



900-PR3660
トロピカーナ



900-PR3710
アンカリング



900-PR3920
パイレーツ



900-PR4200
リモーネ



900-PR4380
ドッグホリデー



900-PR4470
ドッグファッション



900-PR4630
パリの休日



900-PR4700
アクションバンダ



900-PR4740
ラウンドキャット



900-PR9180
アクアマリン



900-PR9360
クルージング

規 格	医院価格
1枚入	¥3,900

Panther パンサー

カタログ

2つのシリコンポイントとペーストだけの新システム




● 2ステップによる研磨とツヤ出しのみ



● 推奨マテリアルはジルコニア、ポーセレン、ニケイ酸リチウム



TCP ミディアム ポイント 【Smooth】							
HP				RA (CA)			
品番	品番	品番	品番	品番	品番	品番	品番
TCP100 104M	TCP140 104M	TCP158 104M	TCP541 104M	TCP103 204M	TCP126 204M	TCP143 204M	TCP144 204M
							
Flame 055 Φ5.5 × 18mm 12.000/20.000	Lense 260 Φ26 × 2mm 8.000/20.000	Wheel 170 Φ17 × 2.4mm 8.000/20.000	Lense 150 Φ15 × 1mm 8.000/20.000	Flame 044 Φ4.4 × 10.5mm 8.000/20.000	Cup 060 Φ6 × 8mm 6.000/20.000	Knife-edge 100 Φ10mm 6.000/20.000	Lense 100 Φ10 × 0.8mm 6.000/20.000
¥2.400 / 1本	¥9.800 / 1本	¥6.500 / 1本	¥5.900 / 1本	¥1.200 / 1本	¥1.200 / 1本	¥1.200 / 1本	¥1.200 / 1本

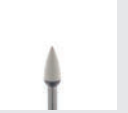TCP エクストラファイン ポイント 【Gloss】							
HP				RA (CA)			
品番	品番	品番	品番	品番	品番	品番	品番
TCP100 104XF	TCP140 104XF	TCP158 104XF	TCP541 104XF	TCP103 204XF	TCP126 204XF	TCP143 204XF	TCP144 204XF
							
Flame 055 Φ5.5 × 18mm 12.000/20.000	Lense 260 Φ26 × 2mm 8.000/20.000	Wheel 170 Φ17 × 2.4mm 8.000/20.000	Lense 150 Φ15 × 1mm 8.000/20.000	Flame 044 Φ4.4 × 10.5mm 8.000/20.000	Cup 060 Φ6 × 8mm 6.000/20.000	Knife-edge 100 Φ10mm 6.000/20.000	Lense 100 Φ10 × 0.8mm 6.000/20.000
¥2.400 / 1本	¥9.800 / 1本	¥6.500 / 1本	¥5.900 / 1本	¥1.200 / 1本	¥1.200 / 1本	¥1.200 / 1本	¥1.200 / 1本

TCP ブリストルポイント / ペースト		
HP		DIAMOND
品番	品番	品番
TCP417 104	TCP419 104	TCP 01/20
		
Bristle 170 Φ17 12.000/15.000	Bristle 190 Φ19 12.000/15.000	TCP 01/20 Diamond Paste 20G
¥5.400 / 10本	¥5.400 / 10本	¥19.800 / 15g

Panther スターターキット	
HP	
品番	
Panther Edition	
	
Technical Complete Kit Smooth x4 / Gloss x4 Bristle x2 / Paste x1	
¥47.000 / 1set	



一般医療機器 歯科用研磨器材
医療機器届出番号13B1X10122000013

MEMO