

歯科訪問診療に最適！

手持ち撮影要件にも対応！

軽量でワイヤレスのポータブルX線装置 AirRay エアレイ



AirRay

— 手持ち撮影要件適合機種 —

手持ち撮影に関する改正告示(医療用エックス線装置基準の一部を改正する件:令和4年厚生労働省告示第114号)

- ・X線装置表面からの漏洩線量が0.05mGy/h以下であること
- ・0.25mmPb以上の取り外しできない後方散乱シールドを備えること

2025年4月1日以降に新たに設置する機器はこれらに適合する必要があります。

実物大です！



AirRay

KINKI ROENTGEN INDUSTRIAL CO., LTD.



AirRay 5つの特徴

1. 当社史上最軽量の**2.2kg**

※後方鉛シールド込

2. 1回の充電で**100回以上**の照射が可能

※照射時間によって変動します

3. 安心の**国内メーカーX線管**を採用

4. 焦点サイズ**0.4mm**のシャープでクリアの映像

5. 口内法撮影に十分なX線出力**70kV/2mA**



KRK

株式会社 近畿レントゲン工業社

Since 1946 Kyoto, Japan



手持ち撮影要件に対応した
後方散乱シールドを装備。
撮影者のX線被ばくを抑えます。

製品紹介ページ



専用キャリーケースを標準装備



三脚やハンドスイッチを取り付けての
撮影も可能です。*三脚はオプション

オプション


- ・往診時に便利なネックストラップ
- ・訪問診療パック(デンタルセンサー+ノートPC)



一般的名称：アナログ式口外汎用歯科X線診断装置
販売名：エアレイ 認証番号：303AGBZX00078000

Technical Data

項 目		仕 様
入力電源	機器電源	Li-poバッテリー
	充電アダプター電源	AC100-240V 50/60Hz 1.0A
バッテリー仕様		DC11.1V 1500mAh
管電圧/管電流		70kV/2mA(固定)
X線撮影時間		0.01~1.30sec
X線管	モデル名	D-041 SB(キヤノン電子管デバイス製)
	焦 点	0.4mm
総ろ過		1.5mmAl
寸 法		165(W) × 235(D) × 155(H)mm
重 量		2.2kg (後方散乱シールド込)

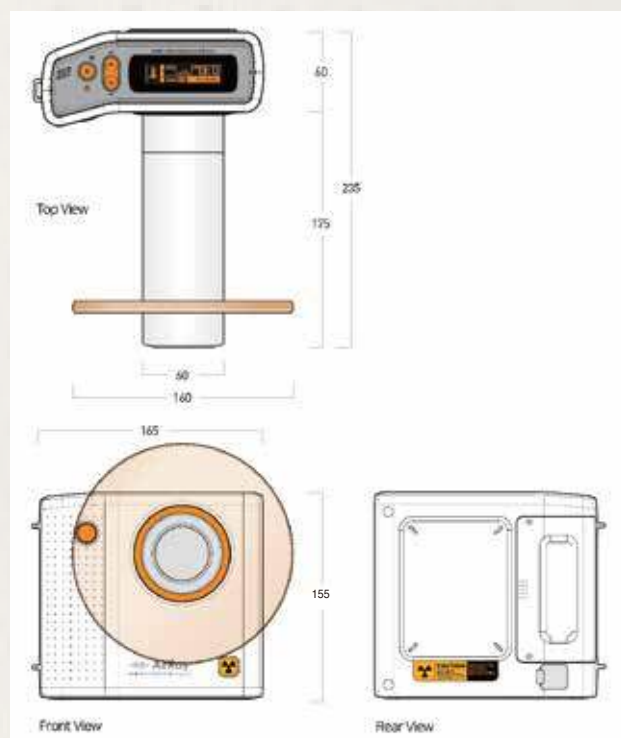

製造販売元



株式会社 近畿レントゲン工業社

Since 1946 Kyoto, Japan

本 社 〒602-0029 京都市上京区室町通上立売上る室町頭町259
TEL 075-441-3234 FAX 075-415-0364

東京オフィス 〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1 TRCセンタービル9F
TEL 03-6450-0933

名古屋オフィス 〒454-0844 名古屋市中川区葉池町1-8 C号
TEL 052-665-6385

<https://www.x-raykinki.co.jp>

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがございます。
※本製品に搭載しているバッテリーは消耗品のため、定期的な交換を推奨しております。

特約店