

CS 7200 CR システム



**Shared
simplicity**

CS 7200 Neo Edition

スリム&コンパクトなデザイン
シンプルで高品質デジタル画像
操作数を減らし最適化されたワークフロー



CS 7200

The best of both worlds, **FILM AND DIGITAL**

スリム&コンパクト

- 幅わずか13センチの省スペース設計
- どんなスペースにもフィット、ムダを省きます

薄く柔軟で耐久性があるイメージングプレート

- 耐久性があり、繰り返し使用可能
- 患者さんに優しいラウンドコーナーを採用
- 日常的な口腔内検査に対応 (サイズ0、1、2)



- 成人の歯根先端周囲
- バイトウイング



- バイトウイング (小児/小成人)
- 歯根先端周囲
- 歯根先端周囲にも使用可能

先進的な画像処理


- 実解像度が最高19lp/mmの高品質な画質
- 4つのスキャンモード (極超高解像度、超高解像度、高解像度、ハイスピード) から選択可能
- Endo・Perio・DEJの3種のフィルタを装備し、診断部位への適切な画像処理が可能です

シンプルな操作

- フィルムのように簡単にポジショニング
- 撮影後のプレートを挿入するだけでハイクオリティな画像が得られます
- スキャン後に自動的にプレート内の画像を消去

製品仕様

理論解像度 (最大)	33lp/mm
実解像度 (最大)	19lp/mm
イメージングプレートサイズ (高さ×幅)	Size0 - 22mm×35mm
	Size1 - 24mm×40mm
	Size2 - 31mm×41mm
プレート消去	自動
スキャンタイム	1画像あたり8秒
PCとの接続	USBまたはEthernet
電源供給	100-240 V (AC), 50/60Hz
本体寸法 (W×H×D)	130×270×300mm
重量	3.5kg

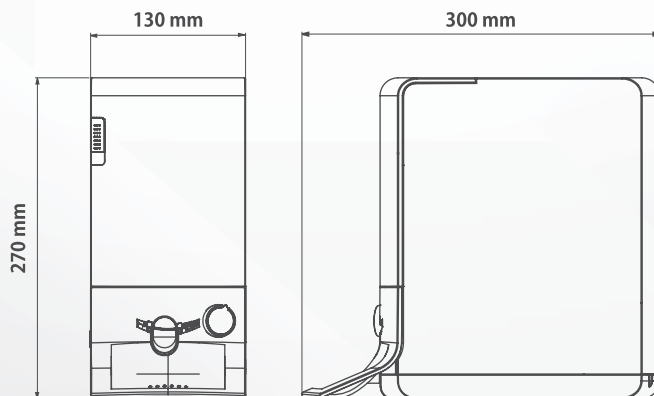

トロフィー・ラジオロジー・ジャパン株式会社

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町1丁目39-5水天宮北辰ビル8F
TEL: 03-5847-1101 FAX: 03-3669-2210
URL: <http://www.trophy-radiologie.jp/>

CS 7200 CRシステム 認証番号 227AGBZX00054A01
イメージングプレート 届出番号 13B2X00114000015
(光輝性蛍光版)

05-15-C(R)①CAT.6233647