


NEW

タービン・コントラサイズ

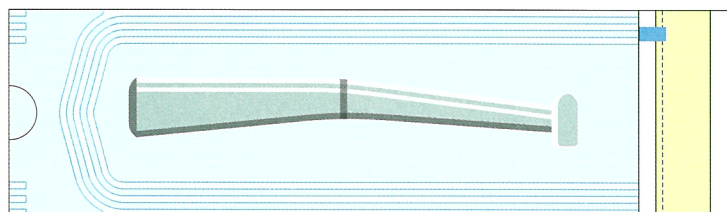

滅菌物を入れてから簡単に密封

頻繁に滅菌するタービンやコントラに、ぴったり入る専用サイズをご用意。
無駄なく効率的にお使いいただけます。

外寸(横×縦):61×185mm、内寸(横×縦):41×160mm

SafeBasics

Self-Sealing Sterilization Pouches
セーフベーシック 滅菌シールパウチ

メディカルデバイス(医療機器)の国際規格に適合

メディコムの滅菌バッグで「トラブル軽減」

PVA(ポリビニルアルコール)を使用していない

滅菌バッグの紙に使用されている水溶性の合成樹脂PVAが溶け出し、被滅菌物(ハンドピースなど)に付着することで、ハンドピースが頻繁に回転不足になるトラブルが発生しています。
メディコムの滅菌バッグはPVAを使用していないので、PVAを起因とするトラブルが発生しません。

原因

滅菌バッグの紙に使用されているPVA等が溶けてハンドピースに付着

対策


メディコムの滅菌バッグは、PVAを使用していません
PVAを起因とするトラブルが発生しません。



※イメージ図(実際は透明です)

信頼性の高いインジケータ(ISO 11140 Type1インジケータ)

メディコムの滅菌バッグのType1インジケータ[※]は、滅菌器の余熱やヒートシーラーとの接触といった乾熱では変色しにくいので、医療事故のリスクを低減します。滅菌工程の通過を一目で確認できる滅菌バッグです。

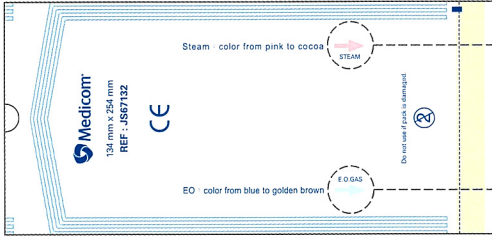

(紙面)

オートクレーブ


滅菌前 滅菌後

AC ▶ AC

EOガス

滅菌前 滅菌後

EO ▶ EO

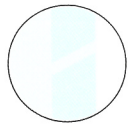

ブルーフィルムなので
シール部分の異常が
わかりやすい

リント(紙粉)が出にくい


リントが出にくく、リントが滅菌器のフィルターに詰まるといったトラブルを軽減できます。

豊富なサイズ展開で無駄なく使い分けが可能

「セーフベーシック 滅菌シールパウチ」は、6サイズ展開です。

オートクレーブ・EOガス両用 クラスB滅菌器対応 PVA不使用 リントフリー ISO 11607 ASTM F 2559 ISO 11140

品名:セーフベーシック 滅菌シールパウチ

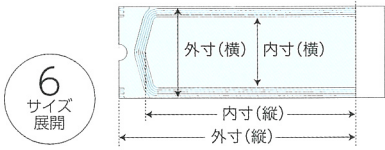

品番	サイズ	用途(サイズの目安)	外寸(横×縦)	内寸(横×縦)	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
JS67571	S	ファイルやリーマーなどの小器具、止血用ガーゼ	57×102mm	37×77mm	200枚	50箱	4894476000611
SFBJS67611	タービン・コントラ	タービンやコントラなどハンドピース類	61×185mm	41×160mm		6箱	4894476036962
SFBJS67702	MS	スケーラーなどのインスツルメント類	70×229mm	50×204mm		10箱	4894476007917
JS67892	M	基本セット(バラ)	89×229mm	69×204mm		10箱	4894476000628
JS67132	L	鉗子などの大きめのインスツルメント類	134×254mm	114×229mm		10箱	4894476000635
JS67193	LL	基本セット(トレイごと)	190×330mm	170×305mm		5箱	4894476000642

※インジケータの色は実際の色とは異なります。
※インジケータは、化学的インジケータであり、あくまでも被滅菌物が滅菌工程を通過したか否かを区別するものです。被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。

販売代理店

製造販売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**
〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F
【代表】TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323
【メディカル事業部】TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112
【デンタル事業部】TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074
【CI/EC事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323
✉ info@medicom-japan.com ① www.medicom-japan.com



サイトはこちらから▲