

# MUTSUMI DENTAL CATALOG

商事部取扱アイテム & 一部自社商品

ISO9001/13485 認証取得

**MUTSUMI**

技術と品質で築く、信頼のコミュニケーション。

ムツミは、お客様の立場に立った

新しい価値の創造を求め、研究開発に力を注ぎ、

Continuous Improvement

たえまなき改善に取り組んでおります。



技術研究所

Main Technology Research  
Laboratory



厳しい品質管理

国際規格ISO取得



設備投資

国内外における事業展開に  
よるネットワーク機能



たえまなき改善

積極的にお客様の声を取り入れ、

QMSをより高いレベルに深化させることにより、

顧客満足 (CS) の向上を目指しています。

## 会社概要



代表取締役社長  
滝本 永次郎

設立	昭和20年12月10日
資本金	1500万円
主取引銀行	三菱UFJ銀行、三十三銀行、 百五銀行、商工中金
事業内容	歯科医療機器及び歯科用品、 焼石膏、食品添加物など 石膏関連商品の製造・販売
住所	〒510-0804 三重県四日市市万古町8-9 TEL 059-331-2354(代表) FAX 059-331-1044

## 沿革

- 1945 三重県四日市市万古町にて  
焼石膏製造開始
- 1950 医療用具製造許可取得  
(歯科用普通石膏製造開始)
- 1952 東濃支店 開設
- 1955 JIS指定工場に認定
- 1959 瀬戸支店 開設
- 1970 歯科用埋没材 製造開始
- 1974 歯科用硬石膏 製造開始
- 1980 アルジェリア石膏プラント 輸出
- 1984 台湾睦美有限公司 設立  
住友化学スミプロイ向け耐熱石膏開発
- 1985 本社 第二工場 竣工(ブレンド専用工場)
- 1987 富士町工場 竣工  
アルギン酸塩印象材製造開始
- 1988 硬石膏大型プラント完成
- 1990 四日市港倉庫 完成
- 1998 中野町工場 竣工
- 2001 義歯床裏装材(リベースハーモニー) 製造発売
- 2002 義歯床用レジン(アーティスト) 製造発売
- 2003 義歯補修用レジン(エスプレッソ) 製造発売  
歯科向け紙製品製造 上海工場 竣工
- 2005 カネボウ歯科材料部門を吸収  
中野町工場新設備にて製造開始
- 2006 ISO 13485:2003 認証取得
- 2008 ISO 9001:2008 認証取得
- 2009 ヨーロッパ規格 CE 0120 認証取得
- 2010 中野町工場増設  
加圧水溶式 $\alpha$ 石膏プラント完成
- 2015 富士町工場(倉庫)増設
- 2018 新出荷管理システム導入
- 2022 化粧品パック向け石膏製造




本社全景

# 組織図



- 旧カネボウプラント
- 溶水式α石膏プラント

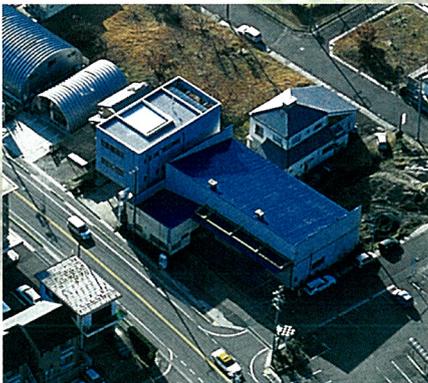

東濃支店



中野町 レジン歯科専用工場  
(旧カネボウ工場も含む)




富士町工場




天力須賀倉庫

## 国際規格 (ISO) への取り組み ~安全・高品質の追求~

ムツミは常に業界のリーディングカンパニーであり続ける為に  
2006年にISO13485、2008年にISO9001を取得。  
原料の調達からお客様のお手元にお届けする全ての各工程において  
丁寧かつ迅速に取組み、今後も決して現状に満足することなく  
安全・高品質へのあくなき追求を実行します。

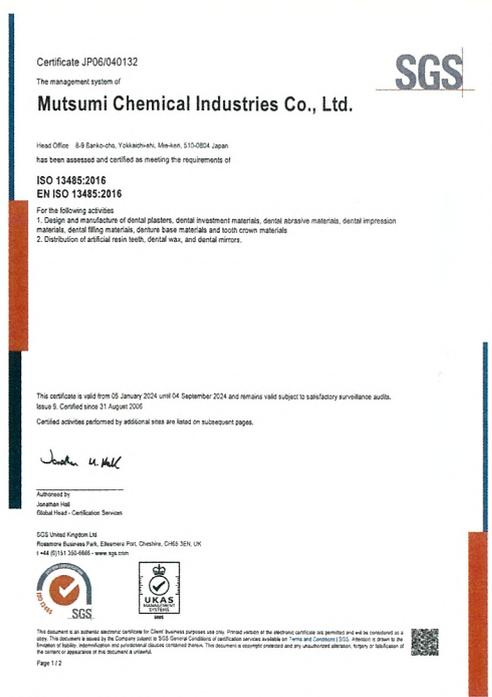

ISO13485

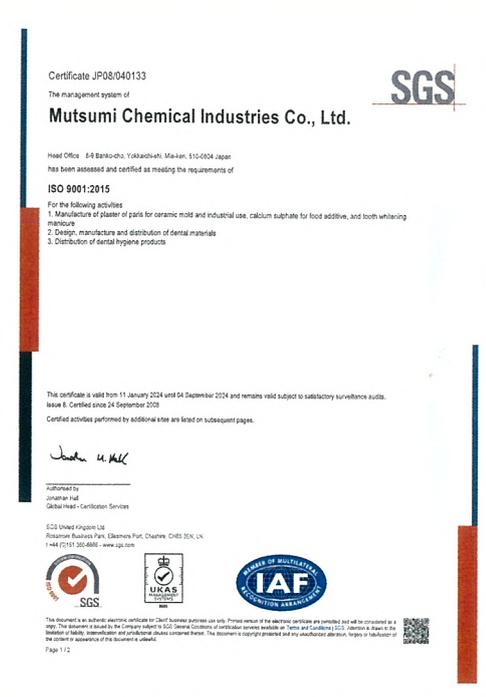

ISO9001

## 「納期、サービスもまた品質なり」 との信念を基に

安全で高品質を追求した製品を的確にお届けするのが  
私たちムツミの使命です。



奥まで届くロングネック&スモールヘッド。



歯科医院専用  
歯ブラシ

ブラッシング指導  
適合品

やわらかめ      ふうつう

## デンタルブラシネオ

強靱で、剛性が高く、ナイロン系よりはるかに耐水老化性に優れたPBTフィラメント

50本/箱(ホワイト10本・レッド10本・ブルー20本・オレンジ10本)

2段植毛とソフトなロングネックで、歯周病予防の方や高齢者、毎食後熱心に歯をみがく方に最適。



歯科医院専用  
歯ブラシ

## デンタルブラシ ダブルソフトフィル

先端極細毛が歯周ポケットの歯垢を取除き、フラット毛が歯面の汚れを除去します。歯肉との接触も大変ソフトです。ネック部分に弾力性をもたせブラシと共にソフトに仕上げました。

20本/箱(ブルー・レッド・イエロー・オレンジ各5本)

研磨剤が入っていない為、入れ歯を傷つけず  
いやなニオイ、取れにくい汚れを落とし、清潔にします。



入れ歯専用歯みがき

## アルバデント

普通の歯磨き剤とちがって入れ歯を傷つけず、良質の洗浄剤を配合しているので、茶シブ・たばこのヤニなどのしつこい汚れをきれいに落とします。

72g/本



1 入れ歯をはずして、  
水で軽くすすいで  
ください。

2 入れ歯をしっかり手にもち、  
適量を義歯用ブラシにつけ、  
入れ歯全体をよくみがいてください。

3 みがいた後は、  
水でよくすすいでください。

厚みが有り、しっかりとしたつくりです。



入れ歯専用ケース

## デンチャーボックス

- 個包装されているので清潔・安心。
- 突き出しピン跡がなく、美しい仕上がりの内面です。
- カラーは清潔感のある美しいホワイトです。

カラー:ホワイト 10個入/100個入(10個入×10)



歯科予防治療用

## プロフィーブラシ CAタイプ フラット

100本入

●一般医療機器 ●医療機器届出番号:24B2X00003000110



立体形状で会話しやすい使い捨てマスク

ホワイト

ピンク



立体構造三層式不織布マスク

## 新MDマスク3D

- 鼻にピッタリフィット、くもらないハイブリッドノーズワイヤー
- 口元が毛羽だたない
- 3Dだから話しやすい
- 耳が痛まないやわらかい幅広ウレタン平ゴム

50枚入

●色調/ホワイト、ピンク、ブルー ●サイズ/90×175mm

肌ざわりが良く衛生的な使い捨てマスク

ピンク



三層式不織布マスク

## フェザーマスクII

- 鼻にフィットするノーズワイヤー
- 高性能捕集フィルターを使用
- 伸縮性が高く耳にやさしい幅広平ゴム

50枚入

●色調/ホワイト、ピンク、ブルー ●サイズ/90×175mm

ホワイト



ブルー

安心できる歯科向けグレード



咬合紙

## アーティキュレイティングペーパー

目的とする接触点を正確に印記することができます。

●サイズ/22×121mm 赤36μm 青37μm ●12枚綴×10冊



キズに強く、くもりにくい。口腔内を鮮明に写します。



歯鏡

## デンタルミラー

他のメーカーのハンドルにもピッタリ適用。

No.4 平面/20本入

- 一般医療機器
- 医療機器届出番号:24B2X00003000002

徹底した歯科臨床から生まれた新配合の  
バイト専用ワックス!



## バイトワックスII

タイプを使い分けることで確実な咬合採得が行えます。

- スリット入り サイズ/150×90mm、厚さ1.8mm 500g入
- スリット無し サイズ/150×90mm、厚さ2.2mm 500g入
- 一般医療機器 ●医療機器届出番号:24B2X00003000108



咬合採得用親水性ビニルシリコーン印象材

## バイトシーグレスCT

シリコンの本場米国のメーカーとの共同開発により、高品質と低価格を実現。シャープな硬化で安定した咬合採得の出来る付加型ビニルシリコーン印象材です。

79g (48ml) 2個

- 一般医療機器 ●医療機器届出番号:24B2X00003000005

進化した強化高分子パッド。  
ノンスリップシート付



練板紙

## ミキシングケミパッド

サイズ/70×90mm 5冊入(1冊/100枚綴)

肌の修復、消炎、美白、  
三千年の歴史を持つアロエベラ。



## アロエガードグローブ

- 内層にアロエエキスを配合し、肌を守ります。
- テクスチャー付きで、パウダーフリー指先感覚も良好です。
- 皮膚にやさしいと欧米でも大好評です。

XS、S、M 各100枚 (左右兼用) ●FDA規則適合・CEマーク取得・ISO9001認証工場製品

心地よくフィット!!  
リーマー作業にも最適。



## エグザムグローブ

- 十分な伸縮性と強さを兼ね備え、綿球・綿栓も作りやすい素手感覚の使用感。
- 内面に特殊なポリマー加工が施してあるため、はめやすく皮膚アレルギーを極力防止。
- パウダーフリー

XS、S、M 各100枚 (左右兼用) ●ISO9002認証工場製品

セラミック型を改良。すべらない。ピタリフィット。  
素手であるかの様な指先感覚。



## ラテックスグローブⅡ

- 内面に塩素加工が施してあるため、はめやすく皮膚アレルギーを極力防止。
- 素手感覚の使用感。
- パウダーフリー

XS、S、M 各100枚 (左右兼用) ●CEマーク取得・ISO9002認証工場製品

優れた指先感覚。リーマー作業にも最適。



## ラテックスグローブネクスト

- エンボス加工で全体的に滑りにくくしています。
- 内面に塩素加工が施してあるため、はめやすく皮膚アレルギーを極力防止。
- ラテックスプロテイン50 $\mu$ g/g以下。
- パウダーフリー

XXS、XS、S、M 各100枚 (左右兼用) ●CEマーク取得・ISO9001認証工場製品

発売以来現場を支えるロングセラー!  
100%合成ゴム製でラテックスにアレルギー症状の  
出る方に最適です。



## ニトリルグローブ

- 丈夫で安心な高品質ニトリルゴムを使用。
- エンボス加工でリーマー作業にも最適。
- パウダーフリーで粉による手荒れもありません。

XXS、XS、S、M、L 各100枚 (左右兼用) ●FDA規則適合・CEマーク取得・ISO9002認証工場製品

細かいテクスチャー付きで指先がすべりにくく、  
作業性重視。



## ニトリルグローブネクスト

- アレルギーを防止、確かな原料を使用。
- ニトリルゴムを使用。強く引っ張っても安心。
- パウダーフリー

XS、S、M 各100枚 (左右兼用) ●CEマーク取得・ISO9001認証工場製品

# デンタルカップシリーズ



青バニーカップ 5

5オンス・3,000個入



赤バニーカップ 5

5オンス・3,000個入



MUホワイトカップ 3・5・7

3オンス・3,000個入、5オンス・3,000個入  
7オンス・2,400個入



わかばカップ 5・7

5オンス・3,000個入、7オンス・2,400個入



デンタルMカップ 5

5オンス・3,000個入



3種類入ったアソートタイプ。  
トリオカップ 5

5オンス・青バニーカップ、赤バニーカップ、  
デンタルMカップ  
各1,000個入

コットンレシーバー用キャップ

## ヴェールトップ

取り付けやすく、はがれにくい、  
遮視性にすぐれた  
コットンレシーバー用キャップ。



100枚入



人気商品

## 滅菌パック (セルフシールパウチタイプ)

粘着テープ付きで簡単に封印できます。

各200枚入

Sサイズ (57×100mm)

Lサイズ (135×260mm)

MSサイズ (70×230mm)

LLサイズ (190×330mm)

Mサイズ (90×230mm)

・マチなし

## 滅菌パックⅡ (ロールパウチタイプ)

お好みの長さにカットできます。


Sサイズ (50mm×200m)

LLサイズ (150mm×200m)

Mサイズ (75mm×200m)

3Lサイズ (200mm×200m)

Lサイズ (100mm×200m) ・マチなし

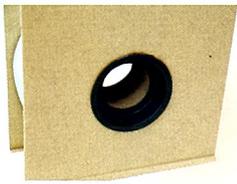

芯が2つになり  
安心して取り出せます。



上部から引き出しやす  
くなりました

## 滅菌バッググリーン (ロールパウチタイプ)

安心・確実 緑のロールパウチタイプ。

Sサイズ (50mm×200m)

LLサイズ (150mm×200m)

Mサイズ (75mm×200m)

3Lサイズ (200mm×200m)

Lサイズ (100mm×200m)


・マチなし




取り出し口は下部になります。

従来品よりインジケータが安定します。色がはっきり出ます。

オートクレーブ・ケミクレーブ/E.Oガス滅菌 共通タイプ

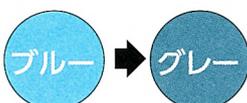

オートクレーブ・  
ケミクレーブ滅菌後

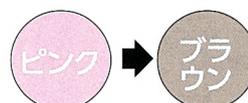

E.Oガス滅菌後

器具、用途に合わせて使い分けできる  
高品質で清潔な紙トレイです。

オート  
クレーブ  
滅菌可  
(121℃)

バージン  
パルプ使用

防水  
処理済

## ペーパートレイ

器具を置く際の不快な金属音を抑え、  
患者さんをリラックス。


各50枚入  
Lサイズ(205×110×10mm) LLサイズ(225×140×15mm)  
3Lサイズ(255×135×15mm)



3層



安心の大判サイズ  
ソフトなエンボス加工で、  
水滴を逃さず吸収します。

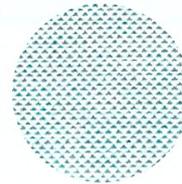

裏面は、  
ポリエチレン加工で  
安心です。

## ペーパーエプロン

2層の吸水層と、裏面はポリエチレン加工で  
安心の3層片面防水タイプです。

500枚入(125枚×4パック入)  
●色調/ブルー、ピンク、イエロー、グリーン  
●サイズ/340×460mm

吸水力抜群のソフトなロールメン。  
EOG滅菌済みで安心して使えます。



EOG滅菌済

Mサイズ



Sサイズ



EOG滅菌済みで、  
安心なブリスターパック。  
ソフトで優れた吸水性、操作性。



## ネオロールメンⅢ

- 吸水力、保水力に優れたソフトタイプのコットンを扱いやすい硬さに巻いています。
- EOG滅菌された清潔なロールメンを透明のブリスターパックに詰めました。
- 表面をカルボキシメチルセルロース(CMC)で加工し、リントを極力抑えました。

Mサイズ(10Φ×30mm)

- 1箱/10パック入(1パック・160本入)
- 一般医療機器
- 医療機器届出番号:23B2X00011000059

Sサイズ(8Φ×25mm)

- 1箱/10パック入(1パック・300本入)
- 一般医療機器
- 医療機器届出番号:23B2X00011000059

## ネオソフトメン

- ブリスターパックを採用(滅菌パック)。カット綿の折れ曲がり少なく中身が見え、減り具合が一目でわかります。
- オートカットシステムでサイズのバラツキがなく適正サイズにカットされていて各層の剥離が簡単です。

- 4号:4×4cm ●1箱/20パック入(1パック・40枚入)
- 一般医療機器
- 医療機器届出番号:23B2X00011000053

洗浄力アップ!バイオの力で、  
タンパク質(血液)を強力に分解。

広範囲な除菌力と安全性の高いCAE  
アミノ酸系界面活性剤を配合し、  
強力に除菌します。

ブルーから  
薄黄色に  
変色したら  
取り替え時です。



器具・小器具用アミノ酸系特殊除菌洗浄液  
**器具用輝麗ナーII**

タンパク質分解酵素でタンパク質(血液)、脂肪を強力に分解。  
超音波洗浄液として最適。  
グルタラル製剤を使用する場合は一次洗浄に不可欠です。  
高性能防錆剤配合で金属の錆びや変色の発生を防止。  
洗浄力が低下すると色が変わり、液交換の目安になります。  
CAEアミノ酸系界面活性剤を配合して広範囲な除菌効果を発揮。

石膏トラップ・スピットン・バキューム・排唾管洗浄液  
**パイプ輝麗ナープラス**

IPMPと防菌・防カビ剤を配合して広範囲な除菌洗浄をします。  
管内に付着した汚れは活性剤で可溶化しグリコールエーテルで素早く剥離させます。  
塩素系の成分は含まずキレート効果によりゴム・プラスチックの膨潤劣化及び金属の腐食を防ぎます。  
泡の発生を抑え低気泡性にしました。ユニットに安心設計です。

2L・4L

4L

小器具から器具まで  
洗浄力をプラスしました。

CAE  
配合

強力な湿潤作用  
ワイドな抗菌スペクトル

CAE  
配合



ブルーから  
薄黄色に  
変色したら  
取り替え時です。



器具・小器具用アミノ酸系特殊除菌洗浄液  
**器具用輝麗ナープラス**

広範囲な除菌力と安全性の高いCAEアミノ酸系界面活性剤を配合し、強力に除菌します。タンパク・脂肪に対して強力な洗浄力、金属の錆や変色の発生を防止する強力な防錆力があります。

弱酸性ムースタイプハンドソープ  
**ハンド輝麗ナーII**

安全性の高いCAEと除菌性の高いIPMPを配合。  
泡切れが良く洗いあがりスッキリ。  
CAEの配合により皮膚刺激性を抑えています。しかも生分解性が高いため、自然に与える影響も少なくなっています。  
保湿剤として持続効果の高いヒアルロン酸を配合。  
CAEとともに洗浄後に潤いを与え、肌荒れなどを防いでいます。  
皮膚のpHに近い弱酸性タイプです。

4L

500ml(ボトル)・4L

# パワフルな除菌効果に防錆能力をプラスしました。

高い  
除菌効果で  
大きな安心を  
約束

高い  
除菌効果で  
大きな安心を  
約束

強力酵素を  
多量配合



界面活性剤配合  
塩化ベンザルコニウム0.2%配合  
歯科用小器具専用除菌剤

## ネオゾール

歯科用小器具の衛生管理に大きな効果を発揮。パワフルな除菌力に確かな防錆効果がプラスされた、新能力が頼もしいムツミネオゾール。

4L

界面活性剤配合  
塩化ベンザルコニウム0.2%配合  
歯科用小器具専用除菌剤

## ネオゾールII

歯科用小器具の衛生管理に大きな効果を発揮。パワフルな除菌力に確かな防錆効果がプラスされた、新能力が頼もしいムツミネオゾールII。

4L

界面活性剤配合  
塩化ベンザルコニウム0.2%配合  
歯科用小器具専用除菌剤

## ネオゾールプラス

強力な活性度の酵素を使用し、タンパク質(脂肪、血液等)分解能力が高く、又長期間活性度を維持できるため、いつも安心してご使用できます。

4L

### 器具用輝麗ナーII 器具用輝麗ナープラス の使用方法

#### 小器具類の場合

●リーマー ●ブローチ ●クレンザー ●パー類 etc

ブラシでしっかり血液・唾液を水洗いする

#### 浸漬

希釈例 **2倍**

●浸漬時間 10~15分以上

水洗い

滅菌処理

#### 超音波洗浄器

希釈例 **10倍**

●浸漬時間 約10~15分以上

水洗い

滅菌処理

#### 器具(インストゥルメント類)の場合

●スケーラー ●ピンセット ●ハサミ etc

ブラシでしっかり血液・唾液を水洗いする

#### 浸漬

希釈例 **30倍**

●浸漬時間 30分以上

水洗い

滅菌処理

#### 超音波洗浄器

希釈例 **100倍**

●浸漬時間 約10~15分以上  
超音波洗浄機の容量に応じて配合して下さい。

水洗い

滅菌処理

### パイプ輝麗ナープラスの使用法

1. 石膏トラップ脱臭の場合  
原液200mlを直接トラップに流入してください。
2. スピットン、排水パイプの場合  
診療終了後、スピットン・排水パイプに、10倍希釈液300mlを吸引し、翌朝水で洗い流してください。
3. バキューム、排唾管の場合  
診療終了後、バキューム・排唾管に、10倍希釈液300mlを吸引し、翌朝水で洗い流してください。
4. バキュームチップ、プラスチック、ゴム製品の場合  
10倍希釈液に30分以上浸した後、水洗いしてください。
5. 洗濯機槽内のカビ洗浄の場合  
原液200mlを槽内に入れて、自動洗浄してください。  
(リネン類は入れないでください)

### ネオゾールシリーズの使用法

小器具を除菌する場合、本品を水で原液~2倍に薄めた溶液に約10分間浸漬します。  
血液の付着した器具は、あらかじめ前処理で洗浄してから浸漬してください。

剥がす・溶かす。忙しい医院のための発想の転換。

**デュアルタイプ**  
溶かす  
剥がす

原液に浸漬し、15分から20分で剥がせます!

さらに5倍~20倍に薄めると  
強力な溶解力で「溶かす」  
**デュアルタイプ**のトレークリーナーです。

アルギン酸塩印象材専用清掃材

## トレークリーナー液

トレークリーナー液は従来のトレークリーナーとは異なり、そのまま使用すれば、印象材の溶解性を抑え剥がれ性を高めるという「発想の転換」により印象材のトレーからの撤去性を向上させました。  
中性タイプ・除菌剤入りで安心してお使い頂けます。

2Lハンディ容器 詰替パック(1L詰替パック×2) ポリ容器セット(1Lポリ容器・1L詰替パック)



2Lハンディ容器

詰替パック1L

ポリ容器1L



1.2kg詰替

除菌剤入りで安全・安心。  
トレーにやさしく、強力な溶解力が長持ちします。



1.2kg容器

アルギン酸塩印象材専用清掃材

## トレクリパウダーII

- 短時間でアルギン酸塩印象材を強力に溶解します。
- 溶液の清掃力は長持ちで経済的です。
- 水にすばやく溶けます。(1Lに対し本品40g)
- 除菌剤入りで、液の腐敗を防ぎます。
- ブルーの色調で、爽やかなスペアミントの香りです。

1.2kg(容器・詰め替え)

硬めで接着性を強化!  
しかも高弾力性を維持!!



歯科用寒天印象材タイプ3A

## ネオロイド サファイアブルー

- カートリッジタイプ 48本入(1本1.7ml)
- ストレージ温度 60℃~65℃
- 管理医療機器
- 医療機器届出番号:221ADBZX00050000

強靭性、好操作性、高チキソ性!  
寒天印象材のトリプルエクセレンス。



歯科用寒天印象材タイプ3A

## ネオロイド2000H

- カートリッジタイプ 48本入(1本1.7ml)
- 5/16インチタイプ 48本入(1本2.7ml)
- ストレージ温度 58℃~63℃
- 管理医療機器
- 医療機器届出番号:221ADBZX00051000

ワンタッチで便利、美しいデザイン。



アルギン酸塩印象材保管容器

## ワンタッチBOX

- 形状/15.9×15.9×19.4cm

切削力がソフトで  
技工物の表面を荒らしません。



サンドブラスト  
**ガラスビーズ**  
(ペンシルブラスター用)

石膏や埋没材、薄い酸化被膜の除去に適して  
ます。

3kg (1.5kg×2) / 平均粒径50μ

研削力が高く、面粗さの  
均一性に優れた研磨材です。



サンドブラスト  
**アルミナ**  
(ペンシルブラスター用)

各種ブラスターにも安心して使用できます。  
強力な研磨力により埋没材及び酸化皮膜を  
短時間に除去します。

3kg (1.5kg×2) / 平均粒径50μ

超強力研磨材、  
研磨時間短縮。




超強力  
レジン床用研磨材  
**エコノサンド**

微細な粒子により滑らかな研磨表面を得る  
事ができる超強力研磨材です。

5kg

- 一般医療機器
- 医療機器届出番号: 24B2X00003000012

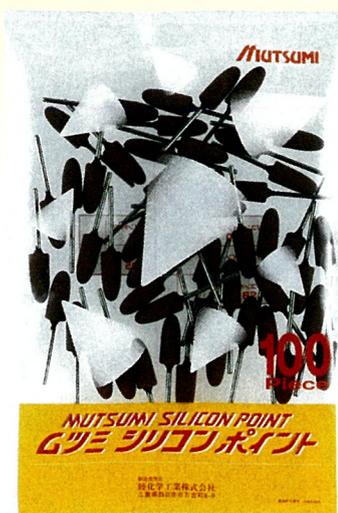

**シリコンポイント**

各種金属、補綴物の研磨で発熱が少なく、  
研磨能力に優れたシリコンポイントです。

SB-10、SB-13、SB-13S、SB-28:10本入り・100本入り、SB-125(レジン床用):10本入り・50本入り

- 一般医療機器 ●医療機器届出番号: 24B2X00003000013

形状バリエーション  
※5,000~30,000回転数/分  
で使用すること。



厳選された材料の配合によって、  
温度変化に影響されない優れた  
作業性と精度を実現した  
パラフィンワックス!



歯科用パラフィンワックス  
**プレートパラフィン  
ワックスII**

- 色調:ピンク ●厚さ:1.4 mm
- レギュラーサイズ:145×75 mm
- ビックサイズ:175×90 mm
- 一般医療機器
- 医療機器届出番号:24B2X00003000107

溶解力に自信があります!



大好評

**石膏溶解液**

中性かつ安全で、30~50℃に温めて使用す  
ると劇的に溶解速度が速くなります。

2L



アルミパック入  
2g×5本入



アルミパック入  
20g

東亜合成 瞬間接着剤  
**アロンアルファ#201**

アルミパック入 2g×5本入  
アルミパック入20g

アルコール系のワックス分離材。

200ml




ワックス分離材  
**ハイセップ**

アルコール系のワックス分離材で、分離効果の高い皮膜を形成します。

緻密な皮膜を形成する石膏分離材。

200ml

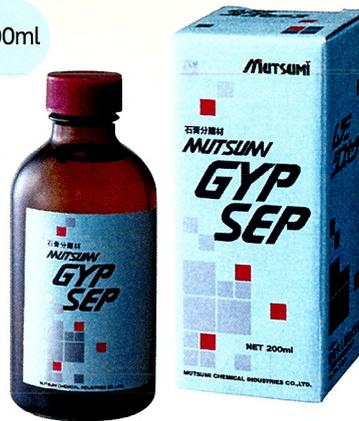

石膏分離材  
**ジプセップ**

高精度の分離効果が得られます。サラッと塗れて、乾燥も極めて速く、塗布後直ちに石膏、埋没材を投入できます。

剥がれ易く作業性が高い。

500g



レジン分離材  
**レジンセップ**

ムラの無い均一な皮膜を形成でき、適合性の良いレジン床を作製することが出来ます。

鑄造時に適切な吸水力を備えています。



厚さ0.7mm

**ハイセラミックリボンII**

今までにない高い適合精度を持つ鑄造体が得られます。リフラクトリーセラミックファイバーは不使用

No.1 32mm×30m No.2 42mm×30m  
No.3 48mm×30m

優れた柔軟性と操作性を実現しました。



厚さ0.7mm

**非吸水リボン**

水に濡らさず乾式で使用できます。リフラクトリーセラミックファイバーは不使用

No.1 32mm×30m No.2 42mm×30m  
No.3 48mm×30m

界面活性効果の優れたワックスパターンクリーナー。



ワックスパターン表面処理材  
**ワックスクリーナーPS**

プッシュ式ボトル。均一かつ滑沢な表面が得られます。

180ml

クラフトマンが丹念に仕上げました。



**石膏分離ノコ 本体／替刃**

さびにくいブラックコート仕上げで動きは滑らか、チッピングが起りにくくなっています。(本体に替刃2本付属)



- 独自のサイドホールで目詰まりを追放
- 比類なき切れ味と耐久性を実現

本体	替刃(厚さ0.15mm/0.2mm)
ショート	ショート 75mm
レギュラー	レギュラー 100mm
ロング	ロング 133mm

# 13種類の豊富なバリエーションで幅広い症例に対応。

歯科用ワックス成形品


## ワックスパターン ワックスパターンII

13種類の豊富なバリエーションで義歯製作をサポートします。ワックス自体の収縮が極めて小さい為、パターンの変形がありません。


- 一般医療機器
- ワックスパターン : 医療機器届出番号 24B2X00003000004
- ワックスパターンII: 医療機器届出番号 24B2X00003000109



### フィニッシングライン

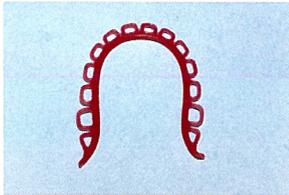


●507 スモール (10枚入)

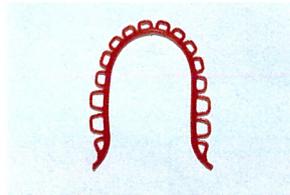

●508 ラージ (10枚入)

### T クラスプ

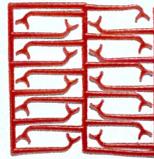


●510 スモール(小臼歯用) (10枚入)




●511 ラージ(大臼歯用) (10枚入)


### グリッド リテンション

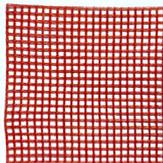

●501 グリッド (10枚入)

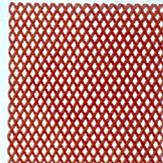

●502 ダイアゴナル (10枚入)

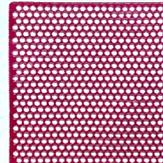

●503 ホール (20枚入)




●509 曲 (10枚入)

### ダブルアーム クラスプ




●504 スモール(小臼歯用) (10枚入)

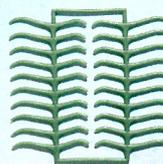


●505 ラージ(大臼歯用) (10枚入)

### リッジ リテンション

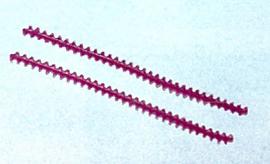

●512 バー (25本入)

### パーフォーレイテッド リテンション

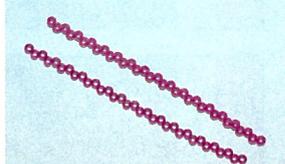

●517 (25本入)

### リング バー



●519 (10枚入)

二層式硬質レジン歯

前歯

シグナデュール

MUTSUMI  
CYGNADUR

HIGH WEAR RESISTANCE PLASTIC TEETH

管理医療機器: 219AFBZX00021000



形番号	形態	全横径 (mm)	中切歯 幅径(mm)	中切歯 長径(mm)
T4	上顎	42.8	8.1	10.5
	下顎			
L6	上顎	34.0	5.3	8.8
	下顎			
T5	上顎	44.0	8.1	10.6
	下顎			
L6	上顎	34.0	5.3	8.8
	下顎			
O2	上顎	44.9	8.1	9.6
	下顎			
L5	上顎	35.0	5.2	8.2
	下顎			
O5	上顎	46.4	8.7	10.6
	下顎			
L8	上顎	37.8	5.6	9.9
	下顎			

## ■特長

### 1) エナメルの輝き

明度(L値)は83.7(当社試験)。  
深い透明感を誇ります。

### 2) 高い特性

カレー着色(ΔEab値)5.4、フクシン着色  
(ΔEab値)22.1  
トップクラスの耐着色、耐変色性能。  
ビッカース硬度は30以上(当社試験)。

## ■包装形状

- 色調: 2色(A3/A3.5)
- 形態: 上顎(2形態)O2/O5/T4/T5  
下顎(1形態)L5/L6/L8
- 包装: 6歯×16組(96歯) / 箱
- 1組(6歯) / 1箱16組(96歯)

※中切歯長径(mm)はカラーを除く。

二層式硬質レジン歯


白歯

シグナデュール

MUTSUMI  
CYGNADUR

HIGH WEAR RESISTANCE PLASTIC TEETH

管理医療機器:219AFBZX00021000

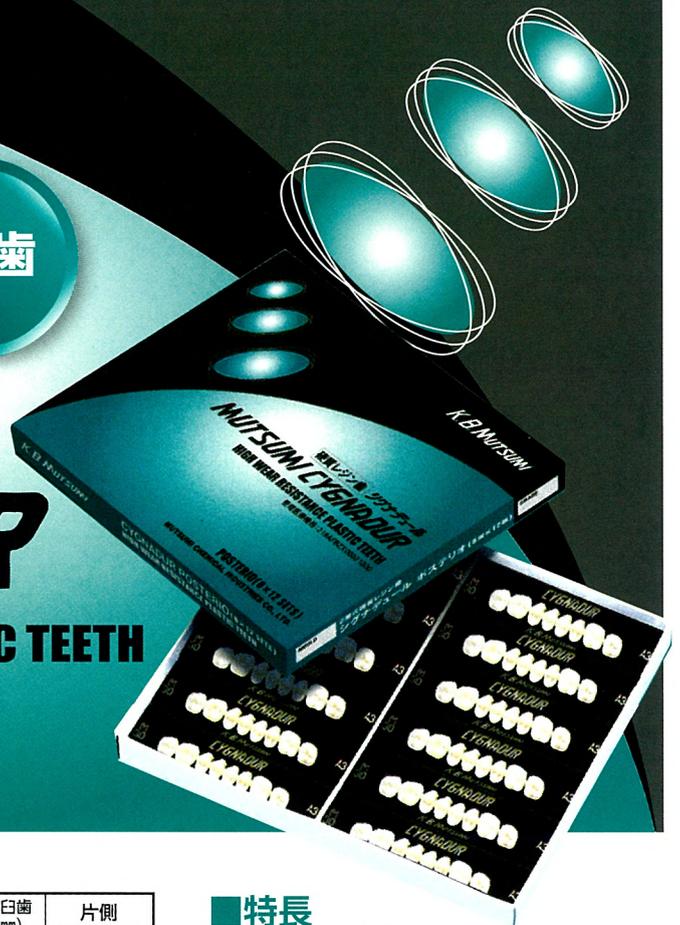

形番号	形態	第一小臼歯 長径(mm) (カラーを除く)	片側 全横径(mm)
M28	上顎	7.6	28.0
	下顎	6.9	30.0
M30	上顎	9.0	30.0
	下顎	7.5	31.5
M32	上顎	9.0	32.0
	下顎	8.2	34.6

## ■特長

### 1) エナメルの輝き

明度(L値)は83.7(当社試験)。  
深い透明感を誇ります。

### 2) 高い特性

カラー着色(ΔEab値)5.4、フクシン着色(ΔEab値)22.1  
トップクラスの耐着色、耐変色性能。  
ビッカース硬度は30以上(当社試験)。

## ■包装形状

- 色調:2色(A3/A3.5)
  - 形態:上下顎 各3種(M28/M30/M32)
  - 包装:8歯×12組(96歯)／箱  
25歯／箱(バラ臼歯)
- 
- 1組(8歯)／1箱12組(96歯)
  - バラ臼歯1箱(25歯)

## ■使用上の注意

### 1) 使用注意

- 強アルカリ性の石膏溶液に浸透することは避けてください。
- 本品の研磨作業等の際には、粉塵による人体への影響を避けるために、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸収しないこと。
- 本材は、用途以外に使用しないこと。
- 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

### 2) 重要な基本的注意

- 本材は使用する際には、本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症がないことを確認すること。また、本材の使用により、発疹などの過敏症を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症がある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないようにすること。また、本材の使用により、過敏症を起こした場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。



# 睦化学工業株式会社

〒510-0804 三重県四日市市万古町8-9

**0120-11-2354**

FAX 059-331-1044

<http://www.mutsumikagaku.co.jp>