



総合カタログ
General Catalog
2025 / SPRING

Medical
Dental
Consumer / Industrial
E-commerce / Catalog

A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

【代表】TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323

【メディカル事業部】TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112

【デンタル事業部】TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074

【コンシューマー/インダストリアル事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

【Eコマース/カタログ事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

✉ info@medicom-japan.com www.medicom-japan.com



サイトはこちらから▲

Standard Precaution

スタンダードプリコーション(標準予防策)

スタンダードプリコーション(標準予防策)は、CDCが公表した『病院における隔離予防策のためのガイドライン(1996)』によって提唱された考え方です。医療従事者が患者と関わる際に、患者の感染症をすべて把握することは不可能です。患者の感染症の有無にかかわらず、感染対策を実施する必要があります。

スタンダードプリコーション(標準予防策)

すべての患者さんの汗を除く湿性生体物質※は、感染性があるものとして対処しなければならない

※湿性生体物質=血液、体液、分泌物、嘔吐物、排泄物、創傷皮膚、粘膜など

例)



手指衛生



个人防护具(PPE)の適切な使用



呼吸器衛生
咳エチケット



適切な患者の配置



使用機材の取扱い



リネン類の取扱い



環境の維持管理

Personal Protective Equipment

个人防护具(PPE)について

个人防护具の使用基準

観血的な処置が多く、血液や唾液が飛散する可能性の高い治療では、个人防护具(PPE)の使用が非常に有効です。処置の内容に応じて適切に着用することで、感染の可能性を最小限に抑えることができます。推奨される个人防护具着用例をまとめました。

个人防护具着用例

●:必要 X:不要

	マスク	顔面防護具	グローブ	エプロン・ガウン
清潔な皮膚への接触	X	X	X	X
血液や唾液が飛散する可能性がない治療	●	X	●	X
血液や唾液が飛散する可能性がある治療	●	●	●	●
汚染器具の洗浄	●	●	●	●

防護具の選び方

観血的な処置が多く、血液や唾液が飛散する可能性の高い治療では、个人防护具が大きな役割を果たします。処置の内容に応じて適切に着用し、感染の可能性を最小限に抑えることが推奨されます。

キャップ

着用者の頭髮が汚染される可能性がある処置(汚染器具の洗浄や消毒など)、頭髮などの落下による清潔領域の環境汚染防止(手術室など)



顔面防護具

目、鼻、口元が汚染される可能性がある処置(血液の飛散する処置、飛沫感染患者への接触、口腔ケア、汚染器具の洗浄や消毒など)



マスク

目、鼻、口元が汚染される可能性がある処置(血液の飛散する処置、飛沫感染患者への接触、口腔ケア、汚染器具の洗浄や消毒など)



グローブ

手指が汚染される可能性がある処置(血液の飛散する処置、飛沫感染患者への接触、口腔ケア、汚染器具の洗浄や消毒など)



エプロン

汚染が胸部、腹部など体幹部に限定でき飛散リスクの少ない処置(口腔ケア、環境整備、体液や血液汚れの清掃など)



ガウン

汚染が広範囲におよぶ処置(血液の飛散する処置、飛沫感染患者への接触、汚染器具の洗浄や消毒など)



シューズカバー

着用者の足元が汚染される可能性がある処置(血液の飛散する処置、飛沫感染患者への接触、汚染器具の洗浄や消毒など)




Importance of reprocessing

再生処理の重要性

再生処理は、**再利用する医療機器などをいつも最適な状態で使えるようにし、手術のクオリティーを保ち、感染を抑制するための重要な作業**といえます。近年、外科手術はロボットやITの技術も導入され目覚ましい進化を遂げています。医療機器なども同様に絶えず進化しており、複雑な構造を持つものや従来と異なる素材のものも増加しました。そのため、中央材料室における再生処理業務はより複雑な作業となり、業務の専門性も高くなっています。また、WHOの研究によると手術部位感染 (SSI) は低～中所得国では手術を受けた患者の約1/3が影響を受け、欧米でも医療関連感染で2番目に多い事象となっています。


低～中所得国における手術部位感染 (SSI) による影響を受けた患者数

出典: WHO . Global Guidelines for the Prevention of Surgical Site Infection

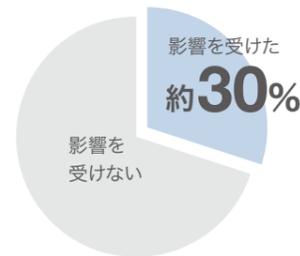

欧米における医療関連感染数

出典: WHO. Global Guidelines for the Prevention of Surgical Site Infection

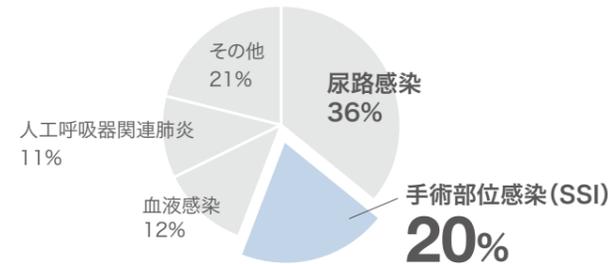

Importance of reprocessing

スポルディングの分類

医療機器などの洗浄・消毒・滅菌は、その医療機器などの使用部位によってスポルディングの分類を参考にします。どの分類においても、「洗浄」は最初のステップとなり、まず洗浄がされなければ滅菌も消毒も成り立たない、とされています。



Personal Protective Equipment

ディスポーザブル製品とは

感染管理の面から近年ディスポーザブル製品の活用が重要視されています。ディスポーザブル製品とは医療機関などで多く活用されている使い捨ての製品のことで、グローブやマスク、ガウンなどが挙げられます。

ディスポーザブル製品のメリットとデメリット

ディスポーザブル製品の主な目的は感染防止対策であり、多くの医療機器などのディスポーザブル化が進められています。ディスポーザブル製品の利用は長期的な観点から「業務の効率化」や「コスト削減」といったメリットがあります。デメリットとしては、大量の医療廃棄物が引き起こす環境問題が懸念されている点です。

ディスポーザブル製品の再利用について

ディスポーザブル製品は基本的に1回限りの使い捨てとなります。コスト削減の観点から、滅菌処理などを施し再利用するケースがあるようですが、再利用は患者だけでなく、医療従事者の感染リスクも高める行為です。外科的な処置をする、しないなどに関わらず、ディスポーザブル製品は再利用できません。

グローブ	06
マスク	17
ガウン/エプロン 他	30
滅菌包装材料	41
洗浄剤	49
手指消毒剤	50
ワイプ/タオル	51
ガーゼ	53
その他	57
設備	61
コンシューマー/インダストリアル グローブ	64
コンシューマー/インダストリアル マスク	69
コンシューマー/インダストリアル その他	73

取扱事業部の表記について

各製品の取扱の有無につきましては、弊社の事業部ごとに異なります。ご発注の際には、各製品下に記載の取扱の有無をご確認いただけますようお願い申し上げます。

※コンシューマー/インダストリアル事業部=リテールと表記しています。

取扱あり

取扱事業部	メディカル	デンタル	リテール	EC
-------	-------	------	------	----

取扱なし

取扱事業部	メディカル	デンタル	リテール	EC
-------	-------	------	------	----

GLOVE

グローブ

グローブの種類※について

※メディコムジャパンで取り扱っているグローブ



ニトリルグローブ

様々な用途に幅広く使えます。

- 合成ゴム(ニトリル)製
- フィット性が高く細かい作業がしやすい
- 耐油性・耐薬品性・強度に優れる




CPE※グローブ

調理や掃除などに適しています。

- ポリエチレン(PE)製
- ラテックス、ニトリルと比較して経済的

※CPE:キャストポリエチレン

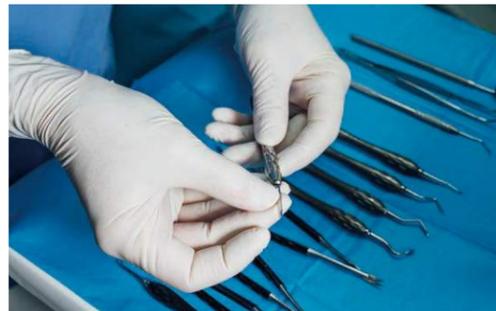

ラテックスグローブ

様々な用途に幅広く使えます。

- 天然ゴム(ラテックス)製
- ニトリルグローブよりフィット性が高く細かい作業がしやすい
- 耐薬品性・強度に優れる



プラスチックグローブ

介護・衛生などに適しています。

- ポリ塩化ビニル(PVC)製
- ラテックス、ニトリルと比較して経済的

SafeTouch

セーフタッチ

高い品質と優れた使用感を追求した医療用グローブを提供する、プロフェッショナルのためのグローバル・プレミアムブランド。

ニトリルグローブ			
セーフタッチ ネオ ニトリルグローブ P.08	セーフタッチ アドバンスド ブラック P.09	セーフタッチ ニトリルグローブ アドバンスドプロ 400 P.09	セーフタッチ ニトリルグローブ P.10
ラテックスグローブ			
セーフタッチ ラテックスグローブ P.12	セーフタッチ スマートフィット ラテックスグローブ P.13	セーフタッチ ファイングリップ ラテックスグローブ P.13	

SILKY TOUCH

シルキータッチ

医療現場で求められる素手のように繊細な触覚にこだわった日本発ブランド。

ニトリルグローブ	ラテックスグローブ
シルキータッチ ライラック P.11	セーフベーシック ラテックスグローブ P.14

SafeBasics

セーフベーシック

医療現場で求められる基本的な機能を備えたメディコム製品のスタンダードブランド。

ACCU FIT

アキュフィット

高いフィット感と柔軟性をもった製品を提供するフレンドリーブランド。

ラテックスグローブ	プラスチックグローブ
アキュフィット ラテックスグローブ P.14	アキュフィット プラスチック手袋 P.16

Pro Care

プロケア

コストメリットを追求したメディコム製品のエントリーブランド。

ニトリルグローブ	ラテックスグローブ
プロケア ニトリルグローブ P.11	プロケア ラテックスグローブ P.15

Vitals

バイタル

手ごるな価格で気兼ねなく使えるエコノミーブランド。

CPEグローブ
バイタル CPEグローブ P.16

セーフタッチ ネオ ニトリルグローブ 1134 1139

加硫促進剤によるIV型アレルギーのリスクを抑えた次世代型

- アレルギーの原因となるラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含まない
- 強度に優れたニトリルゴム製
- 長時間の着用でも疲れにくいしなやかさを実現
- 天然ゴム独特のゴム臭なし

製造規格:ASTM D 6319
引張強度:ASTM D 412
伸長率:ASTM D 412
掌部厚み:0.06mm以上
指先厚み:0.08mm以上



加硫促進剤フリー ニトリルゴム製 パウダーフリー 未滅菌 すべり止め 左右兼用 単回使用

品名:セーフタッチ ネオ ニトリルグローブ

品番	サイズ	カラー	掌部幅	全長	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
SFTJN1134A	XS	ホワイト	約75mm	240mm以上	200枚	10箱	4894476005500
SFTJN1134B	S		約85mm				4894476005517
SFTJN1134C	M		約95mm				4894476005524
SFTJN1134D	L		約106mm				4894476005531
SFTJN1139A	XS	ブルー	約75mm	240mm以上	200枚	10箱	4894476006965
SFTJN1139B	S		約85mm				4894476006972
SFTJN1139C	M		約95mm				4894476006989
SFTJN1139D	L		約106mm				4894476006996

販売名:セーフタッチ ネオ ニトリルグローブ 一般医療機器 製造販売届出番号:28B3X00001000043

取扱事業部 **メディカル** デンタル リテール EC

医療従事者のアレルギー性接触皮膚炎の多くが、グローブ製造時に使用される「加硫促進剤」が原因と言われています。

グローブ着用の機会が多い医療従事者は、一般の人より約4倍もIV型アレルギー(遅延型アレルギー)の発症リスクが高い。

加硫促進剤によるアレルギー反応はIV型アレルギー(遅延型アレルギー)に分類され、痒みを伴う紅斑、浮腫、漿液性丘疹、乾燥、亀裂が出現します。また、慢性化すると難治化し手荒れの状態が続く化学物質への曝露量が増え、さらにアレルギー性接触皮膚炎を発症しやすくなる悪循環に陥ってしまいます。「セーフタッチ ネオ ニトリルグローブ」は、グローブを使用する方のこうした状況を改善するために開発された「加硫促進剤不使用」のニトリルグローブです。



セーフタッチ アドバンスド ブラック

「黒」の利点を最大限に。

- 「黒」は光をほとんど反射しない色なので、ちらつきや目の疲れを軽減
- 歯とのコントラストが明瞭で診療がしやすい
- 手にフィットして使いやすい

製造規格:EN 455
引張強度:EN 455
伸長率:ASTM D 412
掌部厚み:0.05mm以上
指先厚み:0.05mm以上




ニトリルゴム製 パウダーフリー 未滅菌 すべり止め 左右兼用 単回使用

品名:セーフタッチ アドバンスド ブラック

品番	サイズ	カラー	掌部幅	全長*	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
JN133535A	XS	ブラック	80mm以下	240mm以上	100枚	10箱	4894476035576
JN133535B	S		約80mm				4894476035552
JN133535C	M		約95mm				4894476035590
JN133535D	L		約110mm				4894476035606

※中央値

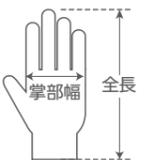

販売名:セーフタッチ アドバンスド ブラック 一般医療機器 製造販売届出番号:28B3X00001000064

取扱事業部 **メディカル** デンタル リテール EC

セーフタッチ ニトリルグローブ アドバンスドプロ 400

洗浄・消毒に安心なロングカフタイプ

- 全長約400mmのロングカフ仕様で、前腕部までを保護し感染性物質や化学物質による曝露リスクを低減
- しっかりした厚みがあり、作業中の破れや鋭利器材による切創事故、高温滅菌物からの熱傷事故のリスクなどを抑制
- グリップ力に優れ、滑りにくいため、滅菌物や高額医療機器の滑落を軽減
- 指部から掌部にかけてすべり止め付

製造規格:ASTM D 6319
引張強度:ASTM D 412
伸長率:ASTM D 412
掌部厚み:0.16mm以上
指先厚み:0.19mm以上



ニトリルゴム製 パウダーフリー 未滅菌 すべり止め 左右兼用 単回使用

品名:セーフタッチ ニトリルグローブ アドバンスドプロ 400

品番	サイズ	カラー	掌部幅	全長	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
SFTGN1196B	S	ブルー	約83mm	395mm以上	50枚	10箱	4894476009959
SFTGN1196C	M		約95mm				4894476009966



販売名:セーフタッチ ニトリルグローブ アドバンスドプロ 400 一般医療機器 製造販売届出番号:28B3X00001000047

取扱事業部 **メディカル** デンタル リテール EC

セーフタッチ ニトリルグローブ 1174 1175

フィット性に優れたスタンダードタイプ

- 強度に優れたニトリルゴム製
- 長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現
- アレルギーの原因となるラテックスプロテインを含まない
- 天然ゴム独特のゴム臭なし

製造規格:ASTM D 6319
引張強度:ASTM D 412
伸長率:ASTM D 412
掌部厚み:0.06mm以上
指先厚み:0.08mm以上



ニトリルゴム製 パウダーフリー 未滅菌 すべり止め 左右兼用 単回使用

品名:メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー

品番	サイズ	カラー	掌部幅	全長	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
1174A-Y300	XS	ホワイト	約75mm	240mm以上	300枚	8箱	4894476002783
1174B-Y300	S		約85mm				4894476002790
1174C-Y300	M		約95mm				4894476002806
1174D-Y300	L		約106mm				4894476002813
1174A-Y	XS	ホワイト	約75mm	240mm以上	100枚	10箱	4897008635688
1174B-Y	S		約85mm				4897008635695
1174C-Y	M		約95mm				4897008635701
1174D-Y	L		約106mm				4897008635718
1175A-Y	XS	ブルー	約75mm	240mm以上	100枚	10箱	4897008635763
1175B-Y	S		約85mm				4897008635770
1175C-Y	M		約95mm				4897008635787
1175D-Y	L		約106mm				4897008635794

販売名:メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー 一般医療機器 製造販売届出番号:28B3X00001000036

取扱事業部 **メディカル** **デンタル** **リテール** **EC** ※ホワイト300枚入りはデンタル、ECのみの取扱い



シルキータッチ ライラック

まるで素手のようなオペレーション

- 高い引張強度と伸張性。老化前、老化後ともに国際規格(EN 455およびASTM D 6319)に準拠
- 快適なフィット感で、手に馴染むため作業がしやすく、疲れを軽減
- ラテックスアレルギーやパウダーに起因するトラブルを回避

製造規格:EN 455
引張強度:EN 455
伸長率:ASTM D 412
掌部厚み:0.05mm以上
指先厚み:0.05mm以上



ニトリルゴム製 パウダーフリー 未滅菌 すべり止め 左右兼用 単回使用

品名:シルキータッチ ライラック

品番	サイズ	カラー	掌部幅	全長*	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
JN131172A	XS	ライラック	80mm以下	240mm以上	250枚	10箱	4894476032612
JN131172B	S		約80mm				4894476032605
JN131172C	M		約95mm				4894476032650
JN131172D	L		約110mm				4894476032636

※中央値



販売名:シルキータッチ ライラック 一般医療機器 製造販売届出番号:28B3X00001000063

取扱事業部 **メディカル** **デンタル** **リテール** **EC**

プロケア ニトリルグローブ

ニトリルグローブのベーシックモデル

- 適度な厚みで薄すぎず、対針刺しなどのリスクを軽減
- 伸張性、柔軟性があり操作性が良い
- アレルギーの原因となるラテックスプロテインを含まない

製造規格:ASTM D 6319
引張強度:ASTM D 412
伸長率:ASTM D 412
掌部厚み:0.05mm以上
指先厚み:0.09mm以上



ニトリルゴム製 パウダーフリー 未滅菌 すべり止め 左右兼用 単回使用

品名:プロケア ニトリルグローブ

品番	サイズ	カラー	掌部幅	全長	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
JN133510A	XS	ホワイト	約80mm	235mm以上	100枚	10箱	4894476027670
JN133510B	S		約85mm				4894476027649
JN133510C	M		約95mm				4894476027632
JN133510D	L		約105mm				4894476027601
JN133520A	XS	ブルー	約76mm	240mm以上	100枚	10箱	4894476027595
JN133520B	S		約85mm				4894476027564
JN133520C	M		約96mm				4894476027588
JN133520D	L		約107mm				4894476027533



販売名:プロケア ニトリルグローブ 一般医療機器 製造販売届出番号:28B3X00001000059(順次、以下の内容に切替)

販売名:プロケア ニトリルグローブ ホワイト 一般医療機器 製造販売届出番号:28B3X00001000065
プロケア ニトリルグローブ ブルー 一般医療機器 製造販売届出番号:28B3X00001000066

取扱事業部 **メディカル** **デンタル** **リテール** **EC**

SafeTouch LATEX GLOVE

メディコムの創業者ロナルド・ルーベンは、エイズ危機によって医療従事者用の个人防护具が緊急に必要とされているという問題を解決するため、高品質の診察用手袋の開発に取り組み、**セーフタッチブランド**を誕生させました。



セーフタッチ ラテックスグローブ 1124

フラッグシップモデル

- 巻き込みを軽減、指先の動きをダイレクトに伝える
- 厚手のグローブでしっかりと手を守る
- スムーズな着用でストレス軽減

製造規格: ASTM D 3578
引張強度: ASTM D 412
伸長率: ASTM D 412

掌部厚み: 0.12mm以上
指先厚み: 0.13mm以上



両面塩素加工 天然ゴム製 パウダーフリー 未滅菌 すべり止め 左右兼用 単回使用

品名: セーフタッチ ラテックスグローブ パウダーフリー

品番	サイズ	カラー	掌部幅	全長	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
1124Z	XXS	ナチュラル	約65mm	240mm以上	100枚	10箱	4897008632724
1124A	XS		約75mm				4897008632731
1124B	S		約85mm				4897008632748
1124C	M		約95mm				4897008632755
1124D	L		約106mm				4897008632762



販売名: セーフタッチ ラテックスグローブ パウダーフリー 一般医療機器 製造販売届出番号: 28B3X00001000055

取扱事業部 メディカル デンタル リテール EC

セーフタッチ スマートフィット ラテックスグローブ 1123

優れたフィット感と汎用性

- 使用シーンを選ばない厚みとグリップ力
- オーダーメイドのようなフィット感
- 内袋を使用した二重梱包

製造規格: EN 455
引張強度: EN 455
伸長率: ASTM D 412

掌部厚み: 0.08mm以上
指先厚み: 0.08mm以上



内側ポリマー加工・外側塩素加工 天然ゴム製 パウダーフリー 未滅菌 すべり止め 左右兼用 単回使用

品名: セーフタッチ スマートフィット ラテックスグローブ パウダーフリー

※中央値

品番	サイズ	カラー	掌部幅	全長*	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
JL101123A	XS	ナチュラル	80mm以下	240mm以上	100枚	10箱	4894476038522
JL101123B	S		約80mm				4894476038546
JL101123C	M		約95mm				4894476038539



販売名: セーフタッチ スマートフィット ラテックスグローブ パウダーフリー 一般医療機器 製造販売届出番号: 28B3X00001000068

取扱事業部 メディカル デンタル リテール EC

セーフタッチ ファイングリップ ラテックスグローブ 1225

メディコムNo.1のグリップ力

- インstrumentやハンドピースをしっかり把持
- 小さな器具や補綴物を落とすににくい
- 中厚手の安心感

製造規格: ASTM D 3578
引張強度: ASTM D 412
伸長率: ASTM D 412

掌部厚み: 0.10mm以上
指先厚み: 0.11mm以上



内側塩素加工 天然ゴム製 パウダーフリー 未滅菌 すべり止め 左右兼用 単回使用

品名: セーフタッチ ファイングリップ ラテックスグローブ パウダーフリー

品番	サイズ	カラー	掌部幅	全長	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
JL101225A	XS	ナチュラル	約74mm	230mm以上	100枚	10箱	4894476039017
JL101225B	S		約84mm				4894476038898
JL101225C	M		約94mm				4894476038942



販売名: セーフタッチ ファイングリップ ラテックスグローブ パウダーフリー 一般医療機器 製造販売届出番号: 28B3X00001000069

取扱事業部 メディカル デンタル リテール EC

セーフベーシック ラテックスグローブ 1188

ポリマーコーティングによる安心感

- ポリマー加工により、ラテックスゴムが直接肌に触れず、装着がスムーズ
- 使いやすいスタンダードタイプ

製造規格:ASTM D 3578
引張強度:ASTM D 412
伸長率:ASTM D 412
掌部厚み:0.12mm以上
指先厚み:0.13mm以上



内側ポリマー加工・外側塩素加工 天然ゴム製 パウダーフリー 未滅菌 すべり止め 左右兼用 単回使用

品名:セーフベーシック ラテックスグローブ イージーフィット パウダーフリー

品番	サイズ	カラー	掌部幅	全長	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
1188Z	XXS	ナチュラル	約60mm	230mm以上	100枚	10箱	4894476000871
1188A	XS		約70mm				4894476000673
1188B	S		約80mm				4894476000864
1188C	M		約95mm				4894476000680
1188D	L		約111mm				4894476000697



販売名:セーフベーシック ラテックスグローブ イージーフィット パウダーフリー 一般医療機器 製造販売届出番号:28B3X00001000062

取扱事業部 [メディカル](#) [デンタル](#) [リテール](#) [EC](#) ※XXSはデンタル、ECのみの取扱い

アキュフィット ラテックスグローブ

安心の厚さと快適な装着性

- ラテックスアレルギーの原因となるプロテインを極力抑えた手に優しいグローブ
- 両面の塩素処理加工により、パウダーなしでも装着がスムーズ
- すべり止め付で細かい作業でも安定感のある使い心地

製造規格:ASTM D 3578
引張強度:ASTM D 412
伸長率:ASTM D 412
掌部厚み:0.12mm以上
指先厚み:0.13mm以上



両面塩素加工 天然ゴム製 パウダーフリー 未滅菌 すべり止め 左右兼用 単回使用

品名:アキュフィット ラテックスグローブ パウダーフリー

品番	サイズ	カラー	掌部幅	全長	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
ACFJL1124Z	XXS	ナチュラル	約65mm	240mm以上	100枚	10箱	4894476003025
ACFJL1124A	XS		約75mm				4894476003032
ACFJL1124B	S		約85mm				4894476003049
ACFJL1124C	M		約95mm				4894476003056
ACFJL1124D	L		約106mm				4894476003063



販売名:アキュフィット ラテックスグローブ パウダーフリー 一般医療機器 製造販売届出番号:28B3X00001000038

取扱事業部 [メディカル](#) [デンタル](#) [リテール](#) [EC](#)

プロケア ラテックスグローブ

ラテックスグローブのベーシックモデル

- ラテックスアレルギーの原因となるプロテインを極力抑えた手に優しいグローブ
- すべり止め付で細かい作業でも安定感のある使い心地

製造規格:EN 455
引張強度:EN 455
伸長率:ASTM D 412
掌部厚み:0.08mm以上
指先厚み:0.08mm以上



内側塩素加工 天然ゴム製 パウダーフリー 未滅菌 すべり止め 左右兼用 単回使用

品名:メディコム プロケア ラテックスグローブ パウダーフリー

品番	サイズ	カラー	掌部幅	全長*	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
JL101512A	XS	ナチュラル	80mm以下	240mm以上	100枚	10箱	4894476021746
JL101512B	S		約80mm				4894476021760
JL101512C	M		約95mm				4894476021753

※中央値



販売名:メディコム プロケア ラテックスグローブ パウダーフリー 一般医療機器 製造販売届出番号:28B3X00001000061

取扱事業部 [メディカル](#) [デンタル](#) [リテール](#) [EC](#)

グローブによるアレルギーには大きく2つあります。

即時型アレルギーI型

ラテックスアレルギー、カゼインアレルギー

天然ゴムラテックスに含まれる残留タンパク質、または安定剤として使用されるミルクカゼインに対する反応。最初に接触してから5~30分という短時間に発症します。

- | | | |
|------|---------------------------------------|---------------------------|
| 主な症状 | ● 紅斑 ● 痒み ● 腫れ ● 滲出 ● ひび ● 接触個所の皮膚の乾燥 | (接触個所の外部にも皮膚炎が拡がることもある) |
|------|---------------------------------------|---------------------------|

※カゼインアレルギー

乳製品アレルギーや癌の原因タンパク質とも言われます。ラテックスの分子が不安定なため、安定剤として使用されるミルクカゼインによって引き起こされるアレルギーです。



遅延型アレルギーIV型 ▶詳しくはP.08へ

化学物質アレルギー

グローブの製造工程中使用される化学物質(主に加硫促進剤)が、完成したグローブに残留していることにより引き起こされる反応。化学物質との接触後24時間~48時間後に発症します。



アキュフィット プラスチック手袋

フィット性に優れたプラスチック手袋

- ソフトで薄い塩化ビニール手袋なので、手によくフィット
- アレルギーの原因となるラテックスプロテインを含まない
- 無駄なく使える左右兼用タイプ

製造規格: ASTM D 5250, EN 455
 引張強度: ASTM D 412
 伸長率: ASTM D 412
 掌部厚み: 0.05mm以上
 指先厚み: 0.04mm以上



ポリ塩化ビニール製 パウダーフリー 未滅菌 左右兼用 単回使用

品名:アキュフィット プラスチック手袋

品番	サイズ	カラー	掌部幅	全長	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
ACFJP1229B	S	クリアー	約85mm	230mm以上	150枚	10箱	4894476010368
ACFJP1229C	M		約95mm				4894476010375
ACFJP1229D	L		約105mm				4894476010382



取扱事業部 **メディカル** デンタル リテール EC

バイタル CPEグローブ

外側エンボス加工のポリグローブ

- エンボス加工によるすべり止め付
- 食品衛生法(厚生労働省告示第380号)に準拠
- 無駄なく使える左右兼用タイプ

製造規格: ASTM D 3767
 掌部厚み: 0.08mm以上
 指先厚み: 0.08mm以上



ポリエチレン製 パウダーフリー 未滅菌 すべり止め 左右兼用 単回使用

品名:バイタル CPEグローブ

品番	サイズ	カラー	全幅	全長	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
VITGC1210B	S	クリアー	約218mm	280mm以上	100枚	10箱	4897008639143
VITGC1210C	M		約228mm				4897008639006
VITGC1210D	L		約261mm				4897008639013



取扱事業部 **メディカル** デンタル リテール EC

MASK

マスク

メディコムのマスクの特長

ノーズピース

長くて丈夫なノーズピースによりマスクの密着性を最大限に高めています。

耳ひも

丈夫でソフトなラテックスフリー素材。皮膚に刺激を与えないよう、マスク外側に取り付けています。ミン目穴や接着不良が発生しにくい超音波装着方式でマスクと一体化させています。

BFE

細菌を含む、平均約3μmの粒子がろ過された率を示します。

PFE

平均約0.1μmの微粒子がろ過された率を示します。

人口血液バリア性

液体(血液)が飛散した場合、どの程度の圧力にまで耐えうるかを示します。

スパンボンド不織布 (ポリプロピレン) 外側


軽くて強度がある不織布を使用しています。撥水性の高い特殊素材はバクテリアを含んだ水溶液などが口の周りやマスクに覆われている皮膚に付着するのを防ぎます。

メルトブロー不織布 (ポリプロピレン) 中心

ポリマーを高圧で押し出すと共に熱風で吹き飛ばして作る軽くてフィルター性が高い極細繊維の不織布を使用しています。

スパンボンド不織布 (ポリプロピレン) 内側


ASTM(アメリカ材料試験協会)高レベル汚染防御規格対応の撥水能力素材です。肌に触れても毛羽立ちにくいすべすべしたとても肌触りの良い不織布を使用しています。

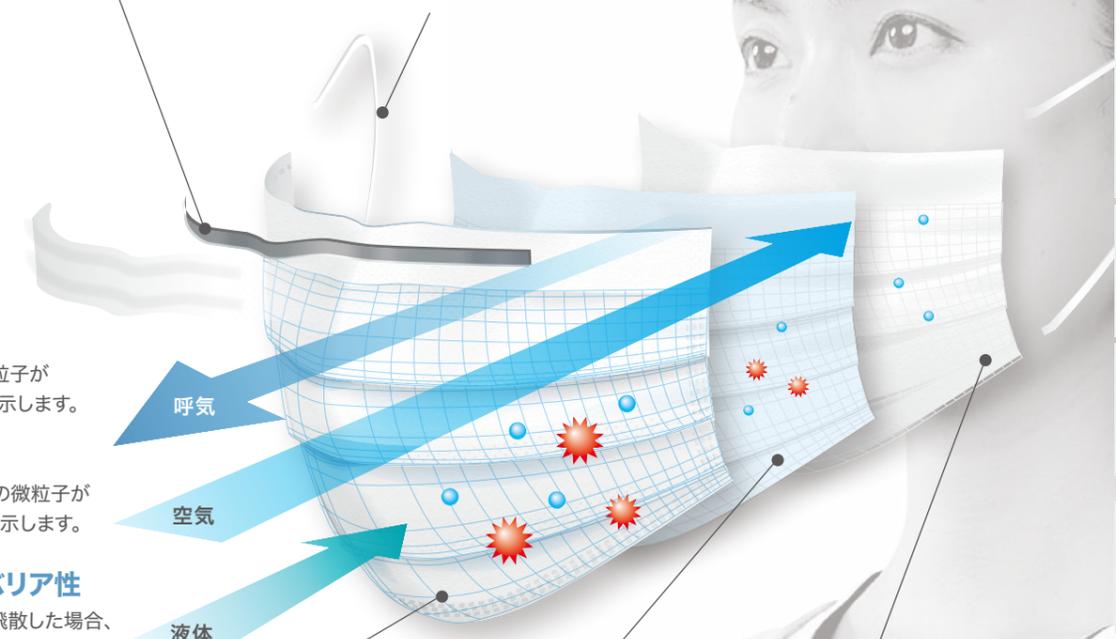

優れたフィット性能


マスク装着時、すき間がしやすい場所

マスク装着時には、鼻のわき、頬、アゴなどにすき間ができやすく、マスクの外に空気が漏れたり直接吸い込まれたりします。すき間が大きいほど、フィルターを通らない空気を多く吸い込んでしまうことになり、マスクの性能を発揮することができません。

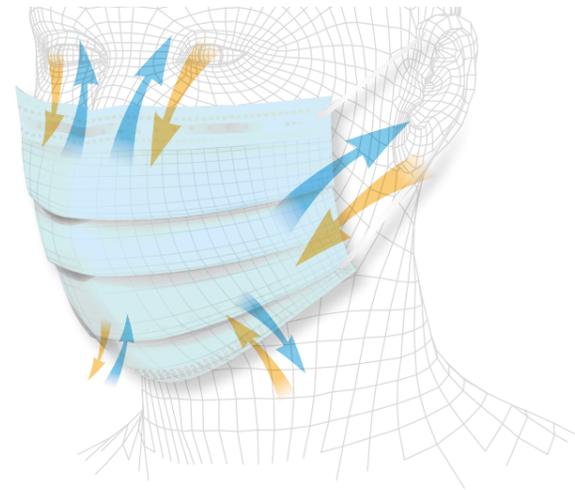

プロレーンマスクで高いフィット性能を測定

多くの医療現場で採用されているプロレーンマスクは、高いフィット性能を持った高性能・高品質のサージカルマスクです。測定機器による測定においても、その高いフィット性能を測定できました。

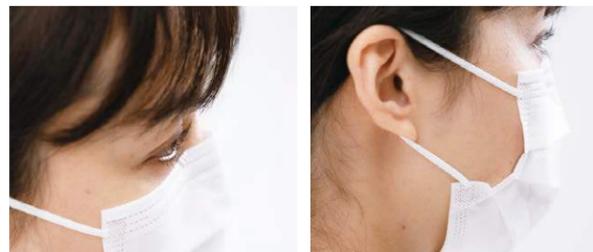

プロレーンマスク装着時の漏れ率

最小値 5.2% 最大値 18.3% 平均値 **13.7%** 漏れにくい



一般的なサージカルマスク装着時の漏れ率

最小値 69.2% 最大値 88.2% 平均値 **78.5%**

※数値：社内試験データ(N=6) ※写真はイメージです

こちらでテストを行いました

マスクフィッティングの測定機器で マスク着用時の「漏れ」を測定できます。

マスク内への粉じんの侵入率(漏れ率)は、マスクを着用し、マスクの「外側」と「内側」の粉じん粒子濃度を測定することで求められます。

測定原理 レーザー光錯乱方式による粒子個数濃度
(室内粉じんおよびマスク内粉じんの粒子個数比率測定)
試験粉じん 大気じん
試験粒子径 0.3μm~0.5μm



PRO-LANE

プロレーン

日本オリジナルのハイスぺックブランド。

ASTM LEVEL2



プロレーンマスク
レベル2
P.21

ASTM LEVEL1



プロレーンマスク
リラックス
P.22

ASTM LEVEL1



プロレーンマスク
P.23

ASTM LEVEL3



セーフマスク
プレミア エリート レベル3
P.20

ASTM LEVEL3



セーフマスク
プロシールドマスク レベル3
P.21

ASTM LEVEL1



セーフマスク
プレミア ソフト
P.24

ASTM LEVEL1



セーフマスク
プレミア ソフト
P.25

JIS T 9001 医療用マスク クラスI



セーフマスク
プレミア アンチフォグ
P.25

ASTM LEVEL1



セーフマスク
キッズ
P.26

ASTM LEVEL3



セーフマスク
ソフスキン タイオン レベル3
P.28

ASTM LEVEL1



セーフマスク ソフスキン
タイオン アンチフォグ
P.28

ASTM LEVEL1



セーフマスク
タイオン
P.29

SafeMask

セーフマスク

医療従事者専用のグローバルマスクモデルのブランド。

Pro Care

プロケア

コストパフォーマンスを追求した、ジャパンオリジナルブランド。

ASTM LEVEL1



プロケアマスク
P.27

ASTM F 2100-19 要求事項

	LEVEL1	LEVEL2	LEVEL3
バクテリア飛まつ捕集効率 [BFE]	≥95%	≥98%	≥98%
微粒子捕集効率 [PFE]	≥95%	≥98%	≥98%
人工血液バリア性	80mmHg	120mmHg	160mmHg
可燃性	クラス1	クラス1	クラス1
圧力損失 [ΔP] ※呼吸抵抗	<5.0mmH ₂ O/cm ²	<6.0mmH ₂ O/cm ²	<6.0mmH ₂ O/cm ²

メディコム LEVEL3マスクの性能

メディコムのLEVEL3マスクは、ASTM F 2100-19 の規定値と比較し、高い性能を保持しています。

	LEVEL3	メディコム LEVEL3マスク
		<p>セーフマスク プレミアエリート セーフマスク プロシールドマスク レベル3 セーフマスク ソフスキン タイオン レベル3 P.28</p>
バクテリア飛まつ捕集効率 [BFE]	≥98%	≥99% 規定値より高い濾過性能
微粒子捕集効率 [PFE]	≥98%	≥99% 規定値より高い濾過性能
人工血液バリア性	160mmHg	160mmHg
可燃性	クラス1	クラス1
圧力損失 [ΔP] ※呼吸抵抗	<6.0mmH ₂ O/cm ²	<5.0mmH ₂ O/cm ² 規定値より息苦しくない

セーフマスク プレミア エリート レベル3

飛沫、液体に最大限のバリア性を発揮

構造：飛沫に強い3層構造
 (液体防護性：160mmHg)
 ろ過精度：BFE≥99%、PFE≥99%
 呼吸抵抗：ΔP<5.0
 ※当社調べ

プリーツ：下向き
 耳ひも：平型
 ノーズピース：被覆ワイヤー



ASTM F 2100 LEVEL3

品名：セーフマスク プレミア エリート レベル3

品番	サイズ	カラー	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
GMK201915	約89×175mm	ブルー	50枚	10箱	4894476015028


取扱事業部 [メディカル](#) [デンタル](#) [リテール](#) [EC](#)

セーフマスク プロシールドマスク レベル3

曇り止め付きのプラスチックシールドで、目も同時に保護

構造：飛沫に強い3層構造
 (液体防護性：160mmHg)
 ろ過精度：BFE≥99%、PFE≥99%
 呼吸抵抗：ΔP<5.0
 ※当社調べ

プリーツ：下向き
 耳ひも：平型
 ノーズピース：アルミニウム

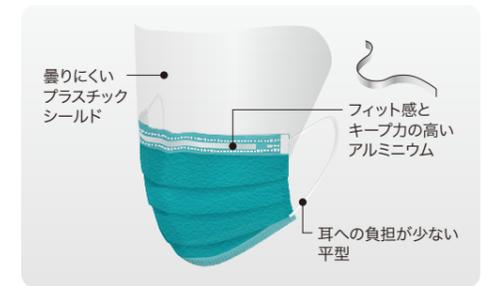

ASTM F 2100 LEVEL3

品名：セーフマスク プロシールドマスク レベル3

品番	サイズ	カラー	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
MED0002025	約89×175mm	グリーン	25枚	4箱	4897008633042

取扱事業部 [メディカル](#) [デンタル](#) [リテール](#) [EC](#)

プロレーンマスク レベル2

ASTM F 2100 LEVEL2適合マスク

構造：飛沫に強い3層構造
 (液体防護性：120mmHg)
 ろ過精度：BFE≥99%、PFE≥99%
 呼吸抵抗：ΔP<4.0
 ※当社調べ

プリーツ：下向き
 耳ひも：平型
 ノーズピース：アルミニウム



ASTM F 2100 LEVEL2

品名：プロレーンマスク レベル2

品番	サイズ	カラー	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
PLEJMK2883	約89×175mm	ホワイト	50枚	10箱	4894476001632

取扱事業部 [メディカル](#) [デンタル](#) [リテール](#) [EC](#)

プロレーンマスク リラックス

立体プリーツ構造で肌に優しく口元快適

構造：飛沫に強い3層構造
 (液体防護性：80mmHg)
 ろ過精度：BFE \geq 99%、PFE \geq 99%
 呼吸抵抗： $\Delta P < 4.0$
 ※当社調べ

プリーツ：立体
 耳ひも：幅広ソフト型
 ノーズピース：アルミニウム



ホワイト



ピンク



ブルー



ライラック



Sサイズ

Sサイズ



ASTM F 2100 LEVEL 1

品名：プロレーンマスク リラックス

品番	サイズ	カラー	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
PLEJMA2714	レギュラーサイズ 約89×178mm	ホワイト	50枚	40箱	4894476007269
PLEJMA2716		ピンク			4894476007900
PLEJMA2715		ブルー			4894476007887
JMK222411		ライラック			4894476036405
PLEJM2714S	Sサイズ 約89×162mm	ホワイト	50枚	40箱	4894476010085
PLEJM2716S		ピンク			4894476010092

取扱事業部 [メディカル](#) [デンタル](#) [リテール](#) [EC](#)

プロレーンマスク

医療従事者に愛され続けるサージカルマスク

構造：飛沫に強い3層構造
 (液体防護性：80mmHg)
 ろ過精度：BFE \geq 99%、PFE \geq 99%
 呼吸抵抗： $\Delta P < 4.0$
 ※当社調べ


プリーツ：下向き
 耳ひも：平型
 ノーズピース：アルミニウム



ホワイト



ブルー

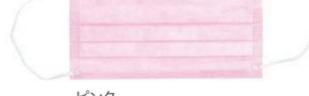

ピンク



Sサイズ

Sサイズ



ASTM F 2100 LEVEL 1

品名：プロレーンマスク

品番	サイズ	カラー	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
PLE0002714	レギュラーサイズ 約89×178mm	ホワイト	50枚	40箱	4897008632441
PLE0002715		ブルー			4897008632458
PLE0002716		ピンク			4897008632465
PLE002714S	Sサイズ 約89×162mm	ホワイト	50枚	40箱	4897008636135
PLE002716S		ピンク			4897008636142

取扱事業部 [メディカル](#) [デンタル](#) [リテール](#) [EC](#)

セーフマスク プレミア

高い防護性能と豊富なカラーバリエーション

構造: 飛沫に強い3層構造
(液体防護性: 80mmHg)
ろ過精度: BFE \geq 99%、PFE \geq 99%
呼気抵抗: $\Delta P < 4.0$
※当社調べ

プリーツ: 下向き
耳ひも: 平型
ノーズピース: アルミニウム



ASTM F 2100 LEVEL1

品名: セーフマスク プレミア

品番	サイズ	カラー	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード*
PMR002014M	約89×175mm	ホワイト	50枚	10箱	4897008632878
PMR002015M		ブルー			4897008632885
PMR002016M		ピンク			4897008632892
PMR002017M		イエロー			4897008632908
PMR002018M		グリーン			4897008632915
PMR002011M		ラベンダー			4897008632861

取扱事業部 **メディカル** **デンタル** **リテール** **EC**

セーフマスク プレミア ソフト

内側がサラサラ素材で肌当たり快適なマスク

構造: 飛沫に強い3層構造
(液体防護性: 80mmHg)
ろ過精度: BFE \geq 99%、PFE \geq 99%
呼気抵抗: $\Delta P < 4.0$
※当社調べ

プリーツ: 下向き
耳ひも: 平型
ノーズピース: 被覆ワイヤー




ASTM F 2100 LEVEL1

品名: セーフマスク プレミア ソフト

品番	サイズ	カラー	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
PMRJME2114	約89×175mm	ホワイト	50枚	10箱	4894476004558

取扱事業部 **メディカル** **デンタル** **リテール** **EC**

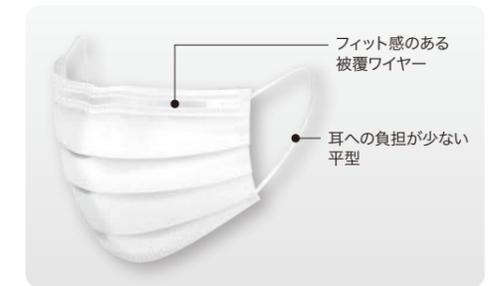

セーフマスク プレミア アンチフォグ

ゴーグルやルーペ等の曇りを軽減

プリーツ: 下向き
耳ひも: 幅広ソフト型
ノーズピース: アルミニウム



JIS T 9001医療用マスク クラスI

品名: セーフマスク プレミア アンチフォグ

品番	サイズ	カラー	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
PMRJMK2383	約89×175mm	ホワイト	50枚	10箱	4894476003964

取扱事業部 **メディカル** **デンタル** **リテール** **EC**



セーフマスク キッズ


医療用レベルを保持した子ども用マスク

構造：飛沫に強い3層構造
 (液体防護性：80mmHg)
 ろ過精度：BFE \geq 99%、PFE \geq 99%
 呼吸抵抗： $\Delta P < 4.0$
 ※当社調べ

プリーツ：下向き
 耳ひも：平型
 ノーズピース：被覆ワイヤー



ホワイト

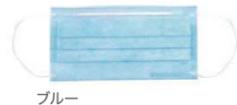

ブルー



ホワイト

ブルー



フィット感のある被覆ワイヤー

耳への負担が少ない平型

ASTM F 2100 LEVEL1

品名：セーフマスク キッズ

品番	サイズ	カラー	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
MED2114KID	約89×145mm	ホワイト	50枚	10箱	4897008634926
MED2115KID		ブルー			4897008634896

取扱事業部 メディカル デンタル リテール EC

プロケアマスク

ベーシックモデルのサージカルマスク

構造：飛沫に強い3層構造
 (液体防護性：80mmHg)
 ろ過精度：BFE \geq 99%、PFE \geq 99%
 呼吸抵抗： $\Delta P < 4.0$
 ※当社調べ

プリーツ：下向き
 耳ひも：丸型
 ノーズピース：被覆ワイヤー



Sサイズ



フィット感のある被覆ワイヤー

肌にやさしい丸型

ASTM F 2100 LEVEL1

品名：プロケアマスク

品番	サイズ	カラー	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
JMK211683	レギュラーサイズ 約89×178mm	ホワイト	50枚	40箱	4894476018463
JMK211683S	Sサイズ 約89×162mm	ホワイト	50枚	40箱	4894476018456
JMK218614	レギュラーサイズ 約89×178mm	ホワイト(ロゴ入り)	50枚	40箱	4894476030915


取扱事業部 メディカル デンタル リテール EC ※ロゴ入りはデンタル、ECのみの取扱い

ハローキティマスク

マスク全面にハローキティのモチーフをプリント

構造：飛沫に強い3層構造
 (液体防護性：80mmHg)
 ろ過精度：BFE \geq 99%、PFE \geq 99%
 呼吸抵抗： $\Delta P < 4.0$
 ※当社調べ

プリーツ：下向き
 耳ひも：平型
 ノーズピース：被覆ワイヤー

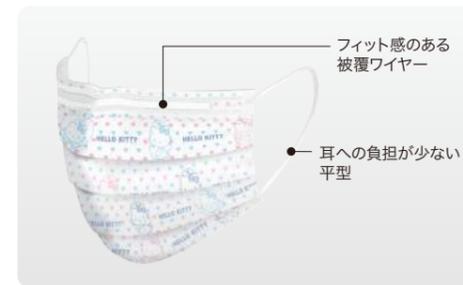

フィット感のある被覆ワイヤー

耳への負担が少ない平型

ASTM F 2100 LEVEL1

品名：ハローキティマスク

品番	サイズ	カラー	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
HEK0002124	約89×175mm	ホワイト(柄入り)	50枚	10箱	4897008638276

取扱事業部 メディカル デンタル リテール EC

セーフマスク ソフスキン タイオン レベル3

最大限のバリア性でハイスペックなひもマスク

構造：飛沫に強い3層構造
(液体防護性：160mmHg)
ろ過精度：BFE \geq 99%、PFE \geq 99%
呼吸抵抗： $\Delta P < 5.0$
※当社調べ

ブリーツ：下向き
耳ひも：ひも
ノーズピース：アルミニウム



ASTM F 2100 LEVEL3

品名：セーフマスク ソフスキン タイオン レベル3

品番	サイズ	カラー	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
SFS002050G	約89×175mm	グリーン	50枚	6箱	8718007911008

取扱事業部 **メディカル** **デンタル** **リテール** **EC**

セーフマスク ソフスキン タイオン アンチフォグ

アイウェアの曇りを軽減できるひもマスク

構造：飛沫に強い3層構造
(液体防護性：80mmHg)
ろ過精度：BFE \geq 99%、PFE \geq 99%
呼吸抵抗： $\Delta P < 4.1$
※当社調べ

ブリーツ：下向き
耳ひも：ひも
ノーズピース：アルミニウム



ASTM F 2100 LEVEL1

品名：セーフマスク ソフスキン タイオン アンチフォグ

品番	サイズ	カラー	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
SFSH2050BF	約89×175mm	ブルー	50枚	6箱	4897008638795


取扱事業部 **メディカル** **デンタル** **リテール** **EC**

セーフマスク タイオン

手術・処置用ひもタイプのベーシックモデル

構造：飛沫に強い3層構造
(液体防護性：80mmHg)
ろ過精度：BFE \geq 99%、PFE \geq 98%
呼吸抵抗： $\Delta P < 4.0$
※当社調べ

ブリーツ：下向き
耳ひも：ひも
ノーズピース：アルミニウム

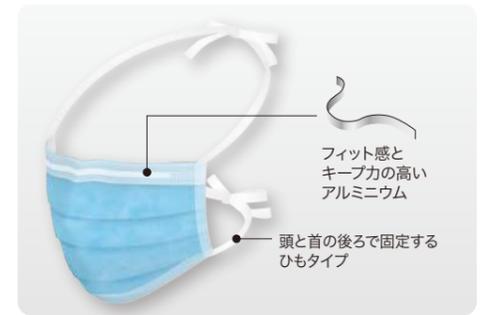

ASTM F 2100 LEVEL1

品名：セーフマスク タイオン

品番	サイズ	カラー	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
MED002000B	約89×175mm	ブルー	50枚	6箱	4897008637507

取扱事業部 **メディカル** **デンタル** **リテール** **EC**

マクライト N95マスク

フィット性が高く個包装で折りたためる

耳ひも：オーバーヘッドタイプ
ノーズピース：
ウレタンフォームと被覆ワイヤー



N95 個包装

品名：マクライト N95マスク

品番	サイズ	カラー	入り数(箱)	入り数(ケース)
SEKURAX	約156×112mm	ホワイト	30枚	12箱

取扱事業部 **メディカル** **デンタル** **リテール** **EC**

GOWN / APRON

ガウン/エプロン 他

AAMIが定めるバリア性レベル

AAMIレベルとは、ガウンやドレープのバリア性能を4段階で示した世界的な基準です。医療従事者および患者への感染リスクを低減するために、手技や予測される手術時間、血液量等に応じて適切なバリア性能を備えたガウンやドレープを選択することが推奨されています。


	素材の特徴	臨床上の目安(血液量などはあくまで目安です)			
		予測される血液量など	ドレープ・ガウンにかかる圧力	予測される手術時間	手術の種類
AAMI レベル 4	全く浸透しない	多量 ≥500mL	大きい	≥3時間	肝臓切除術 整形関節手術 人工血管置換術 帝王切開術
AAMI レベル 3	ほぼ浸透しない	中程度 100~500mL	中程度	1~3時間	胆管切除術 胆のう摘出術 乳房切除術 開腹手術 観血的整復固定術
AAMI レベル 2	ある程度浸透がある	少量 ≤100mL	中程度	≤1時間	鏡視下手術 ヘルニア手術 白内障眼内 レンズ挿入術
AAMI レベル 1	すぐに浸透する	極少量	極小	極短時間	極短時間の手術

AAMIレベル3


セーフウェア サージカルガウン 滅菌済

AAMIレベル3適合で外科処置に最適

- AAMIレベル3適合の高い撥水性能を有するサージカルガウン
- 首の後ろの面ファスナーが大きめなので、着脱が容易
- マスクの有無を選択可能

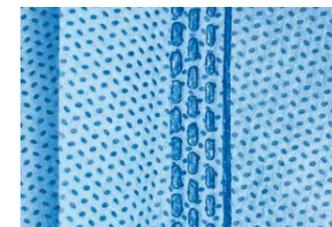

接合部からの液体の侵入を防ぐ4列超音波シール

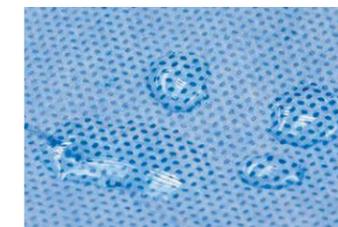

高い液体防御性



大きめの面ファスナーを採用



通気性に優れ、リントの発生も抑えた素材

ワンステップで清潔かつスピーディーな袖通しが可能



製品を取り出した状態で、写真のように両側の隙間に手を入れます。



そのまま手を広げるように開いていくと、清潔かつスピーディーに袖通しが行えます。



滅菌済

マスクあり

品名:セーフウェア サージカルガウン レベル3 滅菌済

品番	マスク*	カラー	サイズ**	入り数(パック)	入り数(ケース)	JANコード
SFWGSG834C	無	ブルー	M	1枚 滅菌タオル 2枚付	50パック	4894476004695
SFWGSG834D			L			4894476004701
SFWGSG834E			XL			4894476004718
JSG710023C	有	ブルー	M	1枚 滅菌タオル 2枚付	50パック	4894476034180
JSG710023D			L			4894476034166
JSG710023E			XL			4894476034159

※マスク部サイズ:縦 約14×横 約27cm
 ※※M ①着丈:約115cm ②身幅:約66cm
 L ①着丈:約129cm ②身幅:約71cm
 XL①着丈:約139cm ②身幅:約76cm

取扱事業部 [メディカル](#) [デンタル](#) [リテール](#) [EC](#)

※ マスク付きは、2025年1月より順次、首の後ろを「面ファスナー+ひも付き」に変更



グローブ

マスク

ガウン/エプロン 他

滅菌包装材料

洗浄剤

手指消毒剤

ワイフ/タオル

ガーゼ

その他

設備

グローブ

マスク

その他

AAMILレベル2

セーフウェア 防水 アイソレーションガウン レベル2 グリーン

AAMILレベル2に防水加工で高い防護性

- スパンボンド不織布にラミネート加工を施すことで、高い防水性を実現した、AAMILレベル2のバリア性能を有する防水アイソレーションガウン
- 液体への暴露機会が多く、飛沫の飛散が想定される状況下にも
- 伸縮性に優れたニット袖で、背面は面ファスナーでフルバックタイプ




伸縮性に優れたニット袖



背面は面ファスナーでフルバックタイプ



バックスタイル

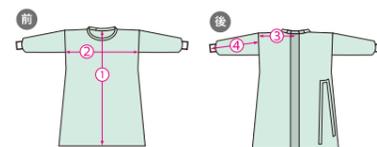

未滅菌

品名:セーフウェア 防水 アイソレーションガウン レベル2 グリーン

品番	カラー	サイズ	入り数(パック)	入り数(ケース)	JANコード
GGW718040R	グリーン	レギュラー*	10枚	5パック	4894476017374

※①着丈:約127.5cm ②身幅:約70cm ③肩幅:約22cm ④袖丈:約61.5cm

取扱事業部	メディカル	デンタル	リテール	EC
-------	-------	------	------	----

AAMILレベル2

セーフウェア アイソレーションケモガウン レベル2

化学療法に最適なAAMILレベル2のケモガウン

- AAMILレベル2のバリア性能を有するアイソレーションケモガウン
- 抗がん剤耐性試験 (ASTM D 6978-05) 実施済
- 首の後ろがゴムタイプなので結ぶ必要がなく、着脱が容易
- 袖口がサムループでグローブ装着時に袖がめくれにくい



首元部分(表)



首元部分(ゴムタイプ)




袖部分



袖部分 (サムループ使用)



バックスタイル

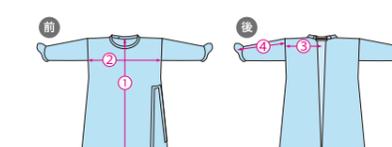

未滅菌

品名:セーフウェア アイソレーションケモガウン レベル2

品番	カラー	サイズ	入り数(パック)	入り数(ケース)	JANコード
SFWGGW822R	ブルー	レギュラー*	10枚	10パック	4894476004152

※①着丈:約112cm ②身幅:約71cm ③肩幅:約10cm ④袖丈:約59cm

取扱事業部	メディカル	デンタル	リテール	EC
-------	-------	------	------	----

グローブ

マスク

ガウン/エプロン 他

滅菌包装材料

洗浄剤

手指消毒剤

ワイフ/タオル

ガーゼ

その他

設備

グローブ

マスク

その他

AAMILレベル2

セーフウェア アイソレーションガウン レベル2

AAMILレベル2のアイソレーションガウン

- AAMILレベル2のバリア性能を有するアイソレーションガウン
- 首の後ろがゴムタイプなので結ぶ必要がなく、着脱が容易
- 袖口がサムループでグローブ装着時に袖がめくれにくい



首元部分(表)



首元部分(ゴムタイプ)




袖部分

袖部分
(サムループ使用)



バックスタイル(イエロー)

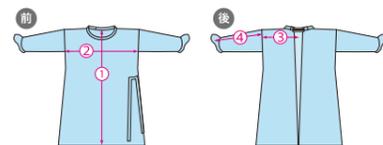

未滅菌

品名:セーフウェア アイソレーションガウン レベル2

品番	カラー	サイズ	入り数(パック)	入り数(ケース)	JANコード
SFWGGW831R	イエロー	レギュラー*	10枚	10パック	4894476004121
SFWGGW832R	ブルー	レギュラー*	10枚	10パック	4894476004138

※①着丈:約112cm ②身幅:約71cm ③肩幅:約23cm ④袖丈:約65cm

取扱事業部 [メディカル](#) [デンタル](#) [リテール](#) [EC](#)

AAMILレベル1

セーフウェア SMS アイソレーションガウン レベル1

AAMILレベル1適合の不織布ガウン

- AAMILレベル1のバリア性能を有するアイソレーションガウン
- 超音波溶着による縫製なので、着用者をしっかりと防護
- 通気性の良い素材を使用しているため、長時間の着用でも快適



首元部分(表)



首元部分(裏・面ファスナー)




袖部分




バックスタイル



防護性が高く、通気性の良い素材を使用

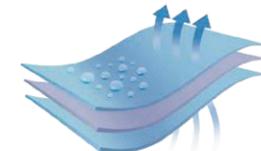

素材:SMS不織布(3層)

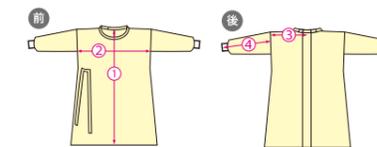

未滅菌

品名:セーフウェア SMS アイソレーションガウン レベル1

品番	カラー	サイズ	入り数(パック)	入り数(ケース)	JANコード
SFWGGW824R	イエロー	レギュラー*	10枚	5パック	4894476009416

※①着丈:約122cm ②身幅:約66cm ③肩幅:約21cm ④袖丈:約60cm

取扱事業部 [メディカル](#) [デンタル](#) [リテール](#) [EC](#)

メディコム アイソレーションガウン

軽量でも厚手なアイソレーションガウン

- 厚手の袖ありタイプ、袖にはニット素材を採用
- 柔らかくて軽い、ポリプロピレン製の不織布を使用
- 面ファスナーで首を、ひもで腰を固定
- 滅菌バッグでのオートクレーブ滅菌(121°C)対応



首元部分(表)




首元部分(裏・面ファスナー)



袖部分



バックスタイル

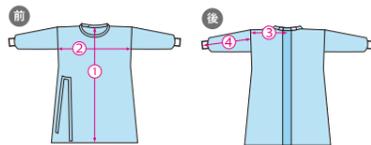

未滅菌

品名:メディコム アイソレーションガウン

品番	カラー	サイズ	入り数(パック)	入り数(ケース)	JANコード
D-8023-40-0204	ブルー	フリー*	10枚	5パック	4897008631253


※①着丈:約127cm ②身幅:約70cm ③肩幅:約23cm ④袖丈:約60cm

取扱事業部	メディカル	デンタル	リテール	EC
-------	-------	------	------	----

メディコム プラスチックガウン

サムフック付の袖ありプラスチックガウン

- オーバーヘッドの袖ありタイプ
- バリア性が高く、焼却時に有害物質の出ないポリエチレン製
- 血液や薬液などの飛散から着用者を保護
- 袖口はサムループ付

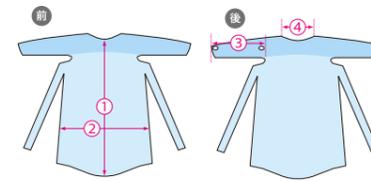

首元部分(表)



首元部分(裏)



袖部分
(サムループ使用)



バックスタイル



未滅菌 個包装

品名:メディコム プラスチックガウン

品番	カラー	サイズ	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
MED08023PE	ブルー	フリー*	15枚	10箱	4894476007559


※①着丈:約184cm ②身幅:約92cm ③袖丈:約60cm ④首回り:約25cm

取扱事業部	メディカル	デンタル	リテール	EC
-------	-------	------	------	----

セーフベーシック プラスチックエプロン

袖なしタイプのプラスチックエプロン

- オーバーヘッドの袖なしタイプ
- バリア性が高く、焼却時に有害物質の出ないポリエチレン製
- 血液や薬液などの飛散から着用者を保護

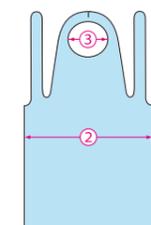

未滅菌

品名:セーフベーシック プラスチックエプロン

品番	カラー	サイズ	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
SFBGGW5682	ブルー	フリー*	50枚	20箱	4894476007573
SFBGGW5683	ホワイト				4894476007580
SFBGGW5679	ピンク				4894476007566

※①長さ:約117cm ②幅:約71cm ③首回り横:約22cm

取扱事業部	メディカル	デンタル	リテール	EC
-------	-------	------	------	----

セーフドレープ 歯科用 サージカルドレープパック 滅菌済

手術や処置でのドレーピング準備用パック

- 歯科手術に必要なディスポーザブル製品をまとめて滅菌
- 手術準備の簡便化や時間短縮の他、清潔性確保の向上に
- 発注や在庫管理の負担を軽減



サージカルガウン



ユーティリティードレープ



患者用穴あきドレープ




ドリルスリーブ



スneeチャーバッグ



梱包材

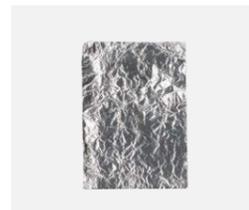

アルミホイル



Mサイズ

内容物	数量	使い方(一般例)
サージカルガウン	2	術者及びその被服を血液・体液などの汚染から保護するために着用する、術者用の手術用ガウン。SMS不織布(5層)
ユーティリティードレープ	3	無菌域を確保するために、様々な用途で使用可能。固定できるテープ付
患者用穴あきドレープ	1	患者の術野以外を覆い、術野へのコンタミネーションや汚染などのリスクを防ぐ
ドリルスリーブ	4	ハンドピースやバキュームなどの器材に被せて使用
スneeチャーバッグ	1	縫合糸の廃棄などに使用可能な透明プラスチックバッグ
梱包材	1	内容物を梱包するための不織布。器械台カバーとしても使用可能
アルミホイル	4	無影灯のハンドル等に巻いて使用可能


滅菌済

品名:セーフドレープ 歯科用 サージカルドレープパック 滅菌済

品番	カラー	ガウンサイズ	入り数(パック)	入り数(ケース)	JANコード
JSP810093	ブルー	M*	1セット	5パック	4894476036450

販売名:セーフドレープ 歯科用 サージカルドレープパック 滅菌済 一般医療機器 製造販売届出番号:28B3X00001000067
 ※サージカルガウン ①着丈:約115cm ②身幅:約66cm
 ユーティリティードレープ ④60cm ⑤80cm
 患者用穴あきドレープ ④160cm ⑤220cm ⑥90cm ⑦90cm ⑧10cm
 ドリルスリーブ 8cm×120cm
 スneeチャーバッグ 78×105cm
 梱包材 120×120cm
 アルミホイル 16×22cm

取扱事業部 **メディカル** **デンタル** **リテール** **EC**

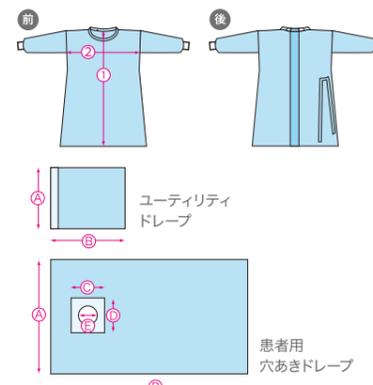

セーフベーシック ブーフアントキャップ

通気性がよく着脱しやすいキャップ

- 長時間の着用も快適な、通気性の良い不織布製キャップ
- 使用時の手間がかからない、着脱しやすいタイプ



未滅菌

品名:セーフベーシック ブーフアントキャップ

品番	カラー	サイズ	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
SFBJCP8482	ブルー	約61cm	100枚	6箱	4894476004046
SFBJCP8483	ホワイト				4894476004053

取扱事業部 **メディカル** **デンタル** **リテール** **EC**

セーフベーシック シューカバー

滑り止め加工を施したシューズカバー

- 不織布製シューズカバー



未滅菌 すべり止め加工

品名:セーフベーシック シューカバー

品番	カラー	サイズ	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
GSC8007	ブルー	フリー*	100枚	3箱	4894476001465

※幅:約17cm 長さ:約41cm

取扱事業部 **メディカル** **デンタル** **リテール** **EC**

セーフウェア フェイスシールド

上部からの飛沫も守る曇りにくいシールド

- 高い透明度と広い視野を確保したラウンドタイプのシールドで、眼鏡やマスクの上から装着が可能
- 薄型軽量で額との接触部には柔らかいウレタン素材を採用のため、長時間の着用も快適
- シールド両面に曇り止めと静電気防止加工済



未滅菌 曇り止め加工 静電気防止加工

品名:セーフウェア フェイスシールド

品番	カラー	サイズ	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
SFWHFS2033	クリアー	フリー*	30枚	4箱	4894476009874

※幅:約325mm 高さ:約225mm ウレタン部厚み:約43mm

取扱事業部 [メディカル](#) [デンタル](#) [リテール](#) [EC](#)

セーフマスク プロテクティブ アイウェア

軽量かつ視認性に優れたアイウェア

- 視野角の非常に広いワイドフィルム採用で眼鏡の上から装着が可能
- 軽量で、長時間の着用も快適
- 曇り止め加工済



未滅菌 曇り止め加工

品名:セーフマスク プロテクティブ アイウェア

品番	カラー	サイズ	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
MED0002900	ブルー(フレーム)	フリー*	10枚	6箱	4894476007894

※幅:約150mm 高さ:約70mm テンプル長さ:約160mm

取扱事業部 [メディカル](#) [デンタル](#) [リテール](#) [EC](#)

STERILIZATION BAG

滅菌包装材料




メディカルデバイスの国際規格に適合

メディコの滅菌包材は、ISO 11607及びASTM F 2559に適合した性能要求テストをクリア。ISO 11140・Type1のプロセッシングケータ*を採用。メディコは世界で滅菌包材を販売しているため、メディカルデバイスの国際規格に適合した製品を提供しています。

※インジケータは、化学的インジケータであり、あくまでも被滅菌物が滅菌工程を通過したか否かを区別するものです。被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。

インジケータ変色見本

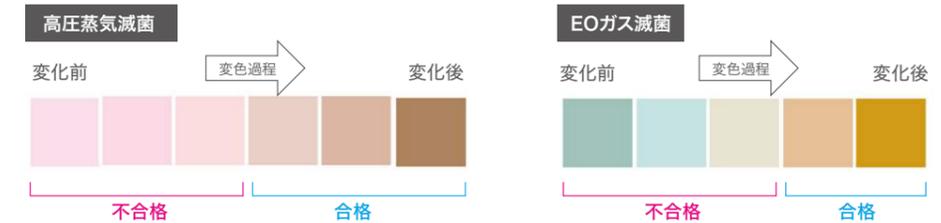

リント(紙粉)が出にくい

リントが出にくく、リントが滅菌器のフィルターに詰まるといったトラブルを軽減できます。

台湾の自社工場で製造

ISO13458 ヨーロッパCE指令認証、中国台湾GMP品質システム認証を受けています。高品質な製品を生産し世界中へお届けしています。



グローブ

マスク

ガウン/手シロ他

滅菌包装材料

洗浄剤

手指消毒剤

ワイプ/タオル

ガーゼ

その他

設備

グローブ

マスク

その他

グローブ

マスク

ガウン/手シロ他

滅菌包装材料

洗浄剤

手指消毒剤

ワイプ/タオル

ガーゼ

その他

設備

グローブ

マスク

その他

ロール

プロリール プレミアム 滅菌ロール

使いやすさと機能性に優れた滅菌ロール


- 医療現場の厳しい条件での滅菌にも対応
- 内容物が見えやすい透明ブルーフィルムを採用
- 紙面にインジケータとともに寸法の目安となる目盛りを印刷
- 機能性が高いボックス入りで専用のディスペンサー不要
- シーリング推奨温度: 170~220℃



9
サイズ
展開

オートクレーブ
EOガス両用

信頼性の高いインジケータ (ISO 11140 Type1 インジケータ)

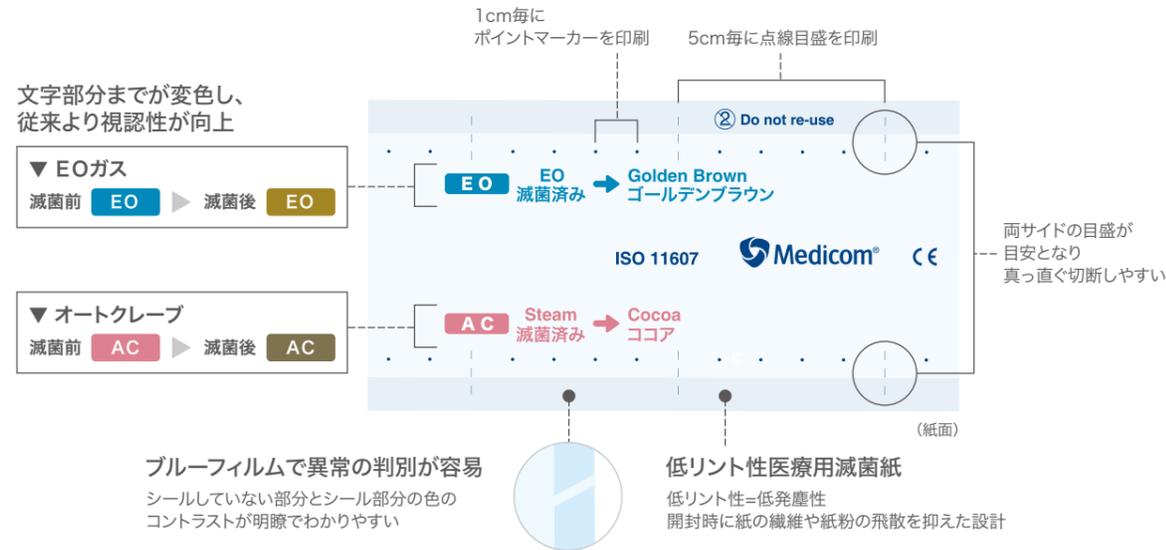

ロール

プロリール アドバンス 滅菌ロール

よりハードな滅菌環境にも耐える滅菌ロール


- 透気度やシール強度などが高く、
医療現場のとても厳しい条件でも破袋リスクが低い
- 内容物が見えやすい透明ブルーフィルムを採用し、
フィルム面にインジケータや寸法の目安となる目盛りを印刷することで
作業効率を向上
- 機能性が高いボックス入りで専用のディスペンサー不要
- シーリング推奨温度: 170~220℃



10
サイズ
展開

オートクレーブ
EOガス両用

信頼性の高いインジケータ (ISO 11140 Type1 インジケータ)

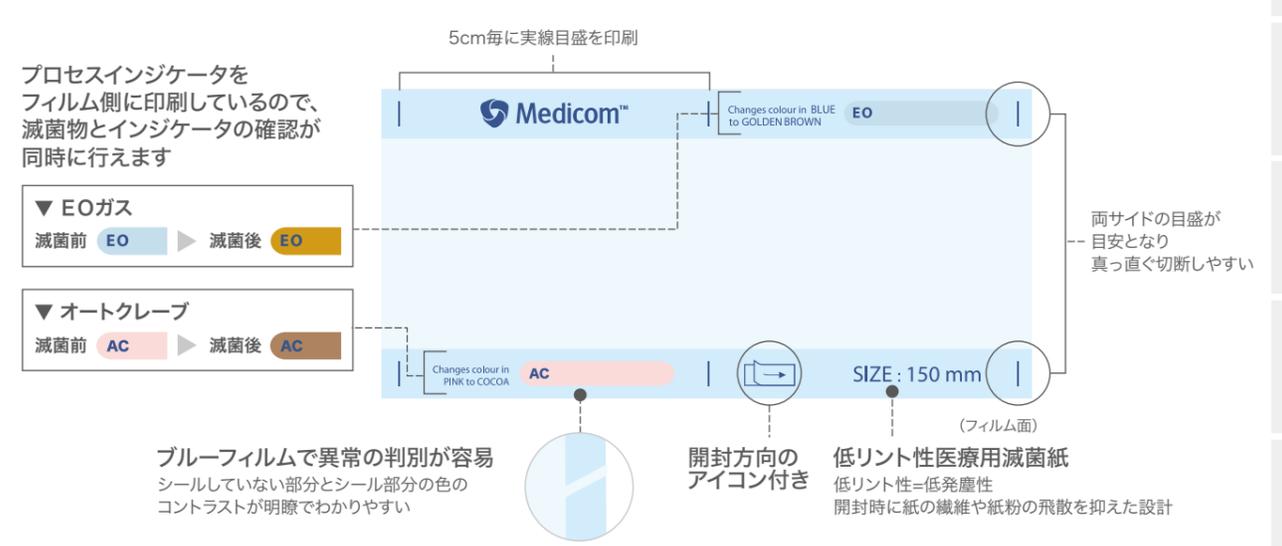

オートクレーブ・EOガス両用 クラスB滅菌器対応 PVA不使用 リントフリー

ISO 11607 ISO 11140

品名:プロリール アドバンス 滅菌ロール

品番	外寸(幅×長さ)	内寸(幅)	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
JPG535010	50mm×200m	34mm	1ロール	4箱	4894476032445
JPG535020	75mm×200m	59mm			4894476032421
JPG535030	100mm×200m	84mm			4894476032407
JPG535040	150mm×200m	134mm			4894476032506
JPG535050	200mm×200m	180mm	2箱	4箱	4894476032469
JPG535060	250mm×200m	230mm			4894476032490
JPG535070	300mm×100m	280mm	1箱	1箱	4894476032551
JPG535080	350mm×100m	330mm			4894476032537
JPG535090	400mm×100m	380mm			4894476032568
JPG535100	500mm×100m	480mm			4894476038782

取扱事業部 **メディカル** デンタル リテール EC

オートクレーブ・EOガス両用 クラスB滅菌器対応 PVA不使用 リントフリー

ISO 11607 ISO 11140

品名:プロリール プレミアム 滅菌ロール

品番	外寸(幅×長さ)	内寸(幅)	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
JPG533010	50mm×200m	34mm	1ロール	4箱	4894476014205
JPG533020	75mm×200m	59mm			4894476014212
JPG533030	100mm×200m	84mm			4894476014236
JPG533040	150mm×200m	134mm			4894476014267
JPG533050	200mm×200m	180mm	2箱	4箱	4894476014281
JPG533060	250mm×200m	230mm			4894476014304
JPG533070	300mm×100m	280mm	1箱	1箱	4894476014328
JPG533080	350mm×100m	330mm			4894476014335
JPG533090	400mm×100m	380mm			4894476014366

取扱事業部 **メディカル** デンタル リテール EC

使用中でも正面から
サイズが目でわかる
ユーザーフレンドリーデザイン



スムーズな
引き出し 強固で摩擦抵抗が少ない
樹脂製架台

使用中でも正面から
サイズが目でわかる
ユーザーフレンドリーデザイン



スムーズな引き出し 強固で摩擦抵抗が
少ない樹脂製架台

※インジケータの色は実際の色とは異なります。
※インジケータは、化学的インジケータであり、あくまでも被滅菌物が滅菌工程を通過したか否かを区別するものです。被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。
※テープによるつなぎ目部分が入っていることがあります。つなぎ目部分は粘着が弱くなっているため、使用はお控えください。該当製品につきましてはその分の長さを余分に巻いています。

※インジケータの色は実際の色とは異なります。
※インジケータは、化学的インジケータであり、あくまでも被滅菌物が滅菌工程を通過したか否かを区別するものです。被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。
※テープによるつなぎ目部分が入っていることがあります。つなぎ目部分は粘着が弱くなっているため、使用はお控えください。該当製品につきましてはその分の長さを余分に巻いています。

ロール

メディコム 滅菌ロール

8サイズ展開の滅菌ロール

- 内容物が見えやすい透明ブルーフィルムを採用
- 紙面中央にインジケータをわかりやすく印刷
- ボックス入りなので専用のディスペンサー不要
- シーリング推奨温度: 170~220°C

オートクレーブ・EOガス両用 クラスB滅菌器対応 PVA不使用 リントフリー
ISO 11607 ISO 11140

品名:メディコム 滅菌ロール

品番	外寸(幅×長さ)	内寸(幅)	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
8862-9510	50mm×200m	30mm	1ロール	6箱	4897008630836
8862-9520	75mm×200m	55mm		4箱	4897008630843
8862-9530	100mm×200m	80mm		3箱	4897008630850
8862-9540	150mm×200m	130mm		2箱	4897008630867
8862-9550	200mm×200m	180mm		4箱	4897008631772
8862-9560	250mm×200m	230mm		4箱	4897008631789
8862-9570	300mm×200m	280mm		2箱	4897008631796
8862-9580	350mm×200m	330mm		2箱	4897008631802

取扱事業部 **メディカル** デンタル リテール EC



ロール

セーフベーシック 滅菌ロール

ベーシックタイプの滅菌ロール

- 内容物が見えやすい透明ブルーフィルムを採用
- フィルム面にインジケータを印刷することで作業効率を向上
- ボックス入りなので専用のディスペンサー不要
- シーリング推奨温度: 170~220°C

オートクレーブ・EOガス両用 クラスB滅菌器対応 PVA不使用 リントフリー
ISO 11607 ISO 11140

品名:セーフベーシック 滅菌ロール

品番	サイズ	外寸(幅×長さ)	内寸(幅)	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
75010	S	50mm×200m	30mm	1ロール	6箱	4894476002585
75020	MS	75mm×200m	55mm		4箱	4894476002592
75030	M	100mm×200m	80mm		3箱	4894476002608
75040	L	150mm×200m	130mm		2箱	4894476002615
75050	LL	200mm×200m	180mm		4箱	4894476002622
75060	LLL	250mm×200m	230mm			4894476002639

取扱事業部 **メディカル** デンタル リテール EC



※インジケータの色は実際の色とは異なります。
 ※インジケータは、化学的インジケータであり、あくまでも被滅菌物が滅菌工程を通過したか否かを区別するものです。被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。
 ※テープによるつなぎ目部分が入っていることがあります。つなぎ目部分は粘着が弱くなっているため、使用はお控えください。該当製品につきましてはその分の長さを余分に巻いています。


ロール

セーフシール プラズマ プレミアム 滅菌ロール

過酸化水素ガス(プラズマ)滅菌法に対応

- 過酸化水素ガス滅菌法および過酸化水素ガスプラズマ滅菌法に対応
- 紙面には高いバリア性と強度を持つ厚手のタイベック® 素材を使用
※タイベック® は米国デュボン社の商標あるいは登録商標です
- フィルム面にインジケータを印刷することで作業効率向上
- シーリング推奨温度: 110~130°C

信頼性の高いインジケータ (ISO 11140 Type1 インジケータ)

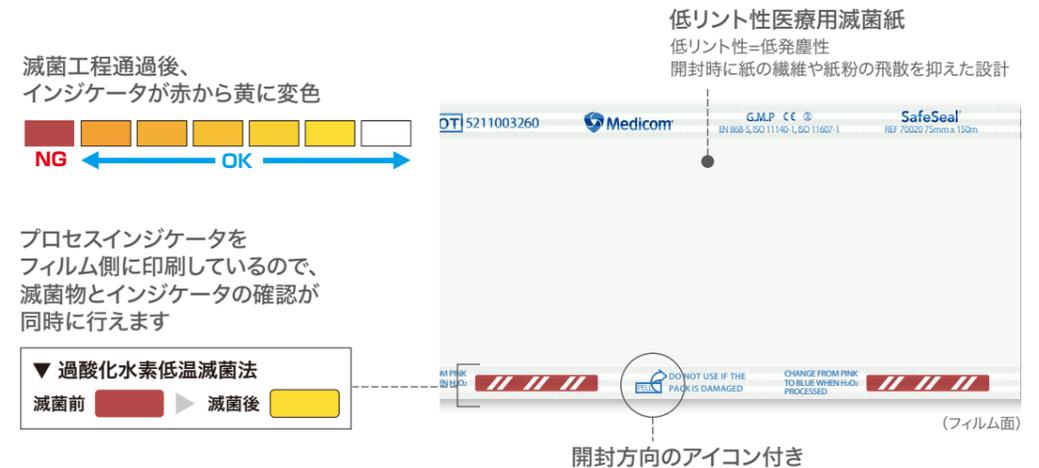

過酸化水素ガスプラズマ滅菌用 過酸化水素ガス滅菌用 クラスB滅菌器対応 PVA不使用 リントフリー
ISO 11607 ISO 11140

品名:セーフシール プラズマ プレミアム 滅菌ロール

品番	外寸(幅×長さ)	内寸(幅)	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
GP570010	50mm×150m	34mm	1ロール	4箱	4894476014403
GP570020	75mm×150m	59mm			4894476014427
GP570030	100mm×150m	84mm			4894476014441
GP570040	150mm×150m	134mm			4894476014458
GP570050	200mm×150m	184mm		2箱	4894476014472
GP570060	250mm×100m	234mm			4894476014519
GP570070	320mm×100m	304mm		1箱	4894476014533
GP570080	430mm×100m	414mm			4894476014557
GP570090	490mm×100m	474mm	1箱	4894476014564	

取扱事業部 **メディカル** デンタル リテール EC

※インジケータの色は実際の色とは異なります。
 ※インジケータは、化学的インジケータであり、あくまでも被滅菌物が滅菌工程を通過したか否かを区別するものです。被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。
 ※テープによるつなぎ目部分が入っていることがあります。つなぎ目部分は粘着が弱くなっているため、使用はお控えください。該当製品につきましてはその分の長さを余分に巻いています。





パウチ

セーフシール クワトロ

内外両方にインジケータを配置

- 内側と外側の両方にインジケータを印刷しており、滅菌工程の通過をしっかりと確認可能
- 内容物が見えやすい透明ブルーフィルムを採用し、フィルム面にインジケータを印刷することで作業効率を向上
- 滅菌物を入れてからワンタッチで簡単に密封できるパウチタイプ

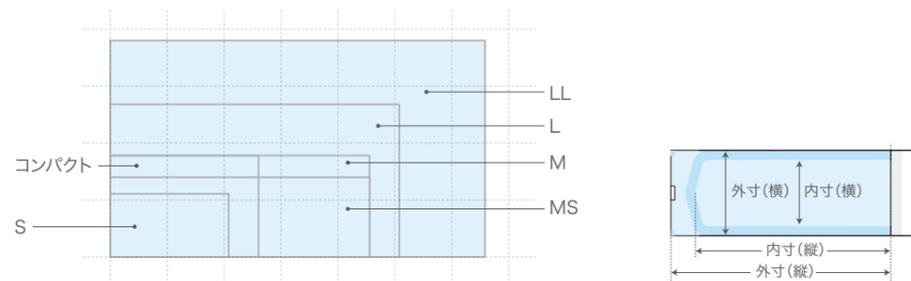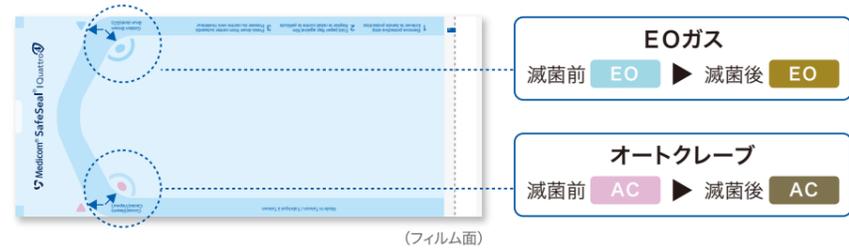

オートクレーブ・EOガス両用 クラスB滅菌器対応 PVA不使用 リントフリー ISO 11607 ASTM F 2559 ISO 11140

品名:セーフシール クワトロ

品番	サイズ	外寸(幅×長さ)	内寸(幅×長さ)	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
88015-4	S	57×102mm	38×75mm	200枚	10箱	686864045687
88000-4	MS	70×229mm	51×202mm		6箱	686864045700
88005-4	コンパクト	89×133mm	70×106mm		5箱	686864045724
88010-4	M	89×229mm	70×202mm		6箱	686864045762
88025-4	L	133×254mm	114×227mm		10箱	686864045786
88030-4	LL	191×330mm	171×304mm		5箱	686864045809
88035-4	LLL	254×356mm	235×329mm	686864045823		
88040-4	メガ	305×432mm	286×405mm	686864045847		

取扱事業部 **メディカル** デンタル リテール EC



※インジケータの色は実際の色とは異なります。
※インジケータは、化学的インジケータであり、あくまでも被滅菌物が滅菌工程を通過したか否かを区別するものです。被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。

パウチ

セーフベーシック 滅菌シールパウチ

シーラー不要のテープシール付滅菌パウチ

- 内容物が見えやすい透明ブルーフィルムを採用
- インジケータを紙面にわかりやすく印刷
- 滅菌物を入れてからワンタッチで簡単に密封できるパウチタイプ

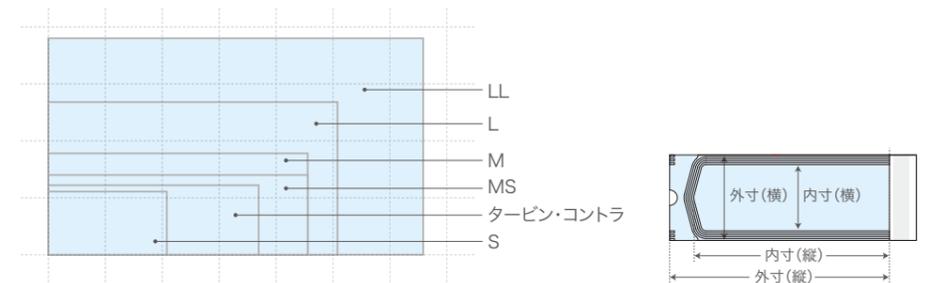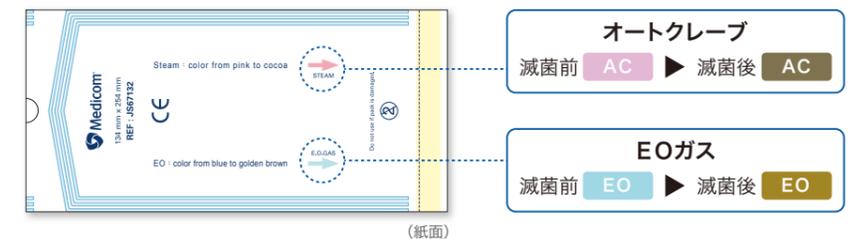

オートクレーブ・EOガス両用 クラスB滅菌器対応 PVA不使用 リントフリー ISO 11607 ASTM F 2559 ISO 11140

品名:セーフベーシック 滅菌シールパウチ

品番	サイズ	用途(サイズの目安)	外寸(幅×長さ)	内寸(幅×長さ)	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
JS67571	S	ファイルやリーマーなどの小器具、止血用ガーゼ	57×102mm	37×77mm	200枚	50箱	4894476000611
SFBJS67611	タービン・コントラ	タービンやコントラなどハンドピース類	61×185mm	41×160mm		6箱	4894476036962
SFBJS67702	MS	スケーラーなどのインスツルメント類	70×229mm	50×204mm		10箱	4894476007917
JS67892	M	基本セット(パラ)	89×229mm	69×204mm			4894476000628
JS67132	L	鉗子などの大きめのインスツルメント類	134×254mm	113×229mm			4894476000635
JS67193	LL	基本セット(トレイごと)	190×330mm	170×305mm		5箱	4894476000642

取扱事業部 **メディカル** デンタル リテール EC


※インジケータの色は実際の色とは異なります。
※インジケータは、化学的インジケータであり、あくまでも被滅菌物が滅菌工程を通過したか否かを区別するものです。被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。

ラップ

セーフシール 滅菌ラップ

しなやかで包装しやすい不織布滅菌ラップ

- 強度と撥水性に優れたスパンボンド層(S)で、微生物や微粒子に対するバリア性が高いメルトブロー層(M)を挟んだSMMS 4層構造
- リントが発生しにくい医療グレードのポリプロピレン製で、短繊維(セルロス)不使用
- 帯電防止加工済なので、ほこりや微粒子の付着による汚染を防ぐ

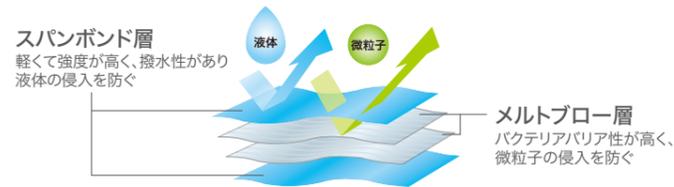

オートクレーブ・EOガス両用
過酸化水素ガスプラズマ滅菌用
過酸化水素ガス滅菌用



オートクレーブ・EOガス両用 クラスB滅菌器対応
過酸化水素ガスプラズマ滅菌用 過酸化水素ガス滅菌用 帯電防止加工

品名:セーフシール 滅菌ラップ

品番	サイズ	入り数(パック)	入り数(ケース)	JANコード
GSR450600	60×60cm	250枚	1パック	4894476035323
GSR450750	75×75cm	100枚	2パック	4894476035309
GSR450900	90×90cm			4894476035316
GSR450120	120×120cm	25枚	4パック	4894476035293
GSR450140	140×140cm			4894476035255

取扱事業部 **メディカル** デンタル リテール EC

インジケーター

セーフシール 滅菌インジケーターカード

滅菌をもっと確実にするために

- 温度と時間の2つの変数に対応し、紫から水色に変色すれば滅菌条件が満了(対応温度:115°C~138°C)
- 20mm×70mmの使いやすいサイズで、挿入しやすい硬さの滅菌紙を採用
- 裏面の余白に日付など情報の記載が可能



滅菌前

原寸大

Medicom
セーフシール®
滅菌インジケーターカード
Multi-Variable Indicators
セーフシール®
滅菌インジケーターカード
品番:JIC530010

TYPE 4 STEAM

高圧蒸気滅菌処理により指示薬が紫色から青色に変色します。

滅菌後

Medicom
セーフシール®
滅菌インジケーターカード
Multi-Variable Indicators
セーフシール®
滅菌インジケーターカード
品番:JIC530010

TYPE 4 STEAM

高圧蒸気滅菌処理により指示薬が紫色から青色に変色します。

オートクレーブ用 TYPE 4 STEAM ISO 11140

品名:セーフシール 滅菌インジケーターカード

品番	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
JIC530010	200枚	100箱	4894476023573

取扱事業部 **メディカル** デンタル リテール EC

※印刷の関係上、色彩が現物と異なる場合があります。

DETERGENT

洗浄剤

メディコム メディザイム エヌ

4つの酵素が多様な汚れに効果を発揮

- 効果的な“4種類”の酵素を配合
- 低泡性のため、多様な洗浄方式に対応し、洗う対象を選ばない
- 高希釈倍率で使用できるためランニングコスト削減が可能
- 5Lは専用ポンプ付(1プッシュ20mL)、1Lは容器に計測メジャー付で使用しやすい設計
- 生分解性の高い成分を使用し、環境にも配慮



Made in France

1L

5L

酵素名	特長
Protease プロテアーゼ(サチライシン)	タンパク質分解酵素。タンパク質を構成するペプチド結合を加水分解する
Lipase リパーゼ	脂質分解酵素。脂質を構成するエステル結合を加水分解する
Amylase アミラーゼ	糖質分解酵素。デンプン、グリコーゲンなどのα-1,4グリコシド結合を加水分解する
Mannanase マンナーゼ	糖質分解酵素。マンナンやグルコマンナンなどのβ-1,4グリコシド結合を加水分解する



1L: 容器に計測メジャー付

フランス製

品名:メディコム メディザイム エヌ

品番	サイズ(内容量)	入り数(ケース)	JANコード
JDE010013	1L	3本	4894476036924
JDE010015	5L	4本	4894476036870

取扱事業部 **メディカル** デンタル リテール EC

使用方法

汚れの程度により100~500倍希釈(原液 20mL/水 2~10L)
歯科用バキュームシステム洗浄: 50倍希釈(原液 20mL/水 1L)

洗浄の重要性

適切な洗浄は、初発菌数を1万分の1にできるとされており、その後の消毒、滅菌の精度に大きく関係します。スποルディングの分類でも洗浄はすべてにおいて最初に行うことになっています。

HAND SANITIZER

手指消毒剤



指定医薬部外品

セーフジェル

保湿性が高く、飛散の少ないジェルタイプ

- 日本薬局方、WHO、CDCなどにある最適な濃度のエタノール含有医薬部外品の薬用アルコールハンドジェル
- ヒアルロン酸やグリセリンなど、肌に優しい保護成分を配合
- ジェルなので周囲の飛び散りにくく、ベタつきが少ないサラッとした使い心地

500mLのボトルタイプの場合：
ポンプをしっかりプッシュし、吐出されたジェルを手によくすり込んでください

指定医薬部外品

品名：セーフジェル

※本品にシリコンホルダーはつきません

品番	サイズ(内容量)	入り数(ケース)	JANコード
JAG010088	500mL	12本	4894476031264
JAG010087	60mL	20本	4894476031226

販売名：セーフジェル 指定医薬部外品 製造販売届出番号：30500DZX00929000

取扱事業部 [メディカル](#) [デンタル](#) [リテール](#) [EC](#)



500mL



60mL



60mL ホルダー

オリジナル
シリコンホルダーの
作成も可能です
(5,000個以上から)

効果・効能：手指・皮膚の洗浄・消毒
用法・用量：適量を手に取り、手指・皮膚に塗布又は塗擦する
有効成分：エタノール

手洗いと手指消毒

アルコール擦式消毒剤を用いた手指消毒は流水と手指洗浄剤(石鹸)による手洗いよりも、細菌数を減少させるとの報告もあります。また、処置ごとに移動して流水と手指洗浄剤で手を洗うことは難しい場合がありますが、アルコール擦式消毒剤を用いて手指消毒を行うことは簡便に行える場合が多いです。

手洗い
流水と手指洗浄剤による洗浄作用



細菌数
1/60

手指消毒(アルコール)
消毒用アルコールによる殺菌作用



細菌数
1/3,000

WIPE / TOWEL

ワイプ/タオル



メディコム メディワイプ

洗浄と除菌が同時にできる環境清拭ワイプ

- 環境表面の洗浄と除菌を同時に行える2in1ワイプ
- 除菌成分として、塩化ベンザルコニウム及び塩化ジメチルジメチルアンモニウム、ポリアミノプロピルピグアナイドを配合しているため、細菌やウイルスに高い効果を発揮
- しっかりとした厚みで拭きやすく、アルコールフリーのため材質への影響が少ない
- ピロータイプとバケツタイプの2タイプをご用意



ピロータイプ



バケツタイプ



バケツタイプ用
詰め替え用パック

しっかりとした厚みで

洗浄 + 除菌

アルコールフリー

品名：メディコム メディワイプ

品番	包装	ワイプサイズ	入り数(パック・バケツ)	入り数(ケース)	JANコード
GWR911004	ピロータイプ	220×330mm	100枚	6パック	4894476016575
GWR911005	バケツタイプ	180×300mm	270枚	4バケツ	4894476028363
GWR911006	バケツタイプ用詰め替え用パック			6パック	4894476029568

取扱事業部 [メディカル](#) [デンタル](#) [リテール](#) [EC](#)

環境管理

清掃は基本的に埃や汚れを除去するために行います。清掃を行ったうえで、必要と判断した際に適切な消毒剤を選択して使用しましょう。患者によって汚染されやすい環境表面(ベッド、ユニット、蛇口、ドアノブ、手すりなど)は、日常的に汚れや埃がないよう清掃する必要があります。患者からの飛沫でベッドやユニット周りに汚染が見受けられる場合は、洗浄後に消毒剤含有のワイプなどで清拭を行いましょう。



メディコム ウェットシート

環境面の清拭・除菌用に

- 診療器機やユニット、椅子、壁など設備表面の清拭・除菌用に
- 厚手で薬液量が多く、広範囲をカバー
- 手肌に優しいアロエベラおよびラノリン配合
- ※イルガサンDP-300(トリクロサン)は使用していません



品名:メディコム ウェットシート

品番	シートサイズ	入り数(パック)	入り数(ケース)	JANコード
40002	230×330mm	64枚	8パック	4897008631543

取扱事業部 **メディカル** **デンタル** リテール EC

セーフタッチ メディソープ 多目的ワイパー

やわらかく、吸水性に優れた多目的ワイパー

- パルプとポリエステル混合不織布
- 柔らかく、心地よい肌触りと吸水性を両立
- リントが出にくく、高い引張強度



不織布 4折

品名:セーフタッチ メディソープ 多目的ワイパー

品番	サイズ	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
SFTGNW4033	4折:17.5×15cm(展開:35×30cm)	100枚	12箱	4894476002042

取扱事業部 **メディカル** **デンタル** リテール EC

ネオテックス プチタオル

衛生的な再生紙ペーパータオル

- 手の大きさに対して無駄のない大きさ
- コストパフォーマンスの高い2枚重ねのペーパータオル
- 抗菌処理で細菌の増殖を抑制
- ソフトな肌触りとしっかりとした拭き取り感



日本製

再生紙100% 2枚重ね 抗菌 日本製

品名:ネオテックス プチタオル

品番	サイズ	入り数(パック)	入り数(ケース)	JANコード
TYO244	175×170mm	200組	48パック	4904860519008

取扱事業部 **メディカル** **デンタル** リテール EC

GAUZE ガーゼ



不織布ガーゼとコットンガーゼの違い



不織布ガーゼ

不織布とは文字どおり「織らない布」で、1本1本の繊維を織らずに絡み合わせたシート状の素材です。繊維の材質によって、吸水性・撥水性・耐久性など用途に合わせて様々な特長を引き出すことができます。

メディコムの不織布ガーゼは、耐久性のあるポリエステルと吸水性のあるレーヨンから作られています。


コットンガーゼ

コットンは天然繊維である木綿のことで、繊維としては伸びにくく丈夫であり、吸水性に優れています。また、肌触りが良いのも特徴です。


ガーゼの サイズ表記について

例

4折:10cm×10cmの場合、
展開:20cm×20cm

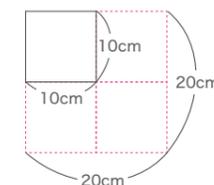

12折:5cm×5cmの場合、
展開:15cm×20cm

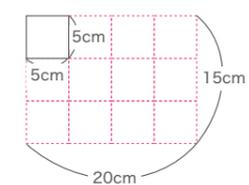

メディコム 不織布ガーゼ

吸水性と肌触りに優れた不織布ガーゼ

- 柔らかく吸水性に優れる、しっかり厚手タイプ
- 毛羽立ちが少なく、糸くずも出にくい
- 豊富なサイズバリエーションで、用途に合わせて選べる



不織布 未滅菌 4折

品名:メディコム 不織布ガーゼ

品番	サイズ	入り数(パック・箱)	入り数(ケース)	JANコード
2109	4折:4×4cm(展開:8×8cm)	200枚	30パック	4897008636111
2101	4折:5×5cm(展開:10×10cm)		25パック	4897008634346
2103	4折:7.5×7.5cm(展開:15×15cm)		20パック	4897008634360
2100	4折:10×10cm(展開:20×20cm)		10パック	4897008634322
2108	4折:12.5×12.5cm(展開:25×25cm)			4897008634308
2108B	4折:12.5×12.5cm(展開:25×25cm)		20箱	4897008638146
2110	4折:15×15cm(展開:30×30cm)		10パック	4897008636821



※2108Bは箱入り

販売名:メディコム 不織布ガーゼ 一般医療機器 製造販売届出番号:28B3X00001000011

取扱事業部 [メディカル](#) [デンタル](#) [リテール](#) [EC](#)

メディコム バイタル 不織布ガーゼ

汎用性に優れた、4折の不織布ガーゼ

- 柔らかく吸水性に優れる
- 毛羽立ちが少なく、糸くずも出にくい
- 柔らかく優しい肌触り



不織布 未滅菌 4折

品名:メディコム バイタル 不織布ガーゼ

品番	サイズ	入り数(パック)	入り数(ケース)	JANコード
VITJNW2522	4折:12.5×12.5cm(展開:25×25cm)	200枚	20パック	4894476000949

販売名:メディコム バイタル 不織布ガーゼ 一般医療機器 製造販売届出番号:28B3X00001000033

取扱事業部 [メディカル](#) [デンタル](#) [リテール](#) [EC](#)

セーフガーゼ

やわらかい不織布ガーゼ

- 柔らかく、抜群の吸収性
- 毛羽立ちが少なく、糸くずも出にくい



不織布 未滅菌 4折

品名:セーフガーゼ

品番	サイズ	入り数(パック)	入り数(ケース)	JANコード
4522	4折:5×5cm(展開:10×10cm)	200枚	20パック	4897008635572

販売名:セーフガーゼ 一般医療機器 製造販売届出番号:28B3X00001000012

取扱事業部 [メディカル](#) [デンタル](#) [リテール](#) [EC](#)

メディコム オールガーゼ

綿100%の定番ガーゼ

- 柔らかく吸水性に優れる
- 繊維の脱落が少ない



綿100% 未滅菌 8折・12折

品名:メディコム オールガーゼ

品番	サイズ	入り数(パック)	入り数(ケース)	JANコード
3001	8折:5×5cm(展開:10×20cm)	200枚	25パック	4897008635503
3002	12折:5×5cm(展開:15×20cm)	200枚	40パック	4897008635510

販売名:メディコム オールガーゼ 一般医療機器 製造販売届出番号:28B3X00001000007

取扱事業部 [メディカル](#) [デンタル](#) [リテール](#) [EC](#)

ディステック カットメン

脱落繊維が少ないコットン素材のカット綿

- 柔らかく優しい肌触り
- ちぎる際の繊維の脱落も少なく、毛羽立ちが少ない



綿100% 未滅菌

品名:ディステック カットメン

品番	サイズ	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
D-4004	4×4cm	500g	18箱	4897008630348

販売名:ディステック カットメン 一般医療機器 製造販売届出番号:28B3X00001000010

取扱事業部 [メディカル](#) [デンタル](#) [リテール](#) [EC](#)

GAUZE ガーゼ

セーフロール

EOガス滅菌済のプリスターパック入コットンロール

- 柔らかく吸水性・保水性に優れる
- 50本ずつのプリスターパック入



綿100% 滅菌済

品名:セーフロール

品番	サイズ	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
Y45541S	φ10×30mm	1,200本(50本×24パック)	8箱	4897008637781

販売名:セーフロール 一般医療機器 製造販売届出番号:28B3X00001000024

取扱事業部 [メディカル](#) [デンタル](#) [リテール](#) [EC](#)

セーフベーシック コットンロール

ベーシックタイプのコットンロール

- 柔らかく吸水性・保水性に優れる
- 化学添加物不使用



綿100% 未滅菌

品名:セーフベーシック コットンロール

品番	サイズ	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
SFBJY45541	φ10×30mm	2,000本	12箱	4894476004626

販売名:セーフベーシック コットンロール 一般医療機器 製造販売届出番号:28B3X00001000041

取扱事業部 [メディカル](#) [デンタル](#) [リテール](#) [EC](#)

OHTER

その他

メディコム エプロン

吸水シートと防滴シートの3層ペーパーエプロン

- 吸水力抜群の3層タイプ
- 表で吸水・裏で防滴のW加工で、吸収した水分を閉じ込める
- カラフルな10色展開

仕様:3層タイプ(ペーパー層 2層+ポリエチレン層 1層)

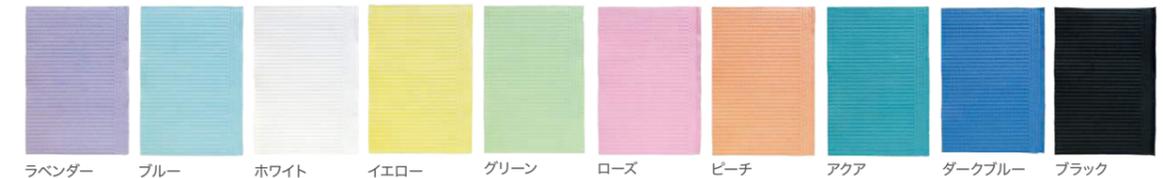



表:吸水仕様 裏:防滴仕様 3層タイプ

品名:メディコム エプロン

品番	サイズ	カラー	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
MJ-8280	33×45cm (展開時)	ラベンダー	500枚	1箱	4897008633349
MJ-8282		ブルー			4897008633363
MJ-8283		ホワイト			4897008633370
MJ-8284		イエロー			4897008633387
MJ-8285		グリーン			4897008633394
MJ-8286		ローズ			4897008633400
MJ-8288		ピーチ			4897008633424
MJ-8289		アクア			4897008633431
MJ-8290		ダークブルー			4897008634834
MJ-8292		ブラック			4897008634827

取扱事業部 [メディカル](#) [デンタル](#) [リテール](#) [EC](#) ※メディカルはブルー、ホワイト、グリーンのための取扱い

3層構造のデンタルエプロン

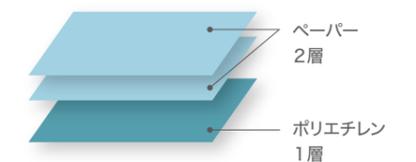

ペーパーが2層なので、吸水性に優れます

メディコム レインボービブ

5色のアソートペーパーエプロン

- 吸水力抜群の3層タイプ
- 表で吸水・裏で防滴のW加工で、吸収した水分を閉じ込める
- 人気の5色が1箱に同梱
- 置き場所に困らないコンパクトなボックス
- 25枚ずつのバックで、衛生的に使用可能

仕様:3層タイプ(ペーパー層 2層+ポリエチレン層 1層)



表:吸水仕様 裏:防滴仕様 3層タイプ 5色アソート

品名:メディコム レインボービブ

品番	サイズ	カラー	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
MED0008581	33×45cm(展開時)	5色アソート*	500枚 (25枚×4バック×5色)	1箱	4897008631710

※ローズ、ピーチ、イエロー、グリーン、ブルー

取扱事業部 [メディカル](#) [デンタル](#) [リテール](#) [EC](#)



プロケア ペーパービブ


吸水と防滴の2層シート

- 2層タイプの薄手のペーパーエプロン
- 表のペーパー層で吸水し、裏のポリエチレン層で防滴

仕様:2層タイプ(ペーパー層 1層+ポリエチレン層 1層)

省スペース化を実現

当社従来品比約55%。
院内のストックスペースを有効活用可能

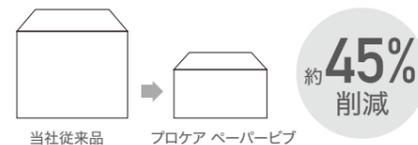

紙量を削減し、環境に配慮

当社従来品比約55%。
防滴性能はそのままに、紙の使用量を削減



ブルー

表:吸水仕様 裏:防滴仕様 2層タイプ

品名:プロケア ペーパービブ

品番	サイズ	カラー	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
GBB781215	33×45cm(展開時)	ブルー	500枚(125枚×4バック)	1箱	4894476036504

取扱事業部 [メディカル](#) [デンタル](#) [リテール](#) [EC](#)

メディコム 紙コップ

上質紙のうがい用紙コップ

- シンプルなものから歯科医院らしいものまで、豊富なバリエーション
- 紙表面のキメが細かい、高品質な上質紙を使用

ご注意ください 当社の紙コップはすべて「うがい用」です。その他の用途には適しておりませんので、ご注意ください。



単回使用

品名:メディコム 紙コップ

品番	サイズ	柄	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
JPC760005	5オンス (150cc、高さ 74mm×上部 φ65mm×下部 φ45mm)	無地	3,000個	1箱	4894476037747
JPC760006		ヴェールカップ			4894476037778
JPC760007		クールカップ			4894476037785

取扱事業部 [メディカル](#) [デンタル](#) [リテール](#) [EC](#) ※クールカップはデンタル、ECのみの取扱い



抗菌加工 入れ歯ケース

ツヤありで、上下義歯も入る大きさ

抗菌加工 個包装 日本製

品名:抗菌加工 入れ歯ケース

品番	サイズ	カラー	入り数・包装(パック)	入り数(ケース)	JANコード
KA7107	幅 95mm×高さ 55mm×奥行 70mm	ブルー	10個	1パック	4897008631352
KA7108		ホワイト			4897008631369
KA7109		ピンク			4897008631376

取扱事業部 [メディカル](#) [デンタル](#) [リテール](#) [EC](#)



日本製

抗菌加工 リテーナーケース

ツヤ消して、マウスピースや部分入れ歯などにも

抗菌加工 個包装 日本製

品名:抗菌加工 リテーナーケース

品番	サイズ	カラー	入り数・包装(パック)	入り数(ケース)	JANコード
KA8037	幅 80mm×高さ 30mm×奥行 65mm	ブルー	10個	1パック	4897008637743
KA8038		ホワイト			4897008634384
KA8039		ピンク			4897008634391
KA8040		イエロー			4897008634407

取扱事業部 [メディカル](#) [デンタル](#) [リテール](#) [EC](#)




日本製

メディコム スキンマーカー ルーラー付 滅菌済

正確な手術を支える、日本製スキンマーカー

日本製

- ガンマ線滅菌済ですぐに使用可能
- ゲンチアナバイオレット フリー
- 柔軟でフィット性が高いルーラー(15cm)付

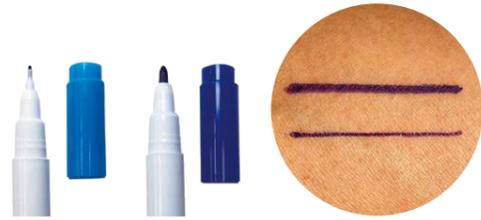

極細(0.3mm) 中字(0.7mm)



15cmルーラー付

滅菌済 ゲンチアナバイオレット フリー 日本製

品名:メディコム スキンマーカー ルーラー付 滅菌済

品番	カラー	サイズ	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
JSP810071	パープル	極細(0.3mm)	50本	20箱	4894476033244
JSP810072		中字(0.7mm)			4894476033510

取扱事業部 **メディカル** デンタル リテール EC

歯科用品

セーフベーシック サライバエジェクター

曲げて使えるディスプレイザブル排唾管

- 形状を自由に曲げられるディスプレイザブルタイプの排唾チューブ
 - 先端チップがなめらかなので患者が不快に感じにくい
 - ミラーテクニックが使えるので、楽な姿勢で治療が可能
- ※オートクレーブ滅菌非対応



イタリア製 単回使用

品名:メディコム サライバエジェクター

品番	サイズ	入り数(パック)	入り数(ケース)	JANコード
GSE0782	チューブ全長 約140mm、チューブ外径 約6.6mm、 チップ全長 約14mm、チップ外径 約9mm	100本	10パック	4897008639860

販売名:メディコム サライバエジェクター 一般医療機器 製造販売届出番号:28B3X00001000046

取扱事業部 **メディカル** デンタル リテール EC



ペガサスは、病院が日々直面する課題を研究し、
医療従事者の労働環境を改善するために、
各部門に包括的なソリューションを提供します。
現場で医療を確実に実施するための
戦略的思考で革新的なソリューションを提供します。



詳しくは弊社担当営業にお問い合わせください

Consumer / Industrial

世界各国で使われる医療品質の製品を、 もっと多くの方々に。

製品のバックボーンとなる品質レベルは、感染予防先進国・北米基準。SARSや新型インフルエンザ、新型コロナが流行し、世界中で使われたのがメディコムのマスク。「医療用マスクならメディコム」といわれるほど、世界的に品質への信頼度が高いのが大きな特徴であり、最大の強みです。メディコムの感染予防品・ケア製品は、その品質や使いやすさから、医療(医科・歯科)の分野にとどまらず、一般消費者や幅広い産業でも使用されています。



医療用ブランドの安心を。

クラスメディカルシリーズ

”クラスメディカル”は、医療用途の製品を
より多くの方に使っていただきたいとの想いで生まれた、
メディカル発想の製品ブランドです。

クラスメディカル
手が荒れにくい やさしいニトリル手袋



Sサイズ

Mサイズ

クラスメディカル リラックス
個包装



普通サイズ



小さめサイズ

クラスメディカル リラックス
大容量



普通サイズ



小さめサイズ

クラスメディカル リラックス
キッズ



子供サイズ

GLOVE

グローブ



クラスメディカル 手が荒れにくい やさしいニトリル手袋

アレルギーを減らした次世代のニトリル手袋

- 強度に優れた合成ゴム(ニトリルゴム)製
- アレルギーの原因となる加硫促進剤やラテックスプロテイン、パウダー不使用で、天然ゴム特有のゴム臭なし
- 長時間の着用でも疲れない、しなやかなグローブ
- 食品衛生法(厚生労働省告示第380号)に準拠

製造規格:ASTM D 6319
引張強度:ASTM D 412
伸長率:ASTM D 412
掌部厚み:0.06mm以上
指先厚み:0.08mm以上



手が荒れにくい 調理のシーンに さまざまな用途に 環境に配慮



クラスメディカル
手が荒れにくい
やさしいニトリル手袋
P.65



セーフタッチピストロ
P.66



アキュフィット
ニトリルグローブ
P.67



エコセーフ 生分解性 ニトリルグローブ
P.68

使い捨て手袋(ニトリル製や天然ゴム製など)を常用する医療従事者が採用している

アレルギーを減らした 次世代のニトリル手袋



手袋を使うと 手がかゆくなることはありませんか?

近年、手袋を製造する際に使用する原材料(加硫促進剤)の種類によっては、アレルギー性接触性皮膚炎を発症する可能性があることがわかってきました。

アレルギー性接触性皮膚炎は 発症すると治療が難しく多くが長期化します

発症を防ぐには、アレルギーの要因(アレルギー)と考えられるもののできる限り接触しないことが大切だと考え、加硫促進剤フリーの”やさしいニトリル手袋”を開発しました。

加硫促進剤って?

ゴム手袋製造時に添加される原材料の一つ。加硫促進剤は、ゴムの弾性(伸びたり、元の形に戻ろうとする性質)や強度(破れにくさ)をもたせる重要な原材料です。医療従事者のゴム手袋による接触皮膚炎の80%以上は加硫促進剤が原因とのデータもあります。

※参考:第57回AORN(米国周術看護協会)総会発表 Hosp Technol Ser. 1997;16(7):10-3. haron E Jacob. Dermatol Nurs. 2006;18(5):433-9, 446.



掃除

育児・介護



ホームケア

調理(食品衛生法準拠)



ニトリルグローブ

様々な用途に幅広く使えます。

- 合成ゴム(ニトリル)製
- フィット性が高く細かい作業がしやすい
- 耐油性・耐薬品性・強度に優れる



該当製品

クラスメディカル
手が荒れにくい
やさしいニトリル手袋

セーフタッチピストロ

アキュフィット
ニトリルグローブ

エコセーフ
生分解性 ニトリルグローブ



CPE※グローブ

※CPE:キャストポリエチレン

調理や掃除などに適しています。

- ポリエチレン(PE)製
- ラテックス、ニトリルと比較して経済的



該当製品

バイタル CPEグローブ
P.16



プラスチックグローブ

介護・衛生などに適しています。

- ポリ塩化ビニル(PVC)製
- ラテックス、ニトリルと比較して経済的



該当製品

アキュフィット
プラスチック手袋
P.16

加硫促進剤フリー ニトリルゴム製 パウダーフリー 未滅菌 すべり止め 左右兼用 単回使用

品名:クラスメディカル 手が荒れにくい やさしいニトリル手袋

品番	サイズ	カラー	掌部幅	全長	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード*
JN131134B	S	ホワイト	約85mm	240mm以上	50枚	20箱	4894476037709
JN131134C	M		約95mm				4894476037716

取扱事業部 メディカル デンタル リテール EC



セーフタッチビストロ

料理だけでなく「調理」までも美しく

- 高級感のあるNoir(ノアール:黒)色で、アレルギーの原因となるラテックスプロテインを含まないニトリルゴム製
- 料理だけでなく、掃除、介護、育児、ペットケア、ガーデニングなど屋内外の様々な場面に(食品衛生法適合品(厚生労働省告示第380号))
- 人の健康へ悪影響を及ぼす恐れがあるPAHs(多環芳香族炭化水素)*を含有していないことを確認済(AfPS GS 2019:01PAK カテゴリー1基準適合)

*PAHs(多環芳香族炭化水素)は、有機物の不完全燃焼等で生成する化学物質で、その毒性(発がん性)から国内外でも規制の動きが出ています。

製造規格:EN 455
引張強度:EN 455
伸長率:ASTM D 412
掌部厚み:0.05mm以上
指先厚み:0.05mm以上



調理(食品衛生法適合)



HOTEL BUFFET



CAFE



BOULANGERIE



SERVICE

食品衛生法適合 ニトリルゴム製 パウダーフリー 未滅菌 すべり止め 左右兼用 単回使用

品名:セーフタッチビストロ

※中央値

品番	サイズ	カラー	掌部幅	全長*	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
JN133530A	XS	Noir (ノアール:黒)	80mm以下	240mm以上	100枚	10箱	4894476033473
JN133530B	S		約80mm				4894476033442
JN133530C	M		約95mm				4894476033411
JN133530D	L		約110mm				4894476033459



取扱事業部 メディカル デンタル リテール EC

アキュフィット ニトリルグローブ

医療グレードのニトリルグローブ

- アレルギーの原因となるラテックスプロテインを含まないニトリルゴム製
- 作業性と強度のバランス、耐油性に優れる
- 食品衛生法(厚生労働省告示第380号)に準拠
- 伸縮性があり手にフィットするため、細かい作業に最適

製造規格:ASTM D 6319
引張強度:ASTM D 412
伸長率:ASTM D 412
掌部厚み:0.05mm以上
指先厚み:0.09mm以上



異物混入対策には 食品にない色「ブルー」がおすすめ

グローブが破れるなどして食品の中に破片が混入した場合も見つけやすいよう、食品にない色として「ブルー」を採用しています。

ぴったりフィットするので細かな作業も◎ さまざまな用途に便利にお使いいただけます

水・薬品などによる手荒れや、汚れ・臭いの付着を防ぐことができるため、素手での作業を避けたい場合にご使用ください。

- 魚や肉の下処理
- 介護・看護・ペットケア
- 食器洗い
- 園芸薬剤を使ったガーデニング
- キッチンのお掃除
- 車・バイク・自転車のメンテナンス
- 排水口など水回りの掃除
- など



掃除

調理(食品衛生法準拠)



育児・介護・ペットケア

DIY



ガーデニング

車やバイクの整備

ニトリルゴム製 パウダーフリー 未滅菌 すべり止め 左右兼用 単回使用

品名:アキュフィット ニトリルグローブ

品番	サイズ	カラー	掌部幅	全長	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
JN131234A	XS	ブルー	約76mm	240mm以上	100枚	10箱	4894476024938
JN131234B	S		約85mm				4894476024860
JN131234C	M		約96mm				4894476024877
JN131234D	L		約107mm				4894476024921



取扱事業部 メディカル デンタル リテール EC

ECO 環境への影響を考慮しています

エコセーフ 生分解性 ニトリルグローブ

地球に還る環境配慮型グローブ

- 環境への影響を考慮して開発された生分解性の高いニトリルグローブ
- アレルギーの原因となるラテックスプロテインを含まないニトリルゴム製
- メディカルグレードの強度と伸張性があり、厳しい基準の米国の食品規格に準拠

製造規格: ASTM D 6319
引張強度: ASTM D 412
伸長率: ASTM D 412
掌部厚み: 0.05mm以上
指先厚み: 0.08mm以上



生分解性 ニトリルゴム製 パウダーフリー 未滅菌 すべり止め 左右兼用 単回使用

品名: エコセーフ 生分解性 ニトリルグローブ

品番	サイズ	カラー	掌部幅	全長	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
GN131171A	XS	ブルー	約76mm	230mm以上	100枚	10箱	4894476030816
GN131171B	S		約86mm				4894476030830
GN131171C	M		約98mm				4894476030878
GN131171D	L		約107mm				4894476030854



取扱事業部: メディカル デンタル リテール EC

i-Wipe GREEN Duty 多目的ワイパー

使い捨ての生分解性多目的ワイブ

- 環境に配慮した生分解性の使い捨てワイブ
- 吸水性に優れ、様々な場面で使用可能



生分解性

品名: i-Wipe GREEN Duty 多目的ワイパー

品番	カラー	サイズ	入り数(パック)	入り数(ケース)	JANコード
GWR919004	ホワイト	約300x355mm	40枚	12パック	4894476027724

取扱事業部: メディカル デンタル リテール EC

MASK マスク



つけ心地ゆったり メガネが曇りにくい 呼吸、会話がラクラク



クラスメディカル リラックス シリーズ P.70



メガネが曇りにくいマスク シリーズ P.71



エアファイバー プラス P.72

	マスクブリーツ		耳ひも	ノーズピース		個包装
	立体ブリーツ	下向きブリーツ	幅広ソフト型	アルミニウム	被覆ワイヤー	
クラスメディカル リラックス 個包装	○		○	○		○
クラスメディカル リラックス 大容量	○		○	○		
クラスメディカル リラックス 子供サイズ	○		○	○		
メガネが曇りにくいマスク		○	○	○		○
エアファイバー プラス		○	○		○	

JIS T 9001 医療用マスククラスI 基準値

	クラスI
微粒子捕集効率 [PFE]	≥95%
バクテリア飛沫捕集効率 [BFE]	≥95%
ウイルス飛沫捕集効率 [VFE]	≥95%
圧力損失	<60Pa/cm ²
人工血液バリア性	10.6kPa
可燃性	区分1
遊離ホルムアルデヒド	≤75μg/g
特定アゾ色素	≤30μg/g
蛍光	著しい蛍光を認めず

JIS T 9001 一般用マスク 基準値

	規格
微粒子捕集効率 [PFE]	≥95%*
バクテリア飛沫捕集効率 [BFE]	≥95%*
ウイルス飛沫捕集効率 [VFE]	≥95%*
花粉捕集効率	≥95%*
圧力損失	<60Pa/cm ²
遊離ホルムアルデヒド	≤75μg/g
特定アゾ色素	≤30μg/g
蛍光	著しい蛍光を認めず

*どれか1つをクリア

クラスメディカル リラックス

立体プリーツと幅広ソフト型の耳ひもで快適

プリーツ:立体
耳ひも:幅広ソフト型
ノーズピース:アルミニウム



医療用ブランドの安心を。



個包装

携帯に便利な個別包装

さらさら生地



普通サイズ



小さめサイズ

大容量

お得な大容量50枚入り



普通サイズ



小さめサイズ



子供サイズ


ゆったりした付け心地



子供サイズ

圧倒的な機密性能

一般的にサージカルマスクの漏れ率は50%程度であれば良いと言われていますが、クラスメディカル リラックスのマスクの漏れ率は10%台と高いフィット性を表現しています。

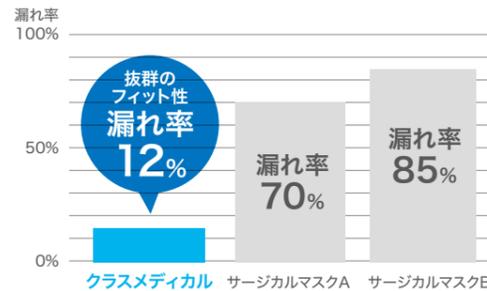

JIS T9001 医療用マスククラスI 個包装

品名:クラスメディカル リラックス

品番	サイズ	カラー	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
JMK219114	普通 約89×178mm	ホワイト	40枚・個包装	40箱	4894476031813
JMK219114S	小さめ 約89×162mm				4894476031837
JMK218814	普通 約89×178mm		50枚		4894476031738
JMK218814S	小さめ 約89×162mm				4894476031752
JMK218914	子供 約89×145mm			4894476031776	

取扱事業部: [メディカル](#) [デンタル](#) [リテール](#) [EC](#) ※デンタルは子供サイズのみのお取り扱い

付け心地ゆったり

上下に開く立体的なプリーツ



メガネが曇りにくいマスク

上部のメッシュの折り返しでメガネが曇りにくい

プリーツ:下向き
耳ひも:幅広ソフト型
ノーズピース:アルミニウム



ホワイト(ふつうサイズ)

ホワイト(小さめサイズ)

ホワイト(ふつうサイズ・7枚入り)



ピンクベージュ



ベージュ



グレー



メッシュの折り返しで呼気漏れを大幅カット

マスクの内側に二重メッシュの折り返しを付けることで、メガネが曇りにくい構造を実現。



アルミノーズピースでピッタリが持続

顔の形にピッタリフィットし、強力で形状をキープします。



幅広ソフト型の耳ひもで耳が痛くなりやすい

長時間の着用でも耳が痛くなりやすい装着感を実現しました。



ホワイト



ピンクベージュ



ベージュ



グレー

JIS T9001 医療用マスククラスI 個包装

品名:メガネが曇りにくいマスク

品番	サイズ	カラー	入り数(箱・パック)	入り数(ケース)	JANコード
JMK200614	ふつう 約89×175mm	ホワイト	40枚・個包装	40箱	4894476012454
JMK200614S	小さめ 約89×162mm				4894476012478
JMK200683	ふつう 約89×175mm		7枚	100パック	4894476027519
JMK200686	フリー 約89×178mm	ピンクベージュ	40枚・個包装	40箱	4894476027489
JMK200687		ベージュ			4894476027458
JMK200698		グレー			4894476027502


取扱事業部: [メディカル](#) [デンタル](#) [リテール](#) [EC](#) ※7枚入りはリテール(コンシューマー/インダストリアル)、ECのみのお取り扱い

MASK マスク

エアファイバー プラス

呼吸が楽で快適なマスク

プリーツ: 下向き
耳ひも: 幅広ソフト型
ノーズピース: 被覆ワイヤー

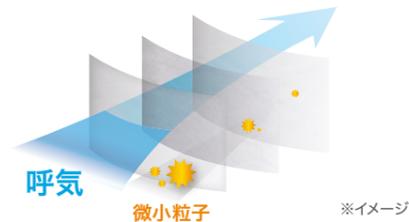

通気性の良い3層構造の不織布

呼吸が楽、なのに空気中の微小粒子をしっかりキャッチ
独自の極薄繊維で、通気性の良さを実現。呼吸がしやすく、ムシにくくなりました。(※当社製品比)
3層構造のフィルターで細菌飛まつ・ウイルス飛まつ・花粉・PM2.5をカット。

JIS T 9001 一般用マスク

品名: エアファイバー プラス

品番	サイズ	カラー	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
AFBJMK2314	約89×175mm	ホワイト	50枚	20箱	4894476011334

取扱事業部	メディカル	デンタル	リテール	EC
-------	-------	------	------	----

セーフマスク プレミア エコノミーパック

経済的な袋入りマスク

構造: 飛沫に強い3層構造
(液体防護性: 80mmHg)
ろ過精度: BFE≥99%、PFE≥99%
呼吸抵抗: ΔP<4.0
※当社調べ

プリーツ: 下向き
耳ひも: 平型
ノーズピース: 樹脂



ASTM F 2100 LEVEL 1

品名: セーフマスク プレミア エコノミーパック

品番	サイズ	カラー	入り数(パック)	入り数(ケース)	JANコード
PMR002014E	約89×178mm	ホワイト	50枚	10パック	4897008634117

取扱事業部	メディカル	デンタル	リテール	EC
-------	-------	------	------	----

OHTER その他

ドクターガード マナーシート

裏側へ水分や汚れを通しにくい多目的シート

- 表で吸水、裏で防滴のW仕様
- 持ち運び便利な軽量コンパクトサイズ
- おむつ替え、授乳後の吐き戻し、食べこぼし対策などに



100枚/箱

10枚/パック

表面: 吸水加工
水滴をさっと吸水するペーパークロス素材

裏面: 防滴加工
水滴を漏らしにくいコーティング



おむつ替えに

軽量コンパクトで
持ち運び◎

折りたたみ時はコンパクト(B6版母子手帳サイズ)でおむつと一緒に捨てられます。



食べこぼし対策に




衛生管理に

表: 吸水仕様 裏: 防滴仕様 軽量コンパクト

品名: ドクターガード マナーシート

品番	カラー	シートサイズ	入り数(箱・パック)	入り数(ケース)	JANコード
JBB780917	イエロー	8折: 1約6.5×11.8cm (展開時: 約33×45cm)	100枚	18箱	4894476031523
JBB781017			10枚	100パック	4894476031516


取扱事業部	メディカル	デンタル	リテール	EC
-------	-------	------	------	----

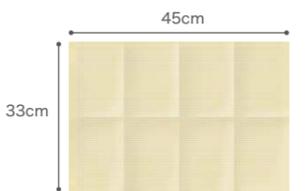


使い捨て食事用エプロン

対象者も介助者も使えるエプロン

- バリア性が高いポリエチレン製エプロン
- 使い捨てタイプなので洗濯が不要で、外出先や旅行先への携帯にも便利
- 静電気防止加工済みで着脱も容易

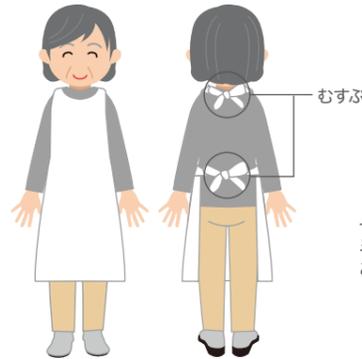

そのまま首を通してご使用いただくか、
ミシン目でちぎって、適度な長さにもすんで
ご使用ください。

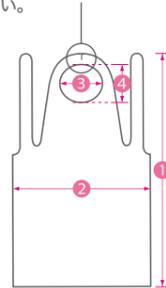

ポリエチレン製 静電気防止加工 単回使用

品名: 使い捨て食事用エプロン

品番	サイズ	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
GGW710009	フリー*	20枚	40箱	4894476014175

*長さ: 約117cm、幅: 約72cm、首回り横: 約22cm、首回り縦: 約20cm

取扱事業部	メディカル	デンタル	リテール	EC
-------	-------	------	------	----

DNボディウエットタオル

保湿成分配合で特大サイズのからだ拭きタオル

- 特大サイズ(30cm×60cm)の全身拭用ウエットタオル
- モモの葉エキスとリピジューアのW保湿成分配合
- おしぼり状に1枚ずつ個包装
- 温冷どちらでも可能(電子レンジ、冷蔵庫)



温 冷
どちらでもOK!



日本製

個包装 特大サイズ W保湿成分 日本製

品名: DNボディウエットタオル

品番	サイズ	入り数(パック)	入り数(ケース)	JANコード
DIS2603	シート寸法: 約300mm×600mm、 個装サイズ: 正面約35mm×長さ約200mm×厚み約25mm	30本	12パック	4962035613265

取扱事業部	メディカル	デンタル	リテール	EC
-------	-------	------	------	----

カーメックス/クラシックリップ バームスティック

なめらかな潤いが持続する高品質リップ

- 全米薬剤師組合が推奨し長年選ばれているリップバーム
- SPF15配合で紫外線から唇を守り、口紅の下地としても有用
- 濃厚なバームが唇を保護し、荒れや乾燥を防ぐ



ノーマル

チェリー

SPF15 アメリカ製

品名: クラシックリップ バームスティック

品番	内容量	フレーバー	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
JLB090001	4.25g	ノーマル	12本	30箱	0083078013592
JLB090130		チェリー			0083078013622

取扱事業部 **メディカル** **デンタル** **リテール** **EC** ※チェリーはリテール(コンシューマー/インダストリアル)、ECのみの取扱い