

June 21st, 2025 YDM

## 骨膜剥離子トンネリングエレベーター



[臨床動画]

- ・根面被覆術にて骨膜を剥離しながら袋状のスペースを作る際に有効です。
- ・剥離した歯肉の圧排にも使用できます。
- ・小さな先端形状は歯肉を傷つけにくく、歯間乳頭剥離等の細やかな剥離にも有効です。



写真提供:瀧野 裕行先生 (タキノ歯科医院 理事長)



写真提供:奈良 嘉峰先生 (茅ヶ崎駅前奈良デンタルクリニック 院長)




写真提供:尾野 誠先生 (四条烏丸歯科クリニック)

# 1 コード No.15161 (レッド)  
 標準価格 **14,000円**

# 2 コード No.15162 (グリーン)  
 標準価格 **14,000円**

# 骨膜剥離子トンネリングエレベーター

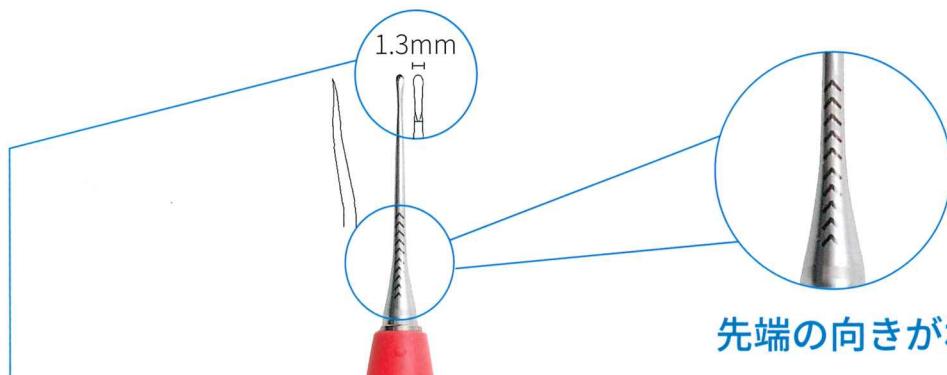

## 先端の向きがわかるデザイン

剥離中の先端の向きがわかるよう、目印が付いています。

### 小さな先端形状

小さな先端形状は歯肉を傷つけにくく、歯間乳頭剥離等の細やかな剥離にも有効です。




写真提供:瀧野 裕行先生  
(タキノ歯科医院 理事長)



写真提供:奈良 嘉峰先生  
(茅ヶ崎駅前奈良デンタルクリニック 院長)



1.3mm

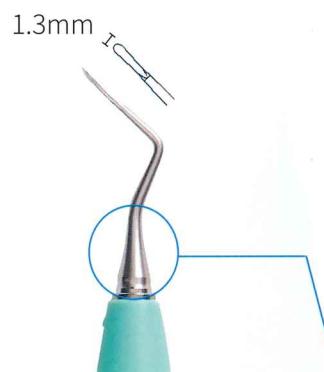

1.3mm

### 短い頸部

ポケット内でコントロールがしやすいよう頸部の長さを短くしています。



写真提供:瀧野 裕行先生  
(タキノ歯科医院 理事長)



写真提供:奈良 嘉峰先生  
(茅ヶ崎駅前奈良デンタルクリニック 院長)



### 安定把持

太めでソフトなシリコンハンドルは安定感があり、手指への疲労を軽減します。



写真提供:尾野 誠先生 (四条烏丸歯科クリニック)

## 骨膜剥離子

135°

1/1



# 13 コード No.15130  
標準価格 12,000円

# 9 コード No.15131  
標準価格 12,000円 刃付

●広範囲の骨膜の剥離や組織の排除・保護に使用する《モルト#9》です。

医療機器届出番号 11B1X1000642D012  
一般的の名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 骨膜剥離子

## 粘膜剥離子

135°

1/1



# 13 コード No.15141  
標準価格 12,000円 刃付

# 14 コード No.15140  
標準価格 12,000円

七浦型 コード No.14230  
標準価格 11,000円

## ディセクター

135°

1/1



写真提供：中家 麻里 先生  
(なかや歯科 院長)

医療機器届出番号 11B1X1000634D301  
一般的の名称 歯肉切除メス 販売名 ディセクター

# 剥離子オーダーシステム

- ハンドルと先端部を自由に組合せてオーダーできます。
- 術者の手法に合った組合せで、治療がよりスムーズになります。
- ハンドルは3種類、先端部は31種類から選べます。

## ハンドル



角柄 細

コード No.15003  
標準価格 11,000円※長さ／110mm  
※径／φ6.5mm

丸柄

コード No.15008  
標準価格 12,000円※長さ／110mm  
※径／φ9.5mm

丸柄 Short

コード No.15009  
標準価格 12,000円※長さ／80mm  
※径／φ9.5mm医療機器届出番号 11B1X1000642D033  
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 剥離子オーダーシステム

## [粘膜（広範囲）]



## [歯間乳頭]



## ご注文方法




## [組合せ例]


ハンドル：丸柄  
先端部：HC3、HB2 をご指定の場合

コード No.15008 「剥離子 オーダーシステム 丸柄 + HC3 + HB2」

## [粘膜（狭範囲）]

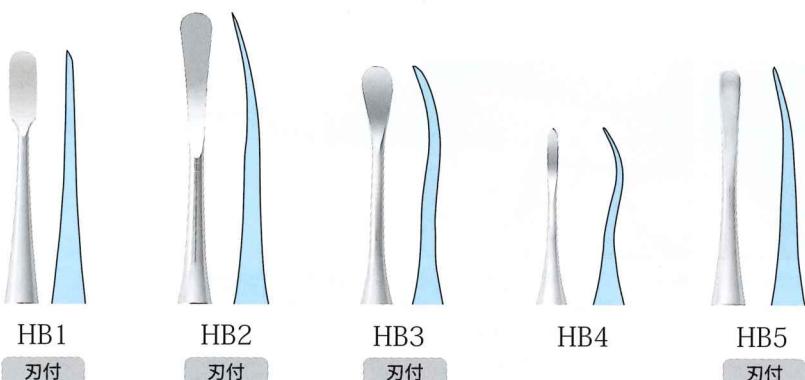

## [歯肉排除]

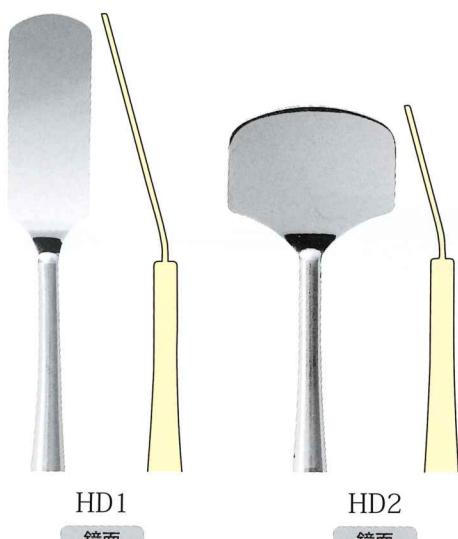

## [骨膜]



**パターン1** 山本 松男 先生 昭和大学歯学部 歯周病学講座 教授

- スプーン状の先端部には周囲300°に鋭いブレードが付いています。
- 極小サイズのため、狭い歯間部等でも歯周組織に与えるダメージを最小限に抑えて剥離できます。
- 鋸匙として狭い部分での不良肉芽の除去にも有用です。




[ HC6 ]



●歯間が2mm程度の狭い場合に、極小サイズの先端部が有効。  
歯肉弁の直下にある骨膜（結合組織）を剥離することができ、  
狭い（血流の乏しい）歯肉組織へのダメージを減少させます。

[ HC8 ]

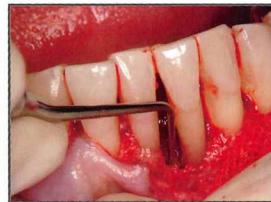

●極小スプーン状の先端部は鋸匙としても有用。  
クレーター状骨欠損部等でも骨を削除することなく、  
不良肉芽のみを焼き出すことができます。

**パターン2**

梶村 幸市 先生 ユアーズ歯科クリニック



[ HA6 ]



[ HB2 ]



パターン3

瀧野 裕行 先生 タキノ歯科医院 理事長




HB1 + 丸柄 + HB3



HB3 + 丸柄 + HC4

[HB1]

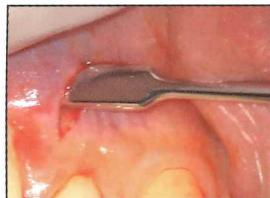

[HC4]



パターン4

多保 学 先生 たぼ歯科医院 理事長 日本歯科大学附属病院 臨床准教授



[臨床動画]



HB3 + 丸柄 + HC4

[HB3]



[HC4]



パターン5

石井 宏 先生 ペンシルバニア大学 非常勤講師 神奈川歯科大学 非常勤講師



HB2 + 丸柄 + HC2 (ペリオスチール24G)

**パターン 6** 保坂 均 先生 ご考案 日本歯周病学会 指導医・専門医

●頸部に4方向の角度が付与されたブレードが鋭利な骨膜剥離子です。  
上下・左右を組合せた2本であらゆる部位に対応でき、歯周外科に適しています。



[ 臨床動画 ]



HE1 + 丸柄 + HE2



HE3 + 丸柄 + HE4

[ HE1 ]



●口蓋側を剥離します。

[ HE2 ]



●唇側を剥離します。

**パターン 7**

大森 有樹 先生 大阪 SJCD 会長 歯科勉強会大森塾主宰



HB1 + 丸柄 + HC1 (ハーシュフェルト)

[ HB1 ]



[ HC1 ]



**パターン 8**

中家 麻里 先生 なかや歯科 院長




[ 臨床動画 ]



HB4 + 丸柄 + HB5

[ HB5 ]

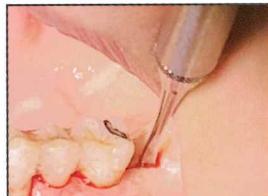

[ HB4 ]



パターン9

上田 秀朗 先生 上田塾主宰



HB4 + 丸柄 + HC4



HA2 + 丸柄 + HB5


パターン10

青井 良太 先生 ご考案 SBC (Surgical Basic Course) 主幹

- 歯肉排除用の組合せ。1本で大小揃い、術部の広さに合わせてスムーズに対応でき便利です。
- 術部確認のミラー機能も併用できます。



HB1 + 丸柄 + HC1 (ハーシュフェルト)

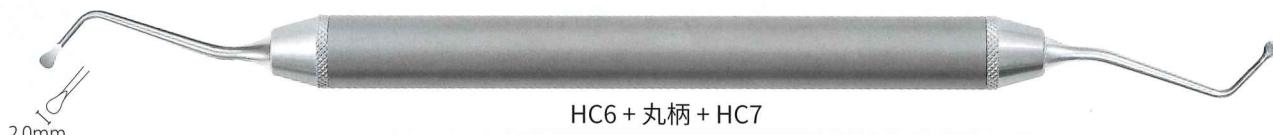

HC6 + 丸柄 + HC7




HC8 + 丸柄 + HC9



HD1 + 丸柄 Short + HD2

[HD2]

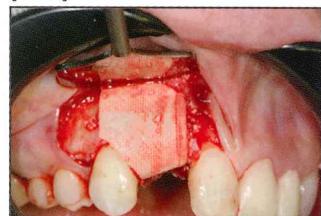

●広範囲の歯肉を排除できます。

## パターン 11

渥美 克幸先生 デンタルクリニック K 院長



[ 臨床動画 ]



HB5 + 丸柄 + HC4



HE1 + 丸柄 + HE2



HE3 + 丸柄 + HE4

[ HE1 ]



[ HE3 ]



## パターン 12

奈良 嘉峰先生 茅ヶ崎駅前奈良デンタルクリニック 院長



[ 臨床動画 ]



HB3 + 丸柄 + HC3 (ブーザー)



HB2 + 丸柄 + HC4



HA6 + 丸柄 + HD1

[ HC3 ]



[ HB3 ]



[ HB3 ][ HA6 ]



**パターン 13**

築山 鉄平 先生 つきやま歯科医院 専門医療クリニック天神 院長







HB2 + 丸柄 + HC2 (ペリオスチール24G)



HB3 + 丸柄 + HC4



HA1 + 丸柄 Short + HD1 (プリチャード)

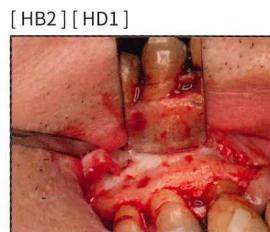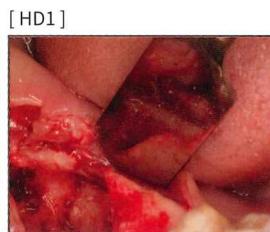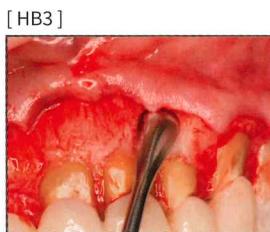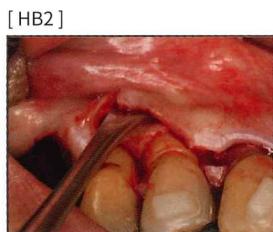

**パターン 14**

増田 英人 先生 ますだ歯科医院 院長



[臨床動画]



HB2 + 丸柄 + HC4





HA6 + 丸柄 + HC3



HC6 + 丸柄 + HC8



HC7 + 丸柄 + HC9

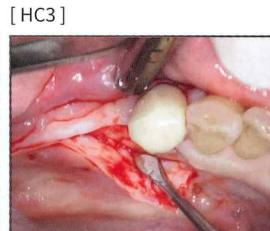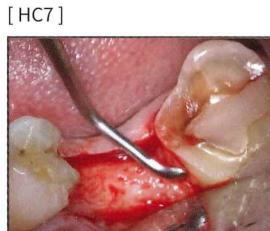

## パターン 15 尾野 誠 先生 四条烏丸歯科クリニック




## 剥離子 MS

135

1/1



[ #2 臨床動画 ]

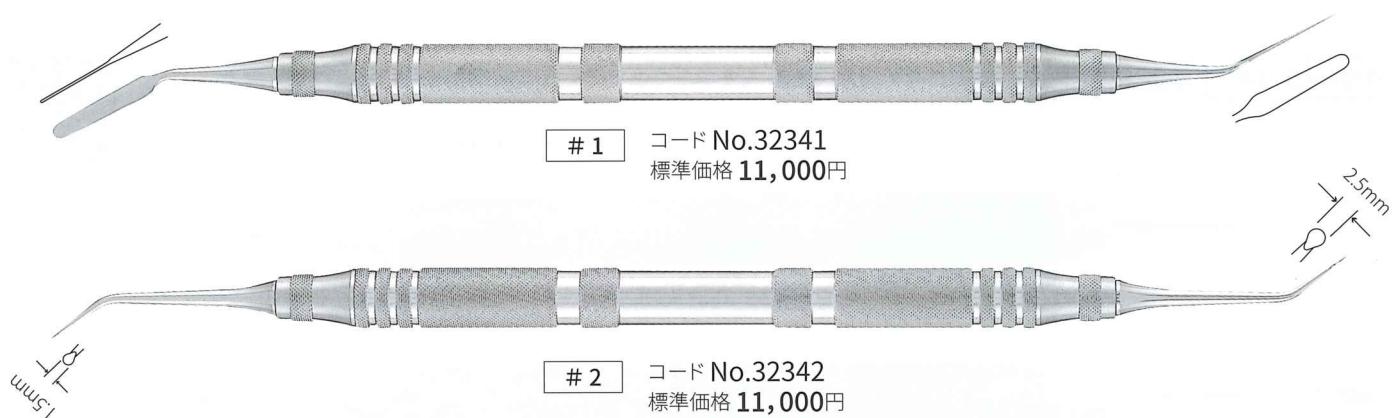

写真提供：石井 宏先生  
(ペンシルバニア大学 非常勤講師)  
神奈川歯科大学 非常勤講師)

写真提供：安斎 昌照先生  
(あんざい歯科医院 理事長)

医療機器届出番号 11B1X1000642D016  
一般的名称 歯科用起子及び剥離子 販売名 剥離子 MS

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

※掲載製品の標準価格は、2025年6月21日現在のものです。※標準価格に消費税は含まれておりません。

製造販売元 株式会社YDM

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006  
問合先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991  
<http://www.ydm.co.jp/> E-mail [ydm@ydm.co.jp](mailto:ydm@ydm.co.jp)

発売 株式会社モリタ

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525  
東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161  
<http://www.dental-plaza.com/>