

QUICK CONDENSER

根管充填材を垂直方向の加圧に使用するマーキング付プラグーです。

BSA クイックコンデンサーは回転や加圧方向の調整が容易にできるニッケルチタンとステンレススチールの作業部が両端にある根管充填用ダブル エンドプラグーです。ニッケルチタンは柔軟性があるため弯曲した根管に、ステンレススチールは根管口の充填にお使いください。

NEW



マーキング位置: 2-10-15mm
先端直径: 0.35mm/0.7mm

③① N35/S70



マーキング位置: 2-10-15mm
先端直径: 0.4mm/0.8mm

③② N40/S80



マーキング位置: 2-10-15mm
先端直径: 0.5mm/1.0mm

③③ N50/S100



マーキング位置: 2-10-15mm
先端直径: 0.6mm/1.2mm

③④ N60/S120

N・・・ニッケルチタン S・・・ステンレス

●一般名称: 歯科用根管プラグー 届出番号: 23B2X0017000368 ●オートクレープ134℃ ●ハンドル素材: アルミニウム合金

入数	商品コード	タイプ	標準価格
1本	601301	③①BSAクイックコンデンサー N35/S70	¥2,200/本 (税別)
1本	601302	③②BSAクイックコンデンサー N40/S80	
1本	601303	③③BSAクイックコンデンサー N50/S100	
1本	601304	③④BSAクイックコンデンサー N60/S120	

実寸

オートクレープ可



先端部にガイドライン付

Cut & Fit

ガッタパーチャポイントはハンドメイドの為、サイズに若干バラツキが生じます。カットフィットでカットすることで、ご使用のガッタパーチャポイントを9種類のサイズにカットすることができます。大きいサイズのガッタパーチャが必要な際でも小さいサイズのガッタパーチャを希望サイズの穴に差し込みカットすることでメインポイントの太さを簡単に変更できます。



良く切れる!
キレイに切れる!
希望サイズに切れる!

PUSH



カット済みポイント取り出し口

好評発売中!!



●一般名称: 歯科用練成充填形成器
●届出番号: 230B200017000288

商品コード	入数	標準価格
5197	1台	¥4,800/台 (税別)

ガッタパーチャポイント先端を規格化

BSA カルシウムシリケート系 プレミックス フロータイプ バイオセラミック シーラー

One-Fil[®] 新発売

Calcium Silicate Based Bioceramic Sealer

DR. MOH'D HAMMO
Endodontist

endo diary
はこちらから




**7つの
特長**

- ① 高いX線不透過性
- ② 高い生体親和性
- ③ 高い濡れ性
- ④ pH13の高い除菌性
- ⑤ 高い封鎖性
- ⑥ 高い寸法安定性
- ⑦ 高コストパフォーマンス

エビデンス：オーストラリアエンド誌 2021年12月47(3):512-519. doi: 10.1111/aej.12515. Epub 2021年4月24日

BSAワンフィル シリーズはケイ酸カルシウムを主成分としたMTA系(Mineral Trioxide Aggregate)のバイオセラミック シーラー。湿和工程不要の1ペーストフロータイプで、濡れ性に優れ塗布が容易。流動性と放射線不透過性および生体親和性に優れ微小浸潤層を封鎖し、歯質の再石灰化を促進するバイオアクティブ系。

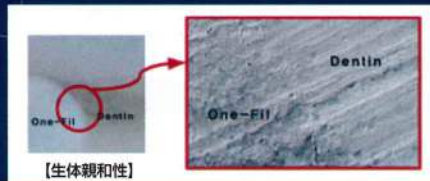


保険で使えるコスパを実現、バイオセラミックシーラーがこの価格!!

物理的性質表	
pH	13
硬化時間	水分と反応後30分
完全硬化時間	3.5時間以内
流動性	26
溶解度(%)	<1.1
放射線不透過性(mmAl)	9

- 一般的名称: 歯科用固着材料(管理)
- 認証番号: 307AKBZX00024000

商品コード	セット内容	入数	標準価格
9071	2gシリンジ×1 チップ×10本	1ケース	¥5,800 / ケース (税込)

プレミックス フロータイプ
1ペースト材

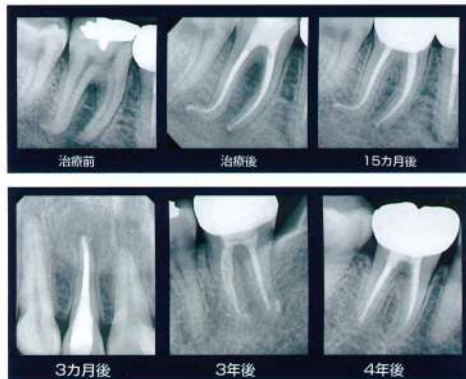

パルプキャッピング、パーフォレーションリペア、逆根管充填、再生歯内療法に。
カルシウムシリケート系 プレミックス バテタイプ バイオセラミック セメント

One-Fil[®] Putty

Premixed Multi-Purpose Bioceramic Putty

外科的処置用高粘度バテタイプのセメントです。プレミックスタイプなのでシリンジから出してそのままお使いいただけるので手間がありません。また、術者の習熟度にも影響されず、安定した操作性が確保いただけます。

初期硬化 5 分のため出血部位にも有効です。

物理的性質表	
pH	13
硬化時間	水分と反応後5分
完全硬化時間	1時間以内
溶解度(%)	<1.3
放射線不透過性(mmAl)	10

- 一般的名称: 歯科用固着材料(管理)
- 認証番号: 307AKBZX00025000

商品コード	セット内容	入数	標準価格
9072	0.25gシリンジ×4	1ケース	¥3,800 / ケース (税込)

製造元

MDCLUS
MEDICUS CO., LTD.



プレミックス バテタイプ
1ペースト材



〈資料提供：月星歯科クリニック 月星太介先生〉

今なら実質

**One-Fil[®] が
1本 1950円 でお試し
いただける**

チャンス!!

One-Fil[®] 初回限定 特典 1200円
新発売お試しキャンペーン

2025.7/22 ~ 9/30の期間中、ワンフィルを1箱(2g×1本) 標準価格 5,800円 お買い求めいただけますと、ワンフィル バテ (0.25g×2本 1,900円相当) がもれなくセットでお届け致します。つまり、ワンフィルが実質、1箱(2g×1本) 3,900円!! 初回限定 1,200箱、予定数に達し次第終了させていただきます。予めご了承ください。



One-Fil[®] Putty

2本 SET