

KATANA® CAD/CAM 冠 CAD/CAM インレー対応ブロック

特別 キャンペーン

実施期間 2025年8月21日～9月19日

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。
ご好評につき、「カタナ®アベンシア®」シリーズの特別キャンペーンを企画いたしました。
期間中カタナアベンシアシリーズ対象製品を特別価格にてご提供いたします。
ぜひ、この機会をご利用ください。

- 前歯対応 CAD/CAM冠用材料 (Ⅱ) **カタナ®アベンシア®N**
- 小臼歯対応 CAD/CAM冠用材料 (Ⅱ) **カタナ®アベンシア®ブロック2**
- 大臼歯対応 CAD/CAM冠用材料 (Ⅱ) **カタナ®アベンシア®Pブロック**

それぞれ下記表の製品を

特別価格でご提供!

前歯 ML (積層)	■ カタナ®アベンシア®N	14L	標準価格 26,150 円	A1	A2	A3	A3.5	B1	B2
小臼歯 単層	■ カタナ®アベンシア®ブロック2	12	標準価格 13,500 円	A2LT	A3LT	A3.5LT			
		14L	標準価格 16,500 円	A2LT	A3LT	A3.5LT			
小臼歯 ML (積層)	■ カタナ®アベンシア®ブロック2	12	標準価格 13,500 円	A2ML	A3ML	A3.5ML			
		14L	標準価格 16,500 円	A2ML	A3ML	A3.5ML			
小臼歯 インレー向き	■ カタナ®アベンシア®ブロック2	12	標準価格 13,500 円	OE					
大臼歯 単層	■ カタナ®アベンシア®Pブロック	12	標準価格 24,200 円	A2LT	A3LT	A3.5LT			
		14	標準価格 24,200 円	A2LT	A3LT	A3.5LT			

「カタナ®アベンシア®」シリーズ^{※1}は
前歯から大臼歯まで統一した色調コンセプトで設計しています。

独自の製造技術でエナメル色からボディ色にかけて彩度と
透明度が境目なく変化するシームレスなマルチレイヤーを実現^{※2}

マルチレイヤーは前歯部から小臼歯部の審美領域にも対応

滑沢性は歯ブラシ摩耗後も滑沢性を持続、
着色の抑制が期待できる^{※3}



※1 「カタナ®アベンシア®N」と「カタナ®アベンシア®ブロック2」のMLと「カタナ®アベンシア®Pブロック」のことを指します。

※2 「カタナ®アベンシア®Pブロック」は単層です。

※3 カーボランダムポイントにて形態修正後、シリコンポイント、研磨ペーストを用いて研磨します。


保険適応範囲／前歯（クラウン）

前歯対応 CAD/CAM冠用材料（Ⅳ）

カタナ®アベンシア®N

シームレスなマルチレイヤー

エナメル色、ボディ色を有し、間に中間色を含む積層構造のブロックです。独自の製造技術で、エナメル色からボディ色にかけて、彩度と透明度が境目なく変化するシームレスなマルチレイヤーを実現しました。

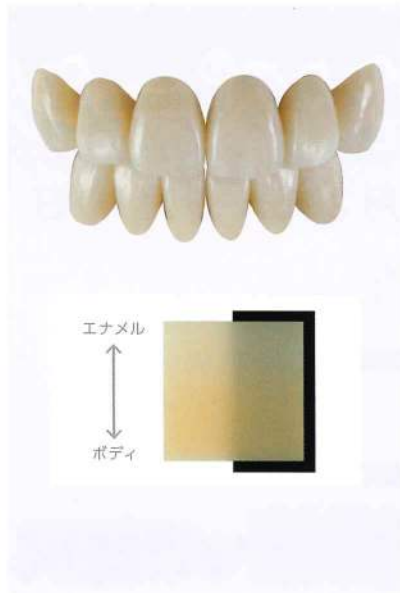

保険適応範囲／大臼歯（クラウン・インレー）

大臼歯対応 CAD/CAM冠用材料（Ⅲ）

カタナ®アベンシア®Pブロック

大臼歯咬合に耐えうる強度

優れた曲げ弾性率により、大臼歯における咬合圧に対しても、たわみにくく、脱離等のトラブルの軽減が期待されます。

■ 弾性率の違いによる応力イメージ



■ 曲げ弾性率



測定条件：
試験片サイズ14.0×4.0×1.2mm、37℃水中浸漬7日後
オートグラフAG-I 100kN（C39島津製作所ロードセル10kN使用）
スパン12mm、3点曲げ、クロスヘッドスピード1.0mm/min
クラレノリタケデンタル（株）測定：
条件などにより数値は異なります。

保険適応範囲／小臼歯（クラウン・インレー）

小臼歯対応 CAD/CAM冠用材料（Ⅱ）

カタナ®アベンシア®ブロック2

審美領域で統一された色調構成

マルチレイヤータイプは、「カタナ®アベンシア®N」と同じ色調コンセプトで設計しているため、審美性が求められる前歯部から小臼歯部の領域において、シームレスなマルチレイヤー※で統一できます。また、得られた滑沢性は歯ブラシ摩耗後も、口腔内での滑沢性の持続、着色の抑制が期待されます。

※彩度と透明度が境目なく変化するマルチレイヤー



CAD/CAM インレーには
カタナアベンシア 2 OE がオススメです！

幅広い色調に馴染みやすいから、在庫管理がシンプルに！

OE は、透明性が高いため、従来の単層の色調と比較し
幅広い色調に馴染みやすい色調 です。

インレー用ブロックの色調選択肢がシンプルになり、
ブロックの在庫管理の効率化も期待 できます。

人工歯への適合比較※



透明性の向上で
窩洞マージンの
移行部が
目立ちにくい！

窩洞写真



A2窩洞



A3窩洞



A3.5窩洞

※人工歯を用いたシミュレーションであり、天然歯の色調とは異なります。
模型製作：カナルテクニカルセンター

臨床例「カタナ®アベンシア®ブロック2」OE 使用

写真提供：八重洲歯科診療所 中村 昇司 先生



1. 窩洞形成後



2. 「カタナ®アベンシア®ブロック2」OE
で製作した小臼歯インレー



3. 試適後、「カタナ®クリーナー」を補綴
装置と窩洞に塗布し、10秒以上塗り
塗り、水洗※1・乾燥



4. 窩洞に「クリアフィル®ユニバーサル
ボンド Quick ER」塗布後、待ち時間なし
でエアブローで5秒以上乾燥※2



5. 「SA ルーティング® Multi」にて接着、
1か所につき1〜2秒の光照射により
余剰セメントを除去※3



6. 最終硬化(5分保持)※4

※1 色が完全になくなるまで水洗してください。 ※2 バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。
※3 化学硬化により除去する際は2〜4分保持してください。
※4 光を透過する補綴装置の場合はクラウン全体への光照射による最終硬化も可能です。
光照射の条件は「SA ルーティング® Multi」の添付文書をご確認ください。

特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

●販売名カタナ アベンシア ブロック2 一般的名称 歯科切削加工用レジン材料 医療機器認証番号:302AFBZX00019000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ)
●販売名カタナ アベンシア Pブロック 一般的名称 歯科切削加工用レジン材料 医療機器認証番号:229AFBZX00091200 医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ)
●販売名カタナ アベンシア N 一般的名称 歯科切削加工用レジン材料 医療機器認証番号:301AFBZX00015000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ)
●販売名SA ルーティング® Multi 一般的名称 歯科接合用レジンセメント 医療機器認証番号:230ABZX00096000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ)
●販売名カタナ クリーナー 一般的名称 歯科セラミックス用接着材料(歯科セラミックス用接着材料) 医療機器認証番号:301ABZX00015000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ)
●販売名クリアフィル ユニバーサルボンドQuick ER 一般的名称 歯科用象牙質接着材料(歯科セラミックス用接着材料)(歯科金剛石用接着材料) 医療機器認証番号:228ABZX00065000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ)

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社
新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販 売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)
<歯科医療従事者様専用>
www.dental-plaza.com