


ワンフィル One-Fil®

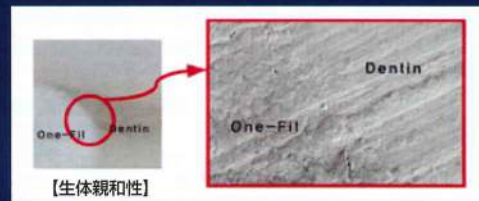

BSAワンフィル シリーズは、カルシウムを主成分としたMTA系(Mineral Trioxide Aggregate)のバイオセラミック覆髄材です。混和工程が不要な1ペーストプレミックスタイプで、優れた濡れ性により塗布が容易です。高い放射線不透過性を持ち、優れた生体親和性で微小浸潤層を封鎖し、歯質の再石灰化を促進するバイオアクティブな特性を持っています。用途に応じて、フロータイプの『ワンフィル』とパテタイプの『ワンフィル パテ』の2タイプからお選びいただけます。

- ① 高いX線不透過性 ② 高い生体親和性 ③ 高い濡れ性 ④ pH13の高い除菌性
⑤ 高い封鎖性 ⑥ 高い寸法安定性 ⑦ 高コストパフォーマンス

バイオセラミックペーストがこの価格!!

カルシウムベースの プレミックス バイオセラミック ペースト

ワンフィル One-Fil®

Calcium Silicate Based Bioceramic Paste

物理的性質表	
pH	13
硬化時間	水分と反応後30分
完全硬化時間	3.5時間以内
流動性	26
溶解度(%)	<1.1
放射線不透過性(mmAl)	9

●一般的な名称: 歯科用覆髄材料(管理)
●認証番号: 307AKBZX00024000

プレミックスフロータイプ
1ペースト材

商品コード	セット内容	入数	標準価格
9071	2gシリンジ×1 チップ×10本	1ケース	¥5,800 /ケース (税別)



カルシウムベースの プレミックス バイオセラミック パテ

ワンフィル パテ One-Fil® Putty

Calcium Based Bioceramic Putty



パテタイプの覆髄材です。プレミックスタイプなのでシリンジから出してそのままお使いいただける為、手間がありません。
また、術者の習熟度にも影響されず、安定した操作性が確保いただけます。

初期硬化 5 分のため出血部位にも有効です。

物理的性質表	
pH	13
硬化時間	水分と反応後5分
完全硬化時間	1時間以内
溶解度(%)	<1.3
放射線不透過性(mmAl)	10

●一般的な名称: 歯科用覆髄材料(管理)
●認証番号: 307AKBZX00025000

プレミックスパテタイプ
1ペースト材

商品コード	セット内容	入数	標準価格
9072	0.25gシリンジ×4	1ケース	¥3,800 /ケース (税別)





■バシ 21mm フルキット

01テーパー グライドパス	03テーパー シェイピング	05テーパー シェイピング
#25/#30/#35/#40 ×各1本	#25/#30/#35/#40 ×各1本	#25/#30/#35/#40 ×各1本
リトリートメント	グライドパス ジョーカー	
#30/10 #25/08 #20/06 ×各1本	#15/03 #15/05 ×各1本	

標準価格
17本入り
¥18,000 /BOX

商品コード	注文数
55341	

■バシ 25mm フルキット

01テーパー グライドパス	03テーパー シェイピング	05テーパー シェイピング
#25/#30/#35/#40 ×各1本	#25/#30/#35/#40 ×各1本	#25/#30/#35/#40 ×各1本
リトリートメント	グライドパス ジョーカー	
#30/10 #25/08 #20/06 ×各1本	#15/03 #15/05 ×各1本	

標準価格
17本入り
¥18,000 /BOX

商品コード	注文数
55342	

New Handle

※シリコンストッパーの色はサイズカラーと同色になります

テーパー: 24 mm, 22 mm
サイズ: 18 mm, 19 mm, 20 mm

Taper collar

01	White
03	Yellow
05	Blue
06	Green
08	Black
10	White

size collar

15	White
20	Yellow
25	Red
30	Blue
35	Green
40	Black
45	White
50	Yellow

先端に刃が無いため、グライドパス形成時にレジジ・ジップが起きにくい形状です。

Glidepath

グライドパス

標準価格
¥3,520 /ケース

推奨トルク (Ncm) 1
回転数 (rpm) 350~950

No.	テーパー	サイズ	長さ	入数	商品コード	注文数
1	.01	#25	21	4	55301	
2		#30		4	55302	
3		#35		4	55303	
4		#40		4	55304	
37		#45		4	55337	
38		#50		4	55338	
5	.01	#25	25	4	55305	
6		#30		4	55306	
7		#35		4	55307	
8		#40		4	55308	
39		#45		4	55339	
40		#50		4	55340	

複雑根管・石灰化・狭窄根管に。

Glidepath

ジョーカーファイル

標準価格
¥3,520 /ケース

推奨トルク (Ncm) 2
回転数 (rpm) テーパー .03 350~600
テーパー .05 600~950

No.	テーパー	サイズ	長さ	入数	標準価格	注文数
9	.03	#15	21	4	55309	
10		#15		4	55310	
11	.03	#15	25	4	55311	
12		#15		4	55312	

Retreatment

ガッタパーチャール除去率95%

リトリートメント

標準価格
¥3,520 /ケース

テーパー .06 推奨トルク (Ncm) 1.5
回転数 (rpm) 350~600
テーパー .08 / .10 推奨トルク (Ncm) 4
回転数 (rpm) 600~950

No.	テーパー	サイズ	長さ	入数	商品コード	注文数
101	.06	#20	21	4	55251	
102		#25		4	55252	
103		#30		4	55253	
104	.06	#20	25	4	55254	
105		#25		4	55255	
106		#30		4	55256	
34	.06	#20	21	3本 アソート	55334 標準価格 ¥2,640 /ケース	
		#25				
		#30				
35	.06	#20	25	3本 アソート	55335 標準価格 ¥2,640 /ケース	
		#25				
		#30				

●材質: ニッケルチタン
●認証番号: 301AKBZX00025000

しなやかでシャープ。驚くべき切れ味と耐久性。正回転で使用します。

Shaping

シェイピング

標準価格
¥3,520 /ケース

推奨トルク (Ncm) 2
回転数 (rpm) 350~950

No.	テーパー	サイズ	長さ	入数	商品コード	注文数
17	.03	#25	21	4	55317	
18		#30		4	55318	
19		#35		4	55319	
20		#40		4	55320	
21	.03	#25	25	4	55321	
22		#30		4	55322	
23		#35		4	55323	
24		#40		4	55324	

しなやかでシャープ。驚くべき切れ味と耐久性。正回転で使用します。

Shaping

シェイピング

標準価格
¥3,520 /ケース

推奨トルク (Ncm) 4
回転数 (rpm) 600~950

No.	テーパー	サイズ	長さ	入数	商品コード	注文数
25	.05	#25	21	4	55325	
26		#30		4	55326	
27		#35		4	55327	
28		#40		4	55328	
29	.05	#25	25	4	55329	
30		#30		4	55330	
31		#35		4	55331	
32		#40		4	55332	

Gutta Percha Points

ガッタパーチャポイント

形成後、そのままジャストフィット。
03・05テーパーのGPです。
標準価格 ¥1,400 /ケース

No.	テーパー	サイズ	入数	商品コード	注文数
51	.03	#25	60	55351	
52		#30	60	55352	
53		#35	60	55353	
54		#40	60	55354	
59	.04	#25	60	55359	
55		#25	60	55355	
56		#30	60	55356	
57		#35	60	55357	
58	.05	#40	60	55358	
60		アソートバック .03 #10 .05 #10	#25 #30 #35 60	55360	

歯科医院名:

販売店名: ※お取引の販売店様は必ずご記入ください。

お名前:

医院電話番号:

(営業担当: 様)



バシファイルチェッカー

8枚の花びら状のタグを、ファイルを使用する毎に1枚ずつ着ることで、使用回数の目安とすることが可能です。

標準価格
¥1,200 /パック

カラー	入数	商品コード	注文数
6色アソート	100	55427	
ホワイト	100	55421	
イエロー	100	55422	
レッド	100	55423	

カラー	入数	商品コード	注文数
ブルー	100	55424	
グリーン	100	55425	
ブラック	100	55426	

注文書

※お取引の販売店様は必ずご記入ください。

BSA




052-805-1182

●24時間受付
●番号はおかけ間違いがないように
お願いいたします。

バシトレーニングブロック

難易度がそれぞれ異なる4種類の模型がセット

歯牙タイプ

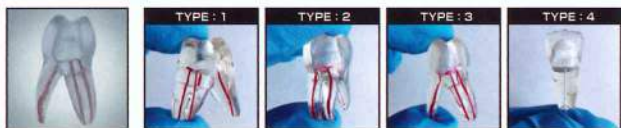

標準価格
¥3,000 /セット

入数	商品コード	注文数
4	55292	

バシトレーニングブロック

難易度がそれぞれ異なる4種類の模型がセット

ブロックタイプ



標準価格
¥3,000 /セット

入数	商品コード	注文数
4	55291	

バシ エンドニードル



Wサイドホール

¥3,000
/箱 (60本)



サイドホール

¥2,000
/箱 (60本)

ロングホール

●針の長さ: 25mm
●届出番号23B2X00017000341

●E.O.G滅菌済み
●1本ずつ個包装

形式	サイズ	入数	商品コード	注文数
Wサイドホール	23G(針径φ0.65mm)	100	490291	
Wサイドホール	27G(針径φ0.4mm)	100	490292	
Wサイドホール	30G(針径φ0.3mm)	100	490293	
サイドホール	23G(針径φ0.65mm)	100	490271	
サイドホール	27G(針径φ0.4mm)	100	490272	
サイドホール	30G(針径φ0.3mm)	100	490273	
ロングホール	23G(針径φ0.65mm)	100	490281	
ロングホール	27G(針径φ0.4mm)	100	490282	
ロングホール	30G(針径φ0.3mm)	100	490283	

バシ イントロキット



バシフルキット

21mm 標準価格 18000円 25mm 標準価格 18000円

②

極小ヘッド
コードレスエンドモーター
Endo Smart

●届出番号: 23B2X00067000

標準価格
1セット 128000円

③

Woodpex III

標準価格
1セット 49800円

④

バシハンズオン
セミナー受講券



標準価格
1講座 39800円



セット内容
①バシフルキット (21mm/25mm) ×各1
②エンドスマートプラス×1
③バシハンズオン受講券×1
④バシハンズオンセミナー受講券×1

これだけですぐにBassiが使い頂ける!! エンドモーター・根管長測定器
バシスターターキット・セミナー受講券をセットにじて

総額 ~~258000円~~ 特別価格 **178000円** のところ

入数	商品コード	注文数
1	338	

プラクティスキット

バシロジックの真骨頂がわかり頂けます。

標準価格
¥3,520 /ケース

プラクティスキット 21mm

●材質: ニッケルチタン
●4本/ケース

■1パックのキット内容
#25/01/21mm グライドバス×1本
#30/01/21mm グライドバス×1本
#25/05/21mm シェイピング×1本
#30/05/21mm シェイピング×1本

入数	商品コード	注文数
4	55333	

プラクティスキット 25mm

●材質: ニッケルチタン
●4本/ケース

■1パックのキット内容
#25/01/25mm グライドバス×1本
#30/01/25mm グライドバス×1本
#25/05/25mm シェイピング×1本
#30/05/25mm シェイピング×1本

入数	商品コード	注文数
4	55336	

●届出番号: 301AKBZX00025000

専門誌: バシロジック エンドファイルシステム入門



Chapter 1 バシロジックエンドファイルシステムとは
Chapter 2 バシロジックエンドファイルシステムのラインナップ
Chapter 3 バシロジックエンドファイルシステムの基本プロトコル
Chapter 4 バシロジックエンドファイルシステムによる根管治療の流れ
Chapter 5 症例集 01 イニシャルトリートメントとリトリートメントの治療の流れ
Chapter 6 Q&A 02 バシロジックエンドファイルシステムの具体的なプロトコル
03 感染根管治療におけるバシロジックファイルの適応症とその症例

標準価格
¥7,000 /冊

入数	商品コード	注文数
1	44432	

歯科医院名:

販売店名:

※お取引の販売店様は必ずご記入ください。

お名前:

医院電話番号:

(営業担当:

様)

BassiLogic™



「もっと早く使えばよかった」(涙)

受講された先生方から
このようなお声をよく
頂戴いたします。

なぜ今、バシロジックなのか？

① 穿通から拡大形成までわずか2ステップ

0.1 テーパーガイドパスによる道付けから 0.3/0.5 テーパーシェイピングによる根管成
型の最短2ステップ。 シンプルファイリングシステムで効率的なMT治療が可能。

③ 経済的なプライス 1本あたり 880円

高いねじれ耐久性により、くり返し使用可能な高耐久性、保険診療で充分お使いいただける高コストパフォーマンス。

④ バシ認定講師による充実したセミナーを毎月開催

バシ認定講師、佐久間先生・月星先生・坂本先生、3先生によるセミナーを毎月開催しています。きめ細やかなビフォー・アフターフォローによりご使用前の不安・ご使用
中の疑問等を解消いたします。※セミナー受講頂きますとフェイスブックバシロジックサロンにて受講された先生方と交流ができればいつでも先生方に質問いただけます。

② 狭窄・石灰化根管もスピーディーに 穿通できるジョーカーファイル

バシだけの特許製法で根管追従性に優れ、しかもよく切れ、とにも
かくにも折れにくい。エンド三角除去のためのフレアブラッシング
モーション・ストレートアクセスの必要はもうありません。

毎月開催 BassiLogic ハンズオンセミナー好評開催中!!

福岡	12/14	[2025 ~ 2026 年セミナー日程]	
大阪	11/23	2/1	
名古屋	10/12	1/18	3/8
東京	10/19	11/30	12/21
	1/18	2/8	3/29
札幌	11/3	3/20	



新潟県胎内市 新栄町歯科医院
佐久間 利喜先生

東京会場



愛知県海部郡 月星歯科クリニック
月星 太介先生

名古屋・福岡・大阪会場



札幌市中央区 札幌歯科
坂本 渉先生

札幌会場

セミナーのお申込み
日程のご確認はこちら

信頼のバシ認定講師による完全指導!!

バシ認定講師の先生方が実際に手をとりバシファイルの使い方のコツ・
ヒケツを伝授。エンドモーターが初めての先生も多数ご参加頂いています。

2回目以降の再受講のご参加はいつでも無料です!! (※実費はございません)

ハンズオンセミナー受講料 標準価格 39,800円

★セミナーお申し込みは先着順となります。ご希望のお日にちに沿えない場合がございます。セミナーのお申し込み・会場の確認はこちらから★



これ一つで多くの症例に対応可能!!
臨床に必要なファイルを 17本 全てを1セットに

Bassiフルキット

STEP1 穿通・道付けに

01 テーパー グライドパス

計4本
#25/#30/#35/#40
×各1本

ファイルの進入経路の拡大・確
立を行います。白歯根管のテーパ
ー平均値は0.2テーパとされて
います。01テーパのグライド
パスファイルは根管口や根管中央
部での根管壁の干渉が無く、根管
上部の予備拡大の必要がありませ
ん。

再根治療のベストアイテム

リトリートメント

計3本
#30/10・#25/08・#20/06
×各1本

3本のファイルで短時間&高効率な除去が
可能に。(クラウンダウン法)リトリート
メントファイルは硬く切削効率が高い上に
根管への追従性が高く歯質に当たると止ま
るため、歯質の除去が大幅におさえられま
す。クラウンダウン法で約45分程度で処置
が可能に。大幅なチェアタイムの短縮に貢
献します。

【セット内容】

Glidepath		Shaping	
25	25/01	25/03	25/05
30	30/01	30/03	30/05
35	35/01	35/03	35/05
40	40/01	40/03	40/05
R	30/10	25/08	20/06
		15/03	15/05

長さ表記 21/25mmの2種類



STEP2 拡大形成

03/テーパー シェイピング

#25/#30/#35/#40 ×各1本

05/テーパー シェイピング

#25/#30/#35/#40 ×各1本

計2本

グライドパスファイルを使用し根尖孔径を決定
した後は、その号数のシェイピングファイル
を1本使用して拡大形成を終了します。

狭窄根管・石灰化根管などに


グライドパス ジョーカー
#15/03 #15/05
×各1本

最も切削効率の高いファイルです。高い穿
通性を有しながら、追従性も高く、耐破折
性を併せもち、石灰化・狭窄根管を穿通し
ます。15/03 (ミニジョーカー) は根尖
部、15/05 (ジョーカー) は根管上部で
使用します。

●材質: ニッケルチタン
●認証番号: 301AKBZX00025000
17本入×1BOX 標準価格

17本入×1BOX 標準価格 各 18,000円 (税別)

おすすめ!

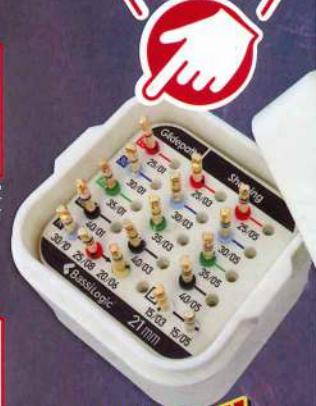

視認性抜群!!
使用順序を直感的に識別。
必要な物がすぐに補充可能。