

ファイバーポストチェッカー



- ・ファイバーポストの直径(1.0・1.2・1.4・1.6)のうち、どのサイズが最も適しているかを検討するためのインスツルメントです。
- ・3mm毎の目盛りが付与されていることで、築造窩洞の深さを確実に把握することができ、ファイバーポストの長さを定めることが可能です。
- ・ファイバーポストでの試適が不要となり、唾液等による汚染が避けられます。



φ1.0mm

φ1.4mm



1.0-1.2

コード No.08081
標準価格 4,400円

1.4-1.6

コード No.08082
標準価格 4,400円

φ1.2mm

φ1.6mm

【試適前】




【φ1.0のファイバーポストチェッカーで試適】



- ・ガッタパーチャが充填されている上部＝ファイバーポストの窩底部となる箇所とインスツルメントに隙間がない事をご確認ください。
- ・根管の形状が原因で隙間ができてしまう場合は、別のサイズのチェッカーで"試適"してください。

※本来はファイバーポスト本体で試適を行う為、当該品で行う同じ行為をここでは"試適"と表現しております。

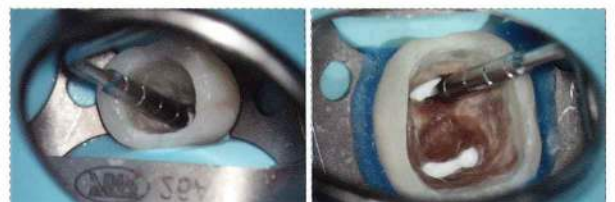

写真提供：渥美 克幸 先生（デンタルクリニックK 院長）

【ファイバーポストチェッカー サイズ表】




最先端径 (A)	テーパー距離 (B)	径 (C)
φ0.3mm	2mm	φ1.0mm
φ0.5mm	2mm	φ1.2mm
φ0.7mm	2mm	φ1.4mm
φ0.9mm	2mm	φ1.6mm

※目盛りは3mm毎に付与されています。

ファイバーカッター タイプ2



・グラスファイバーポストを切りたい長さに、簡単にカットできます。

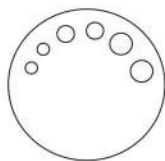

穴径 (mm)
 φ0.8
 φ1.05
 φ1.25
 φ1.5
 φ1.65
 φ2.1



・カットしたグラスファイバーポストはホルダーに入るため、飛び散りません。
 ・目盛りで切りたい長さを確認しながらカットできます。
 (範囲/5mm~15mm)

コード No.08071
 標準価格 16,000円

※ホルダー/材質 TPX 耐熱温度160℃



ファイバーカッター
タイプ2
での切断



ラウンドバー
での切断



カッティングディスク
での切断



ニッパー
での切断

写真提供：坪田 有史 先生 (坪田デンタルクリニック・鶴見大学歯学部臨床教授)

根管充填ピンセット



ロック付 コード No.11316
 標準価格 6,800円

医療機器届出番号 11B1X1000636D103 一般的名称 歯科治療用ピンセット 販売名 根管充填ピンセット

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
 ※掲載製品の標準価格は、2025年10月21日現在のものです。 ※標準価格に消費税は含まれておりません。

製造販売元 **株式会社YDM**

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

問 合 先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991
<http://www.ydm.co.jp/> E-mail ydm@ydm.co.jp

発売 **株式会社モリタ**

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525

東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161
<http://www.dental-plaza.com/>