

KATANA® ジルコニア MLシリーズ2枚パック お買い得キャンペーン

期間 2025年 11月 21日 ~ 12月 19日 数量限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、『**カタナジルコニア カタナジルコニア MLシリーズ2枚パックお買い得キャンペーン**』を企画いたしました。
カタナジルコニア14mmまたは18mmまたは22mmのサイズでシェードを限定し、
同一商品を2枚セットにして、期間中 **特別価格** にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。



カタナ ジルコニア
YML
(A1/A2/A3/A3.5)

14mm 標準価格 36,000円 × 2枚
特別価格にてご提供!

18mm 標準価格 38,000円 × 2枚
特別価格にてご提供!

22mm 標準価格 43,000円 × 2枚
特別価格にてご提供!



カタナ ジルコニア
HTML PLUS
(A1/A2/A3/A3.5)

14mm 標準価格 36,000円 × 2枚
特別価格にてご提供!

18mm 標準価格 38,000円 × 2枚
特別価格にてご提供!

22mm 標準価格 43,000円 × 2枚
特別価格にてご提供!



カタナ ジルコニア
STML
(A1/A2/A3/A3.5)

14mm 標準価格 36,000円 × 2枚
特別価格にてご提供!

18mm 標準価格 38,000円 × 2枚
特別価格にてご提供!

22mm 標準価格 43,000円 × 2枚
特別価格にてご提供!



カタナ ジルコニア
UTML
(A1/A2/A3/A3.5)

14mm 標準価格 36,000円 × 2枚
特別価格にてご提供!

18mm 標準価格 38,000円 × 2枚
特別価格にてご提供!

特別価格のお問合せについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

〔KATANA〕、〔カタナ〕はノリタケ株式会社の登録商標です。
販売名 ノリタケ カタナ® ジルコニア 一般名称 歯科切削加工用セラミックス 医療機器認証番号 223AFBZX001R5000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ) 製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社 新潟県胎内市倉敷町2-28
●クラレノリタケデンタル製品の商標、ロゴマークはクラレノリタケデンタルもしくはその親会社である株式会社クラレに帰属します。●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2024年9月24日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社
新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販 売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)
<歯科医療従事者様専用>
www.dental-plaza.com


歯科切削加工用セラミックス
ノリタケカタナ®ジルコニア



KATANA® Zirconia ノリタケ カタナ ジルコニア マルチレイヤー

フルクラウン用ジルコニア


YML イットリア マルチ レイヤー
Yttria Multi Layered

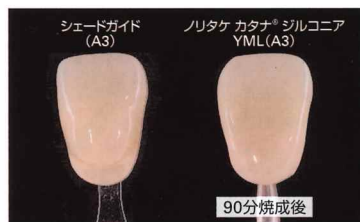


短時間焼成でも、安定した色調が得られます。

優れた機械的特性と透光性を融合

「ノリタケ カタナ® ジルコニア」のYMLは、異なる色調、透光性、機械的強度を有する原料を積層したジルコニアディスクです。独自に開発したジルコニア原料と製造方法に更なる改良を加えることで、シームレスなグラデーションと共に、優れた機械的特性と透光性を融合させました。

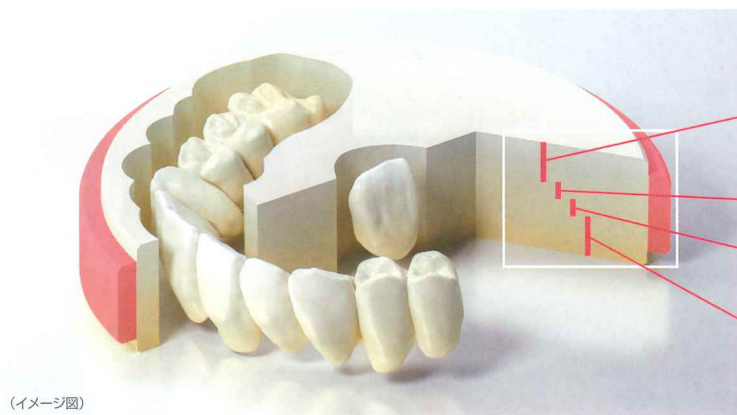

(イメージ図)

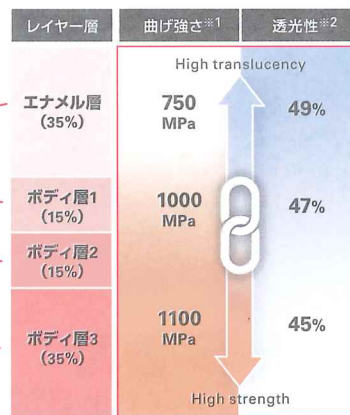

測定条件：無着色ジルコニア（原材料）を使用
※1 ISO6872：2015準拠（3点曲げ試験）、試験片サイズ：3×4×40mm
※2 全光線透過率、光源：D65、試験片厚み：1.0mm
クラレノリタケデンタル（株）測定
条件により数値は異なります。

()内%はディスクに占める各レイヤー層の厚み割合

高い適合精度

独自に開発したジルコニア原料と成形技術、高い品質管理により、焼成収縮による変形を抑制しています。これらの技術により、ロングスパンブリッジにおいて高い適合精度を達成しました。



少量の陶材、ステインで仕上げ可能

透光性の高いエナメル層と明るく生命感のあるボディ層とが、境目のないシームレスなグラデーションとなっているため、ステインやグレーズ、または少量の陶材のみで仕上げることができます。

フルジルコニアクラウン ノリタケ カタナ® ジルコニア YML (A1) 使用



1. 支台歯形成後



2. ステイン®塗布 ※セラビアン®ZR FCペーストステイン



3. 完成



4. 口腔内装着

フルクラウン用ジルコニア

HTML PLUS/STML/UTML シリーズ



4層からなるレイヤー構造



HTML PLUS ハイ トランスルーセント マルチ レイヤー

High Translucent Multi Layered 高い機械的特性を有するグラデーションディスクでロングスパンブリッジにも対応可能です。

■色調設定

スタンダードシェード

透光性
全層にわたりバランスのとれた透光性と遮蔽性

色調
シェードガイド®の色調



レイヤー各層の色調・透光性 (イメージ図)

スタンダードシェード

NW	A1	A2	A3
A3.5	A4		
B1	B2	B3	
C1	C2	C3	
D2	D3		

※NW:ノリタケシェードガイド、その他:VITAクラシカルシェードガイド

STML スーパー トランスルーセント マルチ レイヤー

Super Translucent Multi Layered 色調のみならず透光性のグラデーションを有し、臨床における様々な色調の支台歯に対し安定した色調表現が可能です。

■色調設定

スタンダードシェード

透光性
切縁部から歯頸部にかけて透光性のグラデーション (歯頸部に遮蔽性を付与)

色調
シェードガイド®の色調



レイヤー各層の色調・透光性 (イメージ図)

スタンダードシェード

NW	A1	A2	A3
A3.5	A4		

※NW:ノリタケシェードガイド、その他:VITAクラシカルシェードガイド

UTML ウルトラ トランスルーセント マルチ レイヤー

Ultra Translucent Multi Layered 色調設定の異なる、「スタンダードシェード」、「エナメルシェード」の2種類から選択いただけます。「エナメルシェード」は、切端から中央部(①部分)の彩度が抑えられており、ステインによる多彩な表現を目的としたタイプです。

■色調設定

スタンダードシェード

透光性
全層にわたり高い透光性

色調
シェードガイド®の色調

エナメルシェード

透光性
全層にわたり高い透光性

色調
切端から中央 (①部分) の彩度を抑えた色調

スタンダードシェード

A1	A2	A3	A3.5	A4
----	----	----	------	----

エナメルシェード

ENW	EA1
-----	-----

※VITAクラシカルシェードガイド

レイヤー各層の色調・透光性 (イメージ図)

商品構成



シリーズ	色 調										形 状							
											直径	φ 98.5mm						
YML	NW A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D2 D3										厚み	10mm	14mm	18mm	22mm	26mm		
HTML PLUS	NW A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D2 D3										標準価格	36,000円	38,000円	43,000円				
												202270653	202270654	202270655				
	36,000円	38,000円	43,000円															
						202270649	202270650	202270651										
STML	NW A1 A2 A3 A3.5 A4											標準価格	36,000円	38,000円	43,000円			
													202270636	202270637	202270638			
	36,000円	38,000円	43,000円															
						202270646	202270647											
UTML	A1 A2 A3 A3.5 A4 ENW EA1												標準価格	36,000円	38,000円			
											202270620~ 202270622			202270623~ 202270625	202270626~ 202270628	202270629~ 202270631	202270632~ 202270634	
HT	HT10 HT12 HT13										標準価格			28,000円	32,000円	35,000円	38,000円	42,000円
														202270620~ 202270622	202270623~ 202270625	202270626~ 202270628	202270629~ 202270631	202270632~ 202270634

関連製品

ジルコニア用シンタリングファーン

ノリタケ カタナ F-2 N

短時間焼成に対応したジルコニア用シンタリングファーン




単冠～3本ブリッジ約90分～の焼成を実現
熱衝撃に強い短時間焼成用のファイバー製サ
ヤを採用しました。



常時最高1600℃で使用可能
常時最高1600℃の高温で使用可能なMoSi2
ヒーターと熱電対を採用。



ロングスパンブリッジの焼成が可能
ロングスパンブリッジの収納が可能な内径
φ96mmの焼成サヤを採用しています。

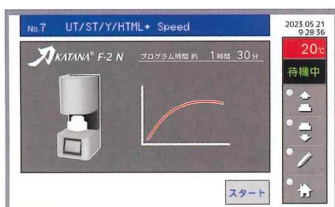

焼成完了予測時間の表示

その他の機能

- ・昇降時のステージ位置の設定が可能
- ・アイドルプログラムの設定が可能



ノリタケ カタナ プログラム

プリセットされた「ノリタケ カタナ ジルコニア」シ
リーズの焼成プログラム
No.6、7に短時間焼成プログラムがインストールされ
ています。



ユーザープログラム

最大180プログラムまで設定が可能です。また、
ユーザープログラムでは最大20ステップの入
力ができます。



電源電圧:200V 単相20A以上
消費電力:2300VA
本体寸法:W340×D390×H780mm
本体質量:約62kg
炉内寸法:φ110×H85mm
ヒーター:MoSi2ヒーター4本
最高使用温度:1600℃
プログラム数:200プログラム
ステップ数:最大20(ユーザープログラム)
付属品:上部ケーシング×1、下部ケーシング×1、
セラミック製サヤ×2、
セラミック製サヤフタ×1、
ファイバー製サヤ×1、
ファイバー製サヤフタ×1

標準価格:1,698,000円 202270444

※別売品

カタナ ジルコニアピース(1kg)
70,000円 202270510
カタナ シンタリングプレートⅡ
25,000円 202270514

販売 株式会社モリタ 大阪本社:大阪府吹田市垂水町3-33-18 ☎564-8650 T 06.6380 2525 東京本社 東京都台東区上野2-11-15 ☎110-8513 T 03.3834 6161 お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020 (フリーコール)
製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社
製造販売 SKメディカル電子株式会社 滋賀県長浜市七条町305-1

販売名:ノリタケ カタナ F-2 N 一般的名称:歯科技工用ポーセレン焼成炉 機器の分類:一般医療機器(クラスⅠ) 医療機器届出番号:25B2X10003000014
販売名:ノリタケ カタナ ジルコニア 一般的名称:歯科技工用セラミックス 機器の分類:管理医療機器(クラスⅡ) 医療機器認証番号:223AFBZX00185000
販売名:セラビアンZR 一般的名称:歯科用陶材 機器の分類:管理医療機器(クラスⅡ) 医療機器認証番号:223AFBZX00161000

「KATANA」、「カタナ」及び「セラビアン」はノリタケ株式会社の登録商標です。

www.dental-plaza.com