
NEW
ARRIVAL

歯間IPR用 **新形状!!** ストリップスファイルのご紹介

●一般医療機器届出番号:11B2X10061000041




オート
クレープ
OK



IPRとは

ディスクング・ストリッピング・スライスとも言います。

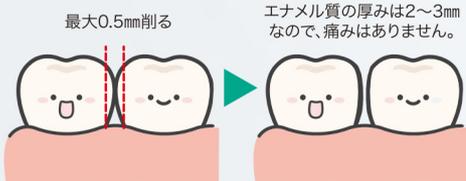


歯のエナメル質を削って、歯を動かすスペースを作り、矯正装置を付けて歯を動かしていくことで歯並びを整えていきます。

IPR…主に歯を並べるスペースを確保することを目的に、歯と歯の間(隣接部)をやすり掛けする治療行程。インビザラインに限らず、マウスピース矯正・ワイヤー矯正でも行われる一般的な矯正治療法の一つ。

ストリップスの効率よい使用方法を考慮し、従来の形状より両端を楕円状にし、粗さを表示することにより視認性・使用性の向上を実現しました。ダイヤモンド粒子をコーティングし、オートクレープにも対応。複数回使用できるコストパフォーマンスにも優れた商品です。

中央部はコーティングを施してありません。この部分を歯間に入れご使用ください。ノコギリ歯が付いているので歯間部への挿入もスムーズに行えます。

	CORCE コース	片面仕様/S-C 厚さ0.15~0.165 両面仕様/D-C 厚さ0.18~0.19
	MEDIUM ミディアム	片面仕様/S-M 厚さ0.15 ~0.17 両面仕様/D-M 厚さ0.165~0.175
	FINE ファイン	片面仕様/S-F 厚さ0.10~0.13 両面仕様/D-F 厚さ0.15~0.16
	EXTRA FINE エクストラ ファイン	片面仕様/S-EF 厚さ0.10 ~0.13 両面仕様/D-EF 厚さ0.125~0.135

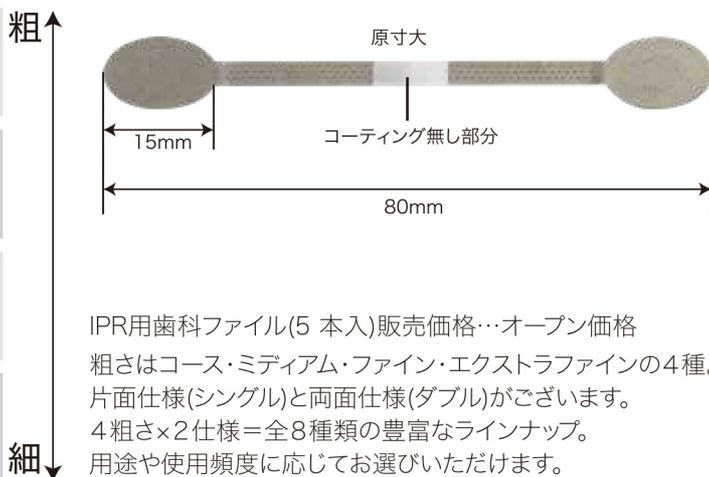

IPR用歯科ファイル(5 本入)販売価格…オープン価格
粗さはコース・ミディアム・ファイン・エクストラファインの4種。
片面仕様(シングル)と両面仕様(ダブル)がございます。
4粗さ×2仕様=全8種類の豊富なラインナップ。
用途や使用頻度に応じてお選びいただけます。

単位:mm