

アメリカンイーグル 診査／歯周治療用

ハンドインstrument

GC



Since 1921
100 years of Quality in Dental



American Eagle
INSTRUMENTS®



エックスピーツ

XP2シリーズでSRPをもっと軽やかに

シャープニングフリー


正しいブレード形状を維持できるため、変形によるリスクを最小限に抑えられます。さらに、器材メンテナンスの時間が短縮されることで、術者の負担軽減と診療の効率化にもつながります。

効率よく
SRPが行える


術者と
患者さんの
負担軽減

切れ味が持続する

刃部の仕上がりが滑らかで、刃こぼれが起こりにくくなっています。余分な側方圧をかけずに操作でき、術者の手指への負担と患者さんの不快感を軽減します。

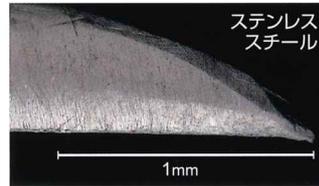

ステンレス
スチール

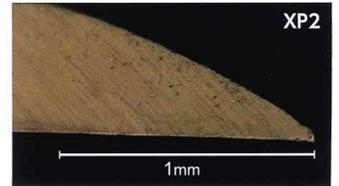

XP2

あなたにぴったりのパートナーを選択できる

	ステンレススチール	XP2	XP2 ProThin
材質	<p>タロン タフ TALON TOUGH</p> <p>「硬く鋭い鷲の爪」の意味を持つ、熱処理とアイステンパリングを施した特殊なステンレス合金です。シャープな切れ味が持続し、高い耐久性と耐蝕性を備えています。</p> <p>シャープニングが必要</p>	<p>XP2シリーズ</p> <p>スクエアード テクノロジー SQUARED Technology (研磨技術)とプラズマフュージョン (特殊加工)により、滑らかで耐久性が高く、シャープニング直後のような切れ味が持続します。</p> <p>シャープニングフリー ※XP2シリーズはシャープニングを行うことができません。</p>	<p>XP2 ProThin</p>
ブレード幅		<p>10%減</p>	<p>10%減</p>
ハンドル	<p>S 1/4インチ Sハンドル</p> <p>L 5/16インチ Lハンドル</p> <p>3/8インチ Xハンドル* (イーグルライト)</p>	<p>3/8インチ Xハンドル* (イーグルライト)</p>	<p>3/8インチ Xハンドル* (イーグルライト ProThin タイプ)</p>
おすすめの 使用場面	<p>多量に付着した歯石や 硬い歯石の除去に</p>	<p>超音波スケーラー後の 仕上げやSRPに</p>	<p>SPTやメンテナンス時の 少量の歯石の除去に</p>

* Xハンドルは形態別に色調が決まっています。

3つの形状

グレーシーキュレット (G)

スタンダード

グレーシアクセス (GA)

深い歯周ポケットや狭い根面・根分岐部に

グレーシーキュレットより第一シャングが3mm長く、ブレード長が半分

グレーシードープポケット (DP)

5mm以上の深い歯周ポケットや根面に

グレーシーキュレットより第一シャングが3mm長く、ブレード長は同じ

開口量が少ないケースには

G11-12

G15-16

グレーシーキュレット G11-12・G13-14のシャングの角度を強くし、開口量が少なく挿入が制限されてしまう臼歯部でも操作がしやすいG15-16・G17-18をラインナップしています。

グレーシーキュレット

包装・希望医院価格●

ステンレススチール **S** **L** 1本=¥4,250
(X) 1本=¥4,890
 XP2 **(X)** 1本=¥7,900

歯周用キュレット グレーシー キュレット
 一般医療機器 13B1X00155000071
 歯周用キュレット XP2 グレーシー キュレット
 一般医療機器 13B1X00155000321

〈製品コード〉

ブレードタイプ	ステンレススチール			XP2
	S	L	(X)	(X)
G1-2	70009634	70009623	70010360	70017852
G3-4	-	70009624	70010361	70017853
G5-6	70009636	70009625	70010362	70017854
G7-8	-	70009626	70010363	70017855
G9-10	70009638	70009627	70010364	70017856
G11-12	-	70009628	70010365	70017857
G13-14	70009641	70009630	70010366	70017858
G15-16	70009642	70009631	70010367	70017859
G17-18	70009644	70009633	70010368	70017860



G1-2 [前歯部]

ステンレススチール XP2

[S L X] [(X)]



G3-4 [前歯部]

[- L X] [(X)]



G5-6 [前歯部]

[S L X] [(X)]



G7-8 [臼歯部]

[- L X] [(X)]



G9-10 [臼歯部]

[S L X] [(X)]



G11-12 [臼歯部 (近心)]

[- L X] [(X)]



G13-14 [臼歯部 (遠心)]

[S L X] [(X)]



G15-16 [臼歯部 (近心)]

[S L X] [(X)]



G17-18 [臼歯部 (遠心)]

[S L X] [(X)]

グレイシーアクセス

包装・希望医院価格●

ステンレススチール **S** **L** 1本=¥4,250

X 1本=¥4,890

XP2 **X** 1本=¥7,900

XP2 ProThin **X** 1本=¥7,900

歯周用キュレット グレイシー アクセス
一般医療機器 13B1X00155000073

歯周用キュレット XP2 グレイシー アクセス
一般医療機器 13B1X00155000319

〈製品コード〉

ブレードタイプ	ステンレススチール			XP2	XP2 ProThin
ハンドルタイプ	S	L	X	X	X (XP2 ProThin タイプ)
GA00-0	70009653	70009645	70010369	70017863	-
GA1-2	-	70009646	70010370	70017864	70017871
GA3-4	70009655	70009647	70010371	70017865	-
GA5-6	70009656	70009648	70010372	70017866	-
GA7-8	70009657	70009649	70010373	70017867	70017872
GA11-12	-	70009650	70010374	70017868	-
GA13-14	70009659	70009651	70010375	70017869	70017873
GA15-16	-	70009652	70010376	70017870	70017874

ステンレススチール **XP2** **XP2 ProThin**



GA00-0 [前歯部]

[**S** **L** **X**] [**X**] [-]



GA1-2 [前歯部]

[- **L** **X**] [**X**] [**X**]



GA3-4 [前歯部]

[**S** **L** **X**] [**X**] [-]



GA5-6 [前歯部]

[**S** **L** **X**] [**X**] [-]



GA7-8 [臼歯部]

[**S** **L** **X**] [**X**] [**X**]



GA11-12 [臼歯部 (近心)]

[- **L** **X**] [**X**] [-]




GA13-14 [臼歯部 (遠心)]

[**S** **L** **X**] [**X**] [**X**]



GA15-16 [臼歯部 (近心)]

[- **L** **X**] [**X**] [**X**]

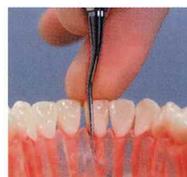

GA00-0

小さなブレードとまっすぐな第一シャンクにより、深く狭い下顎前歯部根面や、垂直性の歯周ポケットでも操作しやすくなっています。

グレイシーディープポケット

包装・希望医院価格●

ステンレススチール **S** **L** 1本=¥4,250
X 1本=¥4,890
 XP2 **X** 1本=¥7,900

歯周用キュレット グレイシー ディープポケット
 一般医療機器 13B1X00155000072
 歯周用キュレット XP2 グレイシー ディープポケット
 一般医療機器 13B1X001550000320

〈製品コード〉

ブレードタイプ	ステンレススチール			XP2
	S	L	X	
ハンドルタイプ				
G1-2DP	-	70009661	70010377	70017875
G3-4DP	70009669	70009662	-	70017876
G5-6DP	70009670	70009663	70010379	70017877
G7-8DP	70009671	70009664	70010380	70017878
G11-12DP	70009672	70009665	70010381	70017879
G13-14DP	-	70009666	70010382	70017880
G15-16DP	70009674	70009667	70010383	70017881



G1-2DP [前歯部]

ステンレススチール XP2

[- L X] [X]



G3-4DP [前歯部]

[S L -] [X]



G5-6DP [前歯部]

[S L X] [X]



G7-8DP [臼歯部]

[S L X] [X]



G11-12DP [臼歯部 (近心)]

[S L X] [X]



G13-14DP [臼歯部 (遠心)]

[- L X] [X]



G15-16DP [臼歯部 (近心)]

[S L X] [X]



American Eagle
 INSTRUMENTS®

シックルスケーラー

包装・希望医院価格●

- ステンレススチール **L** 1本=¥4,250
- X** 1本=¥4,890
- XP2 **X** 1本=¥7,900
- XP2 ProThin **X** 1本=¥7,900

歯科用スケーラ スケーラー
一般医療機器 13B1X00155000070
歯科用スケーラ XP2 スケーラー
一般医療機器 13B1X00155000318

〈製品コード〉

ブレードタイプ	ステンレススチール		XP2	XP2 ProThin
ハンドルタイプ	L	X	X	X (XP2 ProThin タイプ)
H5-33	70009683	70010384	70017896	-
H6-7	70009684	70010385	70017897	-
J4-U5	70009690	70010386	70017898	-
M23	-	70010792	70017899	70017900
ブラックジャック	-	-	70017895	70017901
204S	-	-	70017884	-
204SD	-	-	70017885	-

ステンレススチール XP2 XP2 ProThin



H5-33 [前歯部]

[L X] [X] [-]



H6-7 [前歯部]

[L X] [X] [-]



J4-U5 [前歯部]

[L X] [X] [-]



M23 [全顎]

[- X] [X] [X]



ブラックジャック [全顎]

[-] [X] [X]



204S [臼歯部]

[-] [X] [-]



204SD [臼歯部(遠心)]

[-] [X] [-]



XP2 XP2 ProThin

M23

全顎の歯肉線～線下3mm以下の歯石除去や、チェック用として使用できるマルチタイプのスケーラーです。XP2 ProThinは、XP2よりブレードが細いので、狭窄した歯間部や歯肉溝などに挿入しやすくなっています。



H6-7との比較

ブラックジャック

適度な彎曲と角度があり、叢生部位の歯間部や臼歯部隣接面など、幅広く使用可能です。



204S 204SD

204S / 204SD

204SDは、204Sより第一ジャンクが長いので、臼歯部遠心にアクセスしやすくなっています。

チタンインスツルメント

日本オリジナルの薄いブレード設計

チタンアバットメントを傷つけにくいチタンブレードです。

※チタンインスツルメントはシャープニングを行うことができません。

包装・希望医院価格●1本=¥6,790

※ハンドルは、Xハンドル(イーグルライト)のみです。

歯科用スケーラ チタンインスツルメント
一般医療機器 13B1X00155000264



ネブラスカ ランガー N128-L5 [前歯部]



バーンハルト B5-6 [臼歯部]



ランガー L3-4 [臼歯部]



204S [臼歯部]

ファイル ハーシュフェルト

大きな塊となった歯石や硬い歯石を細かく砕く

滑沢になった歯石を粗造化することもできます。

包装・希望医院価格●1本=¥5,100

※ハンドルは、Sハンドルのみです。

歯科用スケーラ ファイル ハーシュフェルト
一般医療機器 13B1X00155000112



H3-7 [頬舌・唇舌面用]



H5-11 [近遠心用]

ファイルタイプ



H3-7



H5-11

側方圧を加えながら、引くストロークで操作します。

プローブ

包装・希望医院価格●1本=¥3,810

歯周ポケットプローブ プローブ
一般医療機器 13B1X00155000049



(ブラック)WHOB



(ブラック)12B



(イエロー)12Y



(ブラック)N2B

エキスプローラー

包装・希望医院価格●

3 1本=¥2,290

17-3 1本=¥2,640

(両頭) 11-12/ (両頭) 11-12DP 1本=¥2,970

歯科用探針 エクスプローラー
一般医療機器 13B1X00155000046



3



17-3




(両頭) 11-12



(両頭) 11-12DP

歯周治療に
おすすめ

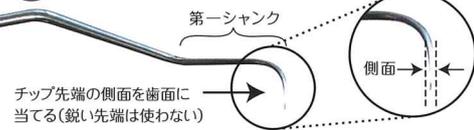

チップ先端の側面を歯面に
当てる(鋭い先端は使わない)

11-12

G11-12と同じ形態で、1本で全頭の根面全体を探知できるので、根面の
歯石探知やチェックにおすすめです。Xハンドルのため軽く、触知した感覚
が伝わりやすい設計になっています。

関連製品




テストスティック

包装・希望医院価格●

1本入=¥720

6本入=¥3,520

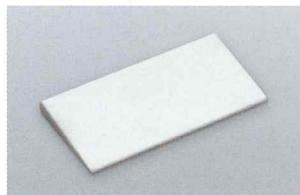

シャープニングストーン

包装・希望医院価格●

1函:1個=¥17,750

※オートクレーブ滅菌(140℃以下)、薬液消毒可能
※XP2シリーズ・チタンインスツルメントはシャープニング
不要



インスツルメントカセット10本用

種類●分割式、蝶番式


包装・希望医院価格●1函:1個=¥8,000

※製品にインスツルメントは含まれておりません。

別売

インスツルメントカセット10本用 交換用ラバー

包装・希望医院価格●1セット:6個=¥990

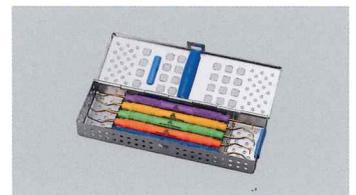

AEインスツルメント用カセット

包装・希望医院価格●

1函:1個=¥11,300

※インスツルメントを5本収納できます。
※製品にインスツルメントは含まれておりません。

インスツルメントは、刃部の損傷や破折を防ぐため、カセットに入れて洗浄(超音波・
ウォッシャーディスインフェクター)、滅菌を行ってください。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

※掲載情報は2026年2月現在のものです。
※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。
※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区連沼町76番1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)785-8040 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも



どちらもコチラのQRでOK!

ジーシー
公式アプリ

