

Products Catalog



3D PRINTER



ARTIFICIAL TOOTH



MILK TOOTH



CARIES HUNTER



TITANIUM DISK



TRIMMER DISK

会社概要

- ・ 会 社 名 株式会社 DentalBank
- ・ 代 表 者 門田 恭典
- ・ 所 在 地 【本 社】
〒156-0904 福岡県大野城市大池 2-26-1
TEL. 092-513-3280 FAX. 092-513-3281
【東京支社】
〒156-0045 東京都世田谷区桜上水 2-8-10
- ・ 資 本 金 950 万円
- ・ 設 立 2012 年 12 月
- ・ 従 業 員 数 10 名 (2026 年 2 月現在)
- ・ 取 引 銀 行 福岡銀行
- ・ 所 属 組 合 日本歯科材料工業共同組合
- ・ 取得業許可等
 - ・ 第 1 種医療機器製造販売業許可 ・ 医療機器製造業登録
 - ・ 高度管理医療機器等販売貸与業許可 ・ 医療機器修理業許可
 - ・ ISO13485 : 2016 認証
- ・ 事 業 内 容 医療機器製造開発業



ISO13485:2016 認証書

DB Bloomden ジルコニア シリーズ

Zirconia DISK for CAD / CAM material

歯科CAD/CAM用ジルコニア



DB Bloomdenジルコニア シリーズ

製品特長・仕様

種類	特長	曲げ強度 (MPa)	透過性 (%)	色調	厚み (mm)
3D-Pro-ML	DB Bloomdenジルコニアシリーズの中の 最上位ランク 。 5層構造 で、 高い審美性と優れた曲げ強度 を併せ持つ。	800~1200	42~49	A1 A2 A3	14 18
ST-ML	5層構造 で 優れた曲げ強度 を有し、あらゆる症例に最適。	1100	43		
UT-C	DB Bloomdenジルコニアシリーズの中で 最も高い透過性を有する ので、 審美性重視 の症例に最適。	600	49		
ST-C	単色 で、 強さと透過性のバランス がとれた リーズナブル なジルコニア。	1100	43		
SHT	無着色 なので、自由に着色が可能。フレーム作製に最適。		46		

焼成パラメータ

種類	歯数	焼結第1段階			焼結第2段階			冷却	
		昇温速度	最終温度	係留時間	昇温速度	最終温度	係留時間		
3D-Pro-ML	1~3	6°C/分	900°C	0分	5°C/分	1480°C	120分	炉内放冷	
	3~8			20分	4°C/分				
	9~14				3°C/分				
ST-C ST-ML	1~3			0分	5°C/分				1530°C
	3~8			20分	4°C/分				
	9~14				3°C/分				
SHT	1~3	0分	5°C/分	1450°C					
UT-C	1~3	20分							

焼成パラメータ(3D-Pro-ML:スピードシンタリング)

歯数	焼結第1段階			焼結第2段階			焼結第3段階			冷却
	昇温速度	最終温度	係留時間	昇温速度	最終温度	係留時間	昇温速度	最終温度	係留時間	
1~6	150°C/分	300°C	0分	100°C/分	1200°C	1分	5°C/分	1530°C	20分	800°Cまでを25分で行う
7~14		150°C		50°C/分		2分			40分	600°Cまでを77分で行う

取扱店

製造販売元  DentalBank®

株式会社DentalBank 第1種医療機器製造販売業
福岡県大野城市大池2-26-1

TEL:092-513-3280 FAX:092-513-3281

www.dentalbank.info

2026年2月

DBシンタリングペースト



製品特徴

- パテのような質感で操作性が良い
- 後処理不要で簡単除去
- シリンジタイプで必要な適量を取り出せる

製品仕様

- 内容量: 10ml
- 形状: ペースト状

価格 1,500円 (税別)

*掲載の価格と参考データは 2026年1月 現在のものです。実際のパッケージは異なる場合がございます。

ご利用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

取扱店

製造販売元

DentalBank®

株式会社 DentalBank 第1種医療機器製造販売業
福岡県大野城市大池 2-26-1

TEL: 092-513-3280 FAX: 092-513-3281 www.dentalbank.info

2026年1月

DB CAD/CAMチタン

Titanium DISK for CAD/CAM material

歯科 CAD/CAM 用チタン

For CAD/CAM use

純チタン (Gr.2)
純チタン (Gr.4)
チタン合金 (Gr.5)



歯科医師と歯科技工士のニーズから生まれた
待望の CAD/CAM 用チタンディスク

| 製品組成・機械的特性

製品仕様	製品組成					機械的特徴			
	Ti	Fe	Al	V	その他	引張り強さ	耐力	伸び	硬さ
2種(純チタン)	残部	0.3%以下	—	—	0.775%以下	345MPa以上	275MPa以上	20%以上	110HV以上
4種(純チタン)	残部	0.5%以下	—	—	0.945%以下	550MPa以上	483MPa以上	15%以上	180HV以上
5種(チタン合金)	残部	0.25%以下	5.5~6.5%	3.5~4.5%	0.672%以下	860MPa以上	795MPa以上	10%以上	250HV以上

| 他社様加工機 チタンディスク対応表


加工機販売 主要メーカー様	製品名	2種 (純チタン)	4種 (純チタン)	5種 (チタン合金)
株式会社ジオメディ	GeoMill ARUM 5X-500 / 200	○	○	○
DOF Japan	クラフト 5X	○	×	×
キャノン電子株式会社	MD-500W	○	○	○

※2024年現在、弊社調べ。なお、本対応表はあくまでも「目安」であり、加工保証をするものではありません。CAMソフトのバージョンや加工機の状態によっては対応できない場合もございます。ご使用前に、メーカー様へ必ずお問い合わせ頂きますようお願い致します。

| 価格表

販売名	直径	厚み	価格(税別)
DB CAD/CAM 純チタン 2種 指定管理医療機器 認証番号 303ALBZX00026000 DB CAD/CAM 純チタン(4種) 指定管理医療機器 認証番号 302ALBZX00012000 DB CAD/CAM チタン合金 指定管理医療機器 認証番号 303ALBZX00011000	98mm	10mm	15,000円
		12mm	16,500円
		14mm	18,000円
		16mm	19,500円
		18mm	21,000円
		20mm	22,500円
		22mm	24,000円
		24mm	25,500円
		25mm	27,000円
26mm	28,500円		

【側面】

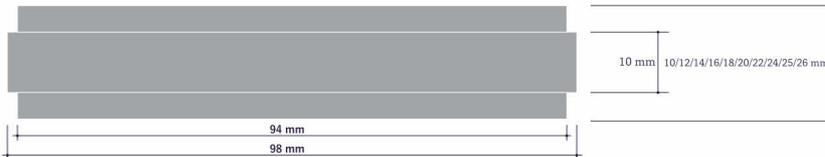

*ラインナップは予告なく変更する場合がございます。
取扱店までお問い合わせください。
*掲載の参考データは2024年11月現在のものです。

ご利用に際しては、必ず製品の添付文書をご確認ください。

DB キャストチタン2種
主な特徴

用途：溶解鑄造によって
クラウン等の製作に用いる



DBキャストチタン 2種 指定管理医療機器：303ALBZX00017000

保険適用材料としてご使用いただけます。

内容量：14g×50個入、20g×50個入、30g×34個入、40g×25個入

取扱店

製造販売元

DentalBank®

株式会社 DentalBank 第1種医療機器製造販売業
福岡県大野城市大池 2-26-1

TEL: 092-513-3280 FAX: 092-513-3281 www.dentalbank.info

2024年11月

DBキャストチタン2種

DB CAST Titanium Type2

铸造用チタン合金

クラスII 指定管理医療機器

歯科铸造用チタン合金

DBキャストチタン2種

認証番号 303ALBZX00017000

商品番号 DB000554/577/580/581/582

健康保険
適用材料



高い操作性で様々なシーンで使用可能

高い生体適合性

DBキャストチタン2種 主な特徴

用途：溶解铸造によって
クラウン等の製作に用いる



生体親和性に優れている
適合が良く、軽くて丈夫
JIS H 4650 第2種に適合

製品仕様 (JIS H 4650 適合品)	直径 (mm)	厚み (mm)	内容量	価格
	20	10	14g×50個 (700g)	価格 32,900 <small>(税別)</small> 円
	25	9.1	20g×50個 (1,000g)	価格 47,000 <small>(税別)</small> 円
	25	14	30g×34個 (1,020g)	価格 47,940 <small>(税別)</small> 円
	30	9.3	30g×34個 (1,020g)	価格 47,940 <small>(税別)</small> 円
	30	13	40g×25個 (1,000g)	価格 47,000 <small>(税別)</small> 円
形状	円柱状のインゴット			
成分・分量	チタン…残部 鉄…0.25% 酸素…0.2% 炭素…0.08% 窒素…0.03% 水素…0.013%未満 その他…0.4%未満			
物理的性質	液相点・固相点：1668°C 耐力：387MPa 伸び：29% ビッカース硬さ：150HV 密度：4.5g/cm ³ 耐変色性			

*掲載の価格と参考データは2024年10月現在のものです。実際のパッケージは異なる場合がございます。

ご利用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

取扱店

製造販売元

DentalBank®


株式会社 DentalBank 第1種医療機器製造販売業

福岡県大野城市大池 2-26-1

TEL: 092-513-3280 FAX: 092-513-3281 www.dentalbank.info

2024年10月

DB トリマーディスク

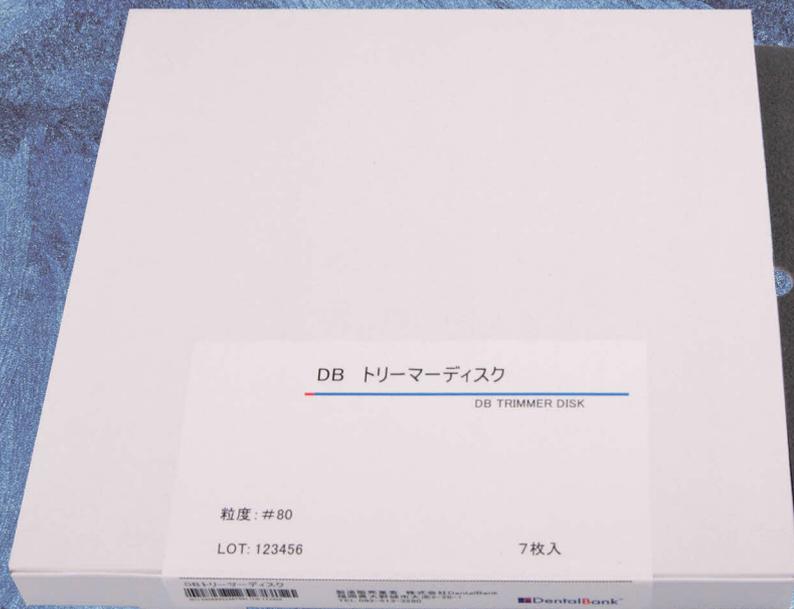

柔軟性・作業性に富み
仕上面は細かい!

裏面がマジックテープに対応しており、着脱が容易です。

製品概要

- ・砥粒：シリコンカーバイド
- ・外径： ϕ 235mm
- ・内径： ϕ 14mm
- ・粒度：#80

価格 15,000^(税別)円 ※7枚入 / 箱

- 砥粒接着方式のグルーボンドで切削能力が高く、仕上げ面は良好
- コストパフォーマンス、耐久性に優れた1枚
- 高品質の日本製でありながら低価格

取扱店

製造販売元

DentalBank®

株式会社 DentalBank 第1種医療機器製造販売業
福岡県大野城市大池 2-26-1

TEL: 092-513-3280 FAX: 092-513-3281 www.dentalbank.info

2023年9月

ハイカラ®

HI COLOR

硬質レジン歯 前歯 / 白歯

健康保険
適用材料



ハイカラ®

HI COLOR

主な特徴

- 独自の3層構造による天然歯に引けをとらない色調
- 透明性や蛍光性を適度に付与することで自然感を向上
- 基底部以外でも義歯床と化学的に接着
- 優れた色調安定性

前歯

価格 650 (税別) 円

※1背板当たり

白歯

価格 900 (税別) 円

※1背板当たり

待望の

バラ売り登場!!

TeCや部分床義歯等の修理に最適です!!

補充用

上下顎前白歯


価格 2,200 (税別) 円

※各歯20歯入

*掲載の参考データは2024年9月現在のものです。実際のパッケージは異なる場合がございます。

薄形人工歯



歯科技工士の一声から誕生した人工歯。
通常形と比較し厚みが最大約**0.7mm減**。

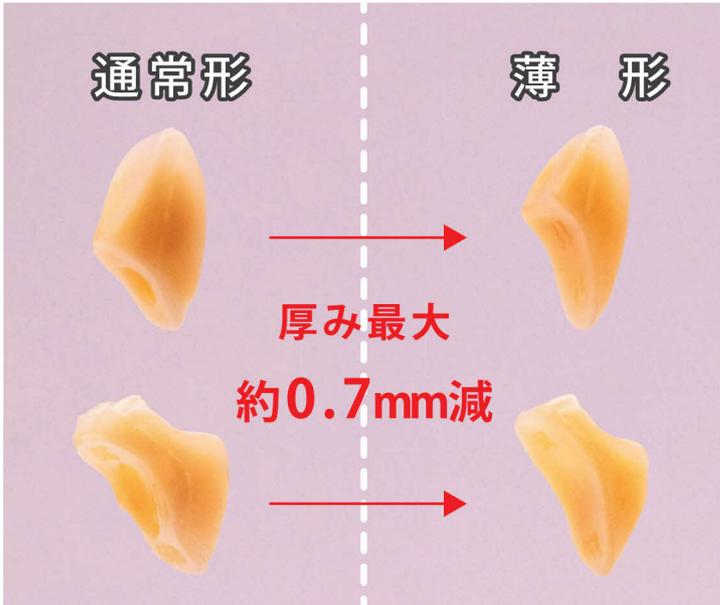

- 咬合高径の低い症例に最適
- 人工歯の基底面の調整が殆ど不要
- そのため排列時間の短縮が可能
- 義歯床と化学的に接着
- 余りが出ず、使い切りが可能で経済的



前歯

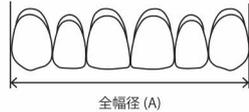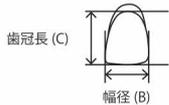

各歯
バラ売り可能!

	形態番号	全幅径(A)	中切歯幅径(B)	中切歯歯冠長(C)	色調
上顎	4NO(通常形)	44.4	8.2	11.2	A1/A2/A3 A3.5/A4/B3/C3
	4GT(薄形)	44.4	8.2	11.2	
	5NO(通常形)	47.2	8.7	11.9	
	5GT(薄形)	47.2	8.7	11.9	
下顎	4NO(通常形)	35.2	5.2	9.9	
	4GT(薄形)	35.2	5.2	9.9	
	5NO(通常形)	37.4	5.5	10.5	
	5GT(薄形)	37.4	5.5	10.5	

単位:mm

臼歯



	形態番号	片側全幅径(D)	第一小臼歯長径(E)	第一大臼歯長径(F)	第一小臼歯舌側高さ(G)	第一大臼歯舌側高さ(H)	色調
上顎	30NS(通常小形)	30.0	10.2	7.4	3.0	3.9	A1/A2/A3 A3.5/A4/B3/C3
	30GT(薄形)	30.0	9.1	7.3	2.4	2.7	
下顎	30NS(通常小形)	32.0	9.8	7.4	3.4	3.4	
	30GT(薄形)	32.0	9.6	7.3	2.3	2.5	

単位:mm

取扱店

製造販売元 **DentalBank®**

株式会社 DentalBank 第1種医療機器製造販売業
福岡県大野城市大池 2-26-1

TEL: 092-513-3280 FAX: 092-513-3281 www.dentalbank.info

2024年9月

ミルキー[®] Milky

指定管理医療機器
硬質レジン歯
認証番号 302AKBZX00041A01
商品番号 DB000555~562
DB001293~1300

硬質レジン歯 乳前歯 / 乳臼歯

新色
登場!




A0.5追加

天然歯の色調に近づけたことで
より天然な仕上がりになります。

主な特徴 ミルキー[®] Milky

- ・ 基底部以外でも義歯床と化学的に接着
- ・ 優れた色調安定性

乳前歯

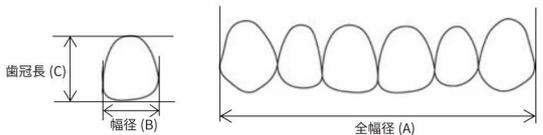


価格 1,500 (税別) 円

※1背板当たり

	形態番号	全幅径(A)	乳中切歯幅径(B)	乳中切歯歯冠長(C)	色調
上顎	1NO	39.3	7.0	7.0	A0/A0.5
下顎	1NO	29.6	3.9	6.1	

単位:mm

乳臼歯

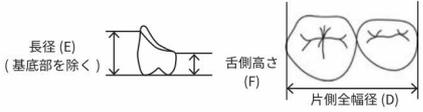

	形態番号	片側全幅径(D)	第一乳臼歯長径(E)	第一乳臼歯舌側高さ(G)	色調
上顎	1NO	16.7	4.6	2.5	A0/A0.5
下顎	1NO	19.4	5.3	2.5	

単位:mm

*掲載の参考データは2024年2月現在のものです。実際のパッケージは異なる場合がございます。

DB コバルトクラスプ線

DB Co-Cr ALLOY WIRE

健康保険
適用材料



FOR DENTURE

機械式腕時計の動力ゼンマイに使われる特殊金属材料
 高品質な合金線を義歯用ワイヤーとしてお使いいただけます

DB コバルトクラスプ線

DB Co-Cr ALLOY WIRE

主な特徴

適度な柔らかさによる高い操作性
 歯面に沿って思い通りに成型が可能

用途：歯科用鉤（クラスプ又はレスト等）の製作に用いる。

製品仕様	直径：1.0mm, 0.9mm		長さ：5m/1箱		価格 8,000 <small>（税別）</small> 円	
	コバルト	クロム	引張り強さ	耐力	伸び	溶出
JIS T 6104 基準	25%以上	15%以上	980MPa 以上	785MPa 以上	1%以上	1.0mg/ cm ² 未満
DBコバルトクラスプ線	34%以上	19%以上	1200 MPa 以上	1000 MPa 以上	10%以上	0.001 mg/ cm²以下

*掲載の価格と参考データは 2022年9月現在のものです。実際のパッケージは異なる場合がございます。
 * SII はセイコーインスツルの登録商標です。

ご利用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

取扱店

製造販売元 **DentalBank®**
 株式会社 DentalBank 第1種医療機器製造販売業
 福岡県大野城市大池 2-26-1
 TEL: 092-513-3280 FAX: 092-513-3281 www.dentalbank.info

2022年9月

DB Wax Series

DB スプルー ワックス

歯科技工士の生産性を高める
優れた操作性と広い有用性

DB スプルーワックス

主な特徴

POINT 1

操作性がよく、適度な硬さを持ち、ワックスパターンのスプルーイングに最適です。維持装置、クラウン・ブリッジ等の様々な用途でご使用可能です。

POINT 2

適度な粘着性があり、ワックスパターンにスプルーを取り付ける際に効果を発揮します。ワックスペンがなくても仮着することが可能です。

詳細



色調：ホワイト 内容量：1,000g

直径：3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm

クラスI 一般医療機器 医療機器届出番号 40B1X10014000042

価格：10,000 円（税抜）

*掲載の価格と参考データは2024年12月現在のものです。実際のパッケージは異なる場合がございます。

ご利用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

取扱店

製造販売元

DentalBank®

株式会社 DentalBank 第1種医療機器製造販売業

福岡県大野城市大池 2-26-1

TEL: 092-513-3280 FAX: 092-513-3281 www.dentalbank.info

2024年12月

4K 大容量 歯科用 3D プリンター

一般医療機器
歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
届出番号 39B2X10004000048
商品番号 DB000576

DentalBank® × phrozen

DB Phrozen 3Dプリンター 4K SONIC XL DENTAL



価格 918,000 (税別) 円

高精度と高速度の両方を兼ね備えたプリンター

ポイント

① 4K液晶パネルを採用し、繊細な造型を実現！


ポイント

② 造形時間を大幅短縮！

精度比較

2K

4K

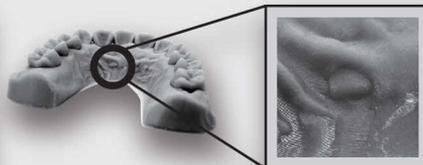

DBモデルレジンHiKaRiを使用



MAKE XL DENTAL

SONIC XL DENTAL

MAKE XL DENTAL(2K)と比べ
約1/2の時間で造形可能

※弊社指定のSTLをDBモデルレジンHiKaRiで造形、積層ピッチ50μmで造形した場合の比較


販売元

DentalBank®

株式会社 DentalBank 第1種医療機器製造販売 福岡県大野城市大池 2-26-1
TEL:092-513-3280 FAX:092-513-3281 www.dentalbank.info

2024年9月

405nmの波長で硬化するLCD方式のプリンター。 コスパに優れ、誰にでも扱いやすい**シンプル構造**。

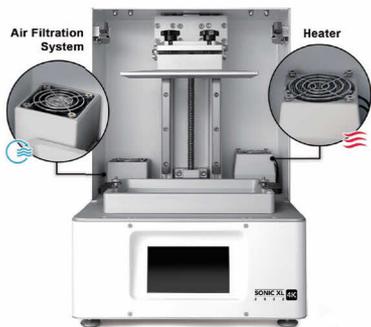

ヒーター

30°Cに設定でき、内部を一定の温度に保つことができるため、安定した造形に役立ちます。

造形後は自動でヒーターがOFFになり、スイッチの切り忘れがありません。

仕様

光源	源：405nm ParaLED®3.0 Module	プリント速度	：90mm/hr(最大)
積層方式	：9.3インチ 4K Mono-LCD	本体寸法	：約W330 x D290 x H470mm
プリント領域	：W200 x D125 x H200mm	電気的定格	：AC100~240V/180W
解像度	：XY軸 52μm, Z軸 10μm(最小)		

専用アクセサリー

※本体ご購入時、レジンバットとプラットホームは1つずつ付属します。

プラットホーム

価格：25,000円



造形物を定着させる部品です。
定着が悪くなった時、プレート部の変形等があった場合は交換してください。
予備として持つと便利です！

レジンバット

価格：28,000円



複数のレジンをご使用の場合はレジンごとに持つと便利です。
異なるレジンを使用する場合に、入れ替え作業の手間が軽減されます。

サポート

導入後も安心の保守センドバック方式

故障した製品は弊社にご連絡・発送いただくと同時に、代替品をお客様のもとへお届けいたします。

※事前に故障の状況をお伺いし、状況によっては代替機が不要な場合もございます。

技術者の訪問も不要、設置操作も簡単なのでスムーズに装置をご使用いただけます。

お客様の故意または過失による故障は別途費用を御請求させていただきます。

正しい設置で安心の作動を！！

初期設置費：ご購入エリアにより異なります。エリア区分をご確認ください。(交通費・簡易操作案内を含みます。)

エリア区分	価格(税別)	該当都道府県
エリアA	200,000円	北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 新潟県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県
エリアB	150,000円	滋賀県 京都府 大阪府 三重県 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

※価格は希望医院価格です(価格には消費税が含まれておりません)

取扱店

販売元 **DentalBank®**

株式会社 DentalBank 第1種医療機器製造販売業

福岡県大野城市大池 2-26-1

TEL:092-513-3280 FAX:092-513-3281 www.dentalbank.info

2024年9月

3D プリンター用光硬化レジン

405nm LCD方式 3Dプリンターに対応



DBモデルレジンHiKaRi

色調：白色 / 灰色

届出番号：40B1X10014000031



DBトレーレジンHiKaRi

色調：淡黄色

届出番号：40B1X10014000030

DBキャストブルレジンHiKaRi Neo

色調：青色

届出番号：40B1X10014000041



DBキャストブルレジンHiKaRi

色調：赤色

届出番号：40B1X10014000034



製品名	特徴	価格（税抜）
・ DB モデルレジン HiKaRi	ホワイト、グレーの2色があり、用途に応じて使い分けができる。	29,000円
・ DB キャスタブルレジン HiKaRi Neo	クラウン、ブリッジなどのワックスパターンの作製に最適で、クリストバライト埋没材に対応。	52,000円
・ DB キャスタブルレジン HiKaRi	陶材焼付鑄造冠、鑄造床などのワックスパターンの作製に最適なリン酸塩系埋没材に対応。	46,000円
・ DB トレーレジン HiKaRi	生体安全性（細胞毒性試験、粘膜刺激性試験、感作性試験、ISO10993-5,ISO10993-11）に適合している。	36,000円

DB Active

DBアクティヴ



スプレータイプ 50ml

詰替ボトル 500ml

価格 800 (税別) 円

価格 4,500 (税別) 円

Active Point

- ・ 技工士さんの声を聞いて開発
- ・ キレの良い界面活性剤
- ・ お得な詰め替え用もあります

対応パターン

- ・ 3Dプリント後パターン
- ・ WAXパターン

取扱店

製造販売元

DentalBank®


株式会社 DentalBank 第1種医療機器製造販売業
福岡県大野城市大池 2-26-1

TEL: 092-513-3280 FAX: 092-513-3281 www.dentalbankinfo

2022年9月

Composite resin Warmer コンポジットレジンウォーマー

一般医療機器 届出番号 40B1X10014000037

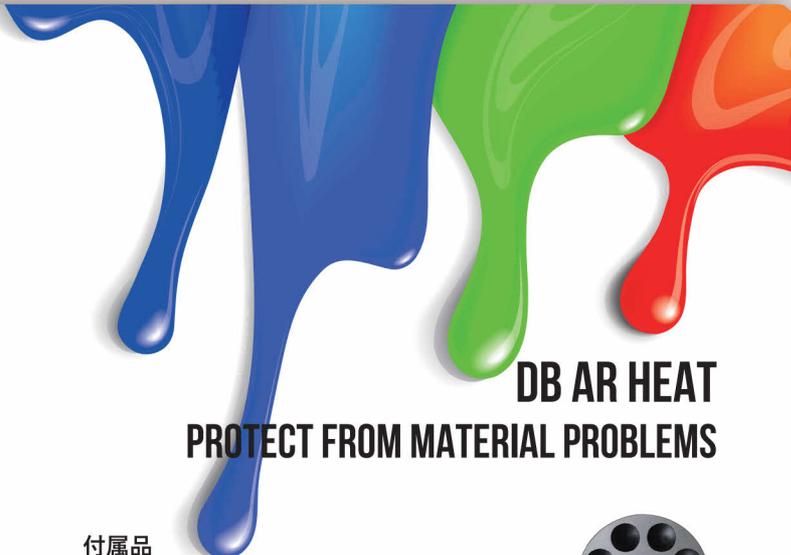

DB AR HEAT PROTECT FROM MATERIAL PROBLEMS

付属品
・本体 ・ACアダプタ ・取扱説明書
電氣的定格
Input: 100-240V AC 50/60Hz
Output: 12V DC 2A
消費電力: 24W
温度設定: 40 ± 1°C, 50 ± 1°C, 70 ± 1°C



DB AR HEAT は、コンポジットレジン[®]を最適な温度に管理しレジンの性質を最大限に引き出します。

価格 **39,000** (税別) 円

コンポジットレジン保温のメリット

加熱によりレジンの操作性が向上する。特に室温が低い場合に顕著。

温度によりレジンの機械的性質が向上する。

“ レジンペーストの保管温度条件が曲げ強さおよび曲げ弾性率に及ぼす影響は、供試したいずれの製品においても5°C冷蔵庫保管と比較して23°C室温保管および45°C加温条件で有意に高い値を示した。 ”

陸田明智 日歯保存誌 57(3):279 頁, 2014 「コンポジットレジンペーストの保管温度条件がその機械的性質に及ぼす影響」




同時 8 本搭載可能で作業効率UP



レジンの性質に合わせて温度設定が可能
見やすい温度設定表示ライト

クイックスタートで設定温度に

早いスタートでチェアサイドでも活躍

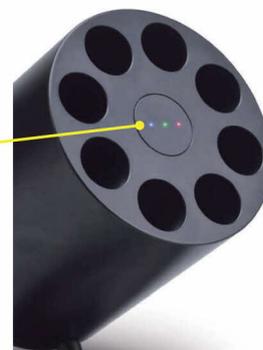

- ソニッククリーン -

Soniclean

ポータブル超音波洗浄器

超音波クリーナー

商品番号: DB001469

- 義歯やマウスピースの清掃に最適
- デンチャープラークの増殖を抑える
- 口内炎や誤嚥性肺炎のリスクを低減



患者様参考価格：12,000円（税別）

ブラシによる清掃よりも簡便で洗浄力が優れている

照射イメージ



POINT

超音波振動数:43~47KHzで徹底的な洗浄力を実現

UV照射機能:260~280nmの波長で細菌の増殖を抑制



製品特長

- ・タイマー（3分、5分）で自動的に洗浄が終わります
- ・充電式（バッテリー容量：1000mAh）で、どこにでも持ち運べる
- ・UV照射により、細菌等の増殖を抑えられる



製品仕様

電源：USB Type-C / ポット容量：120 ml / 材質：外側 -ABS、内面 -SUS304 / 超音波振動数：43 ~ 47KHz / UV 波長：260 ~ 280 nm
保証期間：ご購入後より6ヶ月間

製造販売元

DentalBank®

DB カリエスハンター

デンタルバンク カリエスハンター

虫歯発見

プラーク発見

本体 1年保証

DB カリエスハンター

価格 40,000 (税別) 円

- ハンドピース (本体)
- ライトガイドロッド 90°
- ライトガイドロッド 120°
- バッテリー
- 充電器 (USB ケーブル付)
- AC アダプター
- 防護メガネ
- 取扱説明書
- 保証書・保証規定



緑：健全歯



赤：う蝕部位

診療案内・ブラッシング指導に新提案

光って見えるから
患者様も安心・納得

説明しづらい虫歯や磨き残しを赤く光ってお知らせするからスムーズなご案内が可能になります。そのため面倒な歯垢染色剤や、う蝕検知液のかわりに手軽にお使いいただけます。患者様への案内や治療の確認にマルチに活躍する1台です。

製品概要

機械器具 02 医療用照明器 一般医療機器 汎用歯科用照明器 (12351000)
届出番号: 40B1X10014000008

寸法 長さ: 182 mm (ライトガイドロッド装着時)
幅: 15.0 mm (最大径)

質量 84.7 g (ライトガイドロッドおよびバッテリーを含む)

作動電圧 DC 3.7 V

光源 LED (class 1 LED 製品)

波長域 約 400 nm

バッテリー リチウムイオン電池

充電時間 約 1.5 時間 (フル充電時)

電源 AC 100~240 V (50/60 Hz)

同梱書類 日本語取扱説明書
クイックスタートガイド



専用スリーブ (別売品)

ウイルス感染予防対策にお役立てください。
1箱 500 枚入り。



JAPAN DENTAL SUPPLY

株式会社 日本歯科商社 ジーシーグループ

東京 本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪 支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州 営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

DB レシプロハンドピース

recipro - handpiece



本体 1年保証

高耐久性

低振動 静音設計



コストパフォーマンス
モデル



DB レシプロケーションタイプハンドピースは研削部位に応じて自由に研削バーの方向を変えることが可能です。
1：1のハンドピースと比べ低振動なので患者様への負担が軽減されます。

DB レシプロハンドピース 価格 39,000 (税別) 円

- ハンドピース本体
- プッシュピン
- 注油用アダプタ
- 取扱説明書・保証書

入力回転数(最大)	10000rpm
ストローク	1.34mm
減速比	4：1
推奨バー	DB スライサー
動作温度	+10℃～+40℃
動作湿度	≤80%RH

IPR Tools DBスライサー

届出番号 40B1X10014000019 歯科研削用ストリップ

価格 1個
1,500 (税別) 円

砥粒径3種よりお選びください (25 μm・40 μm・60 μm)



※パッケージは予告なく変更される場合があります

ご注文の際は下記をご記入後お取引ディーラー様に本用紙をお渡しください

ご氏名	フリガナ	医院様名	フリガナ
ご住所	〒	ご連絡先	TEL・mobile
		e-mail	@
DB レシプロハンドピース	<input type="text"/> 個	DBスライサー-25 μm	<input type="text"/> 個
		DBスライサー-40 μm	<input type="text"/> 個
		DBスライサー-60 μm	<input type="text"/> 個

取扱店


製造販売元



株式会社 DentalBank 第1種医療機器製造販売業
福岡県大野城市大池 2-26-1

TEL: 092-513-3280 FAX: 092-513-3281 www.dentalbank.info

2025年2月

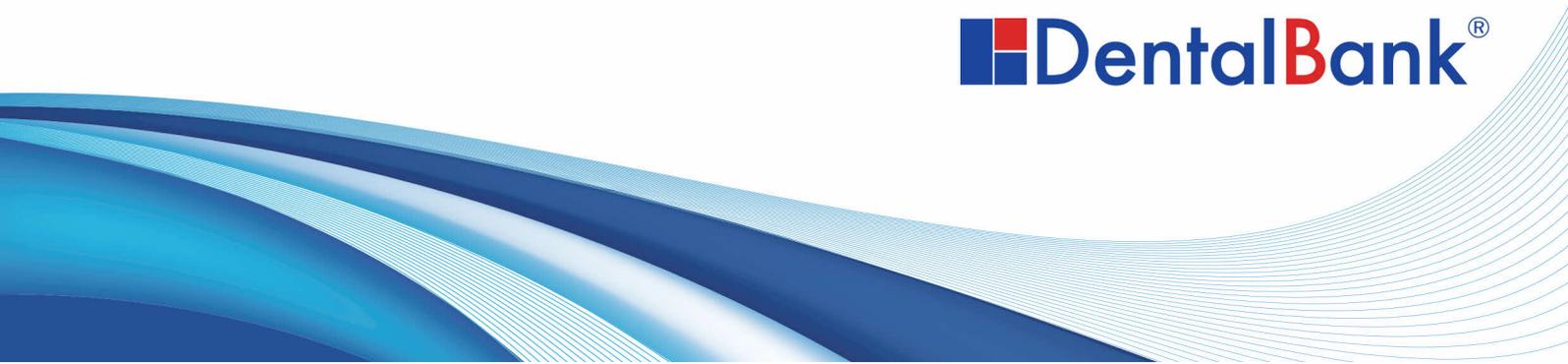

 **DentalBank**[®]